

Invacare® P409 Asteria

en	Walking frame User Manual	2
da	Ganghjælpemiddel Brugsanvisning	5
fi	Kävelyteline Käyttöohje	9
no	Gåstol Bruksanvisning	12
sv	Gåram Bruksanvisning	16
de	Gehgestell Gebrauchsanweisung	20
es	Caminador Manual del usuario	24
fr	Déambulateur Manuel d'utilisation	28
it	Telaio per deambulazione Manuale d'uso	32
nl	Looprek Gebruiksaanwijzing	35
pt	Andadeira Manual de utilização	39
hr	Stalak za hodanje Upute za uporabu	43
ro	Cadru pentru mers Instrucțiuni de folosire	47



This manual MUST be given to the user of the product.
BEFORE using this product, this manual MUST be read and saved for future reference.



Yes, you can.®

1 General

1.1 Introduction

This user manual contains important information about the handling of the product. To ensure safety when using the product, read the user manual carefully and follow the safety instructions.

Invacare reserves the right to alter product specifications without further notice.

Before reading this document, make sure you have the latest version. You find the latest version as a PDF on the Invacare website.

If you find that the font size in the printed document is difficult to read, you can download the PDF version from the website. The PDF can then be scaled on screen to a font size that is more comfortable for you.

In case of a serious incident with the product, you should inform the manufacturer and the competent authority in your country.

1.2 Symbols in this Document

Symbols and signal words are used in this document and apply to hazards or unsafe practices which could result in personal injury or property damage. See the information below for definitions of the signal words.



WARNING

Indicates a hazardous situation that could result in serious injury or death if it is not avoided.



CAUTION

Indicates a hazardous situation that could result in minor or slight injury if it is not avoided.



NOTICE

Indicates a hazardous situation that could result in damage to property if it is not avoided.



Tips and Recommendations

Gives useful tips, recommendations and information for efficient, trouble-free use.

Other Symbols

(Not applicable for all manuals)



UK Responsible Person

Indicates if a product is not manufactured in the UK.



Triman

Indicates recycling and sorting rules (only relevant for France).

1.3 Compliance

Quality is fundamental to the company's operation, working within the disciplines of ISO 13485.

This product features the CE mark, in compliance with the Medical Device Regulation 2017/745 Class I.

We are continuously working towards ensuring that the company's impact on the environment, locally and globally, is reduced to a minimum.

We only use REACH compliant materials and components.

1.4 Service Life

The expected service life of this product is five years when used daily and in accordance with the safety instructions,

maintenance intervals and correct use, stated in this manual. The effective service life can vary according to frequency and intensity of use.

1.5 Warranty Information

We provide a manufacturer's warranty for the product in accordance with our General Terms and Conditions of Business in the respective countries.

Warranty claims can only be made through the provider from whom the product was obtained.

1.6 Limitation of Liability

Invacare accepts no liability for damage arising from:

- Non-compliance with the user manual
- Incorrect use
- Natural wear and tear
- Incorrect assembly or set-up by the purchaser or a third party
- Technical modifications
- Unauthorised modifications and/or use of unsuitable spare parts

2 Safety

2.1 General Safety Information



WARNING!

Risk of Serious Injury or Damage

Improper use of this product may cause injury or damage.

- If you are unable to understand the warnings, cautions or instructions, contact a health care professional or provider before attempting to use this equipment.
- Do not use this product or any available optional equipment without first completely reading and understanding these instructions and any additional instructional material such as user manual, service manual or instruction sheet supplied with this product or optional equipment.



WARNING!

Risk of Serious Injury

Incorrect use can lead to hazardous situations.

- Do not use the product on stairs or on escalators.
- Do not stand on the product.
- Be careful when walking on sloping or slippery ground or uneven surfaces.
- Avoid walking against obstacles, both forwards and backwards.
- Do not let children play with the product
- Do not sit on the crossbar or use the crossbar as support.



WARNING!

Risk of Injury

Unbalanced or heavy load may lead to overturning

- Do not hang any loads, such as bags, to the frame.

**CAUTION!****Risk of Injury**

Non-original or wrong parts may affect the function and safety of the product.

- Only use original parts for the product in use.
- Due to regional differences, refer to your local Invacare catalogue or website for available options or contact your Invacare distributor. See addresses at the end of this document.

**CAUTION!****Risk of First-Degree Burns**

Parts of the product may heat up, when exposed to high temperatures (above 41° C).

- Be careful if the product is exposed to high temperatures, e.g., direct sunlight.

**NOTICE!**

There is a risk of damage due to wear, e.g., corrosion.

- Do not use the product under water, e.g., in pools.
- Do not use the product in hot areas like saunas.
- Do not store the product in wet or humid environments.

3 Product Overview

3.1 Intended use

The walking aid is intended to support during walking.

The walking aid is suitable for indoor and outdoor use on even ground.

The intended user is an adult with a maximum user weight as stated on the product label and in chapter 7 *Technical Data*, page 5.

3.2 Indications for Use

Indications

Persons with impaired muscle strength and/or balance, who need additional support while walking. The remaining walking and cognitive ability must be sufficient for safe use of a walking aid.

Contraindications

Persons with severe equilibrium disorders or functional perceptual disorders.

3.3 Labels and Symbols on the Product

Identification label

- (A) Product name
- (B) Part number
- (C) Date of manufacture
- (D) LOT number
- (E) Maximum user weight
- (F) Maximum width
- (G) Manufacturer address

Symbols

	European Conformity		Medical Device
	Manufacturer		Read user manual
	Date of manufacture		LOT number
	Maximum width		Maximum user weight
	Indoor / Outdoor use		

4 Usage

4.1 Before Use

**CAUTION!****Risk of Injury or Damage to Property**


- Before use, verify the general functionality of the product.
- Before use, check the product for any defect.
- Do not use a defective product.

Invacare presumes a healthcare professional has made an individual assessment of the user to determine his risk level or therapy requirements. Providers and carers have assessed that the product gives the required support and that its adjustments are appropriate for the user. Carer and user have been appropriately trained by a healthcare professional on how to use the product correctly and safely.

4.2 Folding and Unfolding

**NOTICE!****Discomfort/Minor bruises**

- Be careful of the pinching risk.

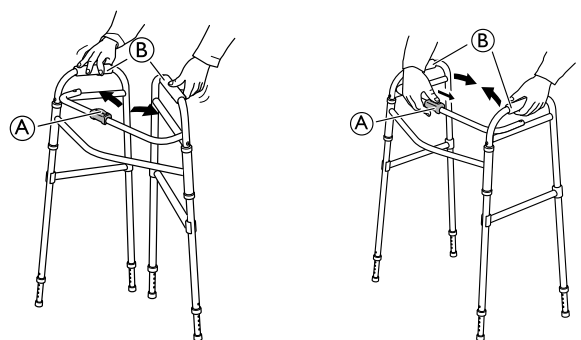**Unfolding to Operating Position**

1. Press the side frames (B) outwards until the locking mechanism (A) engages with a distinct “click”.
2. Try to press the side frames (B) inwards to make sure that the locking mechanism (A) is engaged.

Folding

1. Press down the locking mechanism (A) and fold the side frames (B) inwards.

4.3 Adjusting the height

! NOTICE!
Recommended height

- The handles should be positioned at wrist height when standing straight with relaxed arms. Therapist may suggest different heights depending on specific needs of the client.

! NOTICE!
Discomfort/Minor bruises

- Be careful of the pinching risk.



1. Press the snap button (A).
2. Slide the extension up or down until the desired height is achieved.
3. Allow the snap button (A) to click into the next hole. Make sure that the button is fully engaged with an audible “click”.

4.4 Walking

1. Stand between the two side frames and hold both hands on the handles.
2. Stand still and move/slide the walking aid forwards.
3. Take a step forward while holding the walking aid steady.

4.5 Using leg extensions

! WARNING!
Risk of falling

- When using wheeled attachments on the front legs, the rear leg extensions must be adjusted to make the side frames level.
- When applicable, wheeled leg extensions must be installed with the wheels on the outside of the walker walking frame.

i See section “Adjusting the height” for more information.

5 Maintenance

5.1 General Maintenance Information

! WARNING!
Risk of Injury

- Maintenance should be done at least once a year.
- Do not use a defective product.
- Do not attempt repairs yourself. For repairs contact your provider.

5.2 Inspection Checklist

To ensure good performance and safety, inspect your product regularly.

- Ensure that all screws and adjustments are properly tightened. (If applicable)
- Ensure that hand grips are tight. If hand grips are loose do not use the walking aid. Instructions on how to change hand grips can be obtained from your provider or Invacare distributor.

- Inspect the frame and loaded parts for cracks.
- Inspect the wheels’ tightness, wear and damage. (If applicable)
- Make sure that the wheels are free of hair, lint and other debris. (If applicable)
- Ensure that the rubber tips and/or plastic glide tips are not ripped, worn or missing. (If applicable)

5.3 Cleaning and Disinfection

General Safety Information



CAUTION!
Risk of Contamination

- Take precautions for yourself and use appropriate protective equipment.



NOTICE!

- Wrong fluids or methods can harm or damage the product.
- All cleaning agents and disinfectants used must be effective, compatible with one another and must protect the materials they are used to clean.
 - Never use corrosive fluids (alkalines, acid etc.) or abrasive cleaning agents. We recommend an ordinary household cleaning agent such as dishwashing liquid, if not specified otherwise in the cleaning instructions.
 - Never use a solvent (cellulose thinner, acetone etc.) that changes the structure of the plastic or dissolves the attached labels.
 - Always make sure that the product is completely dried before taking it into use again.



For cleaning and disinfection in clinical or long-term care environments, follow your in-house procedures.

Cleaning Intervals



NOTICE!

- Regular cleaning and disinfection enhance smooth operation, increases the service life and prevents contamination.
- Clean and disinfect the product:
- regularly while in use,
 - before and after any service procedure,
 - when it has been in contact with any body fluids,
 - before using it for a new user.

Cleaning Instructions

The product can be cleaned in a washing machine or by hand.

When using a high-pressure cleaner or an ordinary jet of water, do not aim the jet towards bearings, draining holes or labels.


The maximum cleaning temperature is 60 °C. Do not use a steam cleaner.

1. Clean the walking aid with a damp cloth and mild detergent.
2. Clean the wheels with a brush (no wire brush).
3. After cleaning, wipe the product dry.

Disinfection Instructions

In Domestic Care

- Disinfectant: We recommend using an alcohol-based surface disinfectant (with 70-90% alcohol).

 Read the instructions on the label of your disinfectant. It provides information on the activity spectrum (bacteria, fungi and/or viruses), material compatibility and the correct exposure time.

- Ensure the surfaces are cleaned before disinfection.
- Moisten a soft cloth and wipe-disinfect all accessible surfaces and keep them moistened for the exposure time stated on the label of the disinfectant.
- Allow the product to air-dry.

In Institutional Care

Follow your in-house disinfection procedures and only use the disinfectants and methods specified therein.

6 After Use

6.1 Disposal

Be environmentally responsible and recycle this product through your recycling facility at its end of life.

Disassemble the product and its components, so the different materials can be separated and recycled individually.

The disposal and recycling of used products and packaging must comply with the laws and regulations for waste handling in each country. Contact your local waste management company for information.

6.2 Reconditioning

This product is suitable for reuse. To recondition the product for a new user, carry out the following actions:

- Inspection
- Cleaning and disinfection


For detailed information, see *5 Maintenance, page 4*.

Make sure that the user manual is handed over with the product.

If any damage or malfunction is detected, do not reuse the product.

7 Technical Data

7.1 Dimensions and Weights

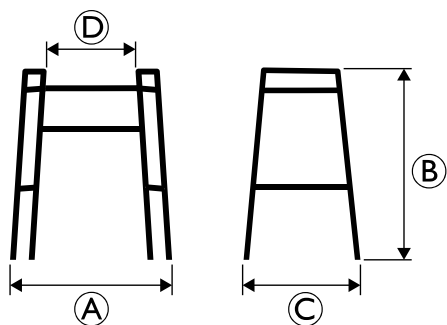

	P409 Asteria
Total width A	605–625 mm
Total height B	770–945 mm
Total depth C	440–465 mm
Width between handles D	440 mm

	P409 Asteria
Weight	3 kg
Max. user weight	135 kg

All dimensions are subject to certain tolerances.

7.2 Material

Frame	Anodized aluminium
Handgrips	TPE
Screws	Steel, rust protected

da

1 Generelt

1.1 Indledning

Denne brugsanvisning indeholder vigtige anvisninger om håndtering af produktet. Af sikkerhedsmæssige årsager, bør brugsanvisningen læses grundigt, og sikkerhedsanvisningerne følges.

Invacare forbeholder sig retten til at ændre produktspecifikationer uden forudgående varsel.

Før denne manual læses, skal det sikres, at det er den nyeste version. Den nyeste version findes i PDF-format på Invacares hjemmeside.

Hvis du synes, at skriftstørrelsen i det trykte dokument er svær at læse, kan du hente PDF-versionen fra hjemmesiden. PDF-versionen kan derefter skaleres på skærmen til en skriftstørrelse, der passer dig bedre.

I tilfælde af en alvorlig hændelse i forbindelse med produktet, skal du informere producenten og den relevante myndighed i dit land.

1.2 Symboler i dette dokument

I dette dokument anvendes symboler og signalford til angivelse af faresituationer eller u hensigtsmæssig anvendelse, som kan medføre person- eller produktskader. Se oplysningerne nedenfor for at få en definition af symbolerne.



ADVARSEL

Angiver en potentielt farlig situation, som kan resultere i alvorlig kvæstelse eller dødsfald, hvis den ikke undgås.



FORSIGTIG

Angiver en potentielt farlig situation, som kan resultere i en mindre eller lille kvæstelse, hvis den ikke undgås.



BEMÆRK

Angiver en potentielt farlig situation, som, hvis den ikke undgås, kan resultere i beskadigelse af ejendom.



Tips og anbefalinger

Giver nyttige tips, anbefalinger og oplysninger, der sikrer en effektiv, problemfri anvendelse.

Andre symboler

(Ikke relevant for alle brugsanvisninger)



Ansvarshavende i Storbritannien
Angiver, om et produkt er fremstillet i Storbritannien eller ej.



Triman
Angiver reglerne for genanvendelse og sortering i Frankrig.

1.3 Overensstemmelse

Kvalitet er afgørende for virksomhedens virke, og vi arbejder ud fra ISO 13485.

Dette produkt er CE-mærket i overensstemmelse med forordningen 2017/745 om medicinsk udstyr i klasse I.

Vi arbejder løbende på at sikre, at virksomhedens påvirkning af miljøet, lokalt og globalt, reduceres til et minimum.

Vi anvender udelukkende materialer og komponenter, der overholder REACH-direktivet.

1.4 Servicelevetid

Den forventede servicelevetid for dette produkt er fem år, når det anvendes dagligt og i overensstemmelse med sikkerhedsanvisningerne, vedligeholdelsesintervallerne og den korrekte brug, der fremgår af denne brugsanvisning. Den effektive servicelevetid kan variere afhængigt af hyppighed og intensitet af brugen.

1.5 Garantioplysninger

Vi yder en producentgaranti på produktet i overensstemmelse med vores almindelige forretningsbetingelser og vilkår i de respektive lande.

Der kan kun rejses garantikrav gennem den forhandler, som produktet er købt hos.

1.6 Ansvarsbegrænsning

Invacare påtager sig ikke ansvaret for skader, der skyldes:

- Manglende overholdelse af brugsanvisningen
- Forkert anvendelse
- Almindeligt slid
- Forkert samling eller indstilling foretaget af køber eller en tredjepart
- Tekniske ændringer
- Uautoriserede ændringer og/eller brug af uegnede reservedele

2 Sikkerhed

2.1 Generelle sikkerhedsanvisninger



ADVARSEL!

Risiko for alvorlig kvæstelse eller materiel skade

Forkert brug af dette produkt kan medføre personskade eller materiel skade.

- Hvis du ikke kan forstå advarslerne, forsigtighedshenvisningerne eller anvisningerne, bedes du kontakte en sundhedsprofessionel medarbejder eller leverandør, inden du forsøger at tage produktet i brug.
- Undlad at bruge dette produkt eller nogen former for ekstraudstyr uden først at have læst og forstået denne vejledning og andet instruktionsmateriale som f.eks. brugsanvisningen, servicemanualer eller instruktionsblade, der leveres sammen med dette produkt eller ekstraudstyret.



ADVARSEL!

Risiko for alvorlig kvæstelse

Forkert brug kan føre til farlige situationer.

- Undgå at bruge produktet på trapper eller rulletrapper.
- Stå ikke på produktet.
- Vær forsigtig, når du går på skrånende eller glat terræn eller ujævne overflader.
- Undgå at gå imod forhindringer, både fremad og bagud.
- Lad ikke børn lege med produktet
- Undlad at sidde på tværstangen eller bruge den som støtte.



ADVARSEL!

Risiko for personskade

Ubalanceret eller tung belastning kan medføre, at du vælter

- Hæng ikke genstande, fx tasker, på rammen.



FORSIGTIG!

Risiko for kvæstelser

Uoriginalt eller forkerte dele kan påvirke produktets funktion og sikkerhed.

- Brug kun originale dele til det produkt, der anvendes.
- På grund af regionale forskelle henvises der til dit lokale Invacare-katalog eller Invacare-hjemmesiden angående det tilgængelige ekstraudstyr. Ellers kan du kontakte din lokale Invacare-repræsentant. Adresserne findes i slutningen af dette dokument.



FORSIGTIG!

Risiko for førstegradsforbrændinger

Dele af produktet kan blive varme, hvis de udsættes for høje temperaturer (over 41 °C).

- Vær forsigtig, hvis produktet udsættes for høje temperaturer, fx direkte sollys.



BEMÆRK!

Der er risiko for beskadigelse på grund af slitage, f. eks. korrosion.

- Undlad at bruge produktet under vand, fx i svømmebassiner.
- Brug ikke produktet i varme omgivelser som fx saunaer.
- Produktet må ikke opbevares i våde eller fugtige omgivelser.

3 Produktoversigt

3.1 Tiltænkt anvendelse

Ganghjælpemidlet er beregnet til yde støtte under gang.

Ganghjælpemidlet er egnet til indendørs og udendørs brug på jævnt underlag.

Den tiltænkte bruger er et voksent menneske med en maksimal brugervægt som anført på produktmærkaten og i afsnittet 7 *Tekniske Data*, side 9.

3.2 Indikationer for brug

Indikationer


Personer med nedsat muskelstyrke og/eller balance, som har brug for ekstra støtte, mens de går. Brugerens restgangevne og kognitive evne skal være tilstrækkelig til sikker brug af et ganghjælpemiddel.

Kontraindikationer

Personer med alvorlige balanceforstyrrelser eller funktionel svækkelse af opfattelsesevnen.

3.3 Mærkater og symboler på produktet

Produktmærkat

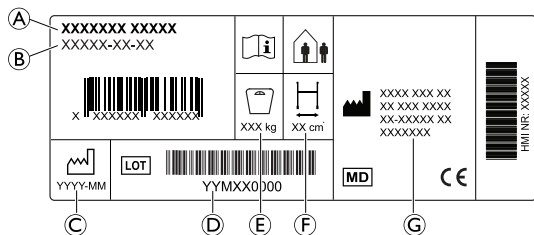

- (A) Produktnavn
- (B) Delnummer
- (C) Produktionsdato
- (D) Partinummer
- (E) Maksimal brugervægt
- (F) Maksimal bredde
- (G) Producentens adresse

Symboler

	Overholdelse af EU-krav		Medicinsk udstyr
	Producent		Læs brugsanvisning
	Fremstillingsdato		LOT-nummer
	Maksimal bredde		Maks. brugervægt
	Indendørs/udendørs brug		

4 Brug

4.1 Før brug



FORSIGTIG!

Risiko for personskade eller produktskade

- Kontrollér, at produktet fungerer normalt, før det tages i brug.
- Kontrollér produktet for fejl, før det tages i brug.
- Brug ikke et defekt produkt.

Invacare går ud fra, at en sundhedsprofessionel har vurderet brugeren med henblik på vedkommendes risikoniveau eller behov for behandling. Både sundhedsudbydere og plejere har vurderet, at produktet yder den nødvendige støtte, og at dets indstillinger er passende for brugeren. Plejeren og brugeren er blevet oplært af en sundhedsprofessionel i korrekt og sikker brug af produktet.


4.2 Sammenklapning og udklaping



BEMÆRK!

Ubehag/mindre blå mærker

- Vær forsigtig overfor klemmerisiko.

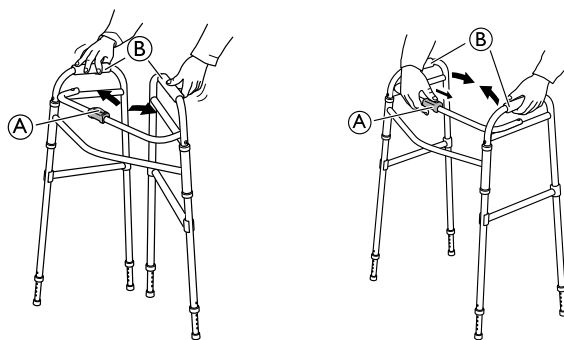

Udklaping til køreposition

1. Tryk siderammerne (B) udad, der høres et tydeligt klik fra låsemekanismen (A).
2. Prøv at trykke siderammerne (B) indad for at sikre, at låsemekanismen (A) er aktiveret.

Sammenklapning

1. Tryk låsemekanismen (A) ned, og fold siderammerne (B) indad.

4.3 Højdeindstilling



BEMÆRK!

Anbefalet højde

- Håndtagene bør placeres i højde med håndleddene når brugeren står i en ret positur med afslappede arme. Terapeuten kan foreslå forskellige højder afhængigt af kundens specifikke behov.



BEMÆRK!

Ubehag/mindre blå mærker

- Vær forsigtig overfor klemmerisiko.



1. Tryk på fjederknappen (A).
2. Skub forlængelsen op eller ned, indtil den ønskede højde er opnået.
3. Lad fjederknappen (A) klikke sig fast i det næste hul. Sørg for, at knappen er gået i hak med et hørbart "klik".

4.4 Gang

1. Stå mellem de to siderammer, og hold begge hænder på håndtagene.
2. Stå stille, og bevæg/skub ganghjælpermidlet fremad.
3. Tag et skridt fremad, mens du holder ganghjælpermidlet stabilt.

4.5 Brug af benforlængelser



ADVARSEL!

Risiko for at falde

- Ved brug af hjulbeslag på forbenene, skal de bageste benforlængelser justeres for at siderammerne er på samme niveau.
- Når det er relevant, skal hjulbenforlænger monteres med hjulene på ydersiden af gangstativet.



Se afsnittet "Justering af højden" for mere information.

5 Vedligeholdelse

5.1 Oplysninger om generel vedligeholdelse



ADVARSEL!

Risiko for personskade

- Der skal som minimum foretages vedligeholdelse en gang om året.
- Brug ikke et defekt produkt.
- Forsøg ikke selv at reparere gangstativet. Kontakt din leverandør, hvis du har brug for reparation.

5.2 Kontrolliste for eftersyn

For at sikre god ydeevne og sikkerhed, skal du tjekke dit produkt jævnligt.

- Sørg for, at alle skruer og fastgørelseskomponenter er spændt rigtigt. (Hvis relevant)
- Sørg for, at håndgrebene er strammet. Hvis håndgrebet er løst, må du ikke bruge ganghjælpemidlet. Oplysninger om hvordan håndgrebene udskiftes kan fås hos din leverandør eller Invacare-forhandler.
- Kontrollér rammen og de belastede dele for revner.
- Kontrollér om hjulene er spændt, og om der er slitage og skader. (Hvis relevant)
- Sørg for at holde hjulene fri for hår, fnuller og andre fremmedlegemer. (Hvis relevant)
- Sørg for, at dupskoene og/eller plastglidedupperne ikke er revnede, slidte eller mangler. (Hvis relevant)

5.3 Rengøring og desinficering

Generelle sikkerhedsanvisninger



FORSIGTIG!

Risiko for kontaminering

- Tag forholdsregler, og brug passende beskyttelsesudstyr.



BEMÆRK!

- Forkerte væsker eller metoder kan beskadige produktet.
- De anvendte rengørings- og desinfektionsmidler skal være effektive og kunne anvendes sammen, og de må ikke angribe de materialer, der rengøres.
 - Brug aldrig korroderende væsker (basiske rengøringsmidler, syre osv.) eller slibende rengøringsmidler. Vi anbefaler et almindeligt husholdningsrengøringsmiddel som f.eks. opvaskesæbe, hvis der ikke angives andet i rengøringsanvisningerne.
 - Brug aldrig opløsningsmidler (cellulosefortynder, acetone osv.), der ændrer plastens struktur eller opløser de påsatte mærkater.
 - Sørg altid for, at produktet er helt tørt, før det tages i brug igen.



For rengøring og desinfektion i kliniske omgivelser eller omgivelser til langvarig pleje skal de pågældende interne procedurer følges.

Rengøringsintervaller



BEMÆRK!

Regelmæssig rengøring og desinficering fremmer problemfri drift, forlænger servicelevetiden og forebygger kontaminering.

Rengør og desinficer produktet:

- Regelmæssigt, mens det er i brug,
- før og efter enhver serviceprocedure,
- når det har været i kontakt med kropsvæsker,
- før det bruges til en ny bruger.

Rengøringsinstruktioner

Produktet kan rengøres i en vaskemaskine eller i hånden.

Hvis du bruger en højtryksrenser eller en almindelig vandstråle, må du ikke sigte mod lejer, drænhuller eller mærkater.

Den maksimale rengøringsstemperatur er 60 °C. Anvend ikke en damprenser.

1. Rengør ganghjælpemidlet med en fugtig klud og et mildt rengøringsmiddel.
2. Rengør hjulene med en børste (ikke en stålbørste).
3. Tør produktet af efter rengøring.

Desinficeringsinstruktioner

I hjemmepleje

- Desinficeringsmiddel: Vi anbefaler at bruge et alkoholbaseret overfladedesinfektionsmiddel (med 70-90 % alkohol).



Læs vejledningen på etiketten på dit desinfektionsmiddel. Den indeholder oplysninger om aktivitetsspektret (bakterier, svampe og/eller vira), materialekompatibilitet og den korrekte eksponeringstid.

1. Sørg for, at overfladerne rengøres før desinfektion.
2. Fugt en blød klud, og aftør/desinficer alle tilgængelige overflader, og hold dem fugtet i den eksponeringstid, der er angivet på desinfektionsmidlets etiket.
3. Lad produktet lufttørre.

I institutionel pleje

Følg din interne desinfektionsprocedurer, og brug kun de desinfektionsmidler og -metoder, der er anført heri.

6 Efter brug

6.1 Bortskaffelse

Vær miljøbevidst, og indlever dette produkt til genbrug på den lokale genbrugsstation, når dets levetid er opbrugt.

Skil produktet og dens komponenter ad, så de forskellige materialer kan adskilles og genbruges hver for sig.

Bortskaffelse og genanvendelse af brugte produkter og emballagematerialer skal overholde love og forskrifter for affaldshåndtering i det enkelte land. Kontakt den lokale renovationsmyndighed for at få yderligere oplysninger.

6.2 Eftersyn

Dette produkt er egnet til brug flere gange. Følgende handlinger skal udføres i forbindelse med istandsættelse af produktet til en ny bruger:

- Eftersyn
- Rengøring og desinfektion


Se 5 Vedligeholdelse, side 8 for mere detaljerede oplysninger.

Sørg for, at brugsanvisningen bliver overdraget sammen med produktet.

Undlad at genbruge produktet, hvis der konstateres skader eller fejl.

7 Tekniske Data

7.1 Mål og vægt

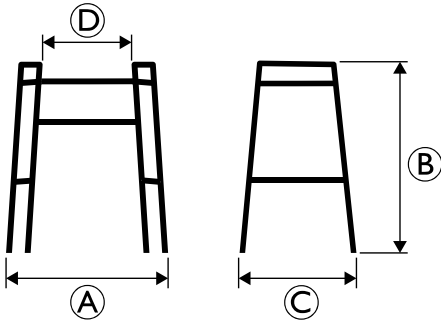

	P409 Asteria
Bredde i alt (A)	605-625 mm
Samlet højde (B)	770-945 mm
Samlet dybde (C)	440-465 mm
Bredde mellem håndtag (D)	440 mm
Vægt	3 kg
Maks. brugervægt	135 kg

Alle mål kan variere en smule.

7.2 Materiale

Ramme	Anodiseret aluminium
Håndgreb	TPE
Skruer	Stål, rustbeskyttede

1 Yleistä

1.1 Johdanto

Tämä käyttöopas sisältää tuotteen käsittelyä koskevia tärkeitä tietoja. Lue käyttöopas huolellisesti läpi ja noudata turvallisuusohjeita, jotta tuotteen käyttö olisi turvallista.

Invacare varaa oikeuden muuttaa tuotteiden teknisiä tietoja ilman erillistä ilmoitusta.

Varmista ennen asiakirjan lukemista, että käytössäsi on sen viimeisin versio. Viimeisin versio on saatavilla PDF-tiedostona Invacaren verkkosivuilta.

Jos painettu asiakirja on kirjasinkoon vuoksi vaikealukuinen, voit ladata verkkosivustosta PDF-version. PDF-tiedoston voi suurentaa näytössä helpommin luettavaan kokoon.

Jos tapahtuu vakava, tuotteeseen liittyvä onnettomuus, ilmoita valmistajalle ja maasi valtuutetulle viranomaiselle.

1.2 Tässä asiakirjassa käytetyt symbolit

Tässä asiakirjassa käytetään symboleja ja signaalisanoja, jotka viittaavat vaaroihin tai turvattomiin käytäntöihin, jotka saattavat aiheuttaa henkilö- tai omaisuusvahinkoja. Katso alta lisätietoja signaalisanojen määritelmästä.



VAROITUS

Osoittaa vaarallisen tilanteen, joka voi johtaa vakavaan vammaan tai kuolemaan, jos sitä ei vältetä.



HUOMIO

Osoittaa vaarallisen tilanteen, joka voi johtaa pieneen tai lievään vammaan, jos sitä ei vältetä.



HUOMAUTUS

Osoittaa mahdollisesti vaarallisen tilanteen. Jos sitä ei vältetä, se saattaa aiheuttaa omaisuusvahingon.



Vihjeet ja suositukset

Antaa hyödyllisiä vihjeitä, suosituksia ja tietoa tehokkaasta ja ongelmattomasta käytöstä.

Muut symbolit

(Ei koske kaikkia oppaita)



Yhdistyneen kuningaskunnan vastuuhenkilö
Ilmoittaa, jos tuotetta ei ole valmistettu
Isossa-Britanniassa.



Triman

Ilmoittaa kierrätys- ja lajittelusäännöt (koskee vain Ranskaa).

1.3 Yhteensopivuus

Yhtiömme toiminnalle keskeistä on laatu, ja yhtiö noudattaakin ISO 13485 -standardin vaatimuksia.

Tässä tuotteessa on CE-merkki lääkintälaitteita koskevan asetuksen 2017/745 luokan I vaatimusten mukaisesti.

Pyrimme jatkuvasti varmistamaan, että yrityksen ympäristövaikutus on sekä paikallisesti että maailmanlaajuisesti mahdollisimman vähäinen.

Käytämme vain REACH-järjestelmän mukaisia materiaaleja ja osia.

1.4 Käyttöikä

Tämän tuotteen odotettavissa oleva käyttöikä on viisi vuotta, kun sitä käytetään päivittäin tässä oppaassa ilmoitettujen turvallisuusohjeiden ja käyttötarkoituksen mukaan. Tehokas käyttöikä voi vaihdella sen mukaan, miten usein ja voimakkaasti tuotetta käytetään.

1.5 Takuutiedot

Annamme valmistajan takuun tuotteelle yleisten liiketoimintaehtojemme mukaisesti vastaavissa maissa.

Takuuvaatimuksia voi tehdä vain sen myyjän kautta, jolta tuote ostettiin.

1.6 Rajoitettu vastuu

Invacare ei vastaa seuraavista johtuvista vahingoista:

- käyttöoppaan noudattamatta jättäminen
- väärä käyttö
- luonnollinen kuluminen
- ostajan tai kolmannen osapuolen toteuttama väärä kokoonpano tai asennus
- tekniset muutokset
- luvattomat muutokset ja/tai soveltumattomien varaosien käyttö.

2 Turvallisuus

2.1 Yleisiä turvallisuustietoja



VAROITUS!

Vakavan vamman tai vaurion vaara

Tämän tuotteen vääränlainen käyttö saattaa aiheuttaa vamman tai vahingon.

- Jos et ymmärrä varoituksia, huomautuksia tai ohjeita, ota yhteyttä terveydenhuollon ammattilaiseen tai toimittajaan ennen laitteen käyttämistä.
- Älä käytä tätä tuotetta tai siihen saatavilla olevia lisävarusteita ennen kuin olet lukenut kokonaan nämä ohjeet ja mahdolliset lisäohjeet, kuten käyttöopas, huolto-oppaat ja ohjelehtiset, jotka on toimitettu tämän tuotteen tai lisävarusteen mukana, ja ymmärtänyt ne.



VAROITUS!

Vakavan vamman vaara

Epäasianmukainen käyttö voi aiheuttaa vaarallisia tilanteita.

- Älä käytä tuotetta portaissa tai liukuportaissa.
- Älä seiso tuotteen päällä.
- Ole varovainen, kun kävelet kaltevilla, liukkaalla tai epätasaisella alustalla.
- Vältä esineisiin törmäämistä sekä eteen- että taaksepäin kuljettaessa.
- Älä anna lasten leikkiä tuotteella
- Älä istu poikkitangolla äläkä käytä sitä tukena.



VAROITUS!

Loukkaantumisvaara

Epätasapainoinen tai raskas kuorma voi saada apuvälineen kaatumaan.

- Älä ripusta mitään kuormia, kuten kasseja, apuvälineen runkoon.



HUOMIO!

Loukkaantumisvaara

Muut kuin alkuperäiset osat tai väärät osat voivat vaikuttaa tuotteen toimintaan ja turvallisuuteen.

- Käytä vain tuotteen alkuperäisiä osia.
- Katso alueellasi saatavilla olevat lisävarusteet paikallisesta Invacare-kuvastosta tai verkkosivustosta tai ota yhteyttä paikalliseen Invacare-edustajaan. Osoitteet ovat tämän asiakirjan lopussa.



HUOMIO!

Ensimmäisen asteen palovammojen vaara

Tuotteen osat voivat lämmetä, kun ne altistuvat korkeille lämpötiloille (yli 41 °C).

- Ole varovainen, jos tuote altistuu ääriämpötiloille, kuten suoralle auringonvalolle.



HUOMAUTUS!

Mahdollisesti vaurioita aiheuttavan kulumisen, kuten korroosion, vaara.

- Älä käytä tuotetta veden alla, esimerkiksi altaassa.
- Älä käytä tuotetta kuumissa tiloissa, esimerkiksi saunassa.
- Tuotetta ei saa säilyttää märissä tai kosteissa ympäristöissä.

3 Tuotteen yleiskuvaus

3.1 Käyttötarkoitus

Kävelytuki on tarkoitettu kävelyn apuvälineeksi.

Kävelytukea voi käyttää sekä sisätiloissa että ulkona tasaisessa maastossa.

Käyttötarkoituksen mukainen käyttäjä on aikuinen, ja hänen enimmäispainonsa ilmoitetaan tuotteen merkinnöissä ja luvussa 7 *Tekniset Tiedot, sivu 12*.

3.2 Käyttöaiheet

Käyttöaiheet


Lihastoimeltaan ja/tai tasapainoltaan heikentyneet henkilöt, jotka tarvitsevat lisätukea kävellessään. Jäljellä olevan kävelykyvyn ja kognitiivisten kykyjen on riitettävä kävelytelineen turvalliseen käyttöön.

Vasta-aiheet

Henkilöt, joilla on vaikeita tasapainohäiriöitä tai toiminnallisia havaintokyvyn häiriöitä.

3.3 Tuotteen merkinnät ja symbolit

Tietokilpi

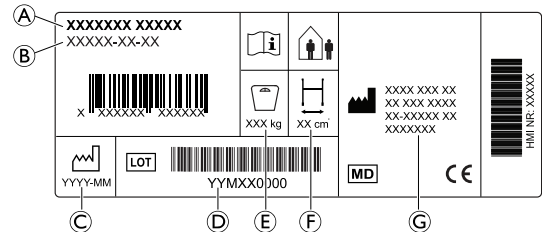

- A** Tuotteen nimi
- B** Osanumero
- C** Valmistuspäivä
- D** Eränumero

- E** Käyttäjän enimmäispaino
- F** Enimmäisleveys
- G** Valmistajan osoite

Symbolit

	Euroopan vaatimustenmukaisuus		Lääkinnällinen laite
	Valmistaja		Lue käyttöopas
	Valmistuspäivä		LOT-numero
	Enimmäisleveys		Käyttäjän enimmäispaino
	Sisä-/ulkokäyttöön		

4 Käyttö

4.1 Ennen käyttöä



HUOMIO!


Henkilövamman tai omaisuusvahingon vaara

- Ennen käyttöä varmista tuotteen yleinen toimivuus.
- Tarkista tuote ennen käyttöä vikojen varalta.
- Älä käytä viallista tuotetta.

Invacare olettaa, että terveydenhuollon ammattilainen on tehnyt yksilöllisen arvon käyttäjän riskitasosta ja hoidon vaatimuksista. Toimittajat ja hoitajat ovat arvioineet tuotteen antavan riittävää tukea ja soveltuvan säädöiltään käyttäjälle. Terveydenhuoltoalan ammattihenkilö on antanut hoitajalle ja käyttäjälle asianmukaiset ohjeet tuotteen oikeasta ja turvallisesta käytöstä.

4.2 Kokoontaittaminen ja avaaminen

- ! HUOMAUTUS!**
Epämukavuus / pieniä ruhjeita
 – Varo puristumista.

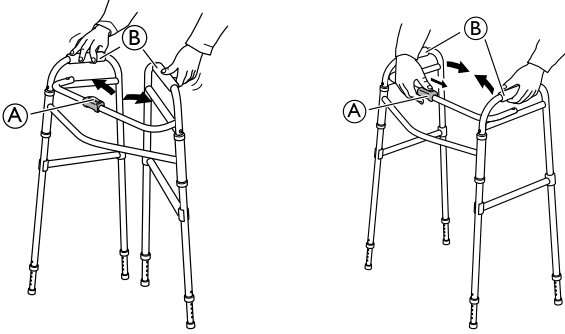

Avaaminen käyttöasentoon

1. Paina sivurunkoja® ulospäin, kunnes lukitusmekanismi (A) kytkeytyy ja kuuluu napsahdus.
2. Yritä painaa sivurunkoja (B) sisäänpäin varmistaaksesi, että lukitusmekanismi (A) on kytkeytynyt.

Kokoontaittaminen

1. Paina lukitusmekanismeja (A) alaspäin ja taita sivurungot (B) sisäänpäin.

4.3 Korkeuden säätäminen

- ! HUOMAUTUS!**
Suosittelun korkeus
 – Kahvat tulee asettaa ranteiden korkeudelle käyttäjän seistessä suorassa asennossa käsivarret rentoina. Fysioterapeutti voi ehdottaa eri kahvan korkeuksia asiakkaan erityistarpeiden perusteella.

- ! HUOMAUTUS!**
Epämukavuus / pieniä ruhjeita
 – Varo puristumista.



1. Paina painiketta (A).
2. Siirrä jatko-osaa ylös tai alas, kunnes korkeus on halutulla tasolla.
3. Anna painikkeen (A) napsahtaa seuraavaan reikään. Varmista, että painike on täysin kiinnittynyt siten, että siitä kuuluu napsahdus.

4.4 Kävely

1. Seiso sivurunkojen välissä ja pidä molemmilla käsillä kiinni kahvoista.
2. Seiso paikallasi ja siirrä/liu'uta kävelytukea eteenpäin.
3. Ota askel eteenpäin ja pidä kävelytukea paikallaan.

4.5 Jalkapidennysten käyttäminen



VAROITUS! Kaatumisvaara

- Kun käytät etujaloissa pyöriä, takajalkojen pidennyksiä täytyy säätää, jotta sivurungot ovat suorassa.
- Mahdolliset pyörälliset jalkapidennykset täytyy asentaa niin, että pyörät ovat kävelytelineen ulkopuolella.



Katso lisätietoa osasta Korkeuden säätäminen.

5 Huolto

5.1 Yleisiä huoltotietoja



VAROITUS! Loukkaantumisvaara

- Huolto tulee suorittaa vähintään kerran vuodessa.
- Älä käytä viallista tuotetta.
- Älä yritä korjauksen tekoa itse! Ota yhteyttä toimittajaan korjauksia varten.

5.2 Tarkistusluettelo

Hyvän suoritus- ja turvallisuustason säilyttämiseksi tarkista tuote säännöllisesti.

- Varmista, että kaikki ruuvit ja säätöruuvit ovat tiukasti kiinni. (Tarvittaessa.)
- Varmista, että kahvat ovat tiukalla. Älä käytä kävelytelinettä, jos kahvat ovat löysät. Ohjeita kahvojen vaihtamisesta on saatavilla toimittajaltasi tai Invacare-jälleenmyyjältä.
- Tarkista runko ja kuormitusosat murtumien varalta.
- Tarkista pyörien tiukkuus, kulumisaste ja mahdolliset vauriot. (Tarvittaessa.)
- Varmista, ettei pyörissä ole hiuksia, nukkaa tai muita epäpuhtauksia. (Tarvittaessa.)
- Varmista, etteivät kumipäät ja/tai muoviset liukupäät ole haljenneet, kuluneet tai pois paikaltaan. (Tarvittaessa.)

5.3 Puhdistaminen ja desinfiointi

Yleisiä turvallisuustietoja



HUOMIO! Kontaminaatoriski


- Ole varovainen tuotteen kanssa ja käytä asianmukaisia suojavarusteita.



HUOMAUTUS!

Väärät nesteet tai menetelmät voivat vahingoittaa tai vaurioittaa laitetta.

- Kaikkien käytettyjen puhdistusaineiden ja desinfiointiaineiden täytyy olla tehokkaita ja yhteensopivia toistensa kanssa, ja niiden täytyy suojata materiaaleja, joita niillä puhdistetaan.
- Syövyttäviä nesteitä (emäksiä, happoa jne.) tai hankaavia puhdistusaineita ei saa käyttää. On suositeltavaa käyttää tavallista kotitalouspuhdistusainetta, kuten astianpesuainetta, ellei puhdistusohjeissa ole muuta määriteltyä.
- Liuotinta (esim. selluloosaohenninta tai asetonia), joka muuttaa muovin rakennetta tai irrottaa kiinnitettyt merkinnät, ei saa käyttää.
- Varmista aina, että laite on täysin kuiva, ennen kuin se otetaan uudelleen käyttöön.

-  Noudata kliinisissä tai pitkäaikaisissa hoitoympäristöissä laitoksen puhdistusta ja desinfiointia koskevia käytäntöjä.

Puhdistusvälit



HUOMAUTUS!

Säännöllinen puhdistaminen ja desinfiointi edistää sujuvaa toimintaa, pidentää käyttöikää ja estää kontaminaatioita.

Puhdista ja desinfioidu tuote:

- säännöllisesti sen ollessa käytössä
- ennen jokaista huoltotoimenpidettä ja sen jälkeen
- kun se on ollut kontaktissa ruumiinnesteisiin
- ennen sen käyttämistä uudelle käyttäjälle.

Puhdistusohjeet

Tuotteen voi puhdistaa pesukoneessa tai käsin.

Käytettäessä suurpaineista puhdistinta tai tavallista vesisuihkua älä suuntaa suihkua laakereita, poistoaukkoja tai merkintöjä kohti.

Korkein puhdistuslämpötila on 60 °C. Älä käytä höyrypesuria.

1. Puhdista kävelyteline kostealla liinalla ja miedolla puhdistusaineella.
2. Puhdista renkaat harjalla (ei metalliharjalla).
3. Pyyhi tuote kuivaksi puhdistamisen jälkeen.

Desinfiointiohjeet

Kotioiloissa

- Desinfiointiaine: Suosittelemme alkoholipohjaisen pintojen desinfiointiaineen käyttöä (70–90 % alkoholia)



Noudata desinfiointiaineen etikettiin merkittyjä ohjeita. Niissä on tietoja aineen vaikutusalueesta (bakteerit, sienet ja/tai virukset), yhteensopivuudesta eri materiaalien kanssa sekä oikeasta vaikutusajasta.

1. Varmista, että pinnat on puhdistettu ennen desinfiointia.
2. Kostuta pehmeä liina ja pyyhi desinfiointiainetta kaikkiin näkyviin pintoihin. Pidä pinnat kosteina desinfiointiaineen etiketissä mainitun vaikutusajan ajan.
3. Anna tuotteen kuivua ilmassa.

Laitoksissa

Noudata laitoksen desinfiointikäytäntöjä ja käytä vain niissä mainittuja desinfiointiaineita ja menetelmiä.

6 Käytön jälkeen

6.1 Hävittäminen

Suojele ympäristöä ja vie tuote käytön jälkeen paikalliseen kierrätyspisteeseen.

Pura tuote ja sen osat, jotta eri materiaalit voidaan erotella ja kierrättää erikseen.

Käytettyjen tuotteiden ja pakkausten hävittämisessä ja kierrättämisessä on noudatettava kunkin maan jätteiden käsittelyä koskevia lakeja ja asetuksia. Kysy tarkempia tietoja paikalliselta jätehuoltolaitoksesta.

6.2 Kunnostaminen

Tämä tuote sopii käytettäväksi uudelleen. Toimi seuraavasti, kun tuotetta kunnostetaan uutta käyttäjää varten:

- Tarkistaminen
- Puhdistaminen ja desinfiointi


Lisätietoja on kohdassa 5 *Huolto*, sivu 11.

Varmista, että käyttöopas luovutetaan tuotteen mukana.

Jos vaurioita tai häiriöitä löytyy, älä käytä tuotetta uudelleen.

7 Tekniset Tiedot

7.1 Mitat ja painot

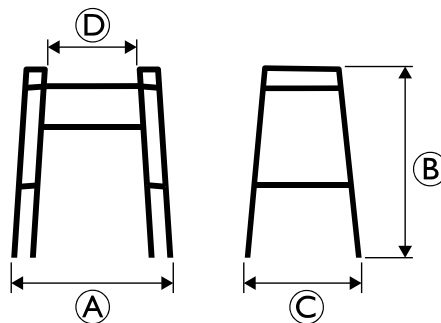

	P409 Asteria
Kokonaisleveys A	605–625 mm
Kokonaiskorkeus B	770–945 mm
Kokonaissyvyys C	440–465 mm
Kahvojen välin leveys D	440 mm
Paino	3 kg
Käyttäjän enimmäispaino	135 kg

Kaikkia mittoja koskevat tietyt toleranssit.

7.2 Materiaali

Runko	Elokoitua alumiinia
Kädensijat	TPE-muovia
Ruuvit	Ruostesuojattua terästä

no

1 Generell informasjon

1.1 Innledning

Denne bruksanvisningen inneholder viktig informasjon om hvordan produktet håndteres. Les bruksanvisningen nøye, og følg sikkerhetsinstruksjonene i den, slik at du kan bruke produktet på en trygg måte.

Invacare forbeholder seg retten til å endre produktspesifikasjoner uten forvarsel.

Før du leser dette dokumentet, må du forsikre deg om at du har den nyeste versjonen. Du finner den nyeste versjonen som en PDF-fil på Invacare-nettstedet.

Hvis skriftstørrelsen i den trykte versjonen av dokumentet er vanskelig å lese, kan du laste ned PDF-versjonen fra nettstedet. Deretter kan du skalere PDF-en, slik at skriftstørrelsen passer bedre for deg.

Dersom det skjer en alvorlig hendelse i tilknytning til produktet, bør du informere produsenten og de kompetente myndigheter i landet ditt.

1.2 Symboler i dette dokumentet

I dette dokumentet brukes bestemte symboler og varselsord for å angi farer eller utrygge fremgangsmåter som kan medføre personskade eller skade på eiendom. Nedenfor finner du definisjoner av disse symbolene.

**ADVARSEL**

Angir en farlig situasjon som kan føre til alvorlig personskade eller død dersom den ikke unngås.

**FORSIKTIG**

Angir en farlig situasjon som kan føre til lettere skade dersom den ikke unngås.

**LES DETTE**

Angir en risikofylt situasjon som kan føre til skade på materiell dersom den ikke unngås.

**Tips og anbefalinger**

Gir nyttige tips, anbefalinger og opplysninger når det gjelder effektiv og problemfri bruk.

Andre symboler

(Gjelder ikke alle håndbøker)



Ansvarlig UK angir om et produkt ikke er produsert i Storbritannia.

**Triman**

Angir resirkulerings- og sortereregler (gjelder bare for Tyskland).

1.3 Samsvar

Kvalitet er avgjørende for virksomheten til selskapet, som arbeider innenfor fagområdene i ISO 13485.

Dette produktet er CE-merket i samsvar med forordning 2017/745 om medisinsk utstyr klasse 1.

Vi arbeider kontinuerlig for å sikre at selskapets påvirkning på miljøet – både lokalt og globalt – reduseres til et minimum.

Vi bruker kun materialer og komponenter som er i samsvar med REACH-forskriftene.

1.4 Levetid

Produktets forventede levetid er fem år ved daglig bruk, gitt at produktet brukes i samsvar med sikkerhetsinstrukser, vedlikeholdsintervaller og informasjon om riktig bruk som er lagt frem i denne håndboken. Den faktiske levetiden varierer etter brukens hyppighet og intensitet.

1.5 Garantiopplysninger

Vi tilbyr en produsentgaranti for produktet i samsvar med våre generelle forretningsvilkår i det aktuelle landet.

Garantikrav kan bare rettes gjennom den aktuelle leverandøren av produktet.

1.6 Ansvarsbegrensning

Invacare erkjenner ikke ansvar for skade som skyldes:

- Manglende overholdelse av instruksjonene i bruksanvisningen
- Feil bruk
- Naturlig slitasje
- Feilmontering utført av kjøperen eller en tredjepart
- Tekniske endringer
- Endringer som ikke er godkjent, og/eller bruk av uegnede reservedeler

2 Sikkerhet**2.1 Generell sikkerhetsinformasjon****ADVARSEL!****Fare for alvorlig personskade eller skade på utstyr**

Feil bruk av produktet kan forårsake personskade og skade på utstyr.

- Hvis du har problemer med å forstå advarslene, forsiktighetsmeldingene eller instruksjonene, bør du ta kontakt med kvalifisert helsepersonell eller en leverandør eller teknisk personell før du forsøker å bruke dette utstyret.
- Du må ikke bruke dette produktet eller annet tilgjengelig ekstrautstyr hvis du ikke først har lest og forstått disse instruksjonene og eventuelt tilleggsmateriale, for eksempel bruksanvisninger, servicehåndbøker eller instruksjonsdokumenter som følger med dette produktet eller ekstrautstyr.

**ADVARSEL!****Risiko for alvorlig personskade**

Feil bruk kan føre til farlige situasjoner.

- Produktet skal ikke brukes på trapper eller i rulletrapper.
- Stå ikke på dette produktet.
- Utvis forsiktighet når du går i bratte eller glatte bakker og på ujevnt underlag.
- Unngå å gå mot hindringer, både forover og bakover.
- La ikke barn leke med produktet
- Ikke sitt på eller len deg mot tverrstangen.

**ADVARSEL!****Skaderisiko**

Ubalansert eller tung belastning kan føre til velt

- Ikke heng noen laster, for eksempel poser, på rammen.

**FORSIKTIG!****Skaderisiko**

Uoriginale eller uegnede deler kan gå ut over produktets virkemåte og sikkerhet.

- Bruk bare originale deler til det aktuelle produktet.
- På grunn av regionale forskjeller må du se etter tilgjengelig ekstrautstyr i den lokale Invacare-katalogen eller -nettstedet, eller du kan kontakte din lokale Invacare-representant. Se adresser nederst i dette dokumentet.

**FORSIKTIG!****Risiko for førstegradsforbrenning**

Produktkomponentene kan bli varmet opp hvis produktet utsettes for høye temperaturer (over 41 °C).

- Vær forsiktig hvis produktet utsettes for høye temperaturer, for eksempel direkte sollys.



LES DETTE!

Det er fare for skade på grunn av slitasje, for eksempel korrosjon.

- Ikke bruk produktet under vann, f.eks. i bassenger.
- Ikke bruk produktet i varme områder som badstuer.
- Produktet må ikke oppbevares i våte eller fuktige omgivelser.

3 Produktoversikt

3.1 Bruksområde

Hjelpemiddelet til å gå er ment for å støtte under gange.

Hjelpemiddelet til å gå er egnet for innendørs og utendørs bruk på jevne underlag.

Den tiltenkte brukeren er en voksen med en maksimal brukervekt som er angitt på produktetiketten og i kapittel 7 *Tekniske Data*, side 16.

3.2 Indikasjoner for bruk

Indikasjoner


Personer med nedsatt muskelstyrke og/eller balanseevne, som trenger ekstra støtte mens han/hun går. Brukerens gjenværende bevegelses- og kognitive funksjon må være tilstrekkelig til sikker bruk av et hjelpemiddel til å gå.

Kontraindikasjoner

Personer med alvorlige balansesykdommer eller funksjonelle persepsjonssykdommer.

3.3 Merking og symboler på produktet

Identifikasjonsmerke

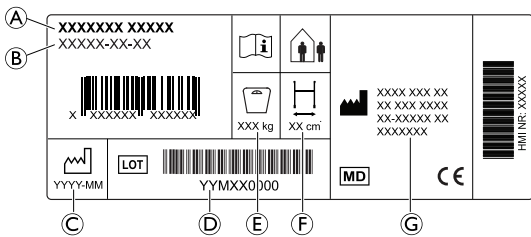

- (A) Produktnavn
- (B) Delenummer
- (C) Produksjonsdato
- (D) LOT nummer
- (E) Maksimal brukervekt
- (F) Maksimal bredde
- (G) Produsentens adresse

Symboler

	EU		Medisinsk utstyr
	Produsent		Les bruksanvisningen
	Produksjonsdato		LOT-nummer
	Maksimal bredde		Maksimal brukervekt
	Innendørs/utendørs bruk		

4 Bruk

4.1 Før bruk



FORSIKTIG!

Risiko for skade eller skade på eiendom

- Før bruk må den generelle funksjonaliteten til produktet verifiseres.
- Sjekk produktet for defekter før bruk.
- Bruk ikke et defekt produkt.

Invacare forutsetter at helsepersonell har foretatt en individuell vurdering av brukeren for å fastslå pasientens risikonivå og behandlingsbehov. Leverandører og pleiere har vurdert at produktet gir den nødvendige støtte og at justeringene er egnet for brukeren. Ledsageren og brukeren har fått ordentlig opplært av helsepersonell om riktig og sikker bruk av produktet.


4.2 Sammenfolding og oppsett



LES DETTE!

Ubehag / mindre skrubbsår

- Vær oppmerksom på klemfare.

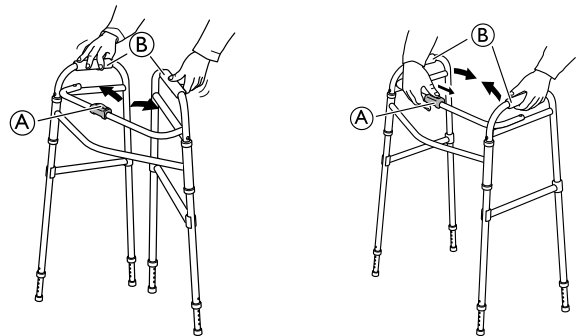

Sett opp til bruksposisjon

1. Press siderammene (B) utover, til låsen (A) klikker tydelig.
2. Forsøk å presse siderammene (B) innover for å sikre at låsen (A) er lukket.

Legge sammen

1. Skyv låsemekanismen nedover (A) og fold siderammene (B) innover.

4.3 Stille inn høyden



LES DETTE!

Anbefalt høyde



- Håndtakene skal plasseres i håndleddshøyde når du står oppreist med armene avslappet. Terapeut kan foreslå ulike høyder avhengig av de spesifikke behovene til klienten.





LES DETTE!

Ubehag / mindre skrubbsår

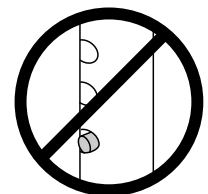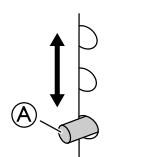- Vær oppmerksom på klemfare.



1. Trykk på knappen .
2. Beveg utvidelsen opp eller ned til ønsket høyde.
3. La knappen  klikke inn i det neste hullet. Sørg for at knappen plasseres riktig med et tydelig klikk.

4.4 Gå med hjelpemiddelet til å gå

1. Stå mellom de to siderammene og grip tak i håndtakene med begge hender.
2. Stå i ro og beveg/skyv hjelpemiddelet til å gå fremover.
3. Ta et skritt fremover med et stabilt grep om hjelpemiddelet til å gå.

4.5 Bruke benforlengelser



ADVARSEL!

Risiko for å falle

- Ved bruk av hjultilkoblinger på fremre bein må de bakre benforlengelsene justeres for å gjøre siderammene plane.
- Når det er aktuelt, må hjulbenforlengelser monteres med hjulene på utsiden av gangerammen.



Se delen "Justere høyden" for mer informasjon.

5 Vedlikehold

5.1 Generell vedlikeholdsinformasjon



ADVARSEL!

Skaderisiko

- Det bør utføres vedlikehold minst én gang i året.
- Bruk ikke et defekt produkt.
- Ikke utfør reparasjoner på egen hånd. Kontakt leverandøren din for reparasjoner.

5.2 Kontrollsjeckliste

Kontroller produktet regelmessig for å sikre god ytelse og sikkerhet.

- Kontroller at alle skruer og justeringsinnretninger er forsvarlig strammet. (Hvis relevant)
- Kontroller at håndtakene er stramme. Hvis håndtakene er løse, skal ikke hjelpemiddelet til å gå brukes. Instruksjoner om hvordan du endrer håndtakene kan fås fra leverandør eller Invacare forhandler.
- Inspiser rammen og de pålastede delene for sprekker.
- Kontroller med jevne mellomrom at hjulene er godt festet, og at de ikke viser tegn på slitasje eller skader. (Hvis relevant)
- Kontroller at hjulene er fri for hår, lo og annet rusk. (Hvis relevant)
- Pass på at gummituppene og/eller plasttuppene ikke er skrapet opp, er slitte eller mangler. (Hvis relevant)

5.3 Rengjøring og desinfisering

Generell sikkerhetsinformasjon



FORSIKTIG!

Risiko for kontaminering

- Ta dine egne forholdsregler og bruk passende verneutstyr.



LES DETTE!

Feil væsker eller metoder kan skade eller ødelegge produktet.

- Alle rengjørings- og desinfeksjonsmidler må være av god kvalitet og kompatible med hverandre. I tillegg må de beskyttede materialene de skal rengjøre.
- Bruk aldri etsende væsker (baser, syrer osv.) eller slipende rengjøringsmidler. Vi anbefaler et vanlig rengjøringsmiddel for husholdning som for eksempel oppvaskmiddel hvis ikke noe annet er spesifisert i rengjøringsanvisningene.
- Bruk aldri et løsemiddel (cellulosefjernere, aceton etc.) som forandrer plastens struktur eller får etikettene til å løsne.
- Pass alltid på at produktet er helt tørt før det tas i bruk igjen.



For rengjøring og desinfeksjon i kliniske omgivelser eller ved langvarig pleie, gjelder institusjonelle retningslinjer for hygiene.

Rengjøringshyppighet



LES DETTE!

Regelmessig rengjøring og desinfeksjon bidrar til problemfri bruk, lenger levetid og forhindrer kontaminering.

Rengjør og desinfiser produktet

- regelmessig mens det er i bruk
- før og etter enhver serviceprosedyre
- når det har vært i kontakt med enhver type kroppsvæske
- før det brukes på en ny bruker

Rengjøringsanvisninger

Produktet kan vaskes i vaskemaskin eller for hånd.

Når du bruker en høytrykkspyler eller en vanlig vannstråle, ikke sikt strålen mot lagrene, dreneringshullene eller etikettene.

Maksimal vasketemperatur er 60 °C. Ikke bruk en damprenser.

1. Rengjør hjelpemiddelet til å gå med en fuktig klut og mild såpe.
2. Rengjør hjulene med en børste (ikke stålbørste).
3. Tørk produktet med en klut etter vask.

Instrukser for desinfisering

I hjemmet

- Desinfiseringsmiddel: Vi anbefaler bruk av et alkoholbasert overflatedesinfeksjonsmiddel (med 70–90 % alkohol).



Les instruksjonene på etiketten til desinfeksjonsmiddelet. Den gir informasjon om aktivitetsspekteret (bakterier, sopp og/eller virus), materialkompatibilitet og riktig eksponeringstid.

1. Sørg for at overflatene rengjøres før desinfisering.
2. Fukt en myk klut og tørk – desinfiser alle tilgjengelige overflater, og hold dem fuktet for eksponeringstiden som er angitt på etiketten til desinfeksjonsmiddelet.
3. La produktet lufttørke.

På institusjoner

Følg de interne desinfiseringsprosedyrer, og bruk bare de desinfeksjonsmidlene og metodene som er angitt der.

6 Etter bruk

6.1 Avfallshåndtering

Vi ber deg vise miljøansvar og levere dette produktet til en lokal gjenvinningsstasjon ved endt brukstid.

Demonter produktet og dets komponenter, slik at de ulike materialene kan sorteres og gjenvinnes hver for seg.

Kassering og gjenvinning av brukte produkter og emballasje må overholde lovene og forskriftene for avfallshåndtering i hvert land. Ytterligere informasjon får du hos det lokale renovasjonsselskapet.

6.2 Overhaling

Dette produktet er egnet for gjenbruk. Utfør følgende punkter når produktet skal overhales og overføres til en ny bruker:

- Kontroll
- Rengjøring og desinfisering


For detaljert informasjon, se 5 Vedlikehold, side 15.

Sørg for at bruksanvisningen overleveres sammen med produktet.

Hvis det oppdages skade eller feil, må du ikke bruke produktet på nytt.

7 Tekniske Data

7.1 Mål og vekt

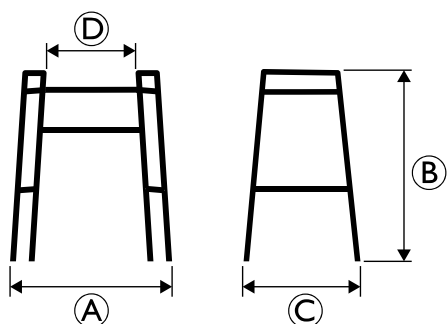

	P409 Asteria
Total bredde A	605–625 mm
Full høyde B	770–945 mm
Full dybde C	440–465 mm
Bredde mellom håndtak D	440 mm
Vekt	3 kg
Maks. brukervekt	135 kg

Alle mål forutsetter en viss robusthet.

7.2 Materiale

Ramme	Anodisert aluminium
Håndtak	TPE
Skruer	Stål, rustbeskyttet

1 Allmänt

1.1 Inledning

Den här bruksanvisningen innehåller viktig information om hantering av produkten. Läs igenom bruksanvisningen noga och följ säkerhetsinstruktionerna för att försäkra dig om att du använder produkten på ett säkert sätt.

Invacare förbehåller sig rätten att ändra produktspecifikationerna utan ytterligare meddelande.

Kontrollera att du har den senaste versionen av den här bruksanvisningen innan du läser den. Du hittar den senaste versionen som PDF-fil på Invacares webbplats.

Om du tycker att teckensnittstorleken i den tryckta versionen av bruksanvisningen är svår att läsa kan du ladda ned PDF-versionen från webbplatsen. Du kan sedan förstora PDF-filen på skärmen till en teckensnittstorlek som passar dig bättre.

Om en allvarlig incident inträffar med produkten bör du informera tillverkaren och den behöriga myndigheten i ditt land.

1.2 Symboler som används i dokumentet

Symboler och signalord som används i detta dokument och gäller för faror eller farliga förfaranden som kan leda till personskador eller materiella skador. Symbolerna definieras nedan.



VARNING

Anger en riskfylld situation som kan leda till allvarlig skada eller dödsfall om den inte undviks.



FÖRSIKTIGT

Anger en riskfylld situation som kan leda till lättare skada om den inte undviks.



OBS!

Anger en riskfylld situation som kan leda till skada på egendom om den inte undviks.



Tips och rekommendationer

Ger användbara råd, rekommendationer och information för en effektiv och problemfri användning.

Andra symboler

(Gäller ej alla bruksanvisningar)



Ansvarig person i Storbritannien.

Symbolen anger om produkten inte är tillverkad i Storbritannien.



Triman

Anger regler för återvinning och sortering (gäller endast Frankrike).

1.3 Överensstämmelse

Kvalitet är absolut grundläggande för företagets verksamhet, och vi arbetar i enlighet med standarden ISO 13485.

Den här produkten är CE-märkt i enlighet med den medicintekniska förordningen (MDR) 2017/745 klass 1.

Vi arbetar ständigt på att se till att företaget påverkar lokal och global miljö så lite som möjligt.

Vi använder endast material och komponenter som följer REACH-direktivet.

1.4 Produktlivslängd

Denna produkts förväntade livslängd är fem år när den används dagligen i enlighet med de säkerhetsinstruktioner, underhållsintervall och korrekt användning som anges i denna bruksanvisning. Den faktiska livslängden kan variera beroende på hur mycket och intensivt produkten används.

1.5 Information om garanti

Vi tillhandahåller en tillverkargaranti för produkten i enlighet med våra allmänna affärsvillkor i respektive land.

Garantianspråk kan endast göras genom den leverantör som tillhandahöll produkten.

1.6 Ansvarsbegränsning

Invacare ansvarar inte för skador som uppkommer till följd av

- att bruksanvisningen inte följs
- felaktig användning
- normalt slitage
- felaktig montering eller inställning som utförs av köparen eller tredje part
- tekniska ändringar
- obehöriga ändringar och/eller användning av olämpliga reservdelar.

2 Säkerhet

2.1 Allmän säkerhetsinformation



WARNING!

Risk för allvarliga personskador eller materiella skador

Felaktig användning av den här produkten kan orsaka person- eller saksador.

- Om du inte kan förstå varningarna eller instruktionerna ska du kontakta hälso- eller sjukvårdspersonal eller leverantören innan du använder utrustningen.
- Använd inte produkten eller någon tillvalsutrustning innan du har läst och förstått de här instruktionerna och eventuellt ytterligare instruktionsmaterial som bruksanvisning, servicemanualer eller instruktionsblad som medföljer produkten eller tillvalsutrustningen.



WARNING!

Risk för allvarliga personskador

Felaktig användning kan leda till riskfyllda situationer.

- Produkten ska inte användas i trappor eller rulltrappor.
- Stå inte på produkten.
- Var försiktig när du går på sluttande, halt eller ojämnt underlag.
- Undvik att gå emot hinder, både framåt och bakåt.
- Låt inte barn leka med rollatorn.
- Sitt inte på den nedre tvärgående delen och använd den inte som stöd.



WARNING!

Risk för personskador

Obalanserad eller tung vikt kan leda till att gånghjälpmedlet välter

- Häng inte något, till exempel påsar, på ramen.



FÖRSIKTIGT!

Risk för personskador

Delar som ej är original eller som är felaktiga kan påverka produktens funktion och säkerhet.

- Använd endast originaldelar för den produkt som används.
- På grund av regionala skillnader ska du kontrollera din lokala Invacare-katalog eller webbplats för tillgängliga tillval eller kontakta din lokala Invacare-representant. Adresser finns i slutet av det här dokumentet.



FÖRSIKTIGT!

Risk för första gradens brännskador

Produktens delar kan bli mycket varma om de utsätts för höga temperaturer (över 41 °C).

- Var försiktig om produkten utsätts för höga temperaturer, t. ex. direkt solljus.



OBS!

Det finns risk för skador på grund av slitage, t. ex. korrosion.

- Produkten får inte användas under vatten, t. ex. i bassänger.
- Produkten får inte användas i varma miljöer som bastun.
- Produkten får inte förvaras i ett vått eller fuktigt utrymme.

3 Produktöversikt

3.1 Avsedd användning

Gånghjälpmedlet är avsett att ge stöd vid gång.

Gånghjälpmedlet är lämpligt för inomhus- och utomhusbruk på jämn mark.

Den avsedda användaren är en vuxen med en maxvikt för brukare som anges på produktetiketten och i kapitlet 7 *Teknisk Data, Sida 19*.

3.2 Indikationer för användning

Indikationer


Personer med nedsatt muskelstyrka och/eller balans, som behöver ytterligare stöd medan de går. Brukarens återstående gång- och kognitiva förmåga måste vara tillräcklig för säker användning av ett gånghjälpmedel.

Kontraindikationer

Personer med allvarliga balansrubbingar eller funktionella perceptionsstörningar.

3.3 Etiketter och symboler på produkten

Serienummeretikett

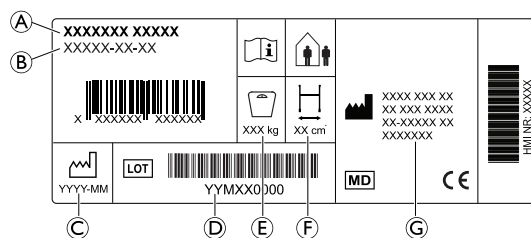

- A Produktnamn
- B Artikelnummer
- C Tillverkningsdatum
- D LOT-nummer
- E Brukarens maxvikt
- F Maximal bredd
- G Tillverkarens adress

Symboler

	Europeisk överensstämmelse		Medicinteknisk produkt
	Tillverkare		Läs bruksanvisningen
	Tillverkningsdatum		LOT-kod
	Maximal bredd		Brukarens maxvikt
	Inomhusbruk/ utomhusbruk		

4 Användande

4.1 Innan produkten används

**FÖRSIKTIGT!****Risk för personskador och sakskada**


- Före användning ska du kontrollera produktens allmänna funktion.
- Innan du använder produkten ska du kontrollera om den har defekter.
- Använd inte en defekt produkt.

Invacare förutsätter att sjukvårdspersonal har gjort en individuell bedömning av brukaren för att fastställa risknivån eller behandlingskraven. Vårdgivare har bedömt att produkten ger önskat stöd och att dess justeringar är lämpliga för brukaren. Vårdgivare och brukare har fått lämplig utbildning från vårdpersonal om hur produkten ska användas på ett rätt och säkert sätt.

4.2 Fälla ihop och fälla ut

**OBS!****Obehag/mindre blåmärken**

- Var uppmärksam på klämrisken.

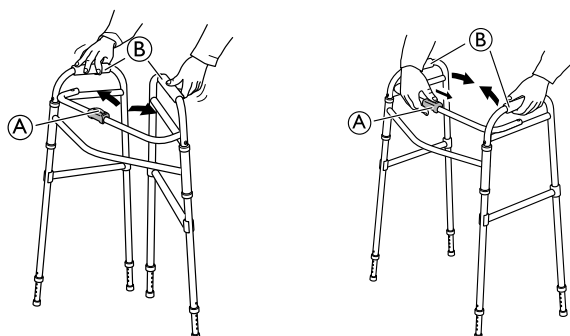

Fälla ut till driftsläge

1. Tryck sidoramarna **B** utåt tills låsmekanismen **A** fastnar med ett tydligt klickljud.
2. Försök trycka sidoramarna **B** inåt för att säkerställa att låsmekanismen **A** är ordentligt fastgjord.

Fälla ihop

1. Tryck låsmekanismen **A** nedåt och fäll ihop sidoramarna **B** inåt.



4.3 Justera höjden

**OBS!****Rekommenderad höjd**

- Handtagen ska vara i handledshöjd när brukaren står med rak rygg och avslappnade armar. En sjukgymnast kan rekommendera en annan höjd om brukaren har särskilda behov.

**OBS!****Obehag/mindre blåmärken**

- Var uppmärksam på klämrisken.

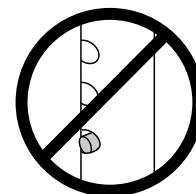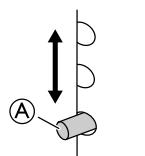

1. Tryck på låsknappen **A**.
2. Skjut förlängningen uppåt eller nedåt till önskad höjd.
3. Se till att låsknappen **A** klickar på plats i nästa håll. Se till att knappen hakar i med ett tydligt klick.

4.4 Gå

1. Stå mellan sidoramarna och håll båda händerna på handtagen.
2. Stå still och flytta/skjut gånghjälpmedlet framåt.
3. Ta ett steg framåt medan du håller gånghjälpmedlet stadigt.

4.5 Vid förhöjning

**VARNING!****Fallrisk**

- Om det sitter hjul på de främre benen måste de bakre benens förhöjning justeras så att sidoramarna är raka.
- När det är tillämpligt måste hjulförsedda förhöjningens infästning monteras med hjulen på gästativets yttersida.



Mer information finns i avsnittet "Justera höjden".

5 Underhåll

5.1 Allmän information för underhåll

**VARNING!****Risk för personskador**

- Underhåll bör utföras minst en gång om året.
- Använd inte en defekt produkt.
- Försök inte göra några reparationer själv. För reparationer, kontakta din leverantör.

5.2 Inspektionschecklista

För att säkerställa god prestanda och säkerhet ska du inspektera produkten regelbundet.

- Kontrollera att alla skruvar och justeringar är ordentligt åtdragna. (Om tillämpligt)
- Se till att handgreppen är åtdragna. Använd inte gånghjälpmedlet om handgreppen sitter löst. Anvisningar om hur du byter handgreppen kan erhållas från din leverantör eller Invacare-distributör.
- Inspektera ramen och de belastade delarna för sprickor.
- Inspektera hjulen beträffande åtdragning, slitage och skada. (Om tillämpligt)

- ❑ Kontrollera att inget hår, ludd eller annat skräp har fastnat i hjulen. (Om tillämpligt)
- ❑ Kontrollera att gummiändarna och/eller lågfriktionsändarna i plast inte är trasiga, slitna eller saknas. (Om tillämpligt)

5.3 Rengöring och desinfektion

Allmän säkerhetsinformation



FÖRSIKTIGT!

Risk för kontaminering

- Vidta försiktighetsåtgärder för dig själv och använd lämplig skyddsutrustning.



OBS!

- Felaktiga vätskor och metoder kan skada produkten.
 - Alla rengöringsmedel och desinfektionsmedel som används måste vara effektiva, kompatibla med varandra och måste skydda de material som de är avsedda att rengöra.
 - Använd aldrig korroderande vätskor (alkaliska ämnen, syror etc.) eller slipande rengöringsmedel. Vi rekommenderar ett vanligt rengöringsmedel för hushållsbruk som t.ex. diskmedel, om inte annat anges i rengöringsanvisningarna.
 - Använd aldrig ett lösningsmedel (cellulosathinner, acetone etc.) som ändrar strukturen i plasten eller löser upp fästa etiketter.
 - Se alltid till att produkten är helt torr innan den tas i bruk igen.



För rengöring och desinfektion i kliniska eller långvårdsmiljöer gäller riktlinjer för institutionell hygien.

Rengöringsintervall



OBS!

- Regelbunden rengöring och desinfektion ger en smidigare drift, förlänger livslängden och förhindrar kontaminering. Rengör och desinficera produkten
 - regelbundet då den är i bruk
 - före och efter underhållsprocedurer
 - när den har kommit i kontakt med kroppsvätskor
 - innan den används med en ny brukare.

Instruktioner för rengöring

Produkten kan rengöras i tvättmaskin eller för hand.

När du använder en högtryckstvätt eller en vanlig vattenstråle ska du inte rikta strålen mot lager, dräneringshål eller etiketter.

Den maximala rengöringstemperaturen är 60 °c. Använd inte ångrengörare.

1. Rengör gånghjälpmedlet med en fuktig trasa och mildt rengöringsmedel.
2. Rengör hjulen med en borste (ej stålborste).
3. Torka produkten ordentligt när du har rengjort den.

Instruktioner för rengöring och desinficering

Vid vård i hemmet

- Desinfektionsmedel: Vi rekommenderar ett alkoholbaserat ytdesinfektionsmedel (med 70-90 % alkohol).



Läs instruktionerna på etiketten på ditt desinfektionsmedel. Det ger information om aktivitetsspektrumet (bakterier, svampar och/eller virus), materialkompatibilitet och korrekt exponeringstid.

1. Se till att ytorna rengörs före desinfektion.
2. Fukta en mjuk trasa och torka av alla åtkomliga ytor och håll dem fuktade under den exponeringstid som anges på desinfektionsmedlets etikett.
3. Låt produkten lufttorka.

Inom vården

Följ arbetsplatsens egna desinficeringsrutiner och använd endast de desinfektionsmedel och metoder som anges.

6 Återanvändning

6.1 Kassering

Tänk på miljön och återvinn produkten genom att lämna in den på en återvinningscentral när den inte längre kan användas.

Ta isär produkten och dess komponenter så att de olika materialerna kan separeras och återvinnas individuellt.

Kassering och återvinning av begagnade produkter och förpackningar måste följa de lagar och föreskrifter som gäller för avfallshantering i respektive land. Kontakta det företag som sköter den lokala avfallshanteringen för att få information.

6.2 Rekonditionering

Den här produkten kan återanvändas. Gör följande när produkten ska rekonditioneras för en ny användare:

- Inspektion
- Rengöring och desinfektion


För ingående information, se 5 Underhåll, Sida 18.

Se till att bruksanvisningen överlämnas tillsammans med produkten.


Om skador eller fel upptäcks ska produkten inte återanvändas.

7 Teknisk Data

7.1 Mått och vikt

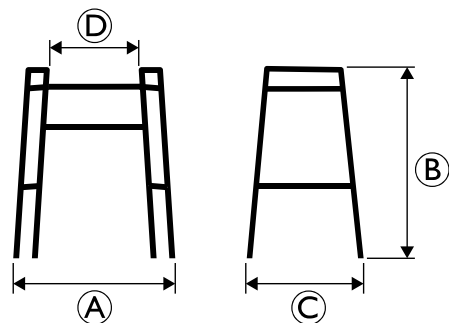

	P409 Asteria
Total bredd A	605–625 mm
Total höjd B	770–945 mm
Totalt djup C	440–465 mm

	P409 Asteria
Bredd mellan handtagen 	440 mm
Vikt	3 kg
Brukarens maxvikt	135 kg

Alla dimensioner är föremål för visst spelrum.

7.2 Material

Ram	Anodiserat aluminium
Handgrepp	TPE
Skruvar	Rostfritt stål

de

1 Allgemein

1.1 Einleitung

Diese Gebrauchsanweisung enthält wichtige Informationen zur Handhabung des Produkts. Lesen Sie die Gebrauchsanweisung sorgfältig durch und befolgen Sie die Sicherheitsanweisungen, damit eine sichere Verwendung des Produkts gewährleistet ist.

Invacare behält sich das Recht vor, Produktspezifikationen ohne vorherige Ankündigung abzuändern.

Vergewissern Sie sich vor dem Lesen dieses Dokuments, dass Sie die aktuelle Fassung haben. Die jeweils aktuelle Fassung können Sie als PDF-Datei von der Invacare-Website herunterladen.

Wenn die gedruckte Ausführung des Dokuments für Sie aufgrund der Schriftgröße schwer zu lesen ist, können Sie die entsprechende PDF-Version von der Invacare-Website herunterladen. Sie können das PDF-Dokument dann auf dem Bildschirm so anzeigen, dass die Schriftgröße für Sie angenehmer ist.

Bei einem ernsthaften Vorfall mit dem Produkt informieren Sie bitte den Hersteller und die zuständige Behörde in Ihrem Land.

1.2 Symbole in diesem Dokument

In diesem Dokument werden Symbole und Signalwörter verwendet, um auf Gefahren oder unsichere Praktiken hinzuweisen, die zu Verletzungen oder Sachschäden führen können. Die Definitionen der verwendeten Signalwörter finden Sie in der nachstehenden Tabelle.



WARNUNG

Weist auf eine gefährliche Situation hin, die bei Nichtbeachtung zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen kann.



VORSICHT

Weist auf eine gefährliche Situation hin, die bei Nichtbeachtung zu leichten Verletzungen führen kann.



HINWEIS

Weist auf eine gefährliche Situation hin, die bei Nichtbeachtung zu Sachschäden führen kann.



Tipps und Empfehlungen

Enthalten nützliche Tipps, Empfehlungen und Anleitungen für eine effiziente und problemlose Verwendung.

Sonstige Symbole

(Nicht für alle Handbücher anwendbar)



Verantwortliche Person im Vereinigten Königreich
Pflichtangabe, wenn das Produkt nicht im Vereinigten Königreich hergestellt wurde.



Triman
Hinweis auf Recycling- und Sortiervorschriften
(nur für Frankreich relevant).

1.3 Konformität

Qualität ist für das Unternehmen entscheidend. Alle Abläufe sind an den Anforderungen von ISO 13485 ausgerichtet.

Dieses Produkt ist mit dem CE-Kennzeichen versehen und erfüllt die europäische Verordnung 2017/745 über Medizinprodukte der Klasse I.

Wir setzen uns kontinuierlich dafür ein, die Umwelt durch unsere Unternehmenstätigkeit sowohl direkt vor Ort als auch weltweit möglichst wenig zu beeinträchtigen.

Wir verwenden ausschließlich REACH-konforme Materialien und Bauteile.

1.4 Nutzungsdauer

Die Nutzungsdauer dieses Produkts beträgt fünf Jahre, vorausgesetzt, es wird täglich und in Übereinstimmung mit den in dieser Gebrauchsanweisung aufgeführten Sicherheitshinweisen, Wartungsintervallen und korrekten Verfahrensweisen verwendet. Die tatsächliche Haltbarkeitsdauer kann abhängig von Häufigkeit und Intensität der Verwendung variieren.

1.5 Garantieinformationen

Wir gewähren für das Produkt eine Herstellergarantie gemäß unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen für das entsprechende Land.

Garantieansprüche können nur über den Händler geltend gemacht werden, von dem das Produkt bezogen wurde.

1.6 Beschränkung der Haftung

Invacare übernimmt keine Haftung für Schäden aufgrund von:

- Nichteinhaltung der Gebrauchsanweisung
- falscher Verwendung
- normalem Verschleiß
- falscher Montage oder Einrichtung durch den Käufer oder einen Dritten
- technischen Änderungen
- unbefugten Änderungen bzw. Einsatz nicht geeigneter Ersatzteile

2 Sicherheit

2.1 Allgemeine Sicherheitsinformationen



WARNUNG!

Gefahr von schweren Verletzungen oder Sachschäden

Die unsachgemäße Verwendung dieses Produkts kann zu Verletzungen oder Sachschäden führen.

- Falls Ihnen die Warnungen, Sicherheitshinweise und Anweisungen unverständlich sind, wenden Sie sich an einen Arzt oder den Anbieter, bevor Sie das Produkt verwenden.
- Verwenden Sie dieses Produkt oder optionales Zubehör erst, nachdem Sie diese Anweisungen und mögliches zusätzliches Anweisungsmaterial – wie die zum Produkt oder optionalen Zubehör gehörende(n) Gebrauchsanweisung, Servicehandbücher oder Merkblätter – vollständig gelesen und verstanden haben.

**WARNUNG!****Gefahr schwerer Verletzungen**

Eine nicht bestimmungsgemäße Verwendung kann zu gefährlichen Situationen führen.

- Verwenden Sie das Produkt nicht auf Treppen oder Rolltreppen.
- Nicht auf das Produkt stellen.
- Lassen Sie beim Gehen auf abschüssigem oder rutschigem oder unebenem Untergrund Vorsicht walten.
- Vermeiden Sie es, gegen Hindernisse zu laufen (sowohl vorwärts als auch rückwärts).
- Lassen Sie keine Kinder mit dem Produkt spielen.
- Setzen Sie sich nicht auf die Querstrebe, und verwenden Sie sie nicht, um sich abstützen.

**WARNUNG!****Verletzungsgefahr**

Bei unausgeglichener oder schwerer Beladung kann das Produkt umkippen

- Hängen Sie keine Lasten (z. B. Taschen) an den Rahmen.

**VORSICHT!****Verletzungsgefahr**

Teile, die nicht in Original-Qualität vorliegen, oder falsche Teile können die Funktion und Sicherheit des Produkts beeinträchtigen.

- Für das verwendete Produkt ausschließlich Originalteile verwenden.
- Aufgrund regionaler Unterschiede ziehen Sie bei der Suche nach erhältlichen Optionen den Invacare-Katalog oder die Invacare-Website für Ihr Land zu Rate, oder wenden Sie sich an Ihren Invacare-Händler vor Ort. Die entsprechenden Adressen finden Sie am Ende dieses Dokuments.

**VORSICHT!****Gefahr von Verbrennungen ersten Grades**

Teile des Produktes können sich erwärmen, wenn sie hohen Temperaturen (über 41 °C) ausgesetzt werden.

- Wird das Produkt hohen Temperaturen (zum Beispiel direktem Sonnenlicht) ausgesetzt, ist Vorsicht angebracht.

**HINWEIS!**

Es besteht ein Schadensrisiko aufgrund von Verschleiß (z. B. Korrosion).

- Das Produkt nicht unter Wasser (z. B. in Pools) verwenden.
- Das Produkt nicht in Bereichen mit hohen Temperaturen (z. B. Saunen) verwenden.
- Das Produkt darf nicht in einer nassen oder feuchten Umgebung gelagert werden.

3 Produktübersicht

3.1 Verwendungszweck

Die Gehhilfe ist zur Unterstützung beim Gehen vorgesehen.

Die Gehhilfe ist sowohl im Innen- als auch im Außenbereich auf ebenem Untergrund einsetzbar.

Der vorgesehene Benutzer ist ein Erwachsener mit einem maximalen Benutzergewicht wie auf dem Typenschild und in Kapitel 7 *Technische Daten*, Seite 23 angegeben.

3.2 Indikationen für den Gebrauch

Indikationen


Personen mit eingeschränkter Muskelkraft und/oder eingeschränktem Gleichgewicht, die beim Gehen zusätzliche Unterstützung benötigen. Die verbleibende Gehfähigkeit und die kognitiven Fähigkeiten müssen für eine sichere Nutzung der Gehhilfe ausreichen.

Gegenanzeigen

Personen mit schweren Gleichgewichtsstörungen oder funktionellen Wahrnehmungsstörungen.

3.3 Etiketten und Symbole am Produkt

Typenschild

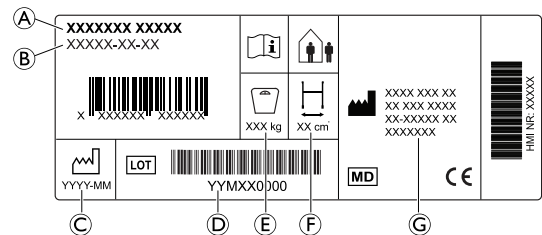

- A Produktname
- B Teilenummer
- C Herstellungsdatum
- D Codenummer
- E Maximales Benutzergewicht
- F Maximale Breite
- G Adresse des Herstellers

Symbole

	CE-Kennzeichnung		Medizinprodukt
	Hersteller		Gebrauchsanweisung lesen
	Herstellungsdatum		Chargennummer
	Maximale Breite		Maximales Benutzergewicht
	In Innenräumen wie im Freien verwendbar		

4 Verwenden

4.1 Vor der Verwendung


**VORSICHT!****Gefahr von Verletzungen oder Sachschäden**

- Vor der Verwendung das grundsätzliche Funktionsvermögen des Produkts verifizieren.
- Das Produkt vor Verwendung auf etwaige Schäden inspizieren.
- Das Produkt nicht verwenden, wenn es schadhaft ist.

Invacare geht davon aus, dass medizinisches Fachpersonal eine individuelle Beurteilung des Benutzers vorgenommen hat, um dessen Risikoniveau oder therapeutische Anforderungen festzulegen. Anbieter und Pflegepersonal haben bewertet, dass das Produkt die benötigte Unterstützung bietet und dass die Einstellungen für den Benutzer geeignet sind. Pfleger und Benutzer haben von medizinischem Fachpersonal eine entsprechende Schulung erhalten, wie sie das Produkt korrekt und sicher anwenden.

4.2 Zusammen- und Auseinanderklappen

- ! HINWEIS!**
Beschwerden / Kleinere Druckstellen
 – Vorsicht, es besteht Einklemmgefahr.

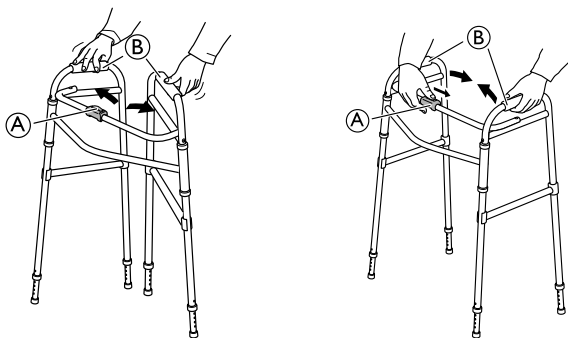

Auseinanderklappen in die Betriebsstellung

1. Drücken Sie die Seitenrahmen **B** nach außen, bis der Verriegelungsmechanismus **A** mit einem hörbaren Klicken einrastet.
2. Versuchen Sie, die Seitenrahmen **B** einwärts zu drücken, um sicherzustellen, dass der Verriegelungsmechanismus **A** eingerastet ist.

Wegklappen

1. Den Verriegelungsmechanismus **A** nach unten drücken und die Seitenrahmen **B** nach innen klappen.

4.3 Anpassen der Höhe

- ! HINWEIS!**
Empfohlene Höhe
 – Die Griffe sollten in Höhe der Handgelenke (bei aufrecht stehendem Benutzer mit entspannten Armen) eingestellt werden. Therapeuten empfehlen möglicherweise abhängig von den spezifischen Anforderungen des Patienten abweichende Höheneinstellungen.

- ! HINWEIS!**
Beschwerden / Kleinere Druckstellen
 – Vorsicht, es besteht Einklemmgefahr.



1. Drücken Sie den Druckknopf **A**.
2. Schieben Sie die Erweiterung nach oben oder unten, bis die gewünschte Höhe erreicht ist.
3. Lassen Sie den Druckknopf **A** in das nächste Loch einrasten. Achten Sie darauf, dass den Druckknopf mit einem hörbaren Klicken vollständig einrastet.

4.4 Gehen

1. Stellen Sie sich zwischen die zwei Seitenrahmen, und legen Sie beide Hände an die Griffe.
2. Stehen Sie still, und bewegen/schieben Sie die Gehhilfe vorwärts.
3. Machen Sie einen Schritt nach vorne, wobei Sie die Gehhilfe festhalten.

4.5 Verwendung von Beinerweiterungen

- ! WARNUNG!**
Sturzgefahr
 – Bei der Verwendung von Rädern an den vorderen Beinen müssen die hinteren Beinerweiterungen angepasst werden, damit die Seitenrahmen gerade stehen.
 – Beinerweiterungen mit Rädern (sofern anwendbar) müssen so montiert werden, dass sich die Räder an der Außenseite der Gehhilfe befinden.

i Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt „Einstellen der Höhe“.

5 Instandhaltung

5.1 Allgemeine Hinweise zur Instandhaltung

- ! WARNUNG!**
Verletzungsgefahr
 – Eine Wartung des Produkts sollte mindestens einmal jährlich erfolgen.
 – Das Produkt nicht verwenden, wenn es schadhaft ist.
 – Versuchen Sie nicht, selbst Reparaturen vorzunehmen. Für Reparaturen wenden Sie sich an Ihren Anbieter.

5.2 Prüfliste für die Inspektion

Um die Funktion und die Sicherheit des Produkts aufrechtzuerhalten, überprüfen Sie es regelmäßig.

- Prüfen Sie alle Schrauben und verstellbaren Elemente auf sicheren Sitz. (falls zutreffend)
- Stellen Sie sicher, dass die Handgriffe fest sitzen. Die Gehhilfe darf nicht verwendet werden, wenn die Handgriffe lose/locker sind. Anweisungen zum Wechseln der Handgriffe erhalten Sie von Ihrem Anbieter oder Invacare-Vertriebshändler.
- Überprüfen Sie den Rahmen und beanspruchte Bauteile auf Risse.
- Überprüfen Sie die Räder auf festen Sitz, Verschleiß und Beschädigungen. (falls zutreffend)
- Stellen Sie sicher, dass die Räder frei von Haaren, Fusseln und anderem Schmutz sind. (falls zutreffend)
- Vergewissern Sie sich, dass die Gummispitzen und/oder Plastikgleiter noch vorhanden sowie nicht gerissen oder abgenutzt sind. (falls zutreffend)

5.3 Reinigung und Desinfektion

Allgemeine Sicherheitsinformationen

- ! VORSICHT!**
Kontaminationsgefahr
 – Vorkehrungen für sich selbst treffen und geeignete Schutzausrüstung verwenden.



HINWEIS!

Falsche Reinigungsmethoden oder -flüssigkeiten können zu einer Beschädigung des Produkts führen.

- Alle verwendeten Reinigungs- und Desinfektionsmittel müssen wirksam und miteinander verträglich sein und das Material schützen, das mit ihnen gereinigt wird.
- Keinesfalls korrodierende Flüssigkeiten (Laugen, Säuren usw.) oder scheuernde Reinigungsmittel verwenden. Wenn in der Reinigungsanleitung nichts anderes angegeben ist, empfehlen wir ein handelsübliches Haushaltsreinigungsmittel, z. B. Geschirrspülmittel.
- Niemals Lösungsmittel (Nitroverdünnung, Aceton usw.) verwenden, die die Struktur des Kunststoffs verändern oder die angebrachten Etiketten angreifen.
- Immer sicherstellen, dass das Produkt absolut trocken ist, bevor es wieder in Gebrauch genommen wird.



Zur Reinigung und Desinfektion in Langzeitpflegeumgebungen oder klinischen Umgebungen die internen Verfahren beachten.

Reinigungsintervalle



HINWEIS!

Regelmäßige Reinigung und Desinfektion sorgen für einen reibungslosen Betrieb, verlängern die Nutzungsdauer und verhindern Verunreinigungen. Reinigen und desinfizieren Sie das Produkt:

- regelmäßig, sofern es verwendet wird
- vor und nach jeder Wartung
- nach Kontakt mit Körperflüssigkeiten
- vor Benutzung durch einen neuen Patienten

Reinigungsanweisungen

Das Produkt kann in einer Waschmaschine oder von Hand gereinigt werden.

Wenn Sie einen Hochdruckreiniger oder einen gewöhnlichen Wasserstrahl verwenden, halten Sie den Wasserstrahl jedoch nicht auf Lager, Drainagelöcher oder Etiketten.

Die maximale Reinigungstemperatur beträgt 60 °C. Keinesfalls einen Dampfreiniger verwenden.

1. Die Gehhilfe mit einem feuchten Tuch und einem milden Reinigungsmittel reinigen.
2. Die Räder mit einer Bürste reinigen (keine Drahtbürste).
3. Das Produkt nach dem Reinigen trocken wischen.

Desinfektionsanweisungen

Im häuslichen Bereich

- Desinfektionsmittel: Wir empfehlen die Verwendung eines Oberflächendesinfektionsmittels auf Alkoholbasis (Alkoholgehalt: 70 % – 90 %)



Beachten Sie die Hinweise auf dem Etikett des Desinfektionsmittels. Diese enthalten Angaben zum Aktivitätsspektrum (Bakterien, Pilze und/oder Viren), zur Materialverträglichkeit und zur korrekten Einwirkdauer.

1. Stellen Sie sicher, dass alle Oberflächen vor dem Desinfizieren gereinigt sind.
2. Feuchten Sie ein weiches Tuch an, und führen Sie eine Wischdesinfektion aller zugänglichen Oberflächen durch. Halten Sie diese dabei für die auf dem Etikett des Desinfektionsmittels angegebene Einwirkdauer von einem Feuchtigkeitsfilm bedeckt.
3. Das Produkt an der Luft trocknen lassen.

Im klinischen Bereich

Befolgen Sie die einrichtungsinternen Bestimmungen zum Desinfektionsverfahren und verwenden Sie nur die darin aufgeführten Desinfektionsmittel.

6 Nach dem Gebrauch

6.1 Entsorgung

Handeln Sie umweltbewusst, und lassen Sie dieses Produkt nach dem Ende seiner Lebensdauer über eine lokale Müllverwertungsanlage recyceln.

Demontieren Sie das Produkt und seine Bauteile, damit die verschiedenen Materialien einzeln getrennt und recycelt werden können.

Die Entsorgung und das Recycling von gebrauchten Produkten und Verpackungen müssen in Übereinstimmung mit den einschlägigen Gesetzen und Vorschriften des jeweiligen Landes zur Abfallentsorgung erfolgen. Wenden Sie sich an Ihr Abfallentsorgungsunternehmen, wenn Sie weitere Informationen wünschen.

6.2 Wiederaufbereitung

Dieses Produkt ist für die wiederholte Verwendung geeignet. Um das Produkt für einen neuen Benutzer wiederaufzubereiten, sind die folgenden Maßnahmen zu ergreifen:

- Prüfung
- Reinigung und Desinfektion


Detaillierte Informationen siehe 5 *Instandhaltung*, Seite 22.

Stellen Sie sicher, dass die Gebrauchsanweisung zusammen mit dem Produkt übergeben wird.

Das Produkt darf nicht wiederholt verwendet werden, wenn es beschädigt ist oder Funktionsstörungen vorliegen.

7 Technische Daten

7.1 Abmessungen und Gewichte

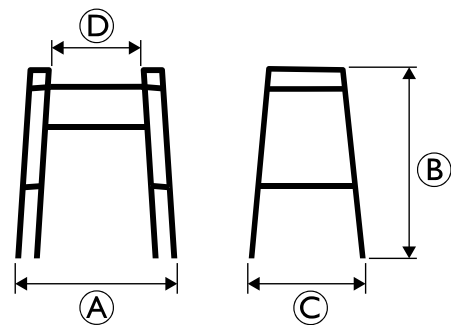

	P409 Asteria
Gesamtbreite A	605–625 mm
Gesamthöhe B	770–945 mm
Gesamttiefe C	440–465 mm
Breite zwischen den Griffen D	440 mm

	P409 Asteria
Gewicht	3 kg
Max. Benutzergewicht	135 kg

Alle Abmessungen unterliegen gewissen Toleranzen.

7.2 Material

Rahmen	Eloxiertes Aluminium
Handgriffe	TPE
Schrauben	Stahl, korrosionsgeschützt

es

1 Generalidades

1.1 Introducción

Este manual del usuario contiene información importante sobre el manejo del producto. Para garantizar su seguridad al utilizar el producto, lea detenidamente el manual del usuario y siga las instrucciones de seguridad.

Invacare se reserva el derecho de modificar las especificaciones del producto sin previo aviso.

Antes de leer este documento, asegúrese de contar con la versión más reciente. Podrá encontrarla en formato PDF en el sitio web de Invacare.

Si la versión impresa del documento tiene un tamaño de letra que le resulta difícil de leer, podrá descargarlo en formato PDF en el sitio web. Podrá ampliar el PDF en pantalla a un tamaño de letra que le resulte más cómodo.

En caso de un accidente grave con el producto, informe al fabricante y a las autoridades competentes de su país.

1.2 Símbolos empleados en este documento

En este documento se utilizan símbolos y señales que hacen referencia a peligros o usos poco seguros que podrían provocar lesiones físicas o daños materiales. A continuación, se muestran las descripciones de estos símbolos.



ADVERTENCIA

Indica una situación peligrosa que, si no se evita, podría tener como consecuencia la muerte o lesiones graves.



PRECAUCIÓN

Indica una situación peligrosa que, si no se evita, podría tener como consecuencia lesiones leves o de poca gravedad.



AVISO

Indica una situación peligrosa que, si no se evita, puede tener como consecuencia daños en la propiedad.



Consejos y recomendaciones

Proporciona consejos útiles, recomendaciones e información para un uso eficiente y sin problemas.

Otros símbolos

(No es aplicable a todos los manuales)



Persona responsable del Reino Unido
Indica si un producto no se fabrica en el Reino Unido.



Trimán
Indica las reglas de reciclaje y recogida selectiva (solo relevantes para Francia).

1.3 Cumplimiento

La calidad es fundamental para el funcionamiento de nuestra empresa, que trabaja conforme a las normas ISO 13485.

Este producto lleva la marca CE, en cumplimiento con el Reglamento 2017/745 sobre productos sanitarios de clase 1.

Trabajamos continuamente para garantizar que se reduzca al mínimo el impacto medioambiental de la empresa, tanto a nivel local como global.

Solo utilizamos materiales y componentes que cumplen con las directivas REACH.

1.4 Vida útil

La vida útil prevista para este producto es de cinco años, siempre y cuando se utilice diariamente y de conformidad con las instrucciones de seguridad, se respeten los intervalos de mantenimiento y se utilice correctamente según lo establecido en este manual. La vida útil real puede variar en función de la frecuencia y la intensidad del uso.

1.5 Información sobre la garantía

Ofrecemos la garantía del fabricante del producto conforme a nuestras Condiciones generales y Condiciones comerciales en los distintos países.

Las reclamaciones relativas a la garantía solo pueden efectuarse a través del distribuidor en el que se adquirió el producto.

1.6 Limitación de responsabilidad

Invacare no se hace responsable de los daños surgidos por:

- Incumplimiento del manual del usuario
- Uso incorrecto
- Desgaste natural
- Montaje o instalación incorrectos por parte del comprador o de terceros
- Modificaciones técnicas
- Modificaciones no autorizadas y/o uso de recambios inadecuados

2 Seguridad

2.1 Información general de seguridad



¡ADVERTENCIA!

Riesgo de daños o lesiones graves

Un uso incorrecto de este producto puede provocar lesiones o daños.

- Si tiene alguna duda relacionada con las advertencias, precauciones o instrucciones, póngase en contacto con un profesional sanitario o con su proveedor antes de intentar utilizar este equipo.
- No utilice este producto ni cualquier otro equipo opcional disponible sin antes haber leído y comprendido estas instrucciones y cualquier otro material informativo adicional, como el manual del usuario, manuales de servicio u hojas de instrucciones proporcionados con este producto o equipo opcional.

**¡ADVERTENCIA!****Riesgo de lesiones graves**

El uso incorrecto puede causar situaciones peligrosas.

- No utilice el producto en escaleras o escaleras mecánicas.
- No se ponga de pie sobre el producto.
- Tenga cuidado al caminar por pendientes, suelos resbaladizos o superficies irregulares.
- Si hay obstáculos, evite caminar hacia delante y hacia atrás.
- No permita que los niños jueguen con el producto
- No se siente en el larguero ni lo use como soporte.

**¡ADVERTENCIA!****Riesgo de lesiones**

Una carga desequilibrada o pesada puede causar una caída.

- No cuelgue ninguna carga (por ejemplo, bolsos) en el chasis.

**¡PRECAUCIÓN!****Riesgo de lesiones**

El uso de piezas incorrectas o que no sean originales puede afectar el funcionamiento y la seguridad del producto.

- Utilice solo piezas originales para usar el producto.
- Debido a las diferencias regionales, consulte el sitio web o el catálogo local de Invacare para ver las opciones disponibles o póngase en contacto con el representante local de Invacare. Consulte las direcciones al final de este documento.

**¡PRECAUCIÓN!****Riesgo de quemaduras de primer grado**

Los componentes del producto pueden calentarse si se exponen a temperaturas elevadas (superiores a 41 °C).

- Tenga cuidado si el producto se expone a altas temperaturas, por ejemplo, a la luz solar directa.

**AVISO**

Existe riesgo de daños debidos al desgaste, por ejemplo, corrosión.

- No utilice el producto bajo el agua, por ejemplo, en piscinas.
- No utilice el producto en áreas calientes como saunas.
- No guarde el producto en entornos mojados o húmedos.

3 Descripción del producto

3.1 Uso previsto

El andador está diseñado para servir de apoyo cuando se camina.

El andador está indicado para su uso en interiores y exteriores en terrenos nivelados.

El usuario previsto es un adulto con un peso de usuario máximo igual o inferior al indicado en la etiqueta del producto y en el capítulo 7 *Datos Técnicos*, página 27.

3.2 Indicaciones de uso

Indicaciones


Personas con deterioro de la fuerza muscular y/o problemas de equilibrio que necesiten apoyo adicional mientras caminan. La capacidad cognitiva y la movilidad restante del usuario deben ser suficientes utilizar un andador con seguridad.

Contraindicaciones

Personas con trastornos de equilibrio graves o alteraciones perceptivas funcionales.

3.3 Etiquetas y símbolos en el producto

Etiqueta de identificación

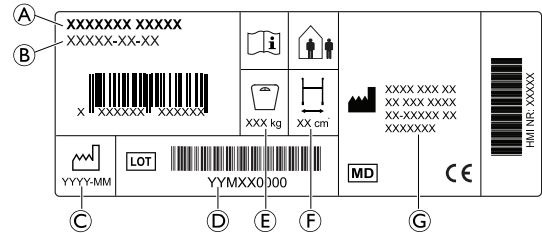

- Ⓐ Nombre del producto
- Ⓑ Número de referencia
- Ⓒ Fecha de fabricación
- Ⓓ Número de lote
- Ⓔ Peso máximo del usuario
- Ⓕ Anchura máxima
- Ⓖ Dirección del fabricante

Símbolos

	Conformidad europea		Producto sanitario
	Fabricante		Lea el manual del usuario
	Fecha de fabricación		Número LOT
	Anchura máxima		Peso máximo del usuario
	Uso en interiores/exteriores		

4 Utilización

4.1 Antes del uso


**¡PRECAUCIÓN!****Riesgo de lesiones o daños a la propiedad**

- Antes de su uso, compruebe la funcionalidad general del producto.
- Antes de su uso, compruebe si el producto presenta algún defecto.
- No utilice el producto si está defectuoso.

Invacare supone que un profesional sanitario ha realizado una evaluación individual del usuario para determinar su nivel de riesgo o sus necesidades terapéuticas, que los proveedores y cuidadores han determinado que el producto proporciona la ayuda requerida y sus ajustes resultan adecuados para el usuario, y que un profesional sanitario ha formado del modo adecuado al cuidador y al usuario sobre cómo utilizar el producto correctamente y de forma segura.

4.2 Plegado y desplegado

- !** **AVISO**
Incomodidad o pequeños moratones
– Tenga cuidado de no atraparse los dedos.

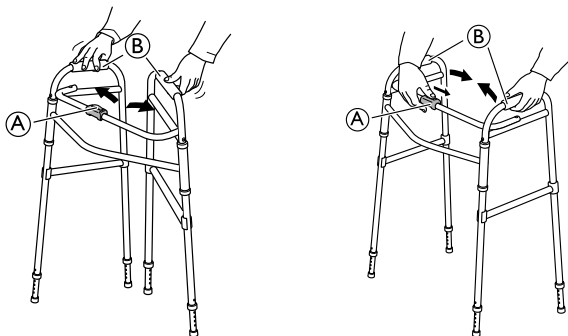

Desplegado a la posición de funcionamiento

1. Presione las estructuras laterales (B) hacia fuera hasta que el mecanismo de bloqueo (A) encaje y se escuche un "clic".
2. Intente presionar las estructuras laterales (B) hacia dentro para asegurarse de que el mecanismo de bloqueo (A) haya encajado.

Plegado

1. Presione hacia abajo el mecanismo de bloqueo (A) y pliegue las estructuras laterales (B) hacia dentro.

4.3 Ajuste de altura

- !** **AVISO**
Altura recomendada
– Las empuñaduras deben colocarse a la altura de la muñeca cuando el usuario esté de pie con los brazos relajados. El terapeuta podría indicar distintas alturas según las necesidades concretas del cliente.

- !** **AVISO**
Incomodidad o pequeños moratones
– Tenga cuidado de no atraparse los dedos.



1. Pulse el botón de ajuste (A).
2. Suba o baje la extensión hasta alcanzar la altura deseada.
3. Deje que el botón de ajuste (A) encaje en el siguiente orificio. Asegúrese de que el botón haya encajado correctamente; para ello, deberá escuchar un "clic".

4.4 Caminar

1. Póngase de pie entre las dos estructuras laterales y coloque ambas manos en los asideros.
2. Quédese quieto y mueva o deslice el andador hacia delante.
3. Dé un paso hacia delante a la vez que sujeta firmemente el andador.

4.5 Uso de las extensiones de los pies

- !** **¡ADVERTENCIA!**
Riesgo de caídas
– Si se utilizan accesorios de rueda en los pies delanteros, las extensiones de los pies traseros se deben ajustar para nivelar los cuadros laterales.
– Cuando corresponda, las extensiones de pies con ruedecillas deben instalarse con las ruedas hacia el exterior del andador.

i Consulte la sección "Ajuste de la altura" para obtener más información.

5 Mantenimiento

5.1 Información sobre mantenimiento general

- !** **¡ADVERTENCIA!**
Riesgo de lesiones
– Las tareas de mantenimiento deben realizarse al menos una vez al año.
– No utilice el producto si está defectuoso.
– No intente repararlo usted mismo. Para realizar reparaciones, póngase en contacto con su proveedor.

5.2 Lista de verificación de inspección

Para garantizar un funcionamiento y una seguridad óptimos, inspeccione el producto periódicamente.

- Compruebe que todos los tornillos y ajustes estén correctamente apretados. (Si procede)
- Asegúrese de que las empuñaduras estén apretadas. Si las empuñaduras están sueltas, no utilice el andador. Consulte a su proveedor o a su distribuidor de Invacare para obtener instrucciones sobre cómo cambiar las empuñaduras.
- Inspeccione el chasis y las piezas cargadas por si presentan grietas.
- Compruebe si las ruedas están bien ajustadas, desgastadas o dañadas. (Si procede)
- Asegúrese de que las ruedas están libres de pelos, pelusas u otro tipo de suciedad. (Si procede)
- Asegúrese de que las conteras de goma y/o conteras de deslizamiento de plástico no estén rotas, desprendidas o ausentes. (Si procede)

5.3 Limpieza y desinfección

Información general de seguridad

- !** **¡PRECAUCIÓN!**
Riesgo de contaminación
– Adopte las precauciones necesarias y utilice el equipo de protección adecuado.

¡AVISO!

- Seguir métodos erróneos o utilizar fluidos incorrectos puede dañar o deteriorar el producto.
- Todos los productos de limpieza y desinfectantes empleados deben ser eficaces, compatibles entre sí y deben proteger los materiales que se van a limpiar.
 - Nunca utilice fluidos corrosivos (álcalis, ácidos, etc.) ni productos de limpieza abrasivos. Recomendamos usar un producto de limpieza doméstico normal, como líquido lavavajillas, si no se especifica lo contrario en las instrucciones de limpieza.
 - No utilice disolventes (decapantes de celulosa, acetona, etc.) que cambien la estructura del plástico o disuelvan las etiquetas adheridas.
 - Asegúrese siempre de que el producto se ha secado por completo antes de utilizarlo de nuevo.

Para la limpieza y desinfección en entornos clínicos o de atención sanitaria a largo plazo, siga los procedimientos internos.

Intervalos de limpieza

AVISO

- La limpieza y la desinfección regulares mejoran el funcionamiento correcto, aumentan la vida útil y evitan la contaminación.
- Limpie y desinfecte el producto:
- periódicamente mientras esté en uso,
 - antes y después de cualquier procedimiento de mantenimiento,
 - cuando haya estado en contacto con fluidos corporales,
 - antes de usarlo con un nuevo usuario.

Instrucciones de limpieza

El producto puede limpiarse manualmente o en una lavadora.

Cuando utilice un limpiador a alta presión o un chorro de agua normal, no dirija el chorro hacia los cojinetes, los orificios de drenaje o las etiquetas.

La temperatura máxima de limpieza es de 60 °C. No utilice un limpiador a vapor.

1. Limpie el andador con un paño húmedo y un detergente suave.
2. Limpie las ruedas con un cepillo (que no sea de alambre).
3. Seque el producto con un trapo después de limpiarlo.

Instrucciones de desinfección

En la atención domiciliaria

- Desinfectante: Se recomienda usar un desinfectante para superficies a base de alcohol (con 70-90 % de alcohol).

Lea las instrucciones de la etiqueta del desinfectante, que proporciona información sobre el espectro de actividad (bacterias, hongos o virus), la compatibilidad con distintos materiales y el tiempo de exposición correcto.

1. Asegúrese de que las superficies estén limpias antes de desinfectarlas.
2. Humedezca un paño suave y limpie-desinfecte todas las superficies accesibles; manténgalas humedecidas durante el tiempo de exposición indicado en la etiqueta del desinfectante.
3. Deje que el producto se seque al aire.

En la atención institucional

Siga los procedimientos de desinfección del centro y utilice exclusivamente los desinfectantes y métodos especificados.

6 Después del uso

6.1 Eliminación

Proteja el medio ambiente y recicle este producto a través de la planta de reciclaje más próxima cuando llegue al final de su vida útil.

Desmante el producto y sus componentes para separar y reciclar individualmente los diferentes materiales.

La eliminación y el reciclaje de los productos usados y de sus embalajes debe llevarse a cabo conforme a las normativas legales relativas al tratamiento de residuos vigentes en cada país. Póngase en contacto con su empresa de gestión de residuos local para obtener más información al respecto.

6.2 Reacondicionamiento

El producto se puede reutilizar. Para reacondicionar el producto para un nuevo usuario, lleve a cabo las siguientes acciones:

- Inspección
- Limpieza y desinfección


Para obtener información detallada, consulte 5 *Mantenimiento, página 26*.

Asegúrese de que el manual del usuario se entregue con el producto.

Si se detecta algún daño o un funcionamiento deficiente, no reutilice el producto.

7 Datos Técnicos

7.1 Dimensiones y pesos

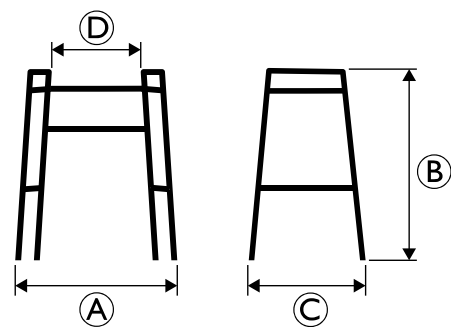

	P409 Asteria
Anchura total A	605–625 mm
Altura total B	770–945 mm
Profundidad total C	440–465 mm
Anchura entre empuñaduras D	440 mm
Peso	3 kg
Peso máximo del usuario	135 kg

Todas las dimensiones están sujetas a determinadas tolerancias.

7.2 Materiales

Chasis	Aluminio anodizado
Asas	Elastómero termoplástico
Tornillos	Acero con protección antióxido

fr

1 Généralités

1.1 Introduction

Le présent manuel d'utilisation contient des informations importantes sur la manipulation du produit. Pour garantir une utilisation en toute sécurité du produit, lisez attentivement le manuel d'utilisation et respectez les instructions de sécurité.

Invacare se réserve le droit de modifier les caractéristiques des produits sans préavis.

Avant de lire ce document, assurez-vous de disposer de la version la plus récente. Cette version est disponible au format PDF sur le site Internet d'Invacare.

Si la taille des caractères de la version imprimée du document vous semble trop difficile à lire, vous pouvez télécharger la version PDF sur le site Internet. Vous pourrez alors ajuster la taille des caractères à l'écran pour améliorer votre confort visuel.

En cas d'incident grave avec le produit, vous devez en informer le fabricant et l'autorité compétente de votre pays.

1.2 Symboles figurant dans ce document

Les symboles et mots d'avertissement utilisés dans le présent document s'appliquent aux risques ou aux pratiques dangereuses qui pourraient provoquer des blessures ou des dommages matériels. Reportez-vous aux informations ci-dessous pour la définition des symboles d'avertissement.



AVERTISSEMENT

Indique une situation dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, est susceptible de provoquer des blessures graves, voire mortelles.



ATTENTION

Indique une situation dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, est susceptible de provoquer des blessures mineures ou légères.



AVIS

Indique une situation dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, est susceptible de provoquer des dommages matériels.



Conseils et recommandations

Donne des conseils, recommandations et informations utiles pour une utilisation efficace et sans souci.

Autres symboles

(Ne s'applique pas à tous les manuels)



Personne responsable au RU
Indique si un produit n'est pas fabriqué au Royaume-Uni.



Triman
Indique les règles de recyclage et de tri (applicable uniquement à la France).

1.3 Conformité

La qualité est un élément fondamental du fonctionnement de notre entreprise, qui travaille conformément à la norme ISO 13485.

Ce produit porte le label CE et est conforme à la Réglementation sur les dispositifs médicaux de classe I 2017/745.

Nous nous efforçons en permanence de réduire au minimum notre impact sur l'environnement, à l'échelle locale et mondiale.

Nous n'utilisons que des matériaux et composants conformes au règlement REACH.

1.4 Durée de vie

La durée de vie attendue de ce produit est de cinq ans lorsqu'il est utilisé quotidiennement et dans le respect des consignes de sécurité, des intervalles de maintenance et avec une utilisation correcte, comme indiqué dans le présent manuel. La durée de vie effective peut varier en fonction de la fréquence et de l'intensité de l'utilisation.

1.5 Informations de garantie

Nous fournissons une garantie fabricant pour le produit, conformément à nos conditions générales de vente en vigueur dans les différents pays.

Les réclamations au titre de la garantie ne peuvent être adressées qu'au fournisseur auprès duquel le produit a été obtenu.

1.6 Limitation de responsabilité

Invacare décline toute responsabilité en cas de dommage lié à :

- un non respect du manuel d'utilisation,
- une utilisation incorrecte,
- l'usure normale,
- un assemblage ou montage incorrect par l'acheteur ou des tiers,
- des modifications techniques,
- des modifications non autorisées et/ou l'utilisation de pièces de rechange inadaptées.

2 Sécurité

2.1 Informations de sécurité générales



AVERTISSEMENT !

Risque de dommage matériel ou de blessure grave

Une utilisation inadéquate de ce produit est susceptible d'entraîner des blessures ou des dommages matériels.

- Si vous ne comprenez pas les avertissements, mises en garde ou instructions, contactez un professionnel de santé ou un fournisseur avant d'essayer d'utiliser cet équipement.
- N'utilisez pas ce produit ni tout autre équipement disponible en option sans avoir lu et compris entièrement les présentes instructions et toute autre documentation d'instructions supplémentaire, telle que le manuel d'utilisation, les manuels de maintenance ou fiches d'instructions fournis avec ce produit ou l'équipement en option.

**AVERTISSEMENT !****Risque de blessure grave**

- Une utilisation incorrecte peut provoquer des situations dangereuses.
- N'utilisez pas le produit dans les escaliers ou les escalators.
 - Ne vous mettez pas debout sur le produit.
 - Soyez prudent lors de vos déplacements dans des pentes, sur des sols glissants ou sur des surfaces irrégulières.
 - Évitez d'essayer de franchir des obstacles, que ce soit en marche avant ou en marche arrière.
 - Ne laissez jamais des enfants jouer avec le produit.
 - Ne vous asseyez pas sur la traverse et ne vous en servez pas comme support.

**AVERTISSEMENT !****Risque de blessure**

- Une charge lourde ou déséquilibrée peut provoquer un basculement.
- Ne suspendez pas des objets lourds, notamment des sacs, sur le châssis.

**ATTENTION !****Risque de blessure**

- Des pièces non adaptées ou qui ne sont pas d'origine peuvent affecter le fonctionnement et la sécurité du produit.
- Utilisez uniquement les pièces d'origine du produit utilisé.
 - Du fait de différences régionales, vous devez vous reporter au catalogue ou au site Internet Invacare de votre pays pour connaître les options qui sont disponibles ; vous pouvez également contacter un représentant Invacare. Reportez-vous aux adresses indiquées à la fin du présent document.

**ATTENTION !****Risque de brûlures au premier degré**

- Certaines parties du produit peuvent chauffer, lorsqu'elles sont exposées à de hautes températures (températures supérieures à 41 °C).
- Soyez vigilant si le produit est exposé à des températures élevées, comme la lumière directe du soleil.

**AVIS!**

- Il existe un risque de dommage dû à l'usure, par exemple la corrosion.
- N'utilisez pas le produit sous l'eau, par exemple dans des piscines.
 - N'utilisez pas le produit dans des zones chaudes comme des saunas.
 - Ne stockez pas le produit dans un lieu mouillé ou humide.

3 Présentation du produit

3.1 Utilisation prévue

Le dispositif d'aide à la marche est destiné à offrir un support pour les déplacements.

Il convient à une utilisation à l'intérieur et à l'extérieur, sur un sol lisse.

L'utilisateur prévu est un adulte dont le poids maximal correspond au poids indiqué sur l'autocollant d'identification et dans le chapitre 7 *Caractéristiques Techniques*, page 31.

3.2 Indications d'utilisation

Indications


Personnes souffrant d'une déficience musculaire et/ou de troubles de l'équilibre, qui ont besoin d'un soutien supplémentaire pendant la marche. La capacité à marcher et les facultés cognitives restantes doivent être suffisantes pour permettre une utilisation sans risque d'une aide à la marche.

Contre-indications

Personnes souffrant de graves troubles de l'équilibre ou de troubles fonctionnels de la perception.

3.3 Étiquettes et symboles figurant sur le produit

Autocollant d'identification

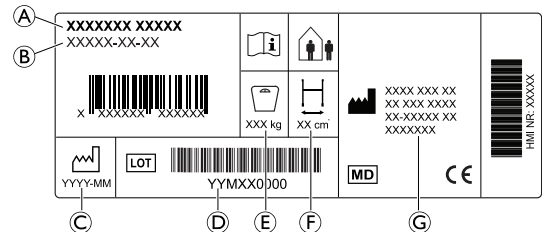

- Ⓐ Désignation
- Ⓑ Référence
- Ⓒ Date de fabrication
- Ⓓ Numéro de LOT
- Ⓔ Poids maximal de l'utilisateur
- Ⓕ Largeur maximale
- Ⓖ Adresse du fabricant

Symboles

	Conformité européenne		Dispositif médical
	Fabricant		Consulter le manuel d'utilisation
	Date de fabrication		Numéro LOT
	Largeur maximale		Poids maximal de l'utilisateur
	Utilisation à l'intérieur/ l'extérieur		

4 Utilisation

4.1 Avant utilisation


**ATTENTION !**

- Risque de blessures ou de dommage matériel**
- Avant utilisation, vérifiez le bon fonctionnement général du produit.
 - Avant utilisation, vérifiez que le produit n'est pas défectueux.
 - N'utilisez pas de produit défectueux.

Invacare présume qu'un professionnel de la santé a procédé à une évaluation individuelle de l'utilisateur afin de déterminer son niveau de risque ou ses exigences en matière de thérapie. Les fournisseurs et les soignants ont estimé que le produit fournissait le support requis et que ses réglages convenaient à l'utilisateur. Un professionnel de santé a formé le soignant et l'utilisateur de manière appropriée à l'utilisation correcte du produit, en toute sécurité.

4.2 Pliage et dépliage

- !** **AVIS!**
Inconfort/ecchymoses légères
 – Veillez à ne pas vous pincer !

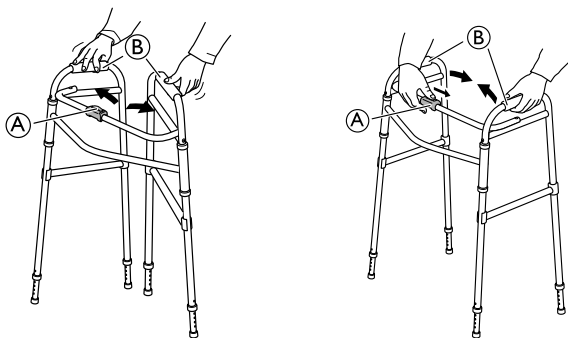

Dépliage en position d'utilisation

1. Dépliez les cadres latéraux **B** vers l'extérieur jusqu'à ce que le mécanisme de verrouillage **A** s'enclenche avec un déclic.
2. Essayez de replier les cadres latéraux **B** vers l'intérieur pour vérifier que le mécanisme de verrouillage **A** est bien enclenché.

Pliage

1. Appuyez sur le mécanisme de verrouillage **A** et pliez les cadres latéraux **B** vers l'intérieur.

4.3 Réglage de la hauteur

- !** **AVIS!**
Hauteur recommandée
 – Les poignées doivent être positionnées à la hauteur des poignets, l'utilisateur étant en position droite et les bras relâchés. Il se peut que le thérapeute conseille des hauteurs différentes en fonction des besoins spécifiques du client.

- !** **AVIS!**
Inconfort/ecchymoses légères
 – Veillez à ne pas vous pincer !




1. Appuyez sur le bouton-pression **A**.
2. Montez ou baissez la rallonge jusqu'à la hauteur souhaitée.
3. Laissez le bouton-pression **A** s'enclencher dans le trou suivant. Assurez-vous que le bouton est complètement enclenché (un déclic se fait entendre).

4.4 Marche

1. Tenez-vous debout entre les deux cadres latéraux et mettez les deux mains sur les poignées.
2. Restez immobile et déplacez/faites glisser le dispositif d'aide à la marche vers l'avant.
3. Faites un pas en avant tout en maintenant fermement le dispositif d'aide à la marche.

4.5 Utilisation des rallonges de pied

- !** **AVERTISSEMENT !**
Risque de chute
 – Lors de l'utilisation d'accessoires à roues sur les pieds avant, les rallonges de pied arrière doivent être ajustées pour que les cadres latéraux soient à niveau.
 – Le cas échéant, les rallonges de pied avec roues doivent être installées avec les roues à l'extérieur du cadre de marche.

 Consultez la section « Réglage de la hauteur » pour plus d'informations.

5 Maintenance

5.1 Informations de maintenance générales

- !** **AVERTISSEMENT !**
Risque de blessure
 – La maintenance doit être réalisée au moins une fois par an.
 – N'utilisez pas de produit défectueux.
 – N'essayez pas de le réparer vous-même. Pour les réparations, contactez votre fournisseur.

5.2 Liste de vérification

Pour garantir une bonne performance et la sécurité, vérifiez régulièrement votre produit.

- Assurez-vous que toutes les vis et fixations sont bien serrées. (Le cas échéant)
- Assurez-vous que les poignées sont bien serrées. Si les poignées sont desserrées, n'utilisez pas le dispositif d'aide à la marche. Les instructions de modification des poignées peuvent être obtenues auprès de votre fournisseur ou de votre distributeur Invacare.
- Vérifiez que le châssis et les pièces chargées sont exempts de fissures.
- Vérifiez le serrage, l'usure et l'état des roues. (Le cas échéant)
- Assurez-vous de l'absence de poils/cheveux, peluches ou autres débris dans les roues. (Le cas échéant)
- Assurez-vous que les embouts en caoutchouc et/ou les patins coulissants en plastique ne sont pas arrachés, usés ou manquants. (Le cas échéant)

5.3 Nettoyage et désinfection

Informations de sécurité générales

- !** **ATTENTION !**
Risque de contamination
 – Prenez toutes les précautions nécessaires pour vous protéger et portez un équipement de protection adéquat.



AVIS!

Des méthodes ou des liquides inappropriés risqueraient de blesser quelqu'un ou d'endommager le produit.

- Tous les désinfectants et agents de nettoyage utilisés doivent être efficaces, compatibles entre eux et protéger les surfaces qu'ils sont censés nettoyer.
- N'utilisez jamais d'agents de nettoyage corrosifs (alcalins, acides, etc.) ou abrasifs. Nous recommandons d'utiliser un agent de nettoyage ménager ordinaire, comme du liquide vaisselle, sauf indication contraire dans les instructions de nettoyage.
- N'utilisez jamais de solvant (diluant cellulosique, acétone, etc.) qui modifie la structure du plastique ou dissout les étiquettes apposées.
- Procédez à un séchage complet du produit avant toute nouvelle utilisation.



Pour le nettoyage et la désinfection en environnement clinique ou de soins à long terme, suivez les procédures internes.

Fréquence de nettoyage



AVIS !

Une désinfection et un nettoyage réguliers garantissent un bon fonctionnement, augmentent la durée de vie et permettent d'éviter toute contamination.

Nettoyez et désinfectez le produit :

- régulièrement lors de son utilisation,
- avant et après toute procédure d'entretien,
- lorsqu'il a été en contact avec des fluides corporels, quels qu'ils soient,
- avant de l'utiliser pour un nouvel utilisateur.

Instructions de nettoyage

Le produit peut être nettoyé en machine ou à la main.

Lors de l'utilisation d'un nettoyeur à haute pression ou d'un jet d'eau ordinaire, ne dirigez pas le jet vers les roulements, les trous d'écoulement ou les étiquettes.

La température maximale de nettoyage est de 60 °C. Ne pas utiliser de nettoyeur vapeur.

1. Nettoyez l'aide à la marche avec un chiffon humide et un détergent doux.
2. Nettoyez les roues avec une brosse (pas de brosse métallique).
3. Après nettoyage, essuyez le produit pour le sécher.

Instructions de désinfection

Pour les soins à domicile

- Désinfectant : nous vous recommandons d'utiliser un désinfectant de surface à base d'alcool (avec 70-90 % d'alcool).



Lisez les instructions sur l'étiquette de votre désinfectant. Elle fournit des informations sur le spectre d'activité (bactéries, champignons et/ou virus), la compatibilité des matériaux et la bonne durée d'exposition.

1. Assurez-vous que les surfaces sont nettoyées avant la désinfection.
2. Humidifiez un chiffon doux, essuyez toutes les surfaces accessibles pour les désinfecter et gardez-les humidifiées pendant la durée d'exposition indiquée sur l'étiquette du désinfectant.
3. Laissez sécher le produit à l'air.

Pour les soins en établissement

Suivez vos procédures de désinfection internes et utilisez uniquement les désinfectants et méthodes préconisés.

6 Après l'utilisation

6.1 Mise au rebut

Préservez l'environnement en faisant recycler ce produit en fin de vie dans un centre de recyclage.

Désassemblez le produit et ses composants afin que les différents matériaux puissent être séparés et recyclés individuellement.

La mise au rebut et le recyclage des produits usagés et de l'emballage doivent respecter la législation et les règlements relatifs à la gestion des déchets de chaque pays. Contactez votre organisme local de traitement des déchets pour plus d'informations.

6.2 Reconditionnement

Ce produit peut être réutilisé. Pour reconditionner le produit en vue de son utilisation par un nouvel utilisateur, il convient d'effectuer les opérations suivantes :

- Inspection
- Nettoyage et désinfection


Reportez-vous à la section 5 *Maintenance*, page 30 pour plus d'informations.

Assurez-vous de remettre le manuel d'utilisation avec le produit.

Si un dommage ou un dysfonctionnement est détecté, le produit ne doit pas être réutilisé.

7 Caractéristiques Techniques

7.1 Dimensions et poids

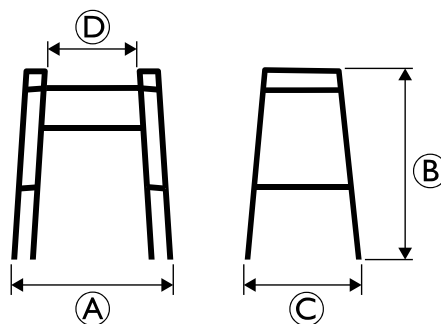

	P409 Asteria
Largeur totale A	605–625 mm
Hauteur totale B	770–945 mm
Profondeur totale C	440–465 mm
Largeur entre les poignées D	440 mm
Poids	3 kg
Poids maximal de l'utilisateur	135 kg

Toutes les dimensions sont soumises à certaines tolérances.

7.2 Matériau

Cadre	Aluminium anodisé
Poignées	TPE
Vis	Acier inoxydable

1 Generale

1.1 Introduzione

Il presente manuale d'uso contiene informazioni importanti sul trattamento del prodotto. Per garantire la sicurezza di utilizzo del prodotto, leggere attentamente il manuale d'uso e seguire le istruzioni di sicurezza.

Invacare si riserva il diritto di modificare le specifiche del prodotto senza ulteriore preavviso.

Prima di leggere il presente documento, verificare di essere in possesso dell'ultima versione, disponibile in formato PDF sul sito web Invacare.

Se si ritiene che la dimensione dei caratteri nella versione cartacea del documento sia di difficile lettura, è possibile scaricare dal sito web la versione in formato PDF. Il PDF può essere ingrandito sullo schermo in modo da ottenere una dimensione dei caratteri più facile da leggere.

In caso di incidente grave relativo al prodotto, è necessario informare il produttore e l'autorità competente nel proprio paese.

1.2 Simboli in questo documento

In questo documento tutte quelle situazioni non sicure o pericolose che possono portare a lesioni alle persone o danni ai materiali sono evidenziate mediante simboli e avvertimenti. Qui di seguito sono riportate le spiegazioni di tutti i possibili avvertimenti.



ATTENZIONE

Indica una situazione pericolosa che, se non evitata, potrebbe essere causa di morte o lesioni gravi.



AVVERTENZA

Indica una situazione pericolosa che, se non evitata, potrebbe essere causa di lesioni minori o leggere.



AVVISO

Indica una situazione pericolosa che, se non evitata, potrebbe essere causa di danni al prodotto.



Consigli e raccomandazioni

Indica consigli, raccomandazioni e informazioni utili per un uso efficace e senza inconvenienti.

Altri simboli

(Non applicabile per tutti i manuali)



Persona responsabile per il Regno Unito

Indica se un prodotto non è fabbricato nel Regno Unito.



Logo Triman

Indica norme relative al riciclaggio e alla raccolta differenziata (solo per la Francia).

1.3 Conformità

La qualità è fondamentale per l'azienda, che opera nel rispetto e nell'ambito della norma ISO 13485.

Il prodotto è dotato di marchio CE, in conformità al Regolamento Dispositivi Medici 2017/745 Classe I.

Lavoriamo costantemente per garantire che l'impatto ambientale dell'azienda a livello locale e globale sia ridotto al minimo.

Garantiamo di utilizzare esclusivamente materiali e componenti conformi alla direttiva REACH.

1.4 Durata

La durata prevista per questo prodotto è di cinque anni, a condizione che sia utilizzato quotidianamente e in conformità alle istruzioni per la sicurezza, seguendo gli intervalli di manutenzione e le indicazioni per un uso corretto come indicato nel presente manuale. La durata effettiva può variare a seconda della frequenza e dell'intensità d'uso.

1.5 Informazioni sulla garanzia

Offriamo una garanzia del produttore per il prodotto in conformità di quanto indicato sui Termini e le condizioni generali di vendita applicabili nei rispettivi paesi.

La garanzia può essere fatta valere solo attraverso il fornitore presso il quale è stato acquistato il prodotto.

1.6 Limiti di responsabilità

Invacare non si assume alcuna responsabilità per danni derivanti da:

- Non conformità con il manuale d'uso
- Utilizzo non corretto
- Consumo e usura naturali
- Montaggio o preparazione non corretti da parte dell'acquirente o di terzi
- Modifiche tecniche
- Modifiche non autorizzate e/o utilizzo di pezzi di ricambio non adatti

2 Sicurezza

2.1 Informazioni generali sulla sicurezza



ATTENZIONE!

Pericolo di lesioni gravi o danni

Un uso improprio del prodotto può causare lesioni o danni.

- In presenza di messaggi di attenzione, precauzioni o istruzioni di difficile comprensione, contattare il personale medico professionale o il fornitore prima di iniziare a utilizzare questo prodotto.
- Non usare questo prodotto o nessun altro dispositivo opzionale disponibile senza prima aver letto attentamente e compreso fino in fondo le presenti istruzioni e ogni altro materiale informativo, come il manuale d'uso, il manuale per la manutenzione o i fogli di istruzione forniti con questo prodotto o con i dispositivi opzionali.



ATTENZIONE!

Pericolo di lesione grave

Un utilizzo non corretto può causare situazioni pericolose.

- Non utilizzare il prodotto su scale mobili o altre scale.
- Non salire in piedi sul prodotto.
- Procedere con cautela quando si cammina su superfici in pendenza, scivolose o irregolari.
- Evitare di scontrarsi con ostacoli, sia procedendo in avanti che all'indietro.
- Non permettere ai bambini di giocare con il prodotto
- Non sedersi sulla barra trasversale né utilizzare la barra trasversale come sostegno.

**ATTENZIONE!****Pericolo di lesioni**

Un carico sbilanciato o pesante può causare un ribaltamento.

- Non sospendere carichi, ad esempio borse, al telaio.

**AVVERTENZA!****Pericolo di lesioni**

Componenti non originali o non corretti possono alterare il funzionamento e la sicurezza del prodotto.

- Utilizzare esclusivamente componenti originali per il prodotto in uso.
- In considerazione delle differenze regionali, fare riferimento al catalogo o al sito web locale di Invacare per conoscere le opzioni disponibili oppure contattare il rappresentante locale Invacare. Vedere gli indirizzi alla fine del presente documento.

**AVVERTENZA!****Rischio di ustioni di primo grado**

Alcune parti del prodotto potrebbero riscaldarsi se esposti a temperature elevate (superiori a 41 °C).

- Prestare attenzione se il prodotto è esposto a temperature elevate, ad esempio alla luce diretta del sole.

**AVVISO!**

Vi è il rischio di danni dovuti all'usura, ad esempio alla corrosione.

- Non utilizzare il prodotto sott'acqua, ad esempio in vasche.
- Non utilizzare il prodotto in ambienti caldi come le saune.
- Non conservare il prodotto in ambienti bagnati e umidi.

3 Panoramica del prodotto

3.1 Uso previsto

L'ausilio per la deambulazione è destinato a sostenere le persone mentre camminano.

L'ausilio per la deambulazione è adatto per l'uso all'interno e all'esterno su terreni omogenei.

L'utilizzatore previsto è un adulto con peso massimo utilizzatore indicato sull'etichetta del prodotto e nel capitolo 7 *Dati Tecnici*, pagina 35.

3.2 Indicazioni per l'uso


Indicazioni

Persone con indebolimento della forza muscolare e/o dell'equilibrio che necessitano di un ulteriore supporto mentre camminano. Per un utilizzo in sicurezza è necessaria una capacità di deambulazione ed una capacità cognitiva sufficiente.

Controindicazioni

Persone con gravi disturbi dell'equilibrio o disturbi percettivi funzionali.

3.3 Etichette e simboli sul prodotto

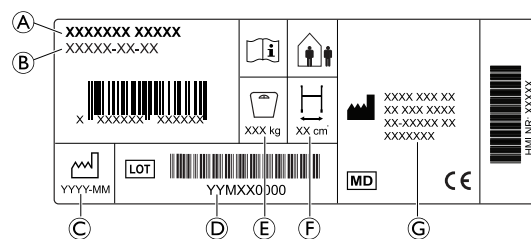Etichetta modello

- Ⓐ Denominazione prodotto
- Ⓑ Numero di parte
- Ⓒ Data di produzione
- Ⓓ Numero LOT
- Ⓔ Peso max. utilizzatore
- Ⓕ Larghezza massima
- Ⓖ Indirizzo del produttore

Simboli

	Conformità europea		Dispositivo medico
	Produttore		Leggere il manuale d'uso
	Data di produzione		Codice LOT
	Larghezza massima		Peso max. utilizzatore
	Uso all'interno / all'esterno		

4 Uso

4.1 Prima dell'uso

**AVVERTENZA!****Pericolo di lesioni o danni al prodotto**


- Prima dell'uso, verificare il funzionamento generale del prodotto.
- Prima dell'uso, controllare che il prodotto non presenti difetti.
- Non utilizzare un prodotto difettoso.

Invacare presume che un operatore sanitario abbia fatto una valutazione individuale dell'utilizzatore per determinarne suo livello di rischio o i requisiti terapeutici. che i fornitori e gli assistenti hanno valutato che il prodotto fornisce il supporto necessario e che le sue regolazioni sono appropriate per l'utilizzatore. che l'assistente e l'utilizzatore siano stati adeguatamente addestrati da un operatore sanitario su come utilizzare il prodotto in modo corretto e sicuro.

4.2 Chiusura e apertura

**AVVISO!****Fastidi/Lievi contusioni**

- Fare attenzione al rischio di pizzicamento.

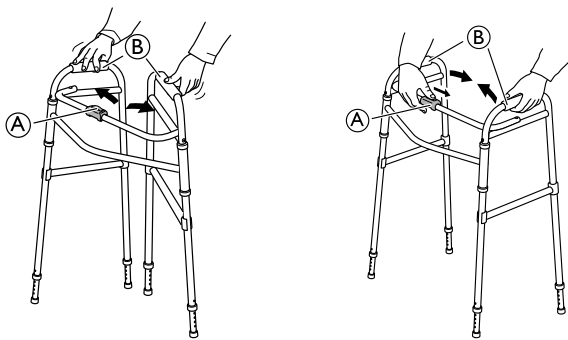

Apertura in posizione di utilizzo

1. Spingere verso l'esterno i telai laterali (B) fino a udire lo scatto in posizione del meccanismo di bloccaggio (A).
2. Provare a spingere verso l'interno i telai laterali (B) per assicurarsi che il meccanismo di bloccaggio (A) sia innestato.

Chiusura

1. Premere verso il basso il meccanismo di bloccaggio (A) e piegare i telai laterali (B) verso l'interno.

4.3 Regolazione dell'altezza

! AVVISO!

Altezza raccomandata

- Le maniglie devono essere posizionate all'altezza dei polsi con l'utilizzatore in piedi con una postura rilassata. Il terapeuta può suggerire altezze differenti in base alle esigenze specifiche del cliente.

! AVVISO!

Fastidi/Lievi contusioni

- Fare attenzione al rischio di pizzicamento.



1. Premere il pulsante a scatto (A).
2. Far scorrere in alto o in basso la prolunga sino a raggiungere l'altezza desiderata.
3. Far scattare il pulsante a scatto (A) nel foro successivo. Assicurarsi che il pulsante scatti correttamente in posizione.

4.4 Deambulazione

1. Posizionarsi in piedi tra i due telai laterali e appoggiare entrambe le mani sulle maniglie.
2. Rimanere fermi e spostare/far scorrere l'ausilio per deambulazione in avanti.
3. Fare un passo in avanti tenendosi saldamente all'ausilio per deambulazione.

4.5 Utilizzo delle prolunghette delle gambe



ATTENZIONE!

Pericolo di caduta

- In caso di applicazione di ruote anteriori, le gambe posteriori devono essere regolate e portate alla stessa altezza anteriore.
- Se possibile, le gambe con ruote devono essere montate con le ruote rivolte verso l'esterno rispetto al deambulatore.



Per ulteriori informazioni, consultare la sezione "Regolazione dell'altezza".

5 Manutenzione

5.1 Informazioni generali per la manutenzione



ATTENZIONE!

Pericolo di lesioni

- La manutenzione deve essere effettuata almeno una volta l'anno.
- Non utilizzare un prodotto difettoso.
- Non tentare di ripararlo da soli. Per la riparazione, rivolgersi al proprio fornitore.

5.2 Elenco di spunta dei controlli

Per garantire buone prestazioni e sicurezza, controllare regolarmente il prodotto.

- Assicurarsi che tutte le viti e i dispositivi di regolazione siano serrati correttamente. (Se applicabile)
- Assicurarsi che le impugnature siano serrate. Non utilizzare l'ausilio per la deambulazione se le impugnature sono allentate. Le istruzioni su come modificare le impugnature si possono richiedere al proprio fornitore o distributore Invacare.
- Ispezionare il telaio e le parti cariche per eventuali crepe.
- Controllare la tenuta, l'usura ed eventuali danni alle ruote orientabili. (Se applicabile)
- Accertarsi che le ruote siano prive di capelli, pelucchi o altri residui. (Se applicabile)
- Controllare che i puntali in gomma e/o i puntali di strisciamento in plastica non siano fessurati, consumati o mancanti. (Se applicabile)

5.3 Pulizia e disinfezione

Informazioni generali sulla sicurezza



AVVERTENZA!

Rischio di contaminazione

- Adottare opportune precauzioni per la propria protezione e utilizzare un'attrezzatura protettiva adeguata.



AVVISO!

- Liquidi inappropriati o metodi errati potrebbero danneggiare il prodotto.
- Tutti i prodotti detergenti e disinfettanti utilizzati devono essere efficaci, compatibili tra loro e devono proteggere i materiali su cui vengono utilizzati durante la pulizia.
- Non utilizzare mai liquidi corrosivi (sostanze alcaline, acidi ecc.) o detergenti abrasivi. Si consiglia di utilizzare un normale prodotto detergente per la casa, come un detersivo liquido per i piatti, a meno che non siano state fornite indicazioni diverse nelle istruzioni di pulizia.
- Non utilizzare mai solventi (diluente per cellulosa, acetone ecc.) che modificano la struttura della plastica o che sciolgono le etichette applicate.
- Prima di utilizzare il prodotto, assicurarsi sempre che sia completamente asciutto.



Per la pulizia e la disinfezione in ambienti clinici o di assistenza a lungo termine, seguire le procedure interne della struttura.

Intervalli di pulizia

! AVVISO!

La pulizia e la disinfezione regolari consentono di assicurare il regolare e buon funzionamento, aumentare la durata e prevenire la contaminazione. Pulire e disinfettare regolarmente il prodotto:

- regolarmente durante l'uso,
- prima e dopo qualsiasi procedura di manutenzione,
- in caso di contatto con liquidi biologici,
- prima dell'uso per un nuovo utilizzatore.

Istruzioni per la pulizia

Il prodotto può essere pulito utilizzando una macchina per il lavaggio o a mano.

Quando si utilizza un detergente ad alta pressione o un normale getto d'acqua, non puntare il getto verso i cuscinetti, i fori di drenaggio o le etichette.

La temperatura massima di pulizia è di 60 °C. Non utilizzare un pulitore a vapore.

1. Pulire l'ausilio per la deambulazione con un panno umido e un detergente delicato.
2. Pulire le ruote con una spazzola (non metallica).
3. Una volta completata la pulizia, asciugare il prodotto con un panno.

Istruzioni per la disinfezione

In ambiente domiciliare

- Disinfettante: Si consiglia di utilizzare un disinfettante per superfici a base alcolica (con il 70-90% di alcol).



Leggere le istruzioni sull'etichetta del disinfettante. Fornisce informazioni sullo spettro di attività (batteri, funghi e/o virus), sulla compatibilità dei materiali e sul corretto tempo di esposizione.

1. Assicurarsi che le superfici vengano pulite prima della disinfezione.
2. Inumidire un panno morbido e pulire-disinfettare tutte le superfici accessibili e mantenerle inumidite per il tempo di esposizione indicato sull'etichetta del disinfettante.
3. Lasciare asciugare il prodotto all'aria.

In ambiente ospedaliero

Seguire le procedure di disinfezione interne e utilizzare solo i disinfettanti e i metodi ivi specificati.

6 Dopo l'utilizzo

6.1 Smaltimento

Rispettare l'ambiente e riciclare il prodotto attraverso un centro di riciclaggio locale al termine del suo utilizzo.

Smontare il prodotto e i relativi componenti, in modo che i differenti materiali possano essere staccati e riciclati singolarmente.

Lo smaltimento e il riciclaggio dei prodotti usati e degli imballaggi devono essere eseguiti nel rispetto delle leggi e delle normative in materia di gestione dei rifiuti vigenti in ciascun paese. Per ulteriori informazioni, contattare la propria azienda di raccolta rifiuti locale.

6.2 Ricondizionamento

Questo prodotto è adatto per il riutilizzo. Per il ricondizionamento del prodotto per un nuovo utilizzatore, intraprendere le azioni seguenti:

- Ispezione
- Pulizia e disinfezione


Per ulteriori informazioni, consultare *5 Manutenzione, pagina 34*.

Assicurarsi che il manuale d'uso venga sempre consegnato insieme al prodotto.

Se si riscontrano danni o malfunzionamenti, non riutilizzare il prodotto.

7 Dati Tecnici

7.1 Dimensioni e pesi

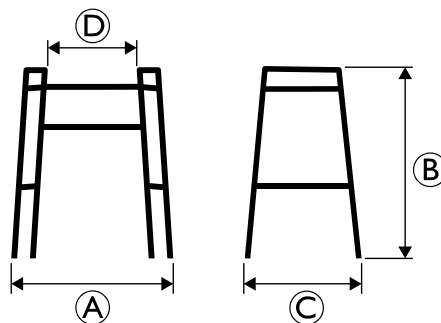

	P409 Asteria
Larghezza totale A	605–625 mm
Altezza totale B	770–945 mm
Profondità totale C	440–465 mm
Distanza tra le maniglie D	440 mm
Peso	3 kg
Peso max. utilizzatore	135 kg

Tutte le dimensioni sono soggette a tolleranze.

7.2 Materiale

Telaio	Alluminio anodizzato
Impugnature	TPE
Viti	Acciaio, con protezione antiruggine



1 Algemeen

1.1 Inleiding

Deze gebruikershandleiding bevat belangrijke informatie over het gebruik van dit product. Lees de gebruikershandleiding aandachtig door en volg de veiligheidsinstructies, zodat u zeker weet dat u het product veilig gebruikt.

Invacare behoudt zich het recht voor om productspecificaties zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.

Controleer voordat u dit document leest of u de juiste versie hebt. U vindt een pdf-bestand met de laatste versie op de Invacare-website.

Als u de lettergrootte in de gedrukte versie van het document moeilijk kunt lezen, kunt u een pdf-versie downloaden van de website. In de pdf-versie kunt u de letters op het scherm aanpassen tot een grootte die u prettiger vindt.

In geval zich een ernstig incident met het product voordoet, dient u de fabrikant en de bevoegde instantie in uw land daarvan op de hoogte te brengen.

1.2 Symbolen in dit document

In dit document worden symbolen en signaalwoorden gebruikt die van toepassing zijn op gevaren of onveilige handelingen die kunnen leiden tot persoonlijk letsel of schade aan eigendommen. Zie de onderstaande informatie voor de definities van de symbolen.



WAARSCHUWING

Duidt op een gevaarlijke situatie die kan leiden tot ernstig letsel of overlijden als de situatie niet wordt vermeden.



LET OP

Duidt op een gevaarlijke situatie die kan leiden tot licht of klein letsel als de situatie niet wordt vermeden.



KENNISGEVING

Duidt op een gevaarlijke situatie die kan leiden tot schade aan eigendommen als de situatie niet wordt vermeden.



Tips en adviezen

Hier worden nuttige tips, adviezen en informatie voor efficiënt, probleemloos gebruik gegeven.

Overige symbolen

(Niet op alle handleidingen van toepassing)



Verantwoordelijke persoon in het VK
Geeft aan of een product wel of niet in het Verenigd Koninkrijk is geproduceerd.



Triman

Wijst op de regels voor recycelen en sorteren (alleen voor Frankrijk).

1.3 Naleving

Kwaliteit is cruciaal bij onze bedrijfsactiviteiten, waarbij wordt gewerkt binnen de normen van ISO 13485.

Dit product is voorzien van het CE-merkteken conform Verordening 2017/745 betreffende medische hulpmiddelen, klasse I.

Wij werken er continu aan om ervoor te zorgen dat het effect van het bedrijf op het milieu, zowel lokaal als internationaal, zo veel mogelijk wordt beperkt.

Wij maken uitsluitend gebruik van materialen en onderdelen die voldoen aan de REACH-richtlijnen.

1.4 Levensduur

De verwachte levensduur van dit product is vijf jaar bij dagelijks gebruik en in overeenstemming met de veiligheidsinstructies, onderhoudstermijnen en bij correct gebruik, zoals aangegeven in deze handleiding. De effectieve levensduur kan variëren afhankelijk van de frequentie en intensiteit van het gebruik.

1.5 Garantie-informatie

Wij bieden voor dit product een fabrieksgarantie in overeenstemming met onze Algemene Voorwaarden in de respectievelijke landen.

Garantieclaims kunnen alleen worden ingediend via de dealer bij wie u het product hebt gekocht.

1.6 Aansprakelijkheidsbeperking

Invacare aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door:

- Niet in acht nemen van de gebruikershandleiding
- Verkeerd gebruik

- Normale slijtage
- Verkeerde montage of afstelling door de koper of een derde
- Technische aanpassingen
- Niet-geautoriseerde wijzigingen en/of gebruik van ongeschikte reserveonderdelen

2 Veiligheid

2.1 Algemene veiligheidsinformatie



WAARSCHUWING!

Kans op ernstig letsel of schade

Verkeerd gebruik van dit product kan leiden tot schade of lichamelijk letsel.

- Als u de waarschuwingen, aanwijzingen of instructies niet begrijpt, neem dan contact op met een professionele zorgverlener of leverancier voordat u dit hulpmiddel gebruikt.
- Gebruik dit product of de beschikbare optionele apparatuur alleen als u deze instructies en het eventuele aanvullende instructiemateriaal volledig hebt doorgelezen en begrepen, met inbegrip van de gebruikershandleiding, servicehandleidingen of instructiebladen die bij dit product of de optionele apparatuur worden verstrekt.



WAARSCHUWING!

Risico van ernstig letsel

Onjuist gebruik kan tot gevaarlijke situaties leiden.

- Gebruik het product niet op een (rol)trap.
- Ga niet op dit product staan.
- Let extra goed op wanneer u op een hellende, glibberige of oneffen ondergrond loopt.
- Probeer zowel in voorwaartse als achterwaartse looprichting nergens tegen aan te botsen.
- Laat kinderen niet met het product spelen
- Ga niet op de dwarsstang zitten en gebruik deze ook niet als steun.



WAARSCHUWING!

Gevaar voor lichamelijk letsel

Bij een te grote belasting kan het loophulpmiddel uit balans raken en kantelen

- Hang geen gewicht, bijvoorbeeld een tas, aan het frame.



LET OP!

Gevaar voor lichamelijk letsel

Niet-originele of verkeerde onderdelen kunnen de werking en veiligheid van het product nadelig beïnvloeden.

- Gebruik alleen originele onderdelen voor het product dat u gebruikt.
- Omdat er verschillen zijn per regio, kunt u het beste de Invacare-catalogus of -website in uw regio raadplegen voor de beschikbare opties. U kunt ook contact opnemen met uw lokale Invacare-vertegenwoordiger. Zie de adressen achter in dit document.



LET OP!

Risico op eerstegraads brandwonden

Bepaalde onderdelen van het product kunnen heet worden bij blootstelling aan een temperatuur van meer dan 41 °C.

- Wees voorzichtig wanneer het product wordt blootgesteld aan hoge temperaturen, zoals in direct zonlicht.

! KENNISGEVING!

- Er bestaat een risico op schade als gevolg van slijtage, zoals roestvorming.
- Gebruik het product niet onder water, zoals in het zwembad.
 - Gebruik het product niet in een hete omgeving, zoals een sauna.
 - Bewaar het product niet in een vochtige of natte omgeving.

3 Productoverzicht

3.1 Bedoeld gebruik

Het loophulpmiddel is bedoeld als ondersteuning bij het lopen.

Het loophulpmiddel is geschikt voor binnen- en buitengebruik op een vlakke ondergrond.

De beoogde gebruiker is een volwassene met een maximaal gebruikersgewicht zoals vermeld op het productlabel en in hoofdstuk 7 *Technische Specificaties, pagina 39*.

3.2 Indicaties voor gebruik

Indicaties


Personen met verminderde spierkracht en/of balans die extra steun nodig hebben tijdens het lopen. Voor veilig gebruik van een loophulpmiddel dient het loop- en cognitieve vermogen van de gebruiker nog voldoende te zijn.

Contra-indicaties

Personen met een ernstige evenwichtsstoornis of een functionele waarnemingsstoornis.

3.3 Typeplaatjes en symbolen op het product

Typeplaatje

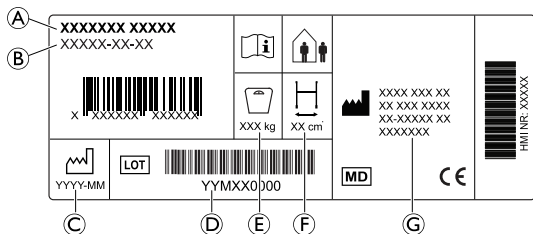

- (A) Productnaam
- (B) Onderdeelnummer
- (C) Fabricagedatum
- (D) LOT-nummer
- (E) Maximaal gebruikersgewicht
- (F) Maximale breedte
- (G) Adres van de fabrikant

Symbolen

	Conformiteit met Europese normen		Medisch hulpmiddel
	Fabrikant		Lees de gebruikershandleiding
	Fabricagedatum		LOT-nummer
	Maximale breedte		Maximum gebruikersgewicht
	Gebruik binnens- en buitenshuis		

4 Gebruik

4.1 Vóór gebruik



LET OP!

Risico op letsel of beschadiging van eigendommen

- Controleer vóór gebruik de algemene werking van het product.
- Controleer het product vóór gebruik op defecten.
- Gebruik het product niet als het defect is.

Invacare gaat ervan uit dat een professionele zorgverlener een individuele beoordeling van de gebruiker heeft gemaakt om zijn risiconiveau of therapeutische eisen te bepalen. Leveranciers en zorgverleners hebben beoordeeld dat het product de vereiste ondersteuning biedt en dat het op de juiste manier is aangepast voor de gebruiker. De verzorger en de gebruiker zijn voldoende door een professionele zorgverlener getraind in het correcte en veilige gebruik van het product.


4.2 In- en uitklappen



KENNISGEVING!

Ongemak/lichte kneuzingen

- Beknellingsgevaar voor vingers.

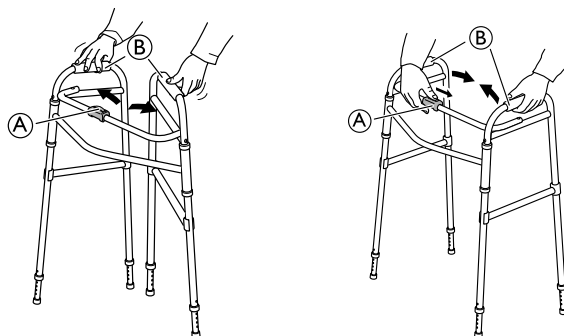

Uitklappen tot in gebruikstand

1. Duw de beide kanten van het frame (B) naar buiten totdat u het vergrendelingsmechanisme (A) hoort vastklikken.
2. Probeer de beide kanten van het frame (B) weer naar binnen te duwen om te controleren of het vergrendelingsmechanisme (A) goed vastzit.

Naar achteren klappen

1. Klap, terwijl u het vergrendelingsmechanisme (A) ingedrukt houdt, de beide kanten van het frame (B) naar binnen.

4.3 De hoogte aanpassen



KENNISGEVING!

Aanbevolen hoogte



- Stel de handgrepen af ter hoogte van de polsen van een gebruiker die rechtop staat met ontspannen armen. Een therapeut kan een andere hoogte adviseren, afhankelijk van de specifieke behoeften van de cliënt.



KENNISGEVING!

Ongemak/lichte kneuzingen

- Beknellingsgevaar voor vingers.

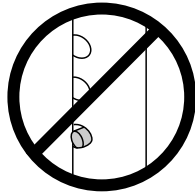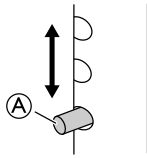

1. Druk op de stelpin ①.
2. Schuif het verlengstuk omhoog of omlaag totdat de gewenste hoogte is bereikt.
3. Laat de stelpin ① in het eerstvolgende gat klikken. U hoort een klik wanneer de stelpin volledig vastzit.

4.4 Lopen

1. Ga tussen de twee zijframes staan en houd beide handen op de handgrepen.
2. Blijf stilstaan en beweeg/schuif het loophulpmiddel naar voren.
3. Doe een stap naar voren terwijl u het loophulpmiddel stabiel houdt.

4.5 Pootverlengstukken gebruiken



WAARSCHUWING!

Risico op vallen

- Bij het gebruik van wielbevestigingen op de voorpoten moeten de verlengstukken van de achterpoten aangepast worden om de zijframes horizontaal te maken.
- Indien van toepassing, moeten de pootverlengstukken met wieltjes worden gemonteerd met de wielen aan de buitenkant van het loopframe.



Zie paragraaf "De hoogte aanpassen" voor meer informatie.

5 Onderhoud

5.1 Algemene informatie over onderhoud



WAARSCHUWING!

Gevaar voor lichamelijk letsel

- Onderhoud dient minstens eenmaal per jaar plaats te vinden.
- Gebruik het product niet als het defect is.
- Probeer nooit iets zelf te repareren. Neem voor reparaties contact op met uw leverancier.

5.2 Controlelijst voor inspectie

Inspecteer het product regelmatig voor een goede en veilige werking.

- Controleer of alle schroeven en aanpassingen goed vastzitten. (Indien van toepassing.)
- Controleer of alle handgrepen goed vastzitten. Gebruik het loophulpmiddel niet als de handgrepen loszitten. Instructies voor het wijzigen van handgrepen kunt u opvragen bij uw leverancier of Invacare-vertegenwoordiger.
- Controleer het frame en belaste onderdelen op barsten.
- Controleer de wielen regelmatig op loszitten, slijtage en beschadiging. (Indien van toepassing.)
- Zorg dat de wielen vrij zijn van haar, pluisjes en ander vuil. (Indien van toepassing.)
- Zorg ervoor dat de rubberen doppen en/of plastic glijdoppen niet gescheurd of versleten zijn, of ontbreken. (Indien van toepassing.)

5.3 Reiniging en desinfectie

Algemene veiligheidsinformatie



LET OP!

Besmettingsgevaar

- Tref voorzorgsmaatregelen voor uw eigen veiligheid en gebruik de juiste beschermingsuitrusting.



KENNISGEVING!

- Het gebruik van de verkeerde vloeistoffen of methoden kan het product aantasten of beschadigen.
- Alle gebruikte reinigings- en desinfecteringsmiddelen moeten effectief zijn, met elkaar gecombineerd kunnen worden en de te reinigen materialen beschermen.
 - Gebruik nooit bijtende vloeistoffen (zuren, basen enzovoort) of schurende reinigingsmiddelen. We raden u aan een gewoon huishoudelijk reinigingsmiddel zoals vaatwasmiddel te gebruiken, indien in de reinigingsinstructies geen ander middel wordt voorgeschreven.
 - Gebruik nooit een oplosmiddel (thinner, aceton en dergelijke) waardoor de structuur van de kunststof kan veranderen of labels kunnen loslaten.
 - Zorg altijd dat het product volledig droog is voordat u het weer in gebruik neemt.



Volg voor reiniging en desinfectie in klinische omgevingen of omgevingen voor langdurige zorg de intern ingestelde procedures.

Reinigingsintervallen



KENNISGEVING!

- Regelmatig reinigen en desinfecteren zorgt voor een soepele werking, verhoogt de levensduur en voorkomt besmetting.
- Reinig en desinfecteer dit product:
- regelmatig tijdens gebruik,
 - voor en na onderhoudswerkzaamheden;
 - als het in contact is gekomen met lichaamsvocht;
 - voordat een nieuwe gebruiker er gebruik van maakt.

Reinigingsinstructies

Het product kan in een wasmachine of handmatig worden gereinigd.


Richt de straal van een hogedrukreiniger of een normale waterslang niet op de lagers, afvoergaten of labels.

De maximale reinigingstemperatuur is 60 °C. Gebruik geen stoomreiniger.

1. Reinig het loophulpmiddel met een vochtige doek en een mild reinigingsmiddel.
2. Reinig de wielen met een borstel (geen staalborstel).
3. Droog het product af na het reinigen.

Instructies voor desinfecteren

Verzorging thuis

- Desinfectiemiddel: We raden aan een desinfectiemiddel op basis van alcohol te gebruiken (met 70-90% alcohol).
-  Lees de instructies op het label van het desinfectiemiddel. Hier vindt u informatie over het werkingsspectrum (bacteriën, schimmels en/of virussen), compatibiliteit van materialen en de juiste blootstellingstijd.

1. Controleer of de oppervlakken schoon zijn voordat u deze desinfecteert.
2. Bevochtig een zachte doek met desinfectiemiddel en veeg over alle toegankelijke oppervlakken. Houd deze vochtig gedurende de blootstellingstijd die staat vermeld op het label van het desinfecteermiddel.
3. Laat het product aan de lucht drogen.

Verzorging in een instelling

Volg de desinfectieprocedures van uw instelling op en gebruik uitsluitend desinfectiemiddelen en -methoden die hierin worden vermeld.

6 Na gebruik

6.1 Afvoeren

Wij hopen dat u voldoende milieubewust bent om dit product na de levensduur naar een afvalverwerkingsstation te brengen.

Haal het product en de onderdelen ervan uit elkaar, zodat de verschillende materialen afzonderlijk kunnen worden gerecycled.

Gebruikte producten en verpakkingen moeten worden afgevoerd en gerecycled overeenkomstig de wet- en regelgeving voor afvalverwerking in het betreffende land. Neem contact op met uw plaatselijke afvalverwerkingsbedrijf voor meer informatie.

6.2 Geschikt maken voor hergebruik

Dit product is geschikt voor hergebruik. Om het product voor een nieuwe gebruiker gebruiksklaar te maken, voert u de volgende handelingen uit:

- Inspectie
- Schoonmaken en desinfecteren


Zie 5 *Onderhoud*, pagina 38 voor gedetailleerde informatie.

Zorg ervoor dat de gebruikershandleiding samen met het product wordt overhandigd.

Hergebruik het product niet als er schade of afwijkingen zijn geconstateerd.

7 Technische Specificaties

7.1 Afmetingen en gewichten

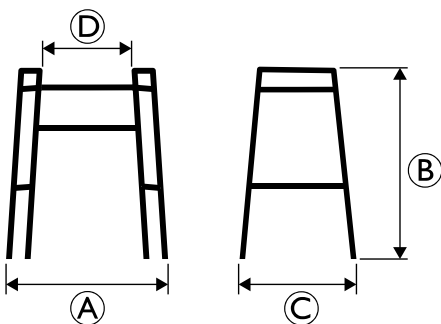

	P409 Asteria
Totale breedte A	605-625 mm
Totale hoogte B	770-945 mm
Totale diepte C	440-465 mm
Breedte tussen de handgrepen D	440 mm
Gewicht	3 kg
Max. gebruikersgewicht	135 kg

Voor alle afmetingen gelden bepaalde toleranties.

7.2 Materiaal

Frame	Geanodiseerd aluminium
Handgrepen	TPE
Schroeven	Staal, roestwerend

pt

1 Geral

1.1 Introdução

Este manual de utilização contém informações importantes sobre o manuseamento do produto. Para garantir a segurança durante a utilização do produto, leia atentamente o manual de utilização e siga as instruções de segurança.

A Invacare reserva-se o direito de alterar as especificações do produto sem aviso prévio.

Antes de ler este documento, certifique-se de que tem a versão mais recente. A versão mais recente está disponível no site da Invacare, em formato PDF.

Se o tamanho do tipo de letra no documento impresso for difícil de ler, pode transferir uma versão em PDF do manual a partir do site. A imagem do PDF pode ser ajustada no ecrã para um tamanho de tipo de letra que lhe seja mais cómodo.

Em caso de incidente grave com o produto, deve informar o fabricante e as autoridades competentes do seu país.

1.2 Símbolos neste documento

Este documento inclui símbolos e palavras de sinalização que se aplicam a riscos ou práticas perigosas que podem resultar em lesões pessoais ou danos materiais. Consulte as informações abaixo para obter as definições das palavras de sinalização.



ADVERTÊNCIA

Indica uma situação perigosa que, se não for evitada, poderá resultar em morte ou em lesão grave.



ATENÇÃO

Indica uma situação perigosa que, se não for evitada, poderá resultar em lesões menores ou ligeiras.



AVISO

Indica uma situação perigosa que, se não for evitada, poderá resultar em danos à propriedade.



Sugestões e recomendações

Fornece sugestões, recomendações e informações úteis para uma utilização eficiente e isenta de problemas.

Outros símbolos

(Não se aplica a todos os manuais)



Responsável no Reino Unido

Indica que um produto não foi fabricado no Reino Unido.



Pessoa e três setas

Indica regras de reciclagem e separação (apenas relevante em França).

1.3 Conformidade

A qualidade é fundamental para o funcionamento da empresa, estando em conformidade com a norma ISO 13485.

Este produto apresenta a marcação CE, em conformidade com o Regulamento de dispositivos médicos 2017/745, Classe I.

Temos empreendido um esforço contínuo para reduzir ao mínimo o impacto local e global da empresa no ambiente.

Apenas utilizamos materiais e componentes que cumprem a diretiva REACH.

1.4 Vida útil

A vida útil prevista deste produto é de cinco anos, quando o mesmo é utilizado diariamente e em conformidade com as instruções de segurança, intervalos de manutenção e utilização correcta indicados neste manual. A vida útil efectiva pode variar de acordo com a frequência e intensidade de utilização.

1.5 Informações da garantia

Facultamos uma garantia de fabrico para o produto, em conformidade com os nossos Termos e Condições Gerais de Compra nos respetivos países.

As reclamações de garantia só podem ser realizadas através do fornecedor ao qual o produto foi adquirido.

1.6 Limitação de responsabilidade

A Invacare não aceita a responsabilidade por danos decorrentes de:

- Incumprimento das instruções presentes no manual de utilização
- Utilização incorreta
- Desgaste natural devido ao uso
- Montagem ou preparação incorreta pelo comprador ou por terceiros
- Modificações técnicas
- Modificações não autorizadas e/ou utilização de peças sobressalentes desadequadas

2 Segurança

2.1 Informações gerais de segurança



ADVERTÊNCIA!

Risco de lesão grave ou danos

A utilização incorreta deste produto pode causar lesões ou danos.

- Se não compreender as advertências, avisos ou instruções, contacte um profissional de cuidados de saúde ou o fornecedor antes de tentar utilizar este equipamento.
- Não utilize este produto ou qualquer equipamento opcional disponível sem primeiro ler e compreender estas instruções e todo o material de instrução adicional, assim como os manuais de utilização, os manuais de assistência ou os folhetos de instruções fornecidos com este produto ou com equipamento opcional.



ADVERTÊNCIA!

Risco de lesão grave

A utilização incorreta do produto pode resultar em situações perigosas.

- Não utilize o produto em escadas normais ou em escadas rolantes.
- Não se coloque de pé em cima do produto.
- Tenha cuidado ao caminhar em superfícies inclinadas, escorregadias ou irregulares.
- Evite caminhar na direção de obstáculos, tanto para trás como para a frente.
- Não deixe as crianças brincarem com o produto
- Não se sente na barra transversal nem utilize a barra transversal como apoio.



ADVERTÊNCIA!

Risco de lesões

Uma carga desequilibrada ou pesada pode levar à capotagem.

- Não pendure quaisquer cargas, como sacos, no chassis.



ATENÇÃO!

Risco de lesão

Peças não originais ou incorretas podem afetar o funcionamento e a segurança do produto.

- Utilize apenas peças originais para o produto em utilização.
- Devido a diferenças regionais, consulte o site ou o catálogo local da Invacare para obter informações sobre as opções disponíveis ou contacte o seu representante local da Invacare. Consulte os endereços no final deste documento.



ATENÇÃO!

Risco de queimaduras de primeiro grau

As peças do produto podem aquecer quando são expostas a temperaturas elevadas (acima de 41 °C).

- Tenha cuidado se o produto for exposto a altas temperaturas, por exemplo, a luz solar direta.



AVISO!

Existe o risco de danos devido a desgaste, por exemplo, corrosão.

- Não utilize o produto debaixo de água, por exemplo, em piscinas.
- Não utilize o produto em áreas quentes como saunas.
- Não armazene o produto em ambientes húmidos ou molhados.

3 Descrição geral do produto

3.1 Utilização prevista

O acessório de marcha destina-se a apoiar uma pessoa durante a marcha.

O acessório de marcha é adequado para utilização em interiores e exteriores em terreno plano.

O utilizador previsto é um adulto com o peso máximo indicado na etiqueta do produto e no capítulo 7 *Características Técnicas, página 43*.

3.2 Indicações de utilização

Indicações


Pessoas com pouca força muscular e/ou equilíbrio, que precisam de apoio adicional para caminhar. A capacidade de marcha restante e a faculdade cognitiva têm de ser suficientes para uma utilização segura de um acessório de marcha.

Contraindicações

Pessoas com problemas de equilíbrio graves ou perturbações funcionais da percepção.

3.3 Etiquetas e símbolos no produto

Placa de características

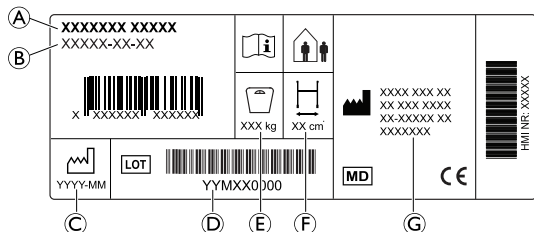

- Ⓐ Nome do produto
- Ⓑ Número de peça
- Ⓒ Data de fabrico
- Ⓓ Número do LOTE
- Ⓔ Peso máximo do utilizador
- Ⓕ Largura máxima
- Ⓖ Morada do fabricante

Símbolos

	Conformidade Europeia		Dispositivo médico
	Fabricante		Ler o manual de utilização
	Data de fabrico		Número de LOTE
	Largura máxima		Peso máximo do utilizador
	Utilização no interior/externo		

4 Utilização

4.1 Antes da utilização



ATENÇÃO!

Risco de lesões ou danos materiais

- Antes da utilização, verifique a funcionalidade geral do produto.
- Antes da utilização, verifique se o produto apresenta algum defeito.
- Não utilize um produto defeituoso.

A Invacare presume que um profissional de cuidados de saúde fez uma avaliação individual do utilizador para determinar o nível de risco ou os requisitos de terapia. Os fornecedores e os prestadores de cuidados avaliaram que o produto fornece o apoio necessário e que os seus ajustes são adequados para o utilizador. O prestador de cuidados e o utilizador foram devidamente formados por um profissional de cuidados de saúde sobre como utilizar o produto de forma correta e segura.


4.2 Encarte e abertura



AVISO!

Desconforto/lesões ligeiras

- Tenha cuidado para evitar o risco de trilhamento.

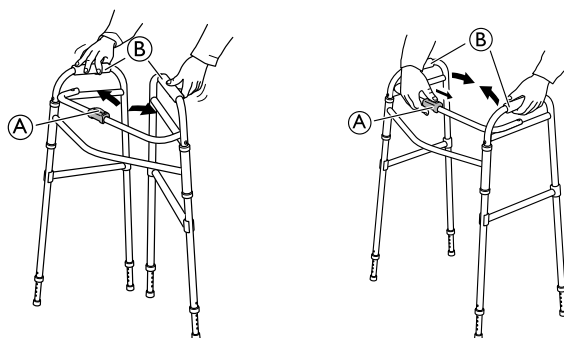

Abertura para a posição de funcionamento

1. Pressione os chassis laterais Ⓑ para fora até o mecanismo de dobragem Ⓐ engatar com um claro estalido.
2. Tente pressionar os chassis laterais Ⓑ para dentro para assegurar que o mecanismo de dobragem Ⓐ está engatado.

Dobragem

1. Pressione o mecanismo de bloqueio Ⓐ e encarte os chassis laterais Ⓑ para dentro.

4.3 Ajuste da altura



AVISO!

Altura recomendada



- Os manípulos devem ficar posicionados à altura do pulso quando o utilizador está de pé e direito, com os braços relaxados. O terapeuta poderá sugerir alturas diferentes conforme as necessidades específicas do cliente.



AVISO!

Desconforto/lesões ligeiras

- Tenha cuidado para evitar o risco de trilhamento.

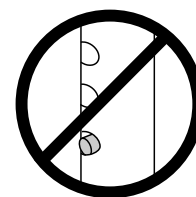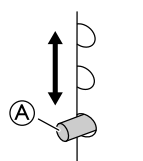

1. Prima o botão de fecho Ⓐ.
2. Mova a extensão para cima ou para baixo até obter a altura pretendida.
3. Faça com que o botão de fecho Ⓐ se encaixe no orifício seguinte. Certifique-se de que o botão está completamente engatado com um estalido audível.

4.4 Marcha

1. Posicione-se de pé entre os dois chassis laterais e coloque as duas mãos nos manípulos.
2. Sem alterar a sua posição, desloque/deslize o acessório de marcha para a frente.
3. Dê um passo em frente, enquanto mantém o acessório de marcha fixo.

4.5 Utilizar as extensões das pernas



ADVERTÊNCIA! Risco de queda

- Quando utilizar encaixes com rodas nas pernas dianteiras, as extensões das pernas traseiras têm de ser ajustadas de modo a nivelar as armações laterais.
- Quando aplicável, as extensões das pernas com rodas têm de ser instaladas com as rodas no lado exterior do andarilho.

Para obter mais informações, consulte a secção "Ajuste da altura".

5 Manutenção

5.1 Informações gerais sobre manutenção



ADVERTÊNCIA! Risco de lesões

- O procedimento de manutenção deve ser realizado pelo menos uma vez por ano.
- Não utilize um produto defeituoso.
- Não tente reparar o produto. Em caso de necessidade de reparação, contacte o seu fornecedor.

5.2 Lista de verificação da inspeção

Para garantir um bom desempenho e a segurança do produto, inspecione-o regularmente.

- Certifique-se de que todos os parafusos e ajustes estão bem apertados. (Se aplicável)
- Certifique-se de que as pegas estão apertadas. Se as pegas estiverem soltas, não utilizar o acessório de marcha. As instruções sobre como substituir as pegas podem ser obtidas junto do seu fornecedor ou distribuidor Invacare.
- Verifique o chassis e as peças carregadas quanto a fissuras.
- Verifique se as rodas estão bem ajustadas ou se apresentam desgaste e danos. (Se aplicável)
- Assegurar que as rodas não apresentam cabelos, algodão e outros resíduos. (Se aplicável)
- Assegure que as extremidades de borracha e/ou as pontas de deslizamento de plástico não estão rasgadas, desgastadas ou em falta. (Se aplicável)

5.3 Limpeza e desinfeção

Informações gerais de segurança



ATENÇÃO! Risco de contaminação

- Tome precauções pessoais e utilize equipamento de proteção apropriado.



AVISO!

- Métodos ou fluidos errados podem prejudicar ou danificar o produto.
- Todos os agentes de limpeza e desinfetantes utilizados devem ser eficazes, compatíveis entre si e passíveis de proteger os materiais aos quais são aplicados para limpeza.
 - Nunca utilize líquidos corrosivos (alcalinos, ácidos, etc.) ou agentes de limpeza abrasivos. Recomendamos um agente de limpeza doméstico normal, como detergente da loiça, se não houver especificações em contrário nas instruções de limpeza.
 - Nunca utilize um solvente (diluente celulósico, acetona, etc.) que altere a estrutura do plástico ou dissolva as etiquetas afixadas.
 - Certifique-se sempre de que o produto está completamente seco antes de o pôr novamente em funcionamento.



Para a limpeza e desinfeção em ambientes de cuidados clínicos ou de longa duração, siga os procedimentos internos.

Intervalos de limpeza



AVISO!

- A limpeza e a desinfeção regulares melhoram o funcionamento correto, aumentam a vida útil e evitam a contaminação.
- Limpe e desinfete o produto:
- regularmente enquanto está a ser utilizado,
 - antes e depois de qualquer operação de assistência,
 - depois de ter estado em contacto com quaisquer fluidos corporais,
 - e antes da sua utilização por um novo utilizador.

Instruções de limpeza

O produto pode ser limpo numa máquina de lavar ou à mão.

Ao utilizar um líquido de limpeza a alta pressão ou um jato de água normal, não aponte o jato para os rolamentos, os orifícios de drenagem ou as etiquetas.

A temperatura máxima de limpeza é de 60 °C. Não utilize um aparelho de limpeza a vapor.

1. Limpe o acessório de marcha com um pano húmido e um detergente suave.
2. Limpe as rodas com uma escova (não utilize uma escova metálica).
3. Após a limpeza, seque o produto com um pano.

Instruções de desinfeção

Em cuidados domiciliários

- Desinfetante: Recomendamos a utilização de um desinfetante à base de álcool (com álcool a 70%-90%).



Leia as instruções na etiqueta do desinfetante. Fornece informações sobre o espectro de atividade (bactérias, fungos e/ou vírus), a compatibilidade com materiais e o tempo de exposição correto.

1. Certifique-se de que as superfícies são limpas antes da desinfeção.
2. Humedeça um pano macio e utilize-o para desinfetar todas as superfícies acessíveis, mantendo-as humedecidas durante o tempo de exposição indicado na etiqueta do desinfetante.
3. Deixe o produto secar ao ar.

Siga os procedimentos de desinfecção internos e utilize apenas os desinfetantes e métodos especificados.

6 Após a utilização

6.1 Eliminação

Seja amigo do ambiente e recicle este produto no fim da respetiva vida útil através das instalações de reciclagem existentes.

Desmonte o produto e os seus componentes, para que os diferentes materiais possam ser separados e reciclados individualmente.

A eliminação e a reciclagem de produtos utilizados e da embalagem devem cumprir as leis e os regulamentos relativos à gestão de resíduos de cada país. Para obter informações, contacte a empresa de gestão de resíduos local.

6.2 Recondicionamento

Este produto é adequado para reutilização. Para o recondicionamento do produto para um novo utilizador, execute as seguintes ações:

- Inspeção
- Limpeza e desinfecção


Para obter informações detalhadas, consulte a secção 5 *Manutenção, página 42*.

Certifique-se de que o manual de utilização é fornecido com o produto.

Se forem detetados danos ou avarias, não reutilize o produto.

7 Características Técnicas

7.1 Dimensões e pesos

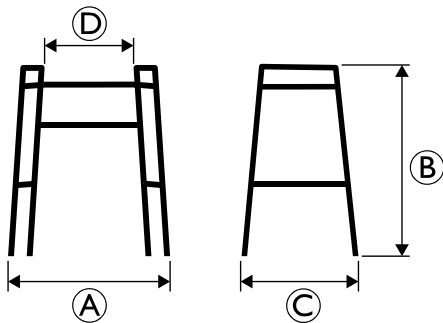

	P409 Asteria
Largura total A	605–625 mm
Altura total B	770–945 mm
Profundidade total C	440–465 mm
Largura entre manípulos D	440 mm
Peso	3 kg
Peso máximo do utilizador	135 kg

Todas as dimensões estão sujeitas a determinadas tolerâncias.

7.2 Material

Estrutura	Alumínio anodizado
Pegas	TPE
Parafusos	Aço com proteção antiferrugem

1 Opće informacije

1.1 Uvod

Ovaj korisnički priručnik sadrži važne informacije o rukovanju proizvodom. Da biste proizvod sigurno upotrebljavali, pažljivo pročitajte korisnički priručnik i slijedite sigurnosne upute.

Invacare pridržava pravo na izmjene specifikacija proizvoda bez obavijesti.

Prije čitanja ovog dokumenta provjerite imate li najnoviju verziju. Najnoviju verziju možete u obliku PDF-a pronaći na web-mjestu tvrtke Invacare.

Ako vam je teško čitati veličinu fonta u tiskanom dokumentu, možete ga preuzeti u obliku PDF-a s web-mjesta. Veličinu fonta u PDF-u potom možete na zaslону promijeniti u onu koja vam odgovara.

U slučaju teške nezgode s ovim proizvodom trebate o tome obavijestiti proizvođača i nadležno tijelo u svojoj zemlji.

1.2 Simboli u ovom dokumentu

Simboli i signalne riječi u ovom se dokumentu upotrebljavaju i primjenjuju na upozorenja ili nesigurne postupke koji bi mogli dovesti do tjelesne ozljede ili oštećenja imovine. Definicije signalnih riječi potražite u informacijama u nastavku.



UPOZORENJE

Označava opasnu situaciju koja, ako se ne izbjegne, može prouzročiti tešku ozljedu ili smrt.



OPREZ

Označava opasnu situaciju koja, ako se ne izbjegne, može prouzročiti lakšu ozljedu.



OBAVIJEST

Označava opasnu situaciju koja, ako se ne izbjegne, može prouzročiti oštećenje imovine.



Savjeti i preporuke

Sadrže korisne savjete, preporuke i informacije za učinkovitu upotrebu bez smetnji.

Drugi simboli

(Nije primjenjivo za sve priručnike)



Osoba odgovorna za UK

Označava u slučaju da proizvod nije proizveden u UK.



Triman

Označava pravila za recikliranje i sortiranje (relevantan samo za Francusku).

1.3 Usklađenost

Kvaliteta je od ključne važnosti u radu tvrtke; radi se u okviru standarda ISO 13485.

Ovaj proizvod nosi oznaku CE u skladu s Uredbom o medicinskim uređajima 2017/745, klasa I.

Neprekidno radimo na tome da se utjecaj tvrtke na okoliš svede na najmanju moguću mjeru, u lokalnom i globalnom smislu.

Upotrebljavamo isključivo materijale i dijelove koji su usklađeni s direktivom REACH.

1.4 Radni vijek

Očekivani je radni vijek ovog proizvoda pet godina ako se upotrebljava svakodnevno te u skladu sa sigurnosnim uputama, održava u preporučenim intervalima i koristi za predviđenu namjenu, kako je navedeno u ovom priručniku.

Učinkoviti radni vijek može varirati, ovisno o učestalosti i intenzitetu upotrebe.

1.5 Informacije o jamstvu

Pružamo jamstvo proizvođača za proizvod u skladu s Općim odredbama i uvjetima tvrtke u odgovarajućim zemljama.

Jamstvo se može koristiti samo putem dobavljača kod kojeg je proizvod nabavljen.

1.6 Ograničenje odgovornosti

Invacare ne prihvaća odgovornost za oštećenja koje proizlaze iz:

- nepridržavanja korisničkog priručnika
- nepravilne upotrebe
- istrošenosti do koje dolazi prirodnim putem
- neispravnog sklapanja ili postavljanja koje vrši kupac ili treća strana
- tehničkih preinaka
- neovlaštenih preinaka i/ili korištenja neodgovarajućih rezervnih dijelova

2 Sigurnost

2.1 Općenite informacije o sigurnosti



UPOZORENJE!

Opasnost od ozbiljne ozljede ili oštećenja

Nepravilna upotreba ovog proizvoda može dovesti do ozljede ili oštećenja.

- Ako ne razumijete upozorenja, mjere opreza ili upute, obratite se zdravstvenom djelatniku ili dobavljaču prije pokušaja upotrebe ove opreme.
- Ne upotrebljavajte ovaj proizvod ili bilo koju dostupnu dodatnu opremu ako niste prethodno u cijelosti pročitali i razumjeli ove upute i bilo koji dodatni materijal s uputama isporučeni s ovim proizvodom ili dodatnom opremom, kao što je korisnički priručnik, priručnik za servisiranje ili list s uputama.



UPOZORENJE!

Opasnost od teških ozljeda

Nepravilna upotreba može prouzročiti opasne situacije.

- Proizvod nemojte koristiti na stepenicama ili pokretnim stepenicama.
- Nemojte stajati na proizvodu.
- Budite oprezni kad hodate po kosoj ili skliskoj ili neravnoj površini.
- Izbjegavajte hodanje uz prepreke, prema naprijed i prema natrag.
- Nemojte dopustiti djeci da se igraju proizvodom
- Nemojte sjediti na poprečnim polugama niti ih koristiti za podupiranje.



UPOZORENJE!

Opasnost od ozljede

Neuravnotežen ili težak teret može dovesti do prevrtanja

- Ne vješajte teret, primjerice vrećice, na okvir.



OPREZI!

Opasnost od ozljede

Neoriginalni ili pogrešni dijelovi mogu utjecati na funkciju i sigurnost proizvoda.

- Upotrebljavajte isključivo originalne dijelove namijenjene korištenom proizvodu.
- Zbog regionalnih razlika, provjerite lokalni katalog tvrtke Invacare ili web-mjesto za dostupnu dodatnu opremu ili kontaktirajte lokalnog predstavnika tvrtke Invacare. Pogledajte adrese na kraju ovog dokumenta.



OPREZI!

Opasnost od opekline prvog stupnja

Dijelovi proizvoda mogu se zagrijati ako su izloženi visokim temperaturama (iznad 41 °C).

- Budite oprezni ako je proizvod izložen visokim temperaturama, npr. izravnoj sunčevoj svjetlosti.



OBAVIJEST!

Postoji opasnost od oštećenja zbog trošenja, npr. nagrizanja.

- Ne koristite proizvod pod vodom, npr. u bazenima.
- Ne koristite proizvod u vrućim područjima kao što su saune.
- Ne pohranjujte proizvod u mokrom ili vlažnom okolišu.

3 Pregled proizvoda

3.1 Namjena

Pomagalo pri kretanju namijenjeno je za pomoć tijekom hodanja.

Pomagalo pri kretanju prikladno je u zatvorenom i na otvorenom na ravnom tlu.

Namijenjeno je odraslim osobama s maksimalnom težinom korisnika kako je navedeno na oznaci proizvoda i u poglavlju 7 Tehnički Podaci, stranica 46.

3.2 Indikacije za upotrebu

Indikacije


Osobe narušene snage mišića i/ili ravnoteže kojima treba dodatna podrška tijekom hodanja. Sposobnost hodanja i kognitivne sposobnosti moraju biti dovoljne za sigurno korištenje pomagala pri kretanju.

Kontraindikacije

Osobe s težim problemima s ravnotežom ili poremećajima percepcije.

3.3 Oznake i simboli na proizvodu

Identifikacijska oznaka

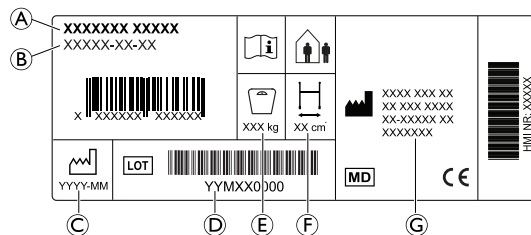

A Naziv proizvoda

B Broj dijela

C Datum proizvodnje

D LOT broj

E Najveća dopuštena težina korisnika

F Najveća dopuštena širina

G Adresa proizvođača

Simboli

	Europska sukladnost		Medicinski proizvod
	Proizvođač		Pročitajte korisnički priručnik
	Datum proizvodnje		LOT broj
	Najveća dopuštena širina		Najveća dopuštena težina korisnika
	Za upotrebu u zatvorenom/otvorenom prostoru		

4 Upotreba

4.1 Prije upotrebe



OPREZI!

Opasnost od ozljede ili oštećenja imovine

- Prije korištenja provjerite opću funkcionalnost proizvoda.
- Prije korištenja provjerite ima li na proizvodu bilo kakvih oštećenja.
- Ne koristite neispravan proizvod.

Invacare pretpostavlja da je zdravstveni djelatnik izvršio individualnu procjenu korisnika kako bi utvrdio razinu opasnosti ili potrebu za terapijom. Dobavljači i skrbnici procijenili su da proizvod daje potrebnu podršku te da su postavke proizvoda prilagođene korisniku. Zdravstveni radnik je na primjeren način obučio skrbnika i korisnika o pravilnom i sigurnom korištenju proizvoda.


4.2 Sklapanje i rasklapanje



OBAVIJEST!

Neugoda / manje masnice

- Imajte na umu opasnost od priklještenja.

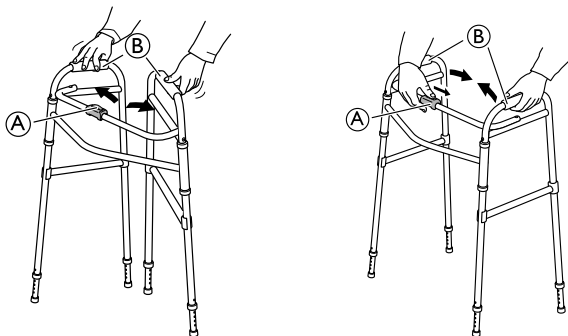

Rasklapanje u položaj za rad

1. Pogurnite bočne stalke ② prema van dok ne začujete da je mehanizam za blokiranje ① sjeo na mjesto.
2. Pokušajte pogurnuti bočne stalke ② prema unutra kako biste provjerili je li mehanizam za blokiranje ① sjeo na mjesto.

Sklapanje

1. Pritisnite dolje mehanizam za blokiranje ① i sklopite bočne okvire ② prema unutra.

4.3 Podešavanje visine



OBAVIJEST!

Preporučena visina



- Ručke trebate postaviti na visinu zapešća u uspravljenom položaju s opuštenim rukama. Terapeut može predložiti drugačiju visinu ovisno o specifičnim potrebama korisnika.



OBAVIJEST!

Neugoda / manje masnice

- Imajte na umu opasnost od priklještenja.

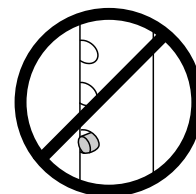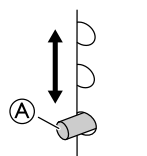

1. Pritisnite kopču ①.
2. Povucite produžetak gore ili dolje dok ne dostigne željenu visinu.
3. Kopča ① treba škljocnuti u sljedeći otvor. Kopča mora dobro nasjesti i morate čuti škljocaj.

4.4 Hodanje

1. Stanite između dvaju bočnih stalaka i stavite obje ruke na ručke.
2. Stanite mirno i pomaknite/pogurnite pomagalo pri hodaњу prema naprijed.
3. Zakoračite prema naprijed držeći pomagalo pri hodaњу u mjestu.

4.5 Korištenje produžetaka za noge



UPOZORENJE!

Opasnost od padanja

- Kad nastavke s kotačima koristite na prednjim nogama, produžetke za stražnje noge morate podesiti tako da bočni stalci budu na istoj razini.
- Produžetke za noge s kotačima, ako ih koristite, morate montirati tako da kotači budu s vanjske strane hodalicestalka za hodaње.



Podrobnije informacije potražite u odjeljku „Podešavanje visine”.

5 Održavanje

5.1 Opće informacije o održavanju



UPOZORENJE!

Opasnost od ozljede

- Održavanje bi trebalo provoditi najmanje jednom godišnje.
- Ne koristite neispravan proizvod.
- Nemojte sami obavljati popravke. Za popravke se obratite dobavljaču.

5.2 Popis za kontrolu

Kako bi se osigurala dobra funkcionalnost i sigurnost, proizvod redovito kontrolirajte.

- Provjerite jesu li svi vijci i točke podešavanja ispravno zategnuti. (Ako je primjenjivo)
- Provjerite jesu li ručke za guranje pričvršćene. Ako su ručke olabavljene, nemojte koristiti pomagalo pri kretanju. Upute za promjenu ručki možete dobiti od dobavljača ili distributera tvrtke Invacare.

- ❑ Pregledajte ima li oštećenja na okviru i dijelovima pod opterećenjem.
- ❑ Pregledajte jesu li kotači pričvršćeni, istrošeni ili oštećeni. (Ako je primjenjivo)
- ❑ Na kotačima ne smije biti vlasi, vlakana i drugih ostataka. (Ako je primjenjivo)
- ❑ Provjerite jesu li gumeni vrhovi i/ili vrhovi plastičnih klizača poderani, istrošeni ili nedostaju. (Ako je primjenjivo)

5.3 Čišćenje i dezinfekcija

Općenite informacije o sigurnosti



OPREZ!

Opasnost od kontaminacije

– Poduzmite mjere opreza za vlastitu zaštitu i upotrijebite odgovarajuću zaštitnu opremu.



OBAVIJEST!

Upotrebom pogrešnih tekućina ili načina čišćenja proizvod se može oštetiti.

- Sva sredstva za čišćenje i sredstva za dezinfekciju moraju biti učinkovita, međusobno kompatibilna i moraju štiti materijale za čije se čišćenje upotrebljavaju.
- Nikad ne upotrebljavajte nagrizajuće tekućine (lužine, kiselinu itd.) ili abrazivna sredstva za čišćenje. Preporučujemo uobičajeno kućansko sredstvo za čišćenje kao što je tekući deterdžent za suđe, ako u uputama za čišćenje nije navedeno nešto drugo.
- Nikada ne upotrebljavajte otapalo (celulozni razrjeđivač, aceton itd.) koje mijenja strukturu plastike ili otapa pričvršćene oznake.
- Uvijek provjerite je li se proizvod potpuno osušio prije ponovne upotrebe.



Za čišćenje i dezinfekciju u okruženjima za kliničku ili dugotrajnu skrb slijedite postupke svoje ustanove.

Intervali za čišćenje



OBAVIJEST!

Redovito čišćenje i dezinfekcija pospješuje pravilan rad, produljuje vijek trajanja i sprječava kontaminaciju.

Čistite i dezinficirajte proizvod:

- redovito dok se upotrebljava,
- prije i poslije svakog servisnog zahvata,
- kada je bio u dodiru s tjelesnim tekućinama,
- prije upotrebe s novim korisnikom.

Upute za čišćenje

Proizvod se može očistiti u perilici ili ručno.


Pri korištenju visokotlačnog čistača ili uobičajenog mlaza vode, ne usmjeravajte mlaz prema ležajevima, odvodnim rupama ili naljepnicama.

Najveća dopuštena temperatura čišćenja je 60 °C. Ne koristite se parnim čistačem.

1. Čistite pomagalo pri kretanju vlažnom krpom i blagim deterdžentom.
2. Kotače očistite četkom (ne upotrebljavajte četku od žice).
3. Nakon čišćenja dobro obrišite proizvod.

Upute za dezinfekciju

U kućnoj njezi

- Sredstvo za dezinfekciju: Preporučujemo korištenje sredstva za dezinfekciju površina na bazi alkohola (sa 70 – 90 % alkohola).
-  Pročitajte upute na naljepnici dezinficijensa. Pružaju informacije o spektru aktivnosti (bakterije, gljivice i/ili virusi), kompatibilnosti materijala i točnom vremenu izlaganja.

1. Površine moraju biti očišćene prije dezinfekcije.
2. Navlažite meku krpu i obrišite-dezinficirajte sve dostupne površine i držite ih vlažnima tijekom vremena izloženosti navedenog na naljepnici dezinficijensa.
3. ostavite proizvod da se osuši na zraku.

Skrb unutar ustanove

Slijedite postupke za dezinfekciju svoje ustanove i upotrebljavajte isključivo propisana sredstva za dezinfekciju i metode dezinfekcije.

6 Nakon upotrebe

6.1 Odlaganje otpada

Budite ekološki osviješteni i reciklirajte ovaj proizvod u centru za reciklažu kad mu istekne vijek trajanja.

Rastavite proizvod i njegove dijelove kako biste razdvojili različite materijale i reciklirali ih zasebno.

Odlaganje i recikliranje korištenih proizvoda i ambalaže mora biti u skladu sa zakonima i propisima za zbrinjavanje otpada u pojedinoj zemlji. Informacije možete dobiti od lokalne tvrtke za zbrinjavanje otpada.

6.2 Priprema za ponovnu upotrebu

Ovaj je proizvod prikladan za ponovnu upotrebu. Prilikom pripreme proizvoda za novog korisnika provedite sljedeće radnje:

- Kontrola
- Čišćenje i dezinfekcija


Za detaljne informacije pogledajte *5 Održavanje, stranica 45*.

Korisnički priručnik obavezno predajte s proizvodom.

Ako pronađete oštećenje ili kvar, ne koristite proizvod.

7 Tehnički Podaci

7.1 Dimenzije i težine

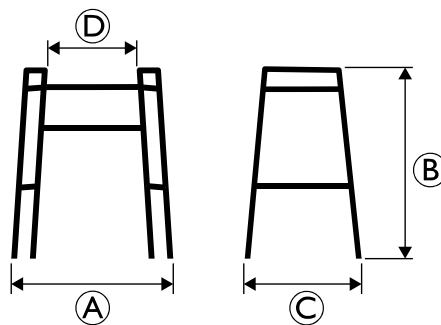

	P409 Asteria
Ukupna širina A	605 – 625 mm
Ukupna visina B	770 – 945 mm
Ukupna dubina C	440 – 465 mm
Širina između ručki D	440 mm

	P409 Asteria
Težina	3 kg
Najveća dopuštena težina korisnika	135 kg

Sve dimenzije podliježu određenim odstupanjima.

7.2 Materijali

Okvir	anodizirani aluminij
Ručke	TPE
Vijci	čelik, nehrđajući

1 Informații generale

1.1 Introducere

Acest manual de utilizare conține informații importante despre manipularea produsului. Pentru a garanta siguranța în timpul utilizării produsului, citiți cu atenție manualul de utilizare și respectați instrucțiunile de siguranță.

Invacare își rezervă dreptul de a modifica specificațiile produsului fără notificare suplimentară.

Înainte de a citi acest document, asigurați-vă că aceasta este cea mai recentă versiune. Găsiți cea mai recentă versiune în format PDF pe site-ul web Invacare.

Dacă dimensiunea fontului din documentul imprimat face ca cititul să fie dificil, puteți descărca versiunea în format PDF de pe site-ul web. Fișierul PDF poate fi mărit pe ecran până la o dimensiune a fontului mai confortabilă pentru dumneavoastră.

În cazul unui incident grav în care este implicat produsul, trebuie să informați producătorul și autoritatea competentă din țara dumneavoastră.

1.2 Simbolurile din acest document

În acest document sunt utilizate simboluri și cuvinte de atenționare care marchează pericolele și practicile ce nu prezintă siguranță și care ar putea avea ca rezultat vătămări corporale sau pagube materiale. Consultați informațiile de mai jos pentru definiții ale cuvintelor de atenționare.

Acest document este tipărit în tonuri de gri. Vă informăm că mesajele de siguranță au următorul cod de culoare conform ANSI Z535.6: Pericol (roșu), Avertisment (portocaliu), Atenție (galben) și Notificare (albastru).



AVERTISMENT

Indică o situație periculoasă care, dacă nu este evitată, ar putea conduce la vătămare gravă sau deces.



ATENȚIE

Indică o situație periculoasă care, dacă nu este evitată, ar putea conduce la vătămare minoră sau ușoară.



NOTIFICARE

Indică o situație potențial periculoasă, care, dacă nu este evitată, poate conduce la pagube materiale.



Sfaturi și recomandări

Oferă sfaturi, recomandări și informații utile pentru utilizarea eficientă și fără probleme.

Alte simboluri

(Nu se aplică pentru toate manualele)

1516319-G



Persoană responsabilă din Regatul Unit
Indică dacă un produs nu este fabricat în Regatul Unit.



Triman
Indică regulile de reciclare și sortare (relevante doar pentru Franța).

1.3 Conformitate

Calitatea este fundamentală pentru activitatea companiei, în conformitate cu disciplinele prevăzute în ISO 13485.

Acest produs prezintă marcajul CE, în conformitate cu Reglementarea privind dispozitivele medicale 2017/745 Clasa I.

Depunem eforturi continue pentru a ne asigura că impactul companiei asupra mediului, la nivel local și la nivel global, este redus la minimum.

Folosim exclusiv materiale și componente conforme cu REACH.

1.4 Durata de viață

Durata de viață prevăzută pentru acest produs este de cinci ani, în condiții de utilizare zilnică a produsului, în conformitate cu instrucțiunile de siguranță, intervalele de întreținere și instrucțiunile de utilizare corespunzătoare prezentate în acest manual. Durata de viață efectivă poate varia în funcție de frecvența și intensitatea utilizării.

1.5 Informații privind garanția

Oferim pentru produs o garanție a producătorului în conformitate cu Termenii și condițiile noastre generale de afaceri pentru țările respective.

Solicitățile de garanție se pot realiza doar prin intermediul furnizorului de la care a fost procurat produsul.

1.6 Limitarea răspunderii

Invacare nu își asumă răspunderea pentru daunele rezultate din:

- Nerespectare a manualului de utilizare
- Utilizare incorectă
- Uzură naturală
- Asamblare incorectă sau montare de către cumpărător sau o parte terță
- Modificări tehnice
- Modificări neautorizate și/sau utilizare de piese de schimb necorespunzătoare

2 Siguranță

2.1 Informații generale privind siguranța



AVERTISMENT!

Pericol de vătămare gravă sau deteriorare

Utilizarea necorespunzătoare a acestui produs poate provoca vătămări sau deteriorări.

- Dacă nu înțelegeți avertismentele, atenționările sau instrucțiunile, contactați un profesionist în domeniul sănătății sau furnizorul înainte de a încerca să utilizați acest echipament.
- Nu utilizați acest produs și niciun alt echipament opțional disponibil fără ca, mai întâi, să citiți și să înțelegeți complet aceste instrucțiuni și orice materiale de instruire suplimentare, precum manualul de utilizare, manualul de service sau fișa de instrucțiuni primite cu acest produs sau cu echipamentul opțional.



AVERTISMENT!

Risc de vătămare gravă

Utilizarea incorectă poate duce la situații periculoase.

- Nu utilizați produsul pe scări sau scări rulante.
- Nu vă așezați pe produs.
- Aveți grijă atunci când mergeți pe teren înclinat sau alunecos sau pe suprafețe neregulate.
- Evitați să vă deplasați înainte sau înapoi împingând obstacole.
- Nu lăsați copiii să se joace cu produsul
- Nu vă așezați pe bara transversală și nu o utilizați ca suport.



AVERTISMENT!

Risc de vătămare

Încărcăturile dezechilibrate sau grele pot provoca răsturnarea

- Nu atârnați de cadru încărcături, cum ar fi gențile.



ATENȚIE!

Risc de vătămare

Piese neoriginale sau greșite pot afecta funcționarea și siguranța produsului.

- Folosiți numai piese originale pentru produsul utilizat.
- Având în vedere diferențele între regiuni, consultați catalogul sau site-ul web Invacare local pentru opțiunile disponibile sau contactați distribuitorul Invacare. Consultați adresele de la finalul acestui document.



ATENȚIE!

Risc de arsuri de gradul întâi

Unele piese ale produsului se pot încălzi atunci când sunt expuse la temperaturi ridicate (peste 41° C).

- Aveți grijă dacă produsul este expus la temperaturi ridicate, de exemplu, la lumină solară directă.



NOTIFICARE!

Există risc de deteriorare cauzată de uzură, de exemplu, coroziune.

- Nu utilizați produsul sub apă, de exemplu în piscine.
- Nu utilizați produsul în spații foarte calde, precum saunele.
- Nu depozitați produsul în medii ude sau umede.

3 Prezentare generală produs

3.1 Destinație

Ajutorul pentru mers este conceput pentru susținere în timpul mersului.

Ajutorul pentru mers este potrivit pentru utilizare la interior și la exterior pe suprafețe fără denivelări.

Acesta este destinat utilizării de către adulți cu greutatea maximă după cum se specifică pe eticheta produsului și în capitolul 7 *Date Tehnice*, pagina 50.

3.2 Indicații de utilizare

Indicații


Persoanele cu rezistență musculară și/sau echilibru muscular afectate, care necesită sprijin suplimentar în timpul mersului. Capacitatea cognitivă și de a merge rămasă trebuie să fie suficientă pentru utilizarea sigură a ajutorului pentru mers.

Contraindicații

Persoanele cu tulburări severe de echilibru sau cu tulburări de percepție funcționale.

3.3 Etichete și simboluri de pe produs

Etichetă de identificare

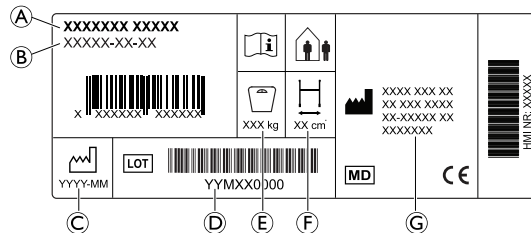

- A Nume produs
- B Număr piesă
- C Data fabricației
- D Număr de LOT
- E Greutate maximă utilizator
- F Lățime maximă
- G Adresă producător

Simboluri

	Conformitate cu standardele europene		Dispozitiv medical
	Producător		Citiți manualul de utilizare
	Data fabricației		Număr de LOT
	Lățime maximă		Greutate maximă utilizator
	Utilizare la interior/exterior		

4 Utilizare

4.1 Înainte de utilizare



ATENȚIE!

Pericol de vătămare sau pagube materiale

- Înainte de utilizare, verificați funcționalitatea generală a produsului.
- Înainte de utilizare, verificați dacă produsul prezintă defecțiuni.
- Nu utilizați un produs defect.

Invacare presupune că un specialist din domeniul sănătății a evaluat individual utilizatorul pentru a determina nivelul de risc al acestuia sau cerințele terapeutice. Furnizorii și îngrijitorii au apreciat că produsul oferă susținerea necesară și că reglajele acestuia sunt adecvate pentru utilizator. Îngrijitorul și utilizatorul au fost instruiți în mod adecvat de un specialist în domeniul medical cu privire la utilizarea corectă și sigură a produsului.


4.2 Plierea și deplierea



NOTIFICARE!

Disconfort/contuzii minore

- Țineți cont de riscul de ciupire.

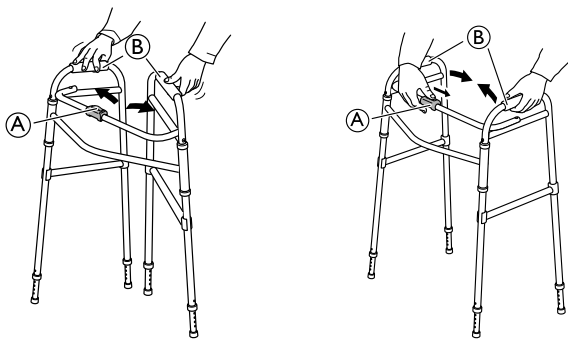

Deplierea în poziția de funcționare

1. Presați cadrele laterale (B) spre exterior, până mecanismul de blocare (A) se activează cu un „clic” distinct.
2. Încercați să presați cadrele laterale (B) spre interior, pentru a vă asigura că mecanismul de blocare (A) este activat.

Plierea

1. Presați mecanismul de blocare (A) și pliați cadrele laterale (B) spre interior.



4.3 Reglarea înălțimii

! NOTIFICARE! Înălțimea recomandată

– Mânerile trebuie poziționate la înălțimea încheieturilor mâinilor, atunci când utilizatorul stă în picioare, cu brațele relaxate. Terapeutul poate sugera înălțimi diferite, în funcție de nevoile specifice ale clientului.

! NOTIFICARE! Disconfort/contuzii minore

– Țineți cont de riscul de ciupire.

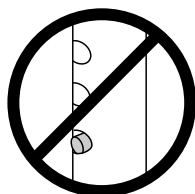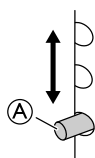

1. Apăsați butonul de închidere (A).
2. Glisați extensia în sus sau în jos până când obțineți înălțimea dorită.
3. Permiteți butonului de închidere (A) să se așeze în poziție în următoarea gaură. Asigurați-vă că butonul se așază corect, emițând un „clic” sonor.

4.4 Mersul

1. Stați în picioare între cele două cadre laterale și țineți ambele mâini pe mânere.
2. Stați pe loc și deplasați/glișați ajutorul pentru mers în față.
3. Faceți un pas înainte, în timp ce țineți ajutorul pentru mers nemișcat.

4.5 Utilizarea extensiilor pentru picioare

! AVERTISMENT! Risc de cădere

– Când se utilizează atașamente cu roți pe picioarele din față, extensiile picioarelor din spate trebuie ajustate pentru a aduce la nivel cadrele laterale.

– Atunci când este cazul, extensiile pentru picioare cu roți atașate trebuie montate cu roțile pe partea exterioară a cadrului pentru mers.

i Pentru mai multe informații, consultați secțiunea „Reglarea înălțimii”.

5 Întreținere

5.1 Informații generale privind întreținerea



AVERTISMENT!

Risc de vătămare

- Întreținerea trebuie efectuată cel puțin o dată pe an.
- Nu utilizați un produs defect.
- Nu încercați să reparați produsul. Pentru reparații, contactați furnizorul.

5.2 Listă de verificare pentru inspecție

Pentru a garanta buna funcționare și siguranța, inspectați regulat produsul.

- Asigurați-vă că toate șuruburile și elementele de reglaj sunt strânse corespunzător. (Dacă este cazul)
- Asigurați-vă că mânerile de prindere sunt strânse. Dacă mânerile de prindere sunt slăbite, nu utilizați ajutorul pentru mers. Instrucțiunile cu privire la înlocuirea mânerilor de prindere pot fi obținute de la furnizorul dvs. sau de la distribuitorul Invacare.
- Inspectați cadrul și piesele încărcate pentru a observa eventualele fisuri.
- Inspectați roțile, pentru a vedea dacă sunt strânse, uzate și deteriorate. (Dacă este cazul)
- Asigurați-vă că roțile nu au prins păr, scame sau alte reziduuri. (Dacă este cazul)
- Asigurați-vă că vârfurile din cauciuc și/sau vârfurile de alunecare din plastic nu sunt rupte, uzate sau lipsă. (Dacă este cazul)

5.3 Curățarea și dezinfectarea

Informații generale privind siguranța



ATENȚIE!

Pericol de contaminare

– Luați măsurile de precauție necesare pentru dvs. și utilizați echipament de protecție.



NOTIFICARE!

Fluidele sau metodele neadecvate pot afecta sau deteriora produsul.

- Toți agenții de curățare și dezinfectanții utilizați trebuie să fie eficienți, compatibili între ei și trebuie să protejeze materialele pe care urmează să le curețe.
- Nu utilizați niciodată fluide (alcaline, acide etc.) sau agenți de curățare abrazivi. Vă recomandăm un agent de curățare a casei obișnuit, precum detergentul lichid pentru vase, dacă nu se specifică altceva în instrucțiunile de curățare.
- Nu utilizați niciodată un solvent (diluante de celuloză, acetona etc.) care modifică structura plasticului sau dizolvă etichetele atașate.
- Asigurați-vă întotdeauna că produsul este complet uscat înainte de repunerea sa în folosință.



Pentru curățarea și dezinfectarea în medii clinice sau de îngrijire pe termen lung, urmați procedurile instituției.

Intervale de curățare



NOTIFICARE!

Curățarea și dezinfectarea cu regularitate îmbunătățesc funcționarea, cresc durata de funcționare și previn contaminarea.

Curățați și dezinfectați produsul:

- cu regularitate, atunci când este utilizat,
- înainte și după fiecare procedură de service,
- dacă a intrat în contact cu orice fluide corporale,
- înainte de a fi folosit de către un nou utilizator.

Instrucțiuni de curățare

Produsul se poate curăța în mașina de spălat sau de mână.

Atunci când se utilizează un dispozitiv de curățare de înaltă presiune sau un jet de apă obișnuit, nu îndreptați jetul către rulmenți, orificii de scurgere sau etichete.

Temperatura maximă de curățare este de 60°C. Nu utilizați un aparat de curățare cu aburi.

1. Curățați ajutorul de mers cu o lavetă umedă și detergent delicat.
2. Curățați roțile cu o perie (nu din sârmă).
3. După curățare, ștergeți produsul, pentru a-l usca.

Instrucțiuni privind dezinfectarea

În îngrijirea acasă

- Dezinfectant: Vă recomandăm să folosiți un dezinfectant pentru suprafețe, pe bază de alcool (cu 70 – 90 % alcool).



Citiți instrucțiunile de pe eticheta dezinfectantului. Acestea oferă informații despre spectrul de acțiune (bacterii, ciuperci și/sau virusuri), compatibilitatea cu materialele și timpul de expunere corect.

1. Asigurați-vă că suprafețele sunt curățate înainte de dezinfecție.
2. Umeziți o cârpă moale și dezinfectați toate suprafețele accesibile ștergându-le și mențineți-le umezite pe perioada de expunere menționată pe eticheta dezinfectantului.
3. Permiteți produsului să se usuce la aer.

În îngrijirea în mediul instituțional

Urmați procedurile de dezinfectare interne și folosiți doar dezinfectanții și metodele specificate în acestea.

6 După utilizare

6.1 Eliminarea

Dați dovadă de spirit ecologic și reciclați acest produs la sfârșitul ciclului său de viață, prin intermediul unui punct de reciclare.

Dezasamblați produsul și componentele acestuia, astfel încât materialele diferite să poată fi separate și reciclate în mod individual.

Eliminarea și reciclarea ambalajelor și produselor utilizate trebuie să se realizeze în conformitate cu legile și reglementările privind gestionarea deșeurilor din fiecare țară. Contactați compania locală de gestionare deșeurilor pentru informații suplimentare.

6.2 Recondiționarea

Acest produs poate fi reutilizat. Recondiționarea produsului pentru un nou utilizator, efectuați următoarele acțiuni:

- Inspecția
- Curățarea și dezinfectarea


Pentru informații detaliate, consultați 5 *Întreținere*, pagina 49.

Asigurați-vă că manualul de utilizare este predat împreună cu produsul.

Dacă se detectează orice deteriorare sau funcționare defectuoasă, nu reutilizați produsul.

7 Date Tehnice

7.1 Dimensiuni și greutate

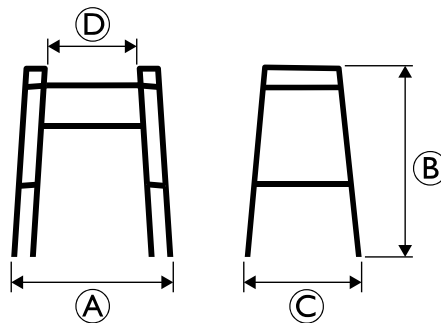

	P409 Asteria
Lățime totală (A)	605–625 mm
Înălțime totală (B)	770–945 mm
Adâncime totală (C)	440–465 mm
Lățime între mânere (D)	440 mm
Greutate	3 kg
Greutate maximă utilizator	135 kg

Toate dimensiunile sunt supuse anumitor toleranțe.

7.2 Material

Cadru	Aluminiu anodizat
Mânere de prindere	TPE
Șuruburi	Oțel, anti-rugină

**Belgium & Luxembourg:**

Invacare nv
Autobaan 22
B-8210 Loppem
Tel: (32) (0)50 83 10 10
Fax: (32) (0)50 83 10 11
marketingbelgium@invacare.com
www.invacare.be

EU Export:

Invacare Poirier SAS
Route de St Roch
F-37230 Fondettes
Tel: (33) (0)2 47 62 69 80
serviceclient_export@invacare.com
www.invacare.eu.com

Nederland:

Invacare BV
Galvanistraat 14-3
NL-6716 AE Ede
Tel: (31) (0)318 695 757
nederland@invacare.com
www.invacare.nl

Sverige:

Invacare AB
Fagerstagatan 9
S-163 53 Spånga
Tel: (46) (0)8 761 70 90
Fax: (46) (0)8 761 81 08
sweden@invacare.com
www.invacare.se

Danmark:

Invacare A/S
Sdr. Ringvej 37
DK-2605 Brøndby
Tel: (45) (0)36 90 00 00
Fax: (45) (0)36 90 00 01
denmark@invacare.com
www.invacare.dk

France:

Invacare Poirier SAS
Route de St Roch
F-37230 Fondettes
Tel: (33) (0)2 47 62 64 66
contactfr@invacare.com
www.invacare.fr

Norge:

Besøksadresse:
(Office addresses)
Invacare AS
Brynsveien 16
0667 Oslo
Tel: (47) 22 57 95 00
norway@invacare.com
www.invacare.no

Suomi:

Camp Mobility
Patamäenkatu 5, 33900 Tampere
Puhelin 09-35076310
info@campmobility.fi
www.campmobility.fi

Deutschland:

Invacare GmbH
Am Achener Hof 8
D-88316 Isny
Tel: (49) (0)7562 700 0
kontakt@invacare.com
www.invacare.de

United Kingdom & Ireland:

Invacare Limited
Pencoed Technology Park, Pencoed
Bridgend CF35 5AQ
Tel: (44) (0) 1656 776 200
uk@invacare.com
www.invacare.co.uk

Norge:

Vareleveringsadresse:
(Storage / Technical dep)
Invacare AS
Østensjøveien 19
0661 Oslo
teknisk@invacare.com
www.invacare.no

Schweiz / Suisse / Svizzera:

Invacare AG
Neuhofweg 51
CH-4147 Aesch BL
Tel: (41) (0)61 487 70 80
Fax: (41) (0)61 488 19 10
switzerland@invacare.com
www.invacare.ch

España:

Invacare S.A.
Avenida del Oeste, 50 – 1ª-1ª
Valencia-46001
Tel: (34) 972 493 214
contactsp@invacare.com
www.invacare.es

Italia:

Invacare Mecc San s.r.l.,
Via dei Pini 62,
I-36016 Thiene (VI)
Tel: (39) 0445 38 00 59
servizioclienti@invacare.com
www.invacare.it

Österreich:

Invacare Austria GmbH
Herzog-Odilo-Straße 101
A-5310 Mondsee
Tel: (43) 6232 5535 0
Fax: (43) 6232 5535 4
info-austria@invacare.com
www.invacare.at

Portugal:

Invacare Lda
Rua Estrada Velha, 949
P-4465-784 Leça do Balio
Tel: (+351) 225 193 360
portugal@invacare.com
www.invacare.pt

© 2023 Invacare Corporation.

All rights reserved. Republication, duplication or modification in whole or in part is prohibited without prior written permission from Invacare. Trademarks are identified by ™ and ®. All trademarks are owned by or licensed to Invacare Corporation or its subsidiaries unless otherwise noted.



Invacare Rea AB
Växjövägen 303
SE-343 71 Diö
Sweden

1516319-G 2023-05-31



Making Life's Experiences Possible®



Yes, you can.®