


Betjeningspanel

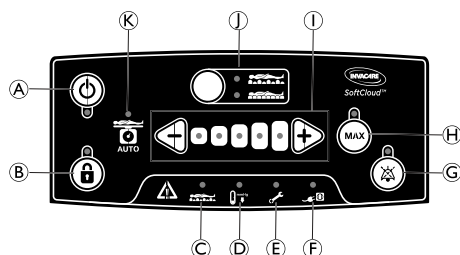

- A) Tænd/sluk-knap
- B) Lås/lås op-knap
- C) Indikator for vekseltilstandsfejl
- D) Indikator for lavt tryk
- E) Indikator for service
- F) Indikator for strømtab
- G) Knap til deaktivering af den lydadværslen
- H) Maks. fasthed-knap
- I) Trykindstillinger
- J) Tilstandsknap og indikator
- K) Automatisk registrering-funktion

Betjening af betjeningspanelet

Tænd og sluk for strømmen



- Tryk på tænd/sluk-knappen i ca. tre sekunder for at tænde eller slukke for strømmen.

Skift af tilstand



- Tryk på tilstandsknappen for at skifte mellem vekseltilstand (skiftende celler pustes op eller tømmes på skift) og statisk tilstand (alle celler er fuldt oppustet uden nogen dynamisk vekslen). Den lysende LED angiver den aktive tilstand.
- For at aktivere eller inaktivere CLP-funktionen (kontinuerligt lavt tryk) skal du trykke på tilstandsknappen i to sekunder.

Ændring af trykindstillingerne

Der findes fem trykindstillinger fra blød (15 mmHg) til fast (55 mmHg) med trin på 10 mmHg.

Når CLP-funktionen bruges, er de fem trykindstillinger fra 15 mmHg til 23 mmHg med trin på 2 mmHg.



- Tryk på plus-knappen (+) for at øge trykket.
- Tryk på minus-knappen (-) for at sænke trykket.

De lysende LED'er angiver den valgte indstilling.

Låse- og oplåsningsknapper



- Tryk på lås/lås op-knappen i ca. tre sekunder for at låse alle knapper på betjeningspanelet. Der lyder et bip, og den gule LED lyser for at indikere, at systemet er låst.
- Tryk igen i mindst tre sekunder for at låse op (der lyder et bip, og den gule LED slukkes).

Betjeningspanelet låses automatisk op i tilfælde af strømafbrydelse.

Deaktivering af lydadværslssignaler

En lydadværslssignal kan deaktiveres, mens årsagen til fejlen løses. Hvis det ikke løses, vil lydadværslssignalet blive genoptaget efter 17 ± 3 minutter.



- Tryk på knappen til deaktivering af lyd for at slå lydadværslssignalet fra.

Aktivering af hurtig oppustning til maksimalt tryk



- Tryk på maks. fasthed-knappen for at aktivere hurtig oppustning til maksimalt tryk (60 mmHg).
- Du kan deaktivere maksimalt tryk ved at trykke på knappen igen i tre sekunder. Hvis det ikke deaktiveres, vender systemet automatisk tilbage til vekseltilstand med medium tryk efter 30 ± 3 minutter for patientsikkerhedens skyld.

Automatisk registrering (findes ikke på alle modeller)

Funktionen for automatisk tilstand bruges, når madrassen overgives til en ny bruger.



Systemet starter ud fra en trykreferenceværdi ved beregning af den individuelle trykindstilling. Når brugeren ligger på madrassen, sammenlignes forskellen mellem trykket for "ubemandet" og "bemandet" med en matrix, og der vælges 1 af 5 tryktrin. Når trykket justeres, tilsidesættes de automatiske indstillinger af de manuelle indstillinger.

Identifikation og afhjælpning af fejl

**ADVARSEL!****Fare for elektrisk stød!**

Hvis betjeningspanelet åbnes, kan det medføre personskade eller skade på udstyr.

– Forsøg ikke at åbne betjeningspanelet.

**VIGTIGT!**

– Hvis problemet ikke løses, skal du kontakte en Invacare-leverandør eller Invacare-repræsentant.

Advarsel/fejl	Årsag	Løsning
Betjeningspanelet fungerer ikke; ingen displaylys	Betjeningspanelet er muligvis ikke tilsluttet en strømkilde Der skal muligvis udskiftes en sikring i betjeningspanelet	1. Kontrollér, at betjeningspanelet er tilsluttet en netstrømkontakt med den korrekte spænding. 2. Kontrollér, at betjeningspanelet er tændt. 3. Kontrollér sikringen til netstrømsstikket. Kontrollér begge betjeningspanelssikringer (1 amp slow blow-sikring) – sikringer kan løsnes med en skruetrækker ved at trykke på og dreje den.
Patienten synker eller "falder igennem", når vedkommende ligger fladt ned på madrassen	Trykket kan være indstillet for lavt ift. patientens vægt	1. Øg trykindstillingen ved at trykke op på trykpilen. 2. Foretag en test af, om patienten "falder igennem", for at kontrollere effektiviteten af systemydeevnen. Se afsnittet "Brug af madrassystemet".
Lydadvarsel Mute-LED lyser konstant 	Fejl ved start	1. Deaktiver lydadvarslen, og sluk for strømmen. 2. Kontrollér, at håndtaget er intakt, og at alle fire forseglingskonnektorer sidder sikkert monteret i betjeningspanelet og luftslangerne. Kontrollér, at CPR-strimlen er påsat, og at alle fire forseglingskonnektorer sidder sikkert fast. 3. Kontrollér alle luftslanger langs undersiden af madrassen – de skal alle være sikkert tilsluttet. Kontrollér, at alle luftceller er sikkert monteret på det tilsluttede luftrør. 4. Kontrollér alle celler, rør og slanger for luftlækage. 5. Tænd for strømmen.
LED-indikatoren for lavt tryk lyser op  + lydadvarel	Trykket er for lavt	1. Deaktiver lydadvarslen, og sluk for strømmen. 2. Kontrollér, at håndtaget er intakt, og at alle fire forseglingskonnektorer sidder sikkert monteret i betjeningspanelet og luftslangerne. Kontrollér, at CPR-strimlen er påsat, og at alle fire forseglingskonnektorer sidder sikkert fast. 3. Kontrollér alle luftslanger langs undersiden af madrassen – de skal alle være sikkert tilsluttet. Kontrollér, at alle luftceller er sikkert monteret på det tilsluttede luftrør. 4. Kontrollér alle celler, rør og slanger for luftlækage. 5. Kontrollér, at luftfilterafdækningen er korrekt påsat, og at luftfilteret er rent. 6. Tænd for strømmen.
LED-indikatoren for fejl ved vekseltilstand lyser  + lydadvarel	Fejl ved vekseltilstand (ingen vekslen)	1. Deaktiver lydadvarslen, og sluk for strømmen. 2. Frakobl luftslangerne for at reducere trykket – tilslut dem igen, når trykket er faldet. 3. Genstart systemet ved at slukke og tænde for tænd/sluk-knappen. Systemet starter automatisk i statisk tilstand og skifter til vekseltilstand, når driftstrykket er nået. 4. Nulstil de personlige indstillinger.
LED-indikatoren for strømsvigt lyser  + lydadvarel	Strømafbrydelse	1. Deaktiver lydadvarslen. 2. Kontrollér, at strømfedningen er sat sikkert i stikkontakten og betjeningspanel. Kontrollér, at netstrømmen er tændt. 3. Kontrollér begge betjeningspanelssikringer (1 amp slow blow-sikring) – en sikring kan løsnes med en skruetrækker ved at trykke på og dreje den. Hvis strømmen genetableres inden for 20 minutter efter fejlen, kører systemet en indledende opstartssekvens, før det vender tilbage til de seneste indstillinger.
Serviceindikator-LED lyser 	Service påkrævet	1. Kontakt en Invacare-leverandør eller Invacare-repræsentant.  Der er ingen risiko mht. fortsat brug, heller ikke selvom LED-serviceindikatoren lyser.



Invacare UK Operations Limited
Pencoed Technology Park, Pencoed
Bridgend CF35 5AQ, UK



Yes, you can.®