



Invacare® Modulite

Kiegészítés a motoros kerekesszék használati útmutatójához

hu Ülésrendszer Használati útmutató

Ezt a kézikönyvet oda KELL adni annak, aki a terméket használja.
A termék használatba vétele ELŐTT el KELL olvasni ezt a kézikönyvet, és el KELL tenni, hogy
később is fel lehessen lapozni.



Yes, you can.®

Tartalom

1	Általános	5
1.1	Erről a kézikönyvről röviden	5
1.2	A kézikönyvben használt szimbólumok	5
1.3	A jótállásra vonatkozó információk	6
1.4	Az ülésrendszere vonatkozó biztonsági információk	6
2	Alkatrészek	8
2.1	Termék leírása	8
2.2	Motoros pozicionálási funkciók	8
2.3	Kézi pozicionálási funkció	9
2.4	Vezetési és üléskorlátozások (LiNX rendszer)	9
2.4.1	Vezetési korlátozások	10
2.4.2	Üléskorlátozások	11
3	Üzembe helyezés	12
3.1	Általános tudnivalók az üzembe helyezésről	12
3.2	A vezérlőkonzol beállítása	13
3.2.1	A vezérlőkonzol normál tartójának a beállítása	14
3.2.2	A vezérlőkonzol elfordítható tartójának beállítása	14
3.2.3	A Maxx Resolve elfordítható vezérlőkonzol-tartó beállítása	15
3.3	A központi rész középvonali tartójának beállítása	17

3.3.1	A központi rész középvonali tartója mélységének beállítása	17
3.3.2	A központi rész középvonali tartója magasságának beállítása	17
3.3.3	A vezérlőkonzol/kijelző pozíciójának beállítása	18
3.4	Az elfordító szerkezet beállítása	19
3.5	A kijelző elfordítható tartójának beállítása	20
3.6	A kézzel beállítható állal működtetett vezérlő beállítása	20
3.6.1	A végtagok korlátozott mozgathatóságának esetére kialakított botkormány beállítása	21
3.6.2	A tojásdad kapcsoló beállítása	21
3.7	A fejtámlaszárnyak beállítása	22
3.8	Karfák	22
3.8.1	A karfa magasságának beállítása	22
3.8.2	A karfa szélességének beállítása	23
3.8.3	A karfa mélységének beállítása	23
3.8.4	Az ellenállás beállítása (felhajtható/követő karfa)	23
3.8.5	A karfapárna dőlésszögének beállítása (felhajtható/követő karfa)	23
3.8.6	A karfapárna helyzetének beállítása (felhajtható karfa)	24
3.9	A fejtámla beállítása	24
3.9.1	A Rea fejtámla vagy nyaktámasz helyzetének beállítása	24
3.9.2	A Rea fejtámla vagy nyaktámasz magasságának beállítása	25
3.9.3	Az arctámasz beállítása	25

3.9.4	Az Elan fejtámla tartószerkezetének beállítása	25	3.17.3	Lábtámasz végállásának beállítása	39
3.10	A háttámla beállítása	26	3.17.4	A lábtámasz hosszának beállítása	40
3.10.1	A háttámla magasságának beállítása	27	3.18	Vari-A lábtámaszok	40
3.10.2	A háttámla szélességének beállítása	27	3.18.1	A lábtámasz kifelé történő elfordítása és/vagy eltávolítása	40
3.10.3	A háttámla dőlésszögének beállítása	28	3.18.2	Dőlésszög beállítása	41
3.10.4	A háttámla állítható feszességű kárpitozott részének beállítása	29	3.18.3	Lábtámasz végállásának beállítása	41
3.11	Az ülés beállítása	29	3.18.4	A lábtámasz hosszának beállítása	43
3.11.1	Az ülés szélességének beállítása	29	3.18.5	A lábikratámaszok beállítása	43
3.11.2	Az ülés mélységének beállítása	29	3.18.6	A lábtartók beállítása	45
3.11.3	Az ülés dőlésszögének beállítása	30	3.19	ADM lábtámaszok	45
3.12	Az oldalsó törzstámasz beállítási	30	3.19.1	A lábtámasz kifelé történő elfordítása és/vagy eltávolítása	45
3.13	A gyorskioldós csípőtámasz beállítása	31	3.19.2	Dőlésszög beállítása	45
3.14	A tálca beállítása/levétele	33	3.19.3	A lábtámasz hosszának beállítása	46
3.14.1	A tálca oldalirányú beállítása	33	3.19.4	A lábikratámaszok beállítása	47
3.14.2	A tálca mélységének beállítása / a tálca eltávolítása	34	3.19.5	A lábtartók beállítása	48
3.14.3	A tálca oldalra hajtása	34	3.20	Meghajtott emelhető lábtámaszok (ADE lábtámaszok)	49
3.15	Középső lábtámasz – kézzel állítható	34	3.20.1	A lábtámasz kifelé történő elfordítása és/vagy eltávolítása	49
3.15.1	A lábtámasz levétele	34	3.20.2	Dőlésszög beállítása	49
3.15.2	A lábtámasz hosszának beállítása	34	3.20.3	A lábtámasz hosszának beállítása	49
3.15.3	A lábtámasz hosszának beállítása	35	3.20.4	A lábikratámaszok beállítása	50
3.15.4	Lábtartó lemez szögének beállítása	35	3.20.5	A lábtartók beállítása	51
3.15.5	A lábikratámaszok beállítása	35	3.21	A 80°-os Standard lábtámasz beállítása	52
3.16	LNx lábtámasz	35	4	Használat	53
3.16.1	A lábtámasz hosszának beállítása	35	4.1	A karfa levétele oldalról történő be- és kiszálláshoz	53
3.16.2	Lábtartó lemez szögének beállítása	36	4.2	Csípőtámasz eltávolítása/felszerelése gyorskioldóval	53
3.16.3	A lábtartó lemez szélességének beállítása	36	4.3	A háttámla párnájának kicserélése	54
3.16.4	A lábtartó lemez szögének beállítása	37	4.4	A középre igazított LNx motoros lábtámasz használata teleszkópos lábtartó lemezzel	55
3.16.5	A lábikratámaszok beállítása	37	5	A karbantartás ütemezése	56
3.17	Vari-F lábtámasz	38			
3.17.1	A lábtámasz kifelé történő elfordítása és/vagy eltávolítása	38			
3.17.2	Dőlésszög beállítása	38			

6	Használat után	57
6.1	Felújítás	57
6.2	Hulladékkezelés	57
7	Hibaelhárítás	58
7.1	A teljesítménnyel kapcsolatos hibák elhárítása	58
8	Műszaki adatok	61
8.1	Műszaki adatok	61

1 Általános

1.1 Erről a kézikönyvről röviden

Ez a dokumentum kiegészíti a termék felhasználói dokumentációját.

Ez az alkatrész önmagában nem viseli a CE és az UKCA jelölést, de olyan terméknek a része, amely megfelel az orvostechnikai eszközökre vonatkozó 2017/745 irányelv I. osztályának és az UK MDR 2002 (módosított megállapodás) III. része által meghatározott I. osztály előírásainak. Ezért a termékre a CE és az UKCA jelölés vonatkozik. További információért tekintse meg a termék felhasználói dokumentációját.

Az alkatrészt csak akkor használja, ha elolvasta és megértette ezt a kézikönyvet. Kérjen további tanácsot olyan egészségügyi szakembertől, aki ismeri az Ön egészségi állapotát, és tisztázza vele a helyes használatra és a szükséges beállításra vonatkozó kérdéseket.

Fontos tudni, hogy lehetnek olyan részek ebben a dokumentumban, amelyek az Ön alkatrészére nem érvényesek, mivel ez a dokumentum a (nyomdába adás időpontjában) elérhető összes modellünkre vonatkozik. Ellenkező értelmű jelzés hiányában e dokumentum mindegyik fejezete az alkatrész összes modelljére vonatkozik.

Az Invacare fenntartja a jogot az alkatrész műszaki adatainak további értesítés nélkül történő módosítására.

Mielőtt elolvassa ezt a dokumentumot, ellenőrizze, hogy a legfrissebb verzióval rendelkezik-e. A legfrissebb verzió PDF formátumban az Invacare webhelyén található.

Előző termékváltozatokat a jelen kézikönyv aktuális kiadása nem feltétlenül ismertet. Ha segítségre van szüksége, kérjük, forduljon az Invacare vállalathoz.

Ha a nyomtatott dokumentumban kicsinek találja a betűket, és így nehezen tudja elolvasni a szöveget, akkor letöltheti a PDF változatot a webhelyről. A PDF változat betűméretét a képernyőn tetszőlegesen beállíthatja, hogy kényelmesen el tudja olvasni a szöveget.

Ha az alkatrészre vonatkozóan további információra van szüksége, például ha tájékoztatást szeretne kapni az alkatrészre vonatkozó biztonsági értesítésekről vagy a termékvisszahívásokról, akkor forduljon az Invacare képviseletéhez. A címek e dokumentum végén találhatók.

Amennyiben az alkatrésszel súlyos esemény következik be, értesítse a gyártót és országában az illetékes hatóságot.

1.2 A kézikönyvben használt szimbólumok

Ebben a kézikönyvben jeleket és figyelemfelhívó szavakat használunk az olyan veszélyes vagy nem biztonságos gyakorlat jelölésére, amely személyi sérülést vagy anyagi kárt okozhat. A jelek és figyelemfelhívó szavak magyarázata alább olvasható.



VESZÉLY!

Olyan veszélyes helyzetet jelez, amely súlyos sérüléshez vagy halálhoz is vezet, ha nem kerülik el.



FIGYELMEZTETÉS!

Olyan veszélyes helyzetet jelez, amely súlyos sérüléshez vagy halálhoz is vezethet, ha nem kerülik el.



VIGYÁZAT!

Olyan veszélyes helyzetet jelez, amely kisebb vagy közepes sérüléshez vezethet, ha nem kerülik el.

! ÉRTESÍTÉS!

Olyan veszélyes helyzetet jelez, amely anyagi kárhoz, rongálódáshoz vezethet, ha nem kerül el.



Tanácsok és javaslatok

Hasznos tanácsokat, javaslatokat és tudnivalókat nyújt a hatékony, gondtalan használathoz.



Szerszámok

Bizonyos munkák elvégzéséhez szükséges szerszámokat, alkatrészeket és egyéb eszközöket jelöl.

Egyéb szimbólumok

(Nem minden kézikönyvre vonatkozik)



Képviselő az Egyesült Királyságban

Azt jelzi, hogy a terméket nem az Egyesült Királyságban gyártják.



Triman

Az újrahasznosítási és szelektálási szabályokat jelzi (csak Franciaországban releváns).

1.3 A jótállásra vonatkozó információk

A termékre az egyes országokban érvényes általános szerződési feltételeknek megfelelően gyártói szavatosságot vállalunk.

Garanciális igénnyel kizárólag azon a forgalmazón keresztül lehet fellépni, amelytől a terméket beszerezték.

1.4 Az ülésrendszere vonatkozó biztonsági információk

Az ülésrendszert a kiszállítása előtt megfelelően konfigurálják és a kerekesszékalapra szerelik. Jó tudni, hogy a végső konfiguráció és a teljes kerekesszérendszer megvásárlásának döntése a motoros kerekesszék használójának – aki képes meghozni ezt a döntést –, valamint az őt kezelő egészségügyi szakember felelőssége. A jelen útmutató feltételezi, hogy egy, a motoros kerekesszékekhez értő szakember beállította a motoros kerekesszéket a felhasználó számára, és segítette a kerekesszék használatát előíró egészségügyi szakembernek értelmezni a jelen útmutatót és használni az eszközt.

A motoros kerekesszék használati útmutatója tartalmazza a kerekesszék – ideértve az ülésrendszert is – biztonságos használatával kapcsolatos összes információt. Olvassa el és kövesse ezeket a biztonsági információkat.



FIGYELMEZTETÉS!

Borulásveszély

A motoros kerekesszék felborulhat, ha az ülés helyzet módosításával megváltoztatja a stabilitási jellemzőit.

- Mielőtt a motoros kerekesszéket aktívan használná, tesztelje és határozza meg a személyes biztonsági korlátait úgy, hogy egy szakképzett egészségügyi szakember jelenlétében gyakorolja a hajlasi, nyúlási és áthelyezési mozdulatokat.
- Az ülésrendszer különféle elülső és hátsó pozíciókban szerelhető fel az alapra. Gondoskodjon arról, hogy a választott pozíció maximális stabilitást biztosítson a különféle ülés helyzetekben.



- Vegye figyelembe az összes személyi felszerelést és kiegészítőt (hátizsákot, szellőzőrendszert, kiegészítő akkumulátorokat stb.), amelyet a kerekesszéken szállítani tervez. Ha például egy megpakolt hátizsákot akaszt a kerekesszék háttámlájára, azzal jelentősen megváltoztatja a kerekesszék hátrányú stabilitását.
- Vegye figyelembe a használni tervezett háttámlát. Például egy mélyített háttámla hátrafele tolhatja a tömegközponatot, ezzel jelentősen megváltoztatva a kerekesszék hátrányú stabilitását. Másfelől egy vastagon párnázott háttámla előrefele tolja a felhasználót, így csökkenti a kerekesszék menetirányú stabilitását.
- Súlyát mindig mozgassa a kanyarodási irányba. Súlyát a kanyarra iránnyal ellenkező irányba mozgatva ronthatja a kerekesszékalap stabilitását, így a kerekesszék felborulhat.
- Vegye figyelembe a használt ülőpárnát. Egy vastag ülőpárna megemeli a tömegközéppontját, ez pedig minden irányban befolyásolhatja a kerekesszék stabilitását.
- Minden ülésrendszer rendelkezik hajtázzárral. Gondoskodjon arról, hogy ez úgy legyen beállítva, hogy ne befolyásolja a haladási stabilitást (lásd 2.4 Vezetési és üléskorlátozások (LiNX rendszer), 9. oldal).
- A kerekesszék programozható vezérlővel rendelkezik, amely lehetővé teszi a kerekesszék maximális gyorsulásának és lassulásának beállítását. Gondoskodjon arról, hogy ezek a beállítások a rendszernek és a felhasználónak megfelelőek legyenek.



- Amikor kis sebességgel vagy borulásgátló zárral használja kerekesszéket, mindig sima, egyenes felületen haladjon, hogy ne rontsa a kerekesszék stabilitását.
- A kerekesszék beállításakor vegyen figyelembe minden egészségügyi állapotot. Az akaratlan izomösszehúzódások, például görcsök befolyásolhatják a kerekesszék stabilitását, különösen ha az ülésrendszer hátrabillentett vagy -dőntött helyzetben van.
- Amikor a rendszer teljesen hátra van billentve vagy döntve, a kerekesszék első kerekeinek soha nem szabad elválniuk a földtől. Ha ez mégis előfordul, haladéktalanul vegye fel a kapcsolatot egy engedélyezett Invacare márkakereskedővel, hogy megoldják a problémát.



FIGYELMEZTETÉS!

Halál, súlyos személyi sérülés vagy az eszköz károsodásának veszélye

Csapdába esés és fojtás veszélye, ha laza személyes tárgyak (pl. ékszerek, sálak) beakadnak a mozgó vagy kiálló részekbe.

- Győződjön meg arról, hogy nem érnek laza tárgyak a motoros kerekesszék mozgó részeihez, pl. a kerekékhez vagy a motoros üléselemekhez.
- Tartsa távol a kezét, a ruházatát és minden más tárgyat a kerekéktől vagy a motoros üléselemektől, amikor azok működésben vannak.
- Azonnal kapcsolja ki a motoros kerekesszéket, hogy minden esetleges mozgást megállítson.

2 Alkatrészek

2.1 Termék leírása



A következő konfigurációk országtól függően változhatnak.

A Modulite ülésrendszert különböző üléstípusokkal kínáljuk.

Egy darabból álló üléslemez

Az egy darabból álló üléslemez különböző ülészélességekkel kínáljuk (380 mm vagy 430 mm). Az egyéni állítható ülészélességet a karfaválasztás is befolyásolhatja.

Az egy darabból álló üléslemez különböző ülismélységekkel kínáljuk (410 mm, 460 mm vagy 510 mm). Az egy darabból álló üléslemez ülismélységét kézzel lehet beállítani. Lásd: *3.11.2 Az ülés mélységének beállítása, 29. oldal.*

Az egy darabból álló üléslemez különböző előre összeszerelt ülésmagasságokkal kínáljuk (435 mm, 460 mm vagy 485 mm). A kézi magasságbeállítást szakképzett szerelőnek kell elvégeznie. További információért a magasságbeállításról lásd a kerekesszék szervizkönyvét.

Teleszkópos üléskeret

A teleszkópos üléskeret különböző opciókkal kapható: ülőlap, ülésheveder vagy univerzális adapter.

A teleszkópos üléskeret ülészélességét kézzel lehet beállítani. Lásd: *3.11.1 Az ülés szélességének beállítása, 29. oldal.*

A teleszkópos üléskeretet különböző ülismélységekkel kínáljuk (410 mm, 460 mm, 510 mm vagy 580 mm). A teleszkópos üléskeret ülismélységét kézzel lehet beállítani. Lásd: *3.11.2 Az ülés mélységének beállítása, 29. oldal.*

A teleszkópos üléskeretet különböző előre összeszerelt ülésmagasságokkal kínáljuk (435 mm, 460 mm vagy 485 mm). Az egyéni magasságot az ülésemelővel lehet beállítani, ha az ülésemelő a konfiguráció része. A kézi magasságbeállítást szakképzett szerelőnek kell elvégeznie. További információért a magasságbeállításról lásd a kerekesszék szervizkönyvét.

2.2 Motoros pozicionálási funkciók

Az ülésrendszer a következő funkciókat biztosítja:

RÖGZÍTETT FORGÓPONTÚ BILLENTÉS

A rögzített forgópontú billentés funkcionál a rögzített forgótengely az ülés hátrafele döntésével párhuzamosan a súlypontot hátrafelé tolja el. A billentési tartomány általában 0°–20°.

TÖMEGKÖZPONT-BILLENTÉS

A tömegközpon-billentési funkció azzal kompenzálja a súlyeltelődést, hogy a forgási tengelyt és a teljes ülészerelvényt előremozdítja, miközben az ülés hátracsúszik. A billentési tartomány általában 0°–50°. Az Ön egyedi konfigurációjával kapcsolatos további információkért lásd *8.1 Műszaki adatok, 61. oldal.*

HÁTTÁMLA DÖNTÉSE

A döntési funkció lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy fokozatmentesen állítsa a háttámla üléshez viszonyított pozícióját egy bizonyos tartományban. A döntési tartomány általában 90°–120°.

ÜLÉSEMELŐ MODUL

Az ülésemelő modul lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy a motoros pozicionálórendszert 300 mm-re az ülés padlótól mért legalacsonyabb magassága fölé emeljék. Az ülésemelő billentési funkcióval rendelkezik.

LÁBTÁMASZOK

A különféle méretű és stílusú motoros és manuális lábtámaszok széles választéka áll rendelkezésre, ideértve az egyedi lábtámaszokat és a közepen lévő lábtartókat, amelyek segítenek megtartani és elhelyezni a felhasználó lábát. Ezenkívül többféle lábtámasztartó is vásárolható, amelyekre felszerelhető a kívánt lábtámasz. A motoros lábtámaszok a következő konfigurációk valamelyikében működhetnek:

- egyszerű – a lábtámaszok függetlenül működnek;
- kombinált – a lábtámaszok egymással összhangban működnek.

2.3 Kézi pozicionálási funkció

Az ülésrendszer a következő funkciókat biztosítja:

RÖGZÍTETT FORGÓPONTÚ BILLENTÉS

A rögzített forgópontú billentés funkciónál a rögzített forgótengely az ülés hátrafele döntésével párhuzamosan a súlypontot hátrafelé tolja el. A billentési tartomány általában 0°–15°.

HÁTTÁMLA DÖNTÉSE

A döntési funkció lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy fokozatmentesen állítsa a háttámla üléshez viszonyított pozícióját egy bizonyos tartományban. A döntési tartomány általában 90°–120°.

LÁBTÁMASZOK

A különféle méretű és stílusú motoros és manuális lábtámaszok széles választéka áll rendelkezésre, ideértve az egyedi lábtámaszokat és a közepen lévő lábtartókat, amelyek segítenek megtartani és elhelyezni a felhasználó lábát. Ezenkívül többféle lábtámasztartó is vásárolható, amelyekre felszerelhető a kívánt lábtámasz.

2.4 Vezetési és üléskorlátozások (LiNX rendszer)



VESZÉLY!

Súlyos sérülés vagy halál veszélye

A rendszer biztonságos használatához a zároló- /korlátozókapcsolók beállítási szöge kulcsfontosságú.

- Az Invacare nem vállal felelősséget a gyári javasolt beállításokat túllépő módosítások okozta károkért és sérülésekért.
- A megfelelő beállítás érdekében a zároló- és korlátozókapcsolók beállítását csak szakképzett szerelőnek szabad elvégeznie.
- Soha ne lépje túl a javasolt határértékeket. A zároló- és korlátozókapcsolókat úgy kell beállítani, hogy a leginkább megfeleljenek a felhasználó igényeinek, anélkül hogy ez jelentős hatással lenne a kerekesszékek stabilitására.
- A korlátozó vagy reteszelő beállításokat követően mindig tesztelje az ülésrendszert a teljes mozgástartományban (pl. döntés, hátradöntés, emelés), hogy ellenőrizze az ellenőrzési beállítás megfelelő működését, és hogy nincsenek-e ebből eredő stabilitási vagy zavaró problémák.



A bonyolultabb/különleges ülésrendszerekhez további zároló- és korlátozókapcsolókra lehet szükség. A jelen útmutatóban nem azonosított korlátozásokkal/zárolásokkal kapcsolatos segítségért forduljon a forgalmazóhoz.

A TDX SP2 esetében a vezetési és az ülés helyzetre vonatkozó korlátozások csak álló helyzetben frissülnek.


Az AVIVA RX és ABIVA FX modellek haladásra és ülés helyzetére vonatkozó korlátozásait mind haladás, mind álló helyzet esetén frissítettük.

2.4.1 Vezetési korlátozások

Az ülésrendszerekben konfigurálva/programozva van a haladás lassítása funkció. A haladás lassítása funkció mikrokapcsolók segítségével aktiválja a rendszer alacsony haladási sebesség funkcióját.

Mindegyik billenthető és dönthető ülésrendszer rendelkezik hajtáskárral. Ez olyan funkció, amely megakadályozza a kerekesszék hajtását, amikor az ülésrendszer egy előre meghatározott biztonságos szögben jobbra vagy balra van billentve vagy döntve és/vagy egy előre meghatározott magasság fölé van emelve. A teljes dőlésszög az ülés dőlésszögének, a háttámla dőlésszögének és/vagy a talaj meredekségének a kombinációja lehet.


AVIVA RX emelővel

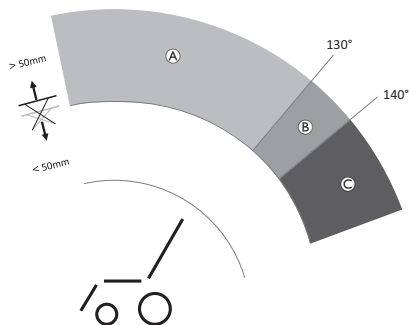

	Korlátozás	Korlátozás oka
Ⓐ	Haladás lassítása	Ha az emelő felemelése >50 mm
Ⓑ	Haladás lassítása / hajtáskárr – a szolgáltató által állítható	Ha az emelő felemelése >50 mm és ha a háttámla szöge >130° – <140°¹
Ⓒ	Hajtáskárr	Ha az emelő felemelése >50 mm és ha a háttámla szöge >140°

¹ A szolgáltató meghatározhatja azt a szöget, amikor a haladás lassítása hajtáskárra vált.

AVIVA FX és TDX SP2 emelővel

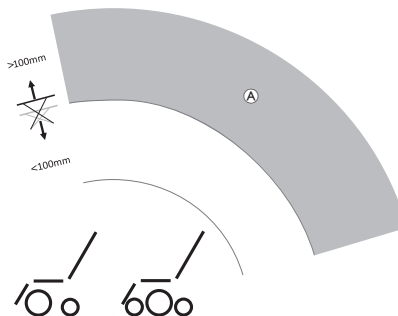


	Korlátozás	Korlátozás oka
Ⓐ	Haladás lassítása	Ha az emelő felemelése • >100 mm

AVIVA RX, AVIVA FX és TDX SP2 emelő nélkül

Az emelő nélküli AVIVA RX, AVIVA FX és TDX SP2 esetében nincs haladáskorlátozás.

2.4.2 Üléskorlátozások

AVIVA RX emelővel

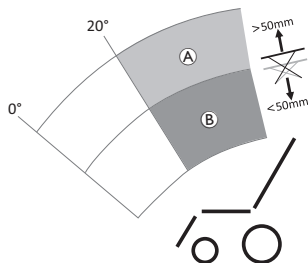

	Korlátozás	Korlátozás oka
Ⓐ	>20°-os dőlésszög letiltva	Ha az emelő felemelése • >50 mm
Ⓑ	Emelés letiltva	Ha a dőlésszög • >20°

AVIVA FX és TDX SP2 emelővel

Az emelővel felszerelt AVIVA FX és TDX SP2 esetében nincsenek üléskorlátozások.

AVIVA RX, AVIVA FX és TDX SP2 emelő nélkül

Az emelő nélküli AVIVA RX, AVIVA FX és TDX SP2 esetében nincsenek üléskorlátozások.

3 Üzembe helyezés

3.1 Általános tudnivalók az üzembe helyezésről



FIGYELMEZTETÉS!

Halál, súlyos személyi sérülés vagy az eszköz károsodásának veszélye

A nem megfelelő specifikáció szerint beállított motoros kerekesszék folyamatos használata a motoros kerekesszék hibás viselkedését okozhatja, ez pedig halálhoz, súlyos sérüléshez vagy anyagi kárhoz vezethet.

- Teljesítménymódosító változtatásokat kizárólag egészségügyi szakember hajthat végre, illetve olyan személy, aki tökéletesen ismeri ezt a folyamatot és a vezető képességeit.
- A motoros kerekesszék beállítása, illetve módosítása után ellenőrizze, hogy a motoros kerekesszék a beállítási folyamat során megadott specifikációnak megfelelően működik-e. Ha a motoros kerekesszék nem a specifikációnak megfelelően működik, akkor AZONNAL kapcsolja ki a motoros kerekesszéket, és adja meg újra a beállítási specifikációt! Ha a motoros kerekesszék ezt követően sem a helyes specifikációnak megfelelően működik, akkor lépjen kapcsolatba az Invacare képviselőjével.



FIGYELMEZTETÉS!

Halál, súlyos személyi sérülés vagy az eszköz károsodásának veszélye

A lazán rögzített vagy hiányzó rögzítőelemek instabilitást okozhatnak, ami halálhoz, súlyos személyi sérüléshez vagy anyagi kárhoz vezethet.

- MINDEN beállítás, javítás és szerviz után és MINDEN használat előtt győződjön meg arról, hogy minden rögzítőelem megvan és szorosan rögzített!



FIGYELMEZTETÉS!

Személyi sérülés vagy a készülék károsodásának veszélye

A motoros kerekesszék használók, ápolók vagy képzetlen szerelők által végrehajtott nem megfelelő beállítása sérülést vagy anyagi kárt okozhat.

- NE próbálja meg beállítani a motoros kerekesszéket! A motoros kerekesszék kezdeti beállítását szakképzett szerelőnek KELL végrehajtania.
- A használó általi beállítás csak akkor javasolt, ha a használó már megkapta az egészségügyi szakembertől a megfelelő útmutatásokat.
- NE kísérelje meg az adott munka elvégzését, ha nem rendelkezik a felsorolt szerszámokkal!

**VIGYÁZAT!****Személyi sérülés vagy a készülék károsodásának veszélye**

A motoros kerekesszék egyedi, sokféleképpen állítható ülésrendszerrel van ellátva, amely állítható lábtámaszt, kartámaszt, fejtámlát, és más kiegészítőket tartalmaz, amelyekkel az ülést a használó alkati igényeihez és fizikai állapotához lehet igazítani. Előfordulhat, hogy a beállítási lehetőségek különféle kombinációi és a motoros kerekesszék alkatrészeinek egyedi beállításai miatt egymásnak ütköznek a motoros kerekesszék alkatrészei, vagy köztük becsípődési pontok keletkeznek. Az ülésrendszernek és az ülésfunkcióknak a használó igényeihez való igazítása során:

- ügyeljen a motoros kerekesszék alkatrészeinek beállításánál a becsípődési pontokra, és
- biztosítsa, hogy a motoros kerekesszék alkatrészei ne ütközzenek.

**ÉRTESÍTÉS!**

Minden motoros kerekesszéket a megrendelésben meghatározott specifikáció szerint, egyedileg gyártunk le és konfigurálunk. A specifikációt egészségügyi szakembernek kell megadnia a használó igényeinek és egészségi állapotának megfelelően.

- Ha adaptálni szeretné a motoros kerekesszék konfigurációját, konzultáljon egy egészségügyi szakemberrel.
- Minden adaptálást szakképzett szerelőnek kell végrehajtania.



A kezdeti beállítást mindig egészségügyi szakembernek kell végrehajtania. A használó általi beállítás csak akkor javasolt, ha a használó már megkapta az egészségügyi szakembertől a megfelelő útmutatásokat.

Elektromos beállítási lehetőségek

Az elektromos beállítási lehetőségek használatát a vezérlőkonzol használati útmutatója ismerteti részletesen.

Lábtartók

Minden lábtartó, amit az Invacare kínál, felhajtható.

3.2 A vezérlőkonzol beállítása**VIGYÁZAT!**

Ha a vezérlőkonzol helyzetét átállítják, és nincs minden csavarja tökéletesen meghúzva, akkor ha véletlenül akadálnak (például ajtófélfának vagy asztalnak) ütközik, fennáll annak a veszélye, hogy a vezérlőkonzol hátranyomódik, a botkormány pedig nekipréselődik a karfának.

Emiatt a motoros kerekesszék irányíthatatlanul halad előre, ami a használó és a motoros kerekesszék útjába kerülő személyek sérülését okozhatja.

- A vezérlőkonzol helyzetének beállításkor mindig ellenőrizze, hogy meghúzta-e az összes csavart.
- Ha véletlenül ilyesmi fordulna elő, azonnal kapcsolja ki (OFF) a motoros kerekesszék elektronikáját a vezérlőkonzolon.



VIGYÁZAT!


Sérülésveszély

Ha rátámaszkodik a vezérlőkonzolra (például akkor, amikor átül a kerekesszékből vagy a kerekesszékebe), akkor eltörhet a vezérlőkonzol tartója, és a használó kieshet a kerekesszékből.

- Soha ne támaszkodjon a vezérlőkonzolra (például átüléskor)!

3.2.1 A vezérlőkonzol normál tartójának a beállítása

A vezérlőkonzol beállítása a használó karhosszához

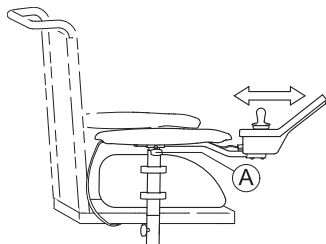


1. Lazítsa meg a szárnyas csavart (A).
2. Állítsa az alkatrészt a kívánt helyzetbe.
3. Húzza meg a szárnyas csavart.

A vezérlőkonzol magasságának beállítása



- 3 mm-es imbuszkulcs

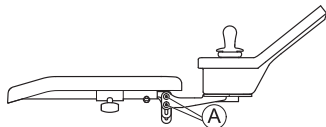


1. Lazítsa meg a csavarokat (A).
2. Állítsa az alkatrészt a kívánt helyzetbe.
3. Húzza meg a csavarokat.

3.2.2 A vezérlőkonzol elfordítható tartójának beállítása

A vezérlőkonzol magasságának beállítása



- 6 mm-es imbuszkulcs

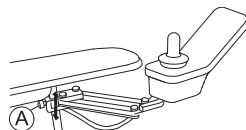


1. Lazítsa meg a csavart (A).
2. Állítsa az alkatrészt a kívánt helyzetbe.
3. Húzza meg a csavart.

A vezérlőkonzol oldalirányú helyzetének beállítása

A vezérlőkonzol helyzete oldalirányban 20 mm-rel állítható.



- 3 mm-es imbuszkulcs

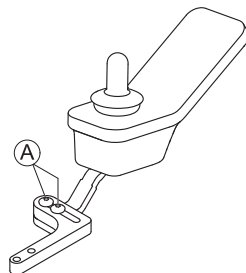


1. Lazítsa meg a csavarokat (A).
2. Állítsa az alkatrészt a kívánt helyzetbe.
3. Húzza meg a csavarokat.

A vezérlőkonzol helyzetének beállítása



- 3 mm-es imbuszkulcs

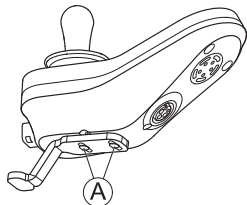


1. Lazítsa meg a csavarokat **A**.
2. Állítsa az alkatrészt a kívánt helyzetbe.
3. Húzza meg a csavarokat.

3.2.3 A Maxx Resolve elfordítható vezérlőkonzol-tartó beállítása

A vezérlőkonzol mélységének beállítása



- 5 mm-es imbuszkulcs

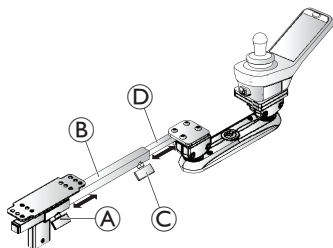

1. Lazítsa meg a szárnyas csavart **A** a cső mélységének beállításához **B**.
Húzza meg a csavarokat, ha elérte a kívánt pozíciót.
és/vagy
2. Lazítsa meg a szárnyas csavart **C** a cső mélységének beállításához **D**.
Húzza meg a kart, ha elérte a kívánt pozíciót.

Magasság- és dőlésszög-beállítás

A Maxx Resolve távtartó magassága/dőlésszöge az elfordító szerkezeten lévő két gömbbilincs-szerelvényen keresztül állítható. A hátsó gömbbilincs-szerelvény a távtartó csőhöz van rögzítve, az első gömbbilincs-szerelvényre a távtartó van felszerelve. Mindkét gömbbilincs-szerelvény egymástól függetlenül állítható, hogy a távtartót a felhasználó igényeinek megfelelő magasságban és/vagy szögben lehessen elhelyezni.



Felfelé szerelt gömbbilincs-szerelvények




Lefelé szerelt gömbbilincs-szerelvények



A gömbbilincs-szerelvények szögének felfelé történő beállításakor az elfordító szerkezet teste felfelé dől. Ez a felfelé irányuló szög azt jelenti, hogy a vezérlőkonzol kifelé lendülésekor (amikor a jobb kartámaszra van szerelve) vagy befelé lendülésekor (amikor a bal kartámaszra van szerelve) alacsonyabb pozícióba fordul el. Az ellenkező hatás érvényesül, amikor a gömbbilincs-szerelvények szögét lefelé állítják be.




- 5 mm-es imbuszkulcs

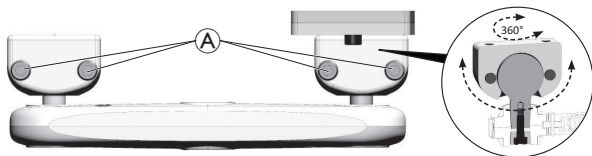

Szög beállítása



A magasság beállítása

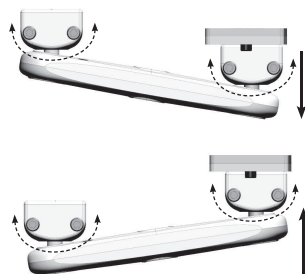


1. Lazítsa meg a csavarokat ① minden egyes gömbbilincs-szerelvényben.
2. Döntse/forgassa a gömbbilincs-szerelvényeket a kívánt szögbe/magasságba.
3. Húzza meg a csavarokat, ha elérte a kívánt pozíciót.

Letörési feszesség beállítása

A Maxx Resolve elfordítható vezérlőkonzol-tartó egy állítható feszültségű szíjhajtást használ a vezérlőkonzol újrapozicionálásához szükséges „letörési” erő szabályozására. A feszültség az elfordító szerkezet közepén található bütykös kerékkel állítható. Négyféle feszültségbeállítási lehetőség áll rendelkezésre, hogy a felhasználó erejéhez és mobilitásához igazodjon. A letörési feszültséget a felhasználó igényeinek megfelelően kell beállítani.



- 6 mm-es imbuszkulcs

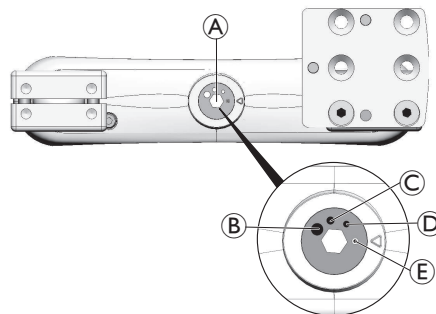

1. A bütykös kerékkel ① állítsa be a letörési feszültséget a négy beállítási lehetőség egyikére:
 - ② kemény
 - ③ közepes
 - ④ könnyű
 - ⑤ nagyon könnyű

3.3 A központi rész középvnali tartójának beállítása



FIGYELMEZTETÉS!

Személyi sérülés vagy a készülék károsodásának veszélye

A laza kicsi alkatrészek belekerülhetnek a légutakba, ez pedig sérülést vagy halált okozhat.

- Ne távolítson el semmilyen kicsi alkatrészt, kivéve a botkormány gombjának cseréje során.
- Ne hagyja felügyelet nélkül a botkormány eltávolított gombját!
- A gyerekeket, a házi kedvenceket és a csökkent fizikai vagy mentális képességekkel rendelkező személyeket szoros felügyelet alatt kell tartani.




VIGYÁZAT!

Személyi sérülés vagy a készülék károsodásának veszélye

A rudak módosítása (például lerövidítése) után visszamaradt sorja és a hiányzó véglezáró kupakok személyi sérüléshez és anyagi kárhoz vezethetnek.

- A felesleges rész levágása után távolítsa el a sorját!
- A sorja eltávolítása után tegye vissza a véglezáró kupakot!
- Ellenőrizze, hogy szorosan zár-e a véglezáró kupak.

3.3.1 A központi rész középvnali tartója mélységének beállítása

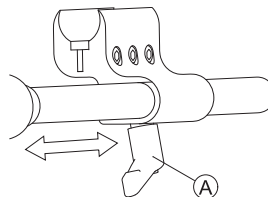

1. Lazítsa meg a kart **A**.
2. Tolja a központi rész középvnali tartóját a kívánt helyzetbe.
3. Szorítsa meg a kart.


3.3.2 A központi rész középvnali tartója magasságának beállítása

A központi rész középvnali tartójának magassága kétféleképp állítható be:

- Állítsa be a karfa magasságával együtt. Lásd karfára vonatkozó megfelelő fejezetek, *3.8.1 A karfa magasságának beállítása*, *22. oldal*.
- Csak a központi rész középvnali tartójának magasságát állítsa be. Lásd az alábbi szakaszt.



- 5 mm-es (3/16") imbuszkulcs

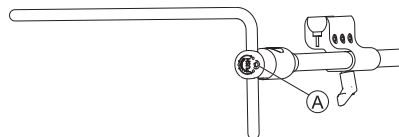


1. Lazítsa meg a csavart **A**.
2. Állítsa a központi részt a kívánt magasságba.
3. Húzza meg a csavart.

3.3.3 A vezérlőkonzol/kijelző pozíciójának beállítása



- 4 mm-es imbuszkulcs
- 8 mm-es csavarkulcs


A vezérlőkonzol megdöntése (DLX-REM110, DLX-REM2XX, DLX-REM400)

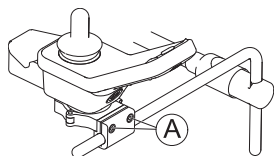

1. Lazítsa meg a csavarokat ①.
2. Helyezze fel a vezérlőkonzolt a tartóra.
3. Húzza meg a csavarokat.

Fig. 3-1 Példaként a DLX-REM400 beállítását ismertetjük. A DLX-REM110, a DLX-REM211 és a DLX-REM216 is ugyanígy állítható be.


A vezérlőkonzol elforgatása (DLX-REM110, DLX-REM2XX, DLX-REM400)

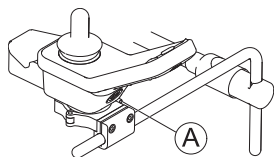

1. Lazítsa meg a csavart ①.
2. Fordítsa a vezérlőkonzolt a bilincsből a kívánt helyzetbe.
3. Húzza meg a csavart.


Fig. 3-2 Példaként a DLX-REM400 beállítását ismertetjük. A DLX-REM110, a DLX-REM211 és a DLX-REM216 is ugyanígy állítható be.

A vezérlőkonzol megdöntése (DLX-CR400 és DLX-CR400LF)

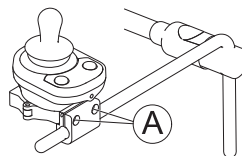

1. Lazítsa meg a csavarokat ①.
2. Helyezze fel a vezérlőkonzolt a tartóra.
3. Húzza meg a csavarokat.

A vezérlőkonzol elforgatása (DLX-CR400 és DLX-CR400LF)

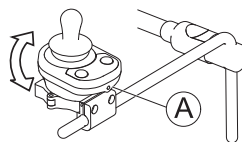


1. Lazítsa meg a csavart ① (az ábrán nem látható).
2. Fordítsa a vezérlőkonzolt a bilincsből a kívánt helyzetbe.
3. Húzza meg a csavart.

DLX-REM500



- 5 mm-es (3/16") imbuszkulcs

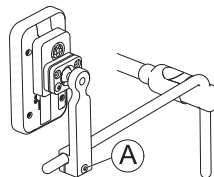

1. Lazítsa meg a csavart ①.
2. Helyezze fel a kijelzőt a tartóra.
3. Húzza meg a csavart.

ASL jelelő alkatrészek a központi rész tálcáján



- 5 mm-es (3/16") imbuszkulcs




1. Lazítsa meg a csavart (A).
2. Helyezze fel a tálcát a tartóra.
3. Húzza meg a csavart.

Fig. 3-3 Az ábra csak szemléltetési célra szolgál.

ASL-összetevők csak a középső rész középvonalai tartóján



- 4 mm-es (5/32") imbuszkulcs

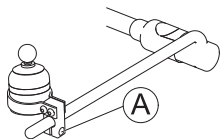

1. Lazítsa meg a csavart (A).
2. Helyezze fel az ASL-összetevőt a tartóra.
3. Húzza meg a csavart.

Fig. 3-4 Az ábra csak szemléltetési célra szolgál.

3.4 Az elfordító szerkezet beállítása



FIGYELMEZTETÉS!

Személyi sérülés vagy a készülék károsodásának veszélye

A laza kicsi alkatrészek belekerülhetnek a légutakba, ez pedig sérülést vagy halált okozhat.

- Ne távolítson el semmilyen kicsi alkatrészt, kivéve a botkormány gombjának cseréje során.



- Ne hagyja felügyelet nélkül a botkormány eltávolított gombját!
- A gyerekeket, a házi kedvenceket és a csökkent fizikai vagy mentális képességekkel rendelkező személyeket szoros felügyelet alatt kell tartani.



VIGYÁZAT!

Személyi sérülés vagy a készülék károsodásának veszélye

A rudak módosítása (például lerövidítése) után visszamaradt sorja és a hiányzó véglezáró kupakok személyi sérüléshez és anyagi kárhoz vezethetnek.


- A felesleges rész levágása után távolítsa el a sorját!
- A sorja eltávolítása után tegye vissza a véglezáró kupakot!
- Ellenőrizze, hogy szorosan zár-e a véglezáró kupak.

Az elfordító szerkezet különböző külön megvásárolható tartozékokkal használható, például a következőkkel:

- PROTON fejtámlaszárnyakkal,
- a végtagok korlátozott mozgathatóságának esetére kialakított, az állal működtetett vezérlőre szerelendő botkormánnyal,
- tojástdad kapcsolóval.



- 4 mm-es (5/32") imbuszkulcs

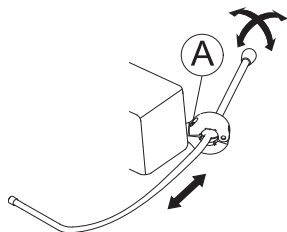

A mélység beállítása

1. Lazítsa meg a csavart (A).
2. Állítsa a rudat a kívánt mélységre.
3. Húzza meg a csavart.

A helyzet beállítása


Az elfordító szerkezet 360 fokban elforgatható.

1. Lazítsa meg a csavart (A).
2. Állítsa a kívánt helyzetbe.
3. Húzza meg a csavart.

3.5 A kijelző elfordítható tartójának beállítása



- 3 mm-es imbuszkulcs

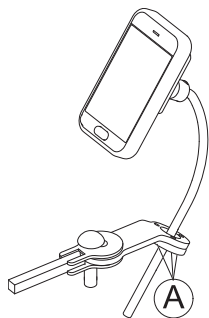

A tartó magasságának beállítása

1. Lazítsa meg a csavarokat (A).
2. Állítsa a tartót a kívánt magasságba.
3. Húzza meg a csavarokat.

A tartó állásának beállítása

A tartó 360 fokban elforgatható.


1. Lazítsa meg a csavarokat (A).
2. Állítsa be a tartó állását.
3. Húzza meg a csavarokat.

A kijelző állásának beállítása

A kijelző 360 fokban elforgatható.



- 18 mm-es csavarkulcs

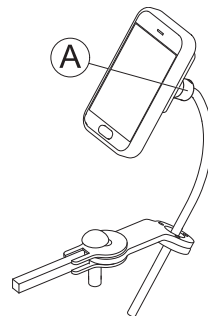

1. Lazítsa meg a rögzítőgyűrűt (A).
2. Állítsa be a kijelző állását.
3. Húzza meg a rögzítőgyűrűt.

3.6 A kézzel beállítható állal működtetett vezérlő beállítása



FIGYELMEZTETÉS!

Személyi sérülés vagy a készülék károsodásának veszélye

A laza kicsi alkatrészek belekerülhetnek a légutakba, ez pedig sérülést vagy halált okozhat.

- Ne távolítsa el semmilyen kicsi alkatrészt, kivéve a botkormány gombjának cseréje során.
- Ne hagyja felügyelet nélkül a botkormány eltávolított gombját!
- A gyerekeket, a házi kedvenceket és a csökkent fizikai vagy mentális képességekkel rendelkező személyeket szoros felügyelet alatt kell tartani.

**VIGYÁZAT!****Személyi sérülés vagy a készülék károsodásának veszélye**


A rudak módosítása (például lerövidítése) után visszamaradt sorja és a hiányzó véglezáró kupakok személyi sérüléshez és anyagi kárhoz vezethetnek.

- A felesleges rész levágása után távolítsa el a sorját!
- A sorja eltávolítása után tegye vissza a véglezáró kupakot!
- Ellenőrizze, hogy szorosan zár-e a véglezáró kupak.

3.6.1 A végtagok korlátozott mozgathatóságának esetére kialakított botkormány beállítása

A botkormány állásának beállítása

A kijelző 360 fokban elforgatható. Az oldalán található nyílás lehetővé teszi a botkormány 90 fokos dőlésszögbe állítását.

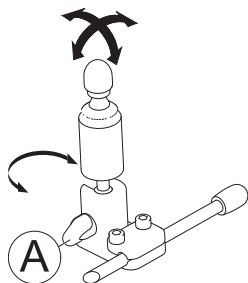


1. Lazítsa meg a kézzel hajtható csavart **A**.
2. Fordítsa el a botkormány alsó részét úgy, hogy illeszkedjen valamelyik bevágásba.
3. Állítsa be a botkormány állását. Szükség esetén a botkormányt 90 fokonként rögzítheti a bevágások segítségével.
4. Húzza meg a kézzel hajtható csavart.

A helyzet beállítása a tartón



- 4 mm-es (5/32") imbuszkulcs

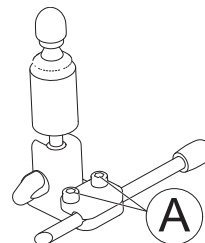

1. Lazítsa meg a csavarokat **A**.
2. Tegye a botkormányt a tartóra.
3. Húzza meg a csavarokat.

A mélység és a magasság beállítása

Lásd: 3.4 Az elfordító szerkezet beállítása, 19. oldal.


3.6.2 A tojásdad kapcsoló beállítása

A kapcsoló állásának beállítása

A tojásdad kapcsoló 360 fokban elforgatható.



- 11 mm-es (7/16") csavarkulcs

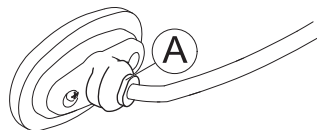

1. Lazítsa meg az **A** anyát.
2. Állítsa be a tojásdad kapcsoló állását.
3. Húzza meg az anyát.

A mélység és a magasság beállítása


Lásd: 3.4 Az elfordító szerkezet beállítása, 19. oldal.

3.7 A fejtámlaszárnyak beállítása

A párna helyzetének beállítása



- 4 mm-es (5/32") imbuszkulcs

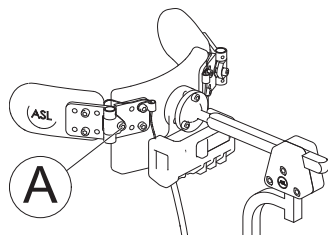

1. Lazítsa meg a csavart **A**.
2. Állítsa be a párna helyzetét.
3. Húzza meg a csavart.


A PROTON fejtámlaszárnyak beállítása

Lásd: 3.4 Az elfordító szerkezet beállítása, 19. oldal.

3.8 Karfák


3.8.1 A karfa magasságának beállítása

Standard karfa

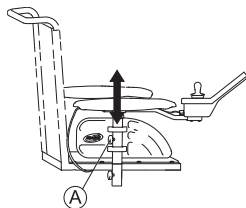

1. Lazítsa meg a szárnyas csavart **A**.
2. Állítsa az alkatrészt a kívánt helyzetbe.
3. Húzza meg a szárnyas csavart.

Felhajtható karfa

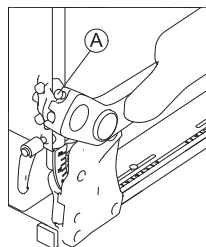


1. Lazítsa meg a szárnyasanyát **A**.
2. Állítsa az alkatrészt a kívánt helyzetbe.
3. Húzza meg a kézzel hajtható csavart.

Követő karfa



- 5 mm-es imbuszkulcs
- 13 mm-es csavarkulcs

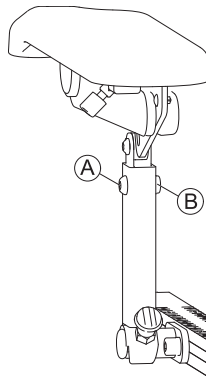


1. Vegye ki a csavart **A** és az anyát **B**.
2. Állítsa az alkatrészt a kívánt helyzetbe.
3. Tegye vissza és húzza meg a csavart és az anyát.

3.8.2 A karfa szélességének beállítása



- 8 mm-es imbuszkulcs

 Az oldaltól függően a csavar előlről vagy hátulról érhető el.

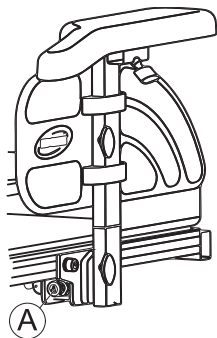


1. Lazítsa meg a csavart **A**.
2. Állítsa az alkatrészt a kívánt helyzetbe.
3. Húzza meg a csavart.

3.8.3 A karfa mélységének beállítása



- 6 mm-es imbuszkulcs

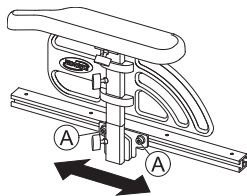


1. Lazítsa meg a csavarokat **A**.
2. Állítsa az alkatrészt a kívánt helyzetbe.
3. Húzza meg a csavarokat.

3.8.4 Az ellenállás beállítása (felhajtható/követő karfa)

A felhajtható és a követő karfa mozgása beállítható úgy, hogy nagyobb vagy kisebb ellenállást tanúsítson.



- 5 mm-es imbuszkulcs

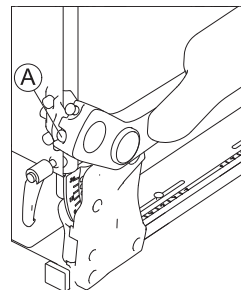


1. Hogy a karfa könnyebben mozogjon, lazítson a csavaron **A**.
2. Hogy a karfa nehezebben mozogjon, szorítson a csavaron **A**.

3.8.5 A karfapárna dőlésszögének beállítása (felhajtható/követő karfa)



- 5 mm-es imbuszkulcs

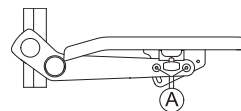


1. Lazítsa meg a csavarokat **A**.
 Ne vegye ki a csavarokat **A**!
2. Állítsa az alkatrészt a kívánt helyzetbe.
3. Húzza meg a csavarokat.

3.8.6 A karfapárna helyzetének beállítása (felhajtható karfa)



- 5 mm-es imbuszkulcs

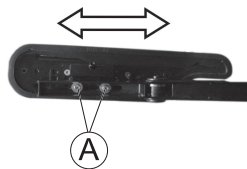

1. Állítsa az alkatrészt függőleges helyzetbe.
2. Lazítsa meg a belső csavarokat **A**.
3. Állítsa az alkatrészt a kívánt helyzetbe.
4. Húzza meg a csavarokat.
Ügyeljen arra, nehogy kimaradjanak a racsnis alátétek.

3.9 A fejtámla beállítása



VIGYÁZAT!

Sérülésveszély a motoros kerekesszék járműülésként történő használatakor, ha a fejtámla helytelenül van beállítva vagy nincs felszerelve

Ez a nyak nagyfokú megfeszítését okozhatja ütközésnél.

- A fejtámlát fel kell szerelni. Az ehhez a motoros kerekesszékhez az Invacare által külön rendelésre szállított fejtámla tökéletesen alkalmas a szállítás közbeni használatra.
- A fejtámlát a használó fülmagasságához kell beállítani.



- Előfordulhat, hogy a hátsó lemezen található fejtámla-felszerelő furatokhoz csak úgy lehet hozzáférni, hogy eltávolítják vagy módosítják a hátsó párna borítását,
- Külön megvásárolható betétlemez is beszerezhető. Ez a bilincsszerelvény és a hátsó lemez közé szerelhető, hogy még nagyobb távolságot biztosítson a Posture Back és a Deep Back termék esetén.


A fejtámla bilincseit úgy alakították ki, hogy a háttámla lapjának meglévő furataiba lehessen felszerelni.

3.9.1 A Rea fejtámla vagy nyaktámasz helyzetének beállítása

A helyzet beállítása valamennyi Rea fejtámla és nyaktámasz esetében azonos módon történik.



- 5 mm-es imbuszkulcs

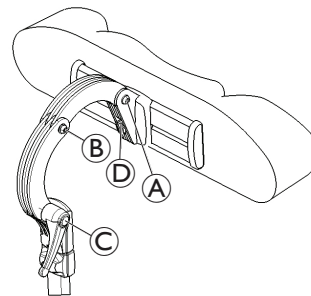


1. Lazítsa meg a csavarokat **A**, **B** vagy a rögzítőkart **C**.
2. Állítsa a fejtámlát vagy a nyaktámaszt a kívánt helyzetbe.
3. Húzza meg a csavarokat és a rögzítőkart.
4. Lazítsa meg az imbuszcsavart **D**.

5. Tolja a fejtámlát balra vagy jobbra a kívánt helyzetbe.
6. Húzza meg az imbuszcsavart.

3.9.2 A Rea fejtámla vagy nyaktámasz magasságának beállítása

A magasság beállítása valamennyi Rea fejtámla és nyaktámasz esetében azonos módon történik.

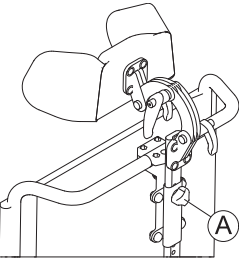

1. Lazítsa meg a kézzel hajtható csavart **A**.
2. Állítsa az alkatrészt a kívánt helyzetbe.
3. Húzza meg a kézzel hajtható csavart.


3.9.3 Az arctámasz beállítása



1. Tolja be vagy húzza ki az alkatrészt a kívánt helyzetbe.

3.9.4 Az Elan fejtámla tartószerkezetének beállítása

Az Elan fejtámla tartószerkezete nagymértékben állítható. Az alábbi ábra a csuklók lehetséges állítási tartományát szemlélteti.

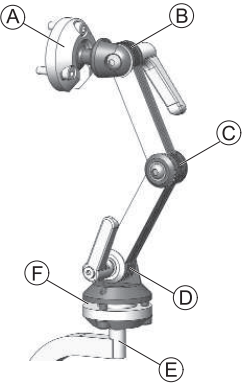


A	Felső, több irányban állítható forgórész	• 360°-ban forgatható • 80°-ban dönthető
B	Felső csukló	• 180°-ban forgatható
C	Középső csukló	• 100°-ban forgatható
D	Alsó csukló	• 180°-ban forgatható
E	Tartórúd	• 360°-ban forgatható, 90°-os lépésekben
F	Alsó, több irányban állítható forgórész	• 360°-ban forgatható • 50°-ban dönthető

Felszerelés



- 2,5 mm-es imbuszkulcs
- 4 mm-es imbuszkulcs
- 5 mm-es imbuszkulcs

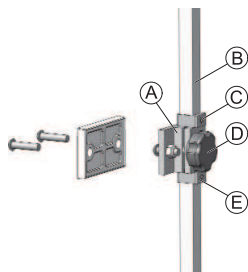

1. A biztosított tartószerkezet segítségével illesse és rögzítse a fejtámla bilincsszerelvényét a háttámla lapjának **A** meglévő furataiba.
2. A biztosított tartószerkezet segítségével szerelje fel a fejtámla párnáját (az ábrán nem látható) a fejtámla rúdjára.

 A fejtámla párnája a fejtámla rúdjának végén található gömbcsuklós forgórészrel tetszőleges szögbe állítható, ha meglazítják, majd újra meghúzzák a tartószerkezetet.


3. Lazítsa meg és vegye le a D-gyűrűt **E** a tartószerkezetről.
4. Tolja a függőleges tartórudat **B** a bilincsszerelvénybe, és állítsa be a fejtámla párnájának kívánt teljes magasságát. Húzza meg a gombot **D**. A beállítás akkor megfelelő, ha a fejtámla a használt fülének magasságában áll.
5. Szükség szerint állítsa be a felső D-gyűrűt **C**.
6. Amikor végzett a végleges magasság beállításával, állítsa be az alsó D-gyűrűt **E** úgy, hogy az éppen a bilincsszerelvény aljához simuljon (az elcsúszás megakadályozása érdekében).

A mélység és a szög beállítása

A csuklós szerkezettel beállítható a fejtámla mélysége és szöge is.



- 4 mm-es imbuszkulcs
- 5 mm-es imbuszkulcs

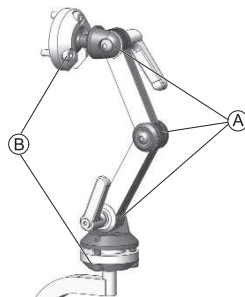

1. Lazítsa meg a kétrészes, csuklós beállító szerelvény **A** csavarjait és a rögzítőkarjait, továbbá a felső és az alsó forgórész **B** csavarjait.
2. Állítsa az alkatrészt a kívánt helyzetbe.
3. Húzza meg a csavarokat és a rögzítőkarokat.

3.10 A háttámla beállítása



VIGYÁZAT!

Az ülés és a háttámla dőlésszögének megváltoztatása módosítja a motoros kerekesszék geometriáját, és közvetlen hatással van a dinamikus stabilitására!

- A dinamikus stabilitással, az emelkedőkön és akadályokon való átkeléssel, valamint az üledöntés vagy a háttámla dőlésszögének helyes beállításával kapcsolatos részleteket a motoros kerekesszék használati útmutatójának megfelelő fejezeteiben találja.


3.10.1 A háttámla magasságának beállítása

A következő szakaszok a háttámla lapja magasságának beállítását ismertetik.

 A hátsó heveder csak 48 és 54 cm-es rögzített magasságba állítható.



- 5 mm-es imbuszkulcs

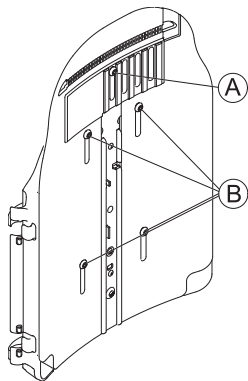

1. Lazítsa meg a csavarokat (A és B).

 Ne vegye ki a csavarokat (A és B)!

2. Állítsa az alkatrészt a kívánt helyzetbe.
3. Húzza meg a csavarokat.

3.10.2 A háttámla szélességének beállítása

A háttámla lapjának szélességét bizonyos mértékig az előlap állításával is beállíthatja, például a háttámla lapja és az üléspárna egymáshoz igazítása érdekében. A háttámla nagyobb mértékű állítását szerelővel kell elvégeztetni; ennek módját a motoros kerekesszék szervizkönyve ismerteti.




A hátsó heveder csak 38–43 cm-es és 48–53 cm-es helyzetbe állítható, és bizonyos körülmények között ki kell cserélni a szélesség megváltoztatásakor. A cserét a motoros kerekesszék szervizkönyve ismerteti. A szervizkönyv az Invacare vállalatától rendelhető meg. A szervizkönyv azonban szakképzett szerelők számára ad útmutatást, az ismertetett műveleteket nem a végfelhasználóknak kell végrehajtaniuk.

Ne feledje, hogy ha megváltoztatja a hátsó heveder szélességét, akkor a háttámla párnáját is ki kell cserélni.



- 5 mm-es imbuszkulcs

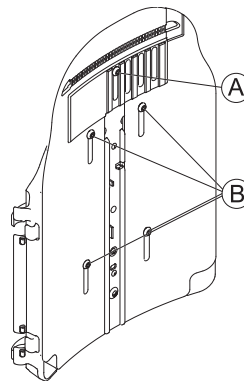

1. Lazítsa meg és vegye ki a csavart A.
2. Lazítsa meg a csavarokat B.



Ne vegye ki a csavarokat B!

3. Állítsa az alkatrészt a kívánt helyzetbe.
4. Tegye vissza a csavart A.
5. Húzza meg a csavarokat.

3.10.3 A háttámla dőlésszögének beállítása



VIGYÁZAT!

Az ülés és a háttámla dőlésszögének megváltoztatása módosítja a motoros kerekesszék geometriai elrendezését, és hatással van dinamikus stabilitására.

- A stabilitással, az akadályok leküzdésének helyes módjával, a lejtőn és emelkedőn való haladással, valamint a háttámla és az ülés megfelelő helyzetével és dőlésszögével kapcsolatban lásd a motoros kerekesszék használati útmutatóját.



VIGYÁZAT!

A kerekesszékből való kiesés veszélye

Beállításkor a háttámla váratlanul hátrabillenhet, Ön pedig kieshet a kerekesszékből.

- A háttámla dőlésszögének beállítása közben ne dőljön a háttámlának.




Ha a háttámla nem imbuszcavarokkal, hanem gombokkal van rögzítve, akkor nincs szükség szerszámmra.

Állítható szélességű háttámla



- 6 mm-es imbuszkulcs

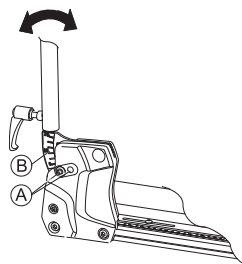


1. Távolítsa el mindkét oldalon a háttámla felső csavarját (A).
2. Állítsa be a háttámla kívánt szögét 3,8°-os lépésekben. Ehhez használja a háttámla skáláját (B). Ügyeljen arra, hogy mindkét oldalon ugyanakkora szög legyen beállítva.

3. Tegye vissza és húzza meg a csavart. Ügyeljen arra, hogy a csavar átmenjen a háttámla tartójának valamelyik furatán. A csavarnak láthatónak kell lennie a tartón belül, és a csavar fejének egy síkba kell esnie a tartóval.

Egyszerű háttámla



- 6 mm-es imbuszkulcs

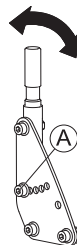

1. Távolítsa el mindkét oldalon a háttámla középső csavarját (A).
2. Állítsa be a háttámla kívánt szögét 7,5°-os lépésekben. Ügyeljen arra, hogy mindkét oldalon ugyanakkora szög legyen beállítva.
3. Tegye vissza és húzza meg a csavart.

3.10.4 A háttámla állítható feszességű kárpitozott részének beállítása

1.



Vegye ki a háttámla (tépőzáras szalagokkal rögzített) párnáját felfelé és elfelé húzva úgy, hogy hozzáférjen a beállítószalagokhoz.

2.



Igény szerint állítsa be az egyes szalagok feszességét.

3. Tegye vissza a háttámla párnáját.

3.11 Az ülés beállítása

3.11.1 Az ülés szélességének beállítása

A teleszkópos üléstartó négy helyzetbe állítható. Így az ülés szélessége az állítható üléslemezzel, illetve az állítható üléshevederrel együtt változtatható.

A szélesség beállításának módját a motoros kerekesszék szervizkönyve ismerteti. A szervizkönyv az Invacare vállalatától rendelhető meg. A szervizkönyv azonban szakképzett szerelők számára ad útmutatást, az ismertetett műveleteket nem a végfelhasználóknak kell végrehajtaniuk.

3.11.2 Az ülés mélységének beállítása




Az ülésmélység nagymértékben befolyásolja az ülés súlypontjának kiválasztását, ez pedig hatással van a dinamikus stabilitásra. Ha jelentős mértékben megváltoztatja az ülésmélységet, akkor be kell állítania az ülés súlypontját is. Lásd a motoros kerekesszék szervizkönyvének „Az ülés súlypontjának beállítása” („Adjusting the center of gravity of the seat”) című fejezetét. A szervizkönyv az Invacare vállalatától rendelhető meg. A szervizkönyv azonban szakképzett szerelők számára ad útmutatást, az ismertetett műveleteket a végfelhasználók nem hajthatják végre.



Az ülés skáláján látható számok útmutatóként szolgálnak. Nem határoznak meg semmilyen mértékegységet, nem jelölik például az ülésmélységet centiméterben. A skálával és az ülésmélység beállításával kapcsolatos további információkat a szervizkönyvben talál.



- 6 mm-es imbuszkulcs

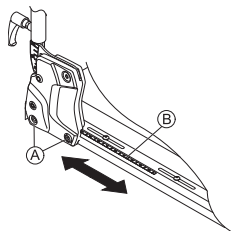

1. Lazítsa meg mindkét oldalon a háttámla alsó csavarjait (A).
2. Állítsa az alkatrészt a kívánt helyzetbe. Az ülés mélység folyamatosan állítható. Ehhez útmutatásul használja az ülés skáláját (B).
Ügyeljen arra, hogy mindkét oldalon ugyanakkora ülés mélység legyen beállítva.
3. Húzza meg a csavarokat.

3.11.3 Az ülés dőlésszögének beállítása



VIGYÁZAT!

Az ülés és a háttámla dőlésszögének megváltoztatása módosítja a motoros kerekszékek geometriáját, és közvetlen hatással van a dinamikus stabilitására!


- A dinamikus stabilitással, az emelkedőn és akadályokon való átkelésével, valamint az üledöntés vagy a háttámla dőlésszögének helyes beállításával kapcsolatos részleteket a motoros kerekszék használati útmutatójának megfelelő fejezeteiben találja.

Az ülés dőlésszöge egy, az ülés kerete alatt elől található tengely segítségével állítható be.

Az ülés szögének beállításakor ügyelni kell arra, hogy a tengelyben mindig bennmaradjon a csavarnak legalább egy 1 cm hosszú menetes része, és a csavar soha ne legyen teljesen kicsavarva a tengelyből.




Könnyebb beállítani az ülés dőlésszögét akkor, amikor senki sem ül a kerekszékekben.

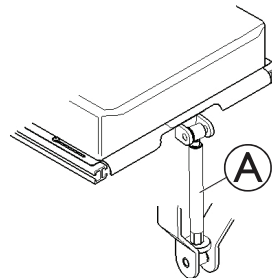

Az ábra a kézi ülésdőlés-beállításra szolgáló tengely (A) helyét mutatja.

3.12 Az oldalsó törzstámasz beállításai

A szélesség beállítása

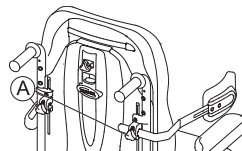


1. Lazítsa meg a gombokat (A).
2. Állítsa az alkatrészt a kívánt helyzetbe.
3. Húzza meg a gombokat.

A magasság beállítása



- 5 mm-es imbuszkulcs

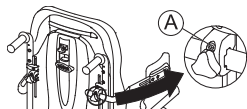


1. Lazítsa meg a csavarokat **A**.
2. Állítsa az alkatrészt a kívánt helyzetbe.
3. Húzza meg a csavarokat.

A mélység beállítása



- 5 mm-es imbuszkulcs

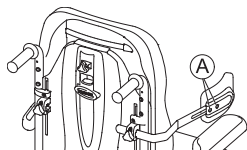


1. Lazítsa meg a csavarokat **A**.
2. Állítsa az alkatrészt a kívánt helyzetbe.
3. Húzza meg a csavarokat.

3.13 A gyorskioldós csípőtámasz beállítása

A helyzet beállítása



- 5 mm-es imbuszkulcs

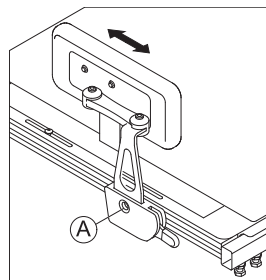


1. Lazítsa meg a csavart **A**.
Ne vegye ki.
2. Állítsa a csípőtámaszt a kívánt helyzetbe.
3. Húzza meg a csavart.

A szélesség beállítása



- 2 db 5 mm-es imbuszkulcs

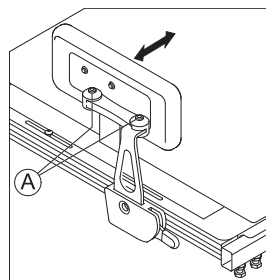


1. Lazítsa meg a csavarokat **A**.
2. Állítsa a csípőtámaszt a kívánt szélességűre.
 A szélesség csak az ülésszélességnél kisebbre állítható, nagyobbra nem.
3. Húzza meg a csavarokat.

A dőlésszög beállítása



- 5 mm-es imbuszkulcs

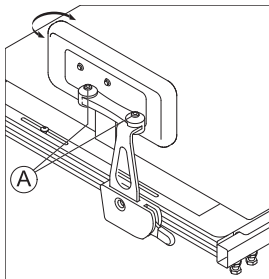


1. Lazítsa meg a csavarokat ①.
2. Állítsa a csípőtámaszt a kívánt szögbe.
3. Húzza meg a csavarokat.

A csípőpárna mélységének beállítása



- 10 mm-es csavarkulcs

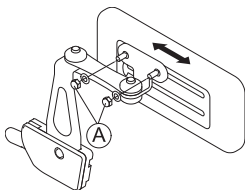

1. Lazítsa meg a két csavart ①.
2. Állítsa a csípőpárnát a kívánt mélységre.
3. Húzza meg a csavarokat.

A csípőpárna magasságának beállítása

A csípőpárna magassága kétféleképp állítható be:


- a felszerelőnyílásai segítségével,
- a konzolja segítségével.

A felszerelőnyílások segítségével




- 10 mm-es csavarkulcs

1.

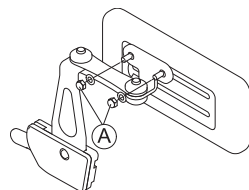

Lazítsa meg a két csavart ①.

2.

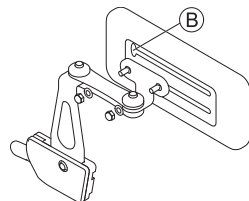

A kivágott részen ② át vegye ki a csípőpárnát a felszerelőnyílásból.


3. Tegye be a csípőpárnát egy másik felszerelőnyílásba.
4. Húzza meg a csavarokat.

A konzol segítségével



- 5 mm-es imbuszkulcs


1.

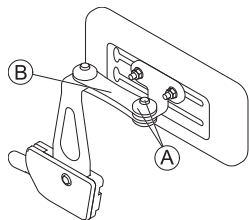

Vegye ki a felső csavart és a dörzskupakot (A).

2. Vegye ki a kis dörzscsatlakozót (B).

3.

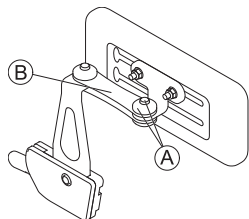

Vegye ki a csípőpárnát a konzoljával együtt, fordítsa meg, hogy az eddig felül lévő oldala kerüljön alulra, és tegye vissza.

4. Tegye vissza a dörzs-összekötőidomot, a dörzskupakot és a csavart, és húzza meg a csavart.

3.14 A tálca beállítása/levétele

**FIGYELMEZTETÉS!**


Személyi sérülés vagy a készülék károsodásának veszélye

Ha a motoros kerekesszék tálcával vagy más kiegészítő felszereléssel is el van látva, akkor ez az elem a járműbe történő áthelyezés közben elszabadulhat, és ütközés esetén személyi sérülést vagy anyagi kárt okozhat.

- Ha lehetséges, az utazás idejére a motoros kerekesszék egyéb kiegészítő tartozékait vagy a motoros kerekesszékhez kell rögzíteni, vagy le kell szerelni a motoros kerekesszékről és a járműben kell rögzíteni.
- Ha a motoros kerekesszék tálcával rendelkezik, akkor azt szállítás előtt mindig szerelje le róla.




3.14.1 A tálca oldalirányú beállítása

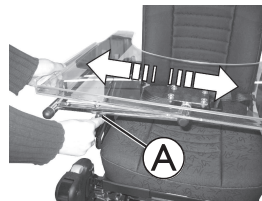

1. Lazítsa meg a szárnyas csavart (A).
2. Állítsa az alkatrészt a kívánt helyzetbe.
3. Húzza meg a szárnyas csavart.

3.14.2 A tálca mélységének beállítása / a tálca eltávolítása

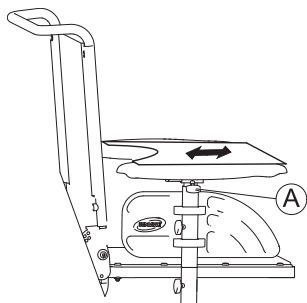

1. Lazítsa meg a szárnyas csavart (A).
2. Állítsa be az alkatrészt a kívánt helyzetbe (vagy távolítsa el teljesen).
3. Húzza meg a szárnyas csavart.

3.14.3 A tálca oldalra hajtása

A tálcát fel lehet hajtani, majd el lehet fordítani oldalra, hogy a használó be tudjon szállni a motoros kerekesszékekbe, illetve ki tudjon szállni belőle.



VIGYÁZAT!


Sérülésveszély! Amikor a tálca fel van hajtva, nincs abban a helyzetben rögzítve!

- Ne hagyja felemelt helyzetben billegni a tálcát!
- Soha ne haladjon a helyváltoztatást segítő eszközzel, amikor a tálca fel van hajtva!
- A tálcát mindig óvatosan hajtja le.


3.15 Középső lábtámasz – kézzel állítható

3.15.1 A lábtámasz levétele

A közép-re szerelt, kézzel állítható lábtámasz teljesen eltávolítható.

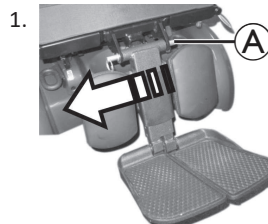

Vegye ki az eltávolítható tengelyt (A).

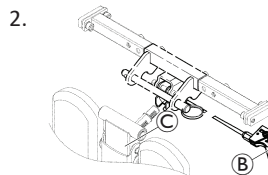

Erősen tartsa a lábtámaszt, és húzza a kart (B).

3. Vegye ki a lábtámaszt a tartójából (C).

3.15.2 A lábtámasz hosszának beállítása



VIGYÁZAT!

Sérülésveszély

Ha nem rögzítette a lábtámaszt és meghúzta a kart (A), akkor a lábtámasz hirtelen leeshet, ami sérülést okozhat.

- A kar meghúzása előtt rögzítse a lábtartót.




1. Tartsa biztonságosan a lábtartót.
2. Húzza meg a kart **A**.
3. Tolja a lábtámaszt a kívánt helyzetbe.

3.15.3 A lábtámasz hosszának beállítása



- 5 mm-es (3/16") imbuszkulcs

A lábtámaszok hosszát egymástól függetlenül állíthatja be.

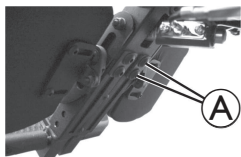

1. Oldja ki a lábtartó hátsó részén lévő csavarokat **A**.
2. Állítsa be a kívánt hosszúságot.
3. Húzza meg a csavarokat.

3.15.4 Lábtartó lemez szögének beállítása



- 4 mm-es (5/32") imbuszkulcs




1. Hajtsa fel a lábtartó lemezt, hogy hozzáférjen a beállítócsavarhoz **A**.
2. Állítsa be a beállítócsavarokat.
3. Hajtsa le újra a lábtartó lemezeket.

3.15.5 A lábikratámaszok beállítása



- 5 mm-es (3/16") imbuszkulcs

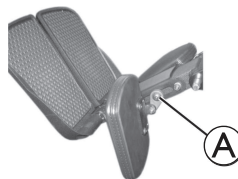

1. Hajtsa előre a lábikratámaszt, hogy hozzáférjen a csavarhoz **A**.
2. Lazítsa meg a csavart az imbuszkulccsal, és állítsa a lábikratámaszt a kívánt szögbe és magasságba.
3. Húzza meg a csavart.
4. Hajtsa vissza a lábikratámaszt.

3.16 LNX lábtámasz


3.16.1 A lábtámasz hosszának beállítása

Szükség esetén a lábtámasz előzetesen a 90°-os helyett 83°-osra vagy 97°-osra állítható be. Forduljon az Invacare forgalmazójához.




- 4 mm-es imbuszkulcs
- 10 mm-es villáskulcs

A lábtámaszok hosszát egymástól függetlenül állíthatja be.

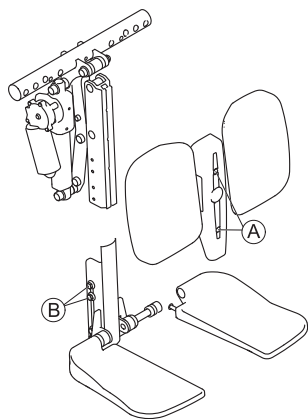

1. Távolítsa el a lábtámasz elején található csavarokat (A).
2. Távolítsa el a burkolatot a lábikratámaszokkal együtt.
3. Lazítsa meg a lábtámasz oldalán található anyákat (B).
Előfordulhat, hogy az anyákat ki kell venni, és egy másik nyílásba kell betenni.
4. Állítsa be a kívánt hosszúságot.
5. Húzza meg az anyákat.
6. Tegye vissza a lábikratámaszokat és a borítást, majd húzza meg ismét a csavarokat.

 A lábtartóval rendelkező lábtámasz ugyanígy állítható be.

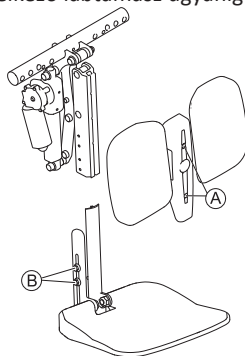

3.16.2 Lábtartó lemez szögének beállítása



- 4 mm-es (5/32") imbuszkulcs



1. Hajtsa fel a lábtartó lemezt, hogy hozzáférjen a beállítócsavarhoz (A).
2. Állítsa be a beállítócsavarokat.
3. Hajtsa le újra a lábtartó lemezeket.

3.16.3 A lábtartó lemez szélességének beállítása


A lábtartó lemez szélessége távtartók segítségével állítható:

- A szélesség növeléséhez állítson be távtartókat a belső oldalra.
- A szélesség csökkentéséhez állítson be távtartókat kívülre.

Minden egyes távtartó 1/4" (6,35 mm) értékkel növeli vagy csökkenti a szélességet.



- 6 mm-es imbuszkulcs

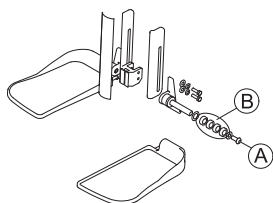


1. Csavarja ki a csavart (A).
2. Távolítsa el a távtartókat (B) és a lábtartó lemezt.
3. Szükség szerint állítson be távtartókat belülré.
4. Tegye föl a lábtartó lemezt.
5. Szükség szerint állítson be távtartókat kívülré.
6. Húzza meg a csavart.

3.16.4 A lábtartó lemez szögének beállítása



- 4 mm-es (5/32") imbuszkulcs

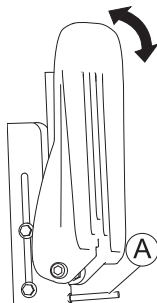

1. Hajtsa fel a lábtartó lemezt, hogy hozzáférjen a beállítócsavarhoz (A).
2. Állítsa be a beállítócsavart.
3. Hajtsa le a lábtartó lemezt.

3.16.5 A lábikratámaszok beállítása



ÉRTESTÍTÉS!

A kerekesszékek károsodásának veszélye

- A lábikratámaszok konfigurációjának módosítása után ügyeljen arra, hogy a lábikratámaszok a lábtámasz szögének beállításakor se a bolygókerekekhez, se az üléslemezhez ne érjenek hozzá.

A lábikratámaszok egymástól függetlenül állíthatók be saját tartó konzoljukon a lábikratámaszok hátsó részén található rögzítőcsavarokkal. A lábikratámaszok beállításával (mélységük, magasságuk és szögük beállításával) számos különböző konfiguráció állítható be. A független lábikratámasz-beállítási lehetőség optimális elhelyezést és kényelmet biztosít a végfelhasználó számára – alább példa konfigurációk láthatók.

A lábikratámasz beállítása – példa konfigurációk

középre igazított	Szélre igazított (maximális mértékben)	Alulra igazított	Megemelt Eltolt	Megdöntött




- 4 mm-es imbuszkulcs

1. Hajtsa előre a lábikratámaszt, hogy hozzáférjen a csavarokhoz.
2. Lazítsa meg és szükség esetén vegye ki a csavarokat.
3. Állítsa a lábikratámaszt a kívánt magasságba és szélességbe.
4. Húzza meg a csavarokat.
5. Hajtsa vissza a lábikratámaszt.

3.17 Vari-F lábtámasz

3.17.1 A lábtámasz kifelé történő elfordítása és/vagy eltávolítása

A kis zároló gomb a lábtámasz felső részén található. Amikor a reteszelés ki van oldva, a lábtámasz be- és kihajtható a kerekesszékekbe üléskor, és teljesen el is távolítható.

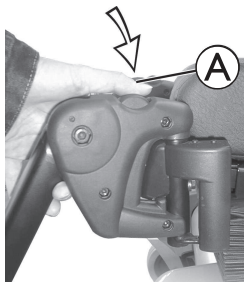

1. Nyomja le a zároló gombot (A), és hajtsa ki a lábtámaszt.
2. Emelje ki a felfelé a lábtámaszt.

3.17.2 Dőlésszög beállítása



VIGYÁZAT!

Sérülésveszély a lábtartók és a lábtámaszok helytelen beállítása miatt


- Minden út előtt és alatt fontos megbizonyosodni arról, hogy a lábtartók nem érnek sem a kerekéhez, sem a talajhoz.



- 6 mm-es imbuszkulcs

1. Lazítsa meg a csavart (A) az imbuszkulccsal.

- 2.

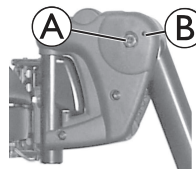

Ha a lábtámasz nem mozdítható a csavar meg lazítása után, helyezzen egy fémtüskét a megfelelő furatba (B), és ütögesse meg kis erővel kalapáccsal. A lábtámasz belső rögzítőmechanizmusa erre elenged. Szükség esetén ismételje meg az eljárást a lábtámasz másik oldalán is.

- 3.



Lazítsa meg a csavarokat (C).

4. Állítsa be a kívánt szöget.


5. Húzza meg a csavart.

3.17.3 Lábtámasz végállásának beállítása




- 6 mm-es imbuszkulcs
- 10 mm-es csavarkulcs

1.

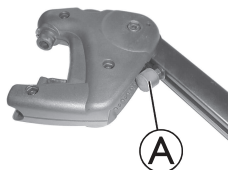

A lábtámasz véghelyzetét a gumiütköző (A) határozza meg.

2.

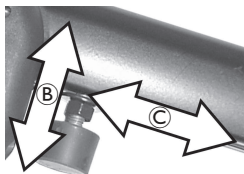


A gumiütköző be- és kicsavarható (B), illetve felfelé vagy lefelé tolható (C).

3.




Lazítsa meg a csavart (D), és hajtsa fel a lábtámaszt, hogy hozzáérjen a gumiütközőhöz.

4.

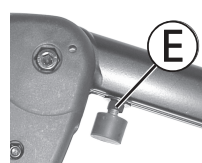

Lazítsa meg az ellenanyát (E).

5.

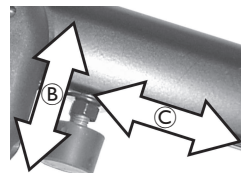

Állítsa a gumiütközőt a kívánt helyzetbe.

6. Húzza meg az ellenanyát.

7.



Állítsa a lábtámaszt a kívánt helyzetbe.

8. Húzza meg a csavart.

3.17.4 A lábtámasz hosszának beállítása




VIGYÁZAT!

Sérülésveszély a lábtartók és a lábtámaszok helytelen beállítása miatt

- Minden út előtt és alatt fontos megbizonyosodni arról, hogy a lábtartók nem érnek sem a kerekhez, sem a talajhoz.



- 5 mm-es imbuszkulcs

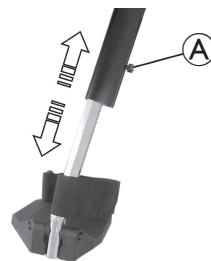


1. Lazítsa meg az **A** csavart.
2. Állítsa be a kívánt hosszúságot.
3. Húzza meg a csavart.

3.18 Vari-A lábtámaszok

3.18.1 A lábtámasz kifelé történő elfordítása és/vagy eltávolítása

A kis zároló gomb a lábtámasz felső részén található. Amikor a reteszelve ki van oldva, a lábtámasz be- és kihajtható a kerekesszékekbe üléshez, és teljesen el is távolítható.

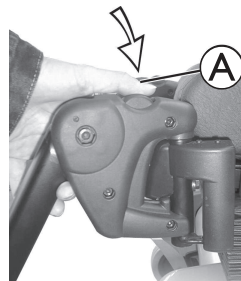

1. Nyomja le a zároló gombot **A**, és hajtsa ki a lábtámaszt.
2. Emelje ki a felfelé a lábtámaszt.

3.18.2 Dőlésszög beállítása



VIGYÁZAT!

Sérülésveszély a lábtartók és a lábtámaszok helytelen beállítása miatt

- Minden út előtt és alatt fontos megbizonyosodni arról, hogy a lábtartók nem érnek sem a kerekhez, sem a talajhoz.

1.



A

Legalább egy fordulatnyit balra elforgatva lazítsa meg a rögzítőgombot


A.

2.



Ütögesse meg a gombot, hogy a zárómechanizmus kioldódjon.

3.

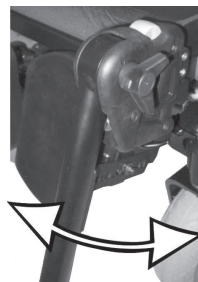

Állítsa be a kívánt szöget.

4.




Jobbra forgatva húzza meg a gombot.

3.18.3 Lábtámasz végállásának beállítása



- 10 mm-es csavarkulcs


1.

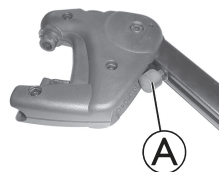

A


A lábtámasz véghelyzetét a gumiütköző A határozza meg.

2.

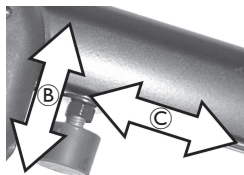

A gumiütköző be- és kicsavarható **B**, illetve felfelé vagy lefelé tolható **C**.

3.

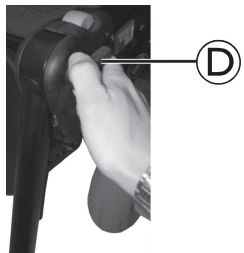


Legalább egy fordulatnyit balra elforgatva lazítsa meg a rögzítőgombot **D**.

4.




Ütögesse meg a gombot, hogy a zárómechanizmus kioldódjon.

5.

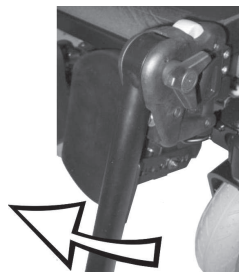


Hajtsa fel a lábtámaszt, hogy hozzáférjen a gumiütközőhöz.

6.

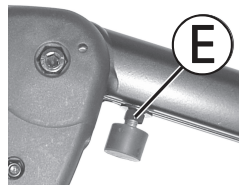

Lazítsa meg az ellenanyát **E** a csavarkulccsal.


7.

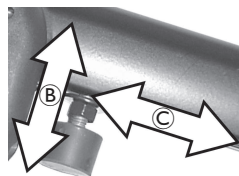

Állítsa a gumiütközőt a kívánt helyzetbe.

8. Húzza meg az ellenanyát.

9.

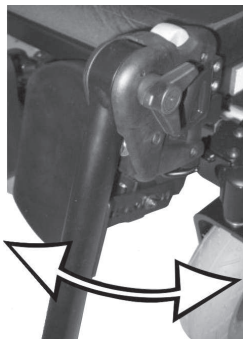

Állítsa a lábtámaszt a kívánt helyzetbe.

10. Húzza meg újra a rögzítőgombot.

3.18.4 A lábtámasz hosszának beállítása




VIGYÁZAT!

Sérülésveszély a lábtartók és a lábtámaszok helytelen beállítása miatt

- Minden út előtt és alatt fontos megbizonyosodni arról, hogy a lábtartók nem érnek sem a kerekhez, sem a talajhoz.



- 5 mm-es imbuszkulcs

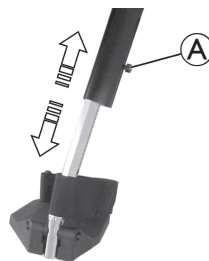


1. Lazítsa meg az **A** csavart.
2. Állítsa be a kívánt hosszúságot.
3. Húzza meg a csavart.

3.18.5 A lábikratámaszok beállítása

A magasság beállítása



- 4 mm-es imbuszkulcs

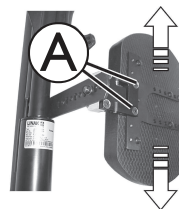


1. Lazítsa meg az **A** csavarokat.
2. Állítsa be a kívánt helyzetet.
3. Húzza meg a csavarokat.

A mélység beállítása

A hátsó lábtámasz mélységét a tartólemez segítségével lehet beállítani. A tartólemez furatainak kombinációi 5 különböző mélység beállítását teszik lehetővé.



- 10 mm-es csavarkulcs

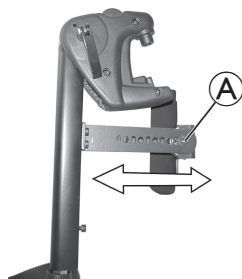

1. Távolítsa el az anyát (A).
2. Állítsa be a kívánt mélységet. Ne feledje, hogy a kerek furatok a hátsó lábtámasz rögzítőcsavarjainak helyei, míg a téglalap alakú nyílásokba a menet nélküli fémpöccök kerülnek.
3. Tegye vissza és húzza meg az anyát.

A lábikratámasz kioldása és elfordítása hátrafele irányban



1.

Nyomja le egyenesen a hátsó lábtámaszt.

2.



Oldja a lábtámasz reteszelését, és hajtsa ki a lábtámaszt.
A hátsó lábtámasz magától elfordul hátrafelé.



3.



Emelje át a lábát a saroktartó heveder fölé, és helyezze a talajra.

3.18.6 A lábtartók beállítása

Az állítható dőlésszögű lábtartók beállítása



- 5 mm-es imbuszkulcs



1. Lazítsa meg a lábtartón található mindkét állítócsavart.
2. Állítsa a lábtartó lemezt a kívánt szögbe.
3. Húzza meg a csavarokat.

Az állítható dőlésszögű és mélységű lábtartók beállítása



- 5 mm-es imbuszkulcs




1. Lazítsa meg a lábtartón lévő állítócsavart **A**.
2. Állítsa be a lábtartó kívánt állásszögét és mélységét.
3. Húzza meg a csavart.

3.19 ADM lábtámaszok

3.19.1 A lábtámasz kifelé történő elfordítása és/vagy eltávolítása

A kis zároló gomb a lábtámasz felső részén található. Amikor a reteszelve ki van oldva, a lábtámasz be- és kihajtható a kerekesszékekbe üléskor, és teljesen el is távolítható.

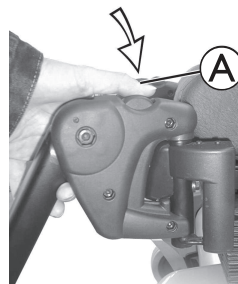

1. Nyomja le a zároló gombot **A**, és hajtsa ki a lábtámaszt.
2. Emelje ki a felfelé a lábtámaszt.

3.19.2 Dőlésszög beállítása



VIGYÁZAT!

Sérülésveszély a lábtartók és a lábtámaszok helytelen beállítása miatt

- Minden út előtt és alatt fontos megbizonyosodni arról, hogy a lábtartók nem érnek sem a kerekhez, sem a talajhoz.



VIGYÁZAT!

Becsípődésveszély


- Ne nyúljon a lábtámasz forgási sávjába!

Megemelés



1. Addig húzza felfelé a lábtámaszt, amíg el nem éri a kívánt szöget.

Leeresztés

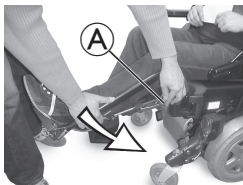

1. Tartsa a lábtámaszt a lábtartó területén, húzza az oldalsó beállítókart (A), és lassan eresze le a lábtámaszt.

3.19.3 A lábtámasz hosszának beállítása




VIGYÁZAT!

Sérülésveszély a lábtartók és a lábtámaszok helytelen beállítása miatt

- Minden út előtt és alatt fontos megbizonyosodni arról, hogy a lábtartók nem érnek sem a kerekhez, sem a talajhoz.



- 5 mm-es imbuszkulcs

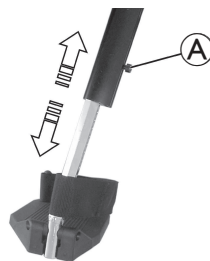


1. Lazítsa meg az (A) csavart.
2. Állítsa be a kívánt hosszúságot.
3. Húzza meg a csavart.

3.19.4 A lábikratámaszok beállítása

A magasság beállítása



- 4 mm-es imbuszkulcs

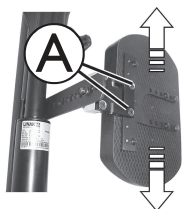


1. Lazítsa meg az **A** csavarokat.
2. Állítsa be a kívánt helyzetet.
3. Húzza meg a csavarokat.

A mélység beállítása

A hátsó lábtámasz mélységét a tartólemez segítségével lehet beállítani. A tartólemez furatainak kombinációi 5 különböző mélység beállítását teszik lehetővé.



- 10 mm-es csavarkulcs

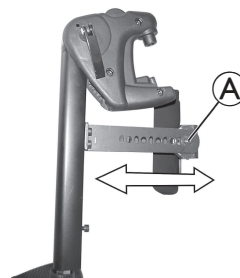

1. Távolítsa el az anyát **A**.
2. Állítsa be a kívánt mélységet. Ne feledje, hogy a kerek furatok a hátsó lábtámasz rögzítőcsavarjainak helyei, míg a téglalap alakú nyílásokba a menet nélküli fémpöccök kerülnek.
3. Tegye vissza és húzza meg az anyát.


A lábikratámasz kioldása és elfordítása hátrafele irányban



1.

Nyomja le egyenesen a hátsó lábtámaszt.

2.

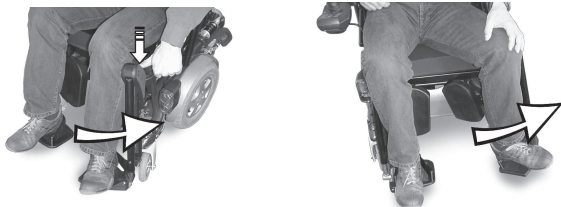

Oldja a lábtámasz reteszelését, és hajtsa ki a lábtámaszt.
A hátsó lábtámasz magától elfordul hátrafelé.

3.




Emelje át a lábát a saroktartó heveder fölött, és helyezze a talajra.

3.19.5 A lábtartók beállítása

Az állítható dőlésszögű lábtartók beállítása



- 5 mm-es imbuszkulcs

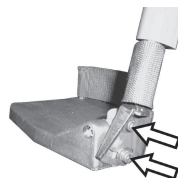

1. Lazítsa meg a lábtartón található mindkét állítócsavart.
2. Állítsa a lábtartó lemezt a kívánt szögbe.
3. Húzza meg a csavarokat.

Az állítható dőlésszögű és mélységű lábtartók beállítása



- 5 mm-es imbuszkulcs




1. Lazítsa meg a lábtartón lévő állítócsavart **A**.
2. Állítsa be a lábtartó kívánt állásszögét és mélységét.
3. Húzza meg a csavart.

3.20 Meghajtott emelhető lábtámaszok (ADE lábtámaszok)

3.20.1 A lábtámasz kifelé történő elfordítása és/vagy eltávolítása

A kis zárolódó gomb a lábtámasz felső részén található. Amikor a reteszelése ki van oldva, a lábtámasz be- és kihajtható a kerekesszékekbe üléskor, és teljesen el is távolítható.

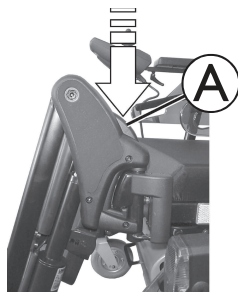

1. Nyomja le a zárolódó gombot (A), és hajtsa ki a lábtámaszt.
2. Emelje ki a felfelé a lábtámaszt.

3.20.2 Dőlésszög beállítása



VIGYÁZAT!

Becsípődésveszély

- Ne nyúljon a lábtámasz forgási sávjába!



VIGYÁZAT!

Sérülésveszély a lábtartók és a lábtámaszok helytelen beállítása miatt

- Minden út előtt és alatt fontos megbizonyosodni arról, hogy a lábtartók nem érnek sem a kerekhez, sem a talajhoz.

A villanymotoros magasságállítású lábtámasz a vezérlőkonzollról működtethető. További tudnivalókat a vezérlőkonzol saját használati utasításában találhat.

3.20.3 A lábtámasz hosszának beállítása




VIGYÁZAT!

Sérülésveszély a lábtartók és a lábtámaszok helytelen beállítása miatt

- Minden út előtt és alatt fontos megbizonyosodni arról, hogy a lábtartók nem érnek sem a kerekhez, sem a talajhoz.



- 10 mm-es csavarkulcs

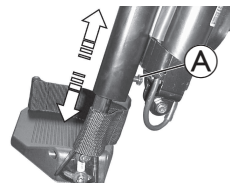


1. Lazítsa meg az (A) csavart.
2. Állítsa be a kívánt hosszúságot.
3. Húzza meg a csavart.

3.20.4 A lábikratámaszok beállítása

A magasság beállítása



- 4 mm-es imbuszkulcs

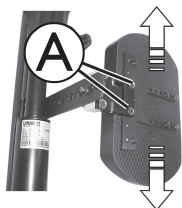


1. Lazítsa meg az **A** csavarokat.
2. Állítsa be a kívánt helyzetet.
3. Húzza meg a csavarokat.

A mélység beállítása

A hátsó lábtámasz mélységét a tartólemez segítségével lehet beállítani. A tartólemez furatainak kombinációi 5 különböző mélység beállítását teszik lehetővé.



- 10 mm-es csavarkulcs

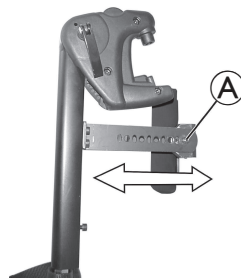

1. Távolítsa el az anyát **A**.
2. Állítsa be a kívánt mélységet. Ne feledje, hogy a kerek furatok a hátsó lábtámasz rögzítőcsavarjainak helyei, míg a téglalap alakú nyílásokba a menet nélküli fémpöccök kerülnek.
3. Tegye vissza és húzza meg az anyát.


A lábikratámasz kioldása és elfordítása hátrafele irányban



1.

Nyomja le egyenesen a hátsó lábtámaszt.

2.

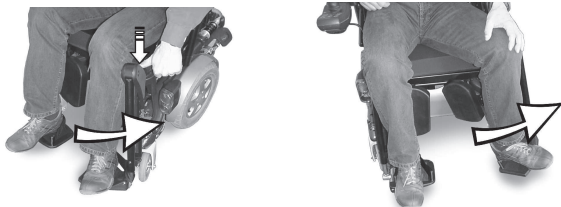

Oldja a lábtámasz reteszelését, és hajtsa ki a lábtámaszt.
A hátsó lábtámasz magától elfordul hátrafelé.

3.




Emelje át a lábát a saroktartó heveder fölött, és helyezze a talajra.

3.20.5 A lábtartók beállítása

Az állítható dőlésszögű lábtartók beállítása



- 5 mm-es imbuszkulcs

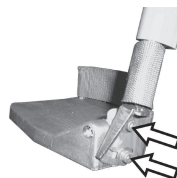

1. Lazítsa meg a lábtartón található mindkét állítócsavart.
2. Állítsa a lábtartó lemezt a kívánt szögbe.
3. Húzza meg a csavarokat.

Az állítható dőlésszögű és mélységű lábtartók beállítása




- 5 mm-es imbuszkulcs



1. Lazítsa meg a lábtartón lévő állítócsavart **A**.
2. Állítsa be a lábtartó kívánt állásszögét és mélységét.
3. Húzza meg a csavart.


3.21 A 80°-os Standard lábtámasz beállítása

Forgatás és/vagy eltávolítás

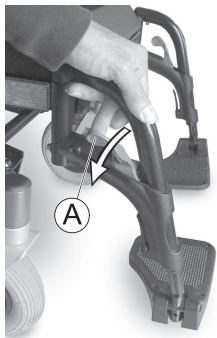

1. Tolja a kioldó kart (A) befelé vagy kifelé.
2. Állítsa az alkatrészt a kívánt helyzetbe.
3. Eltávolításához húzza felfelé az alkatrészt.

A hossz beállítása

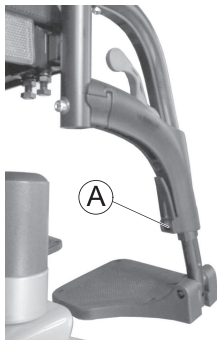


1. Lazítsa meg a csavart (A).
 Ne vegye ki a csavart (A)!
2. Állítsa az alkatrészt a kívánt helyzetbe.
3. Húzza meg a csavart.

4 Használat


4.1 A karfa levétele oldalról történő be- és kiszálláshoz

Felhajtható karfa

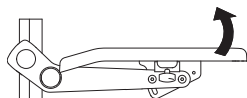

1. Az oldalról történő be- és kiszálláshoz hajtsa fel a karfát.


Követő karfa

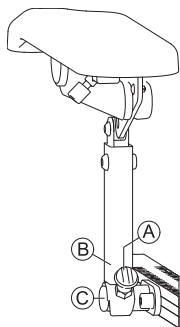

1. Húzza meg a gombot (A) a karfatámasz (B) csapágylemeztől (C) történő eloldásához.
2. Az oldalról történő be- és kiszálláshoz hajtsa fel a karfát.

 Az oldalról történő be- és kiszállással kapcsolatos információkat a motoros kerekesszék használati útmutatójában találja.

4.2 Csípőtámasz eltávolítása/felszerelése gyorskioldóval

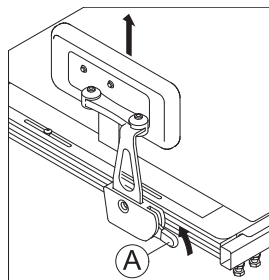

A csípőtámasz eltávolítása

1. Húzza felfelé a kart (A).
2. Vegye ki a csípőtámaszt a tartójából.


A csípőtámasz felszerelése

1. Tegye be a csípőtámaszt a tartójába.
2. Nyomja lefelé a kart (A). Figyeljen arra, hogy a csípőtámasz a helyére kattanjon.


4.3 A háttámla párnájának kicserélése

csak a Matrx Elite háttámlák esetében

A háttámla párnájának eltávolítása

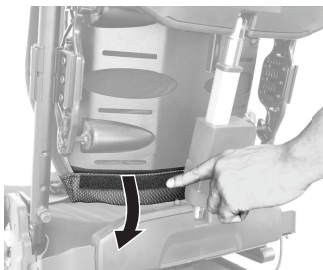


1. Lazítsa meg a kampót és a hurokszalagot a háttámla alsó részén.

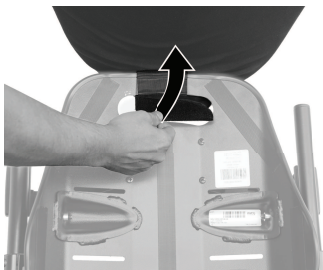

2. Emelje felfelé a párnát.

3. Lazítsa meg a kampót és a hurokszalagot a háttámla fogantyújánál.

A háttámlapárna felszerelése

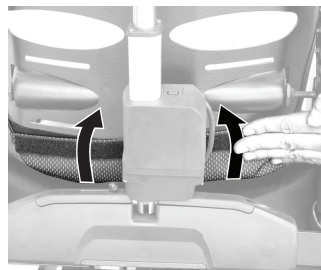

1. Csatlakoztassa a kampót és a hurokszalagot a háttámla alsó részénél.



2. Hajtsa felfelé a párnát.



3. Csatlakoztassa a kampót és a hurokszalagot a háttámla fogantyújánál.

4.4 A középre igazított LNX motoros lábtámasz használata teleszkópos lábtartó lemezzel

A dőlésszög beállítása



FIGYELMEZTETÉS!

Becsípődési pont

A lábtámasz szögének beállításakor becsípődés veszélye áll fenn.

- A lábtámasz szögének beállításakor vigyázzon, hogy a lábtámasz tetejére ne kerüljön semmi.

A lábtartó leengedése



ÉRTESÍTÉS!

A lábtartó leengedése az előre beállított pontig károsíthatja a padlót.

- Amikor a lábtartó eléri a padlót, ne engedje tovább.

A teleszkópos lábtartót egy előre beállított pontig engedheti le. A kerekesszék konfigurációjától függően előfordulhat, hogy ez a pont nem felel meg pontosan az ülés padlótól mért magasságának, hanem néhány milliméterrel fölötte vagy alatta is lehet.

Hajtászár



ÉRTESÍTÉS!

Ha úgy halad a kerekesszékkal, hogy a lábtartó le van engedve, a lábtámasz sérülhet.

- Amint elmozdítja a lábtartót, működésbe lép a hajtászár.

1. A hajtászár kikapcsolásához húzza vissza a lábtartót felső állásba.

5 A karbantartás ütemezése

A motoros pozicionálórendszer optimális biztonságának és megbízhatóságának biztosításához tartsa be az alábbi karbantartási időrendet. A karbantartási időrenden kívül illessze be napi rutinjába az alábbi karbantartási feladatokat és biztonsági figyelmeztetéseket is.



FIGYELMEZTETÉS!

A motoros pozicionáló-rendszer működésének/teljesítményének bármilyen hirtelen vagy fokozatos romlását (pl. működtetőmotor/sebességváltó megnövekedett zaja, csörgés, lomhaság stb.) azonnal jelenteni kell a kereskedőnek

- Ilyenkor javasolt, hogy egy szakképzett szerelő teljesen átvizsgálja a kerekesszéket, így biztosítva, hogy nincs olyan szokatlan elhasználódás vagy fizikai károsodás, amely szervizelést és/vagy javítást igényel.



Annak érdekében, hogy a motoros pozicionálórendszer megfelelően és biztonságosan működjön, az Invacare azt javasolja, hogy egy, a márkakereskedő által megbízott szakképzett szerelő hat (6) havonta teljesen vizsgálja át a kerekesszéket.



Olvassa el a kerekesszék motorrendszerével kapcsolatos összes karbantartási és biztonsági információt. Lásd a kerekesszék használati útmutatóját (külön dokumentum).

Napi karbantartás:

- Ellenőrizze, hogy a motoros pozicionálórendszert vezérlő összes kapcsoló (nyomógomb és váltókapcsolók) megfelelően működik.

- Töltse fel az akkumulátorokat (az akkumulátorok töltésére és ápolására vonatkozó fontos tudnivalókat a kerekesszék használati útmutatójában találja).

Havi ellenőrzőlista:

- Elektromos rendszer és vezetékek:
 - Ellenőrizze, hogy a vezetékek nem csípődtek-e be és nem húzódtak-e meg (a teljes ülésrendszerben)
 - Ellenőrizze a vezetékek elhasználódását
 - Győződjön meg arról, hogy a csatlakoztatások megfelelők
- Kárpit:
 - Ellenőrizze az összes kárpitozott alkatrészt, hogy nincs-e rajta sérülés és kopás
 - Ellenőrizze az összes burkolatot, különösen a fémrészek körül, hogy nincs-e rajta sérülés és kopás
- Hardver és alkatrészek:
 - Ellenőrizze a rögzítési alkatrészeket (az ülésrendszer és az alap között).
- Korlátozó kapcsolók:
 - Ellenőrizze a korlátozó kapcsolók beállítását.
 - Ellenőrizze, hogy a hajtásár megfelelően működik-e.

6 Használat után

6.1 Felújítás

A termék ismételten használható. Amikor egy új használó számára újítják fel a terméket, a következőket kell végrehajtani:

- Ellenőrzés
- tisztítás és fertőtlenítés.
- az új használonak megfelelő beállítás.

A részleteket a fejezet és a termék szervizkönyve tartalmazza.

Figyeljen arra, hogy a termékkel együtt a használati útmutatót is átadja.

Ha bármilyen sérülést vagy rendellenes működést észlel, ne használja újra a terméket.

6.2 Hulladékkezelés

Figyeljen Ön is a környezetre, és élettartama végén hasznosítsa újra a terméket a helyi hulladékhasznosító létesítmény révén.

Szerelje szét a terméket és a részegységeit, hogy elkülöníthetők legyenek a különböző anyagok, és külön-külön lehessen újrahasznosítani őket.

A használt termékek és a csomagolóanyagok kidobásának és újrahasznosításnak összhangban kell lennie az adott ország hulladékkezelési jogszabályaival és előírásaival. További tájékoztatásért forduljon a helyi hulladékkezelő vállalathoz.

7 Hibaelhárítás

7.1 A teljesítménnyel kapcsolatos hibák elhárítása



A motoros kerekesszékekkel és az elektronikával kapcsolatos további hibaelhárítási információkat a motoros kerekesszék és a vezérlőkonzol használati útmutatóiban találja (ezek külön dokumentumok).

Jelenség	Valószínű ok	Megoldás
A kerekesszék motorja be van kapcsolva, de a kerekesszék nem halad	A rendszer a hajtásár maximális szögén túl hátra van döntve vagy hajtva	Állítsa vissza az ülésrendszert semleges (alap-) helyzetbe.
	A hajtómotorok nincsenek összekapcsolva a mechanikával	Kapcsolja össze a hajtómotorokat a mechanikával.
	Középre igazított motoros LNX lábtámasz leengedett teleszkópos lábtartó lemezzel	Húzza vissza a lábtartót felső állásba.
Az ülésrendszer nem működik	Lemerültek az akkumulátorok	Ellenőrizze / töltsse fel / cserélje ki az akkumulátorokat. Vegye fel a kapcsolatot a forgalmazóval.
	Kilazult vagy hibás elektromos kapcsolat	Ellenőrizze a kábelcsatlakozásokat és a kábelkötegelőket, hogy nem túl lazák vagy szorosak-e. Vegye fel a kapcsolatot a forgalmazóval.
	Kiégett a biztosíték	Ellenőrizze és szükség szerint cserélje ki a biztosítékot. Vegye fel a kapcsolatot a forgalmazóval.
	Akadályozó tárgyak és becsípődött kábelek	Ellenőrizze az akadályozó tárgyakat, valamint hogy a kábelek nincsenek-e valahol becsípődve. Vegye fel a kapcsolatot a forgalmazóval.

Jelenség	Valószínű ok	Megoldás
Az ülésrendszert funkciói néha (bizonyos napokon, a hátradöntés vagy -hajtás során stb.) nem működnek	Kilazult vagy hibás elektromos kapcsolat	Ellenőrizze a kábelcsatlakozásokat és a kábelkötegelőket, hogy nem túl lazák vagy szorosak-e.
	Meghibásodott a tápvezetékkeg	Ellenőrizze és szükség szerint cserélje ki a tápvezetékkeget. Vegye fel a kapcsolatot a forgalmazóval.
	Meghibásodott a korlátozó kapcsoló	Ellenőrizze és szükség szerint cserélje ki a korlátozó kapcsolót. Vegye fel a kapcsolatot a forgalmazóval.
	Az akkumulátor majdnem teljesen lemerült (ingadozó töltésszint)	Ellenőrizze / cserélje ki az akkumulátort. Vegye fel a kapcsolatot a forgalmazóval.
A hajtászár nem működik	Kilazult vagy hibás elektromos kapcsolat	Ellenőrizze a csatlakozásokat. Vegye fel a kapcsolatot a forgalmazóval.
	A hajtászár kapcsolója vagy a mechanikus kapcsoló nincs megfelelően beállítva	Vegye fel a kapcsolatot a forgalmazóval.
	Meghibásodott a hajtászár kapcsolója	Vegye fel a kapcsolatot a forgalmazóval.
A hajtászár kapcsolója nem működik megfelelően	Kilazult vagy hibás elektromos kapcsolat	Ellenőrizze a csatlakozásokat. Vegye fel a kapcsolatot a forgalmazóval.
	Meghibásodott a korlátozó kapcsoló	Ellenőrizze és szükség szerint cserélje ki a korlátozó kapcsolót. Vegye fel a kapcsolatot a forgalmazóval.
	A hajtászár kapcsolója nincs megfelelően beállítva	Vegye fel a kapcsolatot a forgalmazóval.

Jelenség	Valószínű ok	Megoldás
A rendszer csak az egyik irányba halad	Túllépte valamelyik határértéket (hajtásár, sebességkorlátozás, háttámla dőlésszöge, ülésemelő zárja)	Térjen vissza a határértékeken belülre.
	Meghibásodott a korlátozó kapcsoló	Ellenőrizze és szükség szerint cserélje ki a korlátozó kapcsolót. Vegye fel a kapcsolatot a forgalmazóval.
	A hajtásár kapcsolója nincs megfelelően beállítva	Vegye fel a kapcsolatot a forgalmazóval.
	Túl alacsony feszültség	Vegye fel a kapcsolatot a forgalmazóval.
	Az akkumulátor nincs feltöltve	Töltse fel az akkumulátorokat.
A vezérlőkonzol nem működik	A vezérlőkonzol nincs csatlakoztatva	Ellenőrizze a kábel csatlakozását.
	A vezérlőkonzol nincs bekapcsolva	Kapcsolja be a vezérlőkonzolt a kis billentyűzetről. Vegye fel a kapcsolatot a forgalmazóval.
	Kiégett az alap biztosítéka	Ellenőrizze és szükség szerint cserélje ki a biztosítékot.
A működtető szerkezet nem áll le	Becsípődött a kapcsoló vezetékkötege	Ellenőrizze és szükség szerint állítsa be a kapcsoló vezetékköteget, hogy ne csípődjön be. Vegye fel a kapcsolatot a forgalmazóval.

8 Műszaki adatok

8.1 Műszaki adatok

Az alább megadott műszaki adatok az alapfelszereltségre vonatkoznak, illetve az elérhető legnagyobb értékeket mutatják. Tartozékok felszerelése esetén módosulhatnak. Az értékek pontos változását az adott tartozékokat ismertető szakaszok tartalmazzák.



Vegye figyelembe, hogy a mért értékek egyes esetekben akár ± 10 mm-rel is eltérőek lehetnek.

A motoros kerekesszék további műszaki adatait a kerekesszék használati útmutatójában találja.

A Modulite ülésrendszer méretei és tömege

Méretek a következők szerint: ISO 7176-5	Motoros kerekesszék			
	TDX SP2 (Standard)	AVIVA RX (Standard)	AVIVA RX (HD)	AVIVA FX
Ülés szélessége [mm] (zárójelben a karfa beállítási tartománya van feltüntetve)	• 380 (380–430) • 430 (430–480) • 480 (480–530) • 530 (530–580)	• 330 (330–380) • 380 (380–430) • 430 (430–480) • 480 (480–530) • 530 (530–580)	• 620 (620–670) • 650 (650–700)	• 380 (380–430) • 430 (430–480) • 480 (480–530) • 530 (530–580)
Ülésmélység [mm]	• 410–560	• 410–510	• 510–580	• 410–510
Üléspárna vastagsága [mm]	• 50/75/90/100		• 90	• 50/75/90/100
Háttámla dőlésszöge	• +90°–+120°			
Háttámla magassága ¹ [mm]				
Hátsó heveder	• 480 / 540		• 540	• 480 / 540
Teleszkópos üléskeret	• 560–610		• —	• 560–610
Matrx háttámla	• —	• 400 / 500	• —	• 400 / 500
Karfa magassága teleszkópos üléskeret esetén [mm]				

Méretek a következő szerint: ISO 7176-5	Motoros kerekesszék			
	TDX SP2 (Standard)	AVIVA RX (Standard)	AVIVA RX (HD)	AVIVA FX
T-karfa	• 245–310 / 295–360			
Felhajtható karfa	• 230–360		• —	• 230–360
Követő karfa	• 230–300 / 300–360		• —	• 230–300 / 300–360
Karfa magassága egyrészes üléslemez esetén [mm]				
T-karfa	• 275–340 / 325–390		• —	• —
Karfa mélysége ² [mm]	• max. 440	• 325–397		
Max. Karfa tömege [kg]	• 1,7			
Max. Fejtámla tömege [kg]	• 1,4			
Ülés dőlésszöge, elektromos állítás (csak döntőmodul 50° [D] / döntés emelővel 45° [D / E])				
Standard szerelés	• 0° ... 50 (D) / 0° ... 45° (D / E)		• —	• —
5° fix elülső rögzítés	• -5° ... 45° (D) / -5° ... 40° (D / E)		• —	• —
10° fix elülső rögzítés	• -10° ... 40° (D) / -10° ... 35° (D / E)		• —	• —
5° fix hátsó rögzítés	• 5° ... 55° (D) / 5° ... 50° (D / E)		• —	• —
Ülés dőlésszöge, elektromos beállítás (30°)				
Standard szerelés	• 0°→+30°			
5° fix elülső rögzítés	• -5° – +25°	• —		
Ülés dőlésszöge, elektromos beállítás (20°)				
Standard szerelés	• 0°→+20°			• —
Ülés dőlésszöge, kézi beállítás	• 0°→+8°	• 0° – +15°		• —

Lábtartók és lábtámaszok					
Vari F	Hosszúság [mm]	• 290–460	Standard 80°	Hosszúság [mm]	• 290–460
	Szög	• +70°–0°		Szög	• +80° – 0°
	Max. tömeg [kg]	• 1,6		Max. tömeg [kg]	• 3,1
Vari A	Hosszúság [mm]	• 290–460	Középre felszerelt (kézi)	Hosszúság [mm]	• 280–385
	Szög	• +70°–0°		Szög	• +90° – 0°
	Max. tömeg [kg]	• 2,7		Max. tömeg [kg]	• 5,4
ADM (kézi)	Hosszúság [mm]	• 290–460	Középre felszerelt motoros LNX ³	Hosszúság [mm]	• 340–410
	Szög	• +80°–0°		Szög	• +97° – +7°
	Max. tömeg [kg]	• 3,1			• +90°–0°
ADE (elektromos)	Hosszúság [mm]	• 290–460			• +83° – -7°
	Szög	• +80°–0°			
	Max. tömeg [kg]	• 4,2			

1 Ülőpárna nélkül mérve

2 A háttámla referenciasíkjának és a karfaszerelvény legelőbbre nyúló részének távolsága

3 A lábtámasz nem levehető, így nem mérhető az alkatrész tömege

**EU Export:**

Invacare Poirier SAS

Route de St Roch

F-37230 Fondettes

Phone: (33) (0) 2 47 62 69 80

serviceclient_export@invacare.com

www.invacare.eu.com

UKRP Invacare UK Operations Limited
Unit 4, Pencoed Technology Park, Pencoed
Bridgend CF35 5AQ
UK

1656522-G 2025-07-22



Making Life's Experiences Possible®



Yes, you can.®