



Invacare® Ultra Low Maxx, Motion Concepts

Dodatek k navodilom za uporabo električnega invalidskega vozička

sl **Modularni električni sistem za zagotavljanje
prilagodljivega položaja
Navodilo za uporabo**

To navodilo za uporabo je treba **OBVEZNO** posredovati uporabniku tega izdelka.
PRED uporabo tega izdelka MORATE prebrati ta navodila za uporabo in jih shraniti za poznejšo uporabo.



Yes, you can.®

Vsebina

1 Splošno	4
1.1 O priročniku	4
1.2 Simboli v tem priročniku	4
1.3 Garancijske informacije	5
1.4 Varnostne informacije glede uporabe sedežnega sistema	5
2 Sestavni deli	7
2.1 Električne funkcije za zagotavljanje pravilnega položaja	7
2.2 Omejitve vožnje in sedenja (sistem LiNX)	8
2.2.1 Omejitve vožnje	8
2.2.2 Omejitve sedenja	11
3 Nastavitev	12
3.1 Splošne informacije o nastavitvi	12
3.2 Prilagajanje nihajnega držala krmilnika	13
3.3 Prilagajanje držala krmilnika Quad Link	14
3.4 Prilagajanje nihajnega držala krmilnika Maxx Resolve	15
3.5 Prilagajanje višine sredinskega držala na glavnem nosilcu	17
3.5.1 Prilagajanje globine sredinskega držala na glavnem nosilcu	18
3.5.2 Nastavitev višine sredinskega držala na glavnem nosilcu	18
3.5.3 Prilagajanje položaja krmilnika/zaslona	18
3.6 Nastavitev nihajnega mehanizma	20
3.7 Nastavitev nihajnega držala zaslona	20
3.8 Nastavitev ročnega upravljalnika za upravljanje z brado	21
3.8.1 Nastavitev krmilne paličice	21
3.8.2 Nastavitev jajčastega stikala	22

3.9 Nastavitev vzglavnika	22
3.10 Prilagajanje vzglavnik s pihalno enoto	23
3.11 Prilagajanje kota prednastavljenega naslona za hrbet	23
3.12 Prilagajanje naslona za roke	24
3.12.1 Prilagajanje previsnega zložljivega naslona za roke	24
3.12.2 Previsni zložljivi naslon za roke Maxx, nameščen na vodilo Ultra Rail	25
3.12.3 Prilagajanje naslona za roke z možnostjo naklona z dvotočkovno podporo	25
3.13 Prilagajanje naslona za roke z večosno oporo za zgornje okončine (MACES)	26
3.14 Prilagajanje opore za komolce	26
3.15 Prilagajanje podpore za kolke s funkcijo hitre sprostitev	27
3.16 Prilagajanje stranskih opor za trup	29
3.17 Prilagajanje naslona za glavo	31
3.17.1 Nameščanje vmesnika naslona za glavo za modela Elite Back in High Back	31
3.17.2 Samodejna namestitve in nastavitve naslona za glavo	33
3.17.3 Nastavitev pritrditvenih delov naslona za glavo Elan	33
3.17.4 Prilagajanje pritrditvenih delov večosnega naslona za glavo	35
3.18 Nožni opori Pivot Plus	36
3.18.1 Nihajni nožni opori	36
3.18.2 Odstranjevanje nožnih opor	36
3.18.3 Prilagajanje kota nožne opore	37
3.18.4 Prilagajanje širine in kota prilagodljive stopalke	37
3.19 Nožni opori, pritrdjeni na sredini – ročno prilagajanje omogočeno	38
3.19.1 Odstranjevanje nožne opore	38

3.19.2	Nastavljanje kota nožne opore	38	3.23.8	Prilagajanje kota in globine prilagodljive stopalke	51
3.19.3	Nastavljanje dolžine nožne opore	38	3.24	Električni dvizni nožni opori (nožni opori ADE)	51
3.19.4	Nastavljanje kota stopalke	39	3.24.1	Obračanje nožne opore navzven in/ali odstranitev	51
3.19.5	Nastavljanje kota in višine blazine za meča	39	3.24.2	Nastavljanje kota	51
3.20	Nožna opora LNX	39	3.24.3	Prilagajanje dolžine nožne opore	52
3.20.1	Nastavljanje dolžine nožne opore	39	3.24.4	Prilagajanje višine blazine za meča	52
3.20.2	Nastavljanje kota stopalke	40	3.24.5	Prilagajanje globine blazine za meča	52
3.20.3	Prilagajanje širine stopalke	40	3.24.6	Odklepanje blazine za meča in njen pomik nazaj	53
3.20.4	Nastavljanje kota stopalke	40	3.24.7	Prilagajanje stopalke s prilagodljivim naklonom	53
3.20.5	Nastavljanje višine in širine blazine za meča	40	3.24.8	Prilagajanje kota in globine prilagodljive stopalke	53
3.21	Nožna opora Vari-F	41	4	Uporaba	54
3.21.1	Obračanje nožne opore navzven in/ali odstranitev	41	4.1	Obračanje/odstranjevanje naslona za roke z naklonom	54
3.21.2	Nastavljanje kota	42	4.2	Obračanje previsnega naslona za roke	54
3.21.3	Nastavljanje končnega položaja nožne opore	42	4.3	Odstranjevanje/vstavljanje podpore za kolke s funkcijo hitre sprostitev	55
3.21.4	Prilagajanje dolžine nožne opore	43	4.4	Uporaba sredinske nožne opore na električni pogon LNX, s teleskopsko stopalno ploščo	55
3.22	Nožni opori Vari-A	43	4.5	Obračanje krmilnika na stran	55
3.22.1	Obračanje nožne opore navzven in/ali odstranitev	43	4.6	Premikanje sredinskega držala na glavnem nosilcu na stran	57
3.22.2	Nastavljanje kota	44	4.7	Premikanje nihajnega držala zaslona na stran	57
3.22.3	Nastavljanje končnega položaja nožne opore	45	4.8	Ponovno nameščanje blazine za naslon za hrbet	58
3.22.4	Prilagajanje dolžine nožne opore	46	5	Načrt vzdrževanja	59
3.22.5	Prilagajanje višine blazine za meča	47	6	Po uporabi	60
3.22.6	Prilagajanje globine blazine za meča	47	6.1	Menjava obrabljenih delov	60
3.22.7	Odklepanje blazine za meča in njen pomik nazaj	47	6.2	Ravnanje z odpadno opremo	60
3.22.8	Prilagajanje stopalke s prilagodljivim naklonom	48	7	Odpravljanje težav	61
3.22.9	Prilagajanje kota in globine prilagodljive stopalke	48	7.1	Odpravljanje težav z delovanjem	61
3.23	Nožne opore ADM	48	8	Tehnični podatki	64
3.23.1	Obračanje nožne opore navzven in/ali odstranitev	48	8.1	Tehnični podatki	64
3.23.2	Nastavljanje kota	48			
3.23.3	Prilagajanje dolžine nožne opore	49			
3.23.4	Prilagajanje višine blazine za meča	50			
3.23.5	Prilagajanje globine blazine za meča	50			
3.23.6	Odklepanje blazine za meča in njen pomik nazaj	50			
3.23.7	Prilagajanje stopalke s prilagodljivim naklonom	51			

1 Splošno

1.1 O priročniku

Ta dokument je dodatek k uporabniški dokumentaciji izdelka.

Ta sestavni del nima oznake CE in UKCA, vendar je del izdelka, ki je skladen z Uredbo 2017/745 o medicinskih pripomočkih razreda I in zahtevami za pripomočke razreda I iz drugega dela Uredbe o medicinskih pripomočkih za ZK iz leta 2002 (kakor je bila spremenjena). Zato tudi zanj velja oznaka CE in UKCA izdelka. Za več informacij glejte uporabniško dokumentacijo izdelka.

Ta sestavni del uporabljajte samo v primeru, da ste prebrali ta priročnik in ga razumete. Za dodatne nasvete se obrnite na zdravstvenega delavca, ki je seznanjen z vašim zdravstvenim stanjem, in z njim razjasnite morebitna vprašanja glede pravilne uporabe in potrebnih prilagoditev.

V ta dokument so morda vključeni tudi razdelki, ki niso povezani z vašim sestavnim delom, saj je namenjen uporabi vseh razpoložljivih modelov (na dan tiskanja). Če ni navedeno drugače, vsak razdelek v tem dokumentu velja za vse modele sestavnega dela.

Družba Invacare si pridržuje pravico, da brez predhodnega obvestila spremeni specifikacije sestavnega dela.

Pred branjem tega dokumenta se prepričajte, da imate najnovejšo različico. Najnovejša različica je na voljo v obliki PDF na spletnem mestu družbe Invacare.

Če je pisava v natisnjem dokumentu za uporabo za vas premajhna in zato težko berljiva, lahko s spletnega mesta prenesete navodila v obliki PDF. Na zaslonu računalnika lahko nato spreminjate velikost pisave v dokumentu PDF, dokler vam popolnoma ne ustreza za branje.

Za več informacij o sestavnem delu, kot so varnostna opozorila in odpoklic, se obrnite na predstavnika družbe Invacare. Naslovi so navedeni na koncu tega dokumenta.

V primeru resne nesreče s sestavnim delom morate o tem obvestiti proizvajalca in pristojni organ v vaši državi.

1.2 Simboli v tem priročniku

V tem priročniku so uporabljeni simboli in opozorilne besede, ki veljajo za nevarnosti in nevarne postopke, pri katerih lahko pride do telesnih poškodb ali materialne škode. Definicije opozorilnih besed so navedene spodaj.



NEVARNOST!

Označuje nevarno situacijo, ki povzroči hudo poškodbo ali smrt, če je ne preprečite.



OPOZORILO!

Označuje nevarno situacijo, v kateri lahko pride do hude poškodbe ali smrti, če je ne preprečite.



POZOR!

Označuje nevarno situacijo, ki lahko povzroči lažje do srednje hude telesne poškodbe, če je ne preprečite.



OBVESTILO!

Označuje situacije, ki so lahko nevarne in ki lahko povzročijo gmotno škodo, če jih ne preprečite.



Nasveti in priporočila

Simbol označuje uporabne napotke, priporočila in informacije za učinkovito uporabo brez težav.



Orodje

Določa orodje, sestavne dele in elemente, ki jih potrebujete za izvedbo določenega opravila.

Drugi simboli



Oseba, odgovorna za ZK

Označuje izdelek, ki ni izdelan v Združenem kraljestvu.

1.3 Garancijske informacije

Garancijo proizvajalca za izdelek zagotavljamo v skladu z našimi splošnimi pogoji ter pogoji poslovanja, ki veljajo v posameznih državah.

Zahtevke za garancijo lahko uveljavljate samo pri prodajalcu, pri katerem ste kupili izdelek.

1.4 Varnostne informacije glede uporabe sedežnega sistema

Vaš sedežni sistem je bil pred dobavo posebej konfiguriran in nameščen na podvozje invalidskega vozička. Upoštevajte, da je za končno konfiguracijo ter odločitve o nakupu v zvezi s celotnim sistemom invalidskega vozička odgovoren uporabnik električnega invalidskega vozička, ki je sposoben sprejeti tovrstno odločitev, in zdravstveni delavec, ki skrbi za tega uporabnika. Vsebina teh navodil za uporabo temelji na pričakovanju, da je strokovnjak za električne invalidske vozičke prilagodil električni invalidski voziček uporabniku, osebnemu zdravstvenemu delavcu tega uporabnika pa pomagal pri navodilih za ta pripomoček in njegovi uporabi.

Navodila za uporabo električnega invalidskega vozička vsebujejo vse povezane varnostne informacije o uporabi električnega invalidskega pripomočka, vključno z informacijami o sedežnem sistemu. Obvezno preberite in upoštevajte te varnostne informacije.



OPOZORILO!

Nevarnost prevrnitve

Električni invalidski voziček se lahko prevrne, če spremenite položaj sedenja in posledično njegove značilnosti stabilnosti.

- Osebnostne varnostne omejitve ugotovite ter določite tako, da se ob prisotnosti usposobljenega zdravstvenega delavca sklonite, se presedete in sežete na različne načine, preden poskusite aktivno uporabljati invalidski voziček.
- Sedežni sistem lahko na podnožje namestite v različnih sprednjih in vzdolžnih položajih. Prepričajte se, da vam izbrani položaj zagotavlja najboljše stabilnost pri vseh različnih položajih sedenja.
- Upoštevajte vso osebno opremo in dodatke (nahrbtniki, ventilacijski sistemi, dodatni akumulatorji itd.), ki jih bo uporabnik prevažal na invalidskem vozičku. Naložen nahrbtnik, ki je pritrjen na naslon za hrbet pri sedežnem sistemu, lahko precej zmanjša stabilnost zadnje strani vašega invalidskega vozička.
- Upoštevajte naslon za hrbet, ki ga uporabljate. Če je položaj naslona za hrbet nižji, se lahko središče težnosti premakne nazaj, kar lahko precej zmanjša stabilnost zadnje strani invalidskega vozička. Po drugi strani pa bo debela blazina za naslon za hrbet premaknila položaj sedeža naprej, kar bo zmanjšalo stabilnost sprednje strani invalidskega vozička.
- Svojo težo vedno prenesite v smer, kamor zavijate. Če težo prenesete v obratno smer ovinka, se lahko zmanjša stabilnost podnožja invalidskega vozička, ki se lahko posledično prevrne.



- Upoštevajte sedežno blazino, ki jo uporabljate. Debela sedežna blazina bo dvignila središče težnosti, posledično pa se bo zmanjšala stabilnost invalidskega vozička v vse smeri.
- Vsi sedežni sistemi so opremljeni s funkcijo zaklepa vožnje. Prepričajte se, da je ta funkcija nastavljena, zato da ne ogrožate svoje stabilnosti med vožnjo (glejte 2.2 *Omejitev vožnje in sedenja (sistem LiNX), stran 8*).
- Invalidski voziček ima krmilnik, ki ga je mogoče programirati, tako da lahko nastavite največji pospešek in pojemek invalidskega vozička. Prepričajte se, da so te vrednosti nastavljene na raven, ki je ustrezna tako za sistem kot za vas kot uporabnika.
- Ko voziček deluje pri zmanjšani hitrosti vožnje ali je vklopljena funkcija blokade proti prevračanju, se vedno premikajte po gladkih, ravnih površinah, da se ne bi zmanjšala stabilnost invalidskega vozička.
- Prepričajte se, da pri nastavitvi invalidskega vozička upoštevate vsa zdravstvena stanja. Neželeno gibanje mišic, kot so krči, lahko vpliva na stabilnost invalidskega vozička, zlasti če je sedežni sistem v nagnjenem položaju.
- Ko je sistem v celoti nagnjen naprej ali nazaj, se sprednji kolesi invalidskega vozička nikoli ne bi smeli dvigniti od tal. Če se to zgodi, se takoj obrnite na pooblaščenega prodajalca družbe Invacare, da odpravite težavo.



OPOZORILO!

Nevarnost smrti, hude poškodbe ali škode

Obstaja nevarnost priščipanja ali zadušitve, če se osebni predmeti (npr. nakit, šali), ki niso dobro pritrjeni, zataknejo v premikajoče se ali izstopajoče dele.

- Prepričajte se, da morebitni predmeti, ki niso dobro pritrjeni, niso v bližini premikajočih se delov električnega invalidskega vozička, npr. koles ali sestavnih delov za električno nastavljive sedeže.
- Med vožnjo rok, oblačil in vseh drugih predmetov ne postavljajte v bližino koles ali sestavnih delov za električno nastavljive sedeže.
- Takoj izklopите električni invalidski voziček, da zaustavite premikanje.

2 Sestavni deli

2.1 Električne funkcije za zagotavljanje pravilnega položaja

Pri sedežnem sistemu so na voljo naslednje funkcije:

CG-TILT

S funkcijo nagiba središča težnosti se prenos teže izravna tako, da se vrtljiva os in celotni sestav sedeža pomakneta naprej, ko sedež nagnete nazaj. Običajni razpon nagiba je 0°–45° (z dvigalom sedeža) ali 0°–50° (brez dvigala sedeža).

NAKLON

Funkcija naklona uporabnikom omogoča, da kot sistema med sediščem in naslonom za hrbet nastavijo v poljuben položaj znotraj nastavljenega razpona. Običajni razpon naklona je 90°–168°.

ESR

Razširjeno zmanjševanje strižnih sil (ESR) je sinhronizirano z naklonom naslona, da se zmanjša količina strižne sile med uporabnikom in naslonom za hrbet. To se doseže s povezovalnim zgibom, ki naslon za hrbet pomakne po zadnji strani vozička, ko se naslon nagne nazaj.

NAKLON NAPREJ

Na voljo kot dodatek pri sistemih z možnostjo naklona: z naklonom naprej se prilagodi kot naslona za hrbet sedežnega sistema naprej, tako da se kot med sedežem in naslonom za hrbet zmanjša na manj kot 90°. (Opomba: največji kot naklona se zmanjša približno za število stopinj naklona naprej).

MODUL ŠKARJASTEGA DVIGALA SEDEŽA /DVIGALA SEDEŽA

Modul škarjastega dvigala sedeža omogoča uporabnikom, da električni sistem za zagotavljanje pravilnega položaja dvignejo do višine 300 mm nad najnižjo višino svojega sistema od sedišča do tal. Škarjasto dvigalo sedeža vključuje funkcijo nagiba.

NOŽNI OPORI

Naš širok izbor električnih in ročnih nožnih opor je na voljo v številnih velikostih ter slogih, vključno s posameznimi nožnimi oporami ter sredinskimi stopalnimi ploščami, ki zagotavljajo ustrezen položaj strankinih nog. Poleg tega so na voljo tudi številni nosilci nožne opore, prilagojeni izbranim nožnim oporam. Električni nožni opori lahko programirate tako, da delujeta z eno od naslednjih dveh konfiguracij:

- posamezno (nožni opori delujeta ločeno),
- združeno (nožni opori delujeta usklajeno).

2.2 Omejitve vožnje in sedenja (sistem LiNX)



NEVARNOST!

Nevarnost hudih poškodb ali smrti

Za varno delovanje sistema je ključnega pomena, da ustrezno nastavite kot omejilnih stikal/blokad.

- Družba Invacare ne odgovarja za morebitne poškodbe ali škodo, nastale zaradi izvedbe prilagoditev, ki niso v skladu s priporočenimi tovarniškimi nastavitvami.
- Za zagotavljanje ustrezne nastavitve lahko prilagoditev blokad in omejevalnikov izvede le usposobljeni tehnik.
- Nikoli ne presežite največjih dovoljenih omejitev. Blokade in omejilna stikala je treba nastaviti tako, da ustrezajo potrebam uporabnika, hkrati pa ne zmanjšajo splošne stabilnosti invalidskega vozička.
- Po izvedbi katerih koli prilagoditev omejevalnikov ali blokad je treba vedno preizkusiti vse načine premikanja sedežnega sistema (tj. nagib, naklon, dvigalo sedeža), da preverite, ali po spremembi nastavitve voziček še vedno deluje pravilno in ali zaradi te spremembe ni prišlo do težav s stabilnostjo oz. motenj pri delovanju vozička.



Pri bolj zapletenih/specializiranih sedežnih sistemih so morda potrebne dodatne blokade in omejilna stikala. Za informacije o omejilnih stikalih/blokadah, ki niso navedene v tem priročniku, se obrnite na prodajalca.

Pri modelu TDX SP2 se lahko omejitve vožnje in sedenja spreminjajo tako med vožnjo kot med mirovanjem.

Pri modelih AVIVA RX in AVIVA FX se lahko omejitve vožnje in sedenja spreminjajo tako med vožnjo kot med mirovanjem.


2.2.1 Omejitve vožnje

Omejitve vožnje

Sedežni sistemi so konfigurirani/programirani s funkcijo upočasnitve vožnje. Pri upočasnitvi vožnje se pri sistemu z mikrostikali vklopi zmanjšana hitrost vožnje.

Vsi sedežni sistemi za nagib in naklon so opremljeni z omejevalnikom zaklepa vožnje, ki preprečuje premikanje invalidskega vozička, če je nagib ali naklon sedeža zunaj obsega prednastavljenega varnega skupnega naklona in/ali prednastavljene višine. Skupni naklon je lahko kombinacija kota sedeža, kota naslona za hrbet in/ali naklona vozne površine.


AVIVA RX z dvigalom sedeža

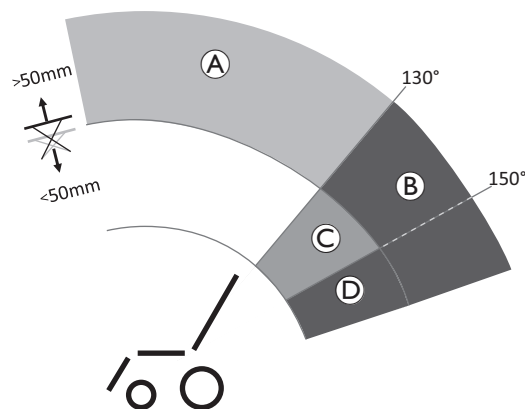

	Omejitev	Razlog za omejitev
Ⓐ	Upočasnitev vožnje	Če je dvigalo sedeža dvignjeno • > 50 mm
Ⓑ	Zaklep vožnje	Če je dvigalo sedeža dvignjeno • > 50 mm in če je kot naslona za hrbet • > 130°
Ⓒ	Upočasnitev/zaklep vožnje, nastavi dobavitelj	Če je dvigalo sedeža dvignjeno • <50 mm in če je kot naslona za hrbet • >130° – <150°¹
Ⓓ	Zaklep vožnje	Če je dvigalo sedeža dvignjeno • <50 mm in če je kot naslona za hrbet • >150°

¹ Dobavitelj lahko določi kot, pod katerim naj bi se upočasnitev vožnje spremenila v zaklep vožnje.


AVIVA RX brez dvigala sedeža

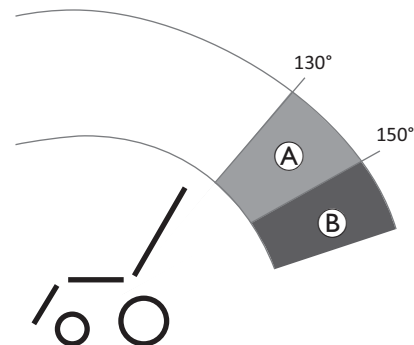

	Omejitev	Razlog za omejitev
Ⓐ	Upočasnitev/zaklep vožnje, nastavi dobavitelj	Če je kot naslona za hrbet • >130° – <150°¹
Ⓑ	Zaklep vožnje	Če je kot naslona za hrbet • >150°

¹ Dobavitelj lahko določi kot, pod katerim naj bi se upočasnitev vožnje spremenila v zaklep vožnje.


TDX SP2 z dvigalom sedeža

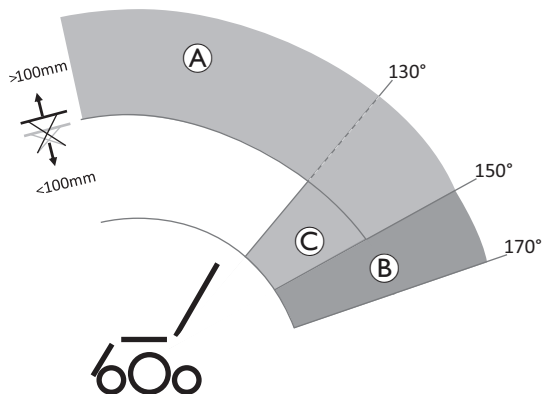

	Omejitev	Razlog za omejitev
Ⓐ	Upočasnitev vožnje	Če je dvigalo sedeža dvignjeno > 100 mm
Ⓑ	Upočasnitev/zaklep vožnje, nastavi dobavitelj	Če je kot naslona za hrbet >150° – <170°¹
Ⓒ	Upočasnitev vožnje	Če je dvigalo sedeža dvignjeno <100 mm in če je kot naslona za hrbet >130° – <150°

1 Dobavitelj lahko določi kot, pod katerim naj bi se upočasnitev vožnje spremenila v zaklep vožnje.

TDX SP2 brez dvigala sedeža

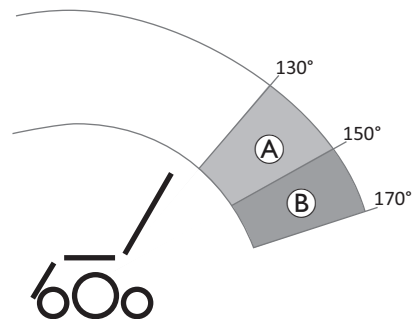


	Omejitev	Razlog za omejitev
Ⓐ	Upočasnitev vožnje	Če je kot naslona za hrbet >130° – <150°
Ⓑ	Upočasnitev/zaklep vožnje, nastavi dobavitelj	Če je kot naslona za hrbet >150° – <170°¹

1 Dobavitelj lahko določi kot, pod katerim naj bi se upočasnitev vožnje spremenila v zaklep vožnje.

2.2.2 Omejitve sedenja

AVIVA RX z dvigalom sedeža

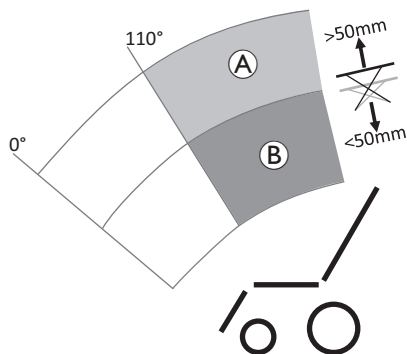


	Omejitev	Razlog za omejitev
Ⓐ	Nagibanje >110° onemogočeno	Če je dvigalo sedeža dvignjeno > 50 mm
Ⓑ	Nagibanje je onemogočeno	Če je kot naslona za hrbet >110°

Za model AVIVA RX brez dvigala sedeža in model TDX SP2 (z dvigalom sedeža/brez dvigala sedeža) ni drugih omejitev sedenja, ne glede na omejitev največjega kota naslona za hrbet

Najv. vrednost največjega kota naslona za hrbet

Največji kot naslona za hrbet pomeni skrajno točko, do katere se lahko nagne naslon za hrbet s pogoni za nagib ali naklon. Sedežni sistemi so običajno tovarniško prednastavljeni na največji dopustni kot in dodatne prilagoditve niso potrebne, razen če je treba zmanjšati največji kot (glejte opozorila o nevarnostih, navedena spodaj).

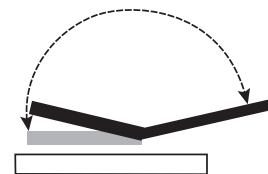

Omejitev največjega kota naslona za hrbet =

168° (TDX SP2)

170° (AVIVA RX)



OBVESTILO!

- Pri določanju največje omejitve naslona za hrbet vedno upoštevajte velikost in lokacijo morebitne osebne opreme, ki jo uporabnik prevaža na invalidskem vozičku, saj lahko pride do motenj med naslonom za hrbet in podvozjem invalidskega vozička ob popolnem nagibu/naklonu, pa tudi do poškodb pogona in/ali invalidskega vozička.

3 Nastavitev

3.1 Splošne informacije o nastavitvi



OPOZORILO!

Nevarnost smrti, hude poškodbe ali škode

Če dlje časa uporabljate električni invalidski voziček, ki ni nastavljen po ustreznih specifikacijah, lahko začne voziček delovati nepravilno, zaradi česar lahko pride do smrti, hude poškodbe ali materialne škode.

- Nastavitve delovanja lahko izvaja samo strokovnjak s področja zdravstva ali oseba, ki je dobro seznanjena s tem postopkom in zmožnostmi uporabnika.
- Ko je električni invalidski voziček nastavljen/prilagojen, preverite, ali deluje v skladu z vsemi specifikacijami, določenimi v postopku nastavitve. Če električni invalidski voziček ne deluje v skladu s specifikacijami, ga TAKOJ izklopite in ponovno določite nastavitvene specifikacije. Če električni invalidski voziček še vedno ne deluje v skladu z ustreznimi specifikacijami, se obrnite na družbo Invacare.



OPOZORILO!

Nevarnost smrti, hude poškodbe ali škode

Če je oprema slabo pritrjena ali manjkajo deli opreme, je lahko voziček nestabilen, kar lahko povzroči smrt, hudo poškodbo ali materialno škodo.

- Po VSAKI nastavitvi, popravilu ali servisu in pred uporabo se prepričajte, da je vsa oprema, ki se pritrdi, na svojem mestu in trdno pritrjena.



OPOZORILO!

Nevarnost telesne poškodbe ali nastanka škode

Napačna nastavitve tega električnega invalidskega vozička, ki jo opravi uporabnik/negovalec ali neusposobljen tehnik, lahko povzroči poškodbe ali materialno škodo.

- NE poskušajte sami nastavljati tega električnega invalidskega vozička. Začetno nastavitve tega električnega invalidskega vozička MORA opraviti usposobljen tehnik.
- Priporočljivo je, da uporabnik sam prilagaja nastavitve vozička šele, ko ga o tem ustrezno pouči zdravstveni delavec.
- NE izvajajte opravil, če nimate navedenega orodja.



POZOR!

Nevarnost telesne poškodbe ali nastanka škode

Na električni invalidski voziček se lahko namesti posamezen, različno prilagodljiv sedežni sistem, ki vključuje prilagodljivi nožni opori, naslona za roke, naslon za glavo ali druge možnosti, ki se uporabljajo za prilagoditev sedeža fizičnim potrebam in stanju uporabnika. Zaradi različnih možnosti prilagajanja in posameznih nastavitev lahko sestavni deli električnega invalidskega vozička trčijo eden ob drugega, obstajajo pa tudi nevarna mesta, na katerih se lahko uščipnete.

Kadar sedežni sistem in možnosti sedeža prilagajate uporabniku, poskrbite za naslednje:

- Pri nastavljanju sestavnih delov električnega invalidskega vozička bodite pozorni na mesta, na katerih se lahko uščipnete.
- Poskrbite, da se sestavni deli električnega invalidskega vozička ne bodo medsebojno ovirali.

! OBVESTILO!

Električni invalidski voziček je izdelan in prilagojen individualno v skladu s specifikacijami naročila. Oceno ustreznosti mora izdelati zdravstveni delavec v skladu s potrebami uporabnika in njegovim zdravstvenim stanjem.

- Če nameravate prilagoditi konfiguracijo električnega invalidskega vozička, se posvetujte z zdravstvenim delavcem.
- Kakršne koli prilagoditve lahko izvede samo usposobljen tehnik.



Začetno nastavitve vozička mora vedno opraviti zdravstveni delavec. Priporočljivo je, da uporabnik sam prilagaja nastavitve vozička šele, ko ga o tem ustrezno pouči zdravstveni delavec.

Možnosti električnih nastavitev



Za več informacij o možnosti električnih nastavitev glejte navodila za uporabo krmilnika.

stopalke

Vse nožne opore družbe Invacare je mogoče poklopiti v smeri navzgor.

3.2 Prilagajanje nihajnega držala krmilnika

Naslednje informacije veljajo za vse sedežne sisteme.



POZOR!

Obstaja nevarnost, da je krmilnik potisnjen nazaj ob nenadnem trku z oviro, na primer s podbojem ali mizo, krmilna palica pa se zagodzi ob naslon za roke, če se položaj krmilnika prilagodi in vsi vijaki niso povsem priviti.

V tem primeru se električni invalidski voziček nenadzorovano pomakne naprej in lahko poškoduje uporabnika električnega invalidskega vozička in osebe, ki mu stojijo na poti.

- Ko prilagajate položaj krmilnika, trdno privijte vse vijake.
- Če se zgodi zgoraj opisani primer, takoj izklopite elektronski sistem električnega invalidskega vozička na krmilniku.



POZOR!

Nevarnost telesnih poškodb


Če se uporabnik pri nameščanju v invalidski voziček ali izstopanju iz njega opira na krmilnik, se držalo krmilnika lahko zlomi in uporabnik lahko pade sedeža.

- Nikoli se ne opirajte na krmilnik, na primer med premeščanjem.

Prilagajanje višine krmilnika



- 6-mm ključ imbus

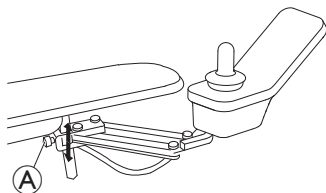


1. Odvijte vijak (A).
2. Sestavni del premaknite v želeni položaj.
3. Privijte vijak.

Nastavitev odmika krmilnika

Krmilnik je mogoče nastaviti v stran za 20 mm.



- 3-mm ključ imbus

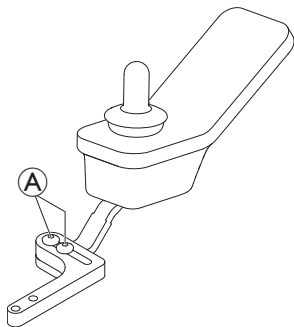


1. Odvijte vijake (A).
2. Sestavni del premaknite v želeni položaj.
3. Privijte vijake.

3.3 Prilagajanje držala krmilnika Quad Link

Prilagajanje višine krmilnika



- 6-mm ključ imbus

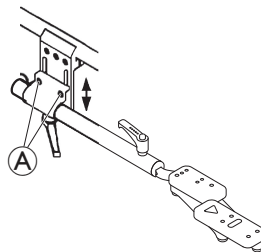


1. Odvijte oba vijaka (A) na nosilcu krmilnika.
2. Potisnite ali povlecite cev krmilnika navzgor ali navzdol do želene višine.
3. Privijte oba vijaka na nosilcu krmilnika.

Prilagajanje položaja krmilnika



- 6-mm ključ imbus

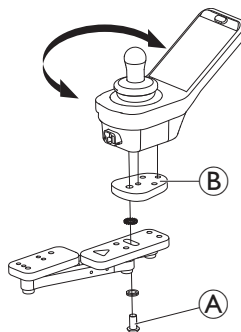

1. Odvijte vijak (A), s katerim je prilagodljiva ploščica krmilnika (B) pritrjena na držalo Quad Link.
2. Krmilnik zavrtite v želen položaj.
3. Privijte vijak, da prilagodljivo ploščico krmilnika pritrdite na držalo Quad Link.

Prilagajanje napetosti zaklepa

Privzeto je krmilnik Quad Link opremljen z dvema magnetoma, ki ga zakleneta v iztegnjenem položaju. Z odstranitvijo magnetov se napetost zmanjša in krmilnik Quad Link je lažje sprostiti.




POZOR!

Nevarnost telesne poškodbe ali poškodbe invalidskega vozička

Če odstranite oba magnet, krmilnik Quad Link ostane brez zaklepa. Krmilnik Quad Link se lahko nenamerno pomakne.
— Vedno pustite vsaj en magnet.



- Majhen koničast pripomoček, kot je sponka za papir

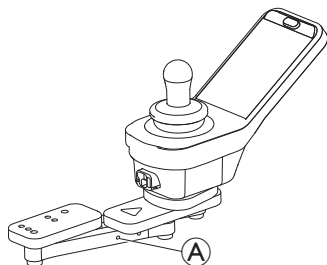

1. Za dostop do magnetov zavrtite krmilnik Quad Link na stran.
2. Pripomoček vstavite v luknjo (A) in potisnite magnet na drugo stran.

3.4 Prilagajanje nihajnega držala krmilnika Maxx Resolve


Nastavitev globine krmilnika



Nastavitev globine na odmaknjeni cevi krmilnika je enako kot pri ravni cevi krmilnika.



- 5-mm ključ imbus

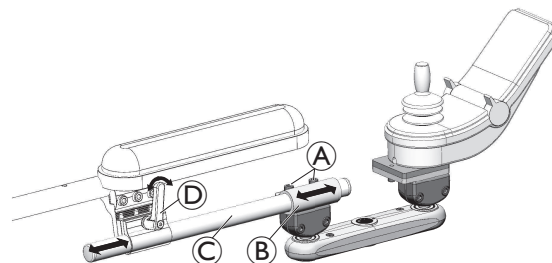

1. Odvijte vijaka (A) za nastavitev objemke (B) na cevi (C) na želeno globino krmilnika.

Ko dosežete zeleni položaj, privijte vijake.


in/ali

2. Odvijte ročico (D) za nastavitev cevi (C) na želeno globino krmilnika.

Ko dosežete zeleni položaj, zategnite ročico.

Konfiguracije odmaknjenih cevi krmilnika

Z vrtenjem odmaknjene cevi krmilnika je mogoče smer odmika prilagoditi na več načinov:

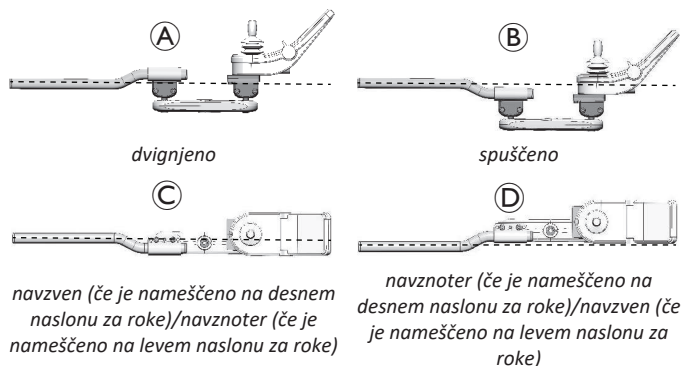

Prilagajanje višine in kota


Višina/kot držala krmilnika Maxx Resolve se prilagodi z dvema sklopoma okroglih objemk na nihajnem mehanizmu. Zadnji sklop okrogle objemke je pritrjen na cev krmilnika, na sprednjem sklopu okrogle objemke pa je nameščen krmilnik. Oba sklopa okroglih objemk je mogoče ločeno nastaviti tako, da krmilnik postavite na višino in/ali kot, ki ustreza uporabnikovim potrebam.



Pri nastavljanju kota klopov okroglih objemk navzgor se telo nihajnega mehanizma nagne navzgor. Ta nagib navzgor pomeni, da se bo krmilnik pri nihanju navzven (ko je nameščen na desnem naslonu za roke) ali navznoter (ko je nameščen na levem naslonu za roke) zanihal v nižji položaj. Nasproten učinek se pojavi, ko se kot sklopov okroglih objemk nastavi navzdol.




- 5-mm ključ imbus

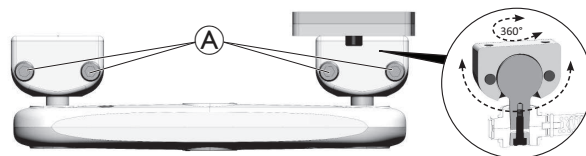

Prilagajanje kota



Prilagajanje višine

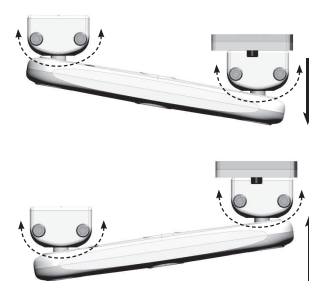


1. Odvijte vijake **A** v vsakem sklopu okroglih objemk.
2. Zavrtite/obrnite sklopa okroglih objemk na želeni kot/višino.
3. Ko dosežete želeni položaj, privijte vijake.

Prilagajanje sile popuščanja

Nihajno držalo krmilnika Maxx Resolve uporablja jermenski pogon z nastavljivo napetostjo za nadzor sile popuščanja, potrebne za spreminjanje položaja krmilnika. Napetost je mogoče nastaviti z odmičnim kolescem na sredini nihajnega mehanizma. Na voljo so štiri možnosti nastavitve napetosti, ki ustrezajo uporabnikovi moči in gibljivosti. Sila popuščanja mora biti nastavljena tako, da ustreza uporabnikovim potrebam.



- 6-mm ključ imbus

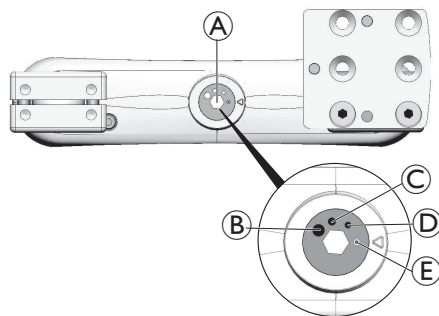

1. Z odmičnim kolescem **A** nastavite silo popuščanja na eno od štirih možnosti nastavitve:
 - B** 2,72 kg
 - C** 2,26 kg
 - D** 1,36 kg
 - E** 0,45 kg

3.5 Prilagajanje višine sredinskega držala na glavnem nosilcu



OPOZORILO!

Nevarnost telesne poškodbe ali nastanka škode

Nepripravljeni majhni deli lahko povzročijo zadušitev, ki lahko vodi v poškodbo ali smrt.

- Ne odstranjujte majhnih delov, razen pri zamenjavi gumba za krmilno palico.
- Odstranjenega gumba za krmilno palico nikoli ne puščajte brez nadzora.
- Pri otrocih, domačih živalih ali telesno oziroma duševno prizadetih osebah je potreben dodaten nadzor.




POZOR!

Nevarnost telesne poškodbe ali nastanka škode

Zaradi manjkajočih pokrovčkov in ostrih robov, ki ostanejo po prilagajanju drogov, na primer krajšanju droga, lahko pride do telesne poškodbe ali materialne škode.

- Ko odrežete velik del, zgladite rezano površino.
- Ko robove zgladite, ponovno namestite pokrovček.
- Preverite, ali je pokrovček trdno nameščen.

3.5.1 Prilagajanje globine sredinskega držala na glavnem nosilcu

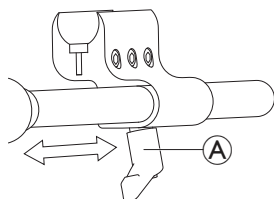

1. Odvijte ročico Ⓐ.
2. Nastavite želeni položaj sredinskega držala glavnega nosilca.
3. Zategnite ročico.


3.5.2 Nastavitev višine sredinskega držala na glavnem nosilcu

Višino sredinskega držala na glavnem nosilcu lahko nastavite na dva načina:

- Višino sredinskega držala na glavnem nosilcu lahko nastavite skupaj z višino naslona za roke. Glejte ustrezna poglavja o naslonu za roke.
- Nastavite lahko le višino sredinskega držala na glavnem nosilcu. Glejte spodnji razdelek.



- 3/16-palčni ključ imbus

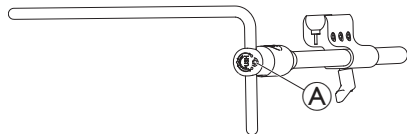


1. Odvijte vijak Ⓐ.
2. Nastavite željeno višino glavnega nosilca.
3. Privijte vijak.

3.5.3 Prilagajanje položaja krmilnika/zaslona



- 4-mm ključ imbus
- 8-mm ključ


Nagib krmilnika (DLX-REM110, DLX-REM2XX, DLX-REM400)

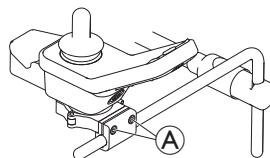

1. Odvijte vijake Ⓐ.
2. Krmilnik namestite na držalo.
3. Privijte vijake.


Primer nastavitve za krmilnik DLX-REM400. Krmilniki DLX-REM110, DLX-REM211 in DLX-REM216 se nastavijo na enak način.

Obračanje krmilnika (DLX-REM110, DLX-REM2XX, DLX-REM400)

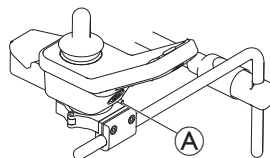


1. Odvijte vijak Ⓐ.
2. Krmilnik v objemki obrnite v željeni položaj.
3. Privijte vijak.

Primer nastavitve za krmilnik DLX-REM400. Krmilniki DLX-REM110, DLX-REM211 in DLX-REM216 se nastavijo na enak način.

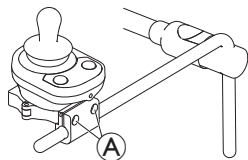Nagib krmilnika (DLX-CR400 in DLX-CR400LF)


1. Odvijte vijake **A**.
2. Krmilnik namestite na držalo.
3. Privijte vijake.

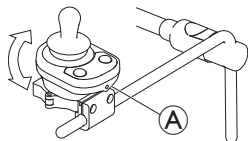Obračanje krmilnika (DLX-CR400 in DLX-CR400LF)

1. Odvijte vijak **A** (ni prikazan na sliki).
2. Krmilnik v objemki obrnite v željeni položaj.
3. Privijte vijak.

DLX-REM500


- 5-mm (3/16-palčni) ključ imbus

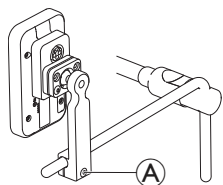

1. Odvijte vijak **A**.
2. Zaslón namestite na držalo.
3. Privijte vijak.

Sestavni deli ASL na paladnju glavnega nosilca

- 5-mm (3/16-palčni) ključ imbus

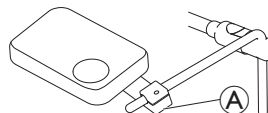


1. Odvijte vijak **A**.
2. Mizico namestite na držalo.
3. Privijte vijak.

Slika služi le kot primer.

Sestavni deli ASL le na sredinskem držalu na glavnem nosilcu

- 4-mm (5/32-palčni) ključ imbus

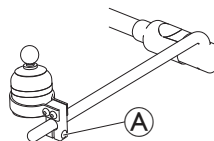

1. Odvijte vijak **A**.
2. Sestavni del ASL namestite na držalo.
3. Privijte vijak.

Slika služi le kot primer.

3.6 Nastavitev nihajnega mehanizma



OPOZORILO!

Nevarnost telesne poškodbe ali nastanka škode

Nepritrjeni majhni deli lahko povzročijo zadržitev, ki lahko vodi v poškodbo ali smrt.

- Ne odstranjujte majhnih delov, razen pri zamenjavi gumba za krmilno palico.
- Odstranjenega gumba za krmilno palico nikoli ne puščajte brez nadzora.
- Pri otrocih, domačih živalih ali telesno oziroma duševno prizadetih osebah je potreben dodaten nadzor.



POZOR!

Nevarnost telesne poškodbe ali nastanka škode

Zaradi manjkajočih pokrovčkov in ostrih robov, ki ostanejo po prilagajanju drogov, na primer krajšanju droga, lahko pride do telesne poškodbe ali materialne škode.


- Ko odrežete velik del, zgladite rezano površino.
- Ko robove zgladite, ponovno namestite pokrovček.
- Preverite, ali je pokrovček trdno nameščen.

Obstajajo različne možnosti uporabe nihajnega mehanizma:

- stranski deli PROTON vzglavnika,
- krmilna palica upravljalnika za upravljanje z brado,
- Jajčasto stikalo



- 4-mm (5/32-palčni) ključ imbus

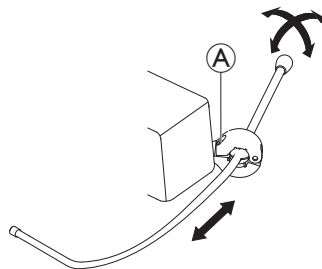

Nastavitev globine

1. Odvijte vijak Ⓐ.
2. Drog pomaknite do zelene globine.
3. Privijte vijak.

Nastavitev položaja


Nihajni mehanizem lahko obračate za 360 stopinj.

4. Odvijte vijak Ⓐ.
5. Nastavite v zeleni položaj.
6. Privijte vijak.

3.7 Nastavitev nihajnega držala zaslona



- 3-mm ključ imbus

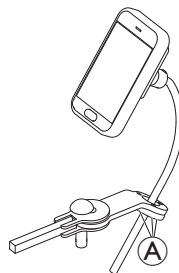

Nastavitev višine držala

1. Odvijte vijake Ⓐ.
2. Premaknite držalo na zeleno višino.
3. Privijte vijake.

Nastavitev usmerjenosti držala

Držalo lahko obračate za 360 stopinj.


1. Odvijte vijake Ⓐ.
2. Nastavite usmerjenost držala.
3. Privijte vijake.

Nastavitev usmerjenosti zaslona

Zaslon lahko obračate za 360 stopinj.



- 18-mm ključ

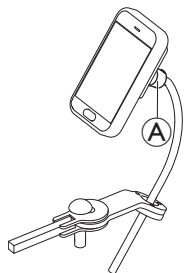

1. Odvijte vpenjalno pušo A.
2. Nastavite usmerjenost zaslona.
3. Privijte vpenjalno pušo.

3.8 Nastavitev ročnega upravljalnika za upravljanje z brado



OPOZORILO!

Nevarnost telesne poškodbe ali nastanka škode

Nepritrjeni majhni deli lahko povzročijo zadušitev, ki lahko vodi v poškodbo ali smrt.

- Ne odstranjujte majhnih delov, razen pri zamenjavi gumba za krmilno palico.
- Odstranjenega gumba za krmilno palico nikoli ne puščajte brez nadzora.
- Pri otrocih, domačih živalih ali telesno oziroma duševno prizadetih osebah je potreben dodaten nadzor.



POZOR!

Nevarnost telesne poškodbe ali nastanka škode


Zaradi manjkajočih pokrovčkov in ostrih robov, ki ostanejo po prilagajanju drogov, na primer krajšanju droga, lahko pride do telesne poškodbe ali materialne škode.

- Ko odrežete velik del, zgladite rezano površino.
- Ko robove zgladite, ponovno namestite pokrovček.
- Preverite, ali je pokrovček trdno nameščen.

3.8.1 Nastavitev krmilne paličice

Nastavitev usmerjenosti krmilne paličice

Krmilno palico lahko obrnete za 360 stopinj. Utor ob strani vam omogoča, da krmilno palico nagnete pod kotom 90 stopinj.

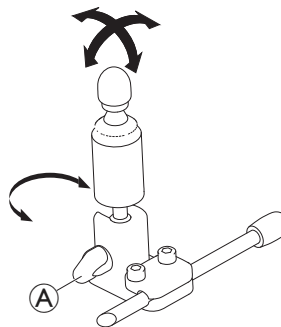


1. Odvijte ročni vijak A.
2. Spodnji del paličice obrnite tako, da lahko paličico potisnete v utor.
3. Nastavite usmerjenost krmilne paličice. Po potrebi lahko paličico fiksirate v utor pod kotom 90 stopinj.
4. Privijte ročni vijak.

Nastavitev položaja na držalu



- 4-mm (5/32-palčni) ključ imbus

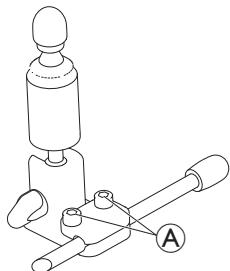

1. Odvijte vijake Ⓐ.
2. Paličico namestite na držalo.
3. Privijte vijake.

Nastavitev globine in višine

Glejte 3.6 *Nastavitev nihajnega mehanizma, stran 20.*


3.8.2 Nastavitev jajčastega stikala

Nastavitev usmerjenosti stikala

Jajčasto stikalo lahko obračate za 360 stopinj.



- 11-mm (7/16-palčni) ključ

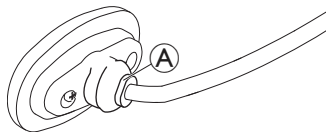

1. Odvijte matico Ⓐ.
2. Nastavite usmerjenost jajčastega stikala.
3. Privijte matico.

Nastavitev globine in višine


Glejte 3.6 *Nastavitev nihajnega mehanizma, stran 20.*

3.9 Nastavitev vzglavnika

Nastavitev položaja blazine



- 4-mm (5/32-palčni) ključ imbus

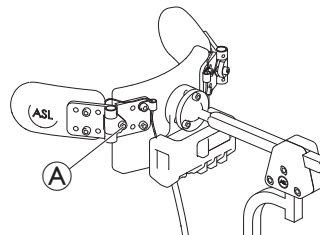

1. Odvijte vijak Ⓐ.
2. Nastavite položaj blazine.
3. Privijte vijak.

Prilaganje stranskih delov PROTON

Glejte 3.6 *Nastavitev nihajnega mehanizma, stran 20.*

Prilaganje položaja naslona za glavo


Glejte 3.17.4 *Prilaganje pritrditvenih delov večsopsnega naslona za glavo, stran 35.*

3.10 Prilagajanje vzglavnik s pihalno enoto

Nastavitev položaja blazine




- 4-mm (5/32-palčni) ključ imbus

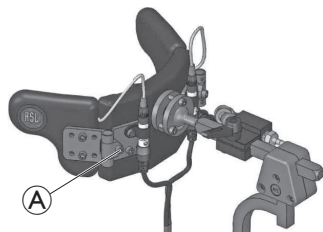


1. Odvijte vijak **A**.
2. Nastavite položaj blazine.
3. Privijte vijak.

Prilagajanje položaja cevi pihalne enote

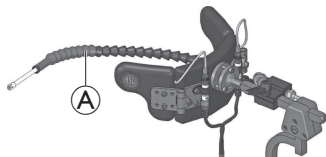

1. Upognite upogljivo cev pihalne enote **A** v želeni položaj.

Prilagajanje globine cevi pihalne enote

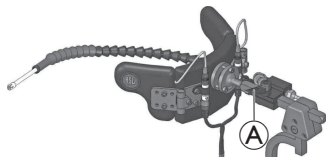

1. Sprostite vpenjalno ročico **A**.
2. Prilagodite cev pihalne enote na željeno globino.
3. Zategnite vpenjalno ročico.


Prilagajanje položaja naslona za glavo

Glejte 3.17.4 *Prilagajanje pritrditvenih delov večosnega naslona za glavo*, stran 35.

3.11 Prilagajanje kota prednastavljenega naslona za hrbet



- 10-mm ključ
- 13-mm ključ

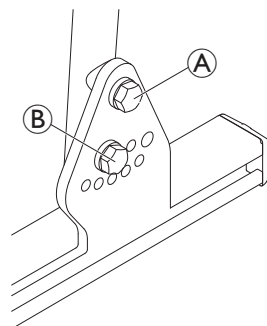

1. Odvijte vijak na obeh straneh **A**.
Vijaka ne odstranite.
2. Odvijte in odstranite vijak in podložko na obeh straneh **B**.
3. Nastavite na želeni kot naslona za hrbet.
4. Vijak in podložko znova vstavite in privijte.


3.12 Prilagajanje naslona za roke

3.12.1 Prilagajanje previsnega zložljivega naslona za roke

Prilagajanje širine naslona za roke



- 6-mm ključ imbus

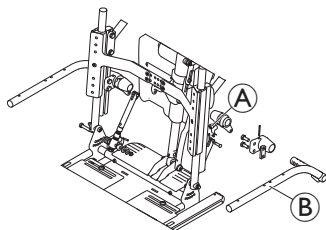


1. Odstranite vijak (A).
2. Nastavite željeno širino naslona za roke (B).
3. Vstavite vijak in ga privijte.

Prilagajanje višine naslona za roke



- 13-mm viličasti ključ

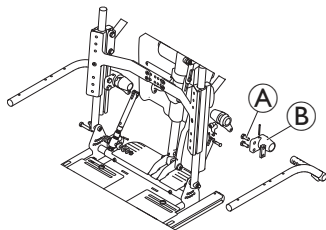


1. Odvijte vijake (A).
2. Nastavite željeno višino naslona za roke (B).
3. Privijte vijake.

Prilagajanje kota naslona za roke




- 13-mm viličasti ključ

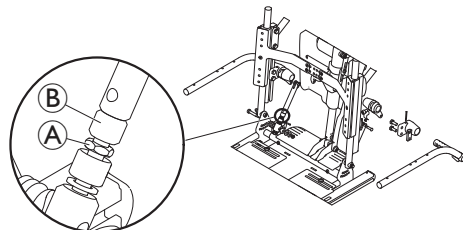

1. Odvijte zaklepno matico (A).
2. Prilagodite kot naslona za roke z nastavitvijo navojne palice s krilato matico (B):
 - Za dvig naslona za roke privijte navojno palico.
 - Za spuščanje naslona za roke odvijte navojno palico.
3. Privijte zaklepno matico.


3.12.2 Previsni zložljivi naslon za roke Maxx, nameščen na vodilo Ultra Rail

Nastavitev položaja

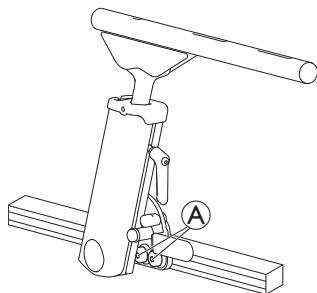


1. Odvijte vijake (A).
Vijakov ne odstranjujte.
2. Naslon za roke premaknite v želeni položaj.
3. Privijte vijake.

Prilagajanje višine

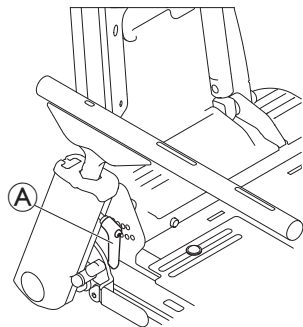

1. Sprostite vpenjalno ročico (A).
2. Nastavite želeno višino naslona za roke.
3. Zategnite vpenjalno ročico.

Prilagajanje kota

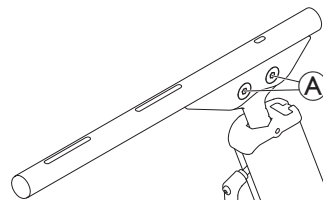


1. Odvijte vijake (A).
Vijakov ne odstranjujte.
2. Nastavite želeni kot naslona za roke.
3. Privijte vijake.

3.12.3 Prilagajanje naslona za roke z možnostjo naklona z dvotočkovno podporo

Naslon za roke z možnostjo naklona z dvotočkovno podporo ima prilagodljivo vrtljivo ročico, ki omogoča nastavitev višine v korakih po 13 mm.



- 5-mm ključ imbus
- 13-mm ključ

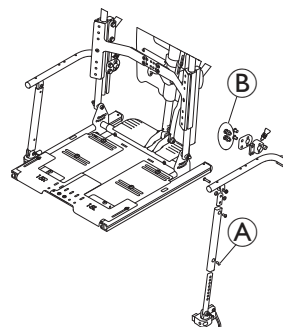


1. Odstranite vijak (A) in notranjo vrtljivo ročico potisnite navzgor/navzdol na želeno višino.
2. Ponovno namestite vijak.
3. Če želite prilagoditi sklop nosilca naslona za roke nastavitvi višine sklopa vrtljive ročice, odvijte oba vijaka (B) na notranji strani nosilca naslona za roke in potisnite nosilec naslona za roke navzgor/navzdol po cevi naslona za hrbet na želeno višino.
4. Znova privijte vijake.

Naslon za roke z možnostjo naklona in podpora za kolke

Pri uporabi naslona za roke z možnostjo naklona z dvotočkovno podporo in podpore za kolke upoštevajte, da mora biti podpora za kolke nameščena pred nosilcem naslona za roke z možnostjo naklona z dvotočkovno podporo. Če je podpora za kolke nameščena za nosilcem, se lahko pri nagibanju naslona za hrbet poškoduje.


3.13 Prilagajanje naslona za roke z večosno oporo za zgornje okončine (MACES)

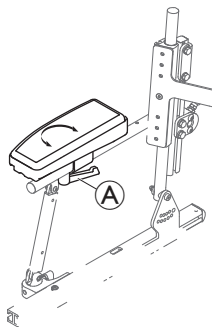

1. Sprostite zatič Ⓐ.
2. Nastavite položaj naslona za roke.
3. Zategnite zatič.

3.14 Prilagajanje opore za komolce

Prilagajanje globine opore za komolce

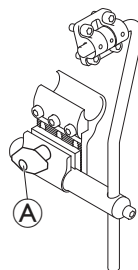


1. Odvijte vijak Ⓐ.
Vijaka ne odstranite.
2. Prilagodite oporo za komolce na želeno globino.
3. Privijte vijak.

Prilagajanje višine opore za komolce



- 5-mm ključ imbus

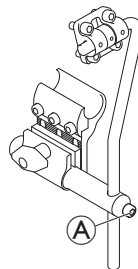


1. Odvijte vijak Ⓐ.
Vijaka ne odstranite.
2. Prilagodite oporo za komolce na želeno višino.
3. Privijte vijak.

Prilagajanje širine opore za komolce



- 3-mm ključ imbus
- 4-mm ključ imbus

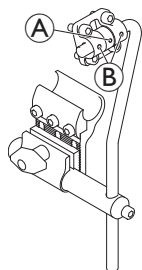


1. Odvijte vijake ① in ②.
Vijakov ne odstranjujte.
2. Prilagodite oporo za komolce na želeno širino.
3. Privijte vijake.

Prilagajanje kota opore za komolce



- 4-mm ključ imbus

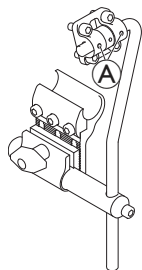


1. Odvijte vijake ①.
Vijakov ne odstranjujte.
2. Prilagodite oporo za komolce na želeni kot.
3. Privijte vijake.

3.15 Prilagajanje podpore za kolke s funkcijo hitre sprostitve

Nastavitev položaja



- 5-mm ključ imbus

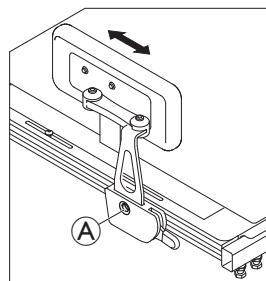


1. Odvijte vijak ①.
Vijaka ne odstranite.
2. Nastavite želeni položaj podpore za kolke.
3. Privijte vijak.

Nastavitev širine



- 2 x 5-mm ključ imbus

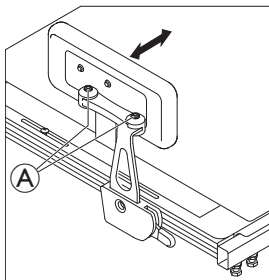


1. Odvijte vijake ①.
2. Nastavite želeno širino podpore za kolke.
 Nastaviti je mogoče samo širino podpore za kolke, ki ne presega širine sedeža.
3. Privijte vijake.

Prilagajanje kota



- 5-mm ključ imbus

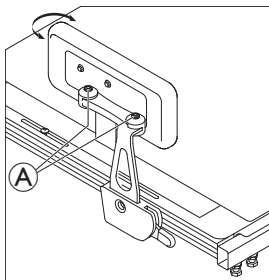


1. Odvijte vijake ①.
2. Nastavite želeni kot podpore za kolke.
3. Privijte vijake.

Prilagajanje globine blazine za kolke



- 10-mm ključ

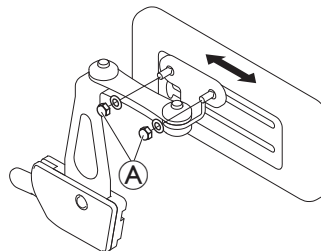

1. Odvijte oba vijaka ①.
2. Blazino za kolke pomaknite do zelene globine.
3. Privijte vijake.

Prilagajanje višine blazine za kolke


Višino blazine za kolke lahko prilagodite na dva načina:

- prek utorov za namestitev;
- prek nosilca.


Prek utorov za namestitev



- 10-mm ključ

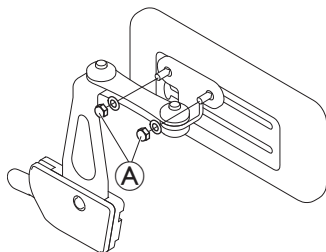

1. Odvijte oba vijaka **A**.

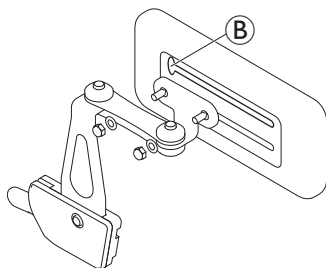


2. Nosilec blazine za kolke odstranite iz utora za namestitev **B**.
3. Nosilec blazine za kolke vstavite v drugi utor za namestitev.
4. Privijte vijake.

Prek nosilca



- 5-mm ključ imbus

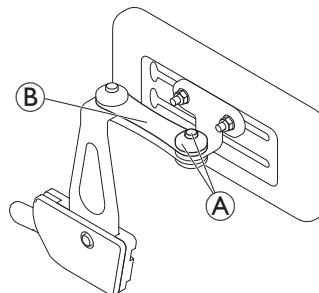


1. Odstranite zgornji vijak in torni pokrov **A**.
2. Odstranite mali torni člen **B**.
3. Odstranite blazino za kolke z nosilcem, obrnite jo na glavo in znova namestite.
4. Vstavite torni člen, torni pokrov, vijak in elemente privijte.

3.16 Prilagajanje stranskih opor za trup



- 4-mm ključ imbus
- 10-mm ključ


Nihajna funkcija

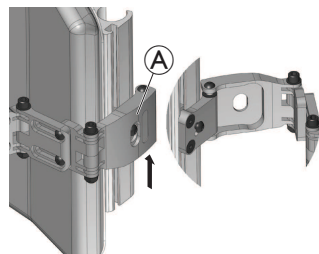

1. Dvignite nosilec **A** navzgor, da ga sprostite.
2. Zanihajte nazaj v stran.

Prilagajanje kota


Kot je mogoče nastaviti v poljuben položaj

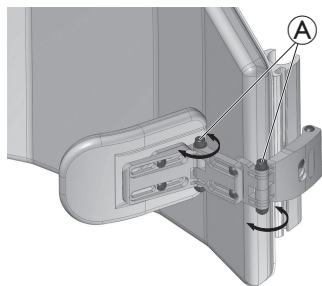

1. Odvijte matici/vijaka (x2) Ⓐ, da nastavite kot blazine.

Nastavitev širine


Pri nastavitvi obeh stranskih opor je mogoče širino nastaviti na skupno 89 mm (3,5").

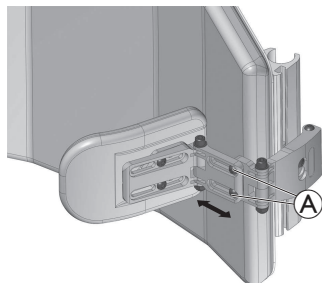

1. Odvijte vijaka (x2) Ⓐ, da nastavite širino nosilca.


Prilagajanje globine blazine

Globino blazine je mogoče nastaviti v skupnem razponu 63,5 mm (2,5").

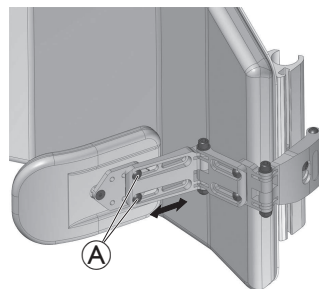

1. Odvijte vijaka (x2) Ⓐ, da nastavite globino blazine.

Prilagajanje višine

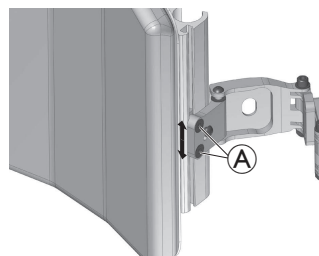

1. Odvijte/odstranite vijaka (x2) Ⓐ, da nastavite stransko višino.

3.17 Prilagajanje naslona za glavo




POZOR!

Nevarnost telesnih poškodb med uporabo električnega invalidskega vozička kot sedeža v vozilu, če naslon za glavo ni pravilno nastavljen ali ni nameščen

Pri trčenju zato lahko pride do hiperekstenzije vratu.

- Naslon za glavo mora biti nameščen. Naslon za glavo, ki je po želji priložen temu električnemu invalidskemu vozičku Invacare, je popolnoma primeren za uporabo med prevozom.
- Naslon za glavo je treba nastaviti v višino uporabnikovih ušes.

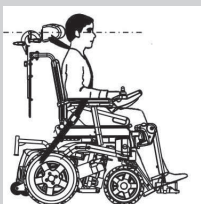

OBVESTILO!

- Pri sistemih z električnim naklonom in ESR vedno preverite/preskusite naslon za glavo (spodnjo cev) za morebitne motnje v celotnem obsegu naklona. Če pride do motenj, je treba dolžino spodnje cevi po potrebi prilagoditi.



- Morda je treba odstraniti ali prilagoditi prevleko blazine za naslon za hrbet, da lahko dostopate do odprtin za pritrditev naslona za glavo v plošči naslona za hrbet.
- Na voljo je izbirna podložna ploščica. Namestiti jo je mogoče med zapenjalno in ploščo naslona za hrbet, kar zagotavlja dodaten razmak pri naslonih za hrbet Posture Back in Deep Back.


Pritrditveni sistem naslona za glavo je zasnovan tako, da se namesti v obstoječe pritrditvene odprtine v plošči naslona za hrbet.

3.17.1 Nameščanje vmesnika naslona za glavo za modela Elite Back in High Back

Pri nameščanju naslona za glavo na model High Back ali Elite Back morate uporabiti vmesnik.



- Križni izvijač
- 8-mm ključ

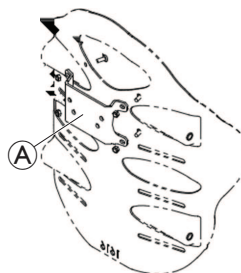


1. S priloženimi pritrditvenimi deli poravnajte vmesnika naslona za glavo **A** in ga namestite v obstoječe pritrditvene odprtine v plošči naslona za hrbet.

Nameščanje vmesnika naslona za glavo za model Elite 2 Back (Naklon)



- 4-mm ključ imbus
- 10-mm ključ

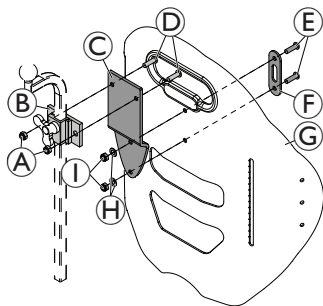


1. Namestite zapenjalo naslona za glavo **B** na vmesnik naslona za glavo **C** z vijaki **D** in maticami **A**.
2. Namestite vmesnik naslona za glavo **C** na ploščo naslona za hrbet **E** z vijaki **E**, ploščo podloške naslona za glavo **F**, podloškami **H** in maticami **I**.

Nameščanje vmesnika naslona za glavo za model Elite 2 Back (Nagib)



- 5-mm ključ imbus
- 10-mm ključ

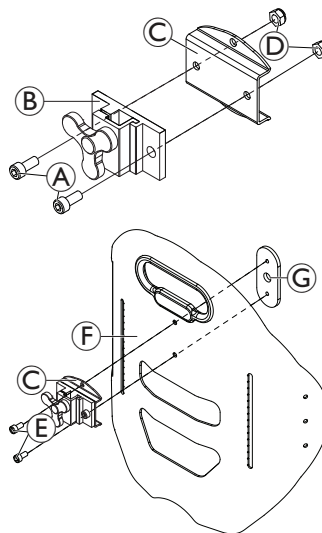


1. Namestite zapenjalo naslona za glavo **B** in vmesnik naslona za glavo **C** z vijaki **A** in maticami **D**.
2. Namestite vmesnik naslona za glavo **C** na ploščo naslona za hrbet **F** z vijaki **E** in ploščo matice naslona za glavo **G**.

3.17.2 Samodejna namestitvev in nastavitvev naslona za glavo



- 2,5-mm ključ imbus
- 4-mm ključ imbus
- 5-mm ključ imbus
- 10-mm ključ

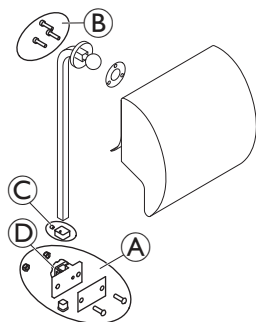

1. S priloženimi pritrditvenimi deli poravnajte zapenjalno naslona za glavo in ga namestite v obstoječe pritrditvene odprtine v plošči naslona za hrbet (A).
2. Pritrdite blazino naslona za glavo na palico naslona za glavo s priloženimi pritrditvenimi deli (B).




Želeni kot blazine naslona za glavo lahko nastavite z vrtljivo kroglico na koncu palice naslona za glavo tako, da popustite ali zategnete pritrditvene dele.

3. Celotno višino blazine naslona za glavo/nosilnega droga prilagodite z gumbom (D).
4. Naslon za glavo je treba nastaviti na višino uporabnikovih ušes. Ko je nastavljena končna višina, obroček v obliki črke D (z vijakom za nastavitvev) nastavite tako, da bo poravnan z zgornjo stranjo zapenjala (ter tako preprečite zdrs) (C).

3.17.3 Nastavitev pritrditvenih delov naslona za glavo Elan

Pritrditvene dele naslona za glavo Elan je mogoče nastaviti na veliko načinov. Na spodnji sliki so prikazane vse možnosti za nastavitvev zglobov.

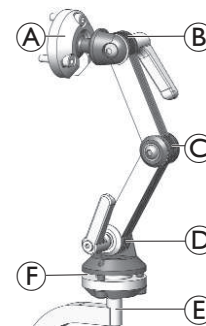


(A)	Zgornji vrtljivi zglob za nastavitvev pod poljubnim kotom	• 360-stopinjsko obračanje • 80-stopinjski nagib
(B)	Zgornji povezovalni zgib	• 180-stopinjsko obračanje
(C)	Srednji povezovalni zgib	• 100-stopinjsko obračanje
(D)	Spodnji povezovalni zgib	• 180-stopinjsko obračanje
(E)	Nosilni drog	• 360-stopinjsko obračanje v korakih po 90°
(F)	Spodnji vrtljivi zglob za nastavitvev pod poljubnim kotom	• 360-stopinjsko obračanje • 50-stopinjski nagib

Nameščanje



- 2,5-mm ključ imbus
- 4-mm ključ imbus
- 5-mm ključ imbus

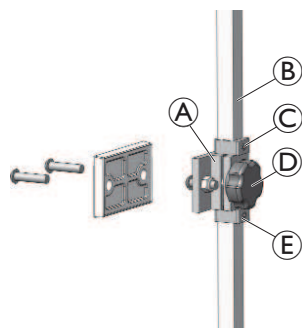

1. S priloženimi pritrditvenimi deli poravnajte zapenjalo naslona za glavo in ga namestite v obstoječe pritrditvene odprtine v plošči naslona za hrbet (A).
2. Blazino naslona za glavo (ni prikazana) s priloženimi pritrditvenimi deli namestite na palico naslona za glavo.



Želeni kot blazine naslona za glavo lahko nastavite z vrtljivo kroglico na koncu palice naslona za glavo tako, da popustite ali zategnete pritrditvene dele.


3. Odvijte in odstranite spodnji obroček v obliki črke D (E) s pritrditvenega sistema.
4. Navpični nosilni drog (B) potisnite v zapenjalo in nastavite želeno skupno višino blazine naslona za glavo. Privijte gumb (D). Naslon za glavo je treba nastaviti na višino uporabnikovih ušes.
5. Po potrebi nastavite zgornji obroček v obliki črke D (C).
6. Ko je nastavljen končna višina, spodnji obroček v obliki črke D (E) nastavite tako, da bo poravnana s spodnjo stranjo zapenjala (in tako preprečite zdrs).

Nastavitev globine in kota

Globino in kot naslona za glavo lahko dodatno nastavite s kolenastimi zgibi.



- 4-mm ključ imbus
- 5-mm ključ imbus

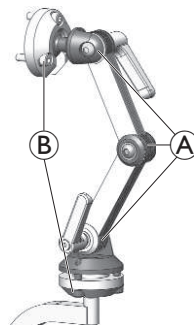

1. Odvijte vijake in sprostite vpenjalni ročici na sklopu za nastavitev dvojnega zgiba (A) ter vijake na zgornjem in spodnjem vrtljivem zglobu (B).
2. Sestavni del premaknite v želeni položaj.
3. Privijte vijake in zategnite vpenjalni ročici.

3.17.4 Prilagajanje pritrditvenih delov večsnega naslona za glavo


Nomeščanje



Želeni kot blazine naslona za glavo lahko nastavite z vrtljivo kroglico na koncu palice naslona za glavo tako, da popustite ali zategnete pritrditvene dele.



- 2,5-mm ključ imbus
- 4-mm ključ imbus
- 10-mm ključ

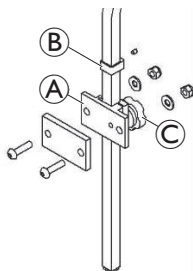


1. S priloženimi pritrditvenimi deli poravnajte zapenjalo naslona za glavo in ga namestite v obstoječe pritrditvene odprtine v ploči naslona za hrbet **A**.
 2. Blazino naslona za glavo (ni prikazana) s priloženimi pritrditvenimi deli namestite na palico naslona za glavo.
 3. Višino blazine naslona za glavo nastavite v želeni položaj. Privijte gumb **C**. Naslon za glavo je treba nastaviti na višino uporabnikovih ušes.
3. Ko je nastavljena končna višina, obroček v obliki črke D **B** nastavite tako, da bo poravnan z zgornjo stranjo zapenjalo (ter tako preprečite zdrs).

Nastavitev globine in kota

Globino in kot naslona za glavo in vodoravne palice lahko dodatno prilagodite s kotnim nosilcem, ki omogoča več položajev.



- 4-mm (5/32-palčni) ključ imbus

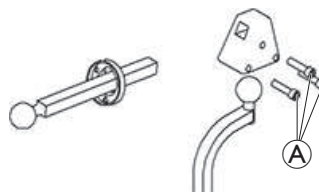


1. Popustite pritrditvene dele nosilca, ki omogoča več položajev **A**.
2. Naslon za glavo premaknite v želeni položaj.
3. Pritrditvene dele znova zategnite.

3.18 Nožni opori Pivot Plus

3.18.1 Nihajni nožni opori

Nožna opora Pivot Plus uporablja uporabniku prijazno ročico, ki zaklepa in odklepa nožni opori, kar omogoča, da se zatič nožne opore zavrti/obrne okoli nosilca nožne opore.

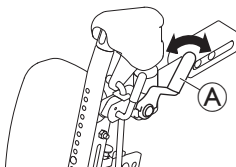


1. Premaknite ročico Ⓐ v odklenjen položaj.




2. Obrnite nožno oporo navzven.

3.18.2 Odstranjevanje nožnih opor

Odstranjevanje

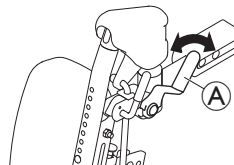

1. Samo električni nožni opori Pivot Plus: Odklopite aktuator.
2. Premaknite ročico Ⓐ v odklenjen položaj.

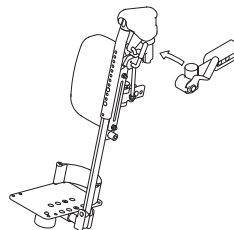

3. Dvignite celoten sklop nožne opore navzgor.


Ponovno nameščanje

1. Vstavite zatič nožne opore v nosilec nožne opore.
2. Pomaknite ročico v zaklenjen položaj.
3. Samo električni nožni opori Pivot Plus: Priklopite aktuator. Prepričajte se, da se vtič slišno zaskoči.

3.18.3 Prilagajanje kota nožne opore


Kot nožne opore Pivot Plus se nastavi z ročnim dviganjem ali spuščanjem.

Dvigovanje nožne opore Pivot Plus

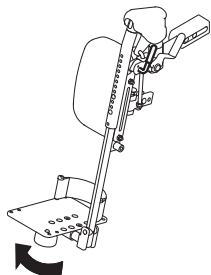

1. Nožno oporo povlecite navzgor do želenega kota.

Spuščanje nožne opore Pivot Plus

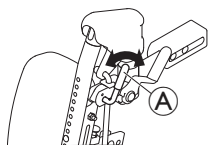


1. Odklenite ročico za ročno nožno oporo (A).
2. Spustite nožno oporo do želenega kota.
3. Zaklenite ročico za ročno nožno oporo.

3.18.4 Prilagajanje širine in kota prilagodljive stopalke



- 6-mm ključ imbus
- 10-mm ključ


Nastavitev širine

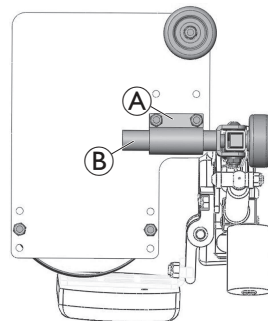

1. Zrahljajte zapiralo (A), da prilagodite celoten položaj (širino) stopalke navznoter in navzven vzdolž vrtljivega nosilca (B).

Nastavljanje kota

Kot stopalke je mogoče nastaviti tudi z vijakom za nastavitev na notranji strani nosilca stopalke.

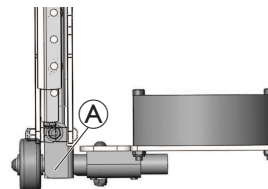


1. Privijte ali odvijte vijak za nastavitev (A), da ustrezno povečate ali zmanjšate kot stopalke.


3.19 Nožni opori, pritrjeni na sredini – ročno prilagajanje omogočeno

3.19.1 Odstranjevanje nožne opore

Sredinsko nožno oporo, ki jo je mogoče nastaviti ročno, lahko v celoti odstranite.

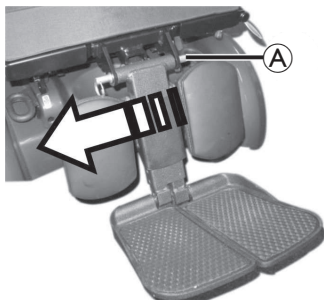

1. Odstranite odstranljivo os **A**.

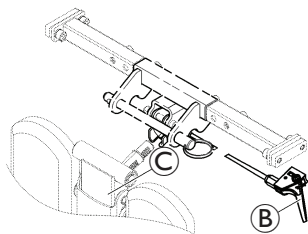

2. Nožno oporo čvrsto držite in potegnite ročico **B**.
3. Nožno oporo odstranite iz držala **C**.

3.19.2 Nastavljanje kota nožne opore




POZOR!

Nevarnost telesnih poškodb

Če nožna opora ni pritrjena in potegnete ročico **A**, lahko nožna opora nenadoma pade in povzroči poškodbe.

— Preden potegnete ročico, pritrдите nožno oporo.

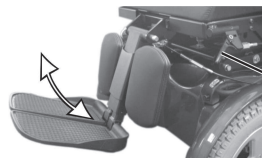


1. Nožno oporo čvrsto držite.
2. Povlecite ročico **A**.
3. Nožno oporo potisnite v želeni položaj.

3.19.3 Nastavljanje dolžine nožne opore



- 5-mm (3/16-palčni) ključ imbus

Dolžino ene nožne opore lahko nastavite neodvisno od druge.

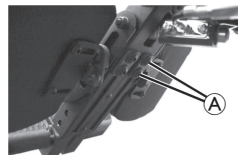

1. Sprostite vijaka **A** na zadnji strani nožne opore.
2. Nastavite želeno dolžino.
3. Znova zategnite vijake.

3.19.4 Nastavljanje kota stopalke



- 4-mm (5/32-palčni) ključ imbus




1. Stopalki zložite v smeri naprej, da je omogočen dostop do vijaka za prilagajanje **A**.
2. Nastavite vijak za prilagajanje.
3. Stopalki spustite nazaj dol.

3.19.5 Nastavljanje kota in višine blazine za meča



- 5-mm (3/16-palčni) ključ imbus

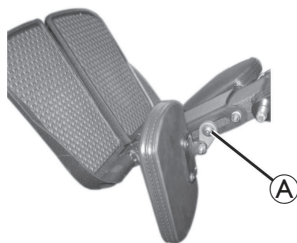

1. Blazino za meča zložite v smeri naprej, da je omogočen dostop do vijaka **A**.
2. Odvijte vijak ter nastavite želeni kot in višino blazine za meča.
3. Znova zategnite vijak.
4. Blazino za meča premaknite nazaj.

3.20 Nožna opora LNX

3.20.1 Nastavljanje dolžine nožne opore

Po potrebi je naklon nožne opore mogoče prednastaviti na 83° ali 97° namesto na 90°. Obrnite se na svojega prodajalca izdelkov Invacare.




- 4-mm ključ imbus
- 10-mm viličasti ključ



Dolžino ene nožne opore lahko nastavite neodvisno od druge.



Nožno oporo z enojno ploščo nastavite na enak način.

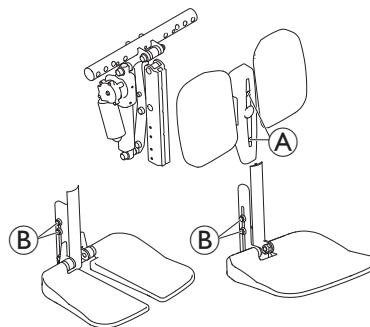

1. Odstranite vijaka **A** na sprednji strani nožne opore.
2. Odstranite pokrov in blazino za meča.
3. Odvijte matici **B** ob strani nožne opore. Morda boste morali matici odstraniti in ju premakniti v naslednji utor.
4. Nastavite želeno dolžino.
5. Znova privijte matici.
6. Znova namestite blazino za meča in pokrov ter privijte vijaka.

3.20.2 Nastavljanje kota stopalke



- 4-mm (5/32-palčni) ključ imbus



1. Stopalki zložite v smeri naprej, da je omogočen dostop do vijaka za prilagajanje (A).
2. Nastavite vijak za prilagajanje.
3. Stopalki spustite nazaj dol.

3.20.3 Prilagajanje širine stopalke


Širina stopalke se nastavi z distančniki:

- Za povečanje širine namestite distančnike na notranjo stran.
- Za zmanjšanje širine namestite distančnike na zunanjo stran.

Vsak distančnik poveča ali zmanjša širino za 6,35 mm (1/4 palca).



- 6-mm ključ imbus

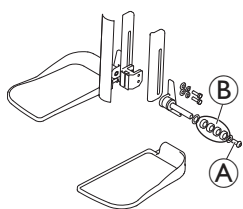


1. Odstranite vijak (A).
2. Odstranite distančnike (B) in stopalko.
3. Po potrebi namestite distančnike na notranjo stran.
4. Namestite stopalko.
5. Po potrebi namestite distančnike na zunanjo stran.
6. Znova privijte vijak.

3.20.4 Nastavljanje kota stopalke



- 4-mm (5/32-palčni) ključ imbus

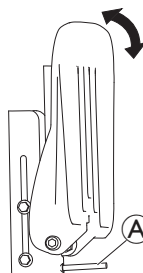

1. Stopalko pomaknite navzgor, da omogočite dostop do vijaka za prilagajanje (A).
2. Nastavite vijak za prilagajanje.
3. Stopalko ponovno pomaknite navzdol.

3.20.5 Nastavljanje višine in širine blazine za meča




OBVESTILO!

- Po spreminjanju nastavitev blazin za meča in prilagajanju naklona nožne opore se prepričajte, da se blazini za meča ne dotikata krmilnih kolesc ali plošče sedeza.

Blazini za meča lahko nastavljate ločeno na njunih namestitvenih nosilcih z namestitvenimi vijaki na zadnji strani obeh blazin za meča. Blazini za meča lahko prilagajate (npr. globino, višino in naklon) ter tako nastavite različne konfiguracije. Možnost prilagajanja posamezne blazine za meča uporabniku zagotavlja optimalen položaj in udobje – v nadaljevanju so prikazani nekateri primeri konfiguracij.

Nastavitev blazine za meča – primeri konfiguracij

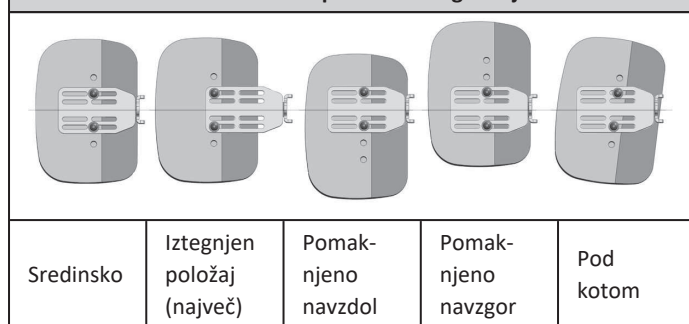


- 4-mm ključ imbus

1. Blazino za meča poklopite naprej, da je omogočen dostop do vijakov.
2. Odvijte vijaka in ju po potrebi odstranite.
3. Nastavite ustrezno višino in širino blazine za meča.
4. Znova zategnite vijake.
5. Blazino za meča premaknite nazaj.

3.21 Nožna opora Vari-F

3.21.1 Obračanje nožne opore navzven in/ali odstranitev

Na zgornjem delu nožne opore je majhen gumb za odklep. Ko je nožna opora odklenjena, jo lahko obrnete navznoter ali navzven, ko se presedate v invalidski voziček, ali pa jo popolnoma odstranite.

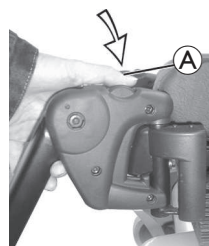

1. Pritisnite gumb za odklepanje [Ⓐ] in obrnite nožno oporo navzven.
2. Nožno oporo odstranite v smeri navzgor.

3.21.2 Nastavljanje kota




POZOR!

Pri nepravilni nastavitvi stopalk in nožnih opor obstaja možnost nastanka poškodbe

- Pred vsako potjo in med njo je treba zagotoviti, da se stopalki ne dotikata krmilnih kolesc ali tal.



- 6-mm ključ imbus

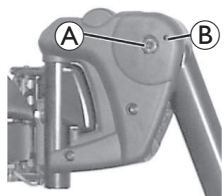

1. Odvijte vijak ① s ključem imbus.
2. Če nožne opore ne morete premakniti, ko odvijete vijak, vstavite kovinski zatič v za to namenjeno izvrtino ② in s kladivom rahlo udarite po njem. To bo sprostilo vpenjalni mehanizem v notranjosti nožne opore. Po potrebi postopek ponovite še na drugi strani nožne opore.




3. Odvijte vijak ③.
4. Nastavite želeni kot.
5. Znova privijte vijak.


3.21.3 Nastavljanje končnega položaja nožne opore



- 6-mm ključ imbus
- 10-mm ključ

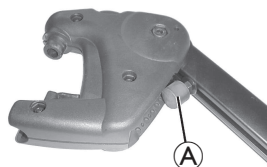


1. Končni položaj nožne opore je določen z gumijasto blokado ①.

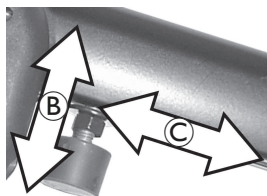


2. Gumijasto blokado lahko privijete ali odvijete ② ali porinete navzgor ali navzdol ③.



3. Odvijte vijak ④ in zavrite nožno oporo navzgor, da doseže gumijasto blokado.

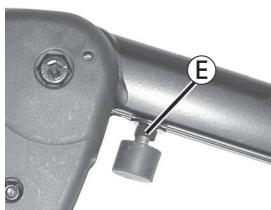

4. Odvijte protimatico ⑤.

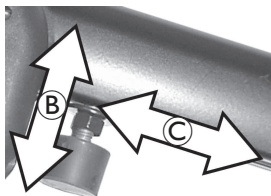

5. Pomaknite gumijasto blokado v želeni položaj.
6. Znova zategnite protimatico.



7. Premaknite oporo za noge v želeni položaj.
8. Znova privijte vijak.

3.21.4 Prilagajanje dolžine nožne opore




POZOR!

Pri nepravilni nastavitvi stopalk in nožnih opor obstaja možnost nastanka poškodbe

- Pred vsako potjo in med njo je treba zagotoviti, da se stopalki ne dotikata krmilnih kolesc ali tal.



- 5-mm ključ imbus

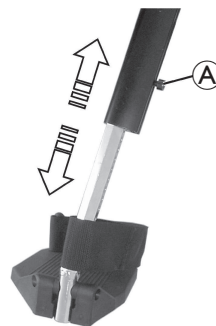


1. Odvijte vijak ①.
2. Nastavite želeno dolžino stopalke.
3. Znova privijte vijak.

3.22 Nožni opori Vari-A

3.22.1 Obračanje nožne opore navzven in/ali odstranitev

Na zgornjem delu nožne opore je majhen gumb za odklep. Ko je nožna opora odklenjena, jo lahko obrnete navznoter ali navzven, ko se presedate v invalidski voziček, ali pa jo popolnoma odstranite.

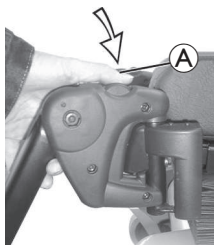

1. Pritisnite gumb za odklepanje **A** in obrnite nožno oporo navzven.
2. Nožno oporo odstranite v smeri navzgor.



2. Udarite gumb, da sprostite zaklepni mehanizem.

3.22.2 Nastavljanje kota




POZOR!

Pri nepravilni nastavitvi stopalk in nožnih opor obstaja možnost nastanka poškodbe

- Pred vsako potjo in med njo je treba zagotoviti, da se stopalki ne dotikata krmilnih kolesc ali tal.



3. Nastavite želeni kot.

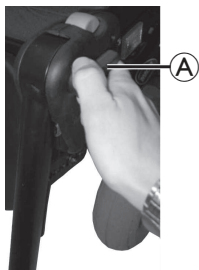

1. Odvijte zaporni gumb **A** v nasprotni smeri urnega kazalca za vsaj en obrat.




4. Zavrtite gumb v smeri urnega kazalca, da ga zategnete.


3.22.3 Nastavljanje končnega položaja nožne opore




- 10-mm ključ

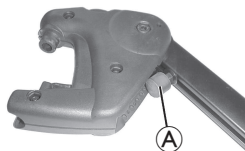

1. Končni položaj nožne opore je določen z gumijasto blokado **A**.

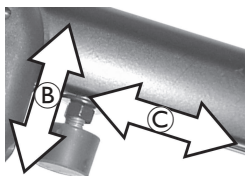

2. Gumijasto blokado lahko privijete ali odvijete **B** ali porinete navzgor ali navzdol **C**.

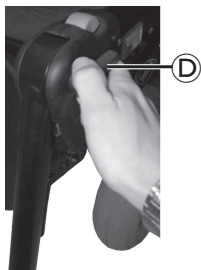


3. Odvijte zaporni gumb **D** v nasprotni smeri urnega kazalca za vsaj en obrat.




4. Udarite gumb, da sprostite zaklepni mehanizem.




5. Zavrtite oporo za noge navzgor, da imate dostop do gumijaste blokade.

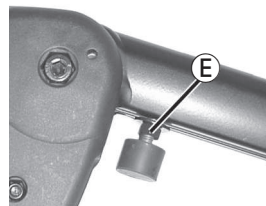

6. S ključem odvijte protimatico **E**.

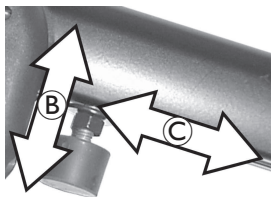

7. Pomaknite gumijasto blokado v želeni položaj.
8. Znova zategnite protimatico.

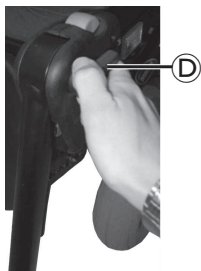

9. Premaknite oporo za noge v želeni položaj.
10. Znova zategnite zaporni gumb.

3.22.4 Prilagajanje dolžine nožne opore




POZOR!

Pri nepravilni nastavitvi stopalk in nožnih opor obstaja možnost nastanka poškodbe

- Pred vsako potjo in med njo je treba zagotoviti, da se stopalki ne dotikata krmilnih kolesc ali tal.



- 5-mm ključ imbus

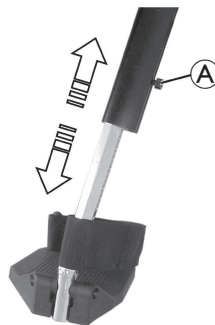

1. Odvijte vijak (A).
2. Nastavite želeno dolžino stopalke.
3. Znova privijte vijak.

3.22.5 Prilagajanje višine blazine za meča



- 4-mm ključ imbus



1. Odvijte vijaka ①.
2. Blazino za meča nastavite v želeni položaj.
3. Znova privijte vijaka.

3.22.6 Prilagajanje globine blazine za meča

Globino blazine za meča lahko nastavite prek nosilne plošče. Kombinacije lukenj v nosilni plošči omogočajo pet različnih nastavitvev globine.



- 10-mm ključ



1. Odstranite matico ①.
2. Blazino za meča pomaknite do želene globine. V okrogle luknje vstavite vijake za pritrditev blazine za meča, v podolgovate luknje pa zatiče brez navoja.
3. Privijte matico in jo zategnite.

3.22.7 Odklepanje blazine za meča in njen pomik nazaj

1.



Potisnite blazino za meča naravnost navzdol.

2.



Odklenite nožno oporo in jo obrnite navzven. Blazina za meča se samodejno pomakne nazaj.

3.



Dvignite nogo prek traku za pete in jo položite na tla.

3.22.8 Prilagajanje stopalke s prilagodljivim naklonom



- 5-mm ključ imbus




1. Odvijte oba vijaka Ⓐ na stopalki.
2. Nastavite želeni kot.
3. Znova privijte vijaka.

3.22.9 Prilagajanje kota in globine prilagodljive stopalke



- 5-mm ključ imbus

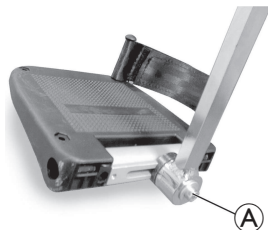


1. Odvijte vijak na stopalki Ⓐ.
2. Stopalko nastavite na želeni kot ali globino.
3. Znova privijte vijak.

3.23 Nožne opore ADM

3.23.1 Obračanje nožne opore navzven in/ali odstranitev

Na zgornjem delu nožne opore je majhen gumb za odklep. Ko je nožna opora odklenjena, jo lahko obrnete navznoter ali navzven, ko se presedate v invalidski voziček, ali pa jo popolnoma odstranite.

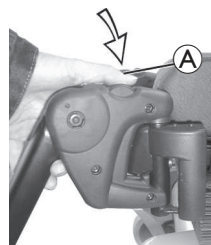

1. Pritisnite gumb za odklepanje Ⓐ in obrnite nožno oporo navzven.
2. Nožno oporo odstranite v smeri navzgor.

3.23.2 Nastavljanje kota



POZOR!

Pri nepravilni nastavitvi stopalk in nožnih opor obstaja možnost nastanka poškodbe

- Pred vsako potjo in med njo je treba zagotoviti, da se stopalki ne dotikata krmilnih kolesc ali tal.



POZOR!

Nevarnost poškodbe


- Ne segajte v območje obračanja nožne opore.

Dviganje



1. Nožno oporo potegnite navzgor, tako da nastavite želeni kot.

Spuščanje

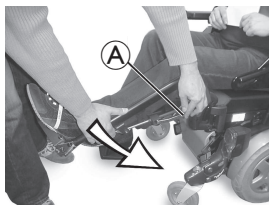

1. Nožna opora naj ostane na območju stopalke, potegnite stransko ročico za prilagajanje (A) in počasi spustite nožno oporo.

3.23.3 Prilagajanje dolžine nožne opore


**POZOR!**

Pri nepravilni nastavitvi stopalk in nožnih opor obstaja možnost nastanka poškodbe

- Pred vsako potjo in med njo je treba zagotoviti, da se stopalki ne dotikata krmilnih kolesc ali tal.



- 5-mm ključ imbus

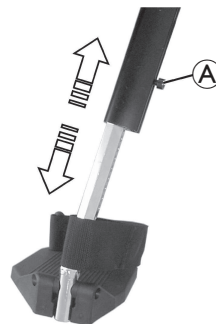


1. Odvijte vijak (A).
2. Nastavite želeno dolžino stopalke.
3. Znova privijte vijak.

3.23.4 Prilagajanje višine blazine za meča



- 4-mm ključ imbus

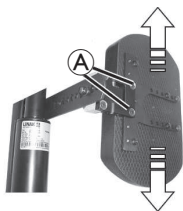

1. Odvijte vijaka ①.
2. Blazino za meča nastavite v želeni položaj.
3. Znova privijte vijaka.

3.23.5 Prilagajanje globine blazine za meča

Globino blazine za meča lahko nastavite prek nosilne plošče. Kombinacije lukenj v nosilni plošči omogočajo pet različnih nastavitvev globine.



- 10-mm ključ



1. Odstranite matico ①.
2. Blazino za meča pomaknite do želene globine. V okrogle luknje vstavite vijake za pritrditev blazine za meča, v podolgovate luknje pa zatiče brez navoja.
3. Privijte matico in jo zategnite.

3.23.6 Odklepanje blazine za meča in njen pomik nazaj

1.



Potisnite blazino za meča naravnost navzdol.

2.



Odklenite nožno oporo in jo obrnite navzven. Blazina za meča se samodejno pomakne nazaj.

3.



Dvignite nogo prek traku za pete in jo položite na tla.

3.23.7 Prilagajanje stopalke s prilagodljivim naklonom



- 5-mm ključ imbus




1. Odvijte oba vijaka Ⓐ na stopalki.
2. Nastavite želeni kot.
3. Znova privijte vijaka.

3.23.8 Prilagajanje kota in globine prilagodljive stopalke



- 5-mm ključ imbus

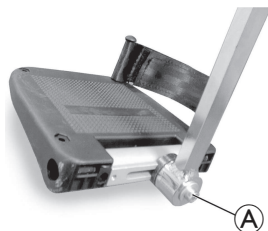


1. Odvijte vijak na stopalki Ⓐ.
2. Stopalko nastavite na želeni kot ali globino.
3. Znova privijte vijak.

3.24 Električni dvizni nožni opori (nožni opori ADE)

3.24.1 Obračanje nožne opore navzven in/ali odstranitev

Na zgornjem delu nožne opore je majhen gumb za odklep. Ko je nožna opora odklenjena, jo lahko obrnete navznoter ali navzven, ko se presedate v invalidski voziček, ali pa jo popolnoma odstranite.

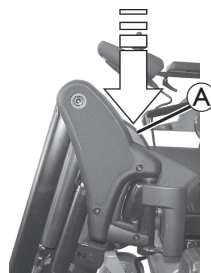

1. Pritisnite gumb za odklepanje Ⓐ in obrnite nožno oporo navzven.
2. Nožno oporo odstranite v smeri navzgor.

3.24.2 Nastavljanje kota

Električni nožni opori z možnostjo prilagajanja višine lahko upravljate s krmilno ploščo. Za več informacij glejte ločena navodila za uporabo za krmilno ploščo.



POZOR!

Nevarnost poškodbe

— Ne segajte v območje obračanja nožne opore.

**POZOR!**

Pri nepravilni nastavitvi stopalk in nožnih opor obstaja možnost nastanka poškodbe

- Pred vsako potjo in med njo je treba zagotoviti, da se stopalki ne dotikata krmilnih kolesc ali tal.

3.24.3 Prilagajanje dolžine nožne opore


**POZOR!**

Pri nepravilni nastavitvi stopalk in nožnih opor obstaja možnost nastanka poškodbe

- Pred vsako potjo in med njo je treba zagotoviti, da se stopalki ne dotikata krmilnih kolesc ali tal.



- 10-mm ključ

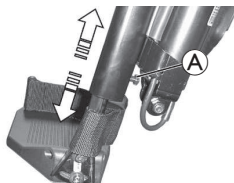


1. Odvijte vijak A.
2. Nastavite zeleno dolžino stopalke.
3. Znova privijte vijak.

3.24.4 Prilagajanje višine blazine za meča



- 4-mm ključ imbus

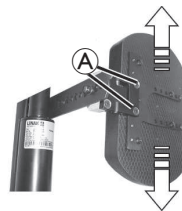


1. Odvijte vijaka A.
2. Blazino za meča nastavite v zeleni položaj.
3. Znova privijte vijaka.

3.24.5 Prilagajanje globine blazine za meča

Globino blazine za meča lahko nastavite prek nosilne plošče. Kombinacije lukenj v nosilni plošči omogočajo pet različnih nastavitvev globine.



- 10-mm ključ

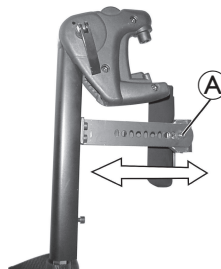

1. Odstranite matico A.
2. Blazino za meča pomaknite do želene globine. V okrogle luknje vstavite vijake za pritrditev blazine za meča, v podolgovate luknje pa zatiče brez navoja.
3. Privijte matico in jo zategnite.

3.24.6 Odklepanje blazine za meča in njen pomik nazaj

1.



Potisnite blazino za meča naravnost navzdol.

2.



Odklenite nožno oporo in jo obrnite navzven. Blazina za meča se samodejno pomakne nazaj.



3.




Dvignite nogo prek traku za pete in jo položite na tla.

3.24.7 Prilagajanje stopalke s prilagodljivim naklonom



- 5-mm ključ imbus

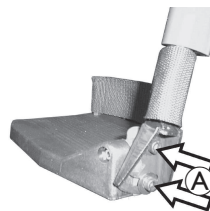

1. Odvijte oba vijaka (A) na stopalki.
2. Nastavite želeni kot.
3. Znova privijte vijaka.

3.24.8 Prilagajanje kota in globine prilagodljive stopalke



- 5-mm ključ imbus




1. Odvijte vijak na stopalki (A).
2. Stopalko nastavite na želeni kot ali globino.
3. Znova privijte vijak.

4 Uporaba

4.1 Obračanje/odstranjevanje naslona za roke z naklonom


Obračanje naslona za roke

Za stransko premeščanje se lahko naslon za roke z naklonom zavrti nazaj okoli vrtljivega zatiča v nosilcu naslona za roke.

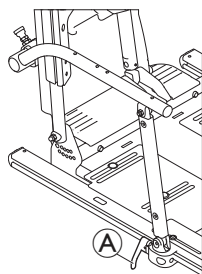

1. Odklenite ročico za zaklep (A) na sprednji strani naslona za roke.
2. Dvignite naslon za roke, tako da se zavrti nazaj okoli nosilca/zatiča naslona za roke.

Odstranjevanje naslona za roke

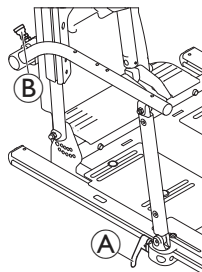


1. Odklenite ročico za zaklep (A) na sprednji strani naslona za roke in sprostite vrtljivo ročico.
2. Vzmetni zatič (B) na zadnjem vrtljivem vijaku naslona za roke povlecite navzven.
3. Odstranite sklop naslona za roke.

4.2 Obračanje previsnega naslona za roke


Za stransko premeščanje se lahko previsni naslon za roke zavrti nazaj okoli vrtljivega zatiča v nosilcu naslona za roke.

Previsni zložljivi naslon za roke, nameščen na drog naslona za hrbet

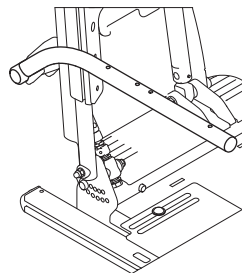

1. Dvignite naslon za roke, tako da se zavrti nazaj okoli nosilca/zatiča naslona za roke.

Previsni zložljivi naslon za roke Maxx, nameščen na vodilo Ultra Rail

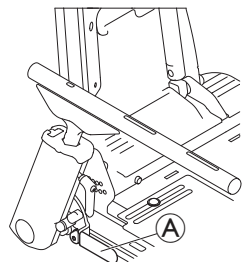


1. Povlecite sprostilno ročico (A) in dvignite naslon za roke, da se zavrti nazaj.



Ko spuščate naslon za roke, se prepričajte, da se slišno zaskoči.

4.3 Odstranjevanje/vstavljanje podpore za kolke s funkcijo hitre sprostitev

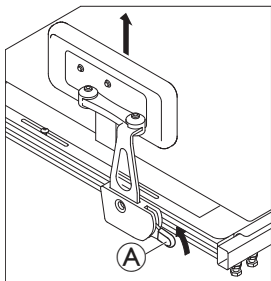

Odstranjevanje podpore za kolke

1. Povlecite ročico Ⓐ navzgor.
2. Podporo za kolke odstranite iz držala.

Vstavljanje podpore za kolke

1. Podporo za kolke vstavite v držalo.
2. Potisnite ročico Ⓐ navzdol.
Prepričajte se, da se podpora za kolke slišno zaskoči na svoje mesto.

4.4 Uporaba sredinske nožne opore na električni pogon LNX, s teleskopsko stopalno ploščo

Prilagajanje kota



OPOZORILO!

Mesto, na katerem se lahko uščipnete

Nevarnost preščipavanja ob nastavitvi kota nožne opore.

- Ob nastavitvi kota nožne opore se ne približajte zgornjemu delu nožne opore.

Znižanje stopalne plošče



OBVESTILO!

Če stopalno ploščo znižate do prednastavljene točke, lahko poškodujete tla.

- Stopalne plošče ne znižajte več, ko doseže tla.

Stopalno ploščo lahko znižate do prednastavljene točke. Glede na konfiguracijo invalidskega vozička se ta točka morda ne sklada točno z nastavljeno višino od sedišča do tal, temveč morda leži nekaj milimetrov nad tlemi ali pod njimi.

Zaklep vožnje



OBVESTILO!

Vožnja invalidskega vozička s spuščeno stopalno ploščo lahko poškoduje nožno oporo.


- Ko premaknete stopalno ploščo, se vklopi funkcija zaklepa vožnje.

1. Če želite izklopiti zaklep vožnje, stopalno ploščo pomaknite nazaj v najvišji položaj.

4.5 Obračanje krmilnika na stran

Če je na električnem invalidskem vozičku nameščeno premično držalo krmilnika, lahko krmilnik umaknete na stran, če se želite na primer približati mizi.

Nihajno držalo krmilnika

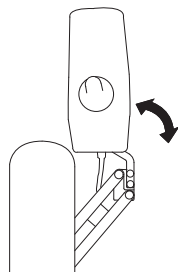

1. Potisnite krmilnik, da držalo krmilnika obrnete na stran.

Nihajno držalo krmilnika Maxx Resolve



POZOR!

Nevarnost telesne poškodbe ali nastanka škode

Vožnja električnega invalidskega vozička in/ali upravljanje električnih funkcij za zagotavljanje pravilnega položaja s krmilnikom v nihajnem položaju lahko povzroči trčenje ali nenamerno premikanje.

- Med upravljanjem električnega invalidskega vozička bodite vedno pozorni na okolico, da se izognete trčenju, poškodbam ali nenamernemu premikanju.
- Vedno se prepričajte, da je med blazino naslona za roke in krmilno palico dovolj prostora, ko je krmilnik v nihajnem položaju.



OBVESTILO!

Prekomerna sila na sprednji del krmilnika med upravljanjem nihajnega mehanizma lahko poškoduje notranji jermenski pogon.


- Nežno pritisnite na sredino krmilnika, ki je bližje točki vrtenja nihajnega mehanizma. Silo za upravljanje nihajnega mehanizma je mogoče nastaviti glede na potrebe uporabnika; glejte.



OBVESTILO!

Uporaba krmilne palice za upravljanje nihajnega mehanizma povzroči poškodbo krmilne palice.

- Za upravljanje nihajnega mehanizma ne uporabljajte krmilne palice.

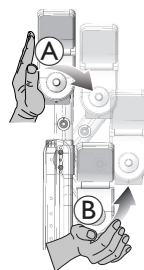

1. Za upravljanje nihajnega mehanizma pritisnite na sredino krmilnika (A).
2. Potisnite naprej in navznoter (B), dokler se krmilnik slišno ne zaskoči v začetni položaj.


Držalo krmilnika Quad Link



OPOZORILO!

Nevarno mesto, na katerem se lahko uščipnete

- Pri zaklepanju zložljivega krmilnika Quad Link v pravilen položaj se prepričajte, da med povezovalnimi prečkami nimate prstov. Pri zaklepanju krmilnika Quad Link v pravilen položaj si lahko med povezovalnimi prečkami priščipnete prste.

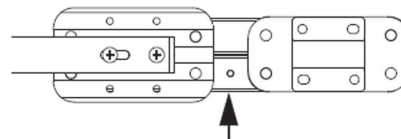

Obračanje krmilnika na stran

1.



Če želite krmilnik izvelči iz običajnega iztegnjenega položaja, potisnite notranjo površino krmilnika navzven, dokler se držalo Quad Link ne sprostí.




Quad Link deluje najbolje, ko notranjo površino krmilnika potisnete navzven, v bližini blazine naslona za roke.

2. Krmilnik potisnite navzven in nazaj, dokler se Quad Link ne premakne skozi celoten razpon v popolnoma zložen položaj.


Vrnitev krmilnika v iztegnjen položaj

1.

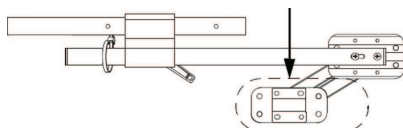


Če želite krmilnik vrniti v običajen iztegnjen položaj, potisnite notranjo površino krmilnika navzven, nato naprej in navznoter, dokler se Quad Link ne premakne skozi celoten razpon in se zaskoči v popolnoma iztegnjen položaj.

4.6 Premikanje sredinskega držala na glavnem nosilcu na stran

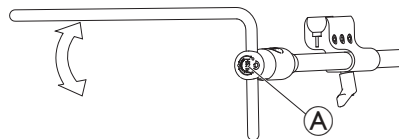

1. Pritisnite gumb **A** in glavni nosilec premaknite gor ali dol.

4.7 Premikanje nihajnega držala zaslona na stran

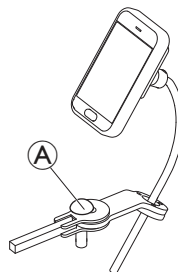


- i** Nihajno držalo zaslona se zaskoči le, če je potisnjeno v svoj privzeti položaj.
1. Pritisnite gumb **A** in držalo zaslona premaknite na stran.

4.8 Ponovno nameščanje blazine za naslon za hrbet

samo za naslone za hrbet Matrix Elite


Odstranjevanje blazine za naslon za hrbet

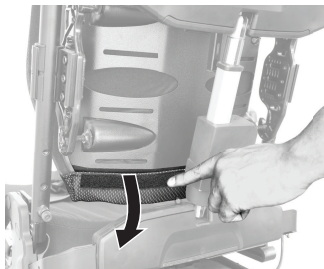

1. Zrahljajte sprijemalni trak na spodnjem delu naslona za hrbet.




2. Dvignite blazino navzgor.

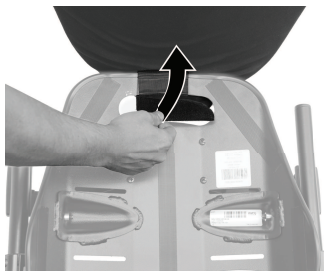

3. Zrahljajte sprijemalni trak na ročici naslona za hrbet.

Nameščanje blazine za naslon za hrbet

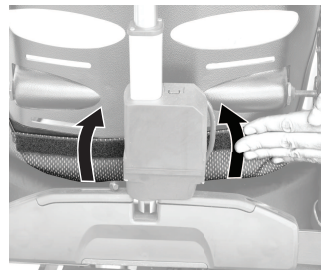

1. Namestite sprijemalni trak na spodnjem delu naslona za hrbet.



2. Zložite blazino navzgor.



3. Namestite sprijemalni trak na ročici naslona za hrbet.

5 Načrt vzdrževanja

Za največjo varnost in zanesljivost električnega sistema za zagotavljanje pravilnega položaja upoštevajte spodnji urnik/tabelo vzdrževanja. Poleg urnika vzdrževanja morate na dnevni ravni izvesti tudi naslednja vzdrževalna opravila in upoštevati naslednja varnostna opozorila.



OPOZORILO!

Če se delovanje/učinkovitost električnega sistema za zagotavljanje pravilnega položaja nenadoma ali postopoma poslabša (tj. povečan hrup, ropotanje, neustrezno delovanje pogonskega motorja/menjalnika itd.), o tem takoj poročajte svojemu prodajalcu.

- Priporočamo, da usposobljeni tehnik opravi celovit pregled invalidskega vozička, da se prepričate, da ni prišlo do neobičajne obrabe ali fizičnih poškodb, ki jih je treba servisirati in/ali popraviti.



Da bi vaš električni sistem za zagotavljanje pravilnega položaja zagotovo deloval ustrezno in varno, družba Invacare priporoča, da pri prodajalcu vsakih šest (6) mesecev usposobljeni tehnik opravi celovit pregled vašega sistema za zagotavljanje pravilnega položaja.



Obvezno preberite in upoštevajte vse informacije o vzdrževanju in varnostne informacije, ki zadevajo električno podvozje vašega invalidskega vozička. Glejte navodila za uporabo svojega invalidskega vozička (na voljo ločeno).

Dnevno vzdrževanje:

- Preverite, ali pravilno delujejo vsa stikala (potisni gumbi/stikala) za upravljanje vašega električnega sistema za zagotavljanje pravilnega položaja.
- Napolnite akumulatorja (za pomembne informacije o polnjenju in ustrezni oskrbi akumulatorjev glejte navodila za uporabo svojega invalidskega vozička).

Kontrolni seznam za mesečni pregled:

- Električni sistem/kabelski snopi:
 - Preverite, ali so kabli preščipnjeni oz. prekomerno zategnjeni (pri celotnem sedežnem sistemu).
 - Preverite, ali so pri kablilih prisotni znaki obrabe.
 - Preverite, ali so povezave varne.
- Oblazinjenje:
 - Preverite, ali je kateri oblazinjeni del obrabljen oziroma poškodovan.
 - Preverite, ali je katera prevleka, predvsem v bližini kovinskih delov, obrabljena oziroma poškodovana.
- Strojna oprema in sestavni deli:
 - Preglejte pritrditvene dele (od sedežnega sistema do podnožja).
- Omejlina stikala:
 - Preglejte nastavitve omejilnih stikal.
 - Prepričajte se, da funkcija zaklepa vožnje deluje pravilno.

6 Po uporabi

6.1 Menjava obrabljenih delov

Ta izdelek je primeren za ponovno uporabo. Če želite pripraviti izdelek za novega uporabnika, storite naslednje:

- Izvedite pregled v skladu z načrtom servisiranja. Glejte servisni priročnik, ki je na voljo pri družbi Invacare.
- Čiščenje in razkuževanje, glejte poglavje *Čiščenje in razkuževanje* v teh navodilih za uporabo za električni invalidski voziček.
- Prilagoditev za novega uporabnika, glejte poglavje Nastavitev 3 *Nastavitev, stran 12*.

Novemu uporabniku skupaj z izdelkom izročite tudi navodila za uporabo.

Če opazite poškodbo ali okvaro, izdelka ne uporabljajte.

6.2 Ravnanje z odpadno opremo



OPOZORILO!

Nevarnost za okolje

Naprava vsebuje akumulator.

Izdelek lahko vsebuje snovi, ki so okolju nevarne, če jih odložite na mestih (odlagališčih), ki za to po predpisih niso primerna.

- Akumulatorja NE odlagajte med običajne kuhinjske odpadke.
- Baterij NE mečite v ogenj.
- Akumulator MORATE odložiti na za to namenjeno mesto. Vračilo je določeno z zakonom in je brezplačno.
- Med odpadke odložite le izpraznjene akumulatorje.
- Preden litijski akumulator odložite, priključke prekrijte.
- Za več informacij o vrsti akumulatorja glejte oznako na akumulatorju ali poglavje , *stran 1*.

Bodite odgovorni do okolja in izdelek po koncu življenjske dobe odnesite na zbirno mesto za recikliranje.

Izdelek in njegove sestavne dele razstavite tako, da je različne materiale mogoče ločiti in ločeno reciklirati.

Odstranjevanje ter recikliranje rabljenih izdelkov in embalaže morata biti v skladu z zakoni in predpisi o ravnanju z odpadki v posamezni državi. Za več informacij se obrnite na lokalno podjetje za ravnanje z odpadki.

7 Odpravljanje težav

7.1 Odpravljanje težav z delovanjem



Če želite izvedeti več o odpravljanju težav v zvezi z električnim invalidskim vozičkom ter elektronskim sistemom, glejte razdelek »Odpravljanje težav« v navodilih za uporabo električnega invalidskega vozička in krmilnika (na voljo ločeno).

Znak	Verjetni vzrok	Rešitve
Napajanje invalidskega vozička je vklopljeno, vendar sistem ne omogoča vožnje	Sistem je nagnjen in/ali dvignjen zunaj obsega naklona za funkcijo zaklepa vožnje	Sedežni sistem nastavite nazaj v nevtralni (začetni) položaj.
	Pogonska motorja nista vklopljena	Vklopite pogonska motorja.
	Sredinska nožna opora na električni pogon LNX, z znižano teleskopsko stopalno ploščo	Stopalno ploščo pomaknite nazaj v najvišji položaj.
Sedežni sistem ne deluje	Akumulatorja sta skoraj prazna	- Preglejte/napolnite/zamenjajte akumulatorja. - Obrnite se na prodajalca.
	Slaba/okvarjena električna povezava	- Preglejte kabelske povezave/preglejte kabelske vezice (prekomerna/nezadostna zategnitev). - Obrnite se na prodajalca.
	Pregorela varovalka	- Preglejte/zamenjajte varovalko. - Obrnite se na prodajalca.
	Motnje/ovire, preščiipnjeni kabli	- Preverite vzrok za motnje ali ovire/preglejte, ali so kabli na nekaterih mestih preščiipnjeni. - Obrnite se na prodajalca.

Znak	Verjetni vzrok	Rešitve
Prekinjeno delovanje funkcij sedežnega sistema (vsakodnevno, ob nagibu, ob naklonu itd.)	Slaba/okvarjena električna povezava	Preglejte kabelske povezave/preglejte kabelske vezice (prekomerna/nezadostna zategnitev).
	Okvarjen kabelski snop za napajanje	- Preglejte/zamenjajte kabelski snop za napajanje. - Obrnite se na prodajalca.
	Okvarjeno omejitveno stikalo	- Preglejte/zamenjajte omejitveno stikalo. - Obrnite se na prodajalca.
	Skorajda izrabljen akumulator (nihanje napolnjenosti)	- Preglejte/zamenjajte akumulator. - Obrnite se na prodajalca.
Funkcija zaklepa vožnje ne deluje	Slaba/okvarjena električna povezava	- Preglejte povezave. - Obrnite se na prodajalca.
	Omejitveno stikalo/mehansko stikalo za zaklep vožnje ni nastavljeno pravilno	Obrnite se na prodajalca.
	Okvarjeno omejitveno stikalo za zaklep vožnje	Obrnite se na prodajalca.
Omejitveno stikalo ne deluje pravilno	Slaba/okvarjena električna povezava	- Preglejte povezave. - Obrnite se na prodajalca.
	Okvarjeno omejitveno stikalo	- Preglejte/zamenjajte omejitveno stikalo. - Obrnite se na prodajalca.
	Omejitveno stikalo ni nastavljeno pravilno	Obrnite se na prodajalca.

Znak	Verjetni vzrok	Rešitve
Sistem deluje le v eno smer	Omejitev je presežena (zaklep vožnje, zmanjšana hitrost vožnje, kot naslona za hrbet, dvigovanje blokade sedeža)	• Zagotovite skladnost z omejitvami.
	Okvarjeno omejilno stikalo	• Preglejte/zamenjajte omejilno stikalo. • Obrnite se na prodajalca.
	Omejilno stikalo ni nastavljeno pravilno	• Obrnite se na prodajalca.
	Nizka napetost	• Obrnite se na prodajalca.
	Akumulator ni napolnjen	• Napolnite akumulatorja.
Krmilnik ne deluje	Krmilnik ni priključen	• Preglejte kabelsko povezavo.
	Krmilnik ni vklopljen	• Napajanje krmilnika vklopite prek tipkovnice.
	Pregorela osnovna varovalka	• Preglejte/zamenjajte varovalko. • Obrnite se na prodajalca.
Delovanje pogona se ne prekine	Preščipnjen kabelski snop stikala	• Preglejte/prilagodite položaj kabelskega snopa, da preprečite preščipavanje. • Obrnite se na prodajalca.

8 Tehnični podatki

8.1 Tehnični podatki

Spodaj navedeni tehnični podatki veljajo za standardno konfiguracijo ali predstavljajo najvišje vrednosti, ki jih je mogoče doseči. Te se lahko spremenijo, če so nameščeni dodatki/možnosti. Natančne spremembe vrednosti so navedene v razdelkih o posameznih dodatkih/možnostih.

 Upoštevajte, da v nekaterih primerih lahko pri izmerjenih vrednostih pride do odstopanja ± 10 mm.

 Za dodatne tehnične podatke o električnem invalidskem vozičku glejte navodila za uporabo svojega invalidskega vozička.

Mere v skladu s standardom ISO 7176-5	Električni invalidski voziček	
	AVIVA RX	TDX SP2
Višina naslona za hrbet ¹	• 355 mm–505 mm (glede na različico naslona za hrbet)	
Končna višina naslona za hrbet ¹	• 455 mm–635 mm (sistemi samo z možnostjo nagiba)	• 505 mm–685 mm (sistemi z možnostjo naklona)
¹ Merjeno brez sedežne blazine.		
Višina palice naslona za hrbet (samo nastavitev s fiksnim kotom)	• 18°–24° (ravne palice naslona za hrbet)	• 20°–24° (ukrivljene palice naslona za hrbet)
Kot palice naslona za hrbet (samo nastavitev s fiksnim kotom)	• 75°–116° (ravne palice naslona za hrbet)	• 81°–121° (ukrivljene palice naslona za hrbet)
Debelina sedežne blazine	• 75/90/100 mm	
Širina sedeža	• 405 mm • 430 mm • 455 mm • 480 mm • 505 mm	• 530 mm • 555 mm • 580 mm (samo TDX SP2) • 610 mm (samo TDX SP2)

Mere v skladu s standardom ISO 7176-5	Električni invalidski voziček	
	AVIVA RX	TDX SP2
Globina sedeža	• 405 mm • 430 mm • 455 mm • 480 mm	• 505 mm • 530 mm • 555 mm • 580 mm
Kot naslona za hrbet	• 90° ... 170° • 82° ... 162° (namestitev z 8-stopinjskim naklonom naprej) • 60° ... 140° (namestitev s 30-stopinjskim naklonom naprej)	• 90° ... 168° • 82° ... 162° (namestitev z 8-stopinjskim naklonom naprej) • 60° ... 140° (namestitev s 30-stopinjskim naklonom naprej)
Višina naslona za roke z naklonom ² :	• 230 mm–330 mm/330 mm–405 mm (zložljivi naslon za roke z možnostjo naklona z dvotočkovno podporo) • 240 mm–330 mm/320 mm–405 mm (previsni zložljivi naslon za roke, nameščen na drog naslona za hrbet)	
2 Naslona za roke na voljo le pri sistemih z možnostjo naklona.		
Višina naslona za roke z nagibom ³	• 230 mm–320 mm (previsni zložljivi naslon za roke Maxx, nameščen na vodilo Ultra Rail)	
3 Naslona za roke na voljo le pri sistemih samo z možnostjo nagiba.		
Globina naslona za roke ⁴	• 230 mm–470 mm	• 250 mm–590 mm
4 Razdalja med referenčno ploskvijo naslona za hrbet in delom sestava naslona za roke, ki je v najbolj sprednjem položaju.		
Dolžina naslona za roke	• 255–355 mm	
Najv. vrednost Teža naslona za roke	• 1.7 kg	
Najv. vrednost Teža naslona za glavo	• 1,4 kg	

Mere v skladu s standardom ISO 7176-5	Električni invalidski voziček	
	AVIVA RX	TDX SP2
Električno nagibanje	• 0° ... 50° (standardni nosilec) • -5° ... 45° (s 5-stopinjskim fiksnim sprednjim nosilcem) • -10° ... 40° (z 10-stopinjskim fiksnim sprednjim nosilcem) • 5° ... 55° (s 5-stopinjskim fiksnim zadnjim nosilcem)	
Električno nagibanje z dvigalom sedeža	• 0° ... 45° (standardni nosilec) • -5° ... 40° (s 5-stopinjskim fiksnim sprednjim nosilcem) • -10° ... 35° (z 10-stopinjskim fiksnim sprednjim nosilcem) • 5° ... 50° (s 5-stopinjskim fiksnim zadnjim nosilcem)	
Kot sedeža, ročno prilagajanje	• 0° ... 8°	

Nožni opori in stopalki					
Vari F	Dolžina	• 290 mm–460 mm	Pivot Plus	Dolžina	• 365 mm–465 mm
	Kot	• +70° – 0°		Kot	• +80° – +20°
	Najv. vrednost Teža	• 1.6 kg		Najv. vrednost Teža	• 4.4 kg
Vari A	Dolžina	• 290 mm–460 mm	Pritrjeni na sredini (ročni)	Dolžina	• 310 mm–410 mm
	Kot	• +70° – 0°		Kot	• +90° – 0°
	Najv. vrednost Teža	• 2.7 kg		Najv. vrednost Teža	• 5,4 kg
ADM (ročni)	Dolžina	• 290 mm–460 mm	LNX na električni pogon, pritrjeni na sredini ⁵	Dolžina	• 340 mm–410 mm
	Kot	• +80° – 0°		Kot	• +97° – + 7°
	Najv. vrednost Teža	• 3.1 kg			• +90° – 0°
ADE (na električni pogon)	Dolžina	• 290 mm–460 mm	5 Nožne opore ni mogoče odstraniti, zato teža sestavnega dela ni izmerljiva.		• +83° – -7°
	Kot	• +80° – 0°			
	Najv. vrednost Teža	• 4.2 kg			

**EU Export:**

Invacare Poirier SAS

Route de St Roch

F-37230 Fondettes

Phone: (33) (0) 2 47 62 69 80

serviceclient_export@invacare.com

www.invacare.eu.com

UKRP Invacare UK Operations Limited
Unit 4, Pencoed Technology Park, Pencoed
Bridgend CF35 5AQ
UK

1682819-M

2026-02-12



Yes, you can.®