

rea[®]

Família Azalea[®]



Família Azalea: a gama completa para
ir ao encontro de várias necessidades

INVACARE[®]
Yes, you can.[®]

As cadeiras de rodas passivas *Invacare Rea* podem ser modificadas para ir ao encontro das várias necessidades dos utilizadores, e por isso asseguramos que cada cadeira é desenvolvida para oferecer o máximo de conforto possível.

Para utilizadores com necessidades específicas, a *Rea* desenvolveu uma série de modelos, cada um parte da família *Azalea*, mas com pequenas modificações, para dar o melhor ajuste ao utilizador.

Todas as cadeiras incluem o Sistema DSS (Dual Stability System) e são comprovadamente seguras e duradouras.

A *Azalea* oferece uma série de ajustes individuais para uma postura melhorada, por isso é essencial que o utilizador tenha o modelo que melhor se enquadra nas suas necessidades. Para além do conhecido ajuste em largura e profundidade do assento, também pode alterar o encosto fazendo uma combinação única de possibilidades e modificações independentes umas das outras.

Opções de escolha do encosto:

Matrx, placa rígida com almofada Flex3 ou encosto com regulação em tensão

Placa rígida/ Matrx
(Reg. em tensão)



Estatura pequena
Todos os ajustes no mínimo

Placa rígida/ Matrx
(Reg. em tensão)



Estatura alta
Aumentar a altura do encosto e da profundidade do assento

Placa rígida/ Matrx
(Reg. em tensão)



Estatura média
Ligeiro ajuste comparativamente com as regulações efetuadas na origem

Placa rígida/ Matrx
(Reg. em tensão)



Obeso
Aumentar a largura de assento e de encosto

Placa rígida/ Matrx
(Reg. em tensão)



Ombros largos
Parte superior do encosto mais larga do que a base

Placa rígida/ Matrx
(Reg. em tensão)



Anca larga
Parte inferior do encosto mais larga que a superior

Placa rígida/ Matrx
(Reg. em tensão)



Abdômen proeminente
Encosto revertido para libertar espaço em torno dos ombros

Regulável em tensão



Região glútea proeminente
Libertar espaço na base do encosto para acomodar a região glútea

Regulável em tensão



Cifose
1/3 médio do encosto mais solto e faixas mais tensas na base

Placa rígida/ Matrx
(Reg. em tensão)



Lordose acentuada
1/3 inferior médio do encosto mais tenso e restantes faixas acompanham o formato em S da coluna



◀ Opções de encosto

O encosto Flex 3 regulável em tensão tem ajustes em altura e largura. Os tubos de encosto podem ainda ser angulados para o exterior, e pode rodar o encosto dependendo da região onde necessitar de mais espaço como os ombros ou ancas.



A placa rígida do encosto Flex 3 é regulável em altura e largura para ir ao encontro das necessidades individuais de posicionamento.

Oferece conforto e várias possibilidades de ajuste

A cadeira de rodas **Rea Azalea** é a escolha ideal para utilizadores moderadamente ativos ou mais passivos. O confortável sistema de assento permite que o utilizador altere o posicionamento de forma a chegar ao máximo de conforto em todas as situações. Todas estas excelentes características de condução tornam a **Azalea** na escolha ideal.



◀ Rea Azalea

A cadeira de rodas de auto-propulsão com roda grande traseira.

Basculação & reclinção tornam a vida confortável

A **Rea Azalea** e a **Rea Azalea Assist** têm uma unidade de assento que faz bascula até 25° e um encosto reclinável até 30°. A basculação da unidade de assento e reclinção de encosto podem ser ativadas manualmente ou eletricamente através do cuidador ou do próprio utilizador ao usar a opção elétrica.



◀ Rea Azalea Assist


A versão de trânsito. A **Rea Azalea Assist** tem o mesmo chassis que a **Rea Azalea** mas com rodas traseiras mais pequenas.

Dados técnicos ▼

Para mais informação pré-venda sobre este produto, incluindo o manual de utilizador, por favor visite o site da Invacare Portugal.

Azalea / Assist	390-440/ 440-490/ 490-540 (390-490/ 440-540/ 490-590 mm)	430 - 500 mm	400/450 mm	Placa rígida do encosto: 560-790 mm Encosto regulável em tensão: 540-715 mm	240 - 360 mm	330 - 627 mm	-1° to 23° (+1° to 25°)	0°-30°
Azalea / Assist	Larg. assento + 220 mm (Larg. assento + 230 mm)	900-1250 mm	950 - 1035 mm	34 kg (Larg. assento 440 mm)	Max 135 kg	16,5 kg ¹	ISO 7176-19	7°

Cor do chassis ▼

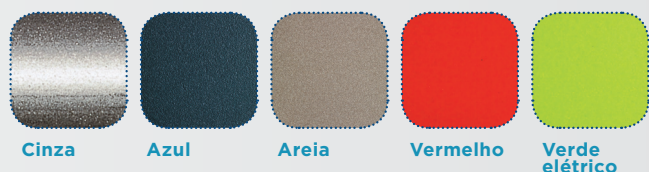

Estofa do encosto ▼



1. Peso de transporte aumenta 4,2 kg se escolher a opção de basculação elétrica e reclinção

Função de basculação no espaço assegura estabilidade ao utilizador

Desenvolvida para utilizadores que procuram uma unidade de assento personalizada em combinação com uma cadeira de rodas de alta qualidade. A **Rea Azalea Base** foi desenvolvida através do modelo standard **Rea Azalea** e beneficia das mesmas vantagens de resistência e do mecanismo único de transferência de peso. A característica chave da "Base" é a função de basculação no espaço - um mecanismo de transferência de peso que assegura estabilidade para o utilizador quando basculado.



◀ Rea Azalea Base

Ideal para utilizadores que precisam de uma cadeira estável, segura e com conforto personalizado. A base tem compatibilidade cruzada com os restantes modelos **Rea Azalea** (exceto o suporte de tronco).

Dados técnicos ▼

Para mais informação pré-venda sobre este produto, incluindo o manual de utilizador, por favor visite o site da Invacare Portugal.

Azalea Base	340/390/ 440/490 mm (+ 50/100 mm)	380 - 450 mm ¹ 430 - 500 mm	400/450 mm	600 ¹ / 700 mm	240 - 360 mm	330 - 627 mm	-1° to 23° (22 / 24") (+1° to 25°) (16")	0° - +30°

Azalea Base	Larg. assento + 220 mm (Larg. assento + 230 mm)	1300 ¹ / 1400 mm	950 - 1035 mm	20 kg	Max 135 kg	15 kg ³	ISO 7176-19 ²	7°

1. Para uma largura de assento de 340 mm
2. Crash test em configurações específicas
3. Peso de transporte aumenta 4.2 kg se escolher a opção de basculação elétrica e reclinção

Cor do chassis ▼



Rea **Azalea Minor** - Desenvolvida para adultos de baixa estatura e jovens adolescentes

A **Rea Azalea Minor** foi desenvolvida para utilizadores que requerem uma largura e profundidade de assento reduzidas. Desenvolvida a partir da **Rea Azalea**, a **Azalea Minor** conjuga todas as vantagens de uma cadeira de rodas com basculação, fiável e com um mecanismo único de transferência de peso. Disponível em 5 cores de chassis e com encosto fixo ou regulável em tensão.



◀ **Rea Azalea Minor**

Os punhos de empurrar são ajustáveis em ângulo e altura, aumentando o conforto do cuidador.

Rea **Azalea Tall** - Não há limites para o conforto dos utilizadores de alta estatura

A **Rea Azalea Tall** foi especialmente desenvolvida para ir ao encontro das necessidades dos utilizadores de alta estatura que requerem uma cadeira com basculação e maior suporte da unidade de assento. Desenvolvida a partir da **Rea Azalea**, a **Azalea Tall** conjuga todas as vantagens de uma cadeira de rodas com basculação, fiável e com um mecanismo único de transferência de peso.



















◀ **Rea Azalea Tall**

A **Rea Azalea Tall** está no topo da sua classe no que respeita ao conforto e estabilidade.


Dados técnicos ▼

Para mais informação pré-venda sobre este produto, incluindo o manual de utilizador, por favor visite o site da Invacare Portugal.

								
Azalea Tall	390-450/440-500/490-550 mm (390-490/440-540/490-590 mm)	480 - 550 mm	500 mm	Placa rígida do encosto: 560 - 790 mm Encosto regulável em tensão: 540 - 715 mm	240 - 360 mm	330 - 627 mm	-1° to 23° (+1° to 25°)	0° - 30°
Azalea Minor	340 - 440 mm	380 - 450 mm	400/450 mm	550 - 650 mm	240 - 360 mm	330 - 627 mm	+1° to 25°	0° - 30°

								
Azalea Tall	Larg. assento + 220 mm (L. a. + 230 mm)	1000 - 1300 mm	950 - 1085 mm	34 kg (Larg. assento 440 mm)	Max 135 kg	18,7 kg ¹	ISO 7176-19	7°
Azalea Minor	L. a. + 220 mm (L. a. + 230 mm)	900 - 1250 mm	900 - 970 mm	32 kg	Max 75 kg	14,5 kg ¹	ISO 7176-19	7°

Cor do chassis ▼

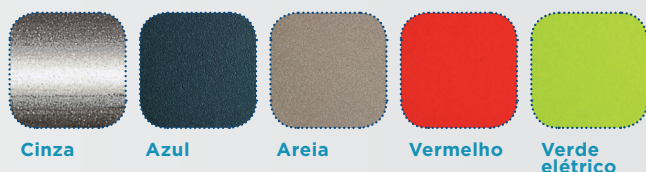

Estofa do encosto ▼



1. Peso de transporte aumenta 4,2 kg se escolher a opção de basculação elétrica e reclinção