

Invacare® Medley® Ergo

Medley Ergo, Medley Ergo Low

pt Cama

Manual de Utilização

Este manual DEVE ser facultado ao utilizador do produto.
ANTES de utilizar este produto, este manual DEVE ser lido e guardado para referência futura.



Yes, you can.®

Índice

1 Dados gerais	3
1.1 Introdução	3
1.2 Símbolos neste documento	3
1.3 Utilização prevista	3
1.3.1 Operador previsto	3
1.4 Vida útil	4
1.5 Conformidade	4
1.5.1 Normas específicas do produto	4
1.6 Informações da garantia	4
1.7 Limite de responsabilidade	4
2 Segurança	5
2.1 Informações gerais de segurança	5
2.2 Colchões	6
2.3 Informação de segurança sobre a interferência eletromagnética	7
2.4 Etiquetas e símbolos no produto	7
2.4.1 Etiqueta com identificação	7
2.4.2 Outras etiquetas	7
Etiqueta em guardas laterais de 3/4 de comprimento	8
3 Configuração	9
3.1 Informações gerais de segurança	9
3.2 Principais peças da cama	9
3.2.1 Outros itens	9
3.3 Montar a cama	9
3.3.1 Fixar etiquetas	10
3.4 Instalar o mecanismo da articulação do estrado	10
3.5 Caixa de controlo	10
3.6 Cablagem	11
3.7 Instalação das guardas laterais	12
3.7.1 Guarda lateral Scala 2	12
Montagem da guarda lateral	12
Desmontagem da guarda lateral	12
3.7.2 Instalar a guarda lateral Aria e Bella	12
Montagem do sistema de deslizamento	12
Fixação do sistema de deslizamento e instalação da guarda lateral	12
3.8 Instalar a extensão do estrado	13
3.9 Desmontagem da cama	14
4 Funcionamento da cama	16
4.1 Informações gerais de segurança	16
4.1.1 Alturas reduzidas	16
4.1.2 Apoios laterais do colchão	16
4.2 Comando	16
4.2.1 Função de bloqueio	16
4.3 Rodas e travões	17
4.3.1 Travão dos rodízios	17
4.4 Funcionamento das guardas laterais	17
4.4.1 Funcionamento da guarda lateral Scala 2	17
4.4.2 Guardas laterais Aria e Bella	18
Funcionamento das guardas laterais	18
4.5 Pendural	18
4.5.1 Colocar o pendural	18
4.5.2 Ajustar a altura dos manípulos	18
4.6 Ajustar a secção das pernas	18
4.7 Posições de emergência	19
4.7.1 Desengate de emergência de uma secção do estrado	19
4.7.2 Transporte e armazenamento	19
5 Opções e acessórios	20
5.1 Lista de opções disponíveis	20
5.2 Suportes para transporte	20
6 Manutenção	22
6.1 Informações gerais sobre manutenção	22
6.2 Inspeções diárias	22
6.2.1 Lista de verificação da inspeção diária	22
6.3 Informações gerais sobre a assistência	22
6.3.1 Lista de verificação de manutenção	22
Pontos de verificação	22
6.4 Inspeção após mudança de local - Preparação para um novo utilizador	23
6.5 Limpeza e desinfecção	23
6.5.1 Informações gerais de segurança	23
6.5.2 Intervalos de limpeza	23
6.5.3 Limpar à mão	23
6.5.4 Instruções de desinfecção	23
Em cuidados domiciliários	23
Em cuidados numa instituição	23
6.6 Lubrificação	24
7 Após a utilização	25
7.1 Eliminação	25
7.2 Recondicionamento	25
8 Resolução de problemas	25
8.1 Resolver problemas do sistema elétrico	25
9 Dados técnicos	26
9.1 Materiais	26
9.2 Dimensões da cama	26
9.3 Pesos	26
9.4 Dimensões do colchão	26
9.5 Características eléctricas	27
9.6 Condições ambientais	27
10 Compatibilidade eletromagnética	28
10.1 Informações gerais sobre compatibilidade eletromagnética (EMC)	28
10.2 Emissões eletromagnéticas	28
10.3 Imunidade eletromagnética	28
10.3.1 Especificações de teste para EMC	29

© 2024 Invacare Corporation

Todos os direitos reservados. A republicação, duplicação ou modificação total ou parcial é proibida sem a autorização prévia por escrito da Invacare. As marcas comerciais são identificadas pelos símbolos ™ e ®. Todas as marcas comerciais são propriedade da ou estão licenciadas à Invacare Corporation ou às suas subsidiárias, salvo indicação em contrário.

A Invacare reserva-se o direito de alterar as especificações do produto sem aviso prévio.

Making Life's Experiences Possible é uma marca comercial registada nos E.U.A.

1 Dados gerais

1.1 Introdução

Este manual de utilização contém informações importantes sobre a manipulação do produto. Para garantir a segurança durante a utilização do produto, leia atentamente o manual de utilização e siga as instruções de segurança.

Utilize este produto apenas se tiver lido e compreendido este manual. Procure aconselhamento adicional junto de um profissional de saúde que esteja familiarizado com a sua condição médica e esclareça quaisquer questões relativas à utilização correta e ao ajuste necessário com o profissional de saúde.

Tenha em atenção que este documento pode conter secções não aplicáveis ao seu produto, uma vez que se refere a todos os modelos disponíveis (à data da impressão). Salvo menção em contrário, cada secção deste documento refere-se a todos os modelos do produto.

As configurações e os modelos disponíveis no seu país podem ser encontrados em documentos de venda específicos do país.

A Invacare reserva-se o direito de alterar as especificações do produto sem aviso prévio.

Antes de ler este documento, certifique-se de que tem a versão mais recente. A versão mais recente está disponível no site da Invacare, em formato PDF.

Se o tamanho do tipo de letra no documento impresso for difícil de ler, pode transferir uma versão em PDF do manual a partir do site. A imagem do PDF pode ser ajustada no ecrã para um tamanho de tipo de letra que lhe seja mais cómodo.

Para obter mais informações sobre o produto, por exemplo, avisos de segurança de produtos e retiradas de produtos do mercado, contacte o seu distribuidor da Invacare. Consulte os endereços no final deste documento.

Em caso de incidente grave com o produto, deve informar o fabricante e as autoridades competentes do seu país.

1.2 Símbolos neste documento

Este documento inclui símbolos e palavras de sinalização que se aplicam a riscos ou práticas perigosas que podem resultar em lesões pessoais ou danos materiais. Consulte as informações abaixo para obter as definições das palavras de sinalização.



ATENÇÃO!

Indica uma situação perigosa que, se não for evitada, poderá resultar em morte ou em lesões graves.



CUIDADO!

Indica uma situação perigosa que, se não for evitada, poderá resultar em lesões menores ou ligeiras.



AVISO!

Indica uma situação perigosa que, se não for evitada, poderá resultar em danos à propriedade.



Sugestões e recomendações

Fornece sugestões, recomendações e informações úteis para uma utilização eficiente e sem problemas.

Outros símbolos

(Não se aplica a todos os manuais)



Trimán

Indica regras de reciclagem e separação (apenas relevante em França).



UKRP

Indica que um produto não foi fabricado no Reino Unido.

1.3 Utilização prevista

A cama médica funciona eletricamente, é ajustável em altura e inclui uma superfície de suporte conversível que se destina a ser utilizada em conjunto com um colchão. As camas médicas foram concebidas para suportar o paciente e serem utilizadas para mitigação, alívio e recuperação de certas condições médicas. A cama médica também suporta e facilita o ambiente de trabalho dos prestadores de cuidados.

A cama médica destina-se a ser utilizada em:

- *Ambiente de aplicação 3:* cuidados de longo prazo numa área clínica em que se requeira supervisão médica e se faculte monitorização, caso seja necessária. Pode ser fornecido equipamento elétrico médico utilizado em procedimentos clínicos para ajudar a manter ou a melhorar o estado de saúde do paciente.
- *Ambiente de aplicação 4:* cuidados prestados no domicílio, em que o equipamento elétrico médico é utilizado para aliviar ou compensar uma lesão, incapacidade ou doença.

Utilizadores previstos

Uma pessoa com uma condição médica que exija acamamento para o tratamento.

Indicações

A cama destina-se a utilizadores adultos com uma altura igual ou superior a 146 cm, um peso igual ou superior a 40 kg e um índice de massa corporal (IMC) igual ou superior a 17.

A cama destina-se apenas a utilização em espaços interiores.

O peso máximo do utilizador é de 145 kg e a carga funcional de segurança máxima é de 180 kg.

Contraindicações

A cama não se destina ao transporte de utilizadores. Pode ser deslocada num quarto com um utilizador na mesma. Os rodízios são bloqueáveis.

A cama não se destina a pessoas com incapacidade psicossocial.



ATENÇÃO!

Qualquer outra utilização ou um uso indevido pode levar a situações perigosas.

A Invacare não assume qualquer responsabilidade por qualquer utilização, alteração ou montagem do produto, para além do que está estabelecido no presente manual de utilização.

1.3.1 Operador previsto

O operador deste produto deve ser um profissional de cuidados de saúde ou um indivíduo que recebeu a formação adequada.

O comando também pode ser operado pelo ocupante da cama.

1.4 Vida útil

A vida útil prevista deste produto é de cinco anos, quando o mesmo é utilizado diariamente e em conformidade com as instruções de segurança, intervalos de manutenção e utilização correcta indicados neste manual. A vida útil efectiva pode variar de acordo com a frequência e intensidade de utilização.

1.5 Conformidade

A qualidade é fundamental para o funcionamento da empresa, que trabalha em conformidade com a norma ISO 13485.

Este produto apresenta a marcação CE, em conformidade com o Regulamento relativo aos Dispositivos Médicos de Classe I 2017/745.

Este produto apresenta a marcação UKCA, em conformidade com a Parte II UK MDR 2002 (tal como emendado) de Classe I

Temos empreendido um esforço contínuo para reduzir ao mínimo o impacto local e global da empresa no ambiente.

Apenas utilizamos materiais e componentes que cumprem a diretiva REACH.

Cumprimos as legislações vigentes em matéria ambiental, nomeadamente, as diretivas REEE e RoHS.

1.5.1 Normas específicas do produto

O produto foi testado e está em conformidade com a norma EN 60601-2-52 (requisitos específicos de segurança básica e desempenho essencial das camas médicas) e todas as normas relacionadas.

Para obter informações adicionais sobre as normas e os regulamentos locais, contacte o representante local da Invacare. Consulte os endereços no final deste documento.

1.6 Informações da garantia

Facultamos uma garantia de fabrico para o produto, em conformidade com os nossos Termos e Condições Gerais de Compra nos respetivos países.

As reclamações de garantia só podem ser realizadas através do fornecedor ao qual o produto foi adquirido.

1.7 Limite de responsabilidade

A Invacare não aceita a responsabilidade por danos decorrentes de:

- Incumprimento das instruções presentes no manual de utilização
- Utilização incorreta
- Desgaste natural devido ao uso
- Montagem ou preparação incorreta pelo comprador ou por terceiros
- Modificações técnicas
- Modificações não autorizadas e/ou utilização de peças sobressalentes desadequadas.

2 Segurança

2.1 Informações gerais de segurança

Esta secção do manual contém informações de segurança gerais sobre o produto. Para obter informações de segurança específicas, consulte a secção adequada do manual e os procedimentos incluídos nessa secção.



ATENÇÃO!

Risco de lesão ou danos

- Não utilize este produto ou qualquer equipamento opcional disponível sem primeiro ler e compreender estas instruções e todo o material de instrução adicional, assim como os manuais de utilização ou os folhetos de instruções fornecidos com este produto ou com equipamento opcional. Se não compreender as advertências, os avisos ou as instruções, contacte um profissional de cuidados de saúde, um técnico qualificado ou um fornecedor. Invacare antes de tentar utilizar este produto.
- Não faça quaisquer modificações nem alterações não autorizadas ao produto.



ATENÇÃO!

Risco de apesamento/asfixia

Existe o risco de apesamento/asfixia entre o estrado, a guarda lateral e a extremidade da cama ou entre as peças móveis e objetos colocados perto da cama.

- A cama não pode ser utilizada por pessoas com idade inferior a 12 anos, nem por pessoas com estatura equivalente ou inferior à média dos 12 anos de idade.
- A cama, em combinação com as guardas laterais, não pode ser utilizada por pacientes que tenham uma altura inferior a 146 cm, um peso inferior a 40 kg ou um índice de massa corporal (IMC) inferior a 17.
- Devido à compressão do colchão, pode ocorrer um risco acrescido ao longo do tempo. Monitorize periodicamente os espaços entre a cama, o colchão e/ou a guarda lateral. Substitua o colchão se os espaços puderem resultar em apesamento.



ATENÇÃO!

Risco de escorregar pelas aberturas

A cama cumpre todos os requisitos em termos de distâncias máximas. Porém, é possível que pessoas com estaturas menores, escorreguem pelas aberturas entre as guardas laterais ou entre a guarda lateral e o estrado.

- Tenha especial cuidado se a cama for utilizada para o tratamento de pessoas com baixa estatura.



ATENÇÃO!

Risco de lesão ou danos

O manuseamento desadequado dos cabos, ligações incorretas e a utilização de equipamento não autorizado podem causar choque elétrico e falha do produto.

- Não dobre, corte nem danifique de outro modo os cabos do produto.
- Certifique-se de que nenhum cabo fica preso ou é danificado durante a utilização do produto.
- Desligue a ficha da tomada antes de mover a cama.
- Certifique-se de que a cablagem é a correta e as ligações estão em boas condições.
- Não utilize equipamento não autorizado.



ATENÇÃO!

Risco de tropeção, emaranhamento ou estrangulamento

A orientação incorreta dos cabos pode causar perigo de tropeção, emaranhamento ou estrangulamento.

- Assegure-se de que todos os cabos estão orientados e presos corretamente.
- Assegure-se de que não existem laços de cabo excedente afastados do produto.



ATENÇÃO!

Risco de lesão ou danos

As fontes de ignição podem causar queimaduras ou incêndio.

- Deve existir um espaço de segurança entre a cama e possíveis fontes de ignição (aquecedor, lareira, etc.)
- O paciente e os assistentes não podem fumar enquanto utilizam ou operam a cama.



ATENÇÃO!

Risco de lesão ou danos

Para evitar lesões ou danos durante a utilização do produto:

- É necessária estreita supervisão quando o produto é utilizado perto de crianças ou animais de estimação.
- Não deixe as crianças brincarem com o produto.



ATENÇÃO!

Risco de lesão ou danos

A aplicação e/ou distribuição incorretas do peso podem resultar em lesões ou danos.

- Evite cargas nas extremidades.
- As peças móveis só devem ser acionadas depois de o utilizador estar deitado corretamente e em segurança.
- Não exceda a carga funcional de segurança, pois a cama pode ficar danificada ou tombar.

**CUIDADO!**

- Para uma pessoa entrar ou sair da cama, baixe sempre a cama até a altura adequada. Para entrar ou sair da cama, a secção do encosto do estrado pode ser usada para auxiliar o posicionamento das costas de uma pessoa numa posição mais sentada. A secção do encosto do estrado não se destina a apoiar e/ou elevar todo o corpo de uma pessoa. Certifique-se de que o paciente está deitado com as costas no centro da secção do encosto. Enquanto a secção do encosto estiver a ser levantada, o peso máximo permitido para a secção do encosto é 45% da carga funcional de segurança máxima.
- Desça sempre a cama até à posição mais baixa, caso seja necessário deixar a pessoa na cama sem vigilância.
- Certifique-se de que não há nada por baixo, por cima ou por perto da cama, que possa obstruir o ajuste de altura, tal como mobiliário, dispositivos de elevação ou janelas.

**CUIDADO!**

Acessórios não originais ou incorretos e/ou peças opcionais podem afetar o funcionamento e a segurança do produto.

- Utilize apenas acessórios e/ou peças opcionais originais para o produto em utilização.
- Devido a diferenças regionais, consulte o site ou o catálogo local da Invacare para obter informações sobre os acessórios e/ou peças opcionais disponíveis ou contacte o seu representante local da Invacare. Consulte os endereços no final deste documento.

**CUIDADO!****Risco de lesão ou danos**

O produto pode ficar quente quando está exposto à luz do sol ou a outras fontes de calor.

- Não exponha o produto à luz solar direta durante períodos prolongados.
- Mantenha o produto longe de fontes de calor.

**CUIDADO!**

Existe o risco de entalar os dedos nas peças móveis da cama.

- Preste atenção aos seus dedos.

**AVISO!**

A cama não tem isolador (switch principal). Se for necessário desligar a alimentação da cama, é necessário desligá-la da tomada.

- Posicione sempre a cama de modo a que a tomada seja facilmente acessível para desligar a cama.

**AVISO!**

A acumulação de algodão, pó e outro tipo de sujidade pode danificar o produto.

- Mantenha o produto limpo.

2.2 Colchões

**AVISO!**

- Deve ser sempre realizada uma avaliação de riscos por um profissional qualificado antes da utilização de um colchão com uma cama Invacare, para avaliar a respetiva compatibilidade e segurança da utilização com a cama. Deve ser prestada especial atenção antes da utilização de um colchão Dynamic.
- Em caso de dúvida acerca da utilização da sua cama Invacare com um colchão, contacte o seu fornecedor da Invacare para obter orientações.


**ATENÇÃO!****Aspetos de segurança referentes à combinação das guardas laterais e dos colchões:**

Para obter o mais alto nível de segurança possível, ao utilizar as guardas laterais na cama, devem ser respeitadas as medidas mínimas e máximas dos colchões.

- Para conhecer as medidas corretas do colchão, consulte a tabela do colchão no capítulo 9 *Dados técnicos, página 26*.

**ATENÇÃO!****Risco de apresamento e/ou asfixia**

- O utilizador pode ficar preso e/ou asfixiar, se o espaço horizontal entre a parte lateral do colchão e o interior da guarda lateral for demasiado grande. Siga a largura mínima (e comprimento mínimo) dos colchões em combinação com uma guarda lateral, conforme indicado na tabela do colchão, no capítulo 9 *Dados técnicos, página 26*.
- Tenha em atenção que a utilização de colchões muito espessos ou flexíveis (baixa densidade), ou uma combinação de ambos, aumenta o risco.

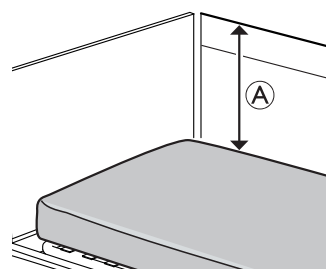**ATENÇÃO!****Risco de queda**

O utilizador pode cair pela extremidade e ficar gravemente ferido, se a distância vertical (A) entre a parte superior do colchão e a extremidade da guarda lateral/cama for demasiado curta. Veja a imagem acima.

- Mantenha sempre uma distância mínima (A) de 22 cm.
- Siga a altura máxima do colchão em combinação com a guarda lateral, conforme indicado na tabela do colchão, no capítulo .

2.3 Informação de segurança sobre a interferência eletromagnética



ATENÇÃO!

Risco de avaria devido a interferência eletromagnética

Podem ocorrer interferências eletromagnéticas entre este produto e outros equipamentos elétricos que podem afetar as funções de regulação elétrica deste produto. Para evitar, reduzir ou eliminar as interferências eletromagnéticas:

- Utilize apenas cabos, acessórios e/ou peças opcionais e sobressalentes originais para não aumentar as emissões eletromagnéticas nem reduzir a imunidade eletromagnética deste produto.
- Não utilize equipamentos de comunicações de radiofrequência (RF) portáteis a uma distância inferior a 30 cm de qualquer parte deste produto (incluindo cabos).
- Não utilize este produto perto de equipamento cirúrgico ativo de alta frequência, nem de uma sala de imagiologia por ressonância magnética com blindagem de RF, onde a intensidade das perturbações eletromagnéticas é alta.
- Se ocorrerem perturbações, aumente a distância entre este produto e o outro equipamento ou desligue o equipamento.
- Consulte as informações detalhadas e siga a orientação no capítulo 10 Compatibilidade eletromagnética (EMC), pág. 27.



ATENÇÃO!

Risco de avaria devido a interferência eletromagnética

Não utilize este cama ao lado de ou empilhada com outro equipamento elétrico, além do especificado de seguida, pois pode resultar em mau funcionamento. Se tiver de o fazer, a cama e o outro equipamento têm de ser observados de perto para verificar se estão a funcionar normalmente.

Esta cama pode ser utilizada em conjunto com acessórios e/ou peças opcionais aprovados pela Invacare e com equipamento elétrico para medicina ligado ao coração (intracardiaco) ou aos vasos sanguíneos (intravascular), desde que se respeitem os seguintes pontos:

- O equipamento elétrico para medicina não deve ser fixado aos acessórios e/ou peças opcionais metálicos da cama, tais como guardas laterais, pendural, suporte de soro, extremidades da cama, etc.
- O cabo de alimentação do equipamento elétrico para medicina deve permanecer afastado dos acessórios e/ou peças opcionais, ou de quaisquer outras peças móveis da cama.

2.4 Etiquetas e símbolos no produto

2.4.1 Etiqueta com identificação

A etiqueta com identificação encontra-se fixada ao chassis da cama e contém as principais informações relativas ao produto, incluindo dados técnicos.

	Número de série
	Número de referência
	Identificador Único do Dispositivo
	Fabricante
	Data de fabrico
	Dispositivo médico
	Máx. peso do utilizador
	Máx. carga funcional de segurança
	Equipamento de CLASSE II
	Peça aplicada de tipo B
	Em conformidade com a diretiva REEE
	Conformidade Europeia
	Avaliação da conformidade no Reino Unido

Abreviaturas dos dados técnicos:

- I_{in} = Corrente de entrada
- U_{in} = Tensão de entrada
- Int. = Intermitência
- AC = Corrente alternada
- Max = máximo
- min = minutos

Para obter mais informações sobre dados técnicos, consulte 9 *Dados técnicos*, página 26.

2.4.2 Outras etiquetas



Leia o manual de utilização antes de utilizar este produto e siga todas as instruções de segurança e utilização.

	<p>Definição de peso mín., altura mín. e índice de massa corporal mín. de um utilizador adulto.</p>
	<p>Consulte a secção 1.3 <i>Utilização prevista</i>, página 3</p>
	<p>Consulte a documentação do utilizador para obter as medidas corretas do colchão.</p>
	<p>Consulte a secção 9 <i>Dados técnicos</i>, página 26</p>

Etiqueta em guardas laterais de 3/4 de comprimento

	<p>Indica o espaço máximo entre a guarda lateral e a cabeceira da cama.</p>
	<p>Consulte as instruções de montagem neste manual ou as instruções fornecidas com a guarda lateral.</p>

	<p>Peso total do produto com a carga útil máxima aplicada</p>
	<p>Limite de temperatura</p>
	<p>Limite de humidade</p>
	<p>Limite de pressão atmosférica</p>
	<p>Condições de transporte e armazenamento</p>
	<p>Condições de funcionamento</p>

	<p>Indica áreas com risco acrescido de esmagamento dos pés nas zonas mais baixas das extremidades da cama perto dos rodízios.</p>
	<p>Consulte a secção 4.1.1 <i>Alturas reduzidas</i>, página 16.</p>
	<p>(Apenas presente nas versões baixas deste produto)</p>

	<p>Assinala a localização da ligação para fins de equalização potencial.</p>
	<p>(Não presente em todas as versões deste produto)</p>

3 Configuração

3.1 Informações gerais de segurança



ATENÇÃO!

Risco de lesão ou danos

As peças danificadas podem comprometer a segurança do produto.

- Verifique todas as peças antes da utilização para conferir se ocorreram danos no transporte.
- Em caso de danos, não utilize o produto e contacte o seu fornecedor Invacare para receber instruções.



ATENÇÃO!

Risco de lesões ou danos materiais

A montagem da cama e a instalação dos acessórios e/ou peças opcionais só podem ser realizadas por um técnico qualificado ou por uma pessoa que tenha recebido formação adequada.


- Siga as instruções rigorosamente. Se tiver alguma questão relacionada com a montagem, contacte o seu fornecedor Invacare.
- O equipamento elétrico da cama não deve ser desmontado nem combinado com outro equipamento elétrico.
- Após cada montagem, verifique se os encaixes estão devidamente apertados e se todas as peças funcionam corretamente.



AVISO!

- De modo a evitar a condensação, a cama não deve ser utilizada até atingir a temperatura de funcionamento. Consulte a secção 9 *Dados técnicos*, página 26.

3.2 Principais peças da cama

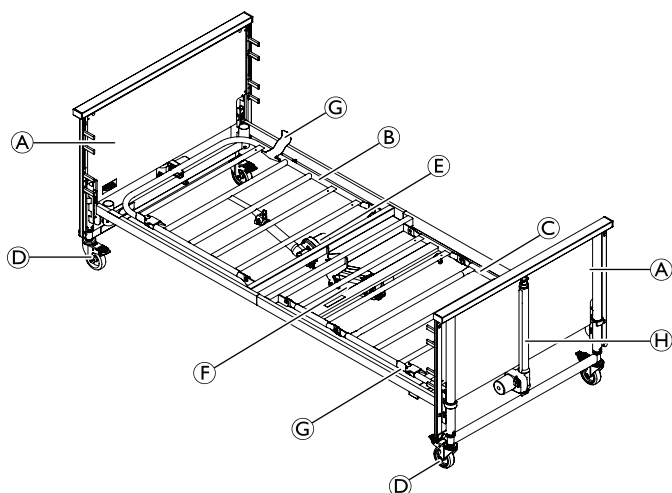

- Ⓐ Extremidades da cama, 2 unid.
- Ⓑ Estrado, secção do encosto
- Ⓒ Estrado, secção das coxas/pernas
- Ⓓ Rodízio, 4 unid.
- Ⓔ Motor, estrado, secção do encosto
- Ⓕ Motor e caixa de controlo, secção das coxas/pernas do estrado

- Ⓖ Retentores do colchão, 4 unid.
- Ⓗ Motor de subida/descida (ajuste da altura) Comando (não mostrado na imagem)



Guardas laterais não fornecidas na configuração principal. Para obter mais informações sobre as guardas laterais e outras opções, contacte o seu representante da Invacare.


3.2.1 Outros itens

Os seguintes itens estão também incluídos na entrega:


Peça	Quantidade
Manual de utilização	1
Deslizadores para guardas laterais	4
Etiqueta sobre apresetamento	4

3.3 Montar a cama

1. Desaperte os parafusos de orelhas dos dois lados.

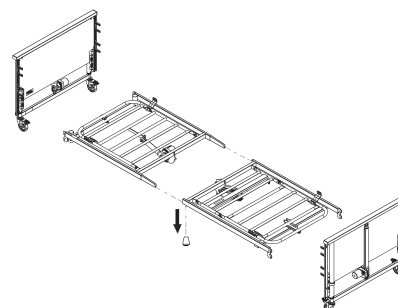


2. Empurre os encaixes na metade superior do estrado para dentro dos tubos laterais na metade inferior do estrado.

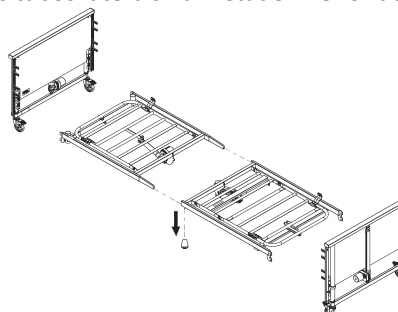

3. Aperte com dois parafusos de orelhas.
4. Certifique-se de que os quatro retentores do colchão estão a apontar para cima.

- Rode os anéis de retenção na extremidade da cama até à posição de abertos.

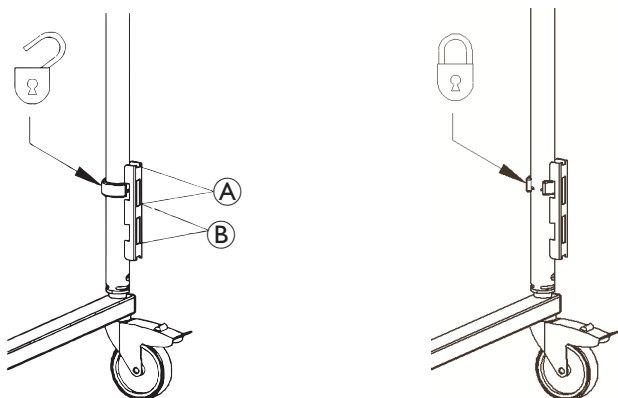

- Prenda os suportes do estrado na posição alta (A) ou na posição baixa (B) à extremidade da cama e encaixe-os firmemente na sua posição. (É normal existir um pequeno espaço entre a ranhura superior e o suporte)
- Rode os anéis de bloqueio para a posição de bloqueio.


**CUIDADO!**

Os anéis de bloqueio garantem que o estrado não será acidentalmente levantado das extremidades da cama.

- Certifique-se de que todos os anéis de bloqueio estão bloqueados e na ranhura superior, conforme ilustrado na imagem.
- Certifique-se de que todos os suportes são colocados na mesma posição (alta ou baixa).

3.3.1 Fixar etiquetas

(Apenas na versão baixa)

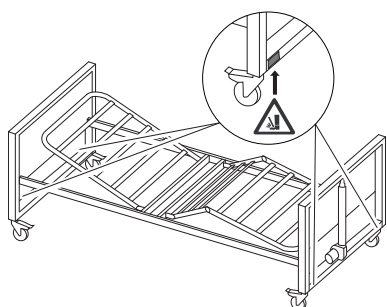


- Coloque as quatro etiquetas de advertência contra esmagamento de pés (entregues separadamente) nas zonas inferiores das extremidades da cama perto dos rodízios.


3.4 Instalar o mecanismo da articulação do estrado

(opcional)


- Pressione a parte inferior do mecanismo da articulação do estrado na extremidade dos pés da cama.

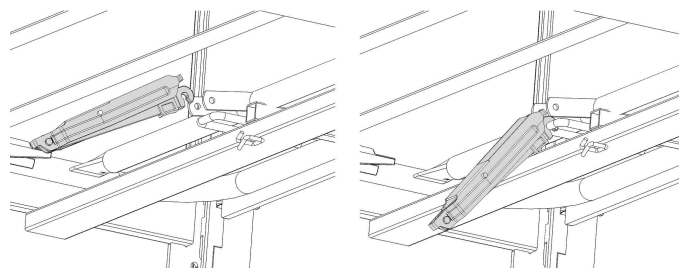

- Aperte a parte superior do mecanismo da articulação do estrado.

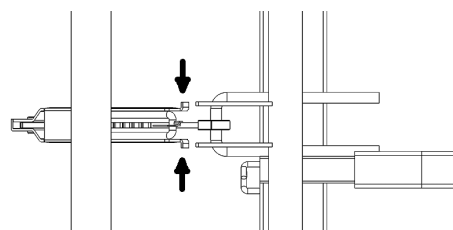

- Rode o mecanismo da articulação do estrado entre linguetas e desengate.

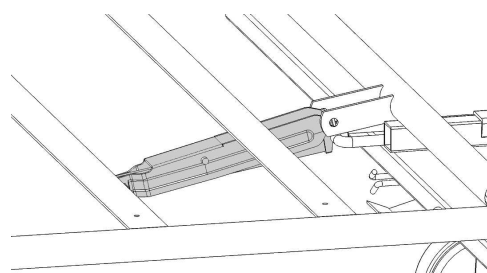


- Faça deslizar a tampa de plástico e bloqueie a parte inferior do rastofix.

3.5 Caixa de controlo**AVISO!**


- Os cabos têm de ser montados de modo a manter alguma distância do chão e não bloquearem os rodízios.

A caixa de controlo está presa ao motor da secção das coxas.

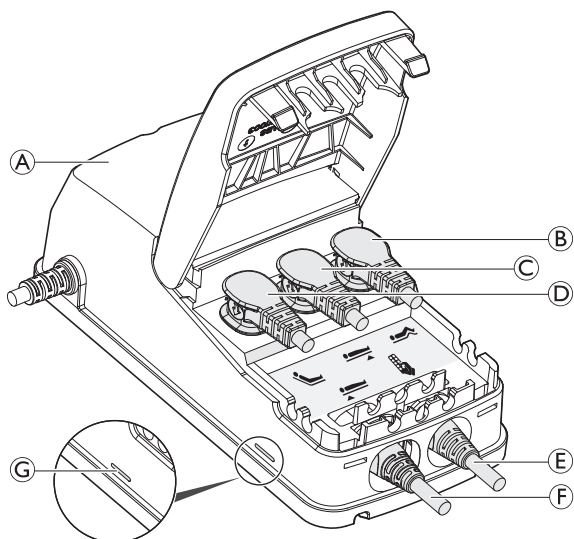

A caixa de controlo **A** é fornecida com uma etiqueta com símbolos que indicam onde ligar as fichas dos motores:

- Motor da secção das coxas **B**.
- Motor da extremidade da cama, lado dos pés **C**.
- Motor do encosto **D**
- Comando **E**
- Motor da extremidade da cama, cabeceira **F**.

 A caixa de controlo está equipada com um LED verde **G**, que indica que está ligada à alimentação principal. Quando está ligada à alimentação principal, o LED verde **G** acende.


3.6 Cablagem

- !** **AVISO!**
— Os cabos devem ser montados de modo a manter alguma distância do chão e não bloquearem os rodízios.


Para impedir que os cabos se danifiquem ao acionar os motores, siga as instruções abaixo.

1. Desprenda todos os cliques de bloqueio pré-instalados.
2. Verifique as etiquetas nos cabos do motor de subida/descida (os cabos espiralados) e ligue os cabos ao motor da extremidade da cama correspondente (cabeceira ou pés).
3. Volte a fixar e feche os cliques de bloqueio dos motores e certifique-se de que os cabos estão fixos.


4. Levante o encosto manualmente e ligue o cabo solto do atuador ao respetivo motor.

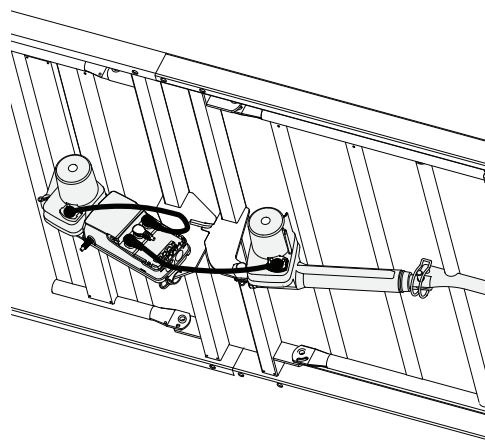


5. Volte a fixar e feche os cliques de bloqueio do motor e certifique-se de que o cabo está fixo.
6. Faça passar o cabo de alimentação através do pino do tubo do motor e do gancho do chassis na parte lateral da cama mais próxima da tomada de alimentação.

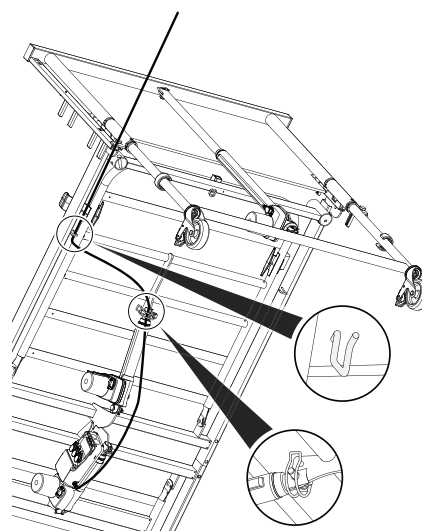

7. Ligue o cabo de alimentação à tomada de alimentação.
8. Eleve a cama até à posição mais alta.
9. Faça passar os cabos do motor de subida/descida através dos pinos do tubo do motor.

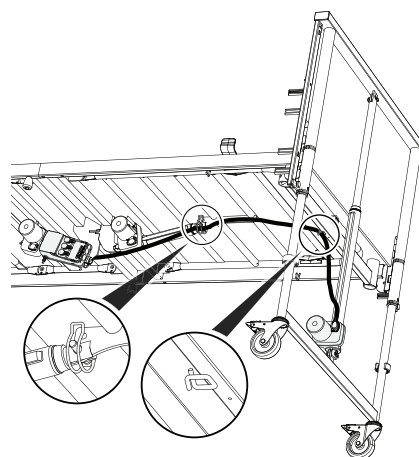

10. Certifique-se de que os pinos do tubo estão devidamente bloqueados.

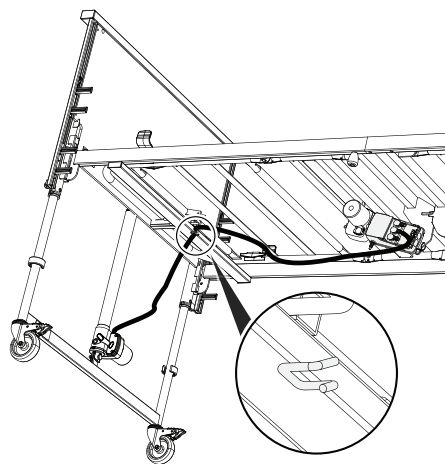

11. Coloque a extremidade da parte espiralada do cabo do motor de subida/descida no gancho da extremidade da cama.
12. Antes de pôr a cama em funcionamento, certifique-se de que todas as peças funcionam bem e de que nenhuns cabos do motor ficam pousados no chão nem são comprimidos enquanto move as secções da cama.

3.7 Instalação das guardas laterais



ATENÇÃO!

Risco de danos pessoais

Existe um risco de apresamento ou esmagamento durante a montagem ou desmontagem da guarda lateral.

- Preste atenção aos seus dedos.
- Siga as instruções rigorosamente.
- Após cada montagem, verifique se os encaixes estão devidamente apertados e se a guarda lateral funciona corretamente.

Guardas laterais amovíveis com comprimento de 3/4



ATENÇÃO!

Risco de prisão e/ou sufoco


Existe o risco de apresamento ou asfixia entre o estrado, as guardas laterais e as extremidades da cama.

- Ao utilizar as guardas laterais amovíveis, assegure que a distância entre a cabeceira e a guarda é inferior a 6 cm do lado do dorso. No lado oposto, esta distância deverá ser superior a 32 cm.

3.7.1 Guarda lateral Scala 2

Montagem da guarda lateral

1.

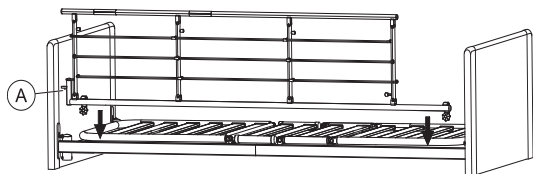


Coloque a guarda lateral sobre o chassi superior com o sistema de desengate (A) na cabeceira da cama.



As ligações da forqueta na guarda lateral devem ser instaladas de acordo com as instruções na guarda lateral.

2.

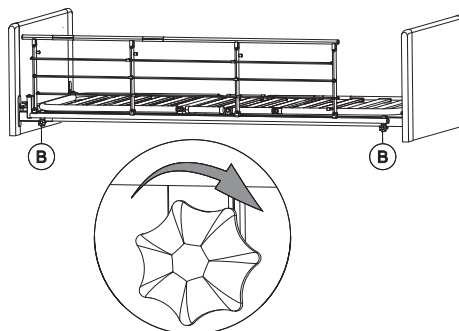

Aperte os parafusos de aperto manual (B) para instalar a guarda lateral no chassi superior. Certifique-se de que está estável e bem fixada.

Desmontagem da guarda lateral

1. Desaperte os dois parafusos de aperto manual (B) e remova a guarda lateral.

3.7.2 Instalar a guarda lateral Aria e Bella



ATENÇÃO!

Risco de apresamento/asfixia


O utilizador pode ficar preso ou cair da cama caso a guarda lateral não esteja corretamente montada ou esteja danificada.

- Certifique-se de que todos os calços de deslizamento estão corretamente orientados para as guias das extremidades da cama.
- Certifique-se de que os parafusos de bloqueio estão bem instalados na base das guias.

A instalação da guarda lateral de madeira Bella e da guarda lateral de aço Aria é idêntica.

Montagem do sistema de deslizamento

1.

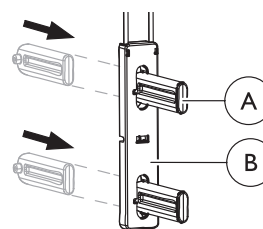


Empurre a lingueta (A) da parte posterior pelo deslizador (B) e certifique-se de que encaixa, o que é assinalado por um clique.

2. Proceda do mesmo modo para as quatro linguetas de cada deslizador.

Fixação do sistema de deslizamento e instalação da guarda lateral

1. Eleve a cama até 1/3 da altura total.

2.

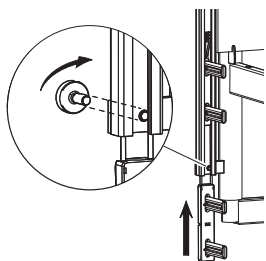


Prima o botão B ou C até o símbolo da secção da cabeceira ser apresentado.

! **AVISO!**

Assegure o posicionamento correto das guardas laterais:


- A guarda lateral com pegas deve ser instalada nas linguetas superiores.
- As pegas das guardas laterais devem estar viradas para o lado de fora da cama.

3.

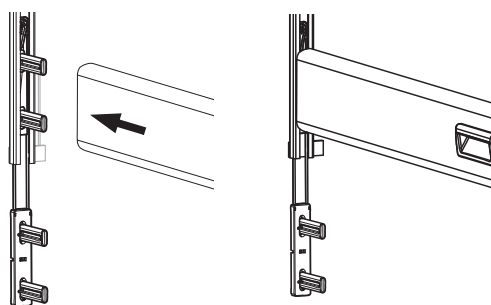


Pressione a guarda lateral superior contra as duas linguetas superiores.

4.

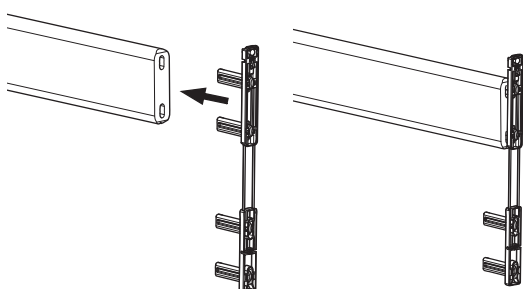

Na outra extremidade da barra da guarda lateral, pressione as duas linguetas superiores contra a extremidade da barra.

5.

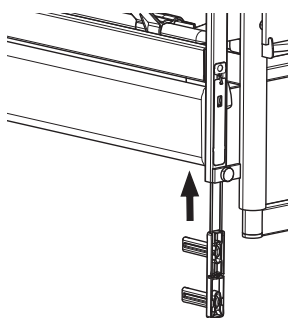


Insira o encaixe na guia até ouvir um clique (=devidamente engatado na posição inferior).


6. Monte a barra inferior da guarda lateral em ambas as extremidades conforme indicado no passo 4.

7. Pressione a guarda lateral em ambas as extremidades, completamente até acima até a barra superior encaixar na posição superior.

8.

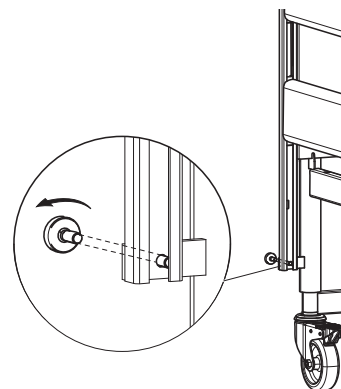

Aperte novamente os parafusos por baixo da barra inferior da guarda lateral, em cada canto das extremidades da cama.

-  Antes da utilização da cama, certifique-se de que a guarda lateral está corretamente bloqueada com o parafuso e de que as barras deslizam bem.

3.8 Instalar a extensão do estrado

Para pacientes com mais de dois metros de altura, é aconselhável alargar a cama com uma extensão do estrado. A cama pode ser expandida 15 cm na extremidade dos pés.



ATENÇÃO!


Risco de lesão

O utilizador pode cair da cama, ficar preso ou asfixiar.

- Estique sempre o colchão quando esticar a cama.
- Deve existir uma distância de mais de 2,5 cm entre a extremidade da cama e a armação do colchão, de modo a evitar o apresamento dos dedos.


(opcional)

1.

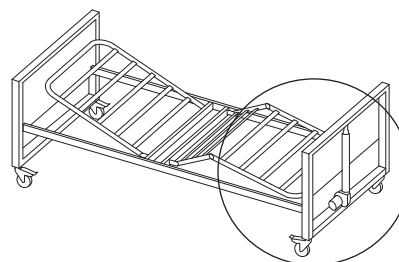


A extensão deve ser instalada na extremidade dos pés.

2.

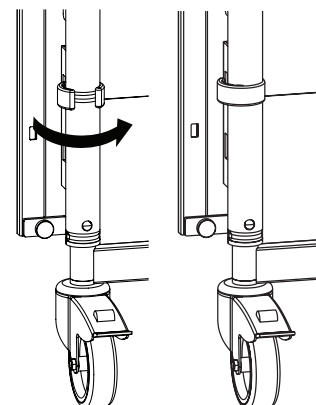


Rode o clipe para desbloquear.

3.

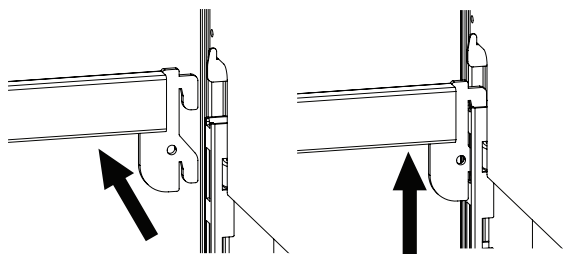



Retire as guardas laterais.

4.

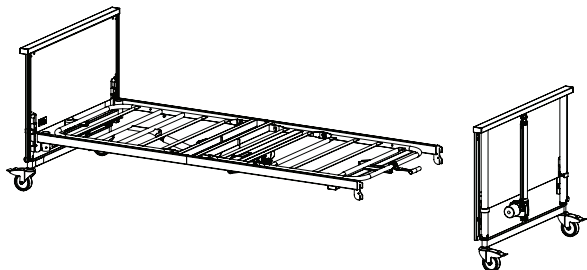


Retire a extremidade dos pés da cama.

5.

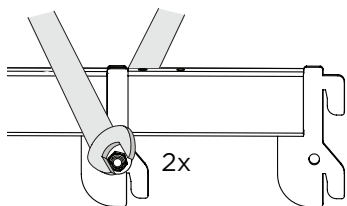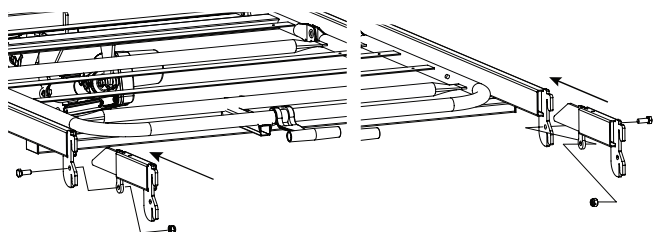



Insira ambos os lados da extensão do estrado no chassis e prenda com porcas e parafusos.

6.

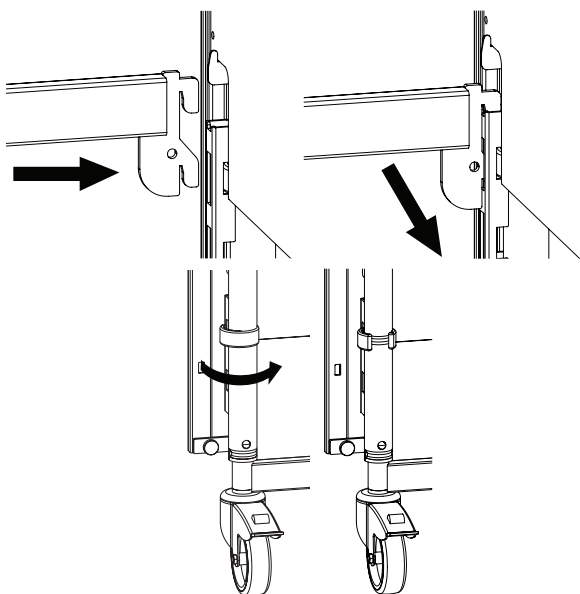


Volte a instalar a extremidade dos pés da cama e fixe-a aos suportes.


7. Fixe a extensão do estrado ao estrado.

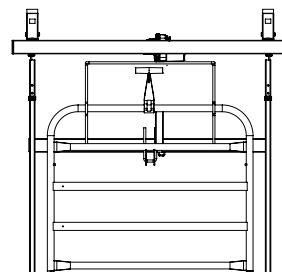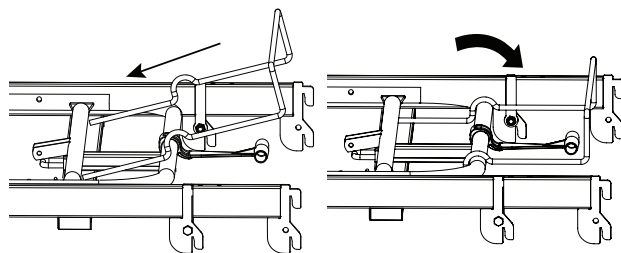

Se a cama tiver uma peça de colchão montada na secção das pernas (ver 4.6 Ajustar a secção das pernas, página 18), a mesma deve ser rodada para não interferir com o colchão.

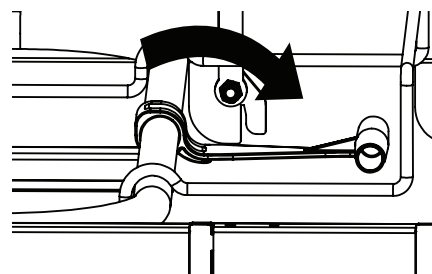

8.

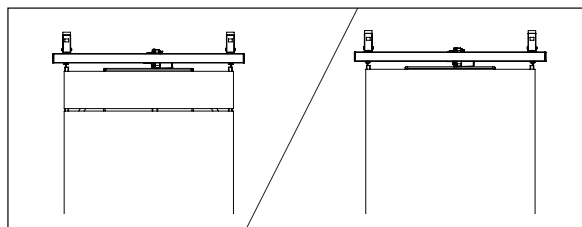

Volte a colocar o colchão ou instale uma peça de encaixe do colchão.

! As peças soltas do colchão devem estar sempre instaladas na extremidade dos pés da cama.


9. Monte a(s) guarda(s) lateral(is), se aplicável.

! **AVISO!**
Se usar os guardas laterais Aria/Bella, apenas deve ser utilizada a versão mais comprida.

3.9 Desmontagem da cama

1. Retire as guardas laterais e o pendural.
2. Desça a cama até à posição mais baixa e ajuste todas as secções do estrado até à posição horizontal.
3. Desligue a cama da tomada.

4. Desligue os cabos dos motores da extremidade da cama e retire-os do encaminhamento através do gancho do chassis e do pino do tubo.

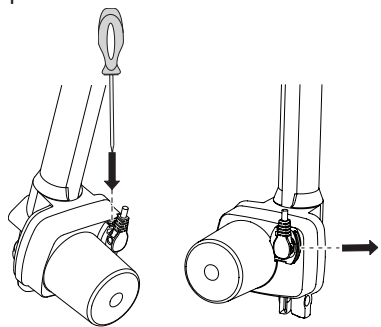

5. Desligue o cabo do motor do encosto.
6. Separe o estrado das extremidades da cama.
7. Divida a extremidade da cabeça e dos pés do estrado.

4 Funcionamento da cama

4.1 Informações gerais de segurança



ATENÇÃO!

Risco de lesões pessoais ou danos materiais.

- A cama deve ser colocada de forma a que o ajuste da altura não seja obstruído por, por exemplo, elevadores ou mobília.
- Certifique-se de que nenhuma parte do corpo fica entalada entre as peças fixas (tais como, as guardas laterais, extremidades da cama, etc.) e peças móveis.
- O comando não deve ser utilizado por crianças.



ATENÇÃO!

Risco de lesão

Se a cama for utilizada por utilizadores confusos, agitados ou com espasmos:

- caso esteja equipada com um comando bloqueável, bloqueie as funções do comando
- ou certifique-se de que o comando está fora do alcance do utilizador.

4.1.1 Alturas reduzidas



CUIDADO!

Risco de apesamento ou esmagamento

Consoante a configuração, o espaço livre entre as peças móveis e fixas da cama pode tornar-se muito pequeno quando a cama é rebaixada.

- Certifique-se de que os seus pés não estão perto nem debaixo das peças móveis quando baixar a cama.
- Certifique-se de que os cabos estão corretamente encaminhados e não podem ser esmagados quando a cama for rebaixada.



CUIDADO!

Risco de lesão

Dependendo da configuração, a altura mínima de funcionamento da cama pode ser muito baixa. A utilização de uma postura inadequada/incorrecta ao trabalhar em alturas reduzidas pode resultar em lesões para o acompanhante.

- Tenha em atenção a sua postura corporal quando presta assistência ao utilizador.

4.1.2 Apoios laterais do colchão



ATENÇÃO!

Risco de lesão

Sem apoios laterais do colchão corretamente instalados, o colchão pode escorregar lateralmente, fazendo o utilizador cair da cama.

- Nunca utilize a cama sem os apoios laterais do colchão.
- Certifique-se sempre de que os apoios laterais do colchão estão corretamente instalados e voltados para cima.
- Utilize apenas os apoios laterais do colchão originais.

4.2 Comando

O comando pode estar equipado com três ou quatro botões para operar as funções elétricas da cama. O comando também pode estar equipado com uma função de bloqueio.

Secção do encosto



1. Subir: prima o lado esquerdo do botão (▲).
2. Descer: prima o lado direito do botão (▼).

Ajuste da altura



1. Subir: prima o lado esquerdo do botão (▲).
2. Descer: prima o lado direito do botão (▼).

Secção da coxa



1. Subir: prima o lado esquerdo do botão (▲).
2. Descer: prima o lado direito do botão (▼).

Função de inclinação



CUIDADO! Risco de lesão fatal

Inclinar com a extremidade da cabeça para baixo pode ter um efeito fatal em utilizadores sensíveis a aumentos da pressão sanguínea na parte superior do corpo.

- A função de inclinação deve ser operada apenas por pessoal com formação médica. Realize sempre uma avaliação médica, antes de inclinar a cama com as extremidades inferiores do utilizador posicionadas mais acima do que o coração. A função de inclinação NÃO é uma função de Trendelenburger e não deve ser utilizada para tratamento médico.



1. Cabeceira para cima: prima o lado esquerdo do botão (▲).
2. Extremidade dos pés para cima: prima o lado direito do botão (▼).


Se a cama estiver equipada apenas com a função de anti-inclinação, a inclinação com a extremidade dos pés para cima não é possível:



1. Cabeceira para cima: prima o lado esquerdo do botão (▲).
2. Posição horizontal: descer a cama completamente (▼). Em alternativa, isto pode ser conseguido premindo o botão de ajuste da altura para levantar completamente.

4.2.1 Função de bloqueio

A função de bloqueio impede a utilização de determinados botões de função. Independentemente de quantos botões o comando tem, todos podem ser bloqueados de forma individual.

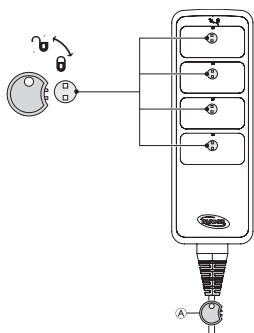

1. Insira a chave (A) no orifício de fechadura localizado mesmo acima da função desejada.
2. Para bloquear, rode a chave no sentido dos ponteiros do relógio.
3. Para desbloquear, rode a chave no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio.

4.3 Rodas e travões



CUIDADO!

Risco de apresamento/esmagamento

Todos os travões são activados pelo pé.

- Não solte o travão com os dedos.



CUIDADO!

Risco de lesão


Se os travões não estiverem bloqueados, o utilizador pode cair quando estiver a entrar ou sair da cama.

- Bloquee sempre os travões antes de o utilizador entrar ou sair da cama, ou durante a prestação de cuidados ao utilizador.



As rodas podem fazer marcas em diferentes tipos de superfície de piso absorvente, tal como pisos não tratados ou tratados deficientemente. Para evitar marcas, a *Invacare*® recomenda a colocação de uma protecção adequada entre as rodas e o piso.

4.3.1 Travão dos rodízios

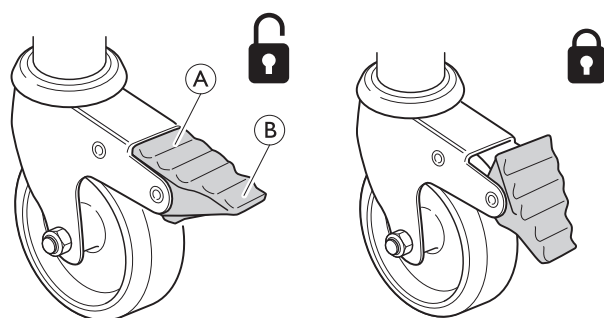

Bloquear o travão - Pise a parte exterior (B) do pedal do travão

Desbloquear o travão - Pise a parte interior (A) do pedal do travão

4.4 Funcionamento das guardas laterais



ATENÇÃO!

Risco de prisão ou sufoco

Existe o risco de apresamento ou asfixia entre o estrado, as guardas laterais e as extremidades da cama.

- Certifique-se sempre de que as guardas laterais estão corretamente encaixadas e apertadas.



ATENÇÃO!

Risco de queda

Caso tenha ficado decidido que o utilizador necessita de guardas laterais:

- Nunca deixe o utilizador sem assistência na cama com uma guarda lateral para baixo.
- Certifique-se de que as guardas laterais estão na posição mais elevada e devidamente bloqueadas quando deixa o utilizador sem assistência.



CUIDADO!

Risco de lesão

Se a guarda lateral não estiver adequadamente travada, pode cair.

- Puxe/empurre a barra superior da guarda lateral para assegurar que o sistema de bloqueio está corretamente engatado.



CUIDADO!

Risco de lesão

Existe um risco de apresamento ou esmagamento ao manusear a guarda lateral.

- Preste atenção aos seus dedos e às zonas do corpo do paciente.
- Nunca force nem deixe cair a guarda lateral ao manuseá-la.


4.4.1 Funcionamento da guarda lateral Scala 2




ATENÇÃO!

- Quando manusear a guarda lateral, coloque as mãos apenas nas áreas assinaladas com etiqueta para esse efeito.

1.

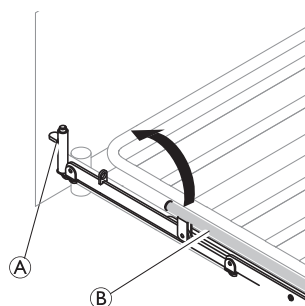

2.

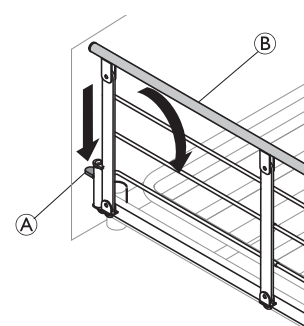

1. **Para cima:** Eleve e puxe a barra superior (B) da guarda lateral para a extremidade com o mecanismo de bloqueio (botão de desengate) (A). Certifique-se de que está fixa.
2. **Para baixo:** Prima o botão de desengate (A) e puxe a barra superior (B) da guarda lateral na direção contrária ao mecanismo de bloqueio.

4.4.2 Guardas laterais Aria e Bella


Funcionamento da guarda lateral

Levantar a guarda lateral

1. Utilize as duas pegas na barra superior para elevar a guarda lateral até esta encaixar na posição superior, o que é assinalado por um "clique" audível.

Baixar a guarda lateral

1.

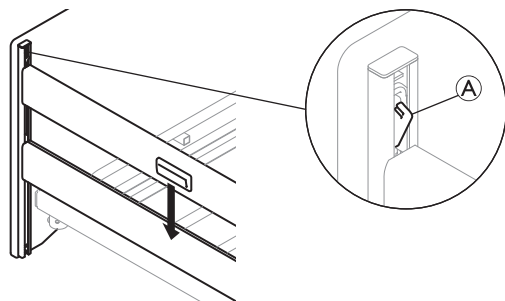

Pressione o fecho do sistema de deslizamento (A) numa extremidade da cama e baixe a guarda lateral até à posição mais baixa.

2. Repita o procedimento na outra extremidade da cama.

Funcionamento das guardas laterais



ATENÇÃO!

Risco de prisão ou sufoco

Existe o risco de apresamento ou asfixia entre o estrado, as guardas laterais e as extremidades da cama.

- Certifique-se sempre de que as guardas laterais estão corretamente encaixadas e apertadas.



ATENÇÃO!

Risco de queda

Caso tenha ficado decidido que o utilizador necessita de guardas laterais:

- Nunca deixe o utilizador sem assistência na cama com uma guarda lateral para baixo.
- Certifique-se de que as guardas laterais estão na posição mais elevada e devidamente bloqueadas quando deixa o utilizador sem assistência.



CUIDADO!

Risco de lesão

Se a guarda lateral não estiver adequadamente travada, pode cair.

- Puxe/empurre a barra superior da guarda lateral para assegurar que o sistema de bloqueio está corretamente engatado.



CUIDADO!

Risco de lesão

Existe um risco de apresamento ou esmagamento ao manusear a guarda lateral.

- Preste atenção aos seus dedos e às zonas do corpo do paciente.
- Nunca force nem deixe cair a guarda lateral ao manuseá-la.

4.5 Pendural



ATENÇÃO!

Risco de lesão

A cama pode virar-se se utilizar o manípulo enquanto o pendural estiver virado para fora da cama.

- O pendural deve sempre ficar posicionado com o manípulo suspenso sobre a área da cama.
- Não exceda a carga máxima do pendural de 80 kg.

4.5.1 Colocar o pendural

O pendural pode ser colocado no lado esquerdo ou no lado direito da cabeceira da cama.

1. Insira o pendural no respetivo tubo e fixe-o com o parafuso de aperto.




Não é necessário apertar o parafuso de aperto, em caso de pretender que o pendural se afaste para o lado da cama.


4.5.2 Ajustar a altura dos manípulos

A altura do manípulo deve ser sempre ajustada de acordo com a necessidade do utilizador.

1.

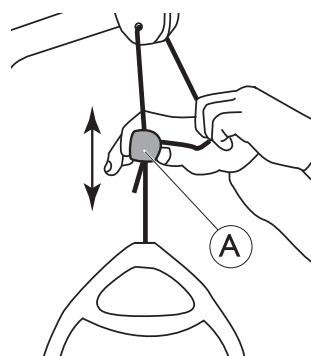

2.

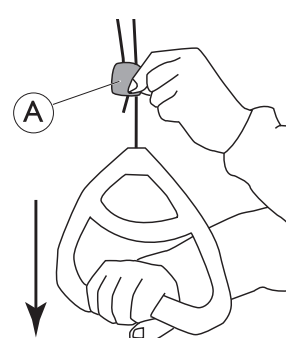

1. Mantenha o cabo do lado de fora enquanto faz deslizar o fecho do cabo de plástico (A) para cima ou para baixo até o manípulo atingir a altura preferida.
2. Bloqueie o manípulo encaixando novamente o cabo no fecho (A) e puxe o manípulo para baixo.




AVISO!

Após ajustar a altura do manípulo:


- Verifique se os dois cabos acima do fecho do cabo estão paralelos e dentro do fecho do cabo.
- Certifique-se de que o cabo está devidamente bloqueado puxando bem o manípulo.

4.6 Ajustar a secção das pernas

Acione a secção das pernas elevando a pega do colchão:

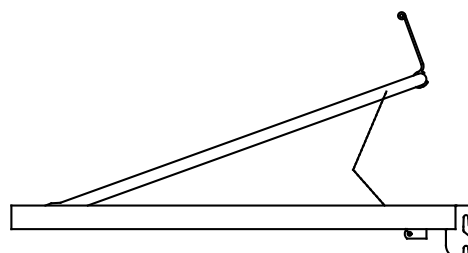

1. **Para cima:** Eleve a pega do colchão na secção das pernas.
2. **Para baixo:** Eleve a pega do colchão na secção das pernas e, em seguida, baixe a secção das pernas.

 Se a cama estiver expandida em comprimento, não será possível alcançar a pega do colchão e a secção das pernas tem de ser operada levantando diretamente a secção das pernas lateralmente.

4.7 Posições de emergência

Em caso de emergência médica, pode ser necessário colocar todas ou certas secções do estrado numa posição plana – por exemplo, a secção do encosto plana para ressuscitação cardiopulmonar (RCP).

Para colocar uma secção do estrado numa posição plana,

- utilize a função correspondente do comando
- OU
- em caso de falha de energia ou necessidade urgente de ação, utilize a função de emergência manual e baixe a secção do estrado.

Consulte 4.7.1 *Desengate de emergência de uma secção do estrado*, página 19.

4.7.1 Desengate de emergência de uma secção do estrado

Em caso de falha de alimentação ou do motor, poderá ser necessário fazer um desengate de emergência da secção das costas, coxas ou pernas. O desengate de emergência do ajuste da altura NÃO é possível.



CUIDADO!

Risco de lesão


- São necessárias pelo menos duas pessoas para um desengate de emergência de uma secção do estrado.
- Ao desengatar uma secção do estrado, esta pode baixar rapidamente. Não coloque a mão por debaixo do estrado quando o baixar.



AVISO!

- Antes de um desengate de emergência do estrado, retire a ficha da tomada.

1. Ambas as pessoas seguram na secção do colchão.
2. Uma delas localiza o motor em questão e retira o pino de segurança.

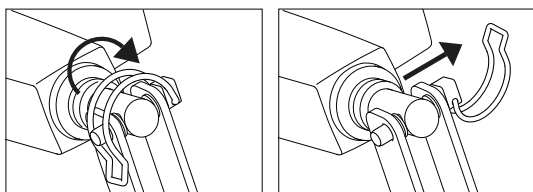

3. Ambas baixam vagarosamente a secção do colchão até estar completamente em baixo.

4.7.2 Transporte e armazenamento

A cama pode ser transportada ou armazenada montada ou desmontada.

See 3.9 *Desmontagem da cama*, página 14 para obter instruções detalhadas sobre como desmontar a cama.

Para transportar ou armazenar a cama montada:

5 Opções e acessórios

5.1 Lista de opções disponíveis



CUIDADO!

Compatibilidade da cama com peças opcionais

A combinação incorreta deste produto com peças opcionais não fabricadas pela Invacare pode causar lesões ou danos.

- Tem de ser sempre efetuada uma avaliação de riscos por um profissional antes de combinar a cama Invacare com produtos de outros fabricantes.
- Em caso de dúvida acerca da utilização de uma cama Invacare com produtos de outros fabricantes, contacte o seu fornecedor Invacare para obter informações.



AVISO!

- Utilize apenas opções e peças sobressalentes originais. Podem ser encomendadas à Invacare listas de peças sobressalentes e opcionais, bem como manuais de utilização adicionais.



Devido a diferenças regionais, consulte o catálogo ou o site local da Invacare para obter detalhes sobre as opções disponíveis ou contacte o seu fornecedor Invacare.


- Guardas laterais
 - Scala Basic 2
Calha lateral de aço com comprimento flexível a 3/4 (168 cm x 40 cm), montada no tubo lateral. Botão de desengate na cabeceira
 - Scala Basic Plus 2
Calha lateral de aço com comprimento flexível a 3/4 (168 cm x 40 cm), montada no tubo lateral. Botão de desengate na cabeceira
 - Scala Medium 2
Calha lateral de aço com comprimento flexível a 3/4 (165 cm x 46 cm), montada no tubo lateral. Botão de desengate na cabeceira
 - Scala Decubi 2
Calha lateral de aço com comprimento flexível a 3/4 (168 cm x 54 cm), montada no tubo lateral. Botão de desengate na cabeceira
 - Bella
Guarda lateral de madeira com comprimento flexível total (205 cm x 40 cm), montada nas guias da extremidade da cama. Botões de desengate em ambas as extremidades
 - Bella expandida
Guarda lateral de madeira com comprimento flexível total (220 cm x 40 cm), montada nas guias da extremidade da cama. Botões de desengate em ambas as extremidades

- Aria
Guarda lateral de aço com comprimento flexível total (206 cm x 40 cm), montada nas guias da extremidade da cama. Botões de desengate em ambas as extremidades
- Verso HC
Calha lateral de aço com comprimento flexível a 3/4 (150 cm x 40 cm), montada no tubo lateral. Botão de desengate na secção das pernas.
- Extensão do estrado (extremidade dos pés) – 15 cm
- Pendural
- Manípulos de suporte fixos – 25 cm x 30 cm, 25 cm x 80 cm, 40 cm x 30 cm, 40 cm x 50 cm ou 40 cm x 80 cm
- Comandos
 - com ajuste do encosto, da secção das coxas e da altura
 - com ajuste do encosto, da secção das coxas e da altura e funções de inclinação e anti-inclinação
 - com ajuste do encosto, da secção das coxas e da altura e função de anti-inclinação
- Soft Tilt – Sistema de reposicionamento do paciente montado na plataforma do colchão.
- Acessório para transporte


5.2 Suportes para transporte

Utilize os suportes para transporte para armazenar e transportar a cama:


1.

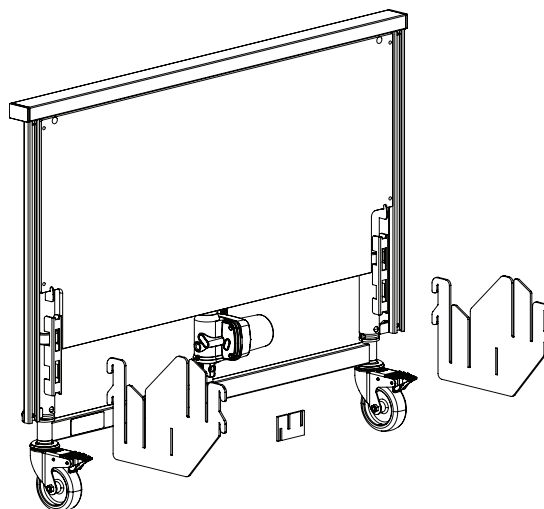


2.

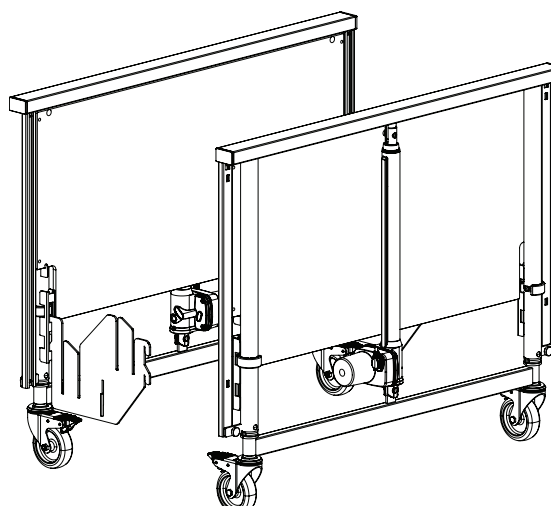


3.

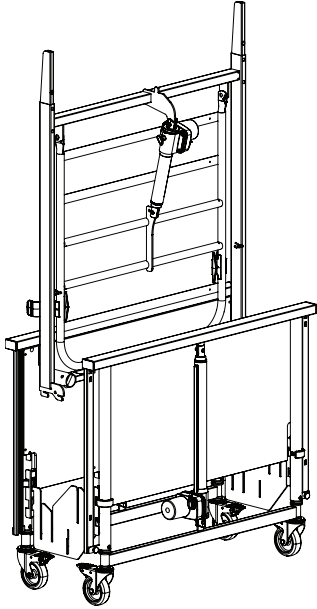


4.

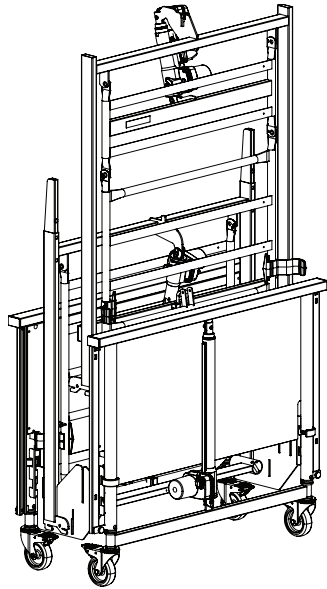

5.

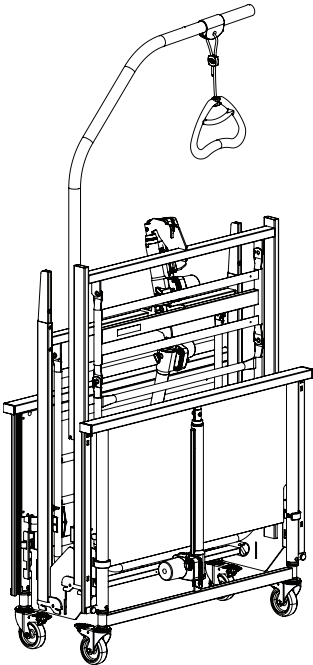

6.

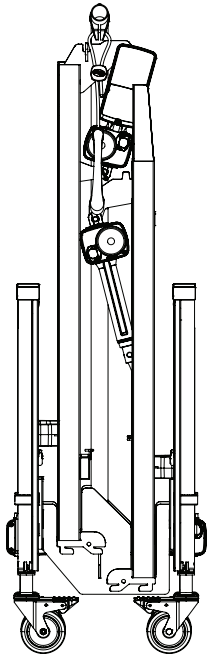

6 Manutenção

6.1 Informações gerais sobre manutenção



CUIDADO!

Risco de lesão ou danos

- Não realize qualquer procedimento de manutenção ou assistência enquanto o produto estiver a ser utilizado.

Siga os procedimentos de manutenção descritos neste manual para manter o seu produto em funcionamento contínuo.

6.2 Inspeções diárias



ATENÇÃO!

Risco de lesão ou danos

Peças danificadas ou desgastadas podem comprometer a segurança do produto.

- O produto deve ser verificado sempre que for utilizado.
- Não utilize o produto se encontrar danos ou se tiver dúvidas sobre a segurança de qualquer das suas peças. Contacte o fornecedor Invacare imediatamente e certifique-se de que o produto não é utilizado até as reparações estarem terminadas.

6.2.1 Lista de verificação da inspeção diária

- Inspeccione visualmente a cama. Verifique todas as peças quanto a sinais de desgaste ou danos externos.
- Verifique todas as ferragens, pontos de fixação, peças sob tensão e quaisquer pontos de rotação para identificar sinais de desgaste, fissuras, desfiamento, deformação ou deterioração.
- Verifique o comando e todos os atuadores para garantir um bom funcionamento.

6.3 Informações gerais sobre a assistência



AVISO!

- O estrado deve ser apoiado durante as inspeções de assistência técnica para evitar o abaixamento acidental.
- A assistência técnica e manutenção da cama só podem ser prestadas por pessoal com instrução ou formação adequada.
- Depois de ser efetuado o recondicionamento da cama, ou se forem alteradas as suas funções, deve ser prestada assistência técnica de acordo com a lista de verificação.

Pode-se celebrar um contrato de assistência nos países em que a Invacare tenha a sua própria empresa de vendas. Em determinados países, a Invacare oferece cursos de assistência técnica e manutenção da cama. Estão disponíveis, junto da Invacare, listas de peças sobressalentes e manuais de utilização adicionais.

Antes da utilização

- Certifique-se de que todas as peças manuais e eléctricas funcionam correctamente e estão em bom estado de segurança.

Após três meses

- Certifique-se de que todas as peças manuais e eléctricas estão a funcionar e aperte os pinos, parafusos, porcas, etc.

Todos os anos

- Recomendamos a realização de um teste de segurança que inclua o desempenho dos atuadores e o estado mecânico.

De dois em dois anos

- Após dois anos de utilização normal e, posteriormente, a cada dois anos, recomendamos vivamente uma assistência em conformidade com a lista de verificação abaixo.



A assistência técnica dos atuadores, comando e unidade de controlo realiza-se mediante troca da peça avariada.

6.3.1 Lista de verificação de manutenção

Pontos de verificação

- Inspeção visual de todas as peças da cama (ausência de deformações)
- Anéis de retenção, contrapinos e anel de fixação em plástico - devidamente bloqueados e intactos.
- Parafusos - apertados.
- Soldagens - intactas (ausência de desgaste)
- Rodízios (devem deslizar livremente)
- Encaixes dos rodízios - apertados.
- Travões dos rodízios - devidamente bloqueados.
- Todos os motores - a funcionar corretamente (com velocidade regular e baixo ruído).
- Cabos - corretamente ligados e sem danos.
- Fichas eléctricas - sem danos.
- Bloqueio da guarda lateral e sistema móvel - devidamente bloqueados e operacionais.
- Acessórios e/ou peças opcionais - corretamente montados e devidamente funcionais.
- Revestimento danificado - reparado.
- Fuga de lubrificante - verifique há fugas de lubrificante.



CUIDADO!

Risco de lesões ou danos materiais

As fugas de lubrificante podem resultar em quedas acidentais ou incêndios.

- Contacte o fornecedor de serviços, se for detetado lubrificante ou outro resíduo.

6.4 Inspeção após mudança de local - Preparação para um novo utilizador

- !** **AVISO!**
Quando a cama for deslocada para outro local, antes de acomodar um novo utilizador deverá ser rigorosamente inspecionada.
- A inspeção deve ser realizada por profissionais formados.
 - Para obter informações sobre a manutenção normal, consulte o plano de manutenção.

6.5 Limpeza e desinfeção

6.5.1 Informações gerais de segurança

- !** **CUIDADO!**
Risco de contaminação
- Tome precauções pessoais e utilize equipamento de proteção apropriado.

- !** **CUIDADO!**
Risco de choque elétrico e danos no produto
- Desligue o dispositivo e desligue o cabo da tomada elétrica, se aplicável.
 - Quando limpar componentes eletrónicos, tenha em conta a respetiva classe de proteção quanto à entrada de água.
 - Certifique-se de que evita quaisquer salpicos de água na ficha ou tomada de parede.
 - Não toque na tomada com as mãos molhadas.

- !** **AVISO!**
Métodos ou fluidos errados podem prejudicar ou danificar o produto.
- Todos os agentes de limpeza e desinfetantes utilizados devem ser eficazes, compatíveis entre si e passíveis de proteger os materiais aos quais são aplicados para limpeza.
 - Nunca utilize líquidos corrosivos (alcalinos, ácidos, etc.) ou agentes de limpeza abrasivos. Recomendamos um agente de limpeza doméstico normal, como detergente da loiça, se não houver especificações em contrário nas instruções de limpeza.
 - Nunca utilize um solvente (diluente celulósico, acetona, etc.) que altere a estrutura do plástico ou dissolva as etiquetas afixadas.
 - Certifique-se sempre de que o produto está completamente seco antes de o pôr novamente em funcionamento.

- !** Para a limpeza e desinfeção em ambientes de cuidados clínicos ou de longa duração, siga os procedimentos internos.

6.5.2 Intervalos de limpeza

- !** **AVISO!**
A limpeza e a desinfeção regulares melhoram o funcionamento correto, aumentam a vida útil e evitam a contaminação.
Limpe e desinfete o produto:
- regularmente enquanto está em utilização,
 - antes e depois de qualquer operação de assistência,
 - depois de ter estado em contacto com quaisquer fluidos corporais
 - e antes da sua utilização por um novo utilizador.

6.5.3 Limpar à mão

Todos os componentes (excluindo os têxteis removíveis)

- Agente de limpeza: Recomendamos a utilização de um detergente suave com pH neutro ou próximo do neutro (5-9).

- !** Podem ser utilizados produtos de consumo disponíveis comercialmente, como detergente para lavagem manual de loiça ou produtos de limpeza multiusos. Leia as instruções na etiqueta do agente de limpeza e utilize-o na concentração indicada.

- Máx. temperatura da água: 40 °C

1. Limpe bem as superfícies com um pano macio e ligeiramente humedecido com solução de detergente até remover toda a sujidade visível.
2. Remova todos os resíduos de detergente com um pano húmido e limpo.
3. Seque com um pano macio e limpo.

Têxteis removíveis (incluindo estofos e colchões)

- Consulte a etiqueta afixada em cada produto.

6.5.4 Instruções de desinfeção

Em cuidados domiciliários

- Desinfetante: Recomendamos a utilização de um desinfetante à base de álcool (com álcool a 70%-90%).

- !** Leia as instruções na etiqueta do desinfetante. Fornece informações sobre o espectro de atividade (bactérias, fungos e/ou vírus), a compatibilidade com materiais e o tempo de exposição correto.

1. Certifique-se de que as superfícies são limpas antes da desinfeção.
2. Humedeça um pano macio e utilize-o para desinfetar todas as superfícies acessíveis, mantendo-as humedecidas durante o tempo de exposição indicado na etiqueta do desinfetante.
3. Deixe o produto secar ao ar.


Em cuidados numa instituição

Siga os procedimentos de desinfeção internos e utilize apenas os desinfetantes e métodos especificados.

6.6 Lubrificação

Recomendamos a lubrificação da cama de acordo com as instruções seguintes após a assistência e limpeza ou sempre que for necessário reduzir a fricção.

Peça da cama	Método de lubrificação
Pontos de rotação no estrado	Óleo (limpo para medicina)
O encaixe do motor aponta para o estrado	Óleo (limpo para medicina)
Rolamentos do motor e hastes de tensão	Óleo (limpo para medicina)

 O sistema de deslizamento das guardas laterais não deve ser lubrificado com óleo – caso contrário, as barras de madeira mover-se-ão lentamente.

Para encomendar o óleo correto, contacte o seu fornecedor Invacare.

7 Após a utilização

7.1 Eliminação

Seja amigo do ambiente e recicle este produto no fim da respetiva vida útil através das instalações de reciclagem existentes.

Desmonte o produto e os seus componentes, para que os diferentes materiais possam ser separados e reciclados individualmente.

A eliminação e a reciclagem de produtos utilizados e da embalagem devem cumprir as leis e os regulamentos relativos à gestão de resíduos de cada país. Para obter informações, contacte a sua empresa de gestão de resíduos local.

7.2 Recondicionamento

Este produto é adequado para reutilização. Para o recondicionamento do produto para um novo utilizador, execute as seguintes ações:

- Inspeção
- Limpeza e desinfeção


Para obter informações detalhadas, consulte a secção 6 *Manutenção*, página 22.

Certifique-se de que o manual de utilização é fornecido com o produto.

Se forem detetados danos ou avarias, não reutilize o produto.

8 Resolução de problemas

8.1 Resolver problemas do sistema elétrico

Sintoma	Causa possível	Solução
O indicador de alimentação não se acende.	A alimentação não está ligada.	Ligue a alimentação.
	Queimou-se um fusível na unidade de controlo.	* Substituir a unidade de comando.
	A unidade de controlo está defeituosa.	* Substituir a unidade de comando.
O indicador de alimentação acende-se, mas o motor não funciona. O relé na unidade de controlo dá estalidos.	A ficha do motor não está totalmente inserida na unidade de controlo.	Insira a ficha do motor da forma correta na unidade de controlo.
	O motor está defeituoso.	* Substitua o motor.
	O cabo do motor está danificado.	* Substitua o cabo.
	A unidade de controlo está defeituosa.	* Substituir a unidade de comando.
O indicador de alimentação acende-se, mas o motor não funciona. Não se ouve som do relé na unidade de comando.	A unidade de controlo está defeituosa.	* Substituir a unidade de comando.
	O comando está defeituoso.	* Substitua o comando.
A unidade de controlo está em ordem, exceto uma direção num canal.	A unidade de controlo está defeituosa.	* Substituir a unidade de comando.
	O comando está defeituoso.	* Substitua o comando.
O motor está a trabalhar, mas a haste do pistão não se move.	O motor está danificado.	* Substitua o motor.
O motor não consegue elevar a carga total.		
Ruído no motor, mas inexistência de movimento da haste do pistão.		
A haste do pistão é operada para dentro e não para fora.		
* A assistência técnica e a manutenção da cama devem ser apenas realizadas por pessoal com a instrução ou formação adequada.		
 ATENÇÃO! Risco de lesões pessoais e de danos no produto. — A cama deve ser desligada da fonte de alimentação antes de abrir ou reparar as peças eléctricas.		


9 Dados técnicos

9.1 Materiais

Plataforma do colchão	Aço (lacado)
Extremidades da cama	Aço (lacado) e MDF
Guardas laterais	Aço (lacado) ou madeira
Pendural	Aço (lacado), PP e POM
Compartimento dos atuadores, controlo manual, caixa de controlo, rodas e outras peças de plástico	Material em conformidade com a marca (PA, PP, PE, ABS)
Parafusos e porcas	Aço (galvanizado)

9.2 Dimensões da cama

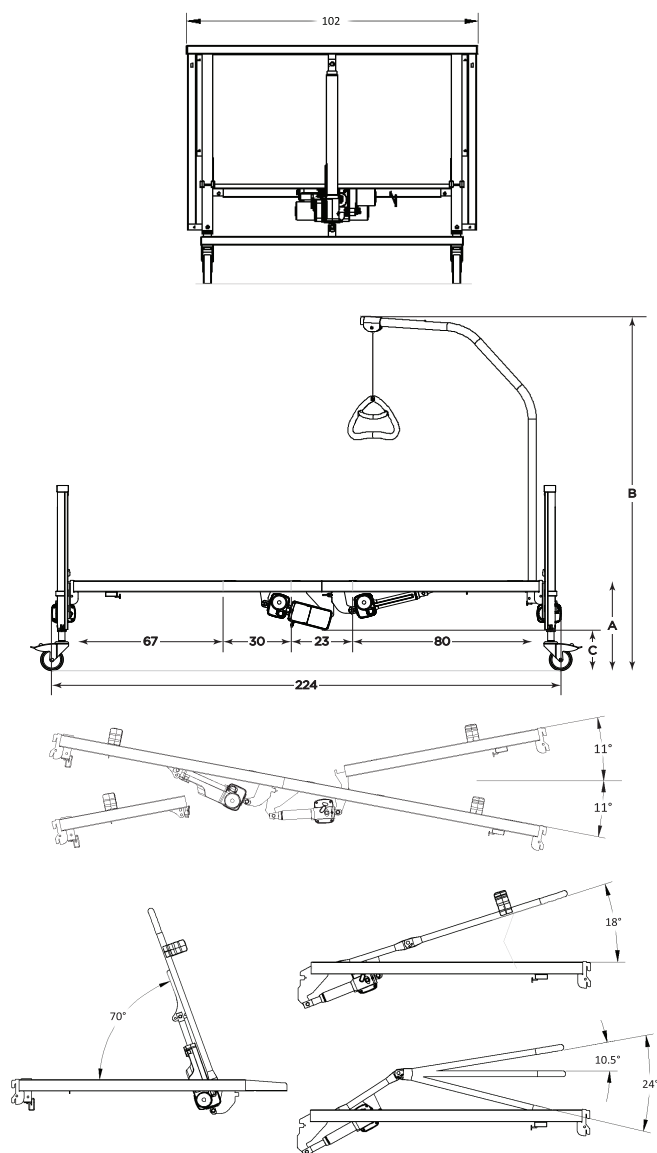

Todas as medidas são indicadas em cm. Todos os ângulos são indicados em graus. Todas as medidas e ângulos são indicados sem tolerâncias.



Altura	Medley Ergo	
	Baixa	Alta
A	33 – 73 cm	40 – 80 cm
B	160 – 201 cm	166 – 207 cm
C	12 – 55 cm	19 – 62 cm

Altura	Medley Ergo Low	
	Baixa	Alta
A	21 – 61 cm	28 – 68 cm
B	146 – 187 cm	153 – 194 cm
C	0,5 – 42 cm	7,5 – 49 cm

9.3 Pesos

	Medley Ergo	Medley Ergo Low
 Máx. peso do paciente (desde que o peso do colchão e dos acessórios e/ou peças opcionais não exceda 35 kg)	145 kg	
 Máx. carga funcional de segurança (paciente + acessórios e/ou peças opcionais)	180 kg	
Peso total*	64,0 kg	
Parte superior do estrado com ripas de madeira (= parte mais pesada)	17,0 kg	
Parte superior do estrado, com ripas de aço	16,0 kg	
Parte inferior do estrado, com ripas de madeira	16,0 kg	
Parte inferior do estrado, com ripas de aço	15,0 kg	
Extremidade da cama (1 peça)	14,7 kg	13,7 kg
Pendural	4,2 kg	
Suportes para transporte	2,0 kg	
Extensão do estrado (15 cm)	1,9 kg	

*Cama completa, incl. estrado (superior e inferior), ripas de aço, cabo de alimentação, retentores de colchão e comando.

9.4 Dimensões do colchão

Tamanhos permitidos para o colchão, consoante a guarda lateral

Guarda lateral	Tamanho do colchão		
	Altura [cm]	Largura [cm]	Comprimento [cm]
Bella /Aria alto ¹⁾	6 – 12	85,5 – 90	200 – 208
Bella /Aria baixo ²⁾	12 – 18	85,5 – 90	200 – 208
Scala Basic 2	10 – 18	85,5 – 90	200 – 208

Scala Basic Plus	10 – 18	85,5 – 90	200 – 208
Scala Medium	10 – 22	85,5 – 90	200 – 208
Scala Decubi 2	23 – 31	85,5 – 90	200 – 208
Verso HC	10 – 18	85,5 – 90	200 – 208


1) Estrado montado na posição alta.


2) Estrado montado na posição baixa.

Para camas equipadas com uma extensão do estrado, acrescente 15 cm.

Mín. densidade: 38 kg/m

9.5 Características eléctricas

Tensão de alimentação	U _{in} = 230 Volt, AC, 50/60 Hz (AC = Corrente alterna)
Corrente de entrada máxima	I _{in} máxima = 1,5 A
Intermitente (utilização periódica dos motores)	I _{nt} = 10%, máx. 2 min / 18 min
Classe de isolamento	Equipamento de CLASSE II
Peça aplicada de tipo B	Peça aplicada, em conformidade com os requisitos especificados para protecção contra choque eléctrico de acordo com a norma IEC60601-1.
Nível sonoro	45 a 50 dB (A)
Grau de protecção	O sistema eléctrico é IPX4 – protegido contra entrada de água salpicada sobre os componentes a partir de qualquer direcção.  Os motores de ajuste da altura são IPX4 . Os motores da plataforma do colchão, a unidade de controlo e o comando são IPX6 . IPX6 – Estes componentes eléctricos estão protegidos contra a entrada de água projetada por jatos potentes provenientes de qualquer direcção.

 **Nota:** A cama não tem isolador (switch principal). Se for necessário desligar a alimentação da cama, é necessário desligá-la da tomada.

9.6 Condições ambientais

	Armazenamento e transporte	Funcionamento
Temperatura	-10 °C a +50 °C	+5°C a +40°C
Humidade relativa	20% a 80% – sem condensação	
Pressão atmosférica	700 hPa a 1060 hPa	



Deixe que o produto atinja a temperatura de funcionamento antes da utilização:

- O aquecimento desde a temperatura mínima de armazenamento pode demorar até 24 horas.
- O arrefecimento desde a temperatura máxima de armazenamento pode demorar até 24 horas.

10 Compatibilidade eletromagnética

10.1 Informações gerais sobre compatibilidade eletromagnética (EMC)

O equipamento elétrico médico deve ser instalado e utilizado de acordo com as informações de EMC incluídas neste manual.

Este produto foi testado e considerado em conformidade com os limites de EMC especificados pela norma IEC/EN 60601-1-2 para o equipamento de Classe B.

Os equipamentos de comunicações de RF portáteis e móveis podem afetar o funcionamento deste produto.

Outros dispositivos poderão sofrer interferências mesmo com os baixos níveis de emissões eletromagnéticas permitidos pela norma acima mencionada. Para determinar se as emissões deste produto estão a provocar a interferência, ligue e desligue o mesmo. Se a interferência com o funcionamento do outro dispositivo parar, significa que este produto está a causar a interferência. Nestes casos raros, poderá reduzir ou corrigir a interferência tomando uma das seguintes medidas:

- Reposicionar, mudar de sítio ou aumentar o espaço entre os dispositivos.

10.2 Emissões eletromagnéticas

Diretrizes e declaração do fabricante

Este produto destina-se a utilização no ambiente eletromagnético especificado abaixo. O cliente ou o utilizador deste produto deverá assegurar a sua utilização neste ambiente.


Teste de emissões	Conformidade	Ambiente electromagnético – orientação
Emissões de RF CISPR 11	Grupo I	Este produto só utiliza energia de RF para a sua função interna. Logo, as emissões RF são muito baixas e não deverão causar interferências com equipamento electrónico circundante.
Emissões de RF CISPR 11	Classe B	Este produto é adequado para utilização em todos os estabelecimentos, incluindo zonas residenciais e aqueles diretamente ligados à rede pública de alimentação de baixa tensão que abastece edifícios para fins habitacionais.
Emissões harmónicas IEC 61000-3-2	Classe A	
Variações de tensão/emissões de tremulação IEC 61000-3-3	Em conformidade	


10.3 Imunidade eletromagnética

Diretrizes e declaração do fabricante

Este produto destina-se a utilização no ambiente eletromagnético especificado abaixo. O cliente ou o utilizador deste produto deverá assegurar a sua utilização neste ambiente.

Teste de imunidade	Nível de teste/conformidade	Ambiente eletromagnético – diretrizes
Descarga electrostática (ESD) IEC 61000-4-2	± 8 kV contacto ±2 kV, ±4 kV, ±8 kV, ±15 kV ar	O chão deve ser de madeira, cimento ou azulejo de cerâmica. Se o chão estiver coberto de material sintético, a humidade relativa deverá ser de pelo menos 30 %.
Surto/ transiente electrostático IEC 61000-4-4	± 2 kV para linhas de alimentação; frequência de repetição 100 kHz ± 1 kV para linhas de entrada/saída; frequência de repetição 100 kHz	A qualidade da alimentação deverá corresponder a um ambiente comercial ou hospitalar típico.
Sobretensão IEC 61000-4-5	±1 kV de linha a linha ±2 kV de linha a terra	A qualidade da alimentação deverá corresponder a um ambiente comercial ou hospitalar típico.

Teste de imunidade	Nível de teste/conformidade	Ambiente eletromagnético – diretrizes
Quedas de potencial, interrupções pequenas e variações de tensão nas linhas de entrada de alimentação IEC 61000-4-11	< 0% U_T para 0,5 ciclo a incrementos de 45° 0% U_T para 1 ciclo 70% U_T para 25/30 ciclos < 5% U_T para 250/300 ciclos	A qualidade da alimentação deverá corresponder a um ambiente comercial ou hospitalar típico. Se o utilizador deste produto necessitar de um funcionamento contínuo durante as interrupções da alimentação, recomenda-se que o produto seja alimentado a partir de uma fonte de alimentação ininterrupta ou de uma bateria. U_T é a tensão da rede de CA antes da aplicação do nível de teste.
Campo magnético da frequência da corrente (50/60 Hz) IEC 61000-4-8	30 A/m	Os campos magnéticos da frequência de alimentação deverão estar a níveis característicos próprios de um ambiente comercial ou hospitalar.
RF Conduzida IEC 61000-4-6	3 V150 kHz a 80 Mhz	As intensidades de campo dos transmissores fixos, tais como estações de base para telefones de rádio (celulares/sem fios) e rádios móveis terrestres, radioamador, transmissão de rádio AM e FM e emissão de TV não podem ser previstas teoricamente com exatidão. Para avaliar o ambiente eletromagnético derivado dos transmissores de RF fixos, deve ser considerada um levantamento eletromagnético do local. Se a intensidade de campo medida na localização onde este produto é utilizado exceder o nível de conformidade de RF aplicável acima, este produto deverá ser monitorizado para conferir o seu funcionamento normal. Se for observado um desempenho anormal, serão necessárias medidas adicionais, tais como reorientar ou mudar o produto de local. Podem ocorrer interferências nas proximidades dos equipamentos marcados com o seguinte símbolo:  Os equipamentos de comunicações de RF portáteis e móveis não devem ser utilizados a uma distância inferior a 30 cm de qualquer parte deste produto (incluindo cabos).
RF Irradiada IEC 61000-4-3	6 Vem bandas ISM e por radioamador 10 V/m80 Mhz a 2,7 GHz Para as especificações do teste de 385 MHz - 5785 MHz para imunidade relativamente a equipamentos de comunicações sem fios de RF, consulte a tabela 9 da norma IEC 60601-1-2	


 Estas diretrizes podem não se aplicar a todas as situações. A propagação electromagnética é afectada pela absorção e reflexão de estruturas, objectos e pessoas.

10.3.1 Especificações de teste para EMC

IEC 60601-1-2 — Tabela 9

Frequência de teste (MHz)	Banda ^{a)} (MHz)	Serviço ^{a)}	Modulação ^{b)}	Nível de teste de imunidade (V/m)
385	380 - 390	TETRA 400	Modulação por impulso ^{b)} 18 Hz	27
450	430 - 470	GMRS 460, FRS 460	FM ^{c)} ± 5 kHz desvio de 1 kHz sinusoidal	28
710 745 788	704 - 787	Banda LTE 13, 17	Modulação por impulso ^{b)} 217 Hz	9
810 870 930	800 - 960	GSM 800/900, TETRA 800, iDEN 820, CDMA 850, LTE Band 5	Modulação por impulso ^{b)} 18 Hz	28
1720 1845	1700 - 1990	GSM 1800; CDMA 1900; GSM 1900; DECT; LTE Banda 1, 3, 4, 25; UMTS	Modulação por impulso ^{b)} 217 Hz	28

Frequência de teste (MHz)	Banda ^{a)} (MHz)	Serviço ^{a)}	Modulação ^{b)}	Nível de teste de imunidade (V/m)
1970				
2450	2400 - 2570	Bluetooth, WLAN, 802.11 b/g/n, RFID 2450, LTE Band 7	Modulação por impulso ^{b)} 217 Hz	28
5240 5500 5785	5100 - 5800	WLAN 802.11 a/n	Modulação por impulso ^{b)} 217 Hz	9

 Se for necessário para atingir o nível de teste de imunidade, a distância entre a antena transmissora e o equipamento elétrico médico ou o sistema pode ser reduzida para 1 m. A distância de teste de 1 m é permitida pela IEC 61000-4-3.

^{a)} Para alguns serviços, apenas estão incluídas as frequências uplink.

^{b)} A transportadora deve ser modulada utilizando um sinal de onda quadrada modulado por ciclo de trabalho de 50%.

^{c)} Como alternativa à modulação FM, a transportadora pode ser modulada utilizando um sinal de onda quadrada modulado a 18 Hz por ciclo de trabalho de 50%. Embora não represente a modulação real, seria o pior cenário possível.



Portugal:

Invacare Lda
Rua Estrada Velha, 949
P-4465-784 Leça do Balio
Tel: (+351) 225 193 360
portugal@invacare.com
www.invacare.pt

España:

Invacare S.A.
Avenida del Oeste, 50 – 1º-1a
Valencia-46001
Tel: (34) 972 493 214
contactsp@invacare.com
www.invacare.es



Invacare UK Operations Limited
Unit 4, Pencoed Technology Park,
Pencoed
Bridgend CF35 5AQ
UK



Invacare Portugal, Lda
Rua Estrada Velha, 949
4465-784 Leça do Balio
Portugal

60128488-E 2024-08-22



Making Life's Experiences Possible®



Yes, you can.