

USER MANUAL

VICAIR®

VECTOR O2



relief by air

EN	USER MANUAL	3
NL	GEbruikersHANDLEIDING	9
DE	GEBRAUCHSANWEISUNG	15
FR	MANUEL DE L'UTILISATEUR	22
DA	BRUGERVEJLEDNING	29
SV	BRUKSANVISNING	35
NO	BRUKERMANUAL	41
FI	KÄYTTÖOHJE	47
ES	MANUAL DEL USUARIO	53
PT	MANUAL DE UTILIZADOR	60
IT	MANUALE UTENTE	67
GR	ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ	74
HR	KORISNIČKI PRIRUČNIK	81
SL	UPORABNIŠKI PRIROČNIK	87
PL	INSTRUKCJA OBSŁUGI	93
ZH	用户手册	100
JP	ユーザーマニュアル	105
EE	KASUTUSJUHEND	111

Dear customer,

Thank you for choosing a Vicair® product. We are sure you will appreciate the simplicity, reliability and fantastic effect. For quick installation you can use the Quick Installation Guide provided with your cushion. In addition, please read and understand this user manual before use. Save both the Quick Installation Guide and this manual for future reference.

For more information or to (re)order manuals, contact your country's distributor.
Go to vicair.com for distributor information.

INTRODUCTION

The Vicair® Vector O2 is a wheelchair seat cushion with an anatomically contoured seat surface that provides a very high level of stability for persons with a high risk of developing pressure injuries. It is also a high performance addition to a pressure injury treatment plan (stage I-IV).

INDICATIONS


It is used to provide comfort, stable body support, to improve body-posture and to help prevent pressure injuries.

It is also a high performance addition to a pressure injury treatment plan (stage I-IV).

CONTRAINDICATIONS

When used as intended, there are no known contraindications.

MAIN COMPONENTS

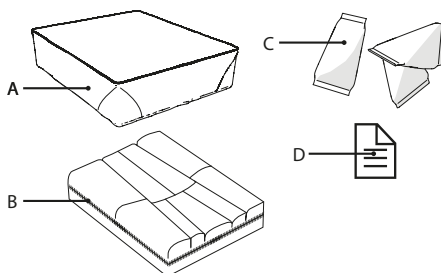

- A.** Cushion cover
- B.** Cushion
- C.** SmartCells™, placed in 9 compartments
- D.** Quick Installation Guide

GENERAL PRODUCT SPECIFICATIONS

Product name:	Vicair Vector O2
Manufactured by:	Vicair B.V., The Netherlands
Warranty:	24 months
Used materials:	All latex free
Weight (excl. cover):	Smallest size: 0,5 kg / 1.1 lbs Medium size: 0,8 kg / 1.8 lbs Largest size: 1,3 kg / 2.9 lbs
Available sizes:	See the grid in the back of the manual
Cushion:	Top made of polyester fabric with polyurethane coating, bottom of polyester mesh fabric
Filling:	Air-filled SmartCells with low friction coating
O2 Top Cover:	Top: Knitted Polyester fabric. Bottom rim: Polyester fabric with polyurethane anti-slip coating.

Alternative cushion covers

Comfair Cover: Top: Knitted Polyester fabric.
Sides: Polyester 3D Mesh fabric. Bottom:
Polyester fabric with polyurethane anti-slip
coating.

Incotec Cover & Reversible Cover: Top: Knitted
Polyester fabric, coated with fluid resistant
breathable polyurethane. Bottom: Polyester
fabric with polyurethane anti-slip coating.

All covers: Machine washable. Covers comply
with EN1021-1, 1021-2 and CAL117.

PRECAUTIONS AND SAFETY INSTRUCTIONS

A Vicair wheelchair seat cushion may only be
used as a wheelchair seat cushion. The use of
this product in any other way, is considered to
be misuse. Vicair B.V. cannot be held
responsible for damage caused by misuse,
improper use or negligence. Make sure that you
read and understand this manual completely.

Warning! Vicair B.V. recommends to install the
product under direct supervision of a therapist
or Assistive Technology Professional.

Warning! Your tailbone and pelvic bones should
not touch the bottom of the cushion. Checking
for “bottoming out” should be done during first
use and after adjustments to the cushion filling.

Warning! Check your skin regularly for redness,
especially during the first few days. If redness
occurs and does not disappear after 15
minutes, consult your therapist or Assistive
Technology Professional.

Warning! Vicair B.V. recommends to adjust the
filling grade under the direct supervision of
your therapist or Assistive Technology
Professional.

Warning! In case of soiling with body fluids, and
when transferring the product to another user,
the product must be disinfected to avoid cross
contamination.

Warning! Every three months, check the
product for wear and deflated cells. In case of
serious damage, or a large number of deflated
cells, do not continue to use the product.
Consult your Assistive Technology Professional.

Caution! Do not use or leave the product close
to a naked flame or a high temperature heat
source.

Caution! Do not dry clean, steam clean or
autoclave the product. The product cannot
withstand excessive heat or pressure. When the
given cleaning instructions are not followed, it
is very likely that the product and/or the
product's cover will age more rapidly.

Caution! Do not use aggressive or abrasive
cleaners, or sharp objects to clean the cushion.

Caution! Do not place the topside of the Vicair
O2 cushion against the glass of the washer
door.

Caution! Make sure the cushion cannot
interfere with the wheel spokes.

Caution! Excessive washing may influence the
aging of this product.

Notice! Filling grade may slightly deviate from
default (see product label).

INSTALLATION

Warning! Vicair B.V. recommends to install the
product under direct supervision of a therapist
or Assistive Technology Professional.

Caution! Make sure the cushion cannot
interfere with the wheel spokes.

Notice! Always use cushion with cover.

Notice! Make sure that the wheelchair seat is
clean and degreased.

Tip: When you prefer not to use the hook and
loop, you can remove the hook strips. Note that
the strips connected to the bottom of the
cushion and/or cushion cover cannot be
removed.

Perform the following steps when using the O2

Top Cover

These steps correspond to the installation images 1 – 6 on the Quick Installation Guide:

- Check cushion size. Width (X) of the cushion and seat should match. When the cushion rests against arm supports or side-guards, the width may be up to 2.5 cm (1") wider. Depth (Y) of the cushion and seat should match.
- Check if the size of the cover matches the size of the cushion.
- Remove protective backing tape from self-adhesive hook strips attached to the bottom of the cushion.
- Place cushion by pressing firmly.
- Place the O2 Top Cover over the top of the cushion.
- Pass the loop at the back of the cushion through the 'button hole' in the back of the cover.
- Sit on the cushion for a few minutes, to allow the cushion to adapt to your body shape.
- If necessary, adjust foot supports.

Alternative cushion covers

Perform the following steps when using the Comfair Cover, Incotec Cover or Reversible Cover.

Please note: The Reversible Cover is delivered with the cool breathable side on the outside. If you require the fluid-resistant side of this cover: first unzip the top section of the cover completely from the bottom section, turn top section inside out and rezip it to the bottom section.

- Check cushion size. Width (X) of the cushion and seat should match. When the cushion rests against arm supports or side-guards, the width may be up to 2.5 cm (1") wider. Depth (Y) of the cushion and seat should match.

- Check if the size of the cover matches the size of the cushion.
- Remove the hook strips from the bottom of the cushion. Note that the strips connected to the bottom of the cushion cannot be removed.
- Insert cushion in cover.
- Pass loop through eyelet in cover.
- Close zipper. Make sure to not damage the cushion.
- Remove protective backing tape from self-adhesive hook strips attached to the cushion cover.
- Place cushion by pressing firmly.
- Sit on the cushion for a few minutes, to allow the cushion to adapt to your body shape.
- If necessary, adjust foot support.

Checking for "bottoming out":

Image 7 - Quick Installation Guide

Warning! Your tailbone and pelvic bones should not touch the bottom of the cushion. Checking for "bottoming out" should be done during first use and after adjustments to the cushion filling.

Warning! Vicair B.V. recommends to adjust the filling grade under the direct supervision of your therapist or Assistive Technology Professional.

- Check for bottoming out, after sitting on the cushion for approximately 5 minutes.
- Let your therapist or Assistive Technology Professional slide a hand between your buttocks and the Vicair cushion while leaning forward.
- Ask your therapist or Assistive Technology Professional to check if your lowest bony prominences are supported by at least 2,5 cm / 1" of SmartCells. This prevents them from touching the wheelchair seat.
- Do not use the cushion if bottoming out occurs. In most cases, adjusting the filling grade of the compartments will solve the problem.

USE

Checking for redness of the skin

Image 8 - Quick Installation Guide

Warning! Check your skin regularly for redness, especially during the first few days. If redness occurs and does not disappear after 15 minutes, consult your therapist or Assistive Technology Professional.

Adjusting the filling grade

Warning! Vicair B.V. recommends to adjust the filling grade under the direct supervision of your therapist or Assistive Technology Professional.

Ready for use

This Vicair product is ready for use. It has its own unique filling grade, depending on size and model. However – if necessary – the filling grade can be adjusted by removing or adding SmartCells from/to the various compartments. You can find the default filling grade on the label attached to the cushion.

Conditions for use and storage

Caution! Do not use or leave the product close to a naked flame or a high temperature heat source.

- **User weight:**
Minimum: 15 kg / 33 lbs,
maximum: 250 kg / 551 lbs
- **Temperature:**
Minimum: -20 °C / 4 °F,
maximum: 55 °C / 131 °F

- **Use at high altitude**

Notice! Vicair B.V. recommends not to use the cushion above 2400 m (8000 ft) above sea level or below 50 m (164 ft) below sea level. Because each SmartCell is filled with air, the cushion may behave differently when used at high altitude or on an airplane. Under such circumstances, the cushion's firmness can be adjusted by removing a few cells from each compartment.

- **Air humidity:**
Minimum: 0%, maximum 100%

Daily fluff-up

Vicair B.V. recommends to fluff-up your Vicair cushion before use on a daily basis.

Use of Vicair seat cushions in motor vehicles

Whenever possible, transfer out of the wheelchair and into a car manufacturer-installed vehicle seat without the cushion, and use the vehicle's crash-tested occupant restraint system.

As an alternative for your Vicair wheelchair cushion, the Vicair Allrounder O2 (which can be fastened to the user's body) can be used if you require additional protection in a manufacturer-installed vehicle seat during transportation. When the wheelchair is used as the vehicle seat, the applicable rules and regulations with regard to securing the wheelchair and the wheelchair user during transport should be followed.

There is no data available about the influence on safety of a Vicair wheelchair cushion used in a crash-tested wheelchair.

Re-use - Transferring the product to another user

The product is suitable for repeated use. The number of times it can be used depends on how often and in which way the product is used.

The product has to be thoroughly cleaned and disinfected, before another person is allowed to use it. See chapter 'Maintenance and cleaning' for instructions.

Notice! Make sure the product is correctly adjusted to the other person.

Expected lifetime

The expected lifetime of this product is five years when used in accordance with the safety instructions, maintenance intervals and correct use, stated in this manual.

The effective lifetime can vary according to frequency and intensity of use.

Replacing the cushion cover

Under normal use, Vicair B.V. recommends to replace the cushion cover every year. Replacement covers can be purchased separately.

Disposal

The disposal and recycling of used devices and packaging must comply with the applicable legal regulation. Ensure the product is cleaned prior to disposal to avoid any risk of contamination.

MAINTENANCE AND CLEANING

Warning! Every three months, check the product for wear and deflated cells. In case of serious damage, or a large number of deflated cells, do not continue to use the product. Consult your Assistive Technology Professional.

Caution! Do not dry clean, steam clean or autoclave the product. The product cannot withstand excessive heat or pressure. When the given cleaning instructions are not followed, it is very likely that the product and/or the product's cover will age more rapidly.

Caution! Do not use aggressive or abrasive cleaners, or sharp objects to clean the cushion.

Caution! Do not place the topside of the Vicair O2 cushion against the glass of the washer door.

Caution! Excessive washing may influence the aging of this product.

Cleaning the Vicair Vector O2

- **Cleaning the Vicair Vector O2 cushion cover**

The cushion cover can be machine washed. Follow the washing instructions on the label attached to the inside of the cover.
(60 °C = 140 °F)



- **Cleaning the Vicair Vector O2 cushion**

Your Vicair O2 cushion can be machine washed at 60°C / 140 °F using an anti-crease cycle and mild detergent. You do not need to remove the SmartCells before putting the cushion into the washing machine. Make sure the topside of the cushion is not placed against the glass of the washer door. Do not load the machine with more than half of its maximum load weight. Spin speed should be reduced. When using a machine with agitator, make sure that the cushion can move freely within the drum. Do not use any chlorine bleach and do not dry clean, steam clean or autoclave! Do not tumble dry your Vicair O2 cushion but let it air dry (5-6 hours). You can use the sling to hang dry your Vicair O2 cushion.



Disinfecting your Vicair Vector O2

Warning! In case of soiling with body fluids, and when transferring the product to another user, the product must be disinfected to avoid cross contamination. Clean the cushion and cover as instructed above. Preferably use an antibacterial detergent. After washing spray your cushion and cover with a disinfectant. Bend compartments outwards to make sure the spray gets into the gaps.

REPORTING OF SERIOUS INCIDENTS

Serious incidents from use of Vicair products should be reported to the manufacturer and the relevant competent authority.

WARRANTY

Please see www.vicair.com for complete information on warranty processes, terms and conditions.

Vicair B.V. offers a limited warranty against defects in workmanship and materials, provided the product has been used normally. Any damage arising from abnormal use, or caused by improper handling, cleaning, or negligence, is excluded from this warranty.

Warranty period

From original date of purchase: 24 months.
The SmartCells in this Vicair O2 cushion have a lifelong warranty period.

Should a defect in materials or workmanship occur within the above mentioned warranty period, Vicair B.V. will – at its own choice – repair or replace the product free of charge. Remedies for breach of express warranties herein are limited to repair or replacement of the product.

In no event shall damages for breach of any warranty include any consequential damages or exceed the cost of non-conforming goods sold.

Any questions?

Contact Vicair B.V. at info@vicair.com or contact your country's Vicair distributor.

Beste klant,

Bedankt voor uw keuze van dit Vicair® product. Wij zijn er van overtuigd dat u de eenvoud, betrouwbaarheid en de hoogwaardige werking snel zult waarderen. Voor een snelle ingebruikname volgt u de aanwijzingen op de bijgeleverde 'Quick Installation Guide'. Daarnaast dient u deze handleiding volledig te lezen en te begrijpen alvorens het product te gebruiken. Bewaar deze handleiding en de 'Quick Installation Guide' goed.

Voor meer informatie of het bestellen van handleidingen, neem contact op met de distributeur in uw land.

Ga naar vicair.com voor informatie over uw distributeur.

INTRODUCTIE

De Vicair® Vector O2 is een rolstoelzitkussen met een anatomisch gevormd zitvlak dat een zeer hoge mate van stabiliteit biedt aan personen met een hoog risico op decubitus. Het is tevens een hoogwaardige toevoeging aan een decubitusbehandelplan (graad I – IV).

INDICATIES


Het wordt gebruikt voor comfort en stabiele lichaamsondersteuning, het verbeteren van de lichaamshouding en het helpen voorkomen van decubitus.

Het is tevens een hoogwaardige toevoeging aan een decubitusbehandelplan (graad I – IV).

CONTRA-INDICATIES

Bij gebruik volgens de instructies, zijn er geen contra-indicaties bekend.

BELANGRIJKSTE ONDERDELEN

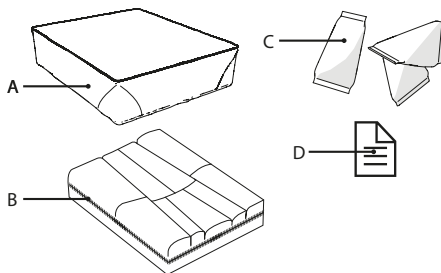

- A. Kussenhoes
- B. Kussen
- C. SmartCells™, verdeeld over 9 compartimenten
- D. Quick Installation Guide

ALGEMENE PRODUCTSPECIFICATIES

Productnaam:	Vicair Vector O2
Fabrikant:	Vicair B.V., Nederland
Garantie:	24 maanden
Gebruikte materialen:	Latex vrij
Gewicht (excl. hoes):	Kleinste maat: 0,5 kg / 1.1 lbs Medium maat: 0,8 kg / 1.8 lbs Grootste maat: 1,3 kg / 2.9 lbs
Verkrijgbare maten:	Zie maatoverzicht achterin de handleiding
Kussen:	Bovenzijde polyester stof met polyurethaan coating, onderzijde polyester mesh stof
Vulling:	Luchtgevulde SmartCells met low-friction coating

O2 Top Cover kussenhoes:	Bovenkant: Gebreide polyester stof. Onderste rand: Polyester stof met polyurethaan antisliplaag.
-----------------------------	---

Alternatieve kussenhoezen

Comfair Cover: Bovenkant: Gebreide polyester stof. Zijden: Polyester 3D mesh stof. Onderkant: Polyester stof met polyurethaan antisliplaag.
Incotec Cover & Reversible Cover: Bovenkant: Gebreide polyester stof, gecoat met vloeistofbestendige, ademende polyurethaan. Onderkant: Polyester stof met polyurethaan antisliplaag.

Alle hoezen: Machinaal wasbaar. Voldoen aan EN1021-1, EN1021-2 en CAL117.

VOORZORGSMAATREGELEN EN VEILIGHEIDSISTRUCTIES

Een Vicair rolstoel zitkussen mag alleen gebruikt worden als een rolstoel zitkussen. Ieder ander gebruik wordt gezien als oneigenlijk gebruik. Vicair B.V. kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele schade veroorzaakt door oneigenlijk, verkeerd of onverstandig gebruik. Zorg ervoor dat u deze handleiding volledig leest en begrijpt.

Waarschuwing! Vicair B.V. Raadt aan om dit product te installeren onder begeleiding van een therapeut of ondersteunend technisch adviseur.

Waarschuwing! Uw staartbeen en bekken mogen de bodem van het kussen niet raken. Het controleren op doorzitten moet worden gedaan tijdens het eerste gebruik en na aanpassingen aan de vulling van uw kussen.

Waarschuwing! Controleer uw huid regelmatig op roodheid, met name gedurende de eerste dagen. Indien er roodheid optreedt en dit na 15 minuten niet verdwenen is, raadpleeg dan uw therapeut of hulpmiddelenadviseur.

Waarschuwing! Vicair B.V. raadt aan om de vulgraad aan te passen onder direct toezicht van uw therapeut of hulpmiddelenadviseur.

Waarschuwing! In geval van vervuiling met lichaamsvloeistoffen en bij het gebruik van het product door een andere gebruiker moet het product gedesinfecteerd worden om kruisbesmetting te voorkomen.

Waarschuwing! Controleer het product elke drie maanden op slijtage en kapotte cellen. In geval van ernstige schade of een groot aantal kapotte cellen, dient het gebruik van het product gestaakt te worden. Raadpleeg uw hulpmiddelenadviseur.

Voorzichtig! Gebruik of bewaar dit product niet dichtbij open vuur of een sterke hittebron.

Voorzichtig! Niet chemisch reinigen, stomen of autoclaveren. Het product is niet bestand tegen hoge temperaturen of druk. Wanneer de gegeven reinigingsinstructies niet gevolgd worden, is de kans zeer groot dat het product en/of de hoes van het product sneller slijten.

Voorzichtig! Gebruik geen agressieve of schurende schoonmaakmiddelen of scherpe voorwerpen om het kussen te reinigen.

Voorzichtig! Plaats de bovenkant van het Vicair O2 kussen niet tegen het glas van de wasmachinedeur.

Voorzichtig! Zorg ervoor dat het kussen niet in contact kan komen met de wielspaken van uw rolstoel.

Voorzichtig! Overmatig wassen kan de veroudering van dit product versnellen.

Opmerking! De vulgraad kan licht afwijken van de standaardwaarde (zie productetiket).

INSTALLATIE

Waarschuwing! Vicair B.V. Raadt aan om dit product te installeren onder begeleiding van een therapeut of ondersteunend technisch adviseur.

Voorzichtig! Zorg ervoor dat het kussen niet in contact kan komen met de wielspaken van uw rolstoel.

Let op! Gebruik het kussen altijd met kussenhoes.

Let op! Zorg voor het installeren dat de zitting van de rolstoel schoon en vetvrij is.

Tip: Wanneer u liever geen gebruik maakt van de klittenband, kunt u de klittenbandstrips verwijderen. Let erop dat de strips die aan de onderkant van het kussen en/of de kussenhoes zitten, niet verwijderd kunnen worden.

Volg de volgende stappen wanneer u een O2 Top Cover kussenhoes gebruikt

Deze stappen komen overeen met de installatieafbeeldingen 1 – 6 op de Quick Installation Guide:

- Controleer de maat van het kussen. Breedte (X) van het kussen en de zitting moeten overeen komen. Indien het kussen steunt tegen armsteunen of zijschotten, dan mag de kussenbreedte tot maximaal 2,5 cm (1") breder dan de zitting zijn. Diepte (Y) van het kussen en de zitting moeten overeen komen.
- Controleer of de maat van de kussenhoes overeenkomt met de maat van het kussen.
- Verwijder het bescherm papier van de zelfklevende klittenbandstrips die aan de onderzijde van het kussen.
- Plaats het kussen en druk het stevig aan.
- Plaats de O2 Top Cover over de bovenzijde van het kussen.
- Haal het lusje aan de achterzijde van het kussen door het 'knoopsgat' achterin de hoes.
- Ga enkele minuten op het kussen zitten, zodat het zich aan de vorm van uw lichaam kan aanpassen.
- Pas indien nodig de voetsteunen aan.

Alternatieve kussenhoezen

Voer de volgende stappen uit bij het gebruik van de Comfair Cover, Incotec Cover of Reversible Cover.

Let op: De Reversible Cover wordt geleverd met de koele, ademende kant aan de buitenkant.

Als u de vloeistofbestendige kant van deze hoes nodig heeft, rits eerst het bovenste gedeelte van de hoes volledig los van het onderste gedeelte, draai het bovenste gedeelte binnenste buiten en rits het weer vast aan het onderste gedeelte.

- Controleer de maat van het kussen. Breedte (X) van het kussen en de zitting moeten overeen komen. Indien het kussen steunt tegen armsteunen of zijschotten, dan mag de kussenbreedte tot maximaal 2,5 cm (1") breder dan de zitting zijn. Diepte (Y) van het kussen en de zitting moeten overeen komen.
- Controleer of de maat van de kussenhoes overeenkomt met de maat van het kussen.
- Verwijder de klittenbandstrips die aan de onderkant van het kussen zitten. Let erop dat de strips die aan de onderkant van het kussen zitten, niet verwijderd kunnen worden.
- Plaats het kussen in de kussenhoes.
- Haal het lusje aan de onder-achterzijde van het kussen door het metalen ringetje in de hoes.
- Sluit de rits. Zorg ervoor dat u tijdens het sluiten het kussen niet beschadigt.
- Verwijder het bescherm papier van de zelfklevende klittenbandstrips die aan de kussenhoes vastzitten.
- Plaats het kussen en druk het stevig aan.
- Ga enkele minuten op het kussen zitten, zodat het zich aan de vorm van uw lichaam kan aanpassen.
- Pas zo nodig de voetsteun(en) van uw rolstoel aan.

Controleren op doorzitten:

Afbeelding 7 - Quick Installation Guide

Waarschuwing! Uw staartbeen en bekken mogen de bodem van het kussen niet raken.

Het controleren op doorzitten moet worden gedaan tijdens het eerste gebruik en na aanpassingen aan de vulling van uw kussen.

Waarschuwing! Vicair B.V. raadt aan om de vulgraad aan te passen onder direct toezicht van uw therapeut of hulpmiddelenadviseur.

- Controleer op doorzitten, nadat u ongeveer 5 minuten op het kussen heeft gezeten.
- Vraag uw therapeut of hulpmiddelenadviseur om een hand tussen uw billen en het Vicair-kussen te schuiven, terwijl u voorover leunt.
- Vraag uw therapeut of hulpmiddelenadviseur om te controleren of uw laagste botuitsteeksels door ten minste 2,5 cm SmartCells ondersteund worden. Dit voorkomt dat ze het zitvlak van de rolstoel raken.
- Gebruik het kussen niet als doorzitten optreedt. In de meeste gevallen zal het probleem kunnen worden opgelost door de vulgraad van de compartimenten aan te passen.

GEBRUIK

Controleren op roodheid van de huid

Afbeelding 8 - Quick Installation Guide

Waarschuwing! Controleer uw huid regelmatig op roodheid, met name gedurende de eerste dagen. Indien er roodheid optreedt en dit na 15 minuten niet verdwenen is, raadpleeg dan uw therapeut of hulpmiddelenadviseur.

Aanpassen van de vulgraad

Waarschuwing! Vicair B.V. raadt aan om de vulgraad aan te passen onder direct toezicht van uw therapeut of hulpmiddelenadviseur.

Ready for use

Dit Vicair product is 'Ready for use': klaar voor gebruik. Het heeft zijn eigen unieke vulgraad, afhankelijk van de maat en het model.

Desondanks is het – indien noodzakelijk – mogelijk om de vulgraad aan te passen door SmartCells toe te voegen aan of te verwijderen uit de compartimenten. U kunt de originele vulgraad vinden op het kussenlabel.

Omgevingscondities voor gebruik en opslag

Voorzichtig! Gebruik of bewaar dit product niet dichtbij open vuur of een sterke hittebron.

• Gebruikersgewicht:

Minimum: 15 kg / 33 lbs,
maximum: 250 kg / 551 lbs

• Temperatuur:

Minimum: -20 °C / 4 °F,
maximum: 55 °C / 131 °F

• Gebruik op grote hoogte

Opmerking! Vicair B.V. raadt aan om het kussen niet boven 2400 m (8000 ft) boven zeeniveau of onder 50 m (164 ft) onder zeeniveau te gebruiken. Elke SmartCell is namelijk gevuld met lucht, waardoor het kussen zich anders kan gedragen op grote hoogte of in een vliegtuig. Onder dergelijke omstandigheden kan de stevigheid van het kussen worden aangepast door enkele cellen uit elk compartiment te verwijderen.

• Luchtvochtigheid:

Minimum: 0%, maximum 100%

Dagelijks opschudden

Vicair B.V. beveelt aan om uw Vicair kussen dagelijks op te schudden voor gebruik.

Gebruik in motorvoertuigen

Verplaats, indien mogelijk, vanuit de rolstoel en in een door de autofabrikant geplaatste autostoel zonder het kussen, en gebruik de veiligheidsgordels van de auto.

Als alternatief voor uw Vicair rolstoelkussen kan de Vicair Alrounder O2 gebruikt worden (die aan het lichaam kan worden bevestigd), als u aanvullende bescherming in een door de autofabrikant geplaatste autostoel nodig heeft tijdens vervoer.

Wanneer de rolstoel als autostoel gebruikt wordt dienen de geldende regels en voorschriften, ten aanzien van het vastzetten van de rolstoel en de rolstoelgebruiker gedurende het vervoer, gevolgd te worden. Er zijn geen gegevens beschikbaar over de invloed op de veiligheid van een Vicair rolstoelkussen die gebruikt wordt in een bij botsingen geteste rolstoel.

Het kussen door een ander persoon laten gebruiken

Het product is geschikt voor herhaald gebruik. Het aantal malen dat het gebruikt kan worden is afhankelijk van hoe vaak en op welke manier het product gebruikt wordt. Voordat een ander het product mag gebruiken, dient het eerst grondig gereinigd en gedesinfecteerd te worden. Zie het hoofdstuk 'Onderhoud en reiniging' voor instructies.

Let op! Zorg ervoor dat het kussen correct is aangepast aan de nieuwe gebruiker.

Verwachte levensduur

De verwachte levensduur van dit product is vijf jaar, bij gebruik volgens de veiligheidsinstructies, met de juiste onderhoudsintervallen en correct gebruik, zoals in deze handleiding vermeld staat. De effectieve levensduur kan afhankelijk van de frequentie en intensiteit van het gebruik variëren.

De kussenhoes vervangen

Vicair B.V. beveelt aan om bij normaal gebruik de kussenhoes ieder jaar te vervangen. Hoezen kunnen los besteld worden.

Het product weggooien

Het weggooien en recyclen van product en verpakking moet worden uitgevoerd overeenkomstig de hiervoor geldende regelgeving. Zorg ervoor dat het product voor het weggooien is gereinigd, ter voorkoming van kruisbesmetting.

ONDERHOUD EN REINIGING

Waarschuwing! Controleer het product elke drie maanden op slijtage en kapotte cellen. In geval van ernstige schade of een groot aantal kapotte cellen, dient het gebruik van het product gestaakt te worden. Raadpleeg uw hulpmiddelenadviseur.

Voorzichtig! Niet chemisch reinigen, stomen of autoclaveren. Het product is niet bestand tegen hoge temperaturen of druk. Wanneer de gegeven reinigingsinstructies niet gevolgd worden, is de kans zeer groot dat het product en/of de hoes van het product sneller slijten.

Voorzichtig! Gebruik geen agressieve of schurende schoonmaakmiddelen of scherpe voorwerpen om het kussen te reinigen.

Voorzichtig! Plaats de bovenkant van het Vicair O2 kussen niet tegen het glas van de wasmachinedeur.

Voorzichtig! Overmatig wassen kan de veroudering van dit product versnellen.

Het reinigen van de Vicair Vector O2

• Het reinigen van de kussenhoes van de Vicair Vector O2

De kussenhoes is machinaal wasbaar. Volg hiervoor de wasinstructies op het label aan de binnenkant van de hoes.
(60 °C= 140 °F)



- **Het reinigen van het Vicair Vector O2 kussen**

Uw Vicair O2-kussen kan in de machine op 60 °C/140 °F worden gewassen in een anti-creuk programma en met een mild wasmiddel. U hoeft de SmartCells niet te verwijderen als u het kussen in de machine wast. Zorg ervoor dat de bovenkant van het kussen niet tegen het glas van de wasmachinedeur wordt geplaatst. Laad de machine niet met meer dan de helft van het maximale laadgewicht. De centrifugesnelheid moet worden verlaagd. Wanneer u een machine met roerwerk gebruikt, zorg er dan voor dat het kussen vrij in de trommel kan bewegen. Geen chloorbleekmiddel gebruiken en niet chemisch reinigen, stomen of autoclaveren! Droog uw Vicair O2-kussen niet in de droogtrommel, maar laat het aan de lucht drogen (5-6 uur). U kunt de draagband gebruiken om uw Vicair O2-kussen aan de lucht te drogen.



Het desinfecteren van uw Vicair Vector O2

Waarschuwing! In het geval van verontreiniging met lichaamsvloeistoffen of voordat dit product door een ander persoon gebruikt wordt, moet het product gedesinfecteerd worden om kruisbesmetting te voorkomen. Reinig het kussen en de kussenhoes zoals hierboven beschreven. Gebruik bij voorkeur een antibacterieel middel. Spuit na het wassen een desinfecterend middel op het kussen en de kussenhoes. Buig de compartimenten naar buiten, zodat het middel goed in de spleten komt.

MELDEN VAN ERNSTIGE INCIDENTEN

Ernstige incidenten die voortkomen uit het gebruik van de producten van Vicair dienen zowel bij de fabrikant als de betreffende daarvoor bevoegde instantie gemeld te worden.

GARANTIE

Ga naar www.vicair.com voor volledige informatie inzake garantieprocedures en garantievoorwaarden.

Vicair B.V. biedt een beperkte garantie op productie- en materiaalfouten, onder voorwaarde dat het product op normale wijze is gebruikt. Elke schade die ontstaat door abnormaal gebruik, onjuist hanteren, reinigen of nalatigheid, valt niet onder deze garantie.

Garantieperiode

Vanaf originele aanschafdatum: 24 maanden. De SmartCells in dit Vicair O2 kussen hebben een levenslange garantieperiode.

Indien er binnen bovengenoemde garantieperiode productie- of materiaalfouten optreden, zal Vicair B.V. – naar eigen inzicht en goeddunken – het product kosteloos repareren dan wel vervangen.

De garantie beperkt zich tot het repareren of vervangen van het product.

In geen geval zullen de garantiekosten eventuele gevolgschade dekken of kosten van de verkochte non-conforme producten overstijgen.

Heeft u vragen?

Neem contact op met Vicair B.V. via info@vicair.com of neem contact op met de Vicair distributeur in uw land.

Lieber Kunde,

Vielen Dank, dass Sie sich für ein Vicair® Produkt entschieden haben. Wir sind uns sicher, dass Sie von der einfachen Anwendung, der Zuverlässigkeit und den hervorragenden Eigenschaften überzeugt sein werden. Wenn Sie Ihr Produkt gleich nutzen möchten, können Sie die dem Kissen beiliegende Kurzanleitung benutzen. Sie sollten sich jedoch vor der Verwendung zusätzlich mit dieser Gebrauchsanweisung vertraut machen. Bewahren Sie die Kurzanleitung und diese Gebrauchsanweisung zum späteren Nachschlagen auf.

Für weitere Informationen oder um eine Gebrauchsanweisungen zu bestellen bzw. nachzubestellen, kontaktieren Sie bitte die Handelsvertretung in Ihrem Land. Informationen zu Händlern und Niederlassungen finden Sie auf vicair.com.

EINLEITUNG

Das Vicair® Vector O2 ist ein Rollstuhlsitzkissen mit anatomisch geformter Sitzfläche, das Personen mit hohem Risiko für Druckverletzungen ein besonders hohes Mass an Stabilität bietet. Es ist ausserdem eine hervorragende Ergänzung zu einem Druckverletzungs-Behandlungsplan (Stufe I–IV).

INDIKATIONEN


Es bietet Sitzkomfort und eine stabile Stütze für den Körper, um die Körperhaltung zu verbessern und hilft Druckverletzungen zu vermeiden.

Es ist ausserdem eine hervorragende Ergänzung zu einem Druckverletzungs-Behandlungsplan (Stufe I–IV).

KONTRAINDIKATIONEN

Bei bestimmungsgemäßem Gebrauch sind keine Kontraindikationen bekannt.

HAUPTBESTANDTEILE

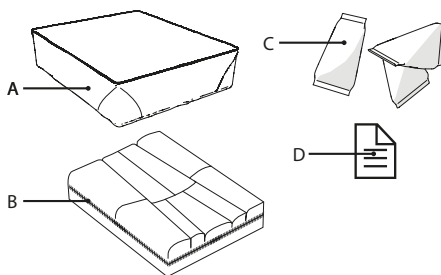

- A. Kissenbezug
- B. Kissen
- C. SmartCells™, in 9 Kammern
- D. Kurzanleitung (Quick Installation Guide)

ALLGEMEINE PRODUKTDATEN

Name des Produkts:	Vicair Vector O2
Hergestellt von:	Vicair B.V., Niederlande
Garantie:	24 Monate
Verwendete Materialien:	Komplett latexfrei
Gewicht (ohne Bezug):	Kleinste Größe: 0,5 kg / 1.1 lbs Mittlere Größe: 0,8 kg / 1.8 lbs Größte Größe: 1,3 kg / 2.9 lbs
Verfügbare Größen:	Beachten Sie die Tabelle am Ende der Gebrauchsanweisung

Kissen:	Oberseite aus Polyestergewebe mit Polyurethan-Beschichtung, Unterseite aus Polyesternetzgewebe
Füllung:	Luftgefüllte SmartCells mit reibungsarmer Beschichtung
O2 Top Cover Kissenbezug:	Oberseite: Polyesterstrickgewebe. Untere Einfassung: Polyestergewebe mit rutschhemmender PU-Beschichtung.

Optional erhältliche Kissenbezüge

Comfair Cover Kissenbezug: Oberseite: Polyesterstrickgewebe. Seiten: 3D-Netzgewebe aus Polyester. Unterseite: Polyestergewebe mit rutschhemmender PU-Beschichtung.
Incotec Cover & Reversible Kissenbezüge: Oberseite: Polyesterstrickgewebe, beschichtet mit flüssigkeitsabweisendem, atmungsaktivem Polyurethan. Unterseite: Polyestergewebe mit rutschhemmender PU-Beschichtung.

Alle Bezüge: Maschinenwaschbar. Die Bezüge entsprechen EN1021-1, 1021-2 und CAL117.

VORSICHTSMASSNAHMEN UND SICHERHEITSHINWEISE

Ein Vicair Rollstuhlsitzkissen darf nur als Rollstuhlsitzkissen verwendet werden. Jede Zweckentfremdung dieses Produktes gilt als missbräuchliche Verwendung. Vicair B.V. übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch missbräuchliche oder unsachgemäße Nutzung oder Fahrlässigkeit verursacht wurden. Lesen Sie diese Gebrauchsanweisung vollständig und vergewissern Sie sich, dass Sie alle Angaben verstanden haben.

Achtung! Vicair B.V. empfiehlt, das Produkt unter direkter Aufsicht eines Therapeuten oder Hilfsmittelberaters anzupassen.

Achtung! Ihr Steißbein und Ihre Sitzbeinknochen dürfen den Boden des Kissens nicht berühren. Führen Sie bei der ersten Benutzung und nach jeder Füllgradveränderung eine Durchsitzkontrolle durch.

Achtung! Überprüfen Sie Ihre Haut regelmässig auf Rötungen, vor allem in den ersten Tagen. Falls Hautrötungen auftreten, die nach 15 Minuten nicht wieder abklingen, wenden Sie sich bitte an Ihren Therapeuten oder Hilfsmittelberater.

Achtung! Vicair B.V. empfiehlt Ihnen, den Füllgrad unter direkter Aufsicht eines Therapeuten oder Hilfsmittelberaters anzupassen.

Achtung! Falls das Kissen durch Körperausscheidungen verschmutzt oder an einen anderen Benutzer weitergegeben wird, muss es desinfiziert werden, um eine Kreuzkontamination zu verhindern.

Achtung! Überprüfen Sie das Produkt alle drei Monate auf Verschleiss und defekte Zellen. Im Fall einer schweren Beschädigung oder einer grösseren Anzahl defekter Zellen benutzen Sie das Kissen nicht weiter. Wenden Sie sich an Ihren Hilfsmittelberater.

Vorsicht! Verwenden bzw. lagern Sie das Produkt nicht in der Nähe offener Flammen oder einer Wärmequelle mit hohen Temperaturen.

Vorsicht! Reinigen Sie das Produkt nicht mit heissem Dampf oder Hochdruck und lassen Sie es nicht chemisch reinigen. Das Produkt hält übermässiger Hitze oder hohem Druck nicht stand. Wird die Reinigungsanleitung nicht befolgt, kann es sein, dass das Produkt und/oder der Bezug deutlich schneller altern.

Vorsicht! Verwenden Sie keine aggressiven oder scheuernden Reinigungsmittel oder scharfen Gegenstände zur Reinigung des Kissens.

Vorsicht! Achten Sie darauf, dass die Oberseite des Vicair O2 Kissens nicht am Glas der Waschmaschinentür anliegt.

Vorsicht! Achten Sie darauf, dass das Kissen nicht in die Radspeichen gelangt.

Vorsicht! Übermäßiges Waschen kann zu einer vorzeitigen Alterung dieses Produkts führen.

Hinweis! Der Füllgrad kann geringfügig vom Standard (siehe Produktetikett) abweichen.

ANPASSUNG

Achtung! Vicair B.V. empfiehlt, das Produkt unter direkter Aufsicht eines Therapeuten oder Hilfsmittelberaters anzupassen.

Vorsicht! Achten Sie darauf, dass das Kissen nicht in die Radspeichen gelangt.

Hinweis! Verwenden Sie das Kissen nur mit Bezug.

Hinweis! Achten Sie darauf, dass der Sitz des Rollstuhls sauber und fettfrei ist.

Tipp: Wenn Sie das Klettband nicht verwenden möchten, können Sie die Klettstreifen abziehen. Beachten Sie bitte, dass sich die an der Unterseite des Kissens und/oder am Kissenbezug befestigten Klettstreifen nicht entfernen lassen.

Befolgen Sie die folgenden Schritte, wenn Sie den O2 Top Cover Kissenbezug nutzen

Diese Schritte entsprechen den Abbildungen 1 – 6 im Quick Installation Guide:

- Kontrollieren Sie die Größe des Kissens. Die Breite (X) des Kissens sollte mit der Breite der Rollstuhlsitzfläche übereinstimmen. Falls das Kissen seitlich von Armlehnen oder Seitenteilen begrenzt wird, darf es bis zu 2,5 cm (1") breiter sein. Die Tiefe (Y) des Kissens sollte mit der Länge der Rollstuhlsitzfläche übereinstimmen.
- Überprüfen Sie, ob die Größe des Bezugs mit der Größe des Kissens übereinstimmt.

- Entfernen Sie den Schutzstreifen von den selbsthaftenden Klettstreifen an der Unterseite des Kissens.
- Fixieren Sie das Kissen mit kräftigem Druck am Rollstuhl.
- Beziehen Sie das Kissen mit dem O2 Top Cover Kissenbezug.
- Ziehen Sie die Schlaufe an der Rückseite des Kissens durch das "Knopfloch" im hinteren Teil des Bezugs.
- Setzen Sie sich einige Minuten auf das Kissen, damit es sich Ihrer Körperform anpassen kann.
- Bei Bedarf stellen Sie die Fussstützen ein.

Optional erhältliche Kissenbezüge

Führen Sie die folgenden Schritte aus, wenn Sie den Comfair Cover, Incotec Cover oder Reversible Cover Kissenbezug verwenden. Hinweis: Bei Auslieferung des wendbaren Reversible Cover Kissenbezugs ist immer die kühle, atmungsaktive Seite nach außen gerichtet. Wenn Sie die flüssigkeitsabweisende Seite dieses Bezugs verwenden möchten: öffnen Sie den Reißverschluss und trennen Sie zunächst das Oberteil des Kissenbezugs vollständig vom Unterteil, anschließend das Oberteil nach außen wenden und wieder am Unterteil befestigen.

- Kontrollieren Sie die Größe des Kissens. Die Breite (X) des Kissens sollte mit der Breite der Rollstuhlsitzfläche übereinstimmen. Falls das Kissen seitlich von Armlehnen oder Seitenteilen begrenzt wird, darf es bis zu 2,5 cm (1") breiter sein. Die Tiefe (Y) des Kissens sollte mit der Länge der Rollstuhlsitzfläche übereinstimmen.
- Überprüfen Sie, ob die Größe des Bezugs mit der Größe des Kissens übereinstimmt.
- Ziehen Sie die Klettstreifen von der Unterseite des Kissens ab. Beachten Sie bitte, dass sich die an der Unterseite des

- Kissens befestigten Klettstreifen nicht entfernen lassen.
- Beziehen Sie das Kissen mit dem gewünschten Bezug.
- Ziehen Sie nun die Schlaufe durch die Öffnung im Bezug.
- Schließen Sie den Reißverschluss. Achten Sie dabei darauf, dass Sie das Kissen nicht beschädigen.
- Entfernen Sie den Schutzstreifen von den selbsthaftenden Klettstreifen am Kissenbezug.
- Fixieren Sie das Kissen mit kräftigem Druck am Rollstuhl.
- Setzen Sie sich einige Minuten auf das Kissen, damit es sich Ihrer Körperform anpassen kann.
- Verstellen Sie gegebenenfalls die Fußstütze(n).

Durchsitzkontrolle:

Abbildung 7 - Quick Installation Guide

Achtung! Ihr Steißbein und Ihre Sitzbeinknochen dürfen den Boden des Kissens nicht berühren. Führen Sie bei der ersten Benutzung und nach jeder Füllgradveränderung eine Durchsitzkontrolle durch.

Achtung! Vicair B.V. empfiehlt Ihnen, den Füllgrad unter direkter Aufsicht eines Therapeuten oder Hilfsmittelberaters anzupassen.

- Nachdem Sie ca. 5 Minuten auf dem Kissen gesessen sind, kontrollieren Sie, ob Sie durchsitzen.
- Lassen Sie Ihren Therapeuten oder Hilfsmittelberater eine Hand zwischen Ihr Gesäss und das Vicair-Kissen schieben, während Sie sich nach vorne beugen.
- Bitten Sie Ihren Therapeuten oder Hilfsmittelberater zu überprüfen, ob die bei Ihnen am tiefsten liegenden, vorstehenden Knochen von mindestens 2,5 cm / 1" hohen SmartCells gestützt werden. Das verhindert, dass diese den Sitz des Rollstuhls berühren.

- Verwenden Sie das Kissen nicht, falls Sie durchsitzen. In den meisten Fällen verschafft eine Anpassung des Füllgrads der Kammern Abhilfe.

VERWENDUNG

Kontrolle auf Hautrötungen

Abbildung 8 - Quick Installation Guide

Achtung! Überprüfen Sie Ihre Haut regelmässig auf Rötungen, vor allem in den ersten Tagen. Falls Hautrötungen auftreten, die nach 15 Minuten nicht wieder abklingen, wenden Sie sich bitte an Ihren Therapeuten oder Hilfsmittelberater.

Anpassung des Füllgrads

Achtung! Vicair B.V. empfiehlt Ihnen, den Füllgrad unter direkter Aufsicht eines Therapeuten oder Hilfsmittelberaters anzupassen.

Gebrauchsfertiges Produkt

Dieses Vicair-Produkt ist sofort einsatzbereit. Jedes Kissen weist abhängig von seiner Größe und dem Modell einen individuellen Füllgrad auf. Allerdings kann der Füllgrad – sollte dies notwendig sein – durch Entnehmen oder Hinzufügen von SmartCells aus den/in die verschiedenen Kammern individuell angepasst werden. Angaben zum werksseitigen Füllgrad finden Sie auf dem am Kissen angebrachten Etikett.

Bedingungen für die Verwendung und Lagerung des Kissens

Vorsicht! Verwenden bzw. lagern Sie das Produkt nicht in der Nähe offener Flammen oder einer Wärmequelle mit hohen Temperaturen.

Benutzergewicht:

Minimum: 15 kg / 33 lbs,
Maximum: 250 kg / 551 lbs

- **Temperatur:**
Minimum: -20 °C / 4 °F,
Maximum: 55 °C / 131 °F
- **Benutzung in großen Höhen**
Hinweis! Vicair B.V. empfiehlt, das Kissen nicht in Höhen über 2400 m (8000 ft) über dem Meeresspiegel bzw. 50 m (164 ft) unter dem Meeresspiegel zu benutzen. Da jede SmartCell mit Luft gefüllt ist, kann sich das Kissen anders verhalten, wenn es in grossen Höhen oder in einem Flugzeug verwendet wird. Unter diesen Umständen kann die Härte des Sitzkissens durch die Entnahme einiger Zellen aus jeder Kammer angepasst werden.
- **Luftfeuchtigkeit:**
Minimum: 0 %, Maximum 100 %

Tägliches Aufschütteln

Vicair B.V. empfiehlt Ihnen, das Vicair Kissen jeden Tag vor der Verwendung aufzuschütteln.

Verwendung von Vicair Sitzkissen in motorisierten Fahrzeugen

Wann immer möglich, wechseln Sie vom Rollstuhl in den vom Fahrzeughersteller installierten Fahrzeugsitz ohne Kissen und verwenden Sie das unfallgeprüfte Insassenrückhaltesystem des Fahrzeugs. Als Alternative zu Ihrem Vicair Rollstuhlkissen können Sie den Vicair Allrounder O2 benutzen (der am Körper des Benutzers befestigt wird), falls Sie in einem vom Hersteller installierten Fahrzeugsitz während der Fahrt zusätzlichen Schutz benötigen. Wenn der Rollstuhl als Fahrzeugsitz eingesetzt wird, sind die geltenden Regeln und Vorschriften zur Sicherung des Rollstuhls und des Rollstuhlbenutzers während der Fahrt zu beachten. Es liegen keine Daten über den Einfluss eines Vicair Rollstuhlkissens auf die Sicherheit in einem unfallgeprüften Rollstuhl vor.

Wiederverwendbar - Weitergabe des Produkts an andere Benutzer

Das Produkt ist für eine mehrfache Verwendung geeignet. Wie oft es verwendet werden kann, hängt davon ab, wie häufig und auf welche Weise das Produkt eingesetzt wird. Das Produkt muss gründlich gereinigt und desinfiziert werden, bevor es von einer anderen Person benutzt wird. Eine entsprechende Anleitung finden Sie im Kapitel „Pflege und Reinigung“.

Hinweis! Stellen Sie sicher, dass das Kissen korrekt an die andere Person angepasst ist.

Erwartete Lebensdauer

Die voraussichtliche Lebensdauer dieses Produktes beträgt fünf Jahre, wenn es in Übereinstimmung mit den Sicherheitshinweisen, Wartungsintervallen und der korrekten Verwendung, die in dieser Gebrauchsanweisung angegeben sind, verwendet wird.

Die effektive Lebensdauer kann je nach Häufigkeit und Intensität der Nutzung abweichen.

Wechseln des Aussenbezugs

Bei normaler Benutzung empfiehlt Vicair B.V., den Kissenbezug einmal jährlich zu wechseln. Ersatzbezüge sind separat erhältlich.

Entsorgung

Die Entsorgung und das Recycling von verwendeten Produkten sowie der Verpackung müssen den geltenden örtlichen Vorschriften genügen. Stellen Sie sicher, dass das Produkt vor der Entsorgung gereinigt wird, um jegliches Kontaminierungsrisiko zu vermeiden.

PFLEGE UND REINIGUNG

Achtung! Überprüfen Sie das Produkt alle drei Monate auf Verschleiss und defekte Zellen. Im Fall einer schweren Beschädigung oder einer grösseren Anzahl defekter Zellen benutzen Sie das Kissen nicht weiter. Wenden Sie sich an Ihren Hilfsmittelberater.

Vorsicht! Reinigen Sie das Produkt nicht mit heissem Dampf oder Hochdruck und lassen Sie es nicht chemisch reinigen. Das Produkt hält übermässiger Hitze oder hohem Druck nicht stand. Wird die Reinigungsanleitung nicht befolgt, kann es sein, dass das Produkt und/oder der Bezug deutlich schneller altern.

Vorsicht! Verwenden Sie keine aggressiven oder scheuernden Reinigungsmittel oder scharfen Gegenstände zur Reinigung des Kissens.

Vorsicht! Achten Sie darauf, dass die Oberseite des Vicair O2 Kissens nicht am Glas der Waschmaschinentür anliegt.

Vorsicht! Übermässiges Waschen kann zu einer vorzeitigen Alterung dieses Produkts führen.

Reinigung des Vicair Vector O2

- **Reinigung des Vicair Vector O2**

Kissenbezugs

Der Kissenbezug ist maschinenwaschbar. Befolgen Sie die Waschanleitung auf dem Label an der Innenseite des Bezugs.
(60 °C = 140 °F)



- **Reinigung des Vicair Vector O2 Kissens**

Ihr Vicair O2 Kissen ist bei 60 °C/ 140 °F im Schonwaschgang mit etwas mildem Waschmittel maschinenwaschbar. Sie müssen die SmartCells nicht entnehmen, bevor Sie das Kissen in die Waschmaschine geben. Achten Sie darauf, dass die Oberseite

des Kissens nicht am Glas der Waschmaschinentür anliegt. Beladen Sie die Waschmaschine nicht mit mehr als der Hälfte des maximalen Ladegewichts. Die Schleuderdrehzahl sollte reduziert werden. Achten Sie bei der Verwendung einer Maschine mit Agitator darauf, dass sich das Kissen innerhalb der Trommel frei bewegen kann. Verwenden Sie keine Chlorbleiche und lassen Sie das Kissen nicht chemisch reinigen, dampfreinigen oder autoklavieren! Trocknen Sie das Vicair O2 Kissen nicht im Wäschetrockner, sondern lassen Sie es an der Luft trocknen (5-6 Stunden). Sie können Ihr Vicair O2 Kissen zum Trocknen an der Schlaufe aufhängen.



Desinfizierung Ihres Vicair Vector O2

Achtung! Falls das Kissen durch Körperausscheidungen verschmutzt oder an einen anderen Benutzer weitergegeben wird, muss es desinfiziert werden, um Kreuzkontamination zu verhindern. Reinigen Sie das Kissen und den Bezug wie oben beschrieben. Verwenden Sie vorzugsweise ein antibakterielles Waschmittel. Sprühen Sie Ihr Kissen und den Bezug nach der Reinigung mit einem Desinfektionsmittel ein. Biegen Sie die Kammern nach außen, um sicherzugehen, dass das Spray auch in die Zwischenräume gelangt.

MELDUNG SCHWERWIEGENDER ZWISCHENFÄLLE

Schwerwiegende Zwischenfälle in Zusammenhang mit der Verwendung von Vicair-Produkten sind dem Hersteller und der jeweils zuständigen Behörde zu melden.

GARANTIE

Vollständige Informationen zu Garantiefällen sowie den allgemeinen Geschäftsbedingungen erhalten Sie auf www.vicair.com.

Vicair B.V. bietet eine eingeschränkte Garantie auf Herstellungs- und Materialfehler, vorausgesetzt das Produkt wurde normal genutzt. Beschädigungen durch unsachgemäße Nutzung, Handhabung, Reinigung oder Fahrlässigkeit sind von der Garantie ausgenommen.

Garantiezeitraum

Ab dem Kaufdatum: 24 Monate.

Für die SmartCells in diesem Vicair O2 Kissen gilt eine lebenslange Garantie.

Sollte innerhalb des Garantiezeitraums ein Herstellungs- oder Materialfehler auftreten, wird Vicair B.V. – nach eigenem Ermessen – das Produkt kostenfrei reparieren oder ersetzen. Im Garantiefall besteht lediglich Anspruch auf eine Reparatur oder einen Austausch des Produkts.

Der Garantieanspruch schließt in keinem Fall Entschädigungen für Folgeschäden oder Kosten ein, die den Wert der verkauften nicht-konformen Ware übersteigen.

Haben Sie noch Fragen?

Kontaktieren Sie Vicair B.V. unter info@vicair.com oder wenden Sie sich an den Vicair Händler in Ihrem Land.

Cher client,

Merci d'avoir choisi un produit Vicair®. Nous sommes certains que vous apprécierez la simplicité, la fiabilité et l'effet fantastique de ce produit. Pour une installation rapide, vous pouvez utiliser le guide d'installation rapide fourni avec votre coussin. Veuillez lire et comprendre ce manuel de l'utilisateur avant utilisation. Conservez le guide d'installation rapide et le présent manuel pour référence ultérieure.

Pour plus d'informations ou pour (re) commander des manuels, contactez le distributeur de votre pays.

Rendez-vous sur vicair.com pour des informations sur le distributeur.

INTRODUCTION

Le Vicair® Vector O2 est un coussin de siège pour fauteuil roulant avec une surface d'assise anatomique qui offre un très haut niveau de stabilité aux personnes présentant un risque élevé de développer des blessures de pression. Il s'agit aussi d'un ajout de haute performance à un plan de traitement des blessures de pression (stades I-IV).


INDICATIONS

Il est utilisé pour procurer confort et soutien stable du corps, pour améliorer la posture du corps et pour aider à prévenir les blessures. Il s'agit aussi d'un ajout de haute performance à un plan de traitement des blessures de pression (stades I-IV).

CONTRE-INDICATIONS

Lorsqu'il est utilisé dans les conditions prévues, il n'existe aucune contre-indication connue.

COMPOSANTS PRINCIPAUX

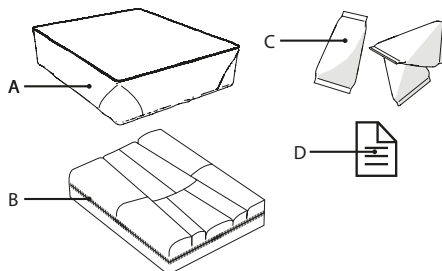

- A. Housse de coussin
- B. Coussin
- C. SmartCells™, placées dans 9 compartiments
- D. Guide d'installation rapide

SPÉCIFICATIONS PRODUIT GÉNÉRALES

Nom du produit :	Vicair Vector O2
Fabriqué par :	Vicair B.V., Pays-Bas
Garantie :	24 mois
Matériaux utilisés :	Sans latex
Poids (sans housse) :	Plus petite taille: 0,5 kg / 1.1 lbs Moyenne taille: 0,8 kg / 1.8 lbs Plus grand taille: 1,3 kg / 2.9 lbs
Tailles disponibles :	Voir la liste à l'arrière du manuel.
Coussin :	Tissu polyester avec revêtement polyuréthane, avec un fond en tissu maille polyester

Remplissage :	SmartCells remplies d'air avec revêtement faible friction
Housse de coussin O2 Top Cover :	Haut : Tissu polyester tricoté. Bord inférieur : Tissu polyester avec revêtement anti-dérapant en polyuréthane.

Housses de coussin alternatives

Comfair Cover : Haut : Tissu polyester tricoté.

Côtés : Tissu 3D polyester maillé. Bas : Tissu polyester avec revêtement anti-dérapant en polyuréthane.

Incotec Coveret Reversible Cover : Haut : Tissu polyester tricoté, enduit de polyuréthane perméable à l'air et résistant aux fluides. Bas : Tissu polyester avec revêtement anti-dérapant en polyuréthane.

Toutes les housses sont lavables en machine et conformes aux normes EN1021-1, 1021-2 et CAL117.

MISES EN GARDE ET CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Un coussin d'assise pour fauteuil roulant Vicair ne peut être utilisé que comme coussin d'assise de fauteuil roulant. L'utilisation de ce produit de toute autre manière est considérée comme abusive. Vicair B.V. ne peut être tenu responsable de dommages causés par une mauvaise utilisation, une utilisation incorrecte ou une négligence. Assurez-vous de lire et comprendre intégralement ce manuel.

Avertissement ! Vicair B.V. recommande d'installer le produit sous la supervision directe d'un thérapeute ou d'un professionnel de la technologie d'assistance.

Avertissement ! Votre coccyx et vos os pelviens ne doivent pas toucher le fond du coussin. Une vérification pour éviter tout talonnement doit

être effectuée lors de la première utilisation et après ajustements du remplissage du coussin.

Avertissement ! Examinez votre peau régulièrement pour voir s'il y a des rougeurs, surtout durant les premiers jours. Si des rougeurs apparaissent et ne disparaissent pas sous 15 minutes, consultez votre thérapeute ou professionnel de la technologie d'assistance.

Avertissement ! Vicair B.V. recommande d'ajuster le niveau de remplissage sous la supervision directe de votre thérapeute ou professionnel de la technologie d'assistance.

Avertissement ! En cas de salissure avec des liquides organiques et lors du transfert du produit à un autre utilisateur, le produit doit être désinfecté afin d'éviter toute contamination croisée.

Avertissement ! Sous trois mois, vérifier l'usure et les cellules dégonflées du produit. En cas de dommage grave ou de nombre important de cellules dégonflées, interrompre l'utilisation du produit. Consultez votre professionnel de la technologie d'assistance.

Attention ! Ne pas utiliser le produit ou le laisser à proximité d'une flamme ou d'une source de chaleur à haute température.

Attention ! Ne pas nettoyer le produit à sec, à la vapeur ou en autoclave. Le produit ne peut pas résister à une chaleur ou une pression excessive. Lorsque les instructions de nettoyage données ne sont pas suivies, il est très probable que le produit et/ou la housse du produit vieillisse(nt) plus rapidement.

Attention ! Ne pas utiliser de nettoyeurs agressifs ou abrasifs ou des objets pointus pour nettoyer le coussin.

Attention ! Ne pas placer le dessus du coussin Vicair O2 contre le verre de la porte du lave-linge.

Attention ! Assurez-vous que le coussin ne puisse pas interférer avec les rayons de la roue.

Attention ! Un lavage excessif peut influencer le vieillissement de ce produit.

Remarque ! Le degré de remplissage peut légèrement différer de la valeur par défaut (voir l'étiquette du produit).

INSTALLATION

Avertissement ! Vicair B.V. recommande d'installer le produit sous la supervision directe d'un thérapeute ou d'un professionnel de la technologie d'assistance.

Attention ! Assurez-vous que le coussin ne puisse pas interférer avec les rayons de la roue.

Remarque ! Toujours utiliser le coussin avec une housse.

Remarque ! Assurez-vous que le siège du fauteuil roulant soit propre et dégraissé.

Conseil : Si vous préférez ne pas utiliser la fermeture autoagrippante, vous pouvez enlever les bandes autoagrippantes. Notez que les bandes confectionnées au fond du coussin et/ou sur la housse du coussin ne peuvent pas être enlevées.

Effectuez les étapes suivantes lors de l'utilisation de la housse de coussin O2 Top Cover

Ces étapes correspondent aux images d'installation 1 - 6 du Quick Installation Guide :

- Vérifiez la taille du coussin. La largeur (X) du coussin et celle du siège doivent correspondre. Si le coussin repose sur des accoudoirs ou des protections latérales, la largeur peut aller jusqu'à 2,5 cm (1") de plus. La profondeur (Y) du coussin et celle du siège doivent correspondre.
- Vérifiez si la taille de la housse correspond à la taille du coussin.
- Enlevez le ruban de protection des bandes autoagrippantes autoadhésives attachées à le coussin.
- Posez le coussin en appuyant fermement.
- Placez la housse de coussin O2 Top Cover sur le dessus du coussin.
- Passer la boucle située à l'arrière du coussin à travers l'oeillet situé à l'arrière de la housse.
- Asseyez-vous sur le coussin pendant quelques minutes pour permettre au coussin de s'adapter à la votre morphologie.
- Si nécessaire, réglez les repose-pieds.

Housses de coussin alternatives

Effectuez les opérations suivantes lors de l'utilisation des Comfair Cover, Incotec Cover ou Reversible Cover.

Veuillez noter : La Reversible Cover est livrée avec le côté perméable à l'air à l'extérieur. Si vous souhaitez utiliser le côté résistant aux liquides de cette housse : commencez par ouvrir la fermeture à glissière de la partie supérieure de la housse, puis retournez la section supérieure et fermez-la sur la section inférieure.

- Vérifiez la taille du coussin. La largeur (X) du coussin et celle du siège doivent correspondre. Si le coussin repose sur des accoudoirs ou des protections latérales, la largeur peut aller jusqu'à 2,5 cm (1") de plus. La profondeur (Y) du coussin et celle du siège doivent correspondre.
- Vérifiez si la taille de la housse correspond à la taille du coussin.
- Enlevez les bandes autoagrippantes du bas du coussin. Notez que les bandes confectionnées au fond du coussin ne peuvent pas être enlevées.
- Insérez le coussin dans la housse.
- Passez la boucle à travers l'oeillet de la housse.
- Fermez la fermeture à glissière. Assurez-vous de ne pas endommager le coussin.
- Enlevez le ruban de protection des bandes autoagrippantes autoadhésives attachées à la housse du coussin.
- Posez le coussin en appuyant fermement.

- Asseyez-vous sur le coussin pendant quelques minutes pour permettre au coussin de s'adapter à la votre morphologie.
- Si nécessaire, ajustez le(s) repose-pieds.

Vérification du talonnement :

Image 7 - Quick Installation Guide

Avertissement ! Votre coccyx et vos os pelviens ne doivent pas toucher le fond du coussin. Une vérification pour éviter tout talonnement doit être effectuée lors de la première utilisation et après ajustements du remplissage du coussin.

Avertissement ! Vicair B.V. recommande d'ajuster le niveau de remplissage sous la supervision directe de votre thérapeute ou professionnel de la technologie d'assistance.

- Vérifiez le risque talonnement après être resté assis sur le coussin pendant environ 5 minutes.
- Laissez votre thérapeute ou professionnel de la technologie d'assistance glisser une main entre votre postérieur et le coussin Vicair tout en vous penchant en avant.
- Demandez à votre thérapeute ou professionnel de la technologie d'assistance de vérifier si vos proéminences osseuses les plus basses sont soutenues par au moins 2,5 cm / 1" de SmartCells. Cela les empêche de toucher le siège du fauteuil roulant.
- Ne pas utiliser le coussin si vous constatez un talonnement. Dans la plupart des cas, l'ajustement du remplissage des compartiments résout le problème.

UTILISATION

Vérifier si des rougeurs apparaissent sur la peau

Image 8 - Quick Installation Guide

Avertissement ! Examinez votre peau régulièrement pour voir s'il y a des rougeurs, surtout durant les premiers jours. Si des rougeurs apparaissent et ne disparaissent pas

sous 15 minutes, consultez votre thérapeute ou professionnel de la technologie d'assistance.

Ajustement du niveau de remplissage

Avertissement ! Vicair B.V. recommande d'ajuster le niveau de remplissage sous la supervision directe de votre thérapeute ou professionnel de la technologie d'assistance.

Prêt à l'emploi

Ce produit Vicair est prêt à l'emploi. Il dispose d'un taux de remplissage unique, selon la taille et le modèle. Cependant, si cela s'avère nécessaire le niveau de remplissage peut être ajusté en enlevant ou en ajoutant des SmartCells dans les différents compartiments. Vous pouvez trouver la configuration initiale pour le remplissage sur l'étiquette apposée sur le coussin.

Conditions d'utilisation et de stockage

Attention ! Ne pas utiliser le produit ou le laisser à proximité d'une flamme ou d'une source de chaleur à haute température.

- **Poids de l'utilisateur :**
Minimum : 15 kg / 33 lb,
maximum : 250 kg / 551 lbs
- **Température :**
Minimum : -20 °C / 4 °F,
maximum : 55 °C / 131 °F
- **Usage à haute altitude**

Remarque ! Vicair B.V. recommande de ne pas utiliser le coussin à une altitude supérieure à 2 400 m (8 000 pieds) au-dessus du niveau de la mer ou inférieure à 50 m (164 pieds) en dessous du niveau de la mer. Étant donné que chaque SmartCell est remplie d'air, le coussin peut se comporter différemment lorsqu'il est utilisé à haute altitude ou dans un avion. Dans ce cas, la fermeté du coussin peut être ajustée en enlevant quelques cellules de chaque compartiment.

- **Humidité atmosphérique :**
Minimum : 0 %, maximum 100 %

Redonner du gonflant quotidiennement

Vicair B.V. vous recommande de redonner du gonflant à votre Vicair coussin avant de l'utiliser au quotidien.

Réutilisation - Transfert du produit à un autre utilisateur

Dans la mesure du possible, transférez-vous hors du fauteuil roulant dans un siège de véhicule installé par le constructeur automobile sans le coussin, et utilisez le système de retenue des occupants du véhicule qui a fait l'objet de tests de collision.

Comme alternative pour votre coussin pour fauteuil roulant Vicair, le Vicair Allrounder O2 (qui peut être attaché au corps de l'utilisateur) peut être utilisé si vous avez besoin d'une protection supplémentaire dans un siège de véhicule installé par le constructeur automobile pendant le transport.

Lorsque le fauteuil roulant est utilisé comme siège de véhicule, les règles et réglementations applicables concernant la sécurisation du fauteuil roulant et de l'utilisateur du fauteuil roulant pendant le transport doivent être respectées.

Il n'existe aucunes données disponibles relatives à l'influence sur la sécurité de l'utilisation d'un coussin pour fauteuil roulant Vicair dans un fauteuil roulant soumis à des tests de collision.

Réutilisation - Transfert du produit à un autre utilisateur

Le produit convient pour un usage répété. Le nombre de fois où il peut être utilisé dépend de la fréquence et de la manière dont le produit est utilisé. Le produit doit être soigneusement nettoyé et désinfecté avant qu'une autre personne ne soit autorisée à l'utiliser. Pour les

instructions, voir le chapitre « Maintenance et nettoyage ».

Remarque ! Assurez-vous que le produit soit correctement ajusté pour le nouvel utilisateur.

Durée de vie attendue

La durée de vie attendue de ce produit est de cinq ans lorsqu'il est utilisé conformément aux consignes de sécurité, aux intervalles d'entretien et à une utilisation correcte, indiqués dans le présent manuel.

La durée de vie effective peut varier en fonction de la fréquence et de l'intensité d'utilisation.

Remplacement de la housse du coussin

En utilisation normale, Vicair B.V. recommande de remplacer la housse du coussin chaque année. Des housses de rechange peuvent être achetées séparément.

Traitement des déchets

Le traitement et le recyclage des produits usages et leur emballage doivent être conformes à la législation en vigueur. Assurez-vous que le produit a été préalablement nettoyé avant de le jeter afin d'éviter tout risque de contamination.

MAINTENANCE ET NETTOYAGE

Avertissement ! Sous trois mois, vérifier l'usure et les cellules dégonflées du produit. En cas de dommage grave ou de nombre important de cellules dégonflées, interrompre l'utilisation du produit. Consultez votre professionnel de la technologie d'assistance.

Attention ! Ne pas nettoyer le produit à sec, à la vapeur ou en autoclave. Le produit ne peut pas résister à une chaleur ou une pression excessive. Lorsque les instructions de nettoyage données ne sont pas suivies, il est très probable que le produit et/ou la housse du produit vieillisse(nt) plus rapidement.

Attention ! Ne pas utiliser de nettoyeurs agressifs ou abrasifs ou des objets pointus pour nettoyer le coussin.

Attention ! Ne pas placer le dessus du coussin Vicair O2 contre le verre de la porte du lave-linge.

Attention ! Un lavage excessif peut influencer le vieillissement de ce produit.

Nettoyage du Vicair Vector O2

• Nettoyage de la housse du Vicair Vector O2

La housse du coussin peut être lavée en machine. Suivez les instructions de lavage sur l'étiquette apposée à l'intérieur de la housse.

(60 °C = 140 °F)



• Nettoyage du coussin Vicair Vector O2

Votre coussin Vicair O2 peut être lavé en machine à 60 °C/140 °F en utilisant un cycle anti-froissage et une lessive douce. Vous n'avez pas besoin d'enlever les SmartCells avant de mettre le coussin dans le lave-linge. Assurez-vous que le dessus du coussin ne soit pas placé contre le verre de la porte du lave-linge. Ne pas charger la machine avec plus de la moitié de son poids de charge maximal. La vitesse d'essorage doit être réduite. Lors de l'utilisation d'une machine avec agitateur, assurez-vous que le coussin puisse bouger librement dans le tambour. Ne pas utiliser d'eau de javel et ne pas nettoyer à sec, à la vapeur ou en autoclave ! Ne pas passer votre coussin Vicair O2 au sèche-linge, mais le laisser sécher à l'air libre (5-6 heures). Vous pouvez utiliser le harnais pour accrocher votre coussin Vicair O2 afin qu'il sèche.



Désinfection de votre Vicair Vector O2

Avertissement ! En cas de salissure avec des liquides corporels, et avant de le transférer à un autre utilisateur, le coussin doit être désinfecté pour éviter toute contamination croisée. Nettoyez le coussin et la housse comme indiqué ci-dessus. Utilisez de préférence un détergent antibactérien. Après le nettoyage, pulvérisez un désinfectant sur votre coussin et la housse. Pliez les compartiments vers l'extérieur pour vous assurer que la pulvérisation pénètre dans les interstices.

SIGNALEMENT D'INCIDENTS GRAVES

Les incidents graves liés à l'utilisation des produits Vicair doivent être signalés au fabricant et à l'autorité compétente concernée.

GARANTIE

Pour obtenir les informations complètes sur les processus et conditions de garantie, veuillez consulter notre site www.vicair.com.

Vicair B.V. offre une garantie limitée contre les défauts de fabrication et de matériaux à condition que le produit ait fait l'objet d'une utilisation normale. Tout dommage résultant d'une utilisation anormale ou causé par une mauvaise manipulation, un problème de nettoyage ou une négligence, est exclu de cette garantie.

Période de garantie

À partir de la date d'achat d'origine : 24 mois.
Les SmartCells de ce coussin Vicair O2 bénéficient d'une garantie à vie.

Si un défaut de matériaux ou de fabrication se produit dans la période de garantie susmentionnée, Vicair B.V. réparera ou remplacera le produit gratuitement à sa discrétion.

Les recours en cas de violation des garanties expresses aux présentes sont limités à la réparation ou au remplacement du produit. En aucun cas des dommages-intérêts pour violation de toute garantie n'incluent des dommages indirects ou ne dépassent le coût des marchandises non conformes vendues.

Vous avez des questions ?

Contactez Vicair B.V. via info@vicair.com ou contactez le distributeur Vicair de votre pays.

Kære kunde,

Tak for dit valg af et Vicair®-produkt. Vi er sikker på, at du vil sætte pris på enkelheden, pålideligheden og den fantastiske effekt. Vector O2 leveres sammen med en Quick Installation Guide. Derudover bør du læse og forstå denne brugervejledning inden brug. Gem både Quick Installation Guide og denne vejledning til fremtidig brug.

Kontakt forhandleren i dit land for yderligere oplysninger eller for at (gen-)bestille vejledninger.

Gå ind på vicair.com for oplysninger om forhandlere.

INTRODUKTION

Vicair® Vector O2 er en kørestolspude med en anatomisk formet pudeoverflade, der giver meget høj stabilitet for personer med høj risiko for at udvikle tryksårsrelaterede skader. Vector O2 kan bidrage effektivt til behandlingsforløb for tryksår (stadie I-IV), som en del af en samlet klinisk strategi.


INDIKATIONER

Den bruges til at yde komfort og en stabil kropsstøtte samt til at forbedre kropsholdningen og hjælpe med at forhindre tryksårsrelaterede skader. Vector O2 er velegnet til at indgå i behandlingsplan for tryksår (stadie I -IV) med fokus på trykaflastning og postural stabilitet.

KONTRAINDIKATIONER

Når puden anvendes til det, den er beregnet til, er der ingen kendte kontraindikationer.

HOVEDBESTANDDELE

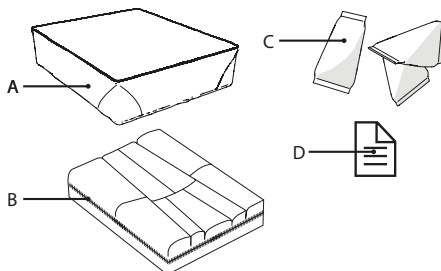

- A. Pudebetræk
- B. Pude
- C. SmartCells™, placeret i 9 inddelingsrum
- D. Vejledning til hurtig installation

GENERELLE PRODUKTSPECIFIKATIONER

Produktnavn:	Vicair Vector O2
Fremstillet af:	Vicair B.V., Holland
Garanti:	24 måneder
Anvendte materialer:	Alle fri for latex
Vægt (ekskl. betræk):	Mindste størrelse: 0,5 kg / 1.1 lbs Medium størrelse: 0,8 kg / 1.8 lbs Største størrelse: 1,3 kg / 2.9 lbs
Tilgængelige størrelser:	Se skemaet bagest i vejledningen
Pude:	Top lavet af polyesterstof med polyurethan-lag, bund af polyesterstetstof
Fyld:	Luftfyldte SmartCells med lavfriktionsovertræk

O2 Top Cover- pudebetræk:	Top: Strikket polyesterstof. Bundkant: Polyesterstof med skridsikkert polyurethanovertræk.
------------------------------	---

Alternative pudebetræk

Comfair Cover pudebetræk: Top: Strikket polyesterstof. Sider: Polyester 3D-netstof. Bund: Polyesterstof med skridsikkert polyurethanovertræk.

Incotec Cover pudebetræk & Reversible Cover pudebetræk: Top: Strikket polyesterstof, dækket med væskeafvisende og åndbar polyurethan. Bund: Polyesterstof med skridsikkert polyurethanovertræk.

Alle betræk: Kan maskinvaskes. Betræk er i overensstemmelse med EN1021-1, 1021-2 og CAL117.

FORANSTALTNINGER OG SIKKERHEDSANVISNINGER

En Vicair-kørestolspude må kun bruges som kørestolspude. Enhver anden brug af dette produkt vil blive anset for at være misbrug. Vicair B.V. kan ikke holdes ansvarlig for skader forårsaget af misbrug, forkert brug eller forsømmelighed. Sørg for at læse og forstå denne vejledning fuldstændigt.

Advarsel! Vicair B.V. anbefaler, at produktet installeres under direkte overvågning af en terapeut eller teknisk rådgiver.

Advarsel! Dit haleben og dine hofteben bør ikke røre pudens bund. Under første brug og efter justeringer af fyldningsgraden, bør det kontrolleres at puden ikke siddes igennem.

Advarsel! Kontrollér regelmæssigt huden for rødme, især i løbet af de første par dage. Hvis der opstår rødme og den ikke forsvinder efter 15 minutter, kontakt din terapeut eller hjælpemiddelspecialist.

Advarsel! Vicair B.V. anbefaler justering af fyldningsgraden under direkte opsyn af din terapeut eller hjælpemiddelspecialist.

Advarsel! I tilfælde af, at produktet bliver beskadigt af kropsvæsker, og når produktet overføres til en anden bruger, skal produktet desinficeres for at undgå krydskontaminering.

Advarsel! Hver tredje måned skal produktet ses efter for slid og flade celler. I tilfælde af alvorlig skade eller et stort antal flade celler må produktet ikke længere bruges. Kontakt din lokal kontaktperson eller terapeut vedrørende udskiftning af puden.

Forsigtig! Undlad at bruge eller lade produktet ligge tæt på åben ild eller en varmekilde med høj temperatur.

Forsigtig! Undlad at damprense eller autoklavere produktet. Produktet kan ikke modstå ekstrem varme eller stærkt tryk. Hvis de angivne rengøringsinstruktioner ikke følges, er det meget sandsynligt, at produktet og/eller produktets betræk ældes hurtigt.

Forsigtig! Brug ikke ætsende eller slibende rengøringsmidler eller skarpe genstande til at rengøre puden.

Forsigtig! Anbring ikke oversiden af produktet mod glasset i vaskemaskinens dør.

Forsigtig! Sørg for, at produktet ikke kan komme ind i hjulegerne.

Forsigtig! Overdreven vask kan have indflydelse på dette produkts aldring.

Bemærk! Fyldmængden kan afvige en smule fra standard (se produktetiketten).

INSTALLATION

Advarsel! Vicair B.V. anbefaler justering af fyldningsgraden under direkte opsyn af din terapeut eller hjælpemiddelspecialist.

Forsigtig! Sørg for, at produktet ikke kan komme ind i hjulegerne.

Bemærk! Brug altid puden med betrækket på.

Bemærk! Sørg for at sædet på kørestolen er rent.

Tip: Puder og betræk er forsynet med burbånd. Den ene del af burbåndet er aftageligt og kan enten monteres på kørestolens sæde eller fjernes, hvis man ikke ønsker at anvende burbånd.

Udfør følgende, når du bruger O2 Top Cover-pudebetrækket

Disse trin svarer til installationsbillederne 1 – 6 i vejledningen til hurtig installation:

- Se pudestørrelsen efter. Bredden (X) af puden og sædet bør stemme overens. Når puden hviler mod armstøtterne eller sidestykkerne, må bredden være op til 2,5 cm (1") bredere. Dybden (Y) af puden og sædet bør stemme overens.
- Se efter, om betrækkets størrelse stemmer overens med pudens størrelse.
- Fjern den beskyttende del af burbåndet, som er fastgjort til pudens bund.
- Anbring puden ved at trykke den fast.
- Anbring O2-topstykket oven på puden.
- Før stroppen på bagsiden af puden gennem 'knaphullet' på bagsiden af betrækket.
- Sid på puden i nogle få minutter, så den kan tilpasse sig din kropsform.
- Om nødvendigt justeres fodstøtterne.

Alternative pudebetræk

Udfør følgende trin, når du bruger Comfair Cover pudebetræk, Incotex Cover pudebetræk eller Reversible Cover pudebetræk. Bemærk venligst: Reversible Cover pudebetræk leveres med den kølige åndbare side på ydersiden. Hvis du skal bruge den væskeafvisende side af dette betræk: Lyn først den øverste del af betrækket helt op fra den nederste del, vend den øverste del på vrangen, og lyn igen til den nederste del.

- Se pudestørrelsen efter. Bredden (X) af puden og sædet bør stemme overens. Når puden hviler mod armstøtterne eller sidestykkerne, må bredden være op til 2,5 cm (1") bredere. Dybden (Y) af puden og sædet bør stemme overens.
- Se efter, om betrækkets størrelse stemmer overens med pudens størrelse.
- Fjern den beskyttende del af burbåndet, som er fastgjort til pudens bund.
- Indsæt puden i betrækket.
- Før stroppen gennem øjet i betrækket.
- Luk lynlåsen. Sørg for ikke at beskadige puden.
- Fjern den beskyttende del af burbåndet, som er fastgjort til pudebetrækkets bund.
- Anbring puden ved at trykke den fast.
- Sid på puden i nogle få minutter, så den kan tilpasse sig din kropsform.
- Juster om nødvendigt fodstøtte(r).

Kontrol, ombundennås:

Billede 7 - Quick Installation Guide

Advarsel! Dit haleben og dine hofteben bør ikke røre pudens bund. Under første brug og efter justeringer af fyldningsgraden, bør det kontrolleres at puden ikke siddes igennem.

Advarsel! Vicair B.V. anbefaler justering af fyldningsgraden under direkte opsyn af din terapeut eller hjælpemiddelspecialist.

- Se efter, om bunden nås, når du har siddet på puden i ca. 5 minutter.
- Lad din terapeut eller hjælpemiddelspecialist glide en hånd mellem dine balder og Vicair-puden, mens du læner dig fremad.
- Bed din terapeut eller hjælpemiddelspecialist kontrollere, om dine laveste knoglefremspring understøttes af mindst 2,5 cm / 1" SmartCells. Dette forhindrer disse i at berøre kørestolens sæde.

- Brug ikke puden, hvis bunden nås. I de fleste tilfælde vil det løse problemet at justere inddelingsrummenes fyldningsgrad.

BRUG

Se efter rødmen af huden

Billede 8 - Quick Installation Guide

Advarsel! Huden bør kontrolleres regelmæssigt for rødme, især i de første dage. Hvis rødme opstår og ikke forsvinder inden for 15 minutter, bør man konsultere en terapeut eller en fagperson inden for hjælpemidler.

Justering af fyldningsgraden

Advarsel! Vicair B.V. anbefaler justering af fyldningsgraden under direkte opsyn af din terapeut eller hjælpemiddelspecialist.

Klar til brug

Dette Vicair-produkt er klar til brug. Det har sin egen unikke fyldningsgrad, afhængig af størrelse og model. Om nødvendigt kan fyldningsgraden dog justeres ved at fjerne eller tilføje SmartCells fra/til de forskellige inddelingsrum. Du kan finde standardfyldningsgraden på mærkatet, der er fastgjort på puden.

Betingelser for brug og opbevaring

Forsigtig! Undlad at bruge eller lade produktet ligge tæt på åben ild eller en varmekilde med høj temperatur.

- **Brugervægt:**
Minimum: 15 kg / 33 lbs,
maksimum: 250 kg / 551 lbs
- **Temperatur:**
Minimum: -20 °C / 4 °F,
maksimum: 55 °C / 131 °F
- **Brug ved store højdegrader**
Bemærk! Vicair B.V. anbefaler, at puden ikke bruges ved over 2400 m (8000 fod) over havet eller ved under 50 m (164 fod) under

havniveau. Da hver SmartCell er fyldt med luft, vil puden muligvis blive påvirket, når den bruges ved store højder eller i et fly. Under sådanne forhold kan pudens hårdhed justeres ved at fjerne nogle få celler fra hvert inddelingsrum.

- **Luftfugtighed:**

Minimum: 0 %, maksimum 100 %

Daglig rystning

Vicair B.V. anbefaler, at din Vicair-pude rystes inden brug hver dag.

Brug af Vicair-sædepuder i motorkøretøjer

Når det er muligt, flyt ud af kørestolen og ind i et bilsæde installeret af en bilproducent uden puden og bruge køretøjets kollisionsstestede sikkerhedssystem for passagerer.

Som alternativ til din Vicair kørestolspude kan Vicair Allrounder O2 (som kan fastgøres til brugerens krop) bruges, hvis der er brug for yderligere beskyttelse i et producentinstalleret bilsæde under transport.

Når kørestolen anvendes som bilsæde, skal man følge gældende regler og bestemmelser for sikring af kørestolen og kørestolsbrugerens under transport.

Der foreligger ingen data om indflydelsen på sikkerheden ved en Vicair kørestolspude, der anvendes i en crash-testet kørestol.

Genbrug - Overdragelse af produktet til en anden bruger

Produktet er velegnet til gentagen brug. Det antal gange, det kan bruges, afhænger af, hvor tit og på hvilken måde produktet anvendes. Produktet skal rengøres og desinficeres grundigt, inden en anden person må bruge det. Se kapitlet "Vedligeholdelse og rengøring" for anvisninger.

Bemærk! Sørg for, at produktet er justeret korrekt til den anden person.

Forventet levetid

Produktets forventede levetid er fem år, når det anvendes i overensstemmelse med sikkerhedsinstruktioner, vedligeholdelsesintervaller og korrekt brug, som er anført i denne vejledning. Produktets effektive levetid kan variere alt efter hyppighed og intensitet i forbindelse med brugen.

Udskiftning af pudebetrækket

Under normal brug anbefaler Vicair B.V., at pudebetrækket udskiftes hvert år. Betræk til udskiftning kan købes separat.

Bortskaffelse

Bortskaffelsen og genbrug af brugte enheder og emballage skal overholde de gældende bestemmelser. Sørg for, at produktet bliver rengjort inden bortskaffelse, for at undgå risiko for kontaminering.

VEDLIGEHOLDELSE OG RENGØRING

Advarsel! Hver tredje måned skal produktet ses efter for slid og flade celler. I tilfælde af alvorlig skade eller et stort antal flade celler må produktet ikke længere bruges. Kontakt din lokal kontaktperson eller terapeut vedrørende udskiftning af puden.

Forsigtig! Undlad at damppresse eller autoklavere produktet. Produktet kan ikke modstå ekstrem varme eller stærkt tryk. Hvis de angivne rengøringsinstruktioner ikke følges, er det meget sandsynligt, at produktet og/eller produktets betræk ældes hurtigere.

Forsigtig! Brug ikke ætsende eller slibende rengøringsmidler eller skarpe genstande til at rengøre puden.

Forsigtig! Anbring ikke oversiden af Vicair O2-puden mod glasset i vaskemaskinens dør.

Forsigtig! Overdreven vask kan have indflydelse på dette produkts aldring.

Rengøring af Vicair Vector O2

- **Rengøring af betrækket til Vicair Vector O2**
Pudebetrækket kan vaskes i maskine. Følg vaskeanvisningerne på mærkatet, der er fastgjort på betrækkets inderside.
(60 °C = 140 °F)



- **Rengøring af Vicair Vector O2-puden**

Din Vicair O2 pude kan vaskes i vaskemaskine ved 60°C / 140 °F med et antikrøl-program og et mildt vaskemiddel. Det er ikke nødvendigt at fjerne SmartCells, inden du lægger puden i vaskemaskinen. Sørg for, at pudens øverste side ikke anbringes, så den er i kontakt med vaskemaskinens låge. Fyld ikke maskinen med mere end halvdelen af dens maksimale fyldvægt. Slyngehastigheden bør reduceres. Sørg for, at puden kan bevæge sig frit i tromlen, når der bruges en vaskemaskine med omrører. Brug ikke noget klorblegemiddel, og send ikke puden til kemisk rensning, damprensning eller autoklavering! Tør ikke Vicair O2-puden i en tørretumbler; lad den lufttørre (5-6 timer). Du kan bruge stroppen til at hænge din Vicair O2-pude til tørre.



Desinfektion af din Vicair Vector O2

Advarsel! Hvis produktet skulle blive snavset af kropsvæsker, og når det gives videre til en anden bruger, skal det desinficeres for at undgå smitte. Rengør puden og betrækket som anvist ovenfor. Der bør helst bruges et antibakterielt vaskemiddel. Når den er blevet rengjort, bør du sprøjte desinficerende middel på din pude og

dit betræk. Bøj inddelingsrummene udad for at sikre, at sprængen kommer ind i mellemrummene.

RAPPORTERING AF ALVORLIGE ULYKKER

Alvorlige hændelser som følge af brug af Vicair-produkter, skal rapporteres til fabrikanten og den relevante kompetente myndighed.

GARANTI

Se www.vicair.com for udførlige oplysninger om garantiprocesser, betingelser og vilkår.

Vicair B.V. tilbyder en begrænset garanti mod fejl i udførelse og materialer, såfremt produktet er blevet anvendt normalt. Enhver skade, der måtte opstå under unormal brug, eller som forårsages af forkert håndtering og rengøring eller forsømmelse, er ikke dækket af denne garanti.

Garantiperiode

Fra den originale købsdato: 24 måneder.

De SmartCells, der er i denne Vicair O2-pude, har en livslang garantiperiode.

Hvis der skulle opstå en fejl i materialer eller udførelse inden for den ovennævnte garantiperiode, vil Vicair B.V. – efter eget valg – reparere eller udskifte produktet gratis. Afhjælpning af brud på udtrykkelige garantier heri er begrænset til reparation eller udskiftning af produktet.

Under ingen omstændigheder skal erstatning for brud på nogen som helst garanti omfatte nogen form for følgeskader eller overstige omkostningerne for mangelfulde solgte varer.

Har du spørgsmål?

Kontakt Vicair B.V. på info@vicair.com eller kontakt Vicair-forhandleren i dit land.

Bästa kund,

tack för att du har valt en produkt från Vicair®. Vi är övertygade om att du kommer att uppskatta produktens enkelhet, pålitlighet och enastående egenskaper. För snabb installation av dynan kan du använda dig av den medföljande snabbinstallationsguiden. Se även till att läsa och förstå denna bruksanvisning innan produkten tas i bruk. Spara både snabbinstallationsguiden och denna bruksanvisning för framtida referens.

Kontakta återförsäljaren i ditt land för mer information eller beställning av bruksanvisningar.

Besök vicair.com för information om återförsäljare.

INTRODUKTION

Vicair® Vector O2 är en sittdyna för rullstol med en anatomiskt formad sittyta som ger ett mycket stabilt stöd för personer med hög risk att utveckla trycksador. Den kan också ingå som ett kvalitetstillbehör i en behandlingsplan för trycksår (steg I–IV).


INDIKATIONER

Den används för att tillhandahålla komfort, stabilt kroppsstöd, förbättrad kroppshållning och förebygger uppkomsten av trycksador. Den kan också ingå som ett kvalitetstillbehör i en behandlingsplan för trycksår (steg I–IV).

KONTRAIKATIONER

När den används som avsett finns det inga kända kontrindikationer.

HUVUDKOMPONENTER

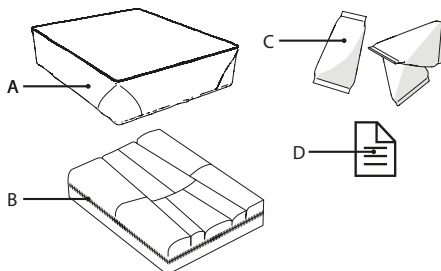

- A. Dynöverdrag
- B. Dyna
- C. SmartCells™, placerade i nio separata fack
- D. Snabbinstallationsguide

ALLMÄNNA PRODUKTSPECIFIKATIONER

Produktnamn:	Vicair Vector O2
Tillverkad av:	Vicair B.V., Nederländerna
Garanti:	24 månader
Material:	Endast latexfria
Vikt (utan överdrag):	Minsta storlek: 0,5 kg / 1,1 lbs Mellanstorlek: 0,8 kg / 1.8 lbs Största storlek: 1,3 kg / 2.9 lbs
Tillgängliga storlekar:	Se tabellen på bruksanvisningens baksida
Dyna:	Översida gjord av polyestertyg med polyuretanbeläggning, undersida av polyester nättyg

Fyllning:	Luftfyllda SmartCells med lågfriktionsyta
Dynöverdrag O2 Top Cover:	Ovansida: stickat polyester. Nedre kant: polyester med halkfri polyuretanbeläggning.

Alternativa dynöverdrag

Dynöverdrag Comfair Cover: Ovansida: stickat polyester. Sidor: 3D-polyester med nätmaskor. Undersida: polyester med halkfri polyuretanbeläggning.

Dynöverdragen Incotec Cover och Reversible Cover: Ovansida: stickat polyester, belagt med vätskeresistent andningsaktivt polyuretan. Undersida: polyester med halkfri polyuretanbeläggning.

Alla överdrag tål maskintvätt. Överdragen uppfyller kraven i EN1021-1, 1021-2 och CAL117.

FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER OCH SÄKERHETSANVISNINGAR

En Vicair-sittdyna för rullstol får endast användas som sittdyna för rullstol. All annan användning av denna produkt anses vara felaktig. Vicair B.V. kan inte hållas ansvarigt för skador som uppstår till följd av felaktig användning, icke avsedd användning eller vårdslöshet. Se till att hela denna bruksanvisning har lästs och förstås.

Varning! Vicair B.V. rekommenderar att produkten installeras under direkt överinseende av en terapeut eller en hjälpmedelskonsulent.

Varning! Svanskotan och bäckenbenet får inte vidröra dynans botten ("bottoming out").

Kontroll att så inte sker ska utföras i samband med första användningen och efter justeringar av dynans fyllning.

Varning! Kontrollera regelbundet huden avseende rodnad, särskilt under de första dagarna. Rådfråga ansvarig terapeut eller hjälpmedelskonsulent om rodnad som uppstår inte försvinner inom 15 minuter.

Varning! Vicair B.V. rekommenderar att justering av fyllnadsgraden sker under direkt överinseende av en terapeut eller en hjälpmedelskonsulent.

Varning! Om produkten smutsas ner med kroppsvätskor och när den överförs till en annan användare måste den desinficeras för att undvika korskontaminering.

Varning! Kontrollera produkten avseende slitage och tömda luftkuddar var tredje månad. Fortsätt inte att använda produkten om den är allvarligt skadad eller ett stort antal luftkuddar är tömda. Rådfråga din hjälpmedelskonsulent.

Försiktighet! Använd eller förvara inte produkten nära öppen eld eller värmekälla som avger hög temperatur.

Försiktighet! Kemtvätta, ångrengör eller autoklavera inte produkten. Produkten tål inte stark värme eller högt tryck. Om angivna rengöringsanvisningar inte följs kommer livslängden för produkten och/eller produktens överdrag med stor sannolikhet att förkortas.

Försiktighet! Använd inte aggressiva eller slipande rengöringsmedel eller vassa föremål för att rengöra dynan.

Försiktighet! Placera inte Vicair O2-dynans ovansida mot glaset på tvättmaskinens lucka.

Försiktighet! Säkerställ att dynan inte kan komma i kontakt med drivhjulens ekrar.

Försiktighet! Överdriven tvätt kan påverka produktens åldrande.

Observera! Påfyllningsgraden kan variera något från standardmängden (se produktetiketten).

INSTALLATION

Varning! Vicair B.V. rekommenderar att produkten installeras under direkt överinseende av en terapeut eller en hjälpmedelskonsulent.

Försiktighet! Säkerställ att dynan inte kan komma i kontakt med drivhjulens ekrar.

Observera! Använd alltid dynan med överdrag.

Observera! Säkerställ att rullstolens sits är ren och avfettad.

Tips: Om användning utan kroken och kardborrbandet föredras, kan dessa avlägsnas. Observera att banden som sitter på undersidan av dynan och/eller dynans överdrag inte kan avlägsnas.

Ota O2 Top Cover -päällinen käyttöön

seuraavissa vaiheissa

Dessa steg motsvarar installationsbilderna 1–6 i Quick Installation Guide:

- Kontrollera dynans storlek. Dynans bredd (X) ska motsvara sitsens bredd. Om dynan vilar mot armstöd eller sidoskydd kan den vara upp till 2,5 cm (1") bredare. Dynans djup (Y) ska motsvara sitsens bredd.
- Kontrollera om överdragets storlek motsvarar dynans storlek.
- Avlägsna den självhäftande skyddstejpen från kardborrbanden på dynan undersida.
- Placera dynan i sitsen och tryck ner den ordentligt.
- Placera dynöverdraget O2 Topp överdrag ovanpå dynan.
- För in snöret som sitter på dynans baksida genom "knapphålet" på dynöverdragets baksida
- Sitt på dynan under några minuter så att den formas efter din kropp.
- Justera fotstöden om så behövs.

Alternativa dynöverdrag

Utför följande steg om du använder Comfair Cover, Incotec Cover eller Reversible Cover.

Anmärkning: Reversible Cover levereras med den svala andningsaktiva sidan vänd utåt. Om du behöver använda den vätskeresistenta sidan av detta överdrag: Öppna blixtlåset och avlägsna den övre delen av överdraget fullständigt från bottendelen, vänd den övre delen ut och in och fäst den i den nedre delen igen med hjälp av blixtlåset.

- Kontrollera dynans storlek. Dynans bredd (X) ska motsvara sitsens bredd. Om dynan vilar mot armstöd eller sidoskydd kan den vara upp till 2,5 cm (1") bredare. Dynans djup (Y) ska motsvara sitsens bredd.
- Kontrollera om överdragets storlek motsvarar dynans storlek.
- Avlägsna kardborrbanden från dynans undersida. Observera att banden som sitter på undersidan av dynan inte kan avlägsnas.
- För in dynan i överdraget.
- Fäst haken i öglan på överdraget.
- Stäng blixtlåset. Se till att dynan inte skadas.
- Avlägsna den självhäftande skyddstejpen från kardborrbanden på dynans överdrag.
- Placera dynan i sitsen och tryck ner den ordentligt.
- Sitt på dynan under några minuter så att den formas efter din kropp.
- Justera fotstöd vid behov.

Kontroll avseende kroppskontakt med dynans botten ("bottoming out"):

Bild 7 – Quick Installation Guide

Varning! Svanskotan och bäckenbenet får inte vidröra dynans botten ("bottoming out").

Kontroll att så inte sker ska utföras i samband med första användningen och efter justeringar av dynans fyllning.

Varning! Vicair B.V. rekommenderar att justering av fyllnadsgraden sker under direkt överinseende av en terapeut eller en hjälpmedelskonsulent.

- Kontrollera att ingen kroppskontakt med dynans botten föreligger (bottoming out) efter att ha suttit på den i cirka 5 minuter.
- Låt din terapeut eller hjälpmedelskonsulent skjuta in en hand mellan din bakdel och Vicair-dynan samtidigt som du lutar dig framåt.
- Låt terapeuten eller hjälpmedelskonsumenten kontrollera om dina nedersta benutskott stöds av minst 2,5 cm/1 tum SmartCells. Detta säkerställer att de inte kommer i kontakt med rullstolens sits.
- Använd inte dynan om kroppskontakt med dynans botten uppstår. I de flesta fall kan en justering av fyllnadsgraden i dynans fack lösa eventuella problem.

ANVÄNDNING

Kontroll av hudrodnad

Bild 8 – Quick Installation Guide

Varning! Kontrollera regelbundet huden avseende rodnad, särskilt under de första dagarna. Rådfråga ansvarig terapeut eller hjälpmedelskonsulent om rodnad som uppstår inte försvinner inom 15 minuter.

Justering av fyllnadsgraden

Varning! Vicair B.V. rekommenderar att justering av fyllnadsgraden sker under direkt överinseende av en terapeut eller en hjälpmedelskonsulent.

Redo för användning

Denna Vicair-produkt levereras klar för användning. Fyllnadsgraden varierar beroende på dynans storlek och modell. Vid behov kan dock fyllnadsgraden justeras genom att

SmartCells avlägsnas från/tillförs till de olika facken. Standardfyllnadsgraden anges på dynans etikett.

Förutsättningar för användning och förvaring

Försiktighet! Använd eller förvara inte produkten nära öppen eld eller värmekälla som avger hög temperatur.

- **Brukarvikt:**
Lägsta: 15 kg / 33 lbs,
Max: 250 kg / 551 lbs
- **Temperatur:**
Lägsta: -20 °C / 4 °F,
Max: 55 °C / 131 °F
- **Användning på hög höjd**
Observera! Vicair B.V. avråder från användning av dynan på platser belägna mer än 2 400 m (8 000 ft) över havet eller 50 m (164 ft) under havsytan. Eftersom varje enskild SmartCell är fylld med luft kan dynans egenskaper förändras om den används på hög höjd, exempelvis under en flygresa. Under sådana villkor kan dynans fasthet justeras genom att några luftkuddar avlägsnas från varje fack.
- **Luftfuktighet:**
Lägsta: 0 %, högsta 100 %

Daglig uppuffning

Vicair B.V. rekommenderar att Vicair-dynan puffas upp varje dag före användning.

Användning av Vicair-sittdynor i motorfordon

När så är möjligt, förflytta från rullstolen och till ett tillverkarinstallerat fordonssäte utan dynan, samt använd fordonets krocktestade säkerhetsbälte.

Som ett alternativ till Vicair-rullstolsdynan kan Vicair Allrounder O2 (som kan fästas på användarens kropp) användas om ytterligare skydd behövs vid transport i tillverkarinstallerat fordonssäte.

När rullstolen används som fordonssäte ska gällande regler och regelverk avseende säkrandet av rullstolen och rullstolens användare under transport beaktas. Det finns ingen information tillgänglig rörande säkerheten hos en Vicair-rullstolsdyna som används i en krocktestad rullstol.

Återanvändning – överföring till annan användare

Produkten är lämplig för återanvändning. Antalet gånger som den kan användas beror på hur ofta och på vilket sätt den används. Produkten måste rengöras och desinficeras grundligt innan en annan person tillåts att använda den. Se kapitlet "Underhåll och rengöring" för anvisningar.

Observera! Säkerställ att produkten är korrekt inställd för den andra personen.

Förväntad livslängd

Livslängden hos denna produkt är fem år vid användning i enlighet med säkerhetsanvisningar, underhållsintervall samt korrekt användning enligt angivet i denna bruksanvisning. Effektiv livslängd kan variera beroende på användningens frekvens och intensitet.

Byte av dynöverdrag

Vid normal användning rekommenderar Vicair B.V. att dynöverdraget byts ut årligen. Extra överdrag kan köpas separat.

Kassering

Kassering och återvinning av använda enheter och förpackningar måste ske i enlighet med lokala regler. Säkerställ att produkten är rengjord innan den kasseras för att undvika eventuell risk för kontamination.

UNDERHÅLL OCH RENGÖRING

Varning! Kontrollera produkten avseende slitage och tömda luftkuddar var tredje månad. Försätt inte att använda produkten om den är allvarligt skadad eller ett stort antal luftkuddar är tömda. Rådfråga din hjälpmedelskonsulent.

Försiktighet! Kemtvätta, ångrengör eller autoklavera inte produkten. Produkten tål inte stark värme eller högt tryck. Om angivna rengöringsanvisningar inte följs kommer livslängden för produkten och/eller produktens överdrag med stor sannolikhet att förkortas.

Försiktighet! Använd inte aggressiva eller slipande rengöringsmedel eller vassa föremål för att rengöra dynan.

Försiktighet! Placera inte Vicair O2-dynans ovansida mot glaset på tvättmaskinens lucka.

Försiktighet! Överdriven tvätt kan påverka produktens åldrande.

Rengöra Vicair Vector O2

- **Rengöring av dynöverdraget Vicair Vector O2**

Dynöverdraget tål maskintvätt. Följ tvättråden på etiketten som sitter på insidan av överdraget.
(60 °C = 140 °F)



- **Rengöring av dynan Vicair Vector O2**

Vicair O2-dynan kan maskintvättas i 60 °C/140 °F med antikrynklingsprogram och mild tvättmedel. SmartCells behöver inte avlägsnas innan dynan läggs i tvättmaskinen. Säkerställ att dynans ovansida inte placeras mot glaset på tvättmaskinens lucka. Fyll inte tvättmaskinen till mer än hälften av dess maximala viktkapacitet.

Centrifugeringshastigheten bör sänkas. Se

till att dynan kan röra sig fritt inuti trumman om du använder en tvättmaskin med agitator. Använd inte klorblekmedel och undvik kemtvätt, ångtvätt och autoklivering! Vicair O2-dynan får ej torktumlas utan ska lufttorkas (5–6 timmar). Remmen kan användas för upphängning av Vicair O2-dynan vid torkning.



Desinfektera din Vicair Vector O2

Varning! Om produkten förorenas med kroppsvätskor eller överförs till annan brukare måste den desinficeras för att undvika korskontaminering. Rengör dynan och överdraget enligt anvisningarna ovan. Använd företrädesvis ett antibakteriellt rengöringsmedel. Spreja dynan och överdraget med desinfektionsmedel efter rengöring. Böj facken utåt för att säkerställa att sprejen kan tränga in i mellanrummen.

RAPPORTERA ALLVARLIGA INCIDENTER

Allvarliga incidenter till följd av användning av Vicair-produkter bör rapporteras till tillverkaren och relevant behörig myndighet.

GARANTI

Besök www.vicair.com för fullständig information om garantiärenden och villkor. Vicair B.V. erbjuder en begränsad garanti mot defekter i utförande och material under förutsättning att produkten har använts på avsett sätt. Eventuella skador som uppkommer till följd icke avsedd användning, felaktig hantering, felaktig rengöring eller vårdslöshet omfattas inte av denna garanti.

Garantiperiod

Från inköpsdatum: 24 månader.

Garantin för SmartCellerna i denna Vicair O2-dyna gäller under produktens hela livslängd.

Skulle en defekt i material eller utförande upptäckas inom ovan angivna garantitid kommer Vicair B.V. på eget initiativ att utan kostnad reparera eller byta ut produkten. Kompensation till följd av att en utställd garanti inte efterlevs är begränsad till reparation eller utbyte av produkten.

Skada till följd av att en garanti inte efterlevs ska under inga omständigheter omfatta följdskador eller överstiga priset på den icke avtalsenliga varan.

Frågor?

Kontakta Vicair B.V. via info@vicair.com eller kontakta Vicair-återförsäljaren i ditt land.



VICAIR® VECTOR O2 BRUKERMANUAL

Kjære kunde,

Takk for at du har valgt et Vicair®-produkt. Puten er enkel og sikker i bruk, og gir svært god effekt. For rask installering kan du bruke hurtigveiledningen som følger med puten. Les i tillegg brukermanualen og sørg for at du forstår alt som står der før du bruker produktet. Ta vare på både hurtigveiledningen og denne manualen for fremtidig bruk.

For mer informasjon eller bestilling av (flere) manualer, kontakt norway@invacare.no. På vicair.com finner du informasjon om forhandlere.

INTRODUKSJON

Vicair® Vector O2 er en pute for rullestolseter med en anatomisk formet seteoverflate som gir et meget svært høyt stabilitetsnivå for personer som har høy risiko for å utvikle trykksår. Den kan også brukes som et meget effektivt tillegg til en behandlingsplan for trykksår (nivå I-IV).

INDIKASJONER


Den brukes til å gi komfortabel og stabil støtte til kroppen, forbedre kroppsholdningen og bidrar til å forebygge trykksår.

Den kan også brukes som et meget effektivt tillegg til en behandlingsplan for trykksår (nivå I-IV).

KONTRAINDIKASJONER

Når puten brukes som tiltenkt, er det ingen kjente kontraindikasjoner.

HOVEDDELER

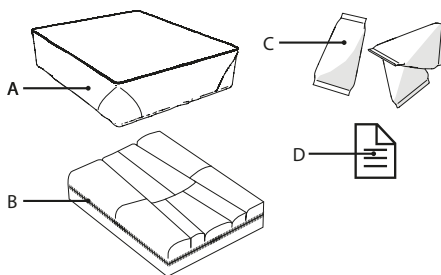

- A. Putetrekk
- B. Pute
- C. SmartCells™, plassert i 9 kammer
- D. Hurtigveiledning (Quick Installation Guide)

GENERELLE PRODUKTSPEISIFIKASJONER

Produktnavn:	Vicair Vector O2
Produsert av:	Vicair B.V., Nederland
Garanti:	24 måneder
Materialer:	Ingen materialer med lateks
Vekt (uten trekk):	Minste størrelse:
	0,5 kg / 1.1 lbs
	Mellomstørrelse:
	0,8 kg / 1.8 lbs
	Største størrelse:
	1,3 kg / 2.9 lbs
Tilgjengelige størrelser:	Se tabellen bakerst i manualen
Pute:	Toppen er laget av polyester med polyuretantrekk. Bunnen er laget av polyesternet
Fyll:	Luftfylte SmartCells med lavfriksjonsbelegg
O2-overtrekk:	Topp: Stoff av strikket polyester. Bunnkant: Polyester med antiskli-belegg av polyuretan.

Alternative putetrekk

Comfair Cover: Topp: Stoff av strikket polyester.
Sider: 3D nettingstoff av polyester. Bunn:
Polyester med antiskli-belegg av polyuretan.
Incotec Cover & Reversible Cover: Topp: Stoff av
strikket polyester, belagt med væske-avvisende,
pustende polyuretan. Bunn: Polyester med
antiskli-belegg av polyuretan.

Alle trekk: Kan maskinvaskes. Trekkene er i
samsvar med EN1021-1, 1021-2 og CAL117.

FORHOLDSREGLER OG SIKKERHETSINSTRUKSJONER

En Vicair-pute for rullestol skal bare brukes som
en rullestolpute. Enhver annen bruk av dette
produktet anses for å være feilbruk. Vicair B.V.
kan ikke holdes ansvarlig for skader som
oppstår som følge av feilbruk, ukorrekt bruk
eller uaktsomhet. Pass på at du leser og forstår
hele denne brukermanualen.

Advarsel! Vicair B.V. anbefaler å installere
produktet under direkte tilsyn av en terapeut
eller en hjelpemiddelansvarlig.

Advarsel! Halebeinet eller bekkenbeina må
ikke berøre bunnen av puten. En kontroll av om
kroppen berører bunnen av puten må
gjennomføres ved første bruk og etter
justeringer i putefyllet.

Advarsel! Huden skal sjekkes regelmessig for
rødhet, spesielt de første dagene. Hvis det
oppstår rødhet som ikke forsvinner etter 15
minutter, skal du rådføre deg med terapeuten
eller legemiddelkonsulenten din.

Advarsel! Vicair B.V. anbefaler at fyllgraden
justeres under direkte tilsyn av terapeuten din
eller en hjelpemiddelansvarlig.

Advarsel! Ved tilsmussing med kroppsvæsker,
og når produktet overføres til en annen bruker,
må produktet desinfiseres for å unngå
krysskontaminering.

Advarsel! Hver tredje måned må produktet
sjekkes for slitasje og celler med for lite luft.
Ved alvorlig skade eller et høyt antall celler med
for lite luft må produktet ikke brukes. Kontakt
din hjelpemiddelansvarlige.

OBS! Hold produktet unna åpen ild eller andre
kilder til høy varme.

OBS! Ikke rens, damprengjør eller autoklaver
produktet. Produktet tåler ikke høy varme eller
høyt trykk. Hvis de angitte
rengjøringsinstruksene ikke følges, er det
meget sannsynlig at produktet og/eller trekket
vil få kortere levetid.

OBS! Ikke bruk sterke eller slipende
rengjøringsmidler eller skarpe gjenstander til å
rengjøre puten.

Forsiktighet! Ikke plasser oversiden av Vicair
O2-puten mot glasset på vaskemaskindøren.

OBS! Pass på at puten ikke kommer i kontakt
med hjulenes eiker.

OBS! Hyppig og sterk vasking kan påvirke dette
produktets aldring.

Merk! Fyllnivået kan avvike litt fra standarden
(se etiketten på produktet).

INSTALLASJON

Advarsel! Vicair B.V. anbefaler å installere
produktet under direkte tilsyn av en terapeut
eller en hjelpemiddelansvarlig.

OBS! Pass på at puten ikke kommer i kontakt
med hjulenes eiker.

Merk! Bruk alltid puten med trekk.

Merk! Pass på at rullestolsetet er rent og
fettfritt.

Tips: Hvis du foretrekker å ikke bruke
borrelåsene, kan du fjerne dem. Vær
oppmerksom på at remsene festet til bunnen av
puten og/eller putetrekket ikke kan fjernes.

Utfør følgende trinn når du bruker O2 Top Cover-putetrekket

Disse trinnene følger installasjonsbildene 1 – 6 i hurtigveiledningen:

- Kontroller putestørrelsen. Bredden (X) til puten og setet må stemme overens. Når puten hviler mot armlener eller sidestøtter, kan bredden være opp til 2,5 cm (1") bredere. Dybden (Y) til puten og setet må stemme overens.
- Kontroller at størrelsen på trekket passer til størrelsen på puten.
- Fjern beskyttelsen fra de selvklebende borrelåsene festet i bunnen av puten
- Plasser puten ved å trykke den godt på plass.
- Plasser O2 Top Cover-putetrekket over toppen av puten.
- Før løkken på baksiden av puten gjennom "knappehullet" på baksiden av trekket.
- Sitt på puten noen minutter for å la puten tilpasse seg kroppsformen din.
- Juster fotstøttene om nødvendig.

Alternative putetrekk

Utfør følgende trinn når du bruker Comfair Cover, Incotec Cover eller Reversible Cover. OBS! Reversible Cover leveres med den kalde, pustende siden vendt utover. Hvis du ønsker å bruke den væske-avvisende siden av dette trekket: Åpne glidelåsen som skiller overdelen fullstendig fra underdelen, vend overdelen slik at utsiden vender inn og lukk glidelåsen som fester overdelen til underdelen igjen.

- Kontroller putestørrelsen. Bredden (X) til puten og setet må stemme overens. Når puten hviler mot armlener eller sidestøtter, kan bredden være opp til 2,5 cm (1") bredere. Dybden (Y) til puten og setet må stemme overens.
- Kontroller at størrelsen på trekket passer til størrelsen på puten.

- Fjern borrelås-remmene fra bunnen av puten. Vær oppmerksom på at borrelåsene festet i bunnen av puten, ikke kan fjernes.
- Sett puten inn i trekket.
- Før løkken gjennom hullet i trekket.
- Lukk glidelåsen. Pass på å ikke skade puten.
- Fjern beskyttelsen fra de selvklebende borrelåsene festet til putetrekket.
- Plasser puten ved å trykke den godt på plass.
- Sitt på puten noen minutter for å la puten tilpasse seg kroppsformen din.
- Juster fotstøtten(e) om nødvendig.

Kontroller om kroppen berører bunnen av puten:

Bilde 7 - Quick Installation Guide

Advarsel! Halebeinet eller bekkenbeina må ikke berøre bunnen av puten. En kontroll av om kroppen berører bunnen av puten må gjennomføres ved første bruk og etter justeringer i putefyllet.

Advarsel! Vicair B.V. anbefaler å justere fyllmengden under oppsyn av terapeuten eller legemiddelkonsulenten din.

- Kontroller om kroppen berører bunnen av puten etter å ha sittet på puten i omtrent fem minutter.
- La terapeuten eller legemiddelkonsulenten din skyve en hånd mellom baken din og Vicair puten mens du lener deg forover.
- Be terapeuten eller legemiddelkonsulenten om å sjekke at de nederste benfremspringene får støtte av minst 2,5 cm/1" SmartCells. Dette forhindrer at bena kommer i kontakt med rullestolens sete.
- Ikke bruk puten hvis kroppen din berører bunnen av puten. I de fleste tilfeller vil en justering av fyllgraden i kamrene løse eventuelle problemer.

BRUK

Kontroller rødhet i huden

Bilde 8 - Quick Installation Guide

Advarsel! Kontroller huden regelmessig for rødhet, spesielt de første dagene. Hvis det oppstår rødhet som ikke forsvinner i løpet av 15 minutter, ta kontakt med terapeuten din eller en hjelpemiddelansvarlig.

Juster fyllgraden

Advarsel! Vicair B.V. anbefaler å justere fyllmengden under oppsyn av terapeuten eller legemiddelkonsulenten din.

Klar til bruk

Vicair produktet er klart for bruk. Det har sin egen, unike fyllgrad avhengig av størrelse og modell. Men hvis det er nødvendig, kan fyllgraden justeres ved å fjerne eller tilføye SmartCells i de forskjellige kamrene. Du finner informasjon om standard fyllgrad på merkelappen som er festet til puten.

Betingelser for bruk og oppbevaring

OBS! Hold produktet unna åpen ild eller andre kilder til høy varme.

- **Brukervekt:**
Minimum: 15 kg / 33 lbs,
maksimum: 250 kg / 551 lbs
- **Temperatur:**
Minimum: -20 °C / 4 °F,
maksimum: 55 °C / 131 °F
- **Bruk i høyden**
Merk! Vicair B.V. anbefaler å ikke bruke puten i høyder over 2400 m (8000 fot) over havet eller under 50 m (164 fot) under havoverflaten. Fordi hver SmartCell er fylt med luft, kan puten oppføre seg annerledes i høyden eller i fly. I slike tilfeller kan putsens fasthet justeres ved å fjerne noen få celler fra hvert kammer.

- **Luftfuktighet:**

Minimum: 0 %, maksimum 100 %

Daglig oppristing

Vicair B.V. anbefaler at du rister opp Vicair-puten daglig før du bruker den.

Bruk av Vicair-seteputer i motorkjøretøy

Når det er mulig, skal du bevege deg ut av rullestolen og inn i et bilsete montert av bilprodusenten uten puten og bruke kjøretøyets kollisjonstestede passasjersikringssystem. Som et alternativ til Vicair-rullestolputen kan du bruke Vicair Allrounder 02 (som kan festes til brukerens kropp) hvis du trenger ytterligere beskyttelse i et sete montert av kjøretøyprodusenten under transport. Når rullestolen brukes som sete i kjøretøyet, må gjeldende regler og forskrifter om sikring av rullestolen og rullestolbrukeren under transport følges.

Det foreligger ingen tilgjengelige data om hvordan en Vicair-rullestolpute som brukes i en kollisjonstestet rullestol påvirker sikkerheten.

Gjenbruk – overføring av produktet til en annen bruker

Produktet er egnet for gjenbruk. Hvor mange ganger den kan brukes, avhenger av hvor ofte og på hvilken måte produktet er blitt brukt. Produktet må rengjøres grundig og desinfiseres før en annen person kan bruke det. Se kapittelet «Vedlikehold og rengjøring» for instruksjoner.

Merk! Pass på at produktet justeres korrekt til den andre personen.

Forventet levetid

Dette produktets forventede levetid er fem år når det brukes i samsvar med sikkerhetsinstruksene, vedlikeholdsintervallene overholdes og produktet brukes på riktig måte, som beskrevet i denne håndboken.

Den faktiske levetiden kan variere med brukshyppigheten og -intensiteten.

Bytte av putetrekket

Ved normal bruk anbefaler Vicair B.V. å bytte putetrekket hvert år. Nye putetrekk kan kjøpes separat.

Kassering

Kassering og resirkulering av brukte enheter og emballasje må foretas i samsvar gjeldende regelverk. Forsikre deg om at produktet er blitt rengjort før det kasseres, for å unngå smitterisiko.

VEDLIKEHOLD OG RENGJØRING

Advarsel! Hver tredje måned må produktet sjekkes for slitasje og celler med for lite luft. Ved alvorlig skade eller et høyt antall celler med for lite luft må produktet ikke brukes. Kontakt din hjelpemiddelansvarlige.

OBS! Ikke rens, damprengjør eller autoklaver produktet. Produktet tåler ikke høy varme eller høyt trykk. Hvis de angitte rengjøringsinstruksene ikke følges, er det meget sannsynlig at produktet og/eller trekket vil få kortere levetid.

OBS! Ikke bruk sterke eller slipende rengjøringsmidler eller skarpe gjenstander til å rengjøre puten.

Forsiktighet! Ikke plasser oversiden av Vicair O2-puten mot glasset på vaskemaskindøren.

OBS! Hyppig og sterk vasking kan påvirke dette produktets aldring.

Rengjøring av Vicair Vector O2

- **Rengjøring av putetrekket til Vicair Vector O2**

Putetrekket kan maskinvaskes. Følg vaskeanvisningene på merkelappen festet på innsiden av trekket.

(60 °C=140 °F)



- **Rengjøring av Vicair Vector O2-puten**

Vicair O2-puten din kan vaskes i maskin på 60 °C/140 °C på et finvaskprogram og med et mildt vaskemiddel. Du trenger ikke fjerne SmartCells før du legger puten i vaskemaskinen. Pass på at toppen av puten ikke legges mot glasset i vaskemaskindøren. Ikke legg mer i maskinen enn halvparten av full maskin. Senk sentrifugehastigheten. Pass på at puten beveger seg fritt inni trommelen hvis vaskemaskinen din har agitator. Ikke bruk klorblekemiddel og ikke rens, damprengjør eller autoklaver puten! Vicair O2 puten kan ikke tørkes i tørketrommel. La den luft-tørke (5-6 timer). Du kan benytte slyngen til å henge opp puten.



Desinfisering av Vicair Vector O2

Advarsel! Ved tilsmussing med kroppsvæsker eller når produktet overføres til en annen bruker, må produktet desinfiseres for å hindre smitte. Rengjør puten og trekket som forklart ovenfor. Bruk helst et antibakterielt rengjøringsmiddel. Etter rengjøring må puten og trekket sprayes med et desinfiseringsmiddel. Bøy kamrene utover for å sikre at sprayen kommer inn i mellomrommene.

RAPPORTERING OM ALVORLIGE HENDELSER

Alvorlige hendelser ved bruk av Vicair-produkter skal rapporteres til produsenten og ansvarlige myndigheter.

GARANTI

Se www.vicair.com for komplett informasjon om garantier, vilkår og betingelser.

Vicair B.V. har en begrenset garanti mot fabrikasjonsfeil og materialfeil, forutsatt at produktet har blitt brukt på normal måte. Enhver skade som har oppstått som følge av unormal bruk, feilaktig håndtering, feilaktig rengjøring eller annen uaktsomhet, dekkes ikke av denne garantien.

Garantiperiode

Fra opprinnelig kjøpsdato: 24 måneder.

Det er livstidsgaranti på SmartCells-ene i denne Vicair O2 puten.

Hvis det oppstår en fabrikasjonsfeil eller materialfeil innenfor tidsperioden nevnt ovenfor, skal Vicair B.V. enten reparere eller erstatte produktet – etter eget valg – uten omkostninger.

Garantien er begrenset til erstatning eller reparasjon av produktet.

Ikke i noe tilfelle skal erstatning for brudd på garantien inkludere eventuelle følgeskader eller overstige produktets kostnad.

Har du spørsmål?

Ta kontakt med Invacares kundeserviceavdeling på e-post norway@invacare.no eller på telefon 22 57 95 00.



VICAIR® VECTOR O2 -KÄYTTÖOHJE

Hyvä asiakas!

Kiitos Vicair®-tuotteen valinnasta. Olemme varmoja, että arvostat sen yksinkertaisuutta, luotettavuutta ja erinomaista vaikutusta. Asennuksen nopeuttamiseksi voit käyttää tyynyn mukana toimitettua pika-asennusopasta. Lue ja omaksu lisäksi tämä käyttöohje ennen käyttöä. Säilytä sekä pika-asennusopas että tämä ohje tulevaa tarvetta varten.

Ota yhteys oman maasi jakelijaan, kun tarvitset lisätietoa tai haluat tilata (lisää) käyttöohjeita. Lue jakelijatiedot osoitteesta vicair.com.

JOHDANTO

Vicair® Vector O2 on pyörätuolin istuintyyny, jonka anatomisesti muotoiltu istuinpinta varmistaa erinomaisen vakaan istuma-asennon henkilöille, joilla on riski saada paineaurioita. Se on myös tehokas lisä paineaurioiden hoitosuunnitelmaan (I–IV asteen painehaavat).


KÄYTTÖAIHEET

Se lisää mukavuutta, tukee kehoa, parantaa ryhtiä ja auttaa ehkäisemään paineaurioita. Se on myös tehokas lisä paineaurioiden hoitosuunnitelmaan (I–IV asteen painehaavat).

VASTA-AIHEET

Käyttötarkoituksen mukaisesti käytettynä tunnettuja vasta-aiheita ei ole.

PÄÄOSAT

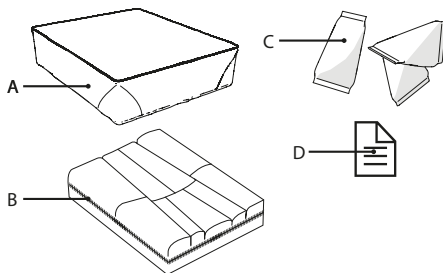

- A. Tyynynpäällinen
- B. Tyyny
- C. SmartCells™-ilmakartiot 9 osastossa
- D. Pika-asennusopas (Quick Installation Guide)

YLEISTIEDOT TUOTTEESTA

Tuotenimi:	Vicair Vector O2
Valmistaja:	Vicair B.V., Alankomaat
Takuu:	24 kuukautta
Käytetyt materiaalit:	Täysin lateksittomat.
Paino (ilman päällistä):	Pienin koko: 0,5 kg / 1.1 lbs Keskikoko: 0,8 kg / 1.8 lbs Suurin koko: 1,3 kg / 2.9 lbs
Saatavissa olevat koot:	Katso ohjeen takasivulla oleva taulukko
Tyyny:	Päällinen on valmistettu polyuretaanipinnoitetusta polyesterikankaasta, pohja on polyesteriverkkokangasta
Täyte:	Ilmatäytteiset SmartCells-kartiot, joissa kitkaa vähentävä pinnoite

O2 Top Cover	Yläpuoli: Neulottu polyesterikangas.
-päällinen:	Alareuna: Polyesterikangas, jossa on polyuretaanista valmistettu liukumisenestopinnoite.

Vaihtoehtoiset tyynynpäälliset

Comfair Cover -päällinen: Yläpuoli: Neulottu polyesterikangas. Sivut: Kolmiulotteinen polyesteriverkkokuitu. Pohja: Polyesterikangas, jossa on polyuretaanista valmistettu liukumisenestopinnoite.

Incotec Cover - ja Reversible Cover -tyynynpäällinen: Yläpuoli: Neulottu polyesterikangas, joka on pinnoitettu vedenpitävällä hengittävällä polyuretaanilla. Pohja: Polyesterikangas, jossa on polyuretaanista valmistettu liukumisenestopinnoite.

Kaikki päälliset ovat konepestäviä. Päälliset täyttävät standardit EN 1021-1, 1021-2 ja CAL117.

VAROTOIMET JA TURVAOHJEET

Vicair-pyörätuolityynyä saa käyttää ainoastaan pyörätuolin istuintyynynä. Muunlainen tuotteen käyttö katsotaan virheelliseksi käytöksi. Vicair B.V. ei vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen virheellisestä tai väärästä käytöstä tai laiminlyönnistä. Varmista, että olet lukenut ja ymmärtänyt tämän ohjeen kokonaisuudessaan.

Varoitus! Vicair B.V. suosittelee, että tuote asennetaan hoitajan tai apuvälineteknikon välittömässä valvonnassa.

Varoitus! Häntäluusi ja lantion luittesi ei pitäisi koskettaa tyynyn pohjaa. Pohjakosketuksen tarkistaminen on tehtävä ensimmäisellä käyttökerralla ja uudelleen tyynyn täyttöasteen säätämisen jälkeen.

Varoitus! Seuraa ihosi punoitusta säännöllisesti erityisesti parin ensimmäisen päivän aikana.

Mikäli punoitusta ilmenee eikä se häviä 15 minuutin kuluessa, ota yhteyttä hoitajaan tai apuvälineteknikkoon.

Varoitus! Vicair B.V. suosittelee, että tyynyn täyttöastetta säädetään hoitajan tai apuvälineteknikon välittömässä valvonnassa.

Varoitus! Jos istuintyyny on likaantunut kehon nesteistä ja eritteistä ja kun se luovutetaan toiselle käyttäjälle, se on desinfioitava ristikontaminaation estämiseksi.

Varoitus! Tarkista tuotteen kuluminen ja ilmakartioiden tyhjentyminen kolmen kuukauden välein. Mikäli tyyny on pahasti vahingoittunut tai suuri määrä ilmakartioita on tyhjentynyt, älä jatka tuotteen käyttöä. Ota yhteyttä apuvälineteknikkoon.

Huomio! Älä käytä tai jätä tuotetta avotulen lähelle tai kuuman lämmönlähteen lähelle.

Huomio! Älä pese tuotetta kuivapesussa tai höyrystämällä äläkä laita sitä autoklaaviin.

Tuote ei kestä korkeaa lämpöä eikä painetta. Jollei annettuja puhdistusohjeita noudateta, on todennäköistä, että tuote ja/tai sen päällinen kuluvat käytössä nopeammin.

Huomio! Älä käytä hankaavia tai syövyttäviä puhdistusaineita tai teräviä välineitä tyynyn puhdistamiseen.

Huomio! Älä aseta Vicair O2 -tyynyn yläpuolta pesukoneen lasiluukkuun vasten.

Huomio! Varmista, ettei tyyny osu teräspinojen väliin.

Huomio! Liiallinen pesu voi vaikuttaa tämän tuotteen ikäntymiseen.

Huomautus! Täyttöaste voi hieman poiketa oletuksesta (katso tuote-etiketti).

ASENNUS

Varoitus! Vicair B.V. suosittelee, että tuote asennetaan hoitajan tai apuvälineteknikon välittömässä valvonnassa.

Huomio! Varmista, ettei tyyny osu teräspinojen väliin.

Huomautus! Käytä tyynyä aina päällisen kanssa.

Huomautus! Tarkista, että pyörätuolin istuin on puhdas ja tahraton rasvasta.

Vinkki: Jollet halua käyttää koukkua ja silmukkaa, voit irrottaa koukkunauhat. Huomaa, ettei tyynyn pohjaan ja/tai tyynynpäälliseen kiinnitettyjä nauhoja voi irrottaa.

Ota O2 Top Cover -päällinen käyttöön seuraavissa vaiheissa

Vaiheet vastaavat pika-asennusoppaan asennuskuvia 1 – 6:

- Tarkista tyynyn koko. Tyynyn ja istuimen leveyden (X) tulee olla sama. Kun käsinojat tai sivusuojat tukevat tyynyä, tyyny voi olla enintään 2,5 cm leveämpi. Tyynyn ja istuimen syvyyden (Y) tulee olla sama.
- Tarkista, että päällisen koko vastaa tyynyn kokoa.
- Poista tyynyn pohjaan kiinnitettyjen tarranauhojen suojateipit.
- Aseta tyyny paikalleen painamalla voimakkaasti.
- Aseta O2 Top Cover -päällinen tyynyn yläosan päälle.
- Vie silmukka tyynyn taakse päällisen takana olevan ”napinläven” kautta.
- Istu tyynyn päällä pari minuuttia, jotta se mukautuu sinulle mukavaksi.
- Säädä tarvittaessa jalkatukia.

Vaihtoehtoiset tyynynpäälliset

Ota Comfair Cover -, Incotec Cover - tai Reversible Cover - tyynynpäällinen käyttöön seuraavissa vaiheissa.

Huomaa: Reversible Cover - tyynynpäällinen toimitetaan viileä hengittävä puoli ulospäin. Jos tarvitset tyynynpäällisen nesteenkäytävää puolta: irrota ensin tyynynpäällisen yläosa pohjaosasta kokonaan, käännä yläosa nurinpäin ja kiinnitä se uudelleen pohjaosaan.

- Tarkista tyynyn koko. Tyynyn ja istuimen leveyden (X) tulee olla sama. Kun käsinojat tai sivusuojat tukevat tyynyä, tyyny voi olla enintään 2,5 cm leveämpi. Tyynyn ja istuimen syvyyden (Y) tulee olla sama.
- Tarkista, että päällisen koko vastaa tyynyn kokoa.
- Poista tarrakoukkunauhat tyynyn pohjasta. Huomaa, ettei tyynyn pohjaan kiinnitettyjä nauhoja voi irrottaa.
- Aseta tyyny päällisen sisään.
- Vie silmukka päällisessä olevan renkaan läpi.
- Sulje vetoketju. Varmista, ettei tyyny vahingoitu.
- Poista päälliseen kiinnitettyjen koukkutarranauhojen suojateipit.
- Aseta tyyny paikalleen painamalla voimakkaasti.
- Istu tyynyn päällä pari minuuttia, jotta se mukautuu sinulle mukavaksi.
- Säädä tarvittaessa pyörätuolin jalkatukia.

Tarkista pohjakosketus:

Kuva 7 – Quick Installation Guide

Varoitus! Häntäluusi ja lantion luittesi ei pitäisi koskettaa tyynyn pohjaa. Pohjakosketuksen tarkistaminen on tehtävä ensimmäisellä käyttökerralla ja uudelleen tyynyn täyttöasteen säätämisen jälkeen.

Varoitus! Vicair B.V. suosittelee, että tyynyn täyttöastetta säädetään hoitajan tai apuvälineteknikon välittömässä valvonnassa.

- Tarkista pohjakosketus, kun olet istunut tyynyllä noin 5 minuutin ajan.
- Anna hoitajan tai apuvälineteknikon työntää kätensä pakaroidesi ja Vicair-tyynyn väliin samalla, kun nojaat eteenpäin.
- Pyydä hoitajaa tai apuvälineteknikkoa tarkistamaan, että alimpien istumaluidesi alla on vähintään 2,5 cm SmartCells-ilmakartioita. Ne estävät niitä koskettamasta pyörätuolin istuimeen.

- Älä käytä tyynyä, mikäli tunnet pohjakosketuksen. Useimmiten osastojen täyttöasteen säätäminen ratkaisee ongelman.

KÄYTTÖ

Ihon punoituksen tarkistus

Kuva 8 – Quick Installation Guide

Varoitus! Seuraa ihosi punoitusta säännöllisesti erityisesti parin ensimmäisen päivän aikana. Mikäli punoitusta ilmenee eikä se häviä 15 minuutin kuluessa, ota yhteyttä hoitajaan tai apuvälineteknikkoon.

Täyttöasteen säätäminen

Varoitus! Vicair B.V. suosittelee, että tyynyn täyttöastetta säädetään hoitajan tai apuvälineteknikon välittömässä valvonnassa.

Käyttövalmius

Tämä Vicair-tuote on käyttövalmis. Eri kokojen ja mallien täyttöasteet vaihtelevat. Täyttöastetta voidaan silti tarvittaessa säätää poistamalla tai lisäämällä SmartCells-ilmakartioita eri osastoista/osastoihin. Oletustäyttöaste näkyy tyynyyn kiinnitetystä lapusta.

Käyttö- ja säilytysolosuhteet

Huomio! Älä käytä tai jätä tuotetta avotulen lähelle tai kuuman lämmönlähteen lähelle.

- **Käyttäjän paino:**
Alin: 15 kg / 33 lbs,
ylin: 250 kg / 551 lbs
- **Lämpötila:**
Alin: -20 °C / 4 °F,
ylin: 55 °C / 131 °F
- **Käyttö korkeassa ilmanalassa**
Huomautus! Vicair B.V. ei suosittele tyynyn käyttöä yli 2 400 metrin (8000 jalan) korkeudessa merenpinnasta eikä yli 50 metriä (164 jalkaa) merenpinnan alapuolella. Koska SmartCell-kartio on

täynnä ilmaa, tyyny voi käyttäytyä poikkeavasti korkeassa ilmanalassa tai lentokoneessa. Näissä tilanteissa tyynyn tukevuutta voidaan säätää poistamalla muutama ilmakartio kustakin osastosta.

• Ilmankosteus:

Alin: 0 %, ylin 100 %

Päivittäinen pölynpoisto

Vicair B.V. suosittelee Vicair-tyynyn päivittäistä puhdistamista pölystä.

Vicair-istuintyynyjen käyttö moottoriajoneuvoissa

Aina kun mahdollista, siirry pyörätuolista auton valmistajan asentamalle auton istuimelle ilman tyynyä ja käytä ajoneuvon törmäystestattua matkustajan turvajärjestelmää.

Vaihtoehtona Vicair-pyörätuolityynyille voit käyttää Vicair Allrounder O2 -tyynyä (joka voidaan kiinnittää käyttäjän vartaloon), jos tarvitset auton valmistajan asentamaan auton istuimeen lisäsuojaa kuljetuksen ajaksi.

Jos pyörätuolia käytetään auton istuimena, sovellettavia sääntöjä ja määräyksiä koskien pyörätuolin ja pyörätuolin käyttäjän kiinnitystä kuljetuksen ajaksi on noudatettava.

Tietoja törmäystestatussa pyörätuolissa käytetyn Vicair-pyörätuolityynyn vaikutuksesta turvallisuuteen ei ole.

Uudelleenkäyttö - Tuotteen luovuttaminen toiselle käyttäjälle

Tuote soveltuu toistuvaan käyttöön. Käyttökertojen määrä riippuu tuotteen käyttöiheydestä ja käyttötavasta. Tuote on puhdistettava ja desinfioitava huolellisesti, ennen kuin toisen henkilön annetaan käyttää sitä. Katso ohjeet luvusta Kunnossapito ja puhdistus.

Huomautus! Varmista, että tuote on säädetty oikein toiselle henkilölle.

Odotettu käyttöikä

Tämän tuotteen odotettu käyttöikä on viisi vuotta, kun sitä käytetään tässä käyttöoppaassa kuvattujen turvallisuusohjeiden, huoltovälien ja oikean käytön mukaisesti.

Todellinen käyttöaika voi vaihdella riippuen käyttöiheydestä ja -intensiteetistä.

Tyynynpäällisen uusiminen

Vicair B.V. suosittelee tyynynpäällisen uusimista vuosittain normaalikäytössä. Vaihtopäällisiä voi ostaa erikseen.

Jätehuolto

Käytettyjen laitteiden ja pakkausten jätehuollossa ja kierrättämisessä on noudatettava kulloinkin sovellettavaa lainsäädäntöä. Varmista kontaminaatoriskien ehkäisemiseksi, että tuote on puhdistettu ennen luovutusta jätehuoltoon.

HUOLTAMINEN JA PUHDISTAMINEN

Varoitus! Tarkista tuotteen kulumisen ja ilmakartioiden tyhjentyminen kolmen kuukauden välein. Mikäli tyyny on pahasti vahingoittunut tai suuri määrä ilmakartioita on tyhjentynyt, älä jatka tuotteen käyttöä. Ota yhteyttä apuvälineteknikkoon.

Huomio! Älä pese tuotetta kuivapesussa tai höyrystämällä äläkä laita sitä autoklaaviin. Tuote ei kestä korkeaa lämpöä eikä painetta. Jollei annettuja puhdistusohjeita noudateta, on todennäköistä, että tuote ja/tai sen päällinen kuluvat käytössä nopeammin.

Huomio! Älä käytä hankaavia tai syövyttäviä puhdistusaineita tai teräviä välineitä tyynyn puhdistamiseen.

Huomio! Älä aseta Vicair O2 -tyynyn yläpuolta pesukoneen lasiluukkuun vasten.

Huomio! Liiallinen pesu voi vaikuttaa tämän tuotteen ikääntymiseen.

Vicair Vector O2 -tyynyn puhdistaminen

- Vicair Vector O2 -päällisen puhdistaminen**
Tyynynpäällinen voidaan pestä koneessa. Noudata päällisen sisäpuolella sijaitsevassa pesulapussa annettuja ohjeita.
(60 °C = 140 °F)



- Vicair Vector O2 -tyynyn puhdistaminen**
Vicair O2 -tyyny voidaan pestä pesukoneessa 60 °C:n / 140 °F:n lämpötilassa käyttäen siliävien ohjelmaa ja mietoa pesuainetta. SmartCells-ilmakartioita ei tarvitse irrottaa ennen konepesua. Varmista, ettei tyynynpäällisen yläpuoli kosketa pesukoneen luukun lasiosaan. Täytä koneeseen enintään puolet sen enimmäistäyttömäärästä.
Linkousnopeuden on oltava alhainen. Jos käytät sekoittimella varustettua pesukonetta, varmista, että tyyny pääsee liikkumaan vapaasti rummussa. Älä käytä klooria, älä pese tuotetta kuivapesussa tai höyrystämällä äläkä laita sitä autoklaaviin! Älä kuivaa Vicair O2 -tyynyä kuivaimessa vaan anna sen kuivua vapaasti ilmassa (5–6 tuntia). Voit ripustaa Vicair O2 -tyynyn pyykkinarulle.



Vicair Vector O2 -tyynyn desinfiointi

Varoitus! Jos tyyny on likaantunut kehon nesteistä ja eritteistä ja jos se luovutetaan toiselle käyttäjälle, se on desinfioitava ristikontaminaation ehkäisemiseksi. Puhdista tyyny ja päällinen yllä olevien ohjeiden mukaan. Käytä mieluiten bakteereja tuhoavaa pesuainetta. Suihkuta puhdistuksen jälkeen tyyny ja päällinen desinfiointiaineella. Taivuta osastoja ulospäin, jotta suihke menee myös rakoihin.

VAKAVISTA VAARATILANTEISTA ILMOITTAMINEN

Vakavista haittatapahtumista, jotka johtuvat Vicair-tuotteiden käytöstä, on ilmoitettava valmistajalle ja asianmukaiselle toimivaltaiselle viranomaiselle.

TAKUU

Katso kaikki tiedot takuumenettelyistä ja -ehdoista osoitteesta www.vicair.com.

Vicair B.V. myöntää tuotteelle rajoitetun takuun, joka kattaa valmistusvirheet ja materiaalit, kunhan tuotetta käytetään normaalisti.

Tuotteen väärinkäytöstä, virheellisestä käsittelystä, puhdistuksesta tai laiminlyönnistä johtuvat vahingot eivät kuulu takuun piiriin.

Takuuaika

Alkuperäisestä ostopäivästä 24 kuukautta.
Tämän Vicair O2 -tyynyn SmartCells-kartioilla on elinikäinen takuu.

Jos materiaalista tai valmistusvirheestä johtuva vika ilmenee ilmoitettuna takuuaikana, Vicair B.V. korjaa tai vaihtaa – oman valintansa mukaisesti – tuotteen maksutta.

Tässä ilmoitettu takuu koskee pelkästään tuotteen korjausta tai vaihtoa.

Takuu ei missään tapauksessa korvaa välillisiä vahinkoja, eikä korvaus ylitä viallisen tuotteen hintaa.

Jäikö sinulle kysymyksiä?

Ota yhteys Vicair B.V.:hen osoitteessa info@vicair.com tai oman maasi Vicair-jakelijaan.

Estimado cliente:

Gracias por elegir un producto Vicair®. Estamos seguros de que sabrá apreciar la simplicidad, fiabilidad y su fantástico efecto. Para realizar una instalación rápida, puede utilizar la guía de instalación rápida que se incluye con su cojín. Además, lea detenidamente este manual de usuario antes de utilizarlo. Guarde la guía de instalación rápida y el manual para poder consultarlos en el futuro.

Si necesita más información o desea volver a solicitar algún manual, póngase en contacto con el distribuidor de su país. Visite vicair.com para más información sobre el distribuidor.

INTRODUCCIÓN

El Vicair® Vector O2 es un cojín para asiento de silla de ruedas que posee una superficie anatómicamente diseñada que ofrece un nivel muy elevado de estabilidad a aquellas personas que presentan un riesgo elevado de desarrollar lesiones por presión. Constituye también un elemento adicional de alto rendimiento para el plan de tratamiento de una lesión por presión (fase I-IV).


INDICACIONES

Se utiliza para ofrecer un apoyo corporal estable y cómodo, y mejorar la postura corporal. Además, ayuda a evitar las lesiones por presión. Constituye también un elemento adicional de alto rendimiento para el plan de tratamiento de una lesión por presión (fase I-IV).

CONTRAINDICACIONES

Cuando se utiliza según lo previsto, no hay contraindicaciones conocidas.

COMPONENTES PRINCIPALES

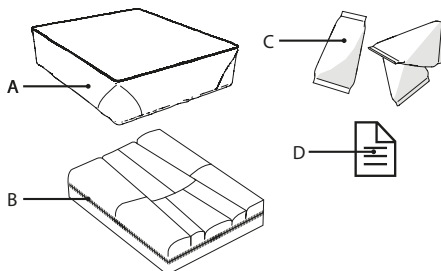

- A. Funda de cojín
- B. Cojín
- C. Celdas SmartCells™, situadas en 9 compartimentos
- D. Guía de instalación rápida

ESPECIFICACIONES GENERALES DEL PRODUCTO

Nombre del producto:	Vicair Vector O2
Fabricado por:	Vicair B.V., Países Bajos
Garantía:	24 meses
Materiales utilizados:	No contienen látex
Peso (sin funda):	Tamaño pequeño: 0,5 kg / 1.1 lbs Tamaño mediano: 0,8 kg / 1.8 lbs Tamaño grande: 1,3 kg / 2.9 lbs
Tamaños disponibles:	Consulte la tabla situada al dorso del manual.

Cojín:	Parte superior hecha de tejido de poliéster con revestimiento de poliuretano, base de tejido de malla de poliéster
Relleno:	Celdas SmartCells rellenas de aire con un revestimiento de baja fricción
Funda de cojín O2 Top Cover:	Parte superior: tela de poliéster tejida. Borde inferior: tela de poliéster con revestimiento antideslizante de poliuretano.

Fundas de cojín alternativas

Funda de cojín Comfair Cover: Parte superior: tela de poliéster tejida. Laterales: tejido de malla de poliéster 3D. Parte inferior: tela de poliéster con revestimiento antideslizante de poliuretano.

Fundas de cojín Incotec Cover y Reversible Cover: Parte superior: tela de poliéster tejida, revestida con poliuretano transpirable resistente a los fluidos. Parte inferior: tela de poliéster con revestimiento antideslizante de poliuretano.

Todas las fundas: Se pueden lavar a máquina. Las fundas cumplen con las normas EN1021-1, 1021-2 y CAL117.

PRECAUCIONES E INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Un cojín para asiento de silla de ruedas Vicair solo puede utilizarse para tal fin. Si se utiliza este producto de otro modo, se considerará un mal uso. Vicair B.V. no se hará responsable de los daños provocados por un mal uso, un uso inadecuado o negligencia. Asegúrese de que lee y comprende este manual en su totalidad.

¡Advertencia! Vicair B.V. recomienda instalar el producto bajo la supervisión directa de un terapeuta o un profesional de tecnología asistencial.

¡Advertencia! El coxis y los huesos de la pelvis no deben tocar la base del cojín. Se debe comprobar si se produce "bottoming out" la primera vez que se usa el cojín y después de realizar ajustes en el relleno.

¡Advertencia! Compruebe regularmente si su piel se enrojece, especialmente durante los primeros días. Si aparecen rojeces y no desaparecen después de 15 minutos, consulte a su terapeuta o a su profesional de tecnología asistencial.

¡Advertencia! Vicair B.V. recomienda ajustar el relleno bajo la supervisión directa de su terapeuta o su profesional de tecnología asistencial.

¡Advertencia! Si se mancha el producto con fluidos corporales o antes de transferir el producto a otro usuario, es imprescindible desinfectar el cojín para evitar la contaminación cruzada.

¡Advertencia! Compruebe cada tres meses el estado del cojín y si existen celdas desinfladas. Si se ha producido un daño importante o hay un gran número de celdas desinfladas, no continúe usando el cojín. Consulte a su profesional de tecnología asistencial.

¡Precaución! No use ni deje el producto cerca de una llama o expuesto a una fuente de calor a alta temperatura.

¡Precaución! No limpie el producto en seco, con vapor ni en autoclave. El cojín no resiste las temperaturas o la presión excesivas. Si no se siguen las instrucciones de limpieza, es muy probable que tanto la funda como el cojín se deterioren más rápidamente.

¡Precaución! No utilice limpiadores agresivos o abrasivos, ni objetos cortantes para limpiar el cojín.

¡Precaución! No coloque la parte superior del cojín Vicair O2 contra el cristal de la puerta de la lavadora.

¡Precaución! Asegúrese de que el cojín no toca los radios de las ruedas.

¡Precaución! Un lavado excesivo puede influir el envejecimiento de este producto.

¡Aviso! El grado de relleno puede diferir ligeramente del valor predeterminado (consulte la etiqueta del producto).

INSTALACIÓN

Advertencia: Vicair B.V. recomienda instalar el producto bajo la supervisión directa de un terapeuta o un profesional de tecnología asistencial.

¡Precaución! Asegúrese de que el cojín no toca los radios de las ruedas.

¡Aviso! Utilice siempre el cojín con una funda.

¡Aviso! Asegúrese de que el asiento de la silla de ruedas está limpio y sin grasa.

Consejo: Cuando prefiera no usar el gancho y la lazada, sencillamente retire las tiras de gancho. Recuerde que no se pueden retirar las tiras cosidas a la base del cojín o de la funda.

Realice los siguientes pasos al utilizar la funda de cojín O2 Top Cover

Estos pasos se corresponden con las imágenes de instalación 1 – 6 presentes en el documento Quick Installation Guide (guía de instalación rápida).

- Compruebe el tamaño del cojín. El cojín debe tener la anchura (X) del asiento de la silla de ruedas. Cuando el cojín se apoye sobre los reposabrazos o las protecciones laterales, la anchura podrá ser de hasta 2,5 cm (1 pulgada) más ancha. El cojín debe tener la misma profundidad (Y) que el asiento.
- Compruebe que el tamaño de la funda se corresponde con el tamaño del cojín.

- Retire la banda protectora de las cintas de gancho autoadhesivas situadas en la base del cojín.
- Para colocar el cojín, presione con firmeza.
- Coloque la funda de cojín O2 Top Cover encima del cojín.
- Pase el nudo situado en la parte trasera del cojín a través del "ojal" situado en la parte de atrás de la funda.
- Siéntese sobre el cojín durante unos minutos para que se adapte a la forma de su cuerpo.
- Si es necesario, ajuste los soportes de los pies.

Fundas de cojín alternativas

Realice los siguientes pasos al utilizar las fundas de cojín Comfair Cover, Incotec Cover o Reversible Cover.

Recuerde: la funda Reversible Cover se entrega con el lado transpirable fresco en la parte exterior. Si necesita utilizar el lado impermeable de la funda: abra completamente la cremallera de la sección superior de la funda desde la sección inferior, dele la vuelta a la sección superior y vuelva a cerrar la cremallera hasta la sección inferior.

- Compruebe el tamaño del cojín. El cojín debe tener la anchura (X) del asiento de la silla de ruedas. Cuando el cojín se apoye sobre los reposabrazos o las protecciones laterales, la anchura podrá ser de hasta 2,5 cm (1 pulgada) más ancha. El cojín debe tener la misma profundidad (Y) que el asiento.
- Compruebe que el tamaño de la funda se corresponde con el tamaño del cojín.
- Retire las cintas de gancho de la base del cojín. Recuerde que las cintas cosidas a la base del cojín no se pueden retirar.
- Introduzca el cojín en la funda.
- Pase el lazo por el ojal de la funda.

- Cierre la cremallera. Asegúrese de no dañar el cojín.
- Retire la banda protectora de las cintas de gancho autoadhesivas situadas en la funda del cojín.
- Para colocar el cojín, presione con firmeza.
- Siéntese sobre el cojín durante unos minutos para que se adapte a la forma de su cuerpo.
- Si es necesario, ajuste el/los reposapiés.

Comprobación de "bottoming out":

Imagen 7 - Quick Installation Guide

¡Advertencia! El coxis y los huesos de la pelvis no deben tocar la base del cojín. Se debe comprobar si se produce "bottoming out" la primera vez que se usa el cojín y después de realizar ajustes en el relleno.

¡Advertencia! Vicair B.V. recomienda ajustar el relleno bajo la supervisión directa de su terapeuta o su profesional de tecnología asistencial.

- Compruebe si se ha producido "bottoming out" después de permanecer sentado sobre el cojín durante aproximadamente 5 minutos.
- Permita que su terapeuta o su profesional de tecnología asistencial deslice una mano entre sus nalgas y el cojín Vicair mientras usted mantiene el cuerpo inclinado hacia delante.
- Pídale a su terapeuta o a su profesional de tecnología asistencial que compruebe si sus protuberancias óseas inferiores se apoyan por lo menos sobre 2,5 cm / 1 pulgada de celdas SmartCells. De este modo se evitará que toquen el asiento de la silla de ruedas.
- No utilice el cojín si se produce "bottoming out". En la mayoría de los casos, se solucionará el problema al ajustar el relleno de los compartimentos.

USO

Comprobación de rojeces en la piel

Imagen 8 - Quick Installation Guide

¡Advertencia! Compruebe regularmente si su piel se enrojece, especialmente durante los primeros días. Si aparecen rojeces y no desaparecen después de 15 minutos, consulte a su terapeuta o a su profesional de tecnología asistencial.

Ajuste del relleno

¡Advertencia! Vicair B.V. recomienda ajustar el relleno bajo la supervisión directa de su terapeuta o su profesional de tecnología asistencial.

Listo para su uso

Este producto Vicair está listo para su uso. Posee su propio relleno exclusivo, dependiendo del tamaño y el modelo. Sin embargo, si es necesario, se pueden retirar celdas SmartCells de los distintos compartimentos, o añadirlas, para ajustar el relleno. Encontrará el grado de relleno predeterminado en la etiqueta situada en el cojín.

Condiciones de uso y almacenamiento

¡Precaución! No use ni deje el producto cerca de una llama o expuesto a una fuente de calor a alta temperatura.

- **Peso del usuario:**

Mínimo: 15 kg / 33 libras,
máximo: 250 kg / 551 lbs

- **Temperatura:**

Mínimo: -20 °C / 4 °F,
máximo: 55 °C / 131 °F

- **Uso a gran altura**

¡Aviso! Vicair B.V. recomienda no utilizar el cojín a más de 2.400 m (8.000 pies) sobre el nivel del mar o a menos de 50 m (164 pies) por debajo del nivel del mar. Dado que cada celda SmartCell está llena de aire, el

comportamiento del cojín puede variar al ser utilizado en altitud o en un avión. En estos casos, se pueden retirar unas pocas celdas de cada compartimento para ajustar la firmeza del cojín.

- **Humedad del aire:**

Mínima: 0%, máxima 100%

Mullido diario

Vicair B.V. recomienda mullir el cojín Vicair antes de utilizarlo cada día.

Uso de cojines para asientos Vicair en vehículos a motor

Siempre que sea posible, transféralo de la silla de ruedas a un asiento de automóvil instalado por el fabricante del automóvil sin el cojín y utilice el sistema de sujeción de ocupantes del vehículo a prueba de choques.

Como alternativa al cojín para sillas de ruedas Vicair, se puede usar el cojín Vicair Allrounder O2 (que se puede abrochar al cuerpo del usuario) cuando se requiera protección adicional durante el transporte en un asiento de automóvil instalado por el fabricante. Cuando se utiliza la silla de ruedas como asiento de automóvil, se deben seguir las normas y reglamentos aplicables con respecto a la fijación de la silla de ruedas y del usuario de la silla durante el transporte. No hay datos disponibles sobre la influencia en la seguridad de un cojín para silla de ruedas Vicair utilizado en una silla de ruedas a prueba de choques.

Reutilización - Traspaso del producto a otro usuario

El producto es apto para un uso reiterado. El número de veces que se puede utilizar dependerá de la frecuencia y la forma en que se utilice el producto. El producto debe limpiarse y desinfectarse a fondo antes de que se otra persona pueda utilizarlo. Véase el capítulo

‘Mantenimiento y limpieza’ para obtener instrucciones.

¡Aviso! Asegúrese de que el producto se ajusta correctamente a la otra persona.

Vida útil estimada

La vida útil estimada de este producto es de cinco años si se utiliza de acuerdo con las instrucciones de seguridad, los intervalos de mantenimiento y el uso correcto, indicados en este manual.

La vida útil efectiva puede variar en función de la frecuencia y la intensidad de uso.

Sustitución de la funda del cojín

Con un uso normal, Vicair B.V. recomienda cambiar la funda del cojín cada año. Las fundas de sustitución pueden adquirirse por separado.

Eliminación

La eliminación y el reciclaje de dispositivos usados y sus embalajes deben cumplir con la normativa aplicable. Asegúrese de limpiar el producto antes de desecharlo para evitar cualquier riesgo de contaminación.

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

¡Advertencia! Compruebe cada tres meses el estado del cojín y si existen celdas desinfladas. Si se ha producido un daño importante o hay un gran número de celdas desinfladas, no continúe usando el cojín. Consulte a su profesional de tecnología asistencial.

¡Precaución! No limpie el producto en seco, con vapor ni en autoclave. El cojín no resiste las temperaturas o la presión excesivas. Si no se siguen las instrucciones de limpieza, es muy probable que tanto la funda como el cojín se deterioren más rápidamente.

¡Precaución! No utilice limpiadores agresivos o abrasivos, ni objetos cortantes para limpiar el cojín.

¡Precaución! No coloque la parte superior del cojín Vicair O2 contra el cristal de la puerta de la lavadora.

¡Precaución! Un lavado excesivo puede influir en el envejecimiento de este producto.

Limpieza del cojín Vicair Vector O2

- **Limpieza de la funda del Vicair Vector O2**

La funda del cojín puede lavarse a máquina. Siga las instrucciones de lavado que se indican en la etiqueta situada en el interior de la funda.

(60 °C = 140 °F)



- **Limpieza del cojín Vicair Vector O2**

Su cojín Vicair O2 puede lavarse en la lavadora a 60 °C / 140 °F. Utilice un programa antiarrugas y detergente suave. No es necesario retirar las celdas SmartCells antes de meter el cojín en la lavadora.

Asegúrese de que la parte superior del cojín no toca el cristal de la puerta de la lavadora. No cargue la lavadora con más de la mitad de la carga máxima. Debe reducirse la velocidad de centrifugado. Al usar una lavadora con agitador, asegúrese de que el cojín puede moverse con libertad dentro del tambor. No utilice lejía ni opte por la limpieza en seco, con vapor ni en autoclave.

No seque su cojín Vicair O2 en secadora; déjelo secar al aire (5-6 horas). Puede utilizar el lazo para tender el cojín Vicair O2.



Desinfección del Vicair Vector O2

Advertencia: En caso de contaminación con fluidos corporales, y cuando el cojín vaya a ser utilizado por un usuario diferente, se debe

desinfectar el cojín para evitar posibles contagios. Limpie el cojín y la funda de acuerdo con las instrucciones detalladas anteriormente. Preferiblemente, utilice un detergente antibacterias. Después de lavarlo, pulverice el cojín y la funda con un desinfectante. Pliegue los compartimentos hacia afuera para asegurarse de que el producto entra en todos los huecos.

NOTIFICACIÓN DE INCIDENTES GRAVES

Los incidentes graves causados por el uso de productos Vicair deben notificarse al fabricante y a la autoridad competente pertinente.

GARANTÍA

Consulte el sitio web www.vicair.com para obtener información completa sobre los procesos de garantía, así como los términos y condiciones.

Vicair B.V. ofrece una garantía limitada que cubre defectos de mano de obra y materiales, siempre y cuando se haya utilizado el producto de forma normal. Quedan excluidos de esta garantía los daños que se deriven de un uso anormal, así como los causados por una manipulación o limpieza inadecuadas, o por negligencia.

Periodo de garantía

Desde la fecha original de compra: 24 meses. Las SmartCells de este cojín Vicair O2 incluyen garantía de por vida.

Si se detectase algún defecto en los materiales o en la mano de obra dentro del periodo de garantía mencionado anteriormente, Vicair B.V. decidirá si repara o sustituye el producto sin cargo alguno para el usuario.

Los recursos por incumplimiento de las garantías expresas se limitan a la reparación o sustitución del producto.

En ningún caso los daños por incumplimiento de la garantía incluirán daños subyacentes o superarán el coste de los productos no conformes vendidos.

¿Desea formular alguna pregunta?

Póngase en contacto con Vicair B.V. en info@vicair.com o a través del distribuidor de Vicair en su país.

Caro cliente,

Obrigado por ter escolhido um produto Vicair®. Temos a certeza de que apreciará a sua simplicidade, fiabilidade e efeito surpreendente. Para uma instalação rápida, pode utilizar o guia de instalação rápida fornecido com a sua almofada. Além disso, leia atentamente e compreenda este manual de utilizador antes de utilizá-la. Guarde o guia de instalação rápida e este manual para referência futura.

Para obter mais informações ou voltar a encomendar manuais, entre em contacto com o distribuidor do seu país.

Visite vicair.com para obter informação sobre os distribuidores.

INTRODUÇÃO

A Vicair® Vector O2 é um assento para cadeira de rodas com uma superfície de assento de contorno anatómico que fornece um nível muito elevado de estabilidade para pessoas com risco de desenvolver lesões de pressão. Constitui também um complemento altamente eficaz para um plano de tratamento de lesões de pressão (fase I-IV).

INDICAÇÕES


É utilizada para proporcionar conforto, um apoio estável ao corpo, para melhorar a postura corporal e para ajudar a evitar lesões de pressão.

Constitui também um complemento altamente eficaz para um plano de tratamento de lesões de pressão (fase I-IV).

CONTRAINDICAÇÕES

Quando usado conforme previsto, não existem contraindicações conhecidas.

PRINCIPAIS COMPONENTES

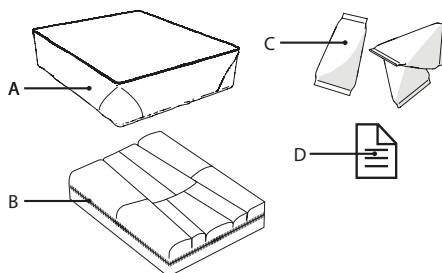

- A. Capa de almofada
- B. Almofada
- C. SmartCells™, colocadas em 9 compartimentos
- D. Guia de instalação rápida

ESPECIFICAÇÕES GERAIS DO PRODUTO

Nome do produto:	Vicair Vector O2
Fabricado por:	Vicair B.V., Países Baixos
Garantia:	24 meses
Materiais utilizados:	Todos isentos de látex
Peso (excl. capa)	Tamanho pequeno:
Tamanho mais de almofada):	0,5 kg / 1.1 lbs
	Tamanho médio:
	0,8 kg / 1.8 lbs
	Tamanho maior:
	1,3 kg / 2.9 lbs
Tamanhos disponíveis:	Consulte a grelha na parte posterior do manual

Almofada:	Parte superior feita em tecido de poliéster com revestimento de poliuretano, parte inferior em tecido de malha poliéster
Enchimento:	SmartCells cheias de ar com revestimento de baixa fricção
Capa de almofada O2 Top Cover:	Topo: Tecido em malha de poliéster. Borda inferior: Tecido de poliéster com revestimento de poliuretano antiderrapante.

Capas de almofada alternativas

Capa de almofada Comfair Cover: Topo: Tecido em malha de poliéster. Laterais: Tecido em malha de poliéster 3D. Fundo: Tecido de poliéster com revestimento de poliuretano antiderrapante.

Capas de almofada Incotec Cover e Reversible Cover: Topo: Tecido em malha de poliéster, revestido a poliuretano respirável resistente. Fundo: Tecido de poliéster com revestimento de poliuretano antiderrapante.

Todas as capas: Laváveis na máquina. As capas estão em conformidade com as normas EN1021-1, 1021-2 e CAL117.

PRECAUÇÕES E INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

Uma almofada de assento de cadeira de rodas Vicaïr só pode ser utilizada como almofada de assento para cadeiras de rodas. A utilização deste produto de qualquer outra forma é considerada como sendo de uso indevido. A Vicaïr B.V. não pode ser responsabilizada por danos causados pelo uso indevido, inadequado ou por negligência. Certifique-se de que lê e compreende este manual na íntegra.

Aviso! A Vicaïr B.V. recomenda a instalação do produto sob supervisão direta de um terapeuta ou de um Profissional de Tecnologia Assistiva.

Aviso! O cóccix e o osso ilíaco não devem tocar na parte inferior da almofada. A verificação do contacto correto com a parte inferior deve ser efetuada durante a primeira utilização e depois de adaptar o enchimento da almofada.

Aviso! Verifique regularmente se a sua pele apresenta vermelhidão, especialmente durante os primeiros dias. Se ocorrer vermelhidão que não desaparece após 15 minutos, consulte o seu médico ou o profissional de tecnologia de assistência.

Aviso! A Vicaïr B.V. recomenda a adaptação do nível de enchimento sob supervisão direta do seu terapeuta ou de um Profissional de Tecnologia Assistiva.

Aviso! Caso se a almofada esteja suja com fluidos corporais, ou ao transferi-la para outro utilizador, esta deve ser desinfetada para evitar a contaminação cruzada.

Aviso! A cada três meses, verifique se o produto está desgastado ou apresenta células vazias. Em caso de danos graves ou se várias células estiverem vazias, deixe de usar o produto. Consulte o seu Profissional de Tecnologia Assistiva.

Cuidado! Não utilize nem deixe o produto próximo de uma chama desprotegida ou fonte de calor a alta temperatura.

Cuidado! Não limpe o produto a seco, com vapor nem trate com autoclave. O produto não foi concebido para suportar calor ou pressão excessivos. Se as instruções de limpeza fornecidas não forem cumpridas, é provável que o produto e/ou a capa do produto se desgaste(m) mais rapidamente.

Cuidado! Não utilize produtos de limpeza agressivos ou abrasivos nem objetos afiados para limpar a almofada.

Cuidado! Não coloque o topo da almofada Vicair O2 contra o vidro da máquina de lavar.

Cuidado! Certifique-se de que a almofada não interfere com os raios da roda.

Cuidado! Uma lavagem excessiva pode acelerar o desgaste deste produto.

Aviso! O grau de enchimento pode diferir ligeiramente do habitual (ver etiqueta do produto).

INSTALAÇÃO

Aviso! A Vicair B.V. recomenda a instalação do produto sob supervisão direta de um terapeuta ou de um Profissional de Tecnologia Assistiva.

Cuidado! Certifique-se de que a almofada não interfere com os raios da roda.

Nota! Utilize sempre a almofada com capa.

Nota! Certifique-se de que o assento da cadeira de rodas está limpo e desengordurado.

Sugestão: Se preferir não usar o velcro, pode remover as tiras de velcro. Tenha em atenção que as tiras colocadas na parte inferior da almofada e/ou na capa da almofada não podem ser removidas.

Execute as seguintes etapas ao usar a Capa de almofada O2 Top Cover

Estes passos correspondem às imagens de instalação 1 – 6 no Quick Installation Guide:

- Verifique o tamanho da almofada. As larguras (X) da almofada e do assento devem corresponder. Quando a almofada está encostada aos apoios de braços ou

guardas laterais, a largura pode ser até 2,5 cm (1") mais larga. As profundidades (Y) da almofada e do assento devem corresponder.

- Verifique se o tamanho da capa corresponde ao tamanho da almofada.
- Retire a fita de suporte de proteção das tiras de velcro fixadas na parte inferior da almofada.
- Coloque a almofada pressionando firmemente.
- Coloque a Capa de almofada O2 Top Cover sobre a parte superior da almofada.
- Passe o laço na parte posterior da almofada, através da botoeira, na parte posterior da capa.
- Sente-se sobre a almofada durante alguns minutos, para permitir que a almofada se adapte à forma do seu corpo.
- Se necessário, ajuste os suportes do pé.

Capas de almofada alternativas

Siga os seguintes passos quando utiliza a capa de almofada Comfair Cover, Incotec Cover ou Reversible Cover.

Nota: A capa de almofada Reversible Cover é fornecida com o lado respirável fresco para fora. Se precisar de usar o lado resistente a líquidos desta capa: primeiro abra completamente o fecho da parte superior da capa do fundo, rode a secção superior do avesso e volte a fechar o fecho sobre o fundo.

- Verifique o tamanho da almofada. As larguras (X) da almofada e do assento devem corresponder. Quando a almofada está encostada aos apoios de braços ou guardas laterais, a largura pode ser até 2,5 cm (1") mais larga. As profundidades (Y) da almofada e do assento devem corresponder.
- Verifique se o tamanho da capa corresponde ao tamanho da almofada.
- Remova as tiras de velcro da parte inferior da almofada. Tenha em atenção que as tiras cosidas à parte inferior da almofada não

- podem ser removidas.
- Coloque a almofada na capa.
- Passe o aro através do olhal da capa.
- Feche o fecho de correr. Tenha cuidado para não danificar a almofada.
- Retire a fita de suporte de proteção das tiras de velcro fixadas na capa da almofada.
- Coloque a almofada pressionando firmemente.
- Sente-se sobre a almofada durante alguns minutos, para permitir que a almofada se adapte à forma do seu corpo.
- Se necessário, ajuste o(s) apoio(s) para os pés.

Verificação do contacto correto com a parte inferior:

Imagem 7 - Quick Installation Guide

Aviso! O cóccix e o osso íliaco não devem tocar na parte inferior da almofada. A verificação do contacto correto com a parte inferior deve ser efetuada durante a primeira utilização e depois de adaptar o enchimento da almofada.

Aviso! Vicair B.V. recomenda ajustar o grau de enchimento sob a supervisão direta do seu médico ou o profissional de tecnologia de assistência.

- Verifique o contacto correto com a parte inferior depois de se sentar na almofada durante cerca de 5 minutos.
- Deixe o seu médico ou o profissional de tecnologia de assistência deslizar uma mão entre as suas nádegas e a almofada Vicair enquanto se inclina para a frente.
- Peça ao seu médico ou ao profissional de tecnologia de assistência que verifique se os seus ossos inferiores salientes estão a ser apoiados por pelo menos 2,5 cm de SmartCells. Isto permite impedir o contacto dos ossos com o assento da cadeira de rodas.
- Não utilize a almofada se o contacto com a parte inferior for excedido. Na maioria dos casos, o problema fica resolvido ao adaptar o nível de enchimento dos compartimentos.

UTILIZAÇÃO

Verificação de vermelhidão na pele

Imagem 8 - Quick Installation Guide

Aviso! Verifique regularmente se a sua pele apresenta vermelhidão, em particular nos primeiros dias. Se ocorrer vermelhidão que não desaparece ao fim de 15 minutos, consulte o seu terapeuta ou Profissional de Tecnologia Assistiva.

Adaptação do grau de enchimento

Aviso! Vicair B.V. recomenda ajustar o grau de enchimento sob a supervisão direta do seu médico ou o profissional de tecnologia de assistência.

Pronta para a utilização

Este produto Vicair está pronto para ser utilizado. Tem o seu próprio nível de enchimento único, dependendo do tamanho e do modelo. No entanto, se necessário, o nível de enchimento pode ser adaptado acrescentando ou removendo SmartCells aos/dos vários compartimentos. Encontrará informações sobre o nível de enchimento padrão na etiqueta fixada na almofada.

Condições de utilização e armazenamento

Cuidado! Não utilize nem deixe o produto próximo de uma chama desprotegida ou fonte de calor a alta temperatura.

- **Peso do utilizador:**
Mínimo: 15 kg / 33 lbs,
máximo: 250 kg / 551 lbs
- **Temperatura:**
Mínimo: -20 °C / 4 °F,
máximo: 55 °C / 131 °F
- **Utilização em altitudes elevadas**
Aviso! A Vicair B.V. recomenda não utilizar a almofada a uma altitude superior a 2400 m (8000 pés) acima do nível do mar ou inferior a 50 m (164 pés) abaixo do nível do mar.

Dado que cada SmartCell se encontra preenchida com ar, a almofada pode comportar-se de forma diferente quando utilizada em altitudes elevadas ou num avião. Nestas circunstâncias, a firmeza da almofada pode ser ajustada removendo algumas células de cada compartimento.

- **Humidade do ar:**

Mínimo: 0%, máximo 100%

Afofar diariamente

A Vicair B.V. recomenda afofar diariamente a sua almofada Vicair antes de utilizá-la.

Utilização das almofadas de assento Vicair em veículos motorizados

Sempre que possível, transfira para fora da cadeira de rodas para um assento de veículo instalado pelo fabricante sem a almofada, e utilize o sistema de retenção de ocupantes do veículo testado contra choques.

Como alternativa à sua almofada para cadeira de rodas Vicair, pode ser utilizado o Vicair AllRounder O2 (que pode ser fixo ao corpo do utilizador) caso precise de uma proteção adicional num assento de veículo instalado pelo fabricante durante o transporte.

Quando a cadeira de rodas é usada como assento no veículo, devem ser cumpridas as regras e os regulamentos aplicáveis em matéria de segurança da cadeira de rodas e do utilizador da mesma durante o transporte. Não existem dados disponíveis quanto à influência em termos de segurança de uma almofada de cadeira de rodas Vicair utilizada numa cadeira de rodas testada contra choques.

Reutilização – Transferência do produto para outro utilizador

O produto é adequado para uso repetido. O número de vezes que pode ser utilizado depende da frequência e da forma como é utilizado. O produto tem de ser cuidadosamente limpo e desinfetado, antes de permitir o seu uso por outra pessoa. Consulte o capítulo «Manutenção e limpeza» para obter as instruções.

Nota! Certifique-se de que o produto está devidamente adaptado à outra pessoa.

Vida útil esperada

A vida útil esperada deste produto é de cinco anos se usado de acordo com as instruções de segurança, os intervalos de manutenção e a utilização correta indicados neste manual. A vida útil efetiva pode variar de acordo com a frequência e intensidade de utilização.

Substituição da capa da almofada

Em condições de utilização normal, a Vicair B.V. recomenda substituir a almofada anualmente. As capas de substituição podem ser adquiridas separadamente.

Eliminação

A eliminação e reciclagem de dispositivos e embalagens usadas deve ser feita em conformidade com as regulamentações legais aplicáveis. Antes de proceder à sua eliminação, certifique-se de que o produto se encontra limpo, para se evitar quaisquer riscos de contaminação.

MANUTENÇÃO E LIMPEZA

Aviso! A cada três meses, verifique se o produto está desgastado ou apresenta células vazias. Em caso de danos graves ou se várias células estiverem vazias, deixe de usar o produto. Consulte o seu Profissional de Tecnologia Assistiva.

Cuidado! Não limpe o produto a seco, com vapor nem trate com autoclave. O produto não foi concebido para suportar calor ou pressão excessivos. Se as instruções de limpeza fornecidas não forem cumpridas, é provável que o produto e/ou a capa do produto se desgaste(m) mais rapidamente.

Cuidado! Não utilize produtos de limpeza agressivos ou abrasivos nem objetos afiados para limpar a almofada.

Cuidado! Não coloque o topo da almofada Vicair O2 contra o vidro da máquina de lavar.

Cuidado! Uma lavagem excessiva pode acelerar o desgaste deste produto.

Limpeza da Vicair Vector O2

- **Limpeza da capa de almofada Vicair Vector O2**

A capa da almofada pode ser lavada na máquina. Siga as instruções de lavagem na etiqueta fixada na parte interna da capa. (60 °C= 140 °F)



- **Limpeza da almofada Vicair Vector O2**

A sua almofada Vicair O2 pode ser lavada na máquina a 60°C / 140°F num programa anti vincos com um detergente suave. Não precisa de remover as SmartCells antes de colocar a almofada na máquina de lavar. Certifique-se de que a parte superior da almofada não fica contra o vidro da porta da máquina de lavar. Não encha a máquina

com mais de metade do seu peso máximo de carga. Reduza a velocidade de centrifugação. Se usar uma máquina com agitador, certifique-se de que a almofada se move livremente dentro do tambor. Não utilize lixívia nem lave a seco, com vapor ou autoclave! Não seque a sua almofada Vicair O2 na máquina de secar; deixe-a secar ao ar (5-6 horas). Pode usar a fita para estender a almofada Vicair O2 num estendal de roupa.



Desinfecção da sua Vicair Vector O2

Aviso! Caso a almofada fique suja com fluidos corporais, e quando o produto é transferido para outro utilizador, deve ser desinfetado para evitar a contaminação cruzada. Limpe a almofada e a capa seguindo as instruções acima. Utilize de preferência um detergente antibacteriano. Depois de limpar, pulverize um agente desinfetante na sua almofada e capa. Dobre os compartimentos para fora para se certificar de que o agente penetra em todos os espaços.

COMUNICAÇÃO DE INCIDENTES GRAVES

Os incidentes graves resultantes da utilização de produtos Vicair devem ser comunicados ao fabricante e à autoridade competente relevante.

GARANTIA

Consulte www.vicair.com para obter informações completas sobre os processos de garantia, termos e condições.

A Vicair B.V. oferece uma garantia limitada contra defeitos de fabrico e materiais, desde que o produto seja utilizado normalmente. Quaisquer danos decorrentes de uma utilização indevida ou causados por um manuseio ou limpeza inadequados, ou por negligência, estão excluídos desta garantia.

Período de garantia

A contar da data original da compra: 24 meses.
As SmartCells nesta almofada Vicair O2 têm um período de garantia vitalício.

Caso seja detetado um defeito de material ou mão-de-obra dentro do período de garantia acima indicado, a Vicair B.V. reparará ou substituirá o produto gratuitamente a seu próprio critério.

Os recursos em caso de violação de garantias expressas no presente documento estão limitados à reparação ou substituição do produto.

As indemnizações por violação de qualquer garantia não incluem, em caso algum, danos consequenciais nem excedem o custo dos produtos vendidos não conformes.

Tem dúvidas?

Contacte a Vicair B.V. em info@vicair.com ou contacte o distribuidor Vicair do seu país.

Gentile cliente,

Grazie per aver scelto un prodotto Vicair®. Siamo sicuri che ne apprezzerete la semplicità, l'affidabilità e la fantastica efficacia. Per una rapida installazione è possibile utilizzare la guida di installazione rapida fornita con il cuscino. Inoltre si consiglia di leggere e comprendere il presente manuale prima dell'uso. Conservare sia la guida di installazione rapida che il presente manuale per farvi riferimento in futuro.

Per maggiori informazioni o per riordinare i manuali, contattare il distributore nel proprio paese.

Visitare vicair.com per eventuali informazioni sui distributori.

INTRODUZIONE

Vicair® Vector O2 è un cuscino per la seduta della sedia a rotelle con una superficie dal profilo anatomico che garantisce un livello molto elevato di stabilità agli individui soggetti ad un alto rischio di manifestazione delle lesioni da decubito. Inoltre, rappresenta un'integrazione ad alte prestazioni per i piani terapeutici delle lesioni da decubito (stadio I-IV).

INDICAZIONI


Si utilizza per assicurare comfort e un sostegno stabile al corpo, per migliorare la postura del corpo e per favorire la prevenzione delle lesioni da decubito.

Inoltre, rappresenta un'integrazione ad alte prestazioni per i piani terapeutici delle lesioni da decubito (stadio I-IV).

CONTROINDICAZIONI

Non sono presenti controindicazioni note in caso di uso utilizzo conforme alla destinazione d'uso.

COMPONENTI PRINCIPALI

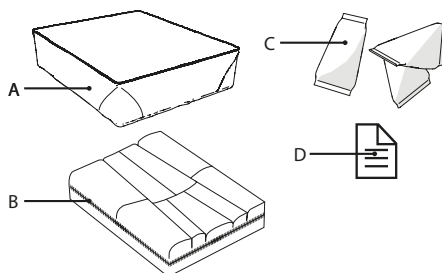

- A. Fodera
- B. Cuscino
- C. SmartCells™ con ripartizione in 9 settori
- D. Guida di installazione rapida

SPECIFICHE GENERALI DEL PRODOTTO

Descrizione	Vicair Vector O2
prodotto	
Produttore	Vicair B.V., Paesi Bassi
Garanzia	24 mesi
Materiali utilizzati	Materiali privi di lattice
Peso (escl. fodera)	Taglia piccola: 0,5 kg / 1,1 lbs Taglia media: 0,8 kg / 1,8 lbs Taglia grande: 1,3 kg / 2,9 lbs

Taglie disponibili	Vedere la griglia sul retro del manuale
Cuscino:	Parte superiore in tessuto di poliestere con rivestimento in poliuretano, parte inferiore in tessuto di poliestere a rete
Imbottitura	Elementi SmartCells riempiti d'aria con rivestimento a basso attrito
Fodera di rivestimento O2	Parte superiore: tessuto tramato in poliestere;
Top Cover:	bordo inferiore: tessuto in poliestere con rivestimento antiscivolo in poliuretano

Fodere del cuscino alternative

Fodera di rivestimento Comfair Cover: Parte superiore: tessuto in poliestere. Lati: tessuto a maglia tridimensionale in poliestere. Parte inferiore: tessuto in poliestere con rivestimento in poliuretano anti-scivolo.

Fodere di rivestimento Incotec Cover e Reversible Cover: Parte superiore: tessuto a maglia in poliestere rivestito in poliuretano traspirante fluido resistente. Parte inferiore: tessuto in poliestere con rivestimento in poliuretano anti-scivolo.

È possibile lavare tutte le fodere in lavatrice. Le fodere sono conformi a EN1021-1, 1021-2 e CAL117.

PRECAUZIONI E INDICAZIONI DI SICUREZZA

Un cuscino per carrozzine Vicair può essere utilizzato solo per lo scopo previsto. L'utilizzo del prodotto in qualsiasi altro modo è considerato un utilizzo improprio. Vicair B.V. declina ogni responsabilità per danni causati da utilizzo improprio o errato o da negligenza.

Assicurarsi di leggere e comprendere il manuale pienamente.

Attenzione! Vicair B.V. consiglia di installare il prodotto sotto la diretta supervisione di un terapeuta o di un professionista della tecnologia assistiva.

Attenzione! Il coccige e le ossa del bacino non devono toccare il fondo del cuscino. Il controllo dello "sprofondamento" deve essere eseguito durante il primo utilizzo e quindi dopo ogni regolazione dell'imbottitura del cuscino.

Attenzione! Verificare periodicamente la presenza di arrossamenti cutanei, soprattutto nel corso dei primi giorni. Se si manifesta un arrossamento che non scompare a distanza di 15 minuti, consultare il terapeuta o il professionista della tecnologia assistiva competente.

Attenzione! Vicair B.V. consiglia di regolare il livello d'imbottitura sotto la diretta supervisione dei terapeuti o dei professionisti della tecnologia assistiva competenti.

Attenzione! In caso di contaminazione con i fluidi corporei e di cessione del prodotto ad altri utenti, è obbligatorio disinfettare il prodotto per escludere i casi di contaminazione incrociata.

Attenzione! Sottoporre ogni tre mesi il prodotto ad una verifica dello stato d'usura e della presenza di celle sgonfie. In caso di gravi danni o in presenza di un gran numero di celle sgonfie, non continuare ad utilizzare il prodotto. Consultare il professionista della tecnologia assistiva competente.

Cautela! Non utilizzare o lasciare il prodotto in prossimità di fiamme aperte o fonti di calore a temperature elevate.

Cautela! Non lavare il prodotto a secco, pulirlo al vapore o sterilizzarlo in autoclave. Il prodotto non è in grado di resistere a valori eccessivi di calore o compressione. Non attenendosi alle istruzioni per la pulizia fornite, è molto probabile un invecchiamento del prodotto e/o della fodera del prodotto più rapido di quanto previsto.

Cautela! Non utilizzare né detergenti aggressivi o abrasivi né oggetti affilati per la pulizia del cuscino.

Attenzione! Non appoggiare la parte superiore del cuscino Vicair O2 contro il vetro dello sportello della lavatrice.

Cautela! Assicurarsi che il cuscino non possa interferire con i raggi delle ruote.

Attenzione! Lavaggi eccessivi possono influire sull'invecchiamento del prodotto.

Nota! Il grado di imbottitura può differire leggermente dallo standard (vedere etichetta del prodotto).

INSTALLAZIONE

Attenzione! Vicair B.V. consiglia di installare il prodotto sotto la diretta supervisione di un terapeuta o di un professionista della tecnologia assistiva.

Cautela! Assicurarsi che il cuscino non possa interferire con i raggi delle ruote.

Nota! Utilizzare sempre il cuscino con la fodera.

Nota! Assicurarsi che il sedile della carrozzina sia pulito e sgrassato.

Suggerimento: è possibile rimuovere le fascette a uncino se si preferisce non utilizzare gancetti ed occhielli. Tenere presente che non è possibile rimuovere le fascette fissate al fondo del cuscino e/o della fodera.

Attenersi ai passaggi seguenti per l'uso della fodera di rivestimento O2 Top Cover

I passaggi sono illustrati dalle figure per l'installazione 1 – 6 contenute nella guida rapida.

- Controllare le dimensioni del cuscino. La larghezza (X) del cuscino deve corrispondere a quella del sedile. Quando il cuscino è appoggiato contro i braccioli o i ripari laterali, la larghezza può essere fino a 2,5 cm (1") in eccesso. La profondità (Y) del cuscino deve corrispondere a quella del sedile.

- Controllare che le dimensioni della fodera corrispondano alle dimensioni del cuscino.
- Rimuovere i nastri protettivi dagli ancoraggi a ganci autoadesivi fissati sul fondo del cuscino.
- Posizionare il cuscino, premendolo saldamente.
- Posizionare la fodera di rivestimento O2 Top Cover sulla parte superiore del cuscino.
- Passare l'anello nella parte posteriore del cuscino attraverso l'asola nella parte posteriore della fodera.
- Sedersi sul cuscino per alcuni minuti per permettere al cuscino di adattarsi alla forma del corpo.
- Regolare i supporti per i piedi in caso di necessità.

Fodere del cuscino alternative

Eseguire i passaggi seguenti se si utilizza la fodera Comfair Cover, Incotec Cover o Reversible Cover.

Nota: La fodera Reversible Cover viene fornita con il lato traspirante fresco sull'esterno. Se è necessario utilizzare il lato resistente ai fluidi della fodera, per prima cosa aprire completamente la cerniera della parte superiore, separandola dalla sezione inferiore, quindi rivoltare la sezione superiore e fissarla nuovamente alla sezione inferiore con la cerniera.

- Controllare le dimensioni del cuscino. La larghezza (X) del cuscino deve corrispondere a quella del sedile. Quando il cuscino è appoggiato contro i braccioli o i ripari laterali, la larghezza può essere fino a 2,5 cm (1") in eccesso. La profondità (Y) del cuscino deve corrispondere a quella del sedile.
- Controllare che le dimensioni della fodera corrispondano alle dimensioni del cuscino.

- Rimuovere gli ancoraggi a ganci dal fondo del cuscino. Tenere presente che gli ancoraggi presenti sul fondo del cuscino non possono essere rimossi.
- Infilare il cuscino nella fodera.
- Passare il nastro attraverso l'occhiello nella fodera.
- Chiudere la zip. Assicurarsi di non danneggiare il cuscino.
- Rimuovere i nastri protettivi dagli ancoraggi a ganci autoadesivi fissati sul fondo della fodera del cuscino.
- Posizionare il cuscino, premendolo saldamente.
- Sedersi sul cuscino per alcuni minuti per permettere al cuscino di adattarsi alla forma del corpo.
- Se necessario, regolare i poggiatesta.

Controllare che non si verifichi un effetto di "sprofondamento":

Figura 7 - Guida rapida

Attenzione! Il coccige e le ossa del bacino non devono toccare il fondo del cuscino. Il controllo dello "sprofondamento" deve essere eseguito durante il primo utilizzo e quindi dopo ogni regolazione dell'imbottitura del cuscino.

Attenzione! Vicair B.V. consiglia di regolare il livello d'imbottitura sotto la diretta supervisione dei terapeuti o dei professionisti della tecnologia assistiva competenti.

- Verificare lo sprofondamento dopo aver utilizzato il cuscino per 5 minuti circa.
- Consentire al terapeuta o al professionista della tecnologia assistiva competente di infilare una mano tra le natiche e il cuscino Vicair chinandosi in avanti.
- Richiedere al terapeuta o al professionista della tecnologia assistiva competente di verificare che le sporgenze ossee inferiori siano supportate da almeno 2,5 cm / 1" di SmartCells. In questo modo si evita il contatto con il sedile della sedia a rotelle.

- Non utilizzare il cuscino se si verifica lo sprofondamento. Nella maggior parte dei casi il problema può essere risolto regolando il grado di imbottitura dei settori.

USO

Controllo dell'arrossamento della cute

Figura 8 - Guida rapida

Attenzione! Verificare periodicamente la presenza di arrossamenti cutanei, soprattutto nel corso dei primi giorni. Se si manifesta un arrossamento che non scompare a distanza di 15 minuti, consultare il terapeuta o il professionista della tecnologia assistiva competente.

Regolazione del grado di imbottitura

Attenzione! Vicair B.V. consiglia di regolare il livello d'imbottitura sotto la diretta supervisione dei terapeuti o dei professionisti della tecnologia assistiva competenti.

Pronto all'uso

Questo prodotto Vicair è pronto all'uso. Dispone di un suo esclusivo grado di imbottitura, a seconda della dimensione e del modello. Tuttavia, se necessario, il grado di imbottitura può essere regolato rimuovendo o aggiungendo SmartCells nei vari settori. Il grado di imbottitura predefinito è indicato sull'etichetta fissata sul cuscino.

Condizioni di utilizzo e conservazione

Cautela! Non utilizzare o lasciare il prodotto in prossimità di fiamme aperte o fonti di calore a temperature elevate.

- **Peso dell'utente**
Valore minimo: 15 kg / 33 lbs,
valore massimo: 250 kg / 551 lbs
- **Temperatura**
Valore minimo: -20 °C / 4 °F,
valore massimo: 55 °C / 131 °F

- **Usò ad alta quota**

Nota bene! Vicair B.V. sconsiglia di utilizzare il cuscino a un'altitudine superiore a 2400 m (8000 ft) sul livello del mare o inferiore a 50 m (164 ft) sotto al livello del mare. Il cuscino potrebbe presentare diversi comportamenti in caso di utilizzo a un'altitudine elevata o in aereo dato che ogni SmartCell è riempito d'aria. In queste circostanze, è possibile regolare la rigidità del cuscino rimuovendo alcune celle da ogni settore.

- **Umidità dell'aria**

Valore minimo: 0%, valore massimo 100%

Cura quotidiana

Vicair B.V. consiglia di dare volume al cuscino Vicair quotidianamente prima dell'utilizzo.

Uso dei cuscini Vicair in veicoli a motore

Ove possibile, trasferire dalla carrozzina al sedile installato da una casa automobilistica senza cuscino e usare il sistema di ritenuta del passeggero sottoposto a crash test.

Alternativamente al cuscino per carrozzina Vicair, è possibile utilizzare il cuscino Vicair Allrounder O2 (che può essere fissato al corpo dell'utente) se durante il trasporto è necessaria una protezione aggiuntiva sul sedile di un veicolo installato da una casa automobilistica. Se la carrozzina viene usata come sedile per veicolo è obbligatorio rispettare le regole e le normative vigenti relative alle modalità di allacciamento della carrozzina e dell'utente durante il trasporto.

Non sono disponibili dati relativi alle conseguenze sulla sicurezza dovute all'uso del cuscino per carrozzina Vicair su una carrozzina sottoposta a crash test.

Riutilizzo - Cessione del prodotto ad altri utenti

Il prodotto è adatto ad un impiego ripetuto. Il numero di applicazioni possibili dipende dalla

frequenza e dalle modalità con cui si utilizza il prodotto. È necessario sottoporre il prodotto ad operazioni approfondite di pulizia e disinfezione prima di consentirne l'impiego ad altri utenti. Consultare il capitolo "Manutenzione e pulizia" per le istruzioni specifiche.

Nota! Assicurarsi che il prodotto sia regolato correttamente per l'altra persona.

Durata stimata

La durata stimata del prodotto è di cinque anni se usato in conformità con le istruzioni di sicurezza, i periodi di manutenzione e l'uso corretto indicato nel presente manuale. La durata effettiva può variare in base alla frequenza e all'intensità di utilizzo.

Sostituzione della fodera

In normali condizioni d'impiego, Vicair B.V. consiglia di sostituire la fodera ogni anno. È possibile acquistare le fodere di ricambio a parte.

Smaltimento

Le procedure di smaltimento e riciclaggio dei dispositivi usati e dell'imballaggio devono essere conformi alle disposizioni di legge in vigore. Accertarsi di aver pulito il prodotto prima dello smaltimento per escludere eventuali rischi di contaminazione.

MANUTENZIONE E PULIZIA

Attenzione! Sottoporre ogni tre mesi il prodotto ad una verifica dello stato d'usura e della presenza di celle sgonfie. In caso di gravi danni o in presenza di un gran numero di celle sgonfie, non continuare ad utilizzare il prodotto. Consultare il professionista della tecnologia assistiva competente.

Cautela! Non lavare il prodotto a secco, pulirlo al vapore o sterilizzarlo in autoclave. Il prodotto non è in grado di resistere a valori eccessivi di calore o compressione. Non attenendosi alle istruzioni per la pulizia fornite, è molto probabile un invecchiamento del prodotto e/o della fodera del prodotto più rapido di quanto previsto.

Cautela! Non utilizzare né detergenti aggressivi o abrasivi né oggetti affilati per la pulizia del cuscino.

Attenzione! Non appoggiare la parte superiore del cuscino Vicair O2 contro il vetro dello sportello della lavatrice.

Attenzione! Lavaggi eccessivi possono influire sull'invecchiamento del prodotto.

Pulizia di Vicair Vector O2

- **Pulizia della fodera Vicair Vector O2**

La fodera del cuscino può essere lavata in lavatrice. Seguire le istruzioni di lavaggio presenti sull'etichetta fissata all'interno della fodera.

(60 °C = 140 °F).



- **Pulizia del cuscino Vicair Vector O2**

È possibile lavare il cuscino Vicair O2 in lavatrice a 60 °C / 140 °F con un ciclo antisciuma e un detergente delicato. Non è necessario rimuovere SmartCells prima di mettere il cuscino in lavatrice.

Accertarsi di non appoggiare la parte superiore del cuscino contro il vetro dell'oblò della lavatrice. Non caricare la macchina oltre la metà del peso massimo consentito. È consigliabile ridurre il numero di giri della centrifuga. Quando si utilizza una macchina dotata di agitatore, accertarsi di consentire al cuscino di muoversi senza ostacoli all'interno del tamburo. Non utilizzare candeggina al cloro e non effettuare lavaggi a secco, pulire al vapore o sterilizzare in autoclave. Non asciugare in asciugatrice il cuscino Vicair O2, ma farlo asciugare all'aria (5-6 ore). È possibile utilizzare la cinghia per appendere ad asciugare il cuscino Vicair O2.



Disinfezione di Vicair Vector O2

Attenzione! In caso di contaminazione con i fluidi corporei e di cessione del prodotto ad altri utenti, è obbligatorio disinfettare il prodotto per escludere i casi di contaminazione incrociata.

Pulire il cuscino e la fodera in base alle istruzioni precedentemente fornite, utilizzando preferibilmente detergenti antibatterici. Al termine del lavaggio, distribuire uno spray con disinfettante sul cuscino e sulla fodera. Piegare i settori verso l'esterno per accertarsi di consentire allo spray di raggiungere gli interstizi.

SEGNALAZIONE DI INCIDENTI GRAVI

Si consiglia di segnalare al produttore e all'autorità competente in materia gli eventuali incidenti gravi dovuti all'utilizzo dei prodotti Vicair.

GARANZIA

Visitare il sito www.vicair.com per avere informazioni complete relative ai processi di garanzia, ai termini e condizioni.

Vicair B.V. offre una garanzia limitata nei confronti di difetti di fabbricazione o dei materiali, a condizione di un utilizzo corretto del prodotto. Eventuali danni derivanti da un impiego errato o da operazioni improprie di manipolazione e pulizia o da negligenza non sono compresi dalla presente garanzia.

Durata della garanzia

La durata della garanzia a decorrere dalla data d'acquisto iniziale è pari a 24 mesi.

Le SmartCell di questo cuscino Vicair O2 sono coperte da garanzia permanente.

In caso di difetto imputabile alla produzione o ai materiali entro il suddetto periodo di garanzia, Vicair B.V. si riserva il diritto di riparare o sostituire il prodotto gratuitamente, a propria discrezione.

L'indennizzo per la violazione delle presenti garanzie esplicitate è limitato alla riparazione o sostituzione del prodotto.

In nessun caso gli eventuali risarcimenti riconducibili alla violazione di eventuali condizioni di garanzia comprendono i danni secondari o superano il costo degli articoli non conformi oggetto della vendita.

Domande

È contattare Vicair B.V. all'indirizzo info@vicair.com o consultare il rivenditore Vicair competente del paese d'appartenenza.

Αγαπητέ πελάτη,

Ευχαριστούμε που επιλέξατε το προϊόν Vicair®. Θα εκτιμήσετε σίγουρα την απλότητα, την αξιοπιστία και το εκπληκτικό αποτέλεσμα. Για γρήγορη εγκατάσταση μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον οδηγό γρήγορης εγκατάστασης που παρέχεται με το μαξιλάρι σας. Επίσης, παρακαλούμε διαβάστε και κατανοήστε αυτό το εγχειρίδιο χρήσης πριν την χρήση. Αποθηκεύστε τον οδηγό γρήγορης εγκατάστασης και αυτό το εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά.

Για περισσότερες πληροφορίες ή για να ξαναπαραγγείλετε το εγχειρίδιο, επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο της χώρας σας. Μεταβείτε στη διεύθυνση vicair.com για πληροφορίες αναφορικά με τον διανομέα.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Το Vicair® Vector O2 είναι ένα μαξιλάρι καθίσματος αναπηρικού αμαξιδίου με μια ανατομική γραμμή στην επιφάνεια καθίσματος, το οποίο παρέχει υψηλό βαθμό σταθερότητας για άτομα υψηλής επικινδυνότητας όσον αφορά στη δημιουργία τραυματισμών κατάκλισης. Αποτελεί επίσης μια προσθήκη υψηλής απόδοσης σ' ένα σχέδιο θεραπείας για τον τραυματισμό από έλκος κατάκλισης (στάδιο I-IV).

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ


Χρησιμοποιείται για να παρέχει άνεση, σταθερή στήριξη του κορμού, να βελτιώνει τη θέση σώματος και να εμποδίζει τους τραυματισμούς κατάκλισης.

Αποτελεί επίσης μια προσθήκη υψηλής απόδοσης σ' ένα σχέδιο θεραπείας για τον τραυματισμό από έλκος κατάκλισης (στάδιο I-IV).

ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

Όταν χρησιμοποιείται για τον σκοπό τον οποίο προορίζεται, δεν υπάρχουν γνωστές αντενδείξεις.

ΚΥΡΙΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ

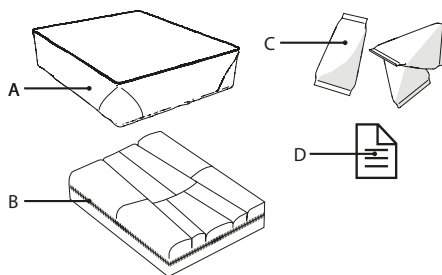

- A.** Κάλυμμα μαξιλαριού
- B.** Μαξιλάρι
- C.** SmartCells™, τοποθετούνται σε 9 θαλάμους
- D.** Οδηγός γρήγορης εγκατάστασης (Quick Installation Guide)

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Όνομα προϊόντος:	Vicair Vector O2
Κατασκευαστής:	Vicair B.V., Ολλανδία
Εγγύηση:	24 μήνες
Χρησιμοποιούμενα υλικά:	Όλα χωρίς λάτεξ
Βάρος (χωρίς το κάλυμμα):	Μικρότερο μέγεθος: 0,5 kg / 1.1 lbs Μεσαίο μέγεθος: 0,8 kg / 1.8 lbs Μεγαλύτερο μέγεθος: 1,3 kg / 2.9 lbs

Διαθέσιμα μεγέθη:	Συμβουλευτείτε τον πίνακα στο πίσω μέρος του εγχειριδίου
Μαξιλάρι:	Το πάνω μέρος είναι από πολυεστέρα με περιβλημα πολυουρεθάνης, η κάτω πλευρά είναι από πλέγμα πολυεστέρα
Γέμισμα:	SmartCells γέμισμα με αέρα με περιβλημα χαμηλής τριβής
O2 Top Cover κάλυμμα μαξιλαριού:	Πάνω: Πλεκτό ύφασμα από πολυεστέρα. Κάτω άκρη: Ύφασμα πολυεστέρα με αντιολισθητική επένδυση πολυουρεθάνης.

Διαφορετικά καλύμματα μαξιλαριού

Comfair Cover (κάλυμμα μαξιλαριού): Πάνω: Πλεκτό ύφασμα από πολυεστέρα. Πλάγια: Ύφασμα από τρισιδιάστατο πλέγμα πολυεστέρα. Κάτω: Ύφασμα πολυεστέρα με αντιολισθητική επένδυση πολυουρεθάνης.

Incotec Cover & Reversible Cover (καλύμματα μαξιλαριού): Πάνω: Πλεκτό ύφασμα, επένδυση από πολυουρεθάνη που αναπνέει για αντοχή στα υγρά. Κάτω: Ύφασμα πολυεστέρα με αντιολισθητική επένδυση πολυουρεθάνης.

Όλα τα καλύμματα: Πλένονται στο πλυντήριο. Τα καλύμματα πληρούν τον κανονισμό EN1021-1, 1021-2 και CAL117.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Το μαξιλάρι καθίσματος Vicair για αναπηρικό αμαξίδιο μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο ως μαξιλάρι καθίσματος για αναπηρικό αμαξίδιο. Οποιαδήποτε άλλη χρήση αυτού του

προϊόντος, θεωρείται ακατάλληλη. Η Vicair B.V. δεν φέρει καμία ευθύνη για βλάβες που οφείλονται σε ακατάλληλη, λανθασμένη και αλόγιστη χρήση. Βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει και έχετε κατανοήσει πλήρως αυτό το εγχειρίδιο.

Προειδοποίηση! Η Vicair B.V. συνιστά η εγκατάσταση του προϊόντος να πραγματοποιηθεί υπό την επίβλεψη ενός θεραπευτή ή έναν επαγγελματία τεχνολογίας υποβοήθησης.

Προειδοποίηση! Ο κόκκυγας και η λεκάνη σας δεν πρέπει να αγγίζουν την κάτω πλευρά του μαξιλαριού. Ο έλεγχος του "bottoming out" πρέπει να πραγματοποιείται κατά την πρώτη χρήση και μετά την ρύθμιση για το γέμισμα του μαξιλαριού.

Προειδοποίηση! Ελέγχετε τακτικά την επιδερμίδα σας για κοκκινίλες, ειδικά κατά τις πρώτες μέρες. Αν εμφανίζονται κοκκινίλες και δεν χάνονται μετά από 15 λεπτά, συμβουλευτείτε τον θεραπευτή ή τον Επαγγελματία Βοηθητικής Τεχνολογίας.

Προειδοποίηση! Το Vicair B.V. συνιστά η ρύθμιση για το γέμισμα να πραγματοποιηθεί υπό την επίβλεψη ενός θεραπευτή ή επαγγελματία τεχνολογίας υποβοήθησης.

Προειδοποίηση! Σε περίπτωση ρύπανσης με σωματικά υγρά και κατά τη μεταφορά του προϊόντος σε άλλο χρήστη, το προϊόν πρέπει να απολυμανθεί για να αποφευχθεί διασταυρούμενη μόλυνση.

Προειδοποίηση! Κάθε τρεις μήνες, ελέγχετε το προϊόν για φθορές και ξεφουσκωμένες κυψέλες. Σε περίπτωση σοβαρής βλάβης, ή μεγάλου αριθμού ξεφουσκωμένων κυψελών, σταματήστε να χρησιμοποιείτε το προϊόν. Συμβουλευτείτε τον επαγγελματία τεχνολογίας υποβοήθησης.

Προσοχή! Μην χρησιμοποιείτε ή μην αφήνετε το προϊόν κοντά σε γυμνή φλόγα ή πηγή θερμότητας με υψηλή θερμοκρασία.

Προσοχή! Μην χρησιμοποιείτε στεγνωτήριο,

καθαρισμό στον ατμό ή κλίβανο αποστείρωσης με το προϊόν. Το προϊόν δεν αντέχει σε υπερβολική θερμότητα ή πίεση. Εάν δεν τηρούνται οι οδηγίες καθαρισμού, ενδέχεται το προϊόν και/ή το κάλυμμα του προϊόντος να υποστεί πιο γρήγορα φθορές.

Προσοχή! Μην χρησιμοποιείτε διαβρωτικά ή σκληρά καθαριστικά ή αιχμηρά αντικείμενα για τον καθαρισμό του μαξιλαριού.

Προσοχή! Η πάνω πλευρά του μαξιλαριού Vicair O2 δεν πρέπει να ακουμπάει στο τζάμι της πόρτας πλυντηρίου.

Προσοχή! Βεβαιωθείτε ότι το μαξιλάρι δεν εμποδίζει τις ακτίνες της ρόδας.

Προσοχή! Το υπερβολικό πλύσιμο μπορεί να επηρεάσει την φθορά του προϊόντος.

Σημείωση! Ο βαθμός πλήρωσης μπορεί να παρεκκλίνει ελαφρώς από προεπιλογή (δείτε την ετικέτα του προϊόντος).

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Προειδοποίηση! Η Vicair B.V. συνιστά η εγκατάσταση του προϊόντος να πραγματοποιηθεί υπό την επίβλεψη ενός θεραπευτή ή έναν επαγγελματία τεχνολογίας υποβοήθησης.

Προσοχή! Βεβαιωθείτε ότι το μαξιλάρι δεν εμποδίζει τις ακτίνες της ρόδας.

Σημείωση! Να χρησιμοποιείτε πάντα μαξιλάρι με κάλυμμα.

Σημείωση! Βεβαιωθείτε ότι τα κάθισμα του αμαξιδίου είναι καθαρό και έχει απολιπανθεί.

Συμβουλή: Αν δεν θέλετε να χρησιμοποιήσετε το άγκιστρο και τη θηλιά, μπορείτε να αφαιρέσετε τα αυτοκόλλητα άγκιστρα. Οι ταινίες που βρίσκονται στην κάτω πλευρά του μαξιλαριού και/ή καλύμματος μαξιλαριού δεν αφαιρούνται.

Πραγματοποιήστε τα παρακάτω βήματα όταν χρησιμοποιείτε το O2 Top Cover

Αυτά τα βήματα αντιστοιχούν στις εικόνες

εγκατάστασης 1 – 6 του Quick Installation Guide:

- Ελέγξτε το μέγεθος μαξιλαριού. Το πλάτος (X) του μαξιλαριού πρέπει να αντιστοιχεί στο κάθισμα. Όταν το μαξιλάρι βρίσκεται ανάμεσα σε χέρια πολυθρόνας ή πλάγια προστατευτικά, το πλάτος μπορεί να είναι έως 2,5 cm. Το βάθος (Y) του μαξιλαριού πρέπει να αντιστοιχεί στο κάθισμα.
- Ελέγξτε ότι το μέγεθος του καλύμματος αντιστοιχεί στο μέγεθος του μαξιλαριού.
- Απομακρύνετε την προστατευτική ταινία διπλής όψης από τα αυτοκόλλητα άγκιστρα που βρίσκονται στην κάτω πλευρά του μαξιλαριού.
- Τοποθετήστε το μαξιλάρι πιέζοντας καλά.
- Τοποθετήστε το O2 Top Cover πάνω από το μαξιλάρι.
- Περάστε τη θηλιά στην πίσω πλευρά του μαξιλαριού μέσα από την κουμπότρυπα στην πίσω πλευρά του καλύμματος.
- Καθίστε στο μαξιλάρι για μερικά λεπτά, για να επιτρέψετε στον αέρα μέσα στο μαξιλάρι να προσαρμοστεί στο σχήμα του σώματός σας.
- Αν χρειάζεται, προσαρμόστε τα βοηθητικά ποδαράκια.

Διαφορετικά καλύμματα μαξιλαριού

Πραγματοποιήστε τα παρακάτω βήματα όταν χρησιμοποιείτε τα καλύμματα μαξιλαριού Comfair Cover, Incotec Cover ή Reversible Cover.

Προσοχή: Το κάλυμμα μαξιλαριού Reversible Cover παραδίδεται με την δροσερή πλευρά που αναπνέει να είναι στην εξωτερική πλευρά. Αν χρειάζεστε την πλευρά του μαξιλαριού με αντοχή στα υγρά: πρώτα ανοίξτε πλήρως το φερμουάρ της πάνω πλευράς του καλύμματος από την κάτω πλευρά, αναποδογυρίστε την πάνω πλευρά και ξανά κλείστε το φερμουάρ στην κάτω πλευρά.

- Ελέγξτε το μέγεθος μαξιλαριού. Το πλάτος (X) του μαξιλαριού πρέπει να αντιστοιχεί στο κάθισμα. Όταν το μαξιλάρι βρίσκεται ανάμεσα σε χέρια πολυθρόνας ή πλάγια προστατευτικά, το πλάτος μπορεί να είναι έως 2,5 cm. Το βάθος (Y) του μαξιλαριού πρέπει να αντιστοιχεί στο κάθισμα.
- Ελέγξτε ότι το μέγεθος του καλύμματος αντιστοιχεί στο μέγεθος του μαξιλαριού.
- Αφαιρέστε τα αυτοκόλλητα άγκιστρα από την κάτω πλευρά του μαξιλαριού. Οι ταινίες που βρίσκονται στην κάτω πλευρά του μαξιλαριού δεν αφαιρούνται.
- Εισάγετε το μαξιλάρι στο κάλυμμα.
- Περάστε τη θηλιά μέσα από τον κρίκο στο κάλυμμα.
- Κλείσιμο με φερμουάρ. Βεβαιωθείτε ότι δεν προκαλείτε βλάβη στο μαξιλάρι.
- Απομακρύνετε την προστατευτική ταινία διπλής όψης από τα αυτοκόλλητα άγκιστρα που βρίσκονται στο κάλυμμα μαξιλαριού.
- Τοποθετήστε το μαξιλάρι πιέζοντας καλά.
- Καθίστε στο μαξιλάρι για μερικά λεπτά, για να επιτρέψετε στον αέρα μέσα στο μαξιλάρι να προσαρμοστεί στο σχήμα του σώματός σας.
- Αν χρειάζεται, ρυθμίστε το(α) υποπόδιο(α).
- Ενώ γέρνετε προς τα εμπρός, επιτρέψτε στον θεραπευτή σας ή τον Επαγγελματία Βοηθητικής Τεχνολογίας σας να γλιστρήσει το χέρι του ανάμεσα στους γλουτούς σας και το μαξιλάρι Vicair .
- Ζητήστε από τον θεραπευτή ή τον Επαγγελματία Βοηθητικής Τεχνολογίας σας να ελέγξουν αν τα χαμηλότερα οστικά σας εξογκώματα στηρίζονται τουλάχιστον 2,5 cm από τα SmartCells. Αυτό τα εμποδίζει να αγγίζουν το κάθισμα του αμαξιδίου.
- Μην χρησιμοποιείτε το μαξιλάρι αν προκύψει bottoming out. Στις περισσότερες περιπτώσεις, η ρύθμιση για το γέμισμα των θαλάμων λύνει το πρόβλημα.

ΧΡΗΣΗ

Έλεγχος για κοκκινίλες στην επιδερμίδα

Εικόνα 8 - Quick Installation Guide

Προειδοποίηση! Ελέγχετε τακτικά την επιδερμίδα σας για κοκκινίλες, ειδικά κατά τις πρώτες μέρες. Αν εμφανίζονται κοκκινίλες και δεν εξαφανίζονται μετά από 15 λεπτά, συμβουλευτείτε τον θεραπευτή ή τον επαγγελματία Τεχνολογίας υποβοήθησης.

Ρύθμιση για το γέμισμα

Προειδοποίηση! Το Vicair B.V. συνιστά η ρύθμιση για το γέμισμα να πραγματοποιηθεί υπό την επίβλεψη ενός θεραπευτή ή Επαγγελματία Βοηθητικής Τεχνολογίας.

Έτοιμο για χρήση

Το προϊόν Vicair είναι έτοιμο για χρήση. Έχει το δικό του μοναδικό γέμισμα, σύμφωνα με το μέγεθος και το μοντέλο. Ωστόσο - αν χρειάζεται, το γέμισμα μπορεί να ρυθμιστεί αφαιρώντας ή προσθέτοντας SmartCells από/προς τους διάφορους θαλάμους. Μπορείτε να βρείτε την προεπιλεγμένη ρύθμιση για γέμισμα στην ετικέτα του μαξιλαριού.

Έλεγχος για “bottoming out”:

Εικόνα 7 - Quick Installation Guide

Προειδοποίηση! Ο κόκκυγας και η λεκάνη σας δεν πρέπει να αγγίζουν την κάτω πλευρά του μαξιλαριού. Ο έλεγχος του “bottoming out” πρέπει να πραγματοποιείται κατά την πρώτη χρήση και μετά την ρύθμιση για το γέμισμα του μαξιλαριού.

Προειδοποίηση! Το Vicair B.V. συνιστά η ρύθμιση για το γέμισμα να πραγματοποιηθεί υπό την επίβλεψη ενός θεραπευτή ή Επαγγελματία Βοηθητικής Τεχνολογίας.

- Ελέγξτε για bottoming out, μόλις καθίσετε στο μαξιλάρι για περίπου 5 λεπτά.

Συνθήκες χρήσης και αποθήκευσης

Προσοχή! Μην χρησιμοποιείτε ή μην αφήνετε το προϊόν κοντά σε γυμνή φλόγα ή πηγή θερμότητας με υψηλή θερμοκρασία.

- **Βάρος χρήση:**

Ελάχιστο: 15 kg / 33 lbs,
μέγιστο: 250 kg / 551 lbs

- **Θερμοκρασία:**

Ελάχιστο: -20 °C / 4 °F,
μέγιστο: 55 °C / 131 °F

- **Χρήση σε μεγάλο υψόμετρο**

Σημείωση! Η Vicair B.V. συνιστά να μην χρησιμοποιείτε το μαξιλάρι στα 2.400 μέτρα πάνω από το επίπεδο της θάλασσας ή στα 50 μέτρα κάτω από το επίπεδο της θάλασσας. Επειδή το κάθε SmartCell περιέχει αέρα, το μαξιλάρι μπορεί να συμπεριφερθεί διαφορετικά όταν χρησιμοποιείται σε μεγάλο υψόμετρο ή σ' ένα αεροπλάνο. Υπό αυτές τις συνθήκες, μπορείτε να ρυθμίσετε τη σταθερότητα του μαξιλαριού αφαιρώντας μερικές κυψέλες από κάθε θάλαμο.

- **Υγρασία του αέρα:**

Ελάχιστη: 0%, μέγιστη: 100%

Καθημερινό γέμισμα

Η Vicair B.V. συνιστά να γεμίζετε το μαξιλάρι Vicair πριν από τη χρήση σε καθημερινή βάση.

Χρήση του μαξιλαριού καθίσματος Vicair σε ηλεκτρικά αμαξίδια

Όποτε είναι δυνατόν, βγάλτε το από την αναπηρική καρέκλα και μέσα σε ένα κάθισμα οχήματος εγκατεστημένο από τον κατασκευαστή χωρίς το μαξιλάρι, και χρησιμοποιείτε το σύστημα συγκράτησης του επιβάτη του τεστ σύγκρουσης του οχήματος. Στη θέση του μαξιλαριού καθίσματος Vicair για αναπηρικό αμαξίδιο, μπορεί να χρησιμοποιηθεί το Vicair AllRounder O2 (το οποίο μπορεί να προσδεθεί στο σώμα του χρήστη) αν απαιτείται επιπλέον ασφάλεια κατά την μεταφορά σε

κάθισμα οχήματος τοποθετημένο από τον κατασκευαστή.

Όταν το αναπηρικό αμαξίδιο χρησιμοποιείται σαν κάθισμα οχήματος, πρέπει να τηρούνται οι ισχύοντες κανόνες και κανονισμοί σχετικά με την ασφάλεια του αναπηρικού αμαξιδίου και τον χρήστη του αναπηρικού αμαξιδίου κατά τη μεταφορά.

Δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα σχετικά με την επίδραση στην ασφάλεια ενός μαξιλαριού για αναπηρικό αμαξίδιο Vicair που χρησιμοποιείται σε ένα αναπηρικό αμαξίδιο με τεστ σύγκρουσης.

Επαναχρησιμοποίηση - Όταν μεταφέρετε το προϊόν σε κάποιον άλλον χρήστη

Το προϊόν είναι κατάλληλο για επαναλαμβανόμενη χρήση. Ο αριθμός των φορών που μπορεί να χρησιμοποιηθεί εξαρτάται από την συχνότητα και τον τρόπο που χρησιμοποιείται το προϊόν. Ο καθαρισμός και η απολύμανση του προϊόντος πρέπει να πραγματοποιείται σε βάθος, προτού επιτρέψετε να χρησιμοποιηθεί από άλλο άτομο. Δείτε το κεφάλαιο "Συντήρηση και καθαρισμός" για τις οδηγίες.

Σημείωση! Βεβαιωθείτε ότι το προϊόν έχει ρυθμιστεί σωστά στο άλλο άτομο.

Αναμενόμενη διάρκεια ζωής

Η αναμενόμενη διάρκεια ζωής του προϊόντος είναι πέντε χρόνια όταν χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις οδηγίες ασφάλειας, τα χρονικά διαστήματα συντήρησης και την ορθή χρήση που αναγράφεται στο εγχειρίδιο.

Ο αποτελεσματική διάρκεια ζωής μπορεί να διαφέρει ανάλογα τη συχνότητα και την έντονη χρήση.

Αντικατάσταση του καλύμματος μαξιλαριού

Υπό κανονικές συνθήκες, η Vicair B.V. σας προτείνει να αλλάζετε το κάλυμμα μαξιλαριού κάθε χρόνο. Μπορείτε να προμηθευτείτε χωριστά τα καλύμματα αντικατάστασης.

Απόρριψη

Η απόρριψη και η ανακύκλωση των χρησιμοποιημένων συσκευών και συσκευασιών πρέπει να πληροί τον ισχύοντα κανονισμό. Βεβαιωθείτε ότι το προϊόν είναι καθαρό προτού το απορρίψετε για να εμποδίσετε τον κίνδυνο μόλυνσης.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

Προειδοποίηση! Κάθε τρεις μήνες, ελέγχετε το προϊόν για φθορές και ξεφουσκωμένες κυψέλες. Σε περίπτωση σοβαρής βλάβης, ή μεγάλου αριθμού ξεφουσκωμένων κυψελών, σταματήστε να χρησιμοποιείτε το προϊόν. Συμβουλευτείτε τον επαγγελματία τεχνολογίας υποβοήθησης.

Προσοχή! Μην χρησιμοποιείτε στεγνωτήριο, καθαρισμό στον ατμό ή κλίβανο αποστείρωσης με το προϊόν. Το προϊόν δεν αντέχει σε υπερβολική θερμότητα ή πίεση. Εάν δεν τηρούνται οι οδηγίες καθαρισμού, ενδέχεται το προϊόν και/ή το κάλυμμα του προϊόντος να υποστεί πιο γρήγορα φθορές.

Προσοχή! Μην χρησιμοποιείτε διαβρωτικά ή σκληρά καθαριστικά ή αιχμηρά αντικείμενα για τον καθαρισμό του μαξιλαριού.

Προσοχή! Η πάνω πλευρά του μαξιλαριού Vicair O2 δεν πρέπει να ακουμπάει στο τζάμι της πόρτας πλυντηρίου.

Προσοχή! Το υπερβολικό πλύσιμο μπορεί να επηρεάσει την φθορά του προϊόντος.

Καθαρισμός του Vicair Vector O2

- **Καθαρισμός του καλύμματος μαξιλαριού Vicair Vector O2**

Το κάλυμμα μαξιλαριού πλένεται στο πλυντήριο. Ακολουθήστε τις οδηγίες πλύσης στην ετικέτα που βρίσκεται μέσα στο κάλυμμα.

(60 °C=140 °F)



- **Καθαρισμός του μαξιλαριού Vicair Vector O2**

Το μαξιλάρι Vicair O2 πλένεται στο πλυντήριο ρούχων στους 60°C σε πρόγραμμα για εύκολο σιδέρωμα και με ήπιο απορρυπαντικό. Δε χρειάζεται να αφαιρέσετε τα SmartCells για να βάλετε το μαξιλάρι στο πλυντήριο ρούχων. Βεβαιωθείτε ότι η πάνω πλευρά του μαξιλαριού δεν ακουμπάει το τζάμι της πόρτας πλυντηρίου. Μη γεμίζετε το πλυντήριο πάνω από το μισό του μέγιστου βάρους του φορτίου. Επίσης, πρέπει να μειωθεί η ταχύτητα περιστροφής. Όταν χρησιμοποιείτε ένα πλυντήριο με αναδευτήρα, βεβαιωθείτε ότι το μαξιλάρι κινείται χωρίς εμπόδιο μέσα στο τύμπανο. Μη χρησιμοποιείτε χλωρίνη, στεγνωτήριο, καθαρίσμα στον ατμό ή κλίβανο! Μη χρησιμοποιείτε στεγνωτήριο ρούχων για το μαξιλάρι Vicair O2, αλλά αφήστε το να στεγνώσει στον αέρα (5-6 ώρες). Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον κρίκο για να κρεμάσετε το μαξιλάρι Vicair O2.



Απολύμανση του Vicair Vector O2

Προειδοποίηση! Σε περίπτωση που λερωθεί με σωματικά υγρά, και όταν μεταφέρετε το προϊόν σε κάποιον άλλον χρήστη, πρέπει να το απολυμαίνετε για να εμποδίσετε την διασταυρούμενη επιμόλυνση. Καθαρίστε το μαξιλάρι και το κάλυμμα σύμφωνα με τις παραπάνω οδηγίες. Χρησιμοποιείτε καλύτερα ένα αντιβακτηριακό απορρυπαντικό. Μετά τον καθαρισμό, ψεκάστε το μαξιλάρι και το κάλυμμα με ένα προϊόν απολύμανσης. Λυγίστε προς τα έξω τους θαλάμους για να βεβαιωθείτε ότι το σπρέι πηγαίνει σ' όλα τα κενά.

ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΟΒΑΡΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ

Τα σοβαρά ατυχήματα λόγω της χρήσης των προϊόντων Vicair πρέπει να αναφέρονται στον κατασκευαστή και την αντίστοιχη αρμόδια αρχή.

ΕΓΓΥΗΣΗ

Παρακαλούμε δείτε στο www.vicair.com όλες τις πληροφορίες σχετικά με τις διαδικασίες εγγύησης, τους όρους και τις προϋποθέσεις. Η Vicair B.V. προσφέρει περιορισμένη εγγύηση σε ελαττώματα λόγω κατασκευής και υλικών, υπό την προϋπόθεση ότι το προϊόν χρησιμοποιείται κανονικά. Κάθε βλάβη που προκύπτει λόγω ακατάλληλης χρήσης, ή μη σωστού χειρισμού, καθαρισμού ή αμέλειας, δεν περιλαμβάνεται σε αυτή την εγγύηση.

Περίοδος εγγύησης

Από την αρχική ημερομηνία αγοράς: 24 μήνες.
Τα SmartCells στο μαξιλάρι Vicair O2 έχουν εγγύηση εφόρου ζωής.

Σε περίπτωση που προκύψει κάποιο ελάττωμα στα υλικά ή στην κατασκευή εντός της παραπάνω αναφερόμενης περιόδου εγγύησης, η Vicair B.V. - με δική της απόφαση - θα επιδιωρθώσει ή θα αντικαταστήσει το προϊόν χωρίς καμία χρέωση. Το κάλυμμα μαξιλαριού δεν περιλαμβάνεται στην εγγύηση.
Τα μέσα προσφυγής για παράβαση των ρητών εγγυήσεων στο παρόν έγγραφο περιορίζονται στην επιδιόρθωση ή την αντικατάσταση του προϊόντος.

Σε καμία περίπτωση οι ζημιές από την παραβίαση οποιασδήποτε εγγύησης δεν θα περιλαμβάνουν τυχόν επακόλουθη ζημία ούτε θα υπερβαίνουν το κόστος των μη συμμορφούμενων αγαθών που έχουν πουληθεί.

Κάποια ερώτηση;

Επικοινωνήστε με την Vicair B.V. στο info@vicair.com ή με τον αντιπρόσωπο της Vicair στη χώρα σας.

Poštovani korisniče,

Zahvaljujemo Vam na kupnji proizvoda Vicair®. Sigurni smo da ćete cijeniti jednostavnost, pouzdanost i fantastičan učinak. Za brzu ugradnju možete koristiti priručnik za brzu ugradnju koji dolazi uz Vaš jastuk. Također vas molimo da pročitate i proučite ovaj korisnički priručnik prije uporabe. Priručnik za brzu ugradnju i ovaj priručnik sačuvajte za buduću uporabu.

Za više informacija ili za (ponovnu) narudžbu priručnika, kontaktirajte distributera u svojoj državi.

Za informacije o distributeru idite na web-mjesto vicair.com.

UVOD

Vicair® Vector O2 je jastuk za sjedalo invalidskih kolica s anatomske oblikovanom površinom sjedala koja pruža vrlo visoku razinu stabilnosti osobama izloženima visokom riziku od ozljeda zbog pritiska. To je i visokoučinkovit dodatak planu za liječenje ozljeda zbog pritiska (I. – IV. stupanj).


INDIKACIJE

Upotrebljava se za pružanje udobnosti, stabilnu potporu tijela, poboljšanje držanja tijela i sprječavanje ozljeda uzrokovanih pritiskom. To je i visokoučinkovit dodatak planu za liječenje ozljeda zbog pritiska (I. – IV. stupanj).

KONTRAINDIKACIJE

Kada se upotrebljava u skladu s namjenom, ne postoje poznate kontraindikacije.

GLAVNE KOMPONENTE

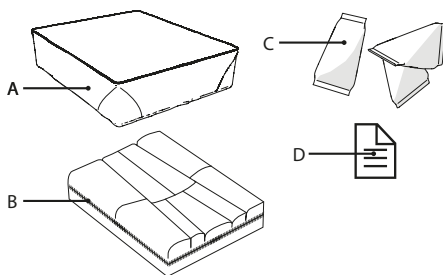

- A.** Navlaka za jastuk
- B.** Jastuk
- C.** SmartCells™, postavljene u 9 odjeljaka
- D.** Priručnik za brzu ugradnju

OPĆE KARAKTERISTIKE PROIZVODA

Naziv proizvoda:	Vicair Vector O2
Proizvodi:	Vicair B.V., Nizozemska
Jamstvo:	24 mjeseca
Korišteni materijali:	sve bez lateksa
Težina (bez navlake):	Najmanja veličina: 0,5 kg / 1.1 lbs Srednja veličina: 0,8 kg / 1.8 lbs Najveća veličina: 1,3 kg / 2.9 lbs
Dostupne veličine:	Pogledajte tablicu na stražnjem dijelu priručnika
Jastuk:	Vrh je izrađen od polieterske tkanine s poliuretanskom oblogom, dno je izrađeno od polieterske mrežaste tkanine
Punjenje:	čelije punjene zrakom SmartCells s oblogom niske razine trenja

O2 Gornja navlaka:	Gornji dio: Pletena tkanina od poliestera. Obod na dnu: polietersko platno s poliuretanskom protukliznom oblogom.
-----------------------	---

Alternativne navlake za jastuk

Comfair Cover navlaka za jastuk: Gornji dio:

Pletena tkanina od poliestera. Strane:

Polieterska 3D mrežasta tkanina. Donji dio:

polietersko platno s poliuretanskom

protukliznom oblogom.

Incotec Cover i Reversible Cover navlaka za

jastuk: Gornji dio: Pletena tkanina od poliestera,

obložena prozračnim poliuretanom otpornim

na tekućine. Donji dio: polietersko platno s

poliuretanskom protukliznom oblogom.

Sve navlake: perive u perilici rublja. Navlake su u skladu s normama EN1021-1, 1021-2 i CAL117.

MJERE OPREZA I SIGURNOSNE UPUTE

Jastuk za sjedalo za invalidska kolica Vicair može se koristiti isključivo u tu svrhu. Uporaba ovog proizvoda na bilo koji drugi način smatra se pogrešnom uporabom. Vicair B.V. ne može se smatrati odgovornim za štetu nastalu uslijed pogrešne i neodgovarajuće uporabe ili nemara. Svakako se pobrinite da pročitate i razumijete ovaj priručnik u cijelosti.

Upozorenje! Vicair B.V. preporučuje postavljanje proizvoda pod izravnim nadzorom terapeuta ili stručnjaka za pomoćnu tehnologiju.

Upozorenje! Vaša trtična kost ili karlične kosti ne bi trebale dodirivati dno jastuka. Tijekom prve uporabe trebalo bi provjeriti "bottoming out" te nakon prilagodbe punjenju jastuka.

Upozorenje! Redovito provjeravajte postoji li crvenilo kože, posebice tijekom prvih nekoliko dana. Ako se pojavi crvenilo i ne nestaje nakon

15 minuta, posavjetujte se sa svojim terapeutom ili stručnjakom za asistivnu tehnologiju.

Upozorenje! Vicair B.V. preporučuje prilagodbu stupnja punjenja pod izravnim nadzorom vašeg terapeuta ili stručnjaka za pomoćnu tehnologiju.

Upozorenje! U slučaju zaprljanja tjelesnim tekućinama i prilikom prijenosa proizvoda drugom korisniku, proizvod se mora dezinficirati kako bi se izbjegla međusobna kontaminacija.

Upozorenje! Svaka tri mjeseca provjerite koliko je proizvod istrošen i ima li ispuhane stanice. U slučaju ozbiljnog oštećenja ili velikog broja ispuhane stanice, nemojte nastaviti upotrebljavati proizvod. Posavjetujte se sa svojim stručnjakom za pomoćnu tehnologiju.

Oprez! Nemojte koristiti ili ostavljati proizvod u blizini otvorenog plamena ili izvora visoke temperature.

Oprez! Nemojte čistiti proizvod kemijski, parom ili autoklavom. Proizvod ne može izdržati prekomjernu vrućinu ili prejak pritisak. Ako se dane upute za čišćenje ne poštuju, vrlo je vjerojatno da će proizvod i/ili navlaka proizvoda brže starjeti.

Oprez! Nemojte koristiti agresivna ili abrazivna sredstva za čišćenje ili oštre predmete za čišćenje jastuka.

Oprez! Nemojte stavljati gornju stranu Vicair O2 jastuka okrenutu prema staklu na vratima perilice.

Oprez! Pazite da jastuk ne ulazi u šipke kotača.

Oprez! Prekomjerno pranje može utjecati na starenje ovog proizvoda.

Napomena! Stupanj punjenja može blago odstupiti od zadane vrijednosti (pogledajte naljepnicu proizvoda).

UGRADNJA

Upozorenje! Vicair B.V. preporučuje postavljanje proizvoda pod izravnim nadzorom terapeuta ili stručnjaka za pomoćnu tehnologiju.

Opres! Pazite da jastuk ne ulazi u šipke kotača.

Napomena! Uvijek koristite jastuk s navlakom.

Napomena! Pazite da sjedalo invalidskih kolica bude čisto i bez masnoća.

Savjet: ako ne želite upotrebljavati kuku i omču, možete ukloniti trake za kuku. Imajte na umu da trake na dnu jastuka i/ili navlakama jastuka nije moguće ukloniti.

Prilikom korištenja 02 Top Cover navlake za jastuk, izvršite sljedeće korake

Ovi koraci odgovaraju slikama za postavljanje 1 – 6 u vodiču za brzo postavljanje:

- Provjerite veličinu jastuka. Širina (X) jastuka i sjedala trebale bi odgovarati. Kada je jastuk naslonjen na rukonaslone ili bočne štitnike, širina može biti do 2,5 cm (1") veća. Dubina (X) jastuka i sjedala trebale bi odgovarati.
- Provjerite odgovara li veličina navlake veličini jastuka.
- Uklonite zaštitnu traku sa samoljepljivih traka za kuku pričvršćenih na dno jastuka.
- Postavite jastuk čvrsto pritišćući.
- Postavite 02 Top Cover navlaku za jastuk na vrh jastuka.
- Provucite petlju sa stražnje strane jastuka kroz "otvor za gumb" na stražnjem dijelu navlake.
- Sjedite na jastuku nekoliko minuta kako biste omogućili da se jastuk prilagodi obliku Vašeg tijela.
- Ako je potrebno, prilagodite oslonce za noge.

Alternativne navlake za jastuk

Obavite sljedeće korake kada koristite Comfair Cover, Incotec Cover ili Reversible Cover navlaku za jastuk.

Imajte na umu: Reversible Cover navlaka za jastuk isporučuje se s hladnom prozračnom vanjskom stranom. Ako vam treba strana ove navlake za jastuk koja je otporna na tekućine: najprije potpuno otvorite gornji dio navlake od donjeg dijela, okrenite naopačke gornji dio i ponovno ga zatvorite do donjeg dijela.

- Provjerite veličinu jastuka. Širina (X) jastuka i sjedala trebale bi odgovarati. Kada je jastuk naslonjen na rukonaslone ili bočne štitnike, širina može biti do 2,5 cm (1") veća. Dubina (X) jastuka i sjedala trebale bi odgovarati.
- Provjerite odgovara li veličina navlake veličini jastuka.
- Uklonite trake za kuku s dna jastuka. Imajte na umu da trake na dnu jastuka nije moguće ukloniti.
- Umetnite jastuk u navlaku.
- Provedite petlju kroz očiču u navlaci.
- Zatvorite patent zatvarač. Pazite da ne oštetite jastuk.
- Uklonite zaštitnu traku sa samoljepljivih traka za kuku pričvršćenih na navlaku za jastuk.
- Postavite jastuk čvrsto pritišćući.
- Sjedite na jastuku nekoliko minuta kako biste omogućili da se jastuk prilagodi obliku Vašeg tijela.
- Ako je potrebno, podesite naslon(e) za noge.

Provjera "pražnjenja":

Slika 7 - Quick Installation Guide

Upozorenje! Vaša trtična kost ili karlične kosti ne bi trebale dodirivati dno jastuka. Tijekom prve uporabe trebalo bi provjeriti "bottoming out" te nakon prilagodbe punjenju jastuka.

Upozorenje! Vicair B.V. preporučuje prilagodbu stupnja punjenja pod izravnim nadzorom vašeg terapeuta ili stručnjaka za asistivnu tehnologiju.

- Provjerite je li se jastuk ispraznio nakon što ste na njemu sjedili otprilike 5 minuta.

- Svom terapeutu ili stručnjaku za asistivnu tehnologiju dopustite da rukom sklizne između vaše stražnjice i jastuka Vicair dok se nagnijete prema naprijed.
- Pitajte svog terapeuta ili stručnjaka za asistivnu tehnologiju da provjeri podupire li se vaše najniže koštane izbočine slojem SmartCells od najmanje 2,5 cm / 1". Time se sprječava da kosti dodiruju sjedalo invalidskih kolica.
- Nemojte koristiti jastuk ako dođe do pražnjenja. U većini slučajeva, podešavanje stupnja punjenja odjeljaka riješit će problem.

UPORABA

Provjera crvenila kože

Slika 8 - Quick Installation Guide

Upozorenje! Redovito provjeravajte ima li na koži crvenila, posebice tijekom prvih nekoliko dana. Ako se pojavi crvenilo i ne nestaje nakon 15 minuta, posavjetujte se sa svojim terapeutom ili stručnjakom za pomoćnu tehnologiju.

Podešavanje stupnja punjenja

Upozorenje! Vicair B.V. preporučuje prilagodbu stupnja punjenja pod izravnim nadzorom vašeg terapeuta ili stručnjaka za asistivnu tehnologiju.

Spremno za uporabu

Ovaj Vicair proizvod spreman je za uporabu. Ima svoj vlastiti jedinstveni stupanj punjenja, ovisno o veličini i modelu. Ipak - ako je nužno, stupanj punjenja moguće je podešavati uklanjanjem ili dodavanjem SmartCells iz/u različite odjeljke. Zadani stupanj punjenja možete pronaći na oznaci pričvršćenoj na jastuk.

Uvjeti uporabe i čuvanja

Oprez! Nemojte koristiti ili ostavljati proizvod u blizini otvorenog plamena ili izvora visoke temperature.

- **Težina korisnika:**
Minimalno: 15 kg / 33 lbs,
maksimalno: 250 kg / 551 lbs
- **Temperatura:**
Minimalno: -20 °C / 4 °F,
maksimalno: 55 °C / 131 °F
- **Uporaba na velikoj visini**
Napomena! Vicair B.V. ne preporučuje upotrebu jastuka na nadmorskoj visini većoj od 2400 m (8000 ft) ili manjoj od 50 m (164 ft). S obzirom na to da je svaka ćelija SmartCell ispunjena zrakom, jastuk se može drugačije ponašati prilikom upotrebe na velikoj visini ili u zrakoplovu. U takvim okolnostima, čvrstoću jastuka možete prilagoditi uklanjanjem nekoliko ćelija iz svakog odjeljka.
- **Vlažnost zraka:**
Minimalno: 0%, maksimalno 100%

Dnevno protresanje

Vicair B.V. preporučuje da svakodnevno protresete svoj jastuk Vicair prije uporabe.

Uporaba jastuka za sjedalo Vicair u motornim vozilima

Kad god je to moguće, predite iz invalidskih kolica u sjedalo za vozilo bez jastuka koje je ugradio proizvođač automobila i koristite sigurnosni sustav za putnike testiran na sudaru vozila.

Kao alternativu za vaš Vicair jastuk za invalidska kolica, moguće je koristiti Vicair Allrounder O2 (koji se može pričvrstiti na tijelo korisnika) ako vam je potrebna dodatna zaštita u sjedalu za vozilo koje je ugradio proizvođač tijekom prijevoza.

Kada se invalidska kolica koriste kao sjedalo za vozilo, potrebno je pridržavati se važećih pravila i propisa koji se odnose na osiguravanje invalidskih kolica i korisnika invalidskih kolica tijekom prijevoza.

Nema dostupnih podataka o utjecaju na sigurnost Vicair jastuka za invalidska kolica koji se koristi u invalidskim kolicima testiranim na sudar.

Ponovno korištenje - Prenosjenje proizvoda na drugog korisnika

Proizvod je prikladan za opetovanu uporabu. Koliko se puta proizvodom može koristiti ovisi o učestalosti i načinu korištenja proizvodom. Proizvod mora biti temeljito očišćen i dezinficiran prije nego što se njime može koristiti druga osoba. Za upute pogledajte poglavlje „Održavanje i čišćenje“.

Napomena! Pazite da proizvod bude odgovarajuće prilagođen drugoj osobi.

Očekivani vijek trajanja

Očekivani vijek trajanja ovog proizvoda je pet godina kada se koristi u skladu sa sigurnosnim uputama, intervalima održavanja i pravilnom uporabom, što je navedeno u ovom priručniku. Efektivni vijek trajanja može varirati u ovisnosti o učestalosti i intenzitetu uporabe.

Mijenjanje navlake jastuka

Kod redovne uporabe, Vicair B.V. preporučuje zamjenu navlake za jastuk svake godine. Zamjenske navlake mogu se zasebno kupiti.

Odlaganje

Odlaganje i recikliranje korištenih uređaja i ambalaže mora odgovarati važećim propisima. Pazite da proizvod bude očišćen prije odlaganja kako bi se izbjegla bilo kakva opasnost od kontaminacije.

ODRŽAVANJE I ČIŠĆENJE

Upozorenje! Svaka tri mjeseca provjerite koliko je proizvod istrošen i ima li ispuhanih stanica. U slučaju ozbiljnog oštećenja ili velikog broja ispuhanih stanica, nemojte nastaviti upotrebljavati proizvod. Posavjetujte se sa svojim stručnjakom za pomoćnu tehnologiju.

Opres! Nemojte čistiti proizvod kemijski, parom ili autoklavom. Proizvod ne može izdržati prekomjernu vrućinu ili prejak pritisak. Ako se dane upute za čišćenje ne poštuju, vrlo je vjerojatno da će proizvod i/ili navlaka proizvoda brže starjeti.

Opres! Nemojte koristiti agresivna ili abrazivna sredstva za čišćenje ili oštre predmete za čišćenje jastuka.

Opres! Nemojte stavljati gornju stranu Vicair O2 jastuka okrenutu prema staklu na vratima perilice.

Opres! Prekomjerno pranje može utjecati na starenje ovog proizvoda.

Čišćenje Vicair Vector O2a

• Čišćenje navlake Vicair Vector O2a

Navlaku za jastuk moguće je prati u perilici rublja. Slijedite upute za pranje na oznaci pričvršćenoj na unutarnjoj strani navlake. (60 °C = 140 °F)



• Čišćenje jastuka Vicair Vector O2a

Jastuk Vicair O2 može se strojno prati blagim deterdžentom pri 60 °C / 140 °F odabirom programa protiv gužvanja. Ne trebate ukloniti ćelije SmartCells prije stavljanja jastuka u perilicu rublja. Gornju stranu jastuka ne smijete staviti uz staklo na vratima perilice rublja. Nemojte puniti perilicu s više od polovine njezina maksimalnog kapaciteta opterećenja. Treba

smanjiti brzinu vrtnje. Kada upotrebljavate perilicu rublja s miješalicom, uvjerite se da se jastuk može slobodno kretati unutar bubnja. Nemojte upotrebljavati izbjeljivač na bazi klora i nemojte čistiti kemijski, parom ili autoklavom! Nemojte sušiti jastuk Vicair O2 u sušilici rublja, nego ga ostavite da se osuši na zraku (od 5 do 6 sati). Jastuk Vicair O2 možete sušiti pomoću užeta.



Dezinficiranje Vašeg Vicair Vector O2

Upozorenje! U slučaju uprljanosti proizvoda tjelesnim tekućinama, te prilikom prijenosa proizvoda na drugog korisnika, proizvod je potrebno dezinficirati kako bi se izbjegla obostrana kontaminacija. Očistite jastuk i navlaku prema prethodnim uputama. Po mogućnosti koristite antibakterijski deterdžent. Nakon pranja, pošpricajte svoj jastuk i navlaku dezinfekcijskim sredstvom. Nagnite odjeljke prema van kako biste bili sigurni da će sprej ući u otvore.

PRIJAVLJIVANJE OZBILJNIH ŠTETNIH DOGAĐAJA

Ozbiljne štetne događaje koji se javljaju uporabom proizvoda Vicair treba prijaviti proizvođaču i odgovarajućem nadležnom tijelu.

JAMSTVO

Pogledajte www.vicair.com za potpune informacije o jamstvenim postupcima, uvjetima i odredbama.

Vicair B.V. nudi ograničeno jamstvo za nedostatke u izradi i materijalima, pod uvjetom da je proizvod pravilno korišten. Bilo kakvo oštećenje uzrokovano neispravnom uporabom ili neodgovarajućim rukovanjem odnosno nemarom isključeno je iz ovog jamstva.

Jamstveno razdoblje

Od originalnog datuma kupnje: 24 mjeseca. SmartCells u ovom Vicair O2 jastuku imaju doživotno jamstveno razdoblje.

U slučaju da se nedostatak u materijalima ili izradi dogodi tijekom prethodno spomenutog jamstvenog razdoblja, Vicair B.V. će – prema vlastitom odabiru – besplatno popraviti ili zamijeniti proizvod.

Način otklanjanja kršenja izričitog jamstva ograničen je na popravak ili zamjenu proizvoda. Šteta za kršenje bilo kakvog jamstva ni u kom slučaju ne uključuje nikakvu posljedičnu štetu, niti prelazi trošak neodgovarajuće prodane robe.

Imate li pitanja?

Kontaktirajte Vicair B.V. na info@vicair.com ili kontaktirajte distributera Vicaira za Vašu zemlju.

Spoštovani uporabnik,

zahvaljujemo se vam, ker ste se odločili za nakup izdelka Vicair®. Prepričani smo, da vas bodo njegove preprostost, zanesljivost in učinkovitost navdušile. Za hitro namestitev lahko uporabite kratka navodila, ki so priložena blazini. Pred uporabo morate prebrati in razumeti tudi ta uporabniški priročnik. Kratka navodila in ta priročnik shranite za prihodnjo uporabo.

Če potrebujete več informacij ali če želite (ponovno) naročiti priročnike, se obrnite na distributerja za vašo državo.

Za informacije o prodajalcu obiščite spletno stran vicair.com.

UVOD

Vicair® Vector O2 je sedežna blazina za invalidske vozičke z anatomsko oblikovano sedežno površino, ki osebam z visokim tveganjem za nastanek poškodb zaradi pritiska, zagotavlja visoko raven stabilnosti. Hkrati se uporablja tudi kot učinkovit pripomoček pri zdravljenju poškodb zaradi pritiska (stopnje I–IV).

INDIKACIJE


Uporablja se za zvečanje udobja, zagotavljanje stabilne podpore telesu, izboljšanje telesne drže in pomaga preprečevati poškodbe zaradi pritiska.

Hkrati se uporablja tudi kot učinkovit pripomoček pri zdravljenju poškodb zaradi pritiska (stopnje I–IV).

KONTRAINDIKACIJE

Pri pravilni uporabi ni znanih kontraindikacij.

OSNOVNI SESTAVNI DELI

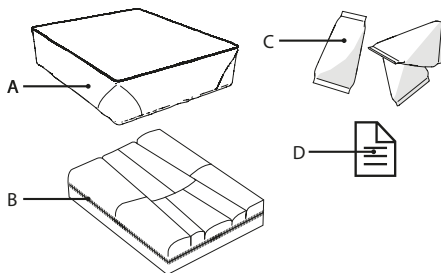

- A.** Prevleka za blazino
- B.** Blazina
- C.** Jedro SmartCells™, vstavljeno v 9 razdelkov
- D.** Kratka navodila (Quick Installation Guide)

SPLOŠNI PODATKI O IZDELKU

Ime izdelka:	Vicair Vector O2
Proizvajalec:	Vicair B.V., Nizozemska
Garancija:	24 mesecev
Uporabljeni materiali:	ne vsebujejo lateksa
Teža (brez prevleke):	Najmanjši model: 0,5 kg / 1.1 lbs Srednji model: 0,8 kg / 1.8 lbs Največji model: 1,3 kg / 2.9 lbs
Razpoložljive velikosti:	Glejte razpredelnico na koncu priročnika
Blazina:	Zgornji del poliester s poliuretanskim premazom, spodnji del iz mrežastega poliestra
Polnilo:	zračno jedro SmartCells s prevleko za zmanjšanje trenja

Prevleka za blazino O2 Top	Zgornji del: Pletena poliesterška tkanina.
Cover:	Spodnji rob: Poliesterška tkanina s protizdrsnim poliuretanskim slojem.

Druge prevleke za blazino

Prevleka za blazino Comfair Cover: Zgornji del: Pletena poliesterška tkanina. Stranski deli: Mrežasta 3D poliesterška tkanina. Spodnji del: Poliesterška tkanina s protizdrsnim poliuretanskim slojem.

Prevleki za blazino Incotec Cover in Reversible Cover: Zgornji del: Pletena poliesterška tkanina, prevlečena z vodoodbojnim zračnim poliuretanom. Spodnji del: Poliesterška tkanina s protizdrsnim poliuretanskim slojem.

Vse prevleke: Primerne so za pranje v pralnem stroju. Prevleke so skladne s standardi EN1021-1, 1021-2 in CAL117.

PREVIDNOSTNI UKREPI IN VARNOSTNA NAVODILA

Sedežna blazina za invalidske vozičke Vicair se lahko uporablja samo kot blazina za sedež invalidskega vozička. Uporaba tega izdelka za druge namene se šteje za napačno. Družba Vicair B.V. ne prevzema odgovornosti za škodo, ki nastane zaradi napačne ali nepravilne uporabe ali malomarnosti. Priročnik morate obvezno v celoti prebrati in razumeti.

Opozorilo! Družba Vicair B.V. priporoča, da izdelek namestite pod neposrednim nadzorom terapevta ali strokovnjaka za podporno tehnologijo.

Opozorilo! Trtica in medenične kosti ne smejo biti v stiku z dnom blazine. Med prvo uporabo in po prilagajanju napolnjenosti blazine preverite, da se trtica in medenične kosti ne posedejo do dna blazine.

Opozorilo! Redno preverjajte svojo kožo in bodite previdni na rdečice, zlasti v prvih nekaj

dneh. Če se rdečica pojavi in ne izgine po 15 minutah, se posvetujte s svojim terapevtom ali strokovnjakom za podporno tehnologijo.

Opozorilo! Vicair B.V. priporoča, da stopnjo napolnjenosti prilagodite pod neposrednim nadzorom terapevta ali strokovnjaka za podporno tehnologijo.

Opozorilo! V primeru onesnaženosti s telesnimi tekočinami in ob predaji izdelka drugemu uporabniku je treba izdelek razkužiti, da bi s tem preprečili navzkrižno okužbo.

Opozorilo! Vsake tri mesece preverite obrabo blazine in puščanje zraka iz celic. Izdelek v primeru hudih poškodb in velikega števila izpraznjenih celih prenehajte uporabljati. Posvetujte se s strokovnjakom za podporno tehnologijo.

Pozor! Ne uporabljajte in ne puščajte izdelka v bližini odprtega ognja ali vira toplote.

Pozor! Izdelek ni primeren za kemično čiščenje, čiščenje s paro ali v avtoklavu. Izdelek ni obstojen na prekomerno toploto ali tlak. Če ne boste upoštevali navedenih navodil za čiščenje, je zelo verjetno, da se bosta izdelek in/ali prevleka izdelka hitreje obrabila.

Pozor! Za čiščenje ne uporabljajte agresivnih ali abrazivnih čistil in ostrih predmetov.

Pozor! Zgornje strani blazine Vicair O2 ne polagajte ob steklo vrat pralnega stroja.

Pozor! Zagotovite, da blazina ne bo prišla v stik z naperami kolesa.

Pozor! Prekomerno pranje lahko vpliva na staranje tega izdelka.

Obvestilo! Stopnja polnjenja lahko nekoliko odstopa od privzete (glej etiketo izdelka).

NAMESTITEV

Opozorilo! Družba Vicair B.V. priporoča, da izdelek namestite pod neposrednim nadzorom terapevta ali strokovnjaka za podporno tehnologijo.

Pozor! Zagotovite, da blazina ne bo prišla v stik z naperami kolesa.

Obvestilo! Blazino vedno uporabljajte skupaj s prevleko.

Obvestilo! Zagotovite, da bo sedež invalidskega vozička čist in razmaščen.

Nasvet: Če ne želite uporabiti kaveljčka in zanke, lahko trakove s kaveljčki odstranite. Trakov, ki so prišiti na dno blazine in/ali prevleko blazine, ni mogoče odstraniti.

Pri uporabi vrhnje prevleke za blazino O2 Top Cover izvedite naslednje korake

Ti koraki ustrezajo slikam namestitve 1 – 6 v kratkih navodilih:

- Preverite velikost blazine. Širina (X) blazine in sedeža se mora ujemati. Če blazina sloni ob naslonjalih za roke ali stranskih varovalih, je lahko njena širina do 2,5 cm večja. Globina (Y) blazine in sedeža se mora ujemati.
- Preverite, ali velikost prevleke ustreza velikosti blazine.
- S samolepilnih trakov s kaveljčki, pritrjenih na spodnjo stran blazine, odstranite zaščitno folijo.
- Trdno pritisnite blazino, da jo namestite.
- Prevleko za blazino O2 Top Cover namestite na zgornjo stran blazine.
- Napeljite zanko na zadnji strani blazine skozi »gumbnico« na zadnji strani prevleke.
- Za nekaj minut sedite na blazino, da se ta prilagodi obliki vašega telesa.
- Po potrebi nastavite opore za stopala.

Druge prevleke za blazino

Te korake izvedite v primeru uporabe prevleke za blazino Comfair Cover, Incotec Cover ali Reversible Cover.

Upoštevajte: Prevleka za blazino Reversible Cover je dobavljena s hladno zračno stranjo na zunanji strani. Če potrebujete vodoodbojno stran prevleke: najprej v celoti odprite zadrgo

na zgornjem delu prevleke od spodnjega predela, obrnite zgornji predel navzven in zaprite zadrgo nazaj do spodnjega predela.

- Preverite velikost blazine. Širina (X) blazine in sedeža se mora ujemati. Če blazina sloni ob naslonjalih za roke ali stranskih varovalih, je lahko njena širina do 2,5 cm večja. Globina (Y) blazine in sedeža se mora ujemati.
- Preverite, ali velikost prevleke ustreza velikosti blazine.
- S spodnje strani blazine odstranite trakove s kaveljčki. Trakov, ki so prišiti na spodnjo stran blazine, ni mogoče odstraniti.
- Blazino vstavite v prevleko.
- Zanko speljite skozi odprtino v prevleki.
- Zaprite zadrgo. Pazite, da ne poškodujete blazine.
- S samolepilnih trakov s kaveljčki, pritrjenih na prevleko blazine, odstranite zaščitno folijo.
- Trdno pritisnite blazino, da jo namestite.
- Za nekaj minut sedite na blazino, da se ta prilagodi obliki vašega telesa.
- Po potrebi prilagodite oporo/-i za noge.

Preverjanje stika z dnom blazine:

Slika 7 – Quick Installation Guide

Opozorilo! Trtica in medenične kosti ne smejo biti v stiku z dnom blazine. Med prvo uporabo in po prilagajanju napolnjenosti blazine preverite, da se trtica in medenične kosti ne posedejo do dna blazine.

Opozorilo! Vicair B.V. priporoča, da prilagodite stopnjo polnjenja pod neposrednim nadzorom vašega terapevta ali strokovnjaka za podporno tehnologijo.

- Po približno 5 minutah sedenja na blazini preverite, da trtica in medenične kosti niso v stiku z dnom blazine.
- Dovolite, da vaš terapevt ali strokovnjak za podporno tehnologijo potisne roko med

- vašo zadnjico in Vicair blazino, medtem ko se nagnete naprej.
- Prosite svojega terapevta ali strokovnjaka za podporno tehnologijo, da preveri, ali izdelek SmartCells opira vaše najnižje kostne izbokline za vsaj 2,5 cm/1". To preprečuje, da bi se dotaknili sedeža invalidskega vozička.
 - Če se trtica in medenične kosti posedejo do dna blazine, blazine ne uporabite. V večini primerov je težavo mogoče odpraviti s prilagajanjem stopnje napolnjenosti razdelkov.

UPORABA

Preverjanje pordelosti kože

Slika 8 – Quick Installation Guide

Opozorilo! Redno preverjajte, ali je koža pordela, zlasti prve dni. Če se pojavi rdečina, ki po 15 minutah ne izgine, se posvetujte s svojim terapevtom ali s strokovnjakom za podporno tehnologijo.

Prilagajanje stopnje napolnjenosti

Opozorilo! Vicair B.V. priporoča, da prilagodite stopnjo polnjenja pod neposrednim nadzorom vašega terapevta ali strokovnjaka za podporno tehnologijo.

Pripravljenost na uporabo

Ta izdelek Vicair je pripravljen za uporabo. Izdelek ima glede na velikost in model edinstveno stopnjo napolnjenosti. Toda stopnjo napolnjenosti je po potrebi mogoče spremeniti – z odstranjevanjem celic SmartCells iz različnih razdelkov ali dodajanjem celic vanje. Privzeta stopnja napolnjenosti je navedena na oznaki na blazini.

Pogoji uporabe in shranjevanja

Pozor! Ne uporabljajte in ne puščajte izdelka v bližini odprtega ognja ali vira toplote.

- **Teža uporabnika:**
najmanj: 15 kg / 33 lbs,
največ: 250 kg / 551 lbs
- **Temperatura:**
najmanj: -20 °C / 4 °F,
največ: 55 °C / 131 °F
- **Uporaba na visoki nadmorski višini**
Obvestilo! Vicair B.V. odsvetuje uporabo blazine na nadmorski višini več kot 2.400 m ali na več kot 50 m pod gladino morja. Vsaka celica SmartCell je napolnjena z zrakom, zato se lahko lastnosti blazine pri uporabi na visoki nadmorski višini ali na letalu spremenijo. V takšnih primerih lahko trdoto blazine prilagodite tako, da iz vsakega razdelka odstranite nekaj celic.
- **Vlažnost zraka:**
najmanj: 0 %, največ: 100 %

Dnevno rahljanje

Družba Vicair B.V. priporoča, da blazino Vicair vsak dan pred uporabo zrahljate.

Uporaba sedežnih blazin Vicair v motornih vozilih

Kadar koli je mogoče, se z invalidskega vozička prestavite na avtomobilski sedež brez blazine, ki ga je namestil proizvajalec avtomobila, in uporabite zadrževalni sistem za uporabnika invalidskega vozička, ki je bil preizkušen v trku. Če med prevozom potrebujete dodatno zaščito na sedežu v vozilu, ki ga vgradi proizvajalec, lahko namesto blazine za invalidske vozičke Vicair uporabite vsestransko blazino Vicair Allrounder O2 (ki jo je mogoče pripeti na telo uporabnika).

Če se invalidski voziček uporablja kot sedež v vozilu, je treba upoštevati veljavna pravila in predpise glede pritrditve invalidskega vozička in varnega pripenjanja uporabnika invalidskega vozička med prevozom.

Podatkov o vplivu na varnost blazine za invalidski voziček Vicair, ki se uporablja na invalidskem vozičku, ki je bil preizkušen v trku, ni.

Ponovna uporaba – predaja izdelka drugemu uporabniku

Izdelek je primeren za večkratno uporabo. Kolikokrat ga je mogoče uporabiti, je odvisno od tega, kako pogosto in na kakšen način se izdelek uporablja. Izdelek je treba temeljito očistiti in razkužiti, preden ga lahko uporablja druga oseba. Za navodila glejte poglavje „Vzdrževanje in čiščenje“.

Obvestilo! Poskrbite, da bo izdelek pravilno prilagojen drugi osebi.

Pričakovana življenjska doba

Pričakovana življenjska doba tega izdelka je pet let, če se uporablja v skladu z varnostnimi navodili, intervali vzdrževanja in pravilno uporabo, kot je navedeno v tem priročniku. Učinkovita življenjska doba se lahko razlikuje glede na pogostost in intenzivnost uporabe.

Zamenjava prevleke za blazino

Družba Vicair B.V. priporoča, da prevleko za blazino ob običajni uporabi zamenjate enkrat letno. Nadomestne prevleke so na prodaj posebej.

Odstranjevanje

Pri odstranjevanju in recikliranju uporabljenih naprav in embalaže je treba upoštevati veljavne zakonske predpise. Poskrbite, da je izdelek pred odstranitvijo očiščen, da se prepreči tveganje okužb.

VZDRŽEVANJE IN ČIŠČENJE

Opozorilo! Vsake tri mesece preverite obrabo blazine in puščanje zraka iz celic. Izdelek v primeru hudih poškodb in velikega števila izpraznjenih celih prenehajte uporabljati. Posvetujte se s strokovnjakom za podporno tehnologijo.

Pozor! Izdelek ni primeren za kemično čiščenje, čiščenje s paro ali v avtoklavu. Izdelek ni obstojen na prekomerno toploto ali tlak. Če ne boste upoštevali navedenih navodil za čiščenje, je zelo verjetno, da se bosta izdelek in/ali prevleka izdelka hitreje obrabila.

Pozor! Za čiščenje ne uporabljajte agresivnih ali abrazivnih čistil in ostrih predmetov.

Pozor! Zgornje strani blazine Vicair O2 ne polagajte ob steklo vrat pralnega stroja.

Pozor! Prekomerno pranje lahko vpliva na staranje tega izdelka.

Čiščenje izdelka Vicair Vector O2

- **Čiščenje prevleke za blazino Vicair Vector O2**

Prevleko za blazino lahko perete v pralnem stroju. Upoštevajte navodila za pranje na oznaki, pritrjeni na notranji strani prevleke. (60 °C = 140 °F)



- **Čiščenje blazine Vicair Vector O2**

Blazino Vicair O2 je mogoče oprati v pralnem stroju pri temperaturi 60 °C/140 °F s programom proti mečkanju in blagim detergentom. Pred pranjem blazine v pralnem stroju celic SmartCells ni treba odstraniti. Prepričajte se, da se zgornji del blazine ne naslanja ob steklo vrat pralnega stroja. Ne napolnite pralnega stroja do več kot polovice. Zmanjšajte hitrost centrifuge. V primeru pralnega stroja z mešalom se prepričajte, da se lahko blazina prosto

premika po bobnu. Ne uporabljajte belil na osnovi klora in izdelka ne čistite kemično, s paro ali v avtoklavu! Blazine Vicair O2 ne sušite v sušilnem stroju, temveč na zraku (5–6 ur). Blazino Vicair O2 lahko obesite na vrv, da se posuši.



Razkuževanje izdelka Vicair Vector O2

Opozorilo! Če so na blazini prisotni madeži zaradi telesnih tekočin in preden blazino uporabite pri drugem uporabniku, jo dezinficirajte, da preprečite navzkrižno kontaminacijo. Blazino in prevleko očistite skladno z zgornjimi navodili. Po možnosti uporabite antibakterijski detergent. Po čiščenju blazino in prevleko popršite z dezinfekcijskim sredstvom. Predelke upognite navzven, da pršilo nanese tudi v reže.

POROČANJE O RESNIH INCIDENTIH

Resne incidente zaradi uporabe izdelkov Vicair je treba poročati proizvajalcu in ustreznemu pristojnemu organu.

GARANCIJA

Za celotne informacije o garancijskih postopkih in pogojih obiščite spletno mesto www.vicair.com.

Družba Vicair B.V. ob običajni uporabi izdelka zagotavlja omejeno garancijo za napake v izdelavi in materialu. Škoda, ki nastane zaradi neobičajne uporabe ali nepravilnega ravnanja, čiščenja ali malomarnosti, ni vključena v garancijo.

Garancijski rok

Od dneva prvega nakupa: 24 mesecev.
Celice SmartCells v blazini Vicair O2 imajo doživiljenjsko garancijo.

Če napako v materialu ali izdelavi odkrijete znotraj navedenega garancijskega roka, družba Vicair B.V. po lastni presoji brezplačno popravi ali zamenja izdelek.

Pravna sredstva za kršitev izrecnih garancij so omejena na popravilo ali zamenjavo izdelka. Škoda zaradi kršitve garancije v nobenem primeru ne bo vključevala nobene posledične škode in ne bo preseгла stroška kupljenega neustreznega izdelka.

Ali imate kakšna vprašanja?

Na družbo Vicair B.V. se obrnite prek e-poštnega naslova info@vicair.com ali pa se obrnite na distributerja za izdelke Vicair v svoji državi.

Szanowni klienci!

Dziękujemy za wybór produktu marki Vicair®. Jesteśmy pewni, że docenią Państwo jego prostotę, niezawodność i fantastyczne działanie. W celu szybkiej instalacji można skorzystać ze skróconej instrukcji instalacji dostarczonej wraz z poduszką. Przed rozpoczęciem użytkowania należy również zapoznać się z niniejszą instrukcją obsługi i przyswoić sobie jej treść. Zarówno skróconą instrukcję montażu, jak i niniejszą instrukcję obsługi należy zachować do wykorzystania w przyszłości.

Aby uzyskać więcej informacji lub zamówić instrukcję, należy skontaktować się z dystrybutorem w danym kraju.

Aby uzyskać informacje o dystrybutorze, odwiedź stronę vicair.com.

WPROWADZENIE

Vicair® Vector O2 to poduszka o anatomicznie wyprofilowanej powierzchni, przeznaczona do wózka inwalidzkiego, zapewniająca bardzo wysoki poziom stabilności osobom obciążonym wysokim ryzykiem powstania odleżyn. Jest to również skuteczny dodatek do planu leczenia odleżyn (etap I-IV).


WSKAZANIA

Stosowanie poduszki ma na celu zapewnienie komfortu oraz stabilnego podparcia ciała, poprawę postawy i zapobieganie odleżynom. Jest to również skuteczny dodatek do planu leczenia odleżyn (etap I-IV).

PRZECIWWSKAZANIA

W przypadku użytkowania zgodnie z przeznaczeniem nie ma znanych przeciwwskazań.

GŁÓWNE ELEMENTY

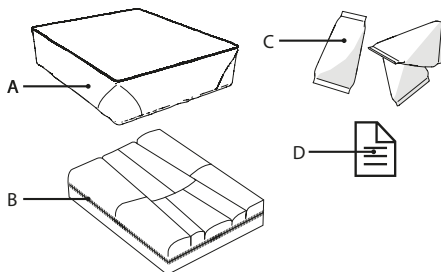

- A. Pokrowiec na poduszkę
- B. Poduszka
- C. Wkłady SmartCells™, umieszczone w 9 komorach
- D. Skrócona instrukcja instalacji (QuickInstallation Guide)

OGÓLNE SPECYFIKACJE PRODUKTU

Nazwa produktu:	Vicair Vector O2
Producent:	Vicair B.V., Holandia
Gwarancja:	24 miesiące
Zastosowane materiały:	Bez zawartości lateksu
Ciężar (bez pokrowca):	Rozmiar najmniejszy: 0,5 kg / 1.1 lbs Rozmiar średni: 0,8 kg / 1.8 lbs Rozmiar największy: 1,3 kg / 2.9 lbs
Dostępne rozmiary:	Sprawdź siatkę na odwrocie instrukcji

Poduszka:	Wierzch wykonany z tkaniny poliestrowej w powłoką poliuretanową, spód z tkaniny z siatki poliestrowej
Wypełnienie:	Wypełnione powietrzem wkłady SmartCells o niskim współczynniku tarcia powłoki
Pokrowiec na poduszkę O2 Top Cover:	Góra: Dzianina poliestrowa. Obręcz dolna: Tkanina poliestrowa z poliuretanową powłoką antypoślizgową.

Alternatywne pokrowce

Pokrowiec Comfair Cover: Góra: Dzianina poliestrowa. Boki: Siatkowa tkanina poliestrowa 3D. Spód: Tkanina poliestrowa z poliuretanową powłoką antypoślizgową.

Pokrowiec Incotec Cover i pokrowiec Reversible Cover: Góra: Dzianina poliestrowa, powlekana oddychającym poliuretanem odpornym na działanie płynów. Spód: Tkanina poliestrowa z poliuretanową powłoką antypoślizgową.

Wszystkie pokrowce: można prać w pralce.

Pokrowce spełniają wymogi norm PN-EN 1021-1, 1021-2 i CAL117.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

Poduszki Vicair do wózka inwalidzkiego można używać tylko jako siedziska do wózka inwalidzkiego. Korzystanie z tego produktu w jakikolwiek inny sposób jest uważane za niewłaściwe użytkowanie. Firma Vicair B.V. nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku niewłaściwego użytkowania, niewłaściwego korzystania lub zaniedbania. Prosimy o zapoznanie się z pełną treścią niniejszej instrukcji.

Ostrzeżenie! Firma Vicair B.V. zaleca montaż produktu pod bezpośrednim nadzorem terapeuty lub specjalisty ds. technologii wspomagających.

Ostrzeżenie! Kość ogonowa i kości miednicy nie powinny dotykać dna poduszki. Kontrolę „bottoming out” należy wykonać w czasie pierwszego użycia i po dostosowaniu wypełnienia poduszki.

Ostrzeżenie! Regularnie sprawdzaj skórę pod kątem zaczerwienień, szczególnie w pierwszych dniach. Jeśli pojawi się zaczerwienienie, które nie zniknie po 15 minutach, skonsultuj się z terapeutą lub specjalistą ds. technologii wspomagających.

Ostrzeżenie! Firma Vicair B.V. zaleca dostosowanie wypełnienia poduszki pod bezpośrednim nadzorem terapeuty lub specjalisty ds. technologii wspomagających.

Ostrzeżenie! W przypadku zabrudzenia płynami ustrojowymi oraz przy przekazywaniu produktu innemu użytkownikowi, produkt należy zdezynfekować, aby uniknąć zakażenia krzyżowego.

Ostrzeżenie! Raz na trzy miesiące należy sprawdzić produkt pod kątem zużycia i spadku ciśnienia powietrza w wypełnieniu. W przypadku poważnego uszkodzenia lub spadku ciśnienia powietrza w wielu wkładach nie należy dłużej korzystać z produktu. Skonsultuj się ze specjalistą ds. technologii wspomagających.

Przestroga! Nie używaj ani nie pozostawiaj produktu w pobliżu otwartego ognia lub źródła ciepła o wysokiej temperaturze.

Przestroga! Nie pierz produktu chemicznie i nie czyść go parą ani autoklawem. Produkt nie wytrzymuje nadmiernego ciepła ani ciśnienia. Jeśli podane instrukcje dotyczące czyszczenia nie będą przestrzegane, jest bardzo prawdopodobne, że poduszka i/lub pokrowiec szybciej się „zestarzeją”.

Przestroga! Do czyszczenia poduszki nie należy używać żrących czy ściągających środków czyszczących ani ostrych przedmiotów.

Przestroga! Nie umieszczaj górnej części poduszki Vicair O2 przy szklanej powierzchni drzwiczek pralki.

Przestroga! Upewnij się, że poduszka nie może wkręcić się w szprychy kół.

Przestroga! Zbyt częste pranie może przyspieszyć starzenie się produktu.

Uwaga! Stopień wypełnienia może nieznacznie odbiegać od domyślnego (patrz etykieta produktu).

INSTALACJA

Ostrzeżenie! Firma Vicair B.V. zaleca montaż produktu pod bezpośrednim nadzorem terapeuty lub specjalisty ds. technologii wspomagających.

Przestroga! Upewnij się, że poduszka nie może wkręcić się w szprychy kół.

Uwaga! Zawsze używaj poduszki razem z pokrowcem.

Uwaga! Upewnij się, że siedzisko wózka jest czyste i odtłuszczone.

Wskazówka: Jeśli nie chcesz używać rzepów, można zdjąć paski. Należy zauważyć, że paski przymocowane od dołu poduszki i/lub pokrowca nie mogą zostać zdjęte.

W przypadku korzystania z pokrowca na poduszkę O2 Top Cover, wykonaj następujące czynności

Odpowiadają one rysunkom 1 – 6

zamieszczonym w skróconej instrukcji instalacji (Quick Installation Guide).

- Sprawdź rozmiar poduszki. Szerokość (X) poduszki i siedziska powinny do siebie pasować. Jeśli poduszka opiera się o podłokietniki lub boczne osłony, jej szerokość może być do 2,5 cm (1") większa. Głębokość (Y) poduszki i siedziska powinny do siebie pasować.

- Sprawdź, czy rozmiar pokrowca odpowiada rozmiarowi poduszki.
- Usuń taśmę ochronną z samoprzylepnych do spodu poduszki samoprzylepnych do pokrowca poduszki.
- Umieść poduszkę na siedzisku, mocno dociskając.
- Umieść pokrowiec na poduszkę O2 Top Cover na poduszce.
- Przeprowadź pętelkę z tyłu poduszki przez „dziurkę od guzika” z tyłu pokrowca.
- Usiądź na poduszcze na kilka minut, aby poduszka dostosowała się do kształtu ciała.
- Dostosuj podpory na stopy, jeśli jest to konieczne.

Alternatywne pokrowce

W przypadku korzystania z pokrowca Comfair Cover, Incotec Cover lub Reversible Cover, wykonaj poniższe kroki:

Uwaga: Pokrowiec Reversible Cover jest dostarczany chłodną oddychającą stroną na zewnątrz. Jeśli potrzebujesz strony pokrowca odpornej na działanie płynów, najpierw całkowicie odepnij górną część pokrowca od dolnej, wywróć górną część na drugą stronę i przypnij ją ponownie do dolnej części.

- Sprawdź rozmiar poduszki. Szerokość (X) poduszki i siedziska powinny do siebie pasować. Jeśli poduszka opiera się o podłokietniki lub boczne osłony, jej szerokość może być do 2,5 cm (1") większa. Głębokość (Y) poduszki i siedziska powinny do siebie pasować.
- Sprawdź, czy rozmiar pokrowca odpowiada rozmiarowi poduszki.
- Usuń paski z rzepami ze spodu poduszki. Należy zauważyć, że nie można zdjąć pasków przymocowanych do dołu poduszki i/lub pokrowca.
- Włóż poduszkę do pokrowca.
- Przełóż pętlę przez oczko w pokrowcu.

- Zasuń zamek błyskawiczny. Uważaj, aby nie uszkodzić poduszki.
- Usuń taśmę ochronną z samoprzylepnych pasków z rzepami, przymocowanych do pokrowca poduszki.
- Umieść poduszkę na siedzisku, mocno dociskając.
- Usiądź na poduszcze na kilka minut, aby poduszka dostosowała się do kształtu ciała.
- W razie potrzeby wyreguluj podnóżek/podnóżki.

Kontrola „bottoming out”:

Rycina 7 – Quick Installation Guide

Ostrzeżenie! Kość ogonowa i kości miednicy nie powinny dotykać dna poduszki. Kontrolę „bottoming out” należy wykonać w czasie pierwszego użycia i po dostosowaniu wypełnienia poduszki.

Ostrzeżenie! Vicair B.V. zaleca regulację stopnia wypełnienia pod bezpośrednim nadzorem terapeuty lub specjalisty ds. technologii wspomagających.

- Sprawdź poduszkę pod kątem „bottoming out”, siedząc na poduszcze przez około 5 minut.
- Pozwól terapeutce lub specjalście ds. technologii wspomagających wsunąć dłoni między Twoje pośladki a poduszkę Vicair, a jednocześnie pochyl się do przodu.
- Poproś terapeutę lub specjalistę ds. technologii wspomagających, aby sprawdził, czy najniższe wypukłości kostne są podparte przez co najmniej 2,5 cm/1” wkładów SmartCells. Zapobiega to dotykaniu siedziska wózka inwalidzkiego.
- Jeśli dotykają siedziska, nie używaj poduszki. W większości przypadków problem ten rozwiąże wyregulowanie stopnia wypełnienia komór poduszki.

ZASTOSOWANIE

Sprawdzanie wystąpienia zaczerwienienia skóry

Rycina 8 – Quick Installation Guide

Ostrzeżenie! Regularnie sprawdzaj skórę pod kątem zaczerwienienia, zwłaszcza w ciągu kilku pierwszych dni. W przypadku wystąpienia zaczerwienienia, które nie znika po upływie 15 minut, skonsultuj się z terapeutą lub specjalistą ds. technologii wspomagających.

Regulacja stopnia wypełnienia

Ostrzeżenie! Vicair B.V. zaleca regulację stopnia wypełnienia pod bezpośrednim nadzorem terapeuty lub specjalisty ds. technologii wspomagających.

Gotowość do użycia:

Ten produkt Vicair jest gotowy do użycia. Posiada niepowtarzalny stopień wypełnienia, w zależności od rozmiaru i modelu. Jednakże – w razie potrzeby – stopień wypełnienia można wyregulować poprzez usunięcie lub dodanie wkładów SmartCells z/do poszczególnych komór. Informacje o domyślnym stopniu wypełnienia można znaleźć na etykiecie dołączonej do poduszki.

Warunki użytkowania i przechowywania

Przestroga! Nie używaj ani nie pozostawiaj produktu w pobliżu otwartego ognia lub źródła ciepła o wysokiej temperaturze.

- **Waga użytkownika:**
Minimalna: 15 kg / 33 lbs,
maksymalna: 250 kg / 551 lbs
- **Temperatura:**
Minimalna: -20 °C / 4 °F,
maksymalna: 55 °C / 131 °F
- **Użytkowanie na dużej wysokości**
Uwaga! Firma Vicair B.V. nie zaleca stosowania poduszki na wysokościach powyżej 2400 m (8000 ft) nad poziomem

morza ani poniżej 50 m (164 ft) poniżej poziomu morza. Ponieważ każdy wkład SmartCell jest wypełniony powietrzem, poduszka może zachowywać się inaczej, gdy jest użytkowana na dużych wysokościach lub w samolocie. W takich warunkach twardość poduszki można wyregulować poprzez usunięcie kilku wkładów z każdej komory.

- **Wilgotność powietrza:**
Minimalna: 0%, maksymalna 100%

Codziennie spulchnianie

Firma Vicair B.V. zaleca codzienne „spulchnianie” poduszki Vicair przed użyciem.

Korzystanie z poduszki Vicair w pojazdach silnikowych

Gdy to tylko możliwe, przesiądź się z wózka inwalidzkiego na zamontowany przez producenta samochodu fotel samochodowy bez poduszki i korzystaj ze sprawdzonego w testach zderzeniowych systemu bezpieczeństwa pasażerów.

Jeśli potrzebujesz dodatkowej ochrony podczas transportu w zamontowanym przez producenta samochodu fotelu samochodowym, jako alternatywę dla poduszki Vicair do wózka inwalidzkiego możesz wykorzystać produkt Vicair Allrounder O2 (który można przymocować do ciała użytkownika).

Jeśli zamiast fotela samochodowego używany jest wózek inwalidzki, należy przestrzegać obowiązujących zasad i przepisów dotyczących zabezpieczenia wózka oraz jego użytkownika podczas transportu.

Nie ma dostępnych danych na temat wpływu poduszki Vicair do wózka inwalidzkiego na bezpieczeństwo podczas testów zderzeniowych.

Ponowne wykorzystanie – Przekazanie produktu innemu użytkownikowi

Produkt nadaje się do wielokrotnego użytku. To, ile razy będzie można go użyć, będzie zależeć od tego, jak często i w jaki sposób produkt będzie użytkowany. Zanim inna osoba będzie mogła używać produktu, należy go dokładnie wyczyścić i zdezynfekować. Instrukcje znajdują się w rozdziale „Konserwacja i czyszczenie”.

Uwaga! Upewnij się, że produkt jest prawidłowo wyregulowany dla drugiej osoby.

Oczekiwana żywotność produktu

Przewidywany okres użytkowania tego produktu wynosi pięć lat, o ile jest on używany zgodnie z instrukcjami bezpieczeństwa, z zachowaniem prawidłowej częstotliwości konserwacji i zasad prawidłowego użytkowania, określonymi w niniejszym dokumencie. Efektywna żywotność może się różnić w zależności od częstotliwości i intensywności użytkowania.

Wymiana pokrowca

W normalnych warunkach firma Vicair B.V. zaleca wymianę pokrowca raz w roku. Pokrowce wymienne można kupić oddzielnie.

Utylizacja

Utylizacja i recykling zużytych urządzeń i opakowań musi odbywać się zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Przed przekazaniem do utylizacji produkt należy wyczyścić, aby uniknąć ryzyka zanieczyszczenia.

KONSERWACJA I CZYSZCZENIE

Ostrzeżenie! Raz na trzy miesiące należy sprawdzić produkt pod kątem zużycia i spadku ciśnienia powietrza w wypełnieniu. W przypadku poważnego uszkodzenia lub spadku ciśnienia powietrza w wielu wkładach nie należy dłużej korzystać z produktu. Skonsultuj się ze specjalistą ds. technologii wspomagających.

Przeostoga! Nie pierz produktu chemicznie i nie czyść go parą ani autoklawem. Produkt nie wytrzyma nadmiernego ciepła ani ciśnienia. Jeśli podane instrukcje dotyczące czyszczenia nie będą przestrzegane, jest bardzo prawdopodobne, że poduszka i/lub pokrowiec szybciej się „zestarzeją”.

Przeostoga! Do czyszczenia poduszki nie należy używać żrących czy ścierających środków czyszczących ani ostrych przedmiotów.

Przeostoga! Nie umieszczaj górnej części poduszki Vicair O2 przy szklanej powierzchni drzwiczek pralki.

Przeostoga! Zbyt częste pranie może przyspieszyć starzenie się produktu.

Czyszczenie poduszki Vicair Vector O2

- **Czyszczenie pokrowca na poduszkę Vicair Vector O2**

Pokrowiec na poduszkę można prać w pralce. Postępuj zgodnie z instrukcjami prania umieszczonymi na metce wewnątrz pokrowca.

(60 °C= 140 °F)



- **Czyszczenie poduszki Vicair Vector O2**

Poduszkę Vicair O2 można prać w pralce w temperaturze 60°C/140°F, stosując cykl zapobiegający powstawaniu zagnieść oraz łagodny detergent. Przed włożeniem

poduszki do pralki nie musisz wyjmować wkładów SmartCells. Upewnij się, że grzbiet poduszki nie jest skierowany do drzwiczek pralki. Nie ładuj pralki do więcej niż połowy jej maksymalnej ładowności. Należy zmniejszyć prędkość wirowania. Jeśli korzystasz z pralki z mieszadłem, upewnij się, że poduszka może swobodnie poruszać się wewnątrz bębna. Nie używaj wybielaczy na bazie chloru, nie pierz poduszki chemicznie i nie czyść jej parą ani autoklawem! Nie susz poduszki Vicair O2 w suszarce – pozostaw ją do wyschnięcia (5-6 godzin). Poduszkę Vicair O2 można suszyć w stanie rozwieszonym.



Dezynfekcja poduszki Vicair Vector O2

Ostrzeżenie! W przypadku zabrudzenia płynami ustrojowymi lub przekazania produktu innemu użytkownikowi produkt należy zdezynfekować w celu uniknięcia zanieczyszczenia krzyżowego. Wyczyść poduszkę i pokrowiec w sposób opisany powyżej. Najlepiej użyj antybakteryjnego detergentu. Po wyczyszczeniu, spryskaj poduszkę i pokrowiec środkiem dezynfekującym. Wywiń komory na zewnątrz, aby upewnić się, że środek dostanie się do wszystkich szczelin.

ZGŁASZANIE POWAŻNYCH INCYDENTÓW

Poważne incydenty związane ze stosowaniem produktów Vicair należy zgłaszać producentowi oraz odpowiedniemu właściwemu organowi.

GWARANCJA

Na stronie www.vicair.com znajdziesz kompletne informacje dotyczące gwarancji, jej zasad i warunków.

Firma Vicair B.V. daje ograniczoną gwarancję na wady wykonania i materiałowe, jeżeli produkt jest używany normalnie. Wszelkie uszkodzenia wynikające z nieprawidłowego użytkowania lub spowodowane przez nieprawidłowe obchodzenie się z produktem, nieprawidłowe czyszczenie lub zaniedbania, są wyłączone z niniejszej gwarancji.

Okres gwarancyjny

Od daty zakupu: 24 miesiące.

Wkłady SmartCells zastosowane w tej poduszce Vicair O2 są objęte dożywotnią gwarancją.

Jeżeli wada materiałowa lub wykonania ujawni się w ciągu powyższego okresu gwarancyjnego, firma Vicair B.V. — według własnego uznania — naprawi lub wymieni produkt bezpłatnie. Zadośćuczynienie za naruszenie warunków niniejszej gwarancji jest ograniczone do naprawy lub wymiany produktu.

W żadnym wypadku odszkodowanie za naruszenie warunków gwarancji nie obejmuje strat wynikowych i nie może przekroczyć kosztu towarów niezgodnych.

Masz pytania?

Skontaktuj się z firmą Vicair B.V., pisząc na adres info@vicair.com lub z krajowym dystrybutorem Vicair.

尊敬的客户，

感谢您选择 Vicair® 产品。我们确信您会喜欢这种简单、可靠和难以置信的效果。对于快速安装，可以参阅随坐垫提供的快速安装指南。另外，使用前请阅读并了解本用户手册。保管好快速安装指南和本手册以备将来参考。

更多详细信息或（重新）订购手册，请与贵国的经销商联系。

如需经销商信息，请访问 vicair.com。

介绍

Vicair® Vector 02 是采用自动赋形座椅表面的轮椅坐垫，可以为发生压力伤害的高危人群提供极高的稳定性。它也是一种高性能压力伤害治疗计划的辅助设备（I 至 IV 阶段）。

适应症


它用来提供舒适、稳定的身体支撑，并有助于改善身姿和预防压力伤害。

它也是一种高性能压力伤害治疗计划的辅助设备（I 至 IV 阶段）。

禁忌症

在按照预期用途使用的前提下，暂无使用禁忌。

主要组件

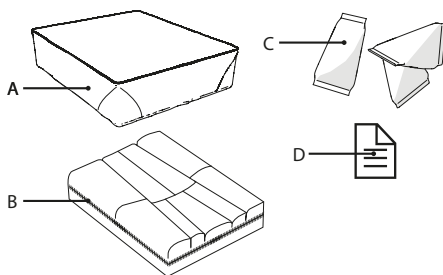

- A. 坐垫外套
- B. 坐垫
- C. SmartCells™，放在 9 个隔层中
- D. 快速安装指南（Quick Installation Guide）

一般产品规格

产品名称：	Vicair Vector 02
制造商：	荷兰 Vicair B.V.
保固：	24 个月
所用材料：	全部不含乳胶
重量（不包括外套）：	最小尺寸：0.5 公斤 / 1.1 lbs 中等尺寸：0.8 公斤 / 1.8 lbs 最大尺寸：1,3 公斤 / 2.9 lbs
可供选择的尺寸：	参见手册背面的网格
坐垫：	顶部采用聚氨酯涂料和聚酯织物制成，底部由聚酯网眼织物制成
填充物：	采用低摩擦层的充气 SmartCells
02 Top Cover 坐垫外套：	表面：编织聚酯纤维织物。 底面边缘：采用聚氨酯防滑涂层的涤纶织物。

可更换的坐垫外套

Comfair Cover 坐垫外套：表面：编织聚酯纤维织物。侧面：涤纶 3D 网眼织物。底面：采用聚

氨酯防滑涂层的涤纶织物。

Incotec Cover 和 Reversible Cover 坐垫外套：表面：编织聚酯纤维织物，包覆防水透气聚氨酯。底面：采用聚氨酯防滑涂层的涤纶织物。

全部外套：可机洗。外套符合 EN1021-1、1021-2 和 CAL117 标准。

预防措施和安全说明

Vicair 轮椅坐垫只可用作轮椅坐垫。以任何其他方式使用本产品均视为滥用。Vicair B.V. 对因滥用、不当使用或疏忽而造成的损害不承担责任。确保阅读并完全了解本手册。

警告！ Vicair B.V. 建议在治疗师或辅助技术专家的直接监督下组装本产品。

警告！ 尾椎骨和髌骨不应触到坐垫底部。第一次使用和调整坐垫填充物后，都应检查是否“触底”。

警告！ 定期检查您的皮肤是否发红，尤其是在最初几天的使用过程中。如果皮肤发红并且 15 分钟后仍未消失，请咨询您的治疗师或辅助技术专家。

警告！ Vicair B.V. 建议在治疗师或辅助技术专家的直接监督下调整填充等级。

警告！ 如果沾上体液，在将本产品转让给其他用户时，必须对产品进行消毒，以避免交叉感染。

警告！ 每三个月，请检查本产品是否磨损和气囊泄气。如果出现严重损坏或大量气囊泄气，请不要继续使用本产品，请咨询您的辅助技术专家。

注意： 不要让本产品靠近明火或高温热源。

注意： 请勿干洗、用蒸汽清洁或用高压灭菌器对本产品灭菌。本产品不能承受高温或高压。未遵循所规定的清洁说明时，本产品和/或本产品外套很可能加速老化。

注意： 不要使用粗糙或磨蚀性清洁剂或者尖锐物体清洁坐垫。

注意： 不要将 Vicair 02 坐垫的顶部靠在洗衣机门的玻璃上。

注意： 请确保坐垫不会妨碍到车轮辐条。

注意： 过度洗涤可能会影响本产品的使用寿命。请注意！填充等级可能与默认值略有差异（见产品标签）。

组装

警告！ Vicair B.V. 建议在治疗师或辅助技术专家的直接监督下组装本产品。

注意： 请确保坐垫不会妨碍到车轮辐条。

请注意！ 坐垫务必使用外套。

请注意！ 确保轮椅座位清洁且无油污。

提示： 如果不喜欢使用钩子和毛圈搭扣，可以取下粘扣带。请注意，缝制在坐垫底部和/或坐垫外套的尼龙搭扣带不能移除。

使用 02 Top Cover 坐垫外套时执行以下步骤
这些步骤对应于 Quick Installation Guide 的
组装图片 1 - 6:

- 检查坐垫大小。坐垫和座椅的宽度 (X) 应匹配。如果轮椅的扶手或侧挡板有空间容纳坐垫，则坐垫宽度可略宽 2.5 厘米 (1 英寸)。坐垫和座椅的深度 (Y) 应匹配。
- 检查外套的大小是否与坐垫的大小匹配。
- 将安全背带从附在坐垫底面的自粘式粘扣带上拿掉即可。
- 通过用力按压放置坐垫。
- 将 02 Top Cover 坐垫外套放在坐垫表面上。
- 将坐垫背面的圈环穿过外套背面的“扣眼”。
- 坐上坐垫几分钟，使坐垫可以贴合您的体型。
- 如有必要，请调整脚部支撑。

可更换的坐垫外套

使用 Comfair Cover、Incotec Cover 或 Reversible Cover 坐垫外套时，请执行以下步骤。

请注意： Reversible Cover 坐垫外套交付时，凉爽透气一侧朝外。如果需要此外套的防水侧：首先把拉链从外套底部到顶部完全拉开，将顶部翻出来，然后将拉链重新拉到底部。

- 检查坐垫大小。坐垫和座椅的宽度 (X) 应匹配。如果轮椅的扶手或侧挡板有空间容纳坐垫，则坐垫宽度可略宽 2.5 厘米 (1 英寸)。坐垫和座椅的深度 (Y) 应匹配。
- 检查外套的大小是否与坐垫的大小匹配。

- 从坐垫底面取下粘扣带。请注意，不能取下缝制在坐垫底面的粘扣带。
- 外坐垫装入外套中。
- 将绳圈穿出外套内的圆孔。
- 拉上拉链。确保不会损坏坐垫。
- 将安全背带从附在坐垫表面的自粘式粘扣带上拿掉即可。
- 通过用力按压放置坐垫。
- 坐上坐垫几分钟，使坐垫可以贴合您的体型。
- 如果必要，调整脚踏板。

检查是否“触底”：

图 7 - Quick Installation Guide

警告！ 尾椎骨和髌骨不应触到坐垫底部。第一次使用和调整坐垫填充物后，都应检查是否“触底”。

警告！ Vicair B.V. 建议在您的治疗师或辅助技术专家的直接监督下调整填充等级。

- 坐在坐垫上约 5 分钟后，检查是否触到底部。
- 将身体前倾，此时治疗师或辅助技术专家会用一只手在您的臀部和Vicair坐垫之间滑动。
- 请治疗师或辅助技术专家检查您的最低骨突处是否由至少 2.5 厘米/1 英寸的 SmartCells 支撑。此举可以防止骨突处接触轮椅座椅。
- 如果臀部触底，请不要使用该坐垫。在多数情况下，调整隔层的填充等级可解决该问题。

使用

检查皮肤是否产生红斑

图 8 - Quick Installation Guide

警告！ 经常检查皮肤是否出现红斑，尤其是刚开始几天。如果出现红斑，且在 15 分钟后未消失，请咨询您的治疗师或辅助技术专家。

调整填充等级

警告！ Vicair B.V. 建议在您的治疗师或辅助技术专家的直接监督下调整填充等级。

随时可用

这款 Vicair 产品可直接使用。根据尺寸和型号有各自对应的填充等级。但是如有必要，可以通过增加或减少各隔层内的 SmartCells 来调整填充等级。您可以在附到坐垫上的标签上找到默认填充等级。

使用和存放条件

注意： 不要让本产品靠近明火或高温热源。

- 使用者重量：
 - 最小值：15 千克 / 33 磅，
 - 最大值：250 kg / 551 lbs
- 温度：
 - 最小值：-20 ° C / 4 ° F，
 - 最大值：55 ° C / 131 ° F
- 高海拔地区使用

请注意！Vicair B.V. 建议不要在海拔 2400 米（8000 英尺）以上或低于海平面 50 米（164 英尺）以下地区使用本坐垫。因为每个 SmartCell 都已填满空气，在高海拔地区或飞机上使用时，坐垫的效果可能不一样。在这种情况下，可以从每个隔层中取出几个气囊来调整坚硬度。
- 空气湿度：
 - 最小值：0%，最大值：100%

每日保持坐垫松软

Vicair B.V. 建议每日使用前保持 Vicair 坐垫松软。

在机动车辆内使用 Vicair 坐垫

从轮椅上转移到汽车制造商安装的车辆座椅上时，请尽可能不要使用轮椅坐垫。请使用车辆中经过碰撞测试的乘客座椅安全系统。

如果您在运输过程中需要额外保护，可以使用 Vicair Allrounder 02 （可以固定用户身体）作为 Vicair 轮椅坐垫的替代品。

将轮椅用作车辆座椅时，应遵守有关运输过程中固定轮椅和轮椅用户的适用规则 and 规定。

Vicair 轮椅坐垫并没有轮椅碰撞测试的安全性数据。

再次使用 - 让渡产品给其他使用者

该产品可以重复使用，且使用次数取决于产品的使用频率和使用方式。在允许他人使用之前，必须彻底清洁和消毒该产品。请参阅“维护和清洁”一章的说明。

请注意！ 确保为另一个正确调整坐垫。

预期使用寿命

如果按照本手册中所述的安全说明、维护间隔和正确使用方式使用，本产品的预期使用寿命为五年。

有效使用寿命会根据使用频率和强度而有所不同。

更换坐垫外套

正常使用状况下，Vicair B.V. 建议每年更换坐垫外套。坐垫外套可以单独购买。

处置

所用设备和包装的处置及回收利用必须遵守适用的法律法规。确保产品在处置之前要清洁，以避免发生任何污染的风险。

维护和清洗

警告！ 每三个月，请检查本产品是否磨损和气囊泄气。如果出现严重损坏或大量气囊泄气，请不要继续使用本产品，请咨询您的辅助技术专家。
注意： 请勿干洗、用蒸汽清洁或用高压灭菌器对本产品灭菌。本产品不能承受高温或高压。未遵循所规定的清洁说明时，本产品和/或本产品外套很可能加速老化。

注意： 不要使用粗糙或磨蚀性清洁剂或者尖锐物体清洁坐垫。

注意： 不要将 Vicair 02 坐垫的顶部靠在洗衣机门的玻璃上。

注意： 过度洗涤可能会影响本产品的使用寿命。

清洗 Vicair Vector 02

- 清洗 Vicair Vector 02 坐垫外套
坐垫外套可机洗。 请参照外套内部所附标签上的洗涤说明。
(60 ° C=140 ° F)



- 清洗 Vicair Vector 02 坐垫
Vicair 02 坐垫可使用 60° C / 140° F 的水和中性清洁剂进行防皱循环机洗。将靠垫放入洗衣机前，不需要取下 SmartCells。确保靠垫顶部没有靠在洗衣机门的玻璃上。机器负载不要超过最大负载重量的一半。应降低旋转速度。使用搅拌式洗衣机时，请确保靠垫可以在滚筒内自由移动。不要使用任何含氯漂白剂，也不要干洗、用蒸汽清洗或用高压灭菌器灭菌！ 不要用烘干机烘干 Vicair 02 靠垫，请让其自然晾干（5-6 个小时）。您可以使用吊绳悬挂 Vicair 02 坐垫进行晾晒。



对 Vicair Vector 02

警告！ 如果被体液弄脏，以及把本产品让渡给另一使用者时，必须对产品消毒以避免交叉污染。按上述说明清洁坐垫和外套。最好使用抗菌剂。清洗后用消毒剂喷涂坐垫和外套。翻出隔层，确保喷雾能进入缝隙。

报告严重事故

因使用 Vicair 产品而发生的严重事故应报告给制造商和相关主管部门。

保固

有关保固流程、条款与条件的完整信息，请访问 www.vicair.com。

在产品正常使用下，Vicair B.V. 对工艺和材料缺陷提供有限保固。因不正常使用、不当处理、清洗或疏忽造成任何损坏，则不在本保固范围内。

保固期

自原始购买之日起：24 个月。

这款 Vicair 02 坐垫中的 SmartCells 具有终身保固期。

在上述保固期内出现材料或工艺缺陷，Vicair B.V. 将自行选择免费维修还是更换产品。

违反此处明示保固条款的补救措施仅限于维修或更换产品。

在任何情况下，违反任何保固条款所造成的损坏均不应包括间接损坏或超出不合格商品销售的费用。

有问题吗？

发电子邮件至 info@vicair.com 联系 Vicair B.V. 或联系贵国的 Vicair 分销商。

お客様各位、

Vicair® 製品をお選びいただきありがとうございます。そのシンプルさ、信頼性、そして素晴らしい効果にきっとご満足いただけることでしょう。クッションに付属のクイック設置ガイドを使用して、素早く設置できます。また、使用前にこのユーザー マニュアルをよく読んで理解してください。クイック設置ガイドとこのマニュアルの両方を、今後の参照用に保管してください。

詳細またはマニュアルの再注文については、お住まいの国の代理店にお問い合わせください。販売代理店情報については、vicair.com にアクセスしてください。

はじめに

Vicair® Vector 02は車椅子用クッションで、解剖学に基づいた形状となっている座面となっており、それは褥瘡（じょくそう）のリスクを持つ方で非常に高い安定性があります。また、欧米では高性能な機能として褥瘡治療計画（ステージ I-IV）に追加されています。


適応

快適で安定して身体支持し、姿勢を改善し、褥瘡（じょくそう）の防止に役立ちます。

禁忌

意図どおりに使用する場合、禁忌は知られていません。主な構成部分

主な構成

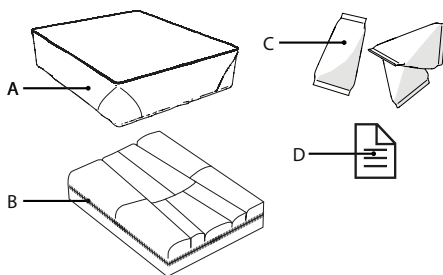

- A. クッションカバー
- B. クッション
- C. SmartCells™ （9 個のコンポーネントに設置）
- D. クイック設置ガイド

一般的な製品仕様

製品名	Vicair Vector（ヴェクター）02
製造元	Vicair（ヴィケア）社、オランダ
保証期間	24 か月
重量（カバーを除く）	最小サイズ: 0.5 kg 中サイズ: 0.8 kg 最大サイズ: 1.3 kg
利用可能なサイズ	マニュアルの裏面の図を参照してください
使用されている素材	天然ゴムは使用していない
クッション収納部	表層はポリウレタンコーティングされたポリエステル生地、底面はポリエステル網状繊維
内容	低摩擦剤を塗布し空気充填した複数のSmartCell（スマートセル）
フォーム材	ポリウレタン

フォーム収納部	ポリエステル生地による流 体抵抗ポリウレタン
02 カバー	上部：ニット ポリエステ ル メッシュ生地。下縁： ニット ポリエステル メッ シュ生地。

替クッションカバー

Comfair カバー：上部：ニットポリエステル織布。側部：ポリエステル3Dメッシュ織物。底部：ポリエステル織物、ポリウレタン滑り止めコーティング。

Incotec カバーとリバーシブルカバー：上部：ニットポリエステル織布、流体抵抗性・通気性ポリウレタンのコーティング。底部：ポリエステル織物、ポリウレタン滑り止めコーティング。

カバー：洗たく機で丸洗い可。カバーは難燃性能について、EN1021-1、1021-2 および CAL117 に準拠しています。

事前注意と安全指示

Vicair 車椅子用シートクッションは、車椅子用シートクッションとしてのみ使用できます。この製品を他の方法で使用すると、誤用とみなされます。Vicair 社は、誤用、不適切な使用、または過失によって生じた損害について責任を負いません。このマニュアルを完全に読み、理解してください。

警告！ Vicair 社は、PTOT等または車椅子専門家の直接の監督下で製品を設置することを推奨しています。

警告！ 座骨や尾骨等がクッションの底に触れないようにしてください。最初の使用時とクッションの詰め物の調整後には、「底付き」がないか確認してください。

警告！ 特に最初の数日間は、皮膚に発赤がないか定期的に確認してください。発赤が生じ、15 分経っても消えない場合は、PTOT等または車椅子専門家に相談してください。

警告！ Vicair 社は、PTOT等または車椅子専門家の直接の監督下で充填数を調整することを推奨しています。

警告！ 体液で汚れた場合や、製品を別のユーザーに譲渡する場合は、二次汚染を防ぐために製品を消毒する必要があります。

警告！ 3か月ごとに、製品の摩耗や収縮したセルがないか確認してください。重大な損傷や収縮したセルが多数ある場合は、製品の使用を中止してください。車椅子専門家ににご相談ください。

注意！ 製品を裸火や高温の熱源の近くで使用したり放置したりしないでください。

注意！ 製品をドライクリーニング、スチームクリーニング、オートクレープ処理しないでください。製品は過度の熱や圧力に耐えられません。指定されたクリーニング手順に従わない場合、製品や製品のカバーが急速に劣化する可能性が非常に高くなります。

注意！ クッションの洗浄には、刺激の強い洗剤や研磨剤、鋭利なものを使用しないでください。

注意！ Vicair 02 クッションの上面を洗濯機のドアのガラスに当てないでください。

注意！ クッションが車椅子のスポークに接触しないようご注意ください。

注意！ 過度の洗浄は、この製品の劣化に影響を与える可能性があります。

確認！ 充填数は、基本数からわずかに異なる場合があります（製品ラベルを参照）。

設置

警告！ Vicair 社は、PTOT等または車椅子専門家の直接の監督下で製品を取り付けることを推奨します。

注意！ クッションが車椅子のスポークに接触しないようご注意ください。

注目！ 常にカバーをしてクッションを使用してください。

注目！ 車椅子のシートに油が付着せず清潔であることを確認してください。

ヒント：フックとループを使用しない場合は、フック・ストリップを取り外すことができます。クッションおよび/またはクッションカバーの底に取り付けられたストリップは取り外せないことに注意してください。

02 Topカバーをご使用の際には、以下の手順を行ってください。

これら手順はQuick設置ガイドの図 1 - 6 に対応します。

- ・ クッションのサイズを確認します。クッションとシートの幅(X)と奥行き(Y)は一致している必要があります。クッションがひじ掛けやサイドガードにかかる場合、幅は2,5 cmまで広くします。クッションの厚さ(Y)と座席が適合すること。
- ・ カバーのサイズがクッションのサイズと合っていることを確認してください。
- ・ クッションの底に取り付けられている粘着フック・ストリップから保護用裏テープを取り外します。
- ・ クッションを押すように置きます。
- ・ 02クッションカバーの上面とクッションの上面に合わせて設置してください。
- ・ クッションの後側にあるループをカバーの後側にあるボタン穴に通してください。
- ・ クッションに数分間座って、クッションが体の形に馴染むようにします。
- ・ 必要に応じて、フットサポートを調整します。

替クッションカバー

Comfairクッションカバー、Incotecクッションカバー、または Reversible クッションカバーを使うときは次のステップを実行してください。

注：Reversibleクッションカバーは冷たい通気性のある面が外面になって供給されます。本カバーの流体抵抗性面が必要な場合：まず、カバーのジッパーを下部から上部まで完全に開け、上部を裏表にしてから下部までジッパーを閉めます。

- ・ クッションのサイズを確認します。クッションとシートの幅(X)と奥行き(Y)は一致している必要があります。クッションがひじ掛けやサイドガードにかかる場合、幅は2,5 cmまで広くします。クッションの厚さ(Y)と座席が適合すること。
- ・ カバーのサイズがクッションのサイズと合っていることを確認してください。
- ・ フック・ストリップをクッションの底部から取り外します。クッション底部につながれているストリップは、取り外しできませんのでご注意ください。
- ・ クッションをカバーでくるんでください。
- ・ カバーの鳩目（アイレット）にループを通します。
- ・ ジッパーを締めます。クッションを傷つけないようにご注意ください。
- ・ クッションカバーに付いている接着剤付きフック・ストリップから保護用のバックینگテープを剥がします。
- ・ クッションを押すように置きます。
- ・ クッションに数分間座って、クッションが体の形に馴染むようにします。
- ・ 必要に応じて、フットサポートを調整します。

「底付き」をチェックしてください：

図7 - Quick設置ガイド

警告！ 座骨や尾骨等がクッションの底に触れないようにしてください。「底付き」の確認は、初めて使用する場合とクッションの内容を調整した後に行う必要があります。

警告！ Vicair 社は、PTOT等または車椅子専門家の直接の監督下で充填数を調整することを推奨しています。

- ・ クッションに約5分間座った後、底付きの確認。
- ・ PTOT等または車椅子専門家に、前かがみになった状態で臀部と Vicair クッションの間に手を差し入れてもらいます。

- ・ PTOT等または車椅子専門家に、最も低い骨の突起が少なくとも 2.5 cm / 1 インチの SmartCell で支えられているかどうか確認してもらってください。これにより、車椅子の座席に接触することを防ぎます。
- ・ 底付きが発生した場合は、クッションを使用しないでください。ほとんどの場合、SmartCellの充填数を調整することで問題は解決します。

使用

皮膚の発赤のチェック

図7 - クイック設置ガイド

警告！ 特に最初の数日間は、定期的に皮膚の赤みをチェックしてください。発赤が生じ、15分経っても消えない場合は、PTOT等または車椅子専門家に相談してください。

充填数の調整

警告！ Vicair 社は、PTOT等または車椅子専門家の直接の監督下で充填数を調整することを推奨します。

使用可能

この Vicair 社製品は使用可能です。サイズとモデルに応じて、独自の充填数があります。ただし、必要に応じて、SmartCellが入るクッション収納部から SmartCell を取り外したり、SmartCell が入るクッション収納部に SmartCell を追加したりして、充填数を調整できます。基本の充填数は、カバーの内側のラベルに記載されています。

使用および保管の条件

注意！ 製品は、炎や高温の熱源の傍で使用したり放置したりしないでください。

- ・ 使用者の体重：
 - 最小：15 kg / 33 ポンド、
 - 最大：200 kg / 551 ポンド
- ・ 温度：
 - 最小：-20 ° C / 4 ° F、
 - 最大：55 ° C / 131 ° F

高地での使用

注意！ Vicair 社は、海拔 2400 m (8000 フィート) 以上または海拔 50 m (164 フィート) 以下の場所でクッションを使用しないことを推奨しています。各 SmartCell は空気で満たされているため、高地や飛行機内で使用した場合、クッションの動作が異なる場合があります。このような状況では、各区分からセルをいくつか取り外すことで、クッションの硬さを調整できます。

空気湿度：

最小：0%、最大 100%

毎日のふくらみ（形を整える）

Vicair 社は、毎日、使用前に Vicair クッションをふくらませることを推奨しています。

自動車での Vicair シート クッションの使用可能な限り、車椅子からクッションなしで自動車メーカーが取り付けた車両シートに移り、車両の衝突試験済み乗員拘束システムを使用してください。

自動車移動中にメーカーが取り付けた車両シートで追加の保護が必要な場合は、Vicair 車椅子クッションの代わりに Vicair Allrounder 02（ユーザーの体に固定可能）を使用できます。

車椅子を車両シートとして使用する場合は、輸送中の車椅子と車椅子ユーザーの安全確保に関する適用規則と規制に従う必要があります。衝突試験済みの車椅子で Vicair 車椅子クッションを使用した場合の安全性への影響に関するデータはありません。

再利用 — 製品を別のユーザーに譲渡する

製品は繰り返し使用できます。使用できる回数は、製品の使用頻度と使用方法によって異なります。製品を他の人が使用できるようにするには、徹底的に洗浄および消毒する必要があります。手順については、「メンテナンスとクリーニング」の章を参照してください。

注意！ 製品が他の人に正しく調整されていることを確認してください。

予想寿命

このマニュアルに記載されている安全指示、メンテナンス間隔、および正しい使用方法に従って使用した場合、この製品の予想寿命は 5 年です。

有効寿命は、使用頻度と使用強度によって異なります。

クッション カバーの交換

通常の使用では、Vicair 社はクッション カバーを毎年交換することを推奨しています。交換用カバーは別途購入できます。

廃棄

使用済みのクッションとその梱包の廃棄とリサイクルは、適用される法的規制に準拠する必要があります。汚染のリスクを回避するために、廃棄する前に製品を洗浄してください。

メンテナンスとクリーニング

警告！ 3 か月ごとに、製品の摩耗や収縮したセルがないか確認してください。重大な損傷や収縮したセルが多数ある場合は、製品の使用中止してください。車椅子専門家にご相談ください。

注意！ 製品をドライクリーニング、スチームクリーニング、オートクレープ処理しないでください。製品は過度の熱や圧力に耐えられません。指定されたクリーニング手順に従わない場合、製品や製品のカバーが急速に劣化する可能性が非常に高くなります。

注意！ クッションのクリーニングには、刺激の強い洗剤や研磨剤、鋭利なものを使用しないでください。

注意！ Vicair 02 クッションの上面を洗濯機のだアのガラスに当てないでください。

注意！ 過度な洗濯は製品の劣化に影響を与えます。

Vicair Vector 02 のクリーニング

- ・ Vicair Vector 02 クッションカバーの洗たく
クッションカバーは洗濯機洗いが可能です。カバーの内側に付いているラベル上の洗たくの際の指示に従ってください。(60 ° C=140 ° F)



- ・ Vicair Vector 02 クッションの洗たく
Vicair 02 クッションは60° C のお湯で、マイルドな洗剤を使用し洗たく機のソフトコースで洗うことができます。クッションを洗たく機に入れる前に、SmartCells を取り外す必要はありません。クッションの上側は洗たく機のだアのガラス部分に当たるように置かないでください。洗濯機には最大重量の半分以上を入れないでください。回転速度は低速にしてください。攪拌式の洗濯機を使うときは、クッションがドラム内で自由に移動できるようにしてください。塩素系漂白剤は使用せず、ドライクリーニングや蒸気洗浄も行わないでください！ Vicair 02 クッションは乾燥機を使わずに、空気乾燥してください (5〜6 時間)。Vicair 02 クッションのスリング部分を使って吊るし干しできます。



Vicair Vector 02 の消毒

警告！ 体液で汚れた場合や、製品を別のユーザーに譲渡する場合は、二次汚染を防ぐために製品を消毒する必要があります。上記の手順に従って、クッションとカバーをクリーニングします。できれば抗菌洗剤を使用してください。クリーニング後、消毒のためクッションとカバーをスプレーします。スプレーをカバー、フォーム収納部、SmartCell 収納部に消毒剤をスプレーします。カバーや区画を外側に広げて、スプレーが隙間に入るようにします。

重大な事故の報告

Vicair 製品の使用による重大な事故は、製造元および関係当局に報告する必要があります。

保証

保証のプロセス、条件の詳細についてはwww.vicair.coをご覧ください。

Vicair 社は、製品が通常どおり使用されている場合に限り、製造上および材料上の欠陥に対する限定保証を提供します。異常な使用から生じた損傷、または不適切な取り扱い、清掃、または過失によって引き起こされた損傷は、この保証の対象外です。

保証期間

購入日から 24 か月。

この Vicair 02 クッションの SmartCell には、生涯保証期間があります。

上記の保証期間内に材料または製造上の欠陥が発生した場合、Vicair 社は、独自の判断で、製品を無料で修理または交換します。

ここで明示されている保証違反に対する救済は、製品の修理または交換に限定されます。いかなる場合も、保証違反による損害には結果的損害が含まれず、販売された不適合商品のコストを超えることはありません。

質問

連絡: Vicair 社 info@vicair.com

またはあなたの国の Vicair 社代理店に連絡してください。

Lugupeetud klient!

Täname, et valisite ettevõtte Vicair® toote. Oleme kindlad, et hindate selle lihtsust, töökindlust ja suurepärast mõju. Kiireks paigaldamiseks saate kasutada padjaga kaasasolevat kiire paigaldamise juhendit. Lisaks lugege enne kasutamist tähelepanelikult läbi see kasutusjuhend. Säilitage nii kiire paigaldamise juhend kui ka see juhend edaspidi juhiste meenutamiseks.

Lisateabe saamiseks või juhendite (taas) tellimiseks võtke ühendust oma riigis tegutseva edasimüüjaga. Edasimüüjate teabe saamiseks külastage lehte vicair.com.

SISSEJUHATUS

Vicair® Vector O2 on ratastooli istmepadi, millel on anatoomilise kujuga istmepind, mis pakub väga head stabiilsust inimestele, kellel on suur lamatiste risk. See on ka tõhus lisavahend lamatiste raviplaanis kasutamiseks (I–IV staadium).

NÄIDUSTUSED


Patja kasutatakse mugavuse, stabiilse kehatoe pakumiseks, kehahoiaku parandamiseks ja lamatiste ennetamiseks.

See on ka tõhus lisavahend lamatiste raviplaanis kasutamiseks (I–IV staadium).

VASTUNÄIDUSTUSED

Kui seda kasutatakse ettenähtud viisil, ei ole teada vastunäidustusi.

PEAMISED OSAD

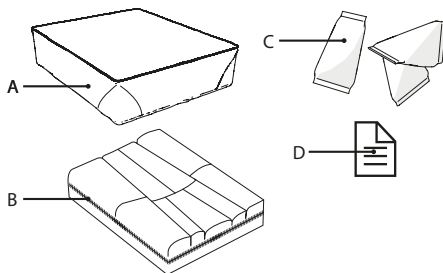

- A. Padjakate
- B. Padi
- C. SmartCells™, paigutatud 9 sektsiooni
- D. Kiire paigaldamise juhend

ÜLDISED TOOTE SPETSIFIKATSIOONID

Toote nimi:	Vicair Vector O2
Tootja:	Vicair B.V., Holland
Garantii:	24 kuud
Kasutatud materjalid:	Kõik lateksivabad
Kaal (ilma katteta):	Väikseim suurus: 0,5 kg / 1,1 lbs Keskmine suurus: 0,8 kg / 1,8 lbs Suurim suurus: 1,3 kg / 2,9 lbs
Saadaval suurused:	Vaadake juhendi lõpus olevat tabelit
Padi:	Pealmine osa on valmistatud polüuretaankatttega polüesterkangast, alumine osa polüestervõrk kangast
Täidis:	Õhuga täidetud SmartCells, millel on hõõrdumist vähendav kate

O2 pealisriie:	Pealmine osa:kootud polüesterkangas.Alumine äär:polüesterkangas, millel on polüüretaanist libisemisvastane kate.
----------------	--

Alternatiivsed padjakatted

Comfair Cover:Pealmine osa:kootud polüesterkangas.Küljed:polüestrist 3D-vörkkangas.Alumine osa:polüesterkangas, millel on polüüretaanist libisemisvastane kate. Incotec Cover ja Reversible Cover.Pealmine osa:kootud polüesterkangas, kaetud vedelikukindla hingava polüüretaaniga.Alumine osa:polüesterkangas, millel on polüüretaanist libisemisvastane kate.

Kõik katted: masinpestavad.Katted vastavad standarditele EN1021-1, 1021-2 ja CAL117.

ETTEVAATUSABINÕUD JA OHUTUSJUHISED

Vicair ratastooli istmepatja tohib kasutada ainult ratastooli istmepadjana.Selle toote kasutamine muul viisil on väärkasutus.Vicair B.V. ei vastuta väärkasutuse, ebaõige kasutamise või hooletuse tõttu tekkinud kahju eest.Lugege see juhend läbi ja veenduge, et olete sellest täielikult aru saanud.

Hoiatus! Vicair B.V. soovib toodet paigaldada terapeudi või abivahendite spetsialisti otsese järelevalve all.

Hoiatus! Teie õndraluu ja vaagnaluud ei tohiks puutuda padja põhja vastu.Läbivajumist tuleks kontrollida esmakordsel kasutamisel ja pärast padja täidise kohandamist.

Hoiatus!Kontrollige regulaarselt oma nahka punetuse suhtes, eriti esimestel päevadel.Kui punetus tekib ja ei kao 15 minuti jooksul, konsulteerige terapeudi või abivahendite spetsialistiga.

Hoiatus! Vicair B.V. soovib kohandada täitmisastet terapeudi või abivahendite

spetsialisti otsese järelevalve all.

Hoiatus! Kui toode määrdub kehavedelikega või antakse üle teisele kasutajale, tuleb toode desinfitseerida, et vältida risknakkust.

Hoiatus! Kontrollige iga kolme kuu tagant toote kulumist ja kõrgede tühjenemist.Tõsise kahjustuse või suure hulga tühjenenud kõrgede korral ärge jätkake toote kasutamist.

Konsulteerige oma abivahendite spetsialistiga.

Ettevaatust!Ärge kasutage toodet lahtise leegi või kuumu soojusallika läheduses ja ärge jätke seda sellisesse kohta.

Ettevaatust!Ärge puhastage toodet keemiliselt, auruga ega autoklaavis.Toode ei talu liigset kuumust ega rõhku.Kui antud puhastusjuhiseid ei järgita, on väga tõenäoline, et toode ja/või toote kate vananeb kiiremini.

Ettevaatust!Ärge kasutage padja puhastamiseks söövitavaid või abrasiivseid vahendeid ega teravaid esemeid.

Ettevaatust!Ärge asetage Vicair O2 padja pealmist poolt pesumasina ukseklaasi vastu.

Ettevaatust!Veenduge, et padi ei jääks rataste kodarate ette.

Ettevaatust!Liigne pesemine võib mõjutada selle toote vananemist.

Märkus! Täiteaste võib veidi erineda vaikimisi määratust (vt toote etiketti).

PAIGALDAMINE

Hoiatus! Vicair B.V. soovib toodet paigaldada terapeudi või abivahendite spetsialisti otsese järelevalve all.

Ettevaatust!Veenduge, et padi ei jääks rataste kodarate ette.

Märkus!Kasutage patja alati koos kattega.

Märkus!Veenduge, et ratastooli iste on puhas ja rasvavaba.

Nõuanne.Kui eelistate takjakinnitust mitte kasutada, võite takjaribad eemaldada.Pange tähele, et padja ja/või padjakatte põhjale kinnitatud ribad ei saa eemaldada.

Padjakatte O2 Top Cover kasutamise korral järgige alltoodud juhiseid

Need juhised vastavad kiire paigaldamise juhendis esitatud paigalduspiltidele 1–6.

- Kontrollige padja suurust. Padja ja istme laius (X) peaksid ühtima. Kui padi toetub käetugedele või külgakaitsetele, võib laius olla kuni 2,5 cm (1") suurem. Padja ja istme sügavus (Y) peaksid ühtima.
- Kontrollige, kas katte suurus vastab padja suurusele.
- Eemaldage padja põhjale kinnitatud takjaribade kaitsekile.
- Asetage padi kindlalt vajutades kohale.
- Asetage O2 Top Cover padja peale.
- Viige padja tagaosas aas läbi katte tagaosas oleva nõõbiaugu.
- Istuge mõne minuti vältel padjal, et padi saaks kohanduda teie kehakujuga.
- Vajadusel reguleerige jalatugesid.

Alternatiivsed padjakatted

Padjakatte Comfair Cover, Incotec Cover või Reversible Cover kasutamise korral järgige alltoodud juhiseid.

Pange tähele: kahepoolsel kattel Reversible Cover on tarnimisel väljapoole pööratud jahe hingav pool. Kui vajate selle katte vedelikukindlat poolt, tõmmake esmalt katte pealmine osa täielikult alumise osa küljest lahti, pöörake pealmine osa teistpidi ja kinnitage see uuesti alumise osa külge.

- Kontrollige padja suurust. Padja ja istme laius (X) peaksid ühtima. Kui padi toetub käetugedele või külgakaitsetele, võib laius olla kuni 2,5 cm (1") suurem. Padja ja istme sügavus (Y) peaksid ühtima.
- Kontrollige, kas katte suurus vastab padja suurusele.
- Eemaldage padja põhjalt takjaribad. Pange tähele, et padja põhjale kinnitatud ribad ei saa eemaldada.

- Sisestage padi katte sisse.
- Viige aas läbi katte augu.
- Sulgege tõmblukk. Veenduge, et te ei kahjustaks patja.
- Eemaldage padjakatte kinnitatud takjaribade kaitsekile.
- Asetage padi kindlalt vajutades kohale.
- Istuge mõne minuti vältel padjal, et padi saaks kohanduda teie kehakujuga.
- Vajadusel reguleerige jalatuge.

Läbivajumise kontrollimine

Pilt 7 – kiire paigaldamise juhend

Hoiatus! Teie õndraluu ja vaagnaluud ei tohiks puutuda padja põhja vastu. Läbivajumist tuleks kontrollida esmakordsel kasutamisel ja pärast padja täidise kohandamist.

Hoiatus! Vicair B.V. soovib kohandada täitmisastet terapeudi või abivahendite spetsialisti otsese järelevalve all.

- Kontrollige läbivajumist pärast seda, kui olete istunud padjal umbes 5 minutit.
- Laske terapeudil või abivahendite spetsialistil libistada käsi teie tuharate ja Vicair padja vahele ning kallutage samal ajal ise keha ettepoole.
- Paluge terapeudil või abivahendite spetsialistil kontrollida, kas teie madalaimate luutippude alla jääb toetuseks vähemalt 2,5 cm / 1" SmartCellsi kargesid. See hoiab ära nende kokkupuute ratastooli istmega.
- Läbivajumise korral ärge patja kasutage. Enamasti lahendab probleemi sektsioonide täitmisastme kohandamine.

KASUTAMINE

Naha punetuse kontrollimine

Pilt 8 – kiire paigaldamise juhend

Hoiatus! Kontrollige regulaarselt oma nahka punetuse suhtes, eriti esimestel päevadel. Kui punetus tekib ja ei kao 15 minuti jooksul,

konsulteerige terapeudi või abivahendite spetsialistiga.

Täitmisastme kohandamine

Hoiatus! Vicair B.V. soovib kohendada täitmisastet terapeudi või abivahendite spetsialisti otsese järelevalve all.

Kasutusvalmis

See Vicair toode on kasutusvalmis. Sellel on oma ainulaadne täitmisaste, mis sõltub suuruselt ja mudelist. Vajaduse korral saab täitmisastet siiski kohendada eri seksioonides SmartCellsi kerge eemaldamise või lisamisega. Vaikimisi täitmisastme leiata padjale kinnitatud etiketilt.

Kasutus- ja hoiutingimused

Ettevaatus! Ärge kasutage toodet lahtise leegi või kuuma soojusallika läheduses ja ärge jätke seda sellisesse kohta.

- **Kasutaja kaal:**
Miinimum: 15 kg / 33 lbs,
maksimum: 250 kg / 551 lbs
- **Temperatuur**
Miinimum: -20 °C / 4 °F,
maksimum: 55 °C / 131 °F
- **Kasutamine suurel kõrgusel**
Märkus! Vicair B.V. soovib mitte kasutada patja kõrgemal kui 2400 m (8000 ft) või madalamal kui 50 m (164 ft) merepinnast. Kuna iga SmartCell on täidetud õhuga, võib padi suurel kõrgusel või lennukis käituda tavapärasest erinevalt. Sellistes tingimustes saab padja tugevuse kohandamiseks eemaldada igast seksioonist mõned kärjed.
- **Õhuniiskus:**
Miinimum: 0%, maksimum 100%

Igapäevane kohevdamine

Vicair B.V. soovib enne kasutamist iga päev Vicair patja kohevdada.

Vicairi istmepadjade kasutamine mootorsõidukis

Võimaluse korral liikuge ratastoolist välja ja autotootja paigaldatud ilma padjata sõidukiistmele ning kasutage sõiduki kokkupõrketesti läbinud turvasüsteemi sõitjatele.

Kui vajate tootja paigaldatud sõidukiistmel täiendavat kaitset, võib Vicairi ratastoolipadja asemel kasutada patja Vicair Allrounder O2 (mis kinnitatakse kasutaja kehale). Kui ratastooli kasutatakse sõidukiistmena, tuleb järgida kehtivaid reegleid ja eeskirju ratastooli ja ratastoolikasutaja kinnitamiseks transpordi ajal.

Puuduvad andmed Vicairi ratastoolipadja kasutamise mõju kohta kokkupõrketesti läbinud ratastoolis.

Taaskasutus. Toote üleandmine teisele kasutajale

Toode sobib korduvaks kasutamiseks. Kasutuskordade arv sõltub sellest, kui sageli ja millisel viisil toodet kasutatakse. Toode tuleb põhjalikult puhastada ja desinfitseerida enne, kui seda lubatakse kasutada teisel isikul. Juhiste saamiseks lugege punkti „Hooldus ja puhastamine“.

Märkus! Veenduge, et toode on teise isiku jaoks õigesti kohandatud.

Eeldatav kasutusiga

Toote eeldatav kasutusiga on viis aastat, kui seda kasutatakse vastavalt käesolevas juhendis esitatud ohutusjuhiste, hooldusintervallide ja õigesti kasutamise kirjeldusele. Tegelik kasutusiga võib varieeruda sõltuvalt kasutamise sagedusest ja intensiivsusest.

Padjakatte vahetamine

Tavapäraste kasutustingimuste korral soovitatav Vicair B.V. padjakatet vahetada igal aastal. Asenduskatteid saab osta eraldi.

Kasutuselt kõrvaldamine

Kasutatud vahendite ja pakendite kõrvaldamine ja ringlussevõtt peab vastama kehtivatele õigusaktidele. Saastumisohu vältimiseks veenduge, et toode on enne kõrvaldamist puhastatud.

HOOLDUS JA PUHASTAMINE

Hoiatus! Kontrollige iga kolme kuu tagant toote kulumist ja kärke tühjenemist. Tõsise kahjustuse või suure hulga tühjenenud kärke korral ärge jätkake toote kasutamist. Konsulterige oma abivahendite spetsialistiga.

Ettevaatust! Ärge puhastage toodet keemiliselt, auruga ega autoklaavis. Toode ei talu liigset kuumust ega rõhku. Kui antud puhastusjuhiseid ei järgita, on väga tõenäoline, et toode ja/või toote kate vananeb kiiremini.

Ettevaatust! Ärge kasutage padja puhastamiseks söövitavaid või abrasiivseid vahendeid ega teravaid esemeid.

Ettevaatust! Ärge asetage Vicair O2 padja pealmist poolt pesumasina ukseklaasi vastu.

Ettevaatust! Liigne pesemine võib mõjutada selle toote vananemist.

Vicair Vector O2 puhastamine

• Vicair Vector O2 padjakatte puhastamine

Padjakatte on masinpestav. Järgige katte siseküljele kinnitatud sildil olevaid pesemisjuhiseid.
(60 °C = 140 °F)



• Vicair Vector O2 padja puhastamine

Vicair O2 padi on masinpestav temperatuuril 60°C / 140 °F, kasutades kortsumisvastast tsükli ja pehmetoimelist pesuainet. SmartCellsi kärke ei ole vaja enne padja pesumasinasse panemist eemaldada. Ärge asetage padja pealmist poolt pesumasina ukseklaasi vastu. Ärge täitke masinat rohkem kui poole ulatuses selle maksimaalsest täitekaalust. Tsentrifugeerimiskiirust tuleks vähendada. Kui kasutate segajaga masinat, veenduge, et padi saaks trumliks vabalt liikuda. Ärge kasutage kloorvalgendit ega keemiliselt, auruga või autoklaavis puhastamist! Ärge kuivatage Vicair O2 patja trummelkuivatis, vaid laske sellel õhu käes kuivada (5–6 tundi). Võite kasutada Vicair O2 padja kuivama riputamiseks rihma.



Vicair Vector O2 desinfitseerimine

Hoiatus! Kui toode määrduv kehavedelikega või antakse üle teisele kasutajale, tuleb toode desinfitseerida, et vältida ristinakkust. Puhastage padi ja kate vastavalt ülaltoodud juhistele. Eelistatavalt kasutage antibakteriaalset pesuainet. Pärast pesemist pihustage padjale ja kattele desinfitseerimisvahendit. Painutage sektsiooni väljapoole, et pihustatud vahend pääseks nende vahedesse.

TÖSISTEST JUHTUMITEST TEATAMINE

Vicairi toodete kasutamisel esinenud tõsistest juhtumitest tuleb teatada tootjale ja vastavale pädevale asutusele.

GARANTII

Garantiiprotsesside, -tingimuste ja -eeskirjade kohta täieliku teabe saamiseks külastage saiti www.vicair.com.

Vicair B.V. pakub piiratud garantiid kooste- ja materjalivigade vastu, tingimusel et toodet on kasutatud tavapäraselt. Garantii alla ei kuulu kahjustused, mis tulenevad ebatavalisest kasutamisest, ebaõigest käsitlemisest ja puhastamisest või hooletusest.

Garantiiperiood

Alates algsest ostukuupäevast: 24 kuud.
Selle Vicair O2 padja SmartCellsi kärkele kehtib eluaegne garantii.

Kui materjalides või koostekvaliteedis esineb eespool osutatud garantiiperioodi jooksul vigu, parandab või asendab Vicair B.V. – oma valikul – toote tasuta.

Osutatud otsese garantii kohaldamise korral piirduvad heastamisabinõud toote parandamise või asendamisega.

Ühelgi juhul ei hõlma garantii kaudsete kahjude hüvitamist ega ületa mittevastavate kaupade müügihinda.

Kas teil on küsimusi?

Võtke ühendust ettevõttega Vicair B.V. aadressil info@vicair.com või pöörduge oma riigis tegutseva Vicair edasimüüja poole.


Thickness Vicair Vector O2 6 = 6 cm / 2.5 inch
Thickness Vicair Vector O2 10 = 10 cm / 4 inch

Available sizes:

		WIDTH										
inch		14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	cm	35	38	40	43	45	48	50	53	55	58	60
DEPTH	14	35										
	15	38										
	16	40										
	17	43										
	18	45										
	19	48										
	20	50										
	21	53										
	22	55										
	23	58										
	24	60										

 Only available in thickness 10 cm / 4 inch.

Information about availability of other sizes on request.

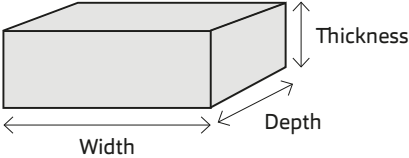



Vicair B.V.

Bruynvisweg 5
1531 AX Wormer
The Netherlands

info@vicair.com
www.vicair.com



ProPharma Group MIS Limited

Olliver, Aske, Richmond
North Yorkshire DL10 5HX
UK



8 717261 037660 >