

Aktiv forflytning og seil

Størrelsesguide



Aktiv forflytning

Aktive Løftere ▾

Aktive løftere brukes for å hjelpe en person opp i en stående eller en delvis stående posisjon for forflytning eller rehabiliteringsøvelser. De avhenger av at brukeren er aktivt involvert i forflytningen. Brukeren må ha noe egenfunksjon i bein og armer for å kunne delta i forflytningen.

Aktive løftere bidrar til en sikker komfortabel og mekanisk assistanse fra en enkelt sittende stilling til en annen, for personer som har begrenset mobilitetsevne eller rehabiliteringsbehov.

Det er to typer seil vi gjerne bruker ved aktiv forflytning.



Seil for aktive løftere ▾

Det er to typer seil vi bruker ved aktiv forflytning



Løftseil aktiv

- ▶ Kan benyttes av personer som har noe egenfunksjon det vil si at personen har noe styrke og balanse fra før, samt være i stand til å holde fast i håndtakene. Løsning brukes ofte til forflytning fra sete til sete, f.eks fra rullestol til toalettstol, eller avhengig av hvilken modell man velger, assistert ved gangtrening/gange.

Seilet er god polstret og har sklisikkert materiale på innsiden.

Forflytningsseil aktiv

- ▶ Seilet er utstyrt med ekstra støtte for ben og er mest beregnet for personer med redusert ståfunksjon, høyere fallrisiko eller/ og redusert balanse.




OBS, for ikke å gli i seilet er det viktig med rett størrelse og viktig med informasjon om at brukeren skal lene seg bakover ved forflytning.

Størrelseguide

En av de viktigste faktorene ved et trygt løft er å bruke den riktige seilstørrelsen som passer til brukeren. Denne guiden er utformet for å gi det best mulige grunnlaget for å ta de rette mål slik at man benytter den best egnede seiltypen til brukeren.

Våre seil for aktive løftere

	XS	S	M	L	XL
Løfteseil aktiv	A: 260	260	330	360	360
	B: 840	840	895	950	1020
	C: 900	950	1170	1270	1810
Forflytningseil aktiv Samme dimensjon som Løfteseil Aktiv pluss "D"	D: -	965	1060	1160	1260

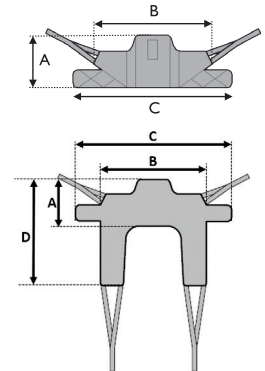


► Størrelse	XS	S	M	L	XL
► Maksimum løftevekt	200 kg	200 kg	200 kg	200 kg	250 kg
► Midjemål	500 - 900	600 - 950	750 - 1170	860 - 1270	920 - 1810

Tilpasningsmuligheter for individuelle behov

ISA løfteserie har mange smarte tilpasningsmuligheter for individuelle behov. Det er blant annet ergonomisk løftearm som gir et naturlig grep, leggstøtte for økt stabilitet, leggpute for beskyttelse, og justerbar løftebom og fotplate for å tilpasse til brukerens høyde.

Her følger noen tips i forhold til brukerens høyde:

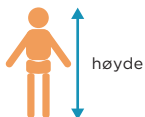

► Brukerens høyde	Standard	Lav (140-160 cm)	Middels (160-180 cm)	Høy (180-200cm)
► Fotplatens høyde	Standard	Høy	Standard	Lav
► Leggstøtte	2 fingre under kneskål	2 fingre under kneskål	2 fingre under kneskål	2 fingre under kneskål
► Løkkefarge	Blå	Grønn	Blå	Grå







Øvrige seil og mål



I tillegg til seilene som brukes ved aktiv forflytning, tilbyr vi et komplett sortiment med seil som er laget for optimal posisjonering, brukervennlighet og komfort.

Invacare-seil med delte benstøtter



Standard åpning		XS	S	M	L	XL	XXL
Universal Low	A	820	850	920	950	970	
	B	700	800	935	1075	1140	
	C	280	350	375	405	405	
	D	365	410	480	575	730	
Universal Standard	A	965	1000	1085	1180	1240	
	B	800	915	1050	1095	1240	
	C	405	510	560	585	590	
	D	365	410	480	555	720	
Universal High	A	1040	1080	1425	1555	1600	1650
	B	740	845	1000	1120	1190	1285
	C	615	770	900	1000	1000	1000
	D	310	350	375	450	570	600
Universal High Plus	A	1335	1385	1510	1580	1590	
	B	500	570	660	740	850	
	C	705	880	935	970	970	
	D	305	345	455	565	630	

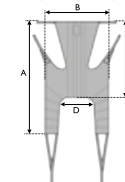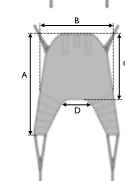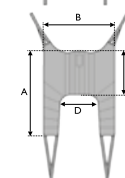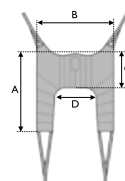

Liten åpning		XS	S	M	L	XL
Amputasjonsseil	A	1060	1100	1160	1360	1510
	B	815	930	970	1230	1360
	C	390	490	520	570	600
	D	285	320	355	410	500
Easy-Fit	A	1105	1130	1200	1270	1360
	B	710	760	800	860	950
	C	590	630	675	720	760
	D	150	185	235	245	255
	E	170	180	190	210	210
	F	120	150	195	215	225

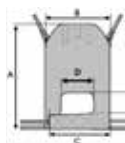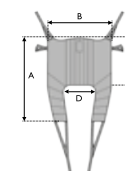


Bred åpning		XS	S	M	L	XL
Toalettseil	A	840	870	950	1020	1100
	B	620	710	800	900	1080
	C	160	200	230	230	270
	D	380	430	495	600	760
Toalettseil High	E	400	400	465	465	465

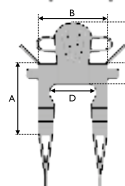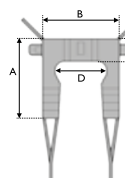

Samme dimensjon som Toalettseil
pluss "E".


Invacare-seil med full støtte

Comfort-familien		XS	S	M	L	XL	XXL
Comfort Standard & Comfort in Situ	A	870	960	1020	1160	1170	1200
	B	970	1050	1170	1290	1330	1395
	C	505	550	610	675	745	820
	D	940	1000	1050	1110	1275	1340
Comfort High	A	1040	1150	1395	1445	1460	
	B	970	1050	1170	1290	1330	
	C	510	550	610	675	745	
	D	960	1020	1160	1280	1470	

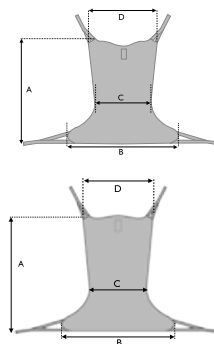


Vest for stå- og gåtrening

		XS	S	M	L	XL
Standing Transfer Vest	A	150	150	180	180	180
	B	750	850	950	1050	1200
Groin band	C	-	850	-	950	-
	D	-	300	-	350	-

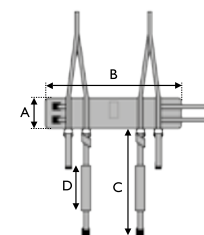

Forflytningsstøtte

		S	L
Light Transfer Support	A	930	1120
	B	120	120

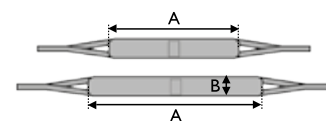

► Størrelse	XS	S	M	L	XL	XXL
► Maksimal brukervekt (kg)	200 kg	200 kg	200 kg	200 kg	250 kg	300 kg

Tlf: 22 57 95 00
norway@invacare.com
www.invacare.no

Invacare AS
Brynsveien 16
0667 Oslo

