

Säkerhetsmeddelande

Invacare Birdie-lyft

Datum: 13-juni-2025

Ref. Invacare: FSN_01_2025_Birdie lifter_Carabineer

Ref. Infarmed: 1324/2025

Viktig information

För våra användares säkerhet vill Invacare uppmärksamma er på denna viktiga information.

Efter kännedom om en allvarlig incident relaterad till Invacare Birdie-lyften och karbinhakens infästning, vill Invacare påminna om vikten av att säkerställa korrekt monteringsposition av karbinhaken i Birdie-lyftens arm, samt korrekt infästning av bygeln i karbinhaken. Bruksanvisningen för Invacare Birdie-lyften beskriver i detalj korrekt användning och hantering av karbinhake och bygel (avsnitt "4.4 – Montering av bygel").

Bruksanvisningen som medföljer produkten måste läsas och förstås innan produkten tas i bruk.

Bruksanvisningen innehåller all information som krävs för att hantera och använda produkten på ett korrekt och säkert sätt, och ska alltid ligga till grund för all utbildning som ges om produkten.


För att säkerställa god prestanda och säkerhet får produkten endast användas enligt sin avsedda användning, och informationen i bruksanvisningen ska alltid följas.

Vidare är det viktigt att kontrollera att karbinhaken alltid är korrekt monterad.

För att säkerställa detta ska karbinhaken inte kunna rotera helt fritt utan motstånd i de plastdelar där den är monterad. Om detta sker tyder det på slitage i plastdelarna, som då behöver bytas ut.

Invacare har därför beslutat att förbättra den nuvarande kontrollistan för regelbunden besiktning som ingår i produktens bruksanvisning. Under avsnittet "Bygeln" läggs en ytterligare kontrollpunkt till för att inkludera denna specifika aspekt vid regelbundet underhåll. Bilder som visar korrekt och felaktig position av karbinhaken bifogas.

Vänligen se bilden nedan:

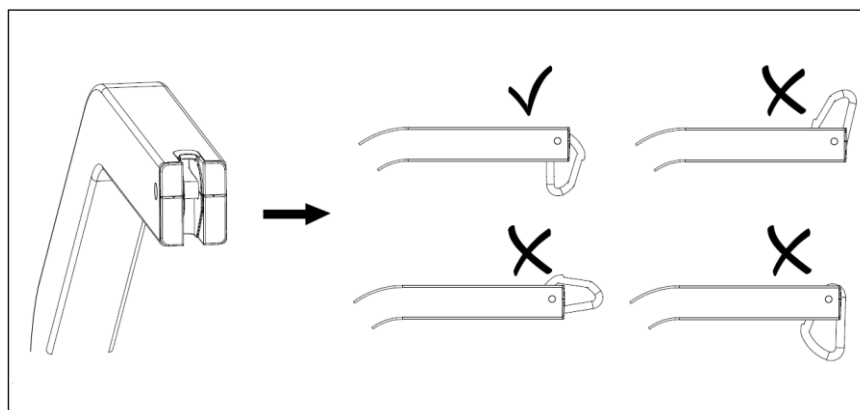

Som bilaga till detta säkerhetsmeddelande finner ni ett tillägg (artikelnummer 60148570) att infoga i bruksanvisningen för Birdie-lyften, som visar ovan nämnda uppdatering.

Varför kontaktas Ni?

Denna information är relevant för alla användare av Invacare Birdie-lyften (oavsett serienummer), och enligt våra register har Ni mottagit en eller flera Invacare Birdie-lyftar.

Vilka åtgärder krävs?

Vårdgivaren/leverantören ska informera alla berörda användare om innehållet i detta säkerhetsmeddelande.

Detta **tillägg ska förvaras tillsammans** med de aktuella bruksanvisningarna för Birdie-lyften.

Den uppdaterade kontrollistan för regelbunden besiktning ska alltid ligga till grund för att utföra regelbundet underhåll av enheten.

Vänligen säkerställ att informationen i detta meddelande görs tillgänglig för all relevant personal inom er organisation och/eller kundbas, samt att medvetenheten upprätthålls under en lämplig period.

Invacare bekräftar att berörda myndigheter har informerats om detta säkerhetsmeddelande.

Vi tackar för Er omedelbara uppmärksamhet i denna viktiga fråga, vi uppskattar Ert samarbete.

Kontakt

Om ni har några frågor angående detta säkerhetsmeddelande, eller om ni behöver ytterligare information, vänligen kontakta:

Invacare AB

E-post: tillbud@invacare.com

Tel.: 08-761 70 90 växel