



**matrx<sup>®</sup>MAC**



**MULTI-VERSTELBARE CONTOUR RUG**

Moeiteloos aanpassen





# matrx® MAC

## Klinisch ontwerp

Ontdek onze nieuwe aanpak voor aangepaste rugondersteuning: de Matrx® MAC is onze nieuwe multiverstelbare contour-rugleuning, verkrijgbaar met een optioneel HUG kussen.

### AANGEPASTE PASVORM

Volledig configureerbaar voor de meest uiteenlopende lichaamsvormen en condities. Deze rug is aanpasbaar als de gebruikersbehoeften veranderen.

De Matrx MAC is onze nieuwe manier om pasvorm, positionering en comfort op maat te bieden.



### PRECISIE

Elke specificatie, ontwikkeld door ons team van klinici, is gericht op efficiëntie, kwaliteit en een nauwkeurige pasvorm. Mix & Match ons assortiment zijsteunen voor een pasvorm op maat.



### COMFORT

De voorgevormde structuur en de HUG kussenoptie zorgen voor een grotere onderdempeling en omhulling, waardoor het algehele comfort toeneemt.



### STEUN

Gebaseerd op de anatomische vorm van de Elite E2 rugleuning, bevordert de Matrx MAC een goede houding en een verbeterde rompuitlijning.

## **m** Modulair voor een pasvorm op maat

De Matrix® MAC is een modulaire oplossing die het meest geschikt is voor zit- en rugkantelingen. Hij biedt verwisselbare en tweehandige zijsteunen die kunnen worden gecombineerd en op elkaar afgestemd om op maat gemaakte rompondersteuning te bieden aan mensen met complexere positioneringsbehoeften.

**OP MAAT**  
3 contourdieptes en asymmetrische contour




## **m** Helpt milde scoliose te corrigeren

Posturale instorting kan de orgaanfunctie beïnvloeden. De Matrix MAC zorgt voor een natuurlijke uitlijning van de wervelkolom en de houding.




**VERSTELBARE  
BREEDTE EN  
HOOGTE**

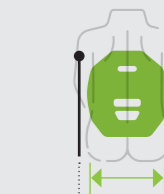

Geschikt voor stoelen die tot 5 cm breder dan de rugleuning



Past op stoelen met dezelfde breedte als de rugleuning

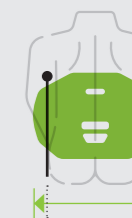

Geschikt voor stoelen die tot 2,5 cm smaller dan de rugleuning


## Kies Matrix® HUG voor geavanceerd comfort

De optioneel verkrijgbare HUG-kussenvulling is gemaakt van zachte Stamina® vezels voor maximale onderdompeling en omhulling.

- Microklimaatbeheersing
- Hypoallergeen
- Machinewasbaar en droogvriendelijk
- Behoudt zijn vorm

Aanbevolen bij milde posturale asymmetrieën.

**matrix**® HUG

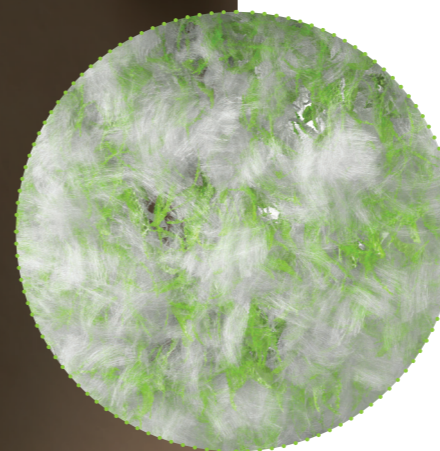

Stamina®  
vezels

### RUG INZETSTUKOPTIES



**STANDAARD**

**Dubbellaags schuim**  
Superzachte/stevige HR-schuimlagen voor comfort en ondersteuning



**OPTIONEEL**

**HUG**  
Zachte Stamina® vezels voor maximaal comfort en omhulling

## **m** Neem een kijkje van dichterbij

De Matrx® MAC heeft een ergonomisch gevormde rugschaal gebaseerd op de Matrx® E2, met extra scapulaire ondersteuning voor zit- en rugkantelingen.

### **HOOFDSTEUN INTERFACE**

Inclusief HD hoofdsteun interface

### **CENTRAAL PANEEL**

Dubbellaags schuim of HUG met Stamina vezels® (niet afgebeeld)

### **INSTALLATIEHULPMIDDEL**

Maakt een eenvoudige installatie mogelijk en zorgt ervoor dat de rugleuning plaat en de zijhouders tijdens de installatie uitgelijnd zijn



### **MIX & MATCH**

De zijsteunen zijn verwisselbaar. Ze kunnen daarom gecombineerd en gematcht worden volgens specifieke behoeften

### **BREEDTE AANPASBAAR**

Ambidexter en uitwisselbaar, de zijsteunen zijn onafhankelijk verstelbaar, waardoor de breedte van de rugleuning tot 3 cm kan worden aangepast

### **DIEPTE AANPASBAAR**

Er zijn 3 zijsteunprofielen verkrijgbaar voor 3 rugleuningdieptes

### **HOOGTE AANPASBAAR**

De zijsteunen kunnen onafhankelijk van elkaar in hoogte worden versteld terwijl de gebruiker blijft zitten



## Montage- en bevestigingsopties



### EENVOUDIGE MONTAGE

Standaard bevestigingen voor rugleuningen met een hoogte variërend van 46 tot 56 cm. Snelle demontage om de rugleuning eenvoudig te verwijderen.



### HEAVY-DUTY KIT

Aanbevolen voor gebruikers met een hoge toon of voor intensief gebruik



### SPLIT

Maakt het mogelijk om obstakels uit het frame te verwijderen, snelle demontage voor rugleuningen van 46 tot 56 cm hoog. Door de snelle demontage kan de rug eenvoudig van de stoel verwijderd worden.



### FIXED

Voor (de)montage is gereedschap nodig. Deze bevestigingsmiddelen worden aanbevolen voor het gebruik van zit- en rugkantelingen. Geschikt voor rugleuningen met een hoogte tussen 46 en 56 cm.


## Rug maten

HOOGTE	BREEDTE				
	41cm	43cm	46cm	48cm	51cm
	39-46cm	41-48cm	43-51cm	46-53cm	48-56cm
41cm	●	●	●	●	●
46cm	●	●	●	●	●
51cm	●	●	●	●	●
56cm	●	●	●	●	●

## Technische gegevens

-  Hoekverstelbaar .....40°
-  Diepteverstelbaar .....10cm
-  Zijcontour .....9, 15, 23cm
-  Verstelling van de contourbreedte .....2.6cm
-  Verstelling van de contourhoogte .....20cm
-  Was de hoes op .....60°C
-  Max. gebruikersgewicht.....136kg
-  Garantie .....2 jaar

● Matrix MAC featured with Matrix Loxx headrest on Invacare Rea Azalea wheelchair

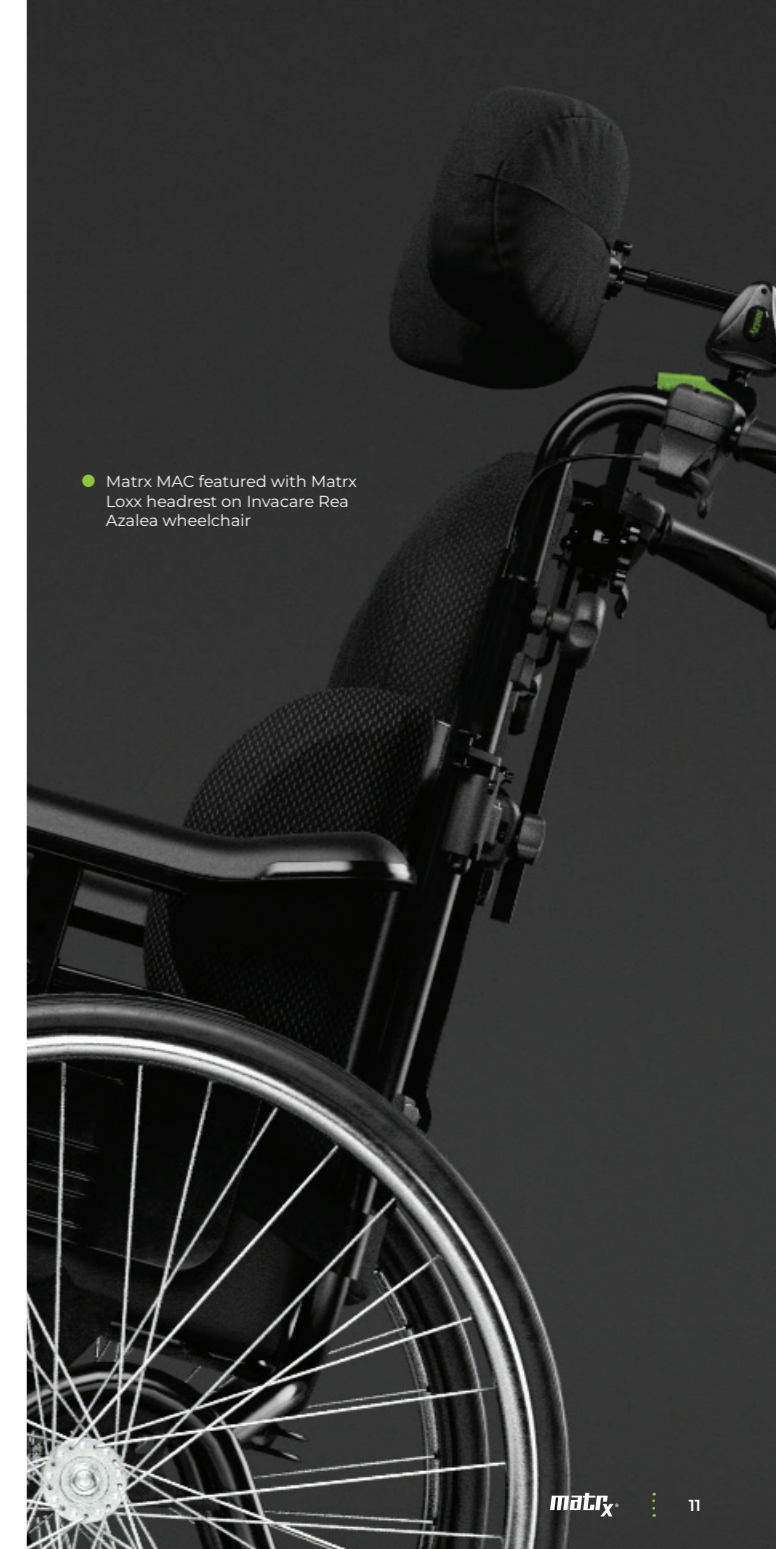



Matrix® MAC ruggen die worden gebruikt voor het vervoeren van een cliënt, moeten uitgerust zijn met een hoofdsteunondersteuning en mogen alleen worden gebruikt in combinatie met rolstoelen die voldoen aan de prestatie-eisen van RESNA WCI9 of ISO 7176-19.



[invacare.be](https://www.invacare.be)

© 2024 Invacare International GmbH. Alle rechten voorbehouden. Alle informatie wordt juist geacht ten tijde van druk.

Invacare behoudt zich het recht voor productspecificaties te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. BE - 09/24