

# De juiste Invacare sling maat kiezen



*Knowledge bank*




Yes, you can.®

# De juiste Invacare sling maat kiezen

## De juiste maat kiezen

Heupbreedte en rughoogte, gemeten in zittende positie, zijn de belangrijkste factoren bij het kiezen van de juiste maat liftmat. Voor slings met gordels is ook de buikomvang belangrijk.

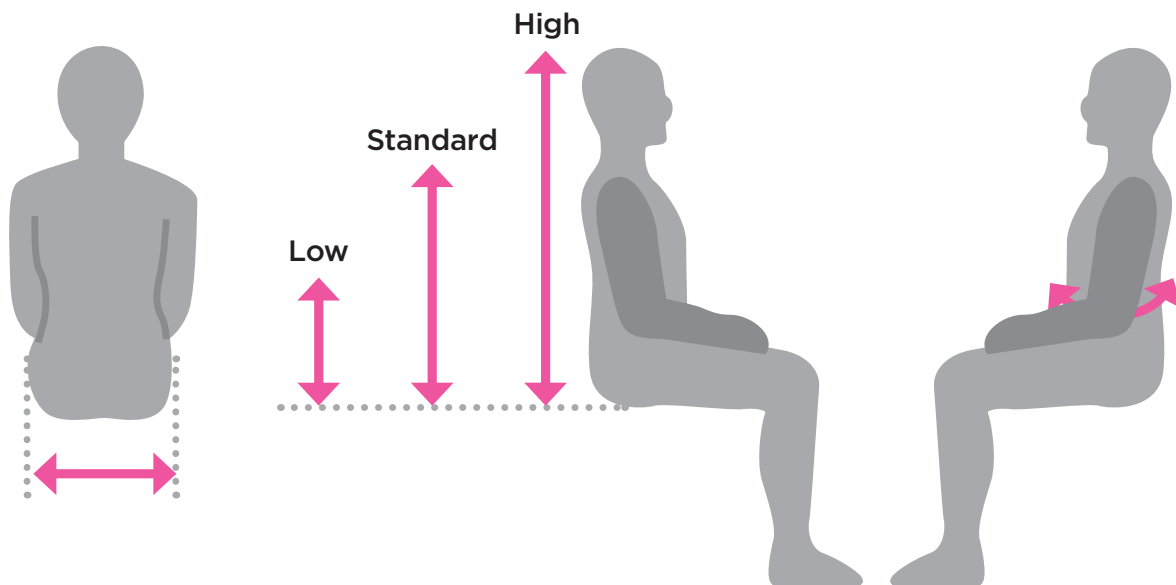

## Invacare Sling maten en veilig belastbaar gewicht

► Maat	XS	S	M	L	XL	XXL
► Veilig belastbaar gewicht	200 kg	200 kg	200 kg	200 kg	250 kg	300 kg

Het gewicht van de cliënt moet vooral in de gaten worden gehouden voor het veilig belastbaar gewicht van de sling. Het is minder van belang voor de juiste maat sling.

Als er geen hoofdondersteuning nodig is, is de juiste rughoogte van de onderrug tot aan de schouders/nek. Als er hoofdondersteuning nodig is, moet bij de maatvoering ook het hoofd meegemeten worden.

► Wanneer de sling te groot is, kan de cliënt eruit glijden. Als de liftmat te klein is, kan de cliënt er nog steeds uitglijden, vooral bij verminderde lichaamscontrole. Het kan ook de medische conditie van de cliënt verergeren. Kies bij de slingkeuze, wanneer een cliënt tussen twee maten valt, voor een iets te kleine sling, voor meer zekerheid.

Sommige medische condities, zoals een beroerte, orthopedische aandoeningen, amputaties of bepaalde wonden kunnen invloed hebben op de slingkeuze.









# De juiste Invacare sling maat kiezen

## Maten

Eén van de belangrijkste factoren voor een veilige transfer is de match tussen heup-/dijbeenbreedte en de afmeting van de sling opening tussen de beenondersteuning. Als een cliënt tussen twee maten valt volgt de kleinere maat voor meer zekerheid.

### Invacare Slings met gescheiden benen


<b>Universal family met reguliere opening</b>		<b>XS</b>	<b>S</b>	<b>M</b>	<b>L</b>	<b>XL</b>	<b>XXL</b>
Universal Low	<b>A</b>	820	850	920	950	970	
	<b>B</b>	700	800	935	1075	1140	
	<b>C</b>	280	350	375	405	405	
	<b>D</b>	365	410	480	575	730	
Universal Standard	<b>A</b>	965	1000	1085	1180	1240	
	<b>B</b>	800	915	1050	1095	1240	
	<b>C</b>	405	510	560	585	590	
	<b>D</b>	365	410	480	555	720	
Universal High	<b>A</b>	1040	1080	1425	1555	1600	1650
	<b>B</b>	740	845	1000	1120	1190	1285
	<b>C</b>	615	770	900	1000	1000	1000
	<b>D</b>	310	350	375	450	570	600
Universal High Plus	<b>A</b>	1335	1385	1510	1580	1590	
	<b>B</b>	500	570	660	740	850	
	<b>C</b>	705	880	935	970	970	
	<b>D</b>	305	345	455	565	630	
<b>Kleine opening</b>		<b>XS</b>	<b>S</b>	<b>M</b>	<b>L</b>	<b>XL</b>	
Amputee	<b>A</b>	1060	1100	1160	1360	1510	
	<b>B</b>	815	930	970	1230	1360	
	<b>C</b>	390	490	520	570	600	
	<b>D</b>	285	320	355	410	500	
Easy-Fit	<b>A</b>	1105	1130	1200	1270	1360	
	<b>B</b>	710	760	800	860	950	
	<b>C</b>	590	630	675	720	760	
	<b>D</b>	150	185	235	245	255	
	<b>E</b>	170	180	190	210	210	
	<b>F</b>	120	150	195	215	225	
<b>Grote opening</b>		<b>XS</b>	<b>S</b>	<b>M</b>	<b>L</b>	<b>XL</b>	
Dress Toileting Low	<b>A</b>	840	870	950	1020	1100	
	<b>B</b>	620	710	800	900	1080	
	<b>C</b>	160	200	230	230	270	
	<b>D</b>	380	430	495	600	760	
Dress Toileting High	<b>E</b>	400	400	465	465	465	
Zelfde afmetingen als Dress Toileting Low plus "E"							

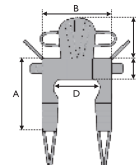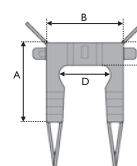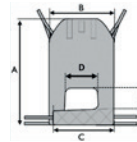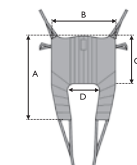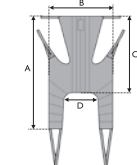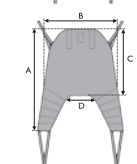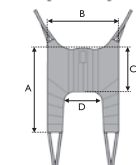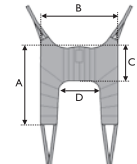

# De juiste Invacare sling maat kiezen


## Invacare Slings met niet-gescheiden benen voor volledige lichaamsondersteuning

Comfort Familie		XS	S	M	L	XL	XXL
Comfort Standard & Comfort in Situ	A	870	960	1020	1160	1170	1200
	B	970	1050	1170	1290	1330	1395
	C	505	550	610	675	745	820
	D	940	1000	1050	1110	1275	1340
Comfort High	A	1040	1150	1395	1445	1460	
	B	970	1050	1170	1290	1330	
	C	510	550	610	675	745	
	D	960	1020	1160	1280	1470	

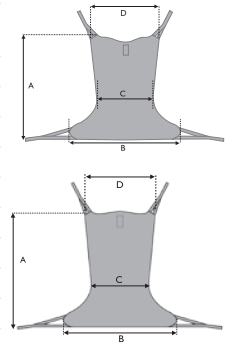


## Vest voor sta- en looptraining

		XS	S	M	L	XL
Standing Transfer Vest	A	150	150	180	180	180
	B	750	850	950	1050	1200
Groin Band	C	-	850	-	950	-
	D	-	850	-	350	-

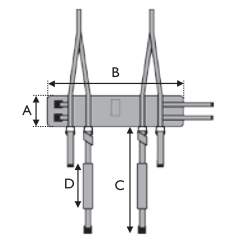


## Transfer ondersteuning

		S	L
Light Transfer Support	A	930	1120
	B	120	120

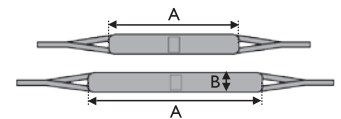

## Invacare Slings voor actieve tilliften

		XS	S	M	L	XL
Stand Assist	A	260	260	330	360	360
	B	840	840	895	950	1020
	C	900	950	1170	1270	1810
Transfer Stand Assist	D	-	965	1060	1160	1260

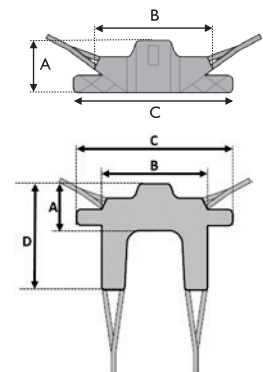

► Maat	XS	S	M	L	XL	XXL
► Veilig belastbaar gewicht	200 kg	200 kg	200 kg	200 kg	250 kg	300 kg