

**SAVE THESE INSTRUCTIONS**

*NOTE: Check all parts for shipping damage. If damage is found, DO NOT use. Contact Carrier/Invacare for further instructions.*

**Safety Summary**

To ensure the safe and proper assembly of the cart, these instructions and warnings **MUST** be followed:

**⚠ WARNING**

DO NOT use this product or any available optional equipment without first completely reading and understanding these instructions and any additional instructional material such as owner's manuals, service manuals or instruction sheets supplied with this product or optional equipment. If you are unable to understand the warnings, cautions or instructions, contact a healthcare professional, dealer or technical personnel before attempting to use this equipment - otherwise, injury or damage may occur.

After any adjustments, repair or service and before use, make sure all attaching hardware is tightened securely - otherwise injury or damage may result.

**⚠ ACCESSORIES WARNING**

Invacare products are specifically designed and manufactured for use in conjunction with Invacare accessories. Accessories designed by other manufacturers have not been tested by Invacare and are not recommended for use with Invacare products.

**Cart Assembly**

*NOTE: The following tools are required to perform this procedure:*


- #3 Phillips Head Screwdriver
- 10mm Wrench

1. Remove base assembly, handle assembly, and hardware packet from packaging.

*NOTE: Hardware packet should contain two each button head screws, nuts, screw retainers, and thumb screws.*

2. Insert handle assembly posts into square brackets located on the base assembly. Refer to FIGURE 1 (Detail "A").
3. Adjust handle and base assemblies until screw holes are directly aligned. Refer to FIGURE 1 (Detail "B").


For more information regarding Invacare products, parts, and services, please visit [www.invacare.com](http://www.invacare.com)

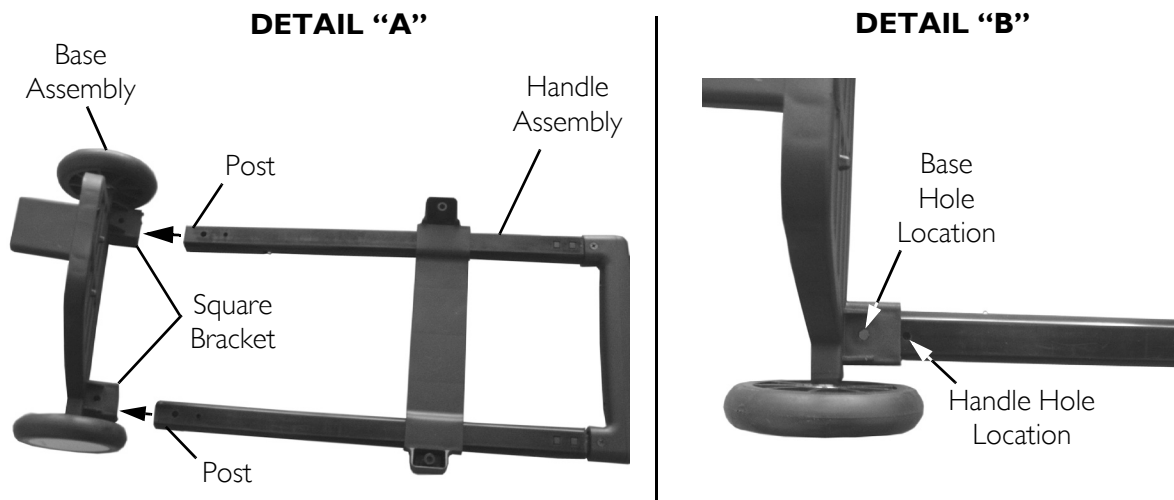

**FIGURE 1** Inserting Handle into Base Assembly


4. Insert screw through base assembly bracket, ensuring screw protrudes through opposite side of bracket facing toward base assembly platform (FIGURE 2).
5. Thread nut onto screw and tighten securing the handle assembly to the base assembly (FIGURE 2).

*NOTE: Repeat STEP 4 thru STEP 5 on the opposite side of base assembly.*

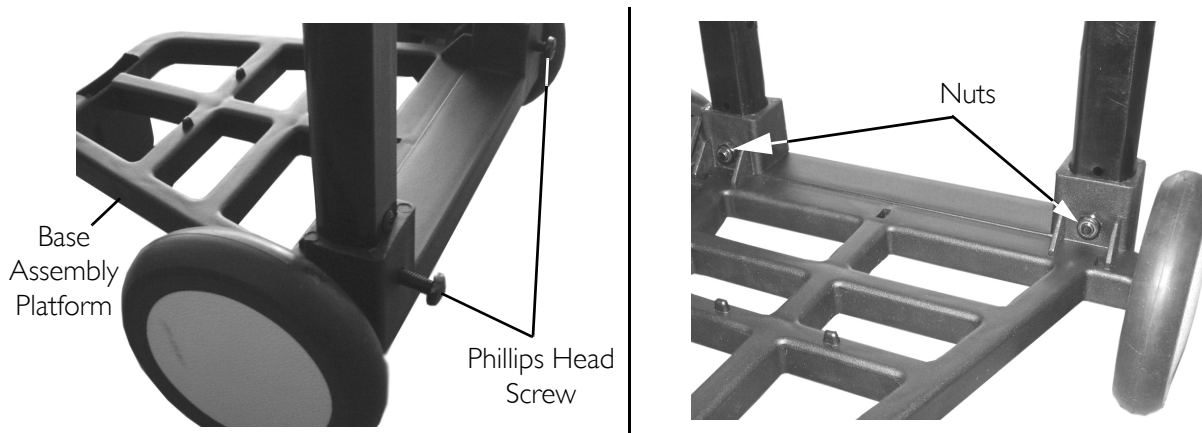


**FIGURE 2** Securing Handle to Base Assembly

6. Insert the two thumb screws into bracket located on the handle assembly (FIGURE 3).
7. Secure screws with retaining rings (FIGURE 3).

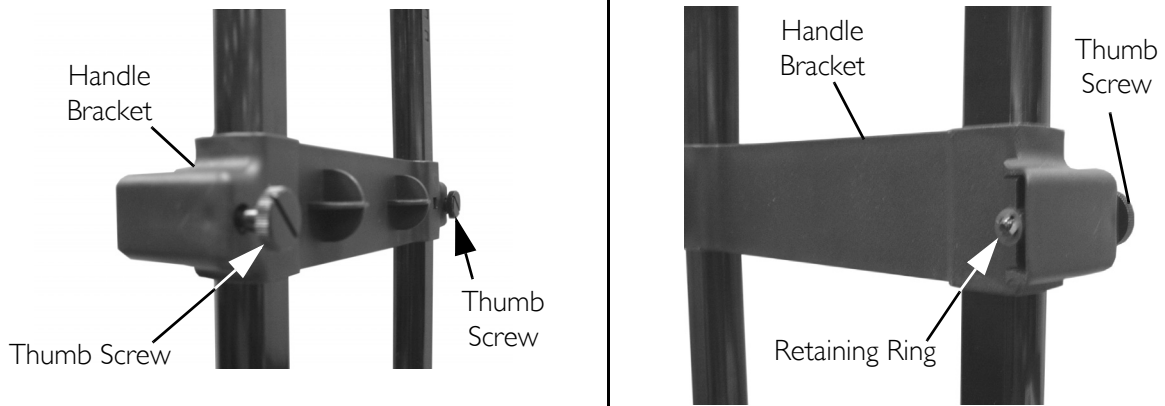


**FIGURE 3** Attaching Handle Bracket

8. Position concentrator unit onto base assembly by aligning holes in the bottom side of the unit with protrusions on cart base (FIGURE 4).

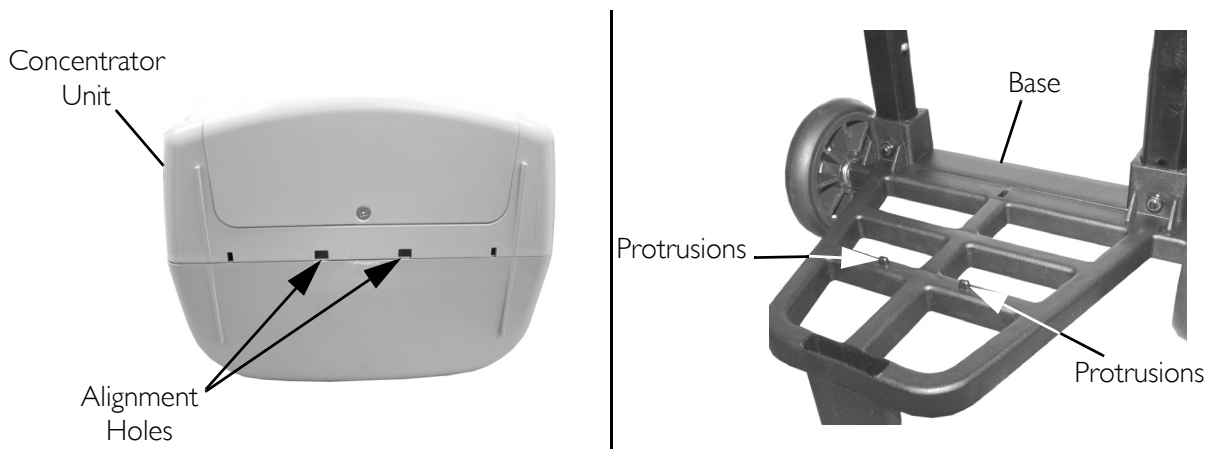

**FIGURE 4** Positioning Concentrator Unit onto Cart

- 
9. Align thumb screws with holes located on the back of concentrator unit, hand tighten screws to secure the unit to the cart (FIGURE 5).

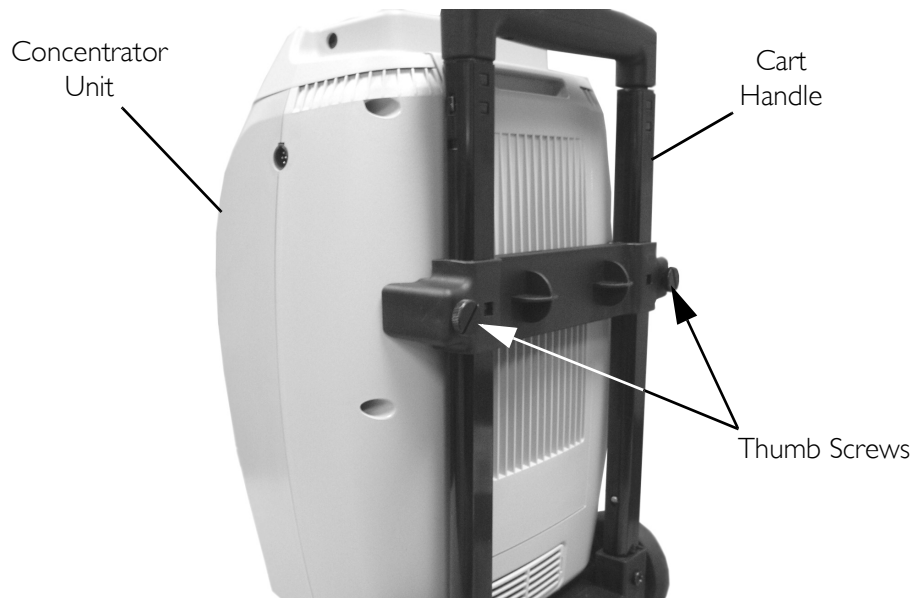

**FIGURE 5** Securing Concentrator Unit to Cart

**GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES**

*NOTA: Compruebe todas las piezas por si hubiera daños ocasionados por el transporte. Si encuentra cualquier daño NO lo use. Póngase en contacto con el Transportista/Invacare para obtener más instrucciones.*

**Resumen de seguridad**

Para asegurar un montaje seguro y adecuado del carrito, se **DEBEN** seguir estas instrucciones y advertencias:

**⚠ ADVERTENCIA**

NO emplee este producto ni ningún otro equipo opcional sin primero leer detenidamente y entender estas instrucciones y cualquier material adicional como manuales de usuario, manuales de servicio u hojas de instrucciones que se adjunten con este producto o el equipo opcional. Si no es capaz de entender las advertencias, precauciones o instrucciones, contacte con un profesional sanitario, con su distribuidor o con personal del servicio técnico antes de intentar utilizar este equipo; caso contrario, se pueden producir lesiones o daños.

Tras los ajustes, reparación o mantenimiento y antes de utilizarse, asegúrese que todas las piezas están ajustadas perfectamente - en caso contrario se pueden producir lesiones o daños.

**⚠ ADVERTENCIA SOBRE ACCESORIOS**

Los productos de Invacare están diseñados y fabricados especialmente para uso en conjunto con accesorios Invacare. Invacare no ha testado accesorios fabricados por otros fabricantes y no recomienda su uso con los productos Invacare.

**Montaje del carrito**

*NOTA: Son necesarias las siguientes herramientas para realizar este proceso:*


- #3 Destornillador de estrella
- Llave de 10mm

1. Retire el montaje de la base, sujete el conjunto y el paquete de piezas del embalaje.

*NOTA: El paquete de piezas metálicas contiene dos tornillos de cabeza, tuercas, arandelas de retención y tornillos.*

2. Inserte los tubos del conjunto en las abrazaderas planas situadas en la base. Remítase a FIGURA 1 (Detalle "A").
3. Ajuste el asa y la base hasta que los agujeros de los tornillos estén alineados directamente. Remítase a FIGURA 1 (Detalle "B").


Para obtener más información sobre productos, repuestos y servicios de Invacare, visite [www.invacare.com](http://www.invacare.com)

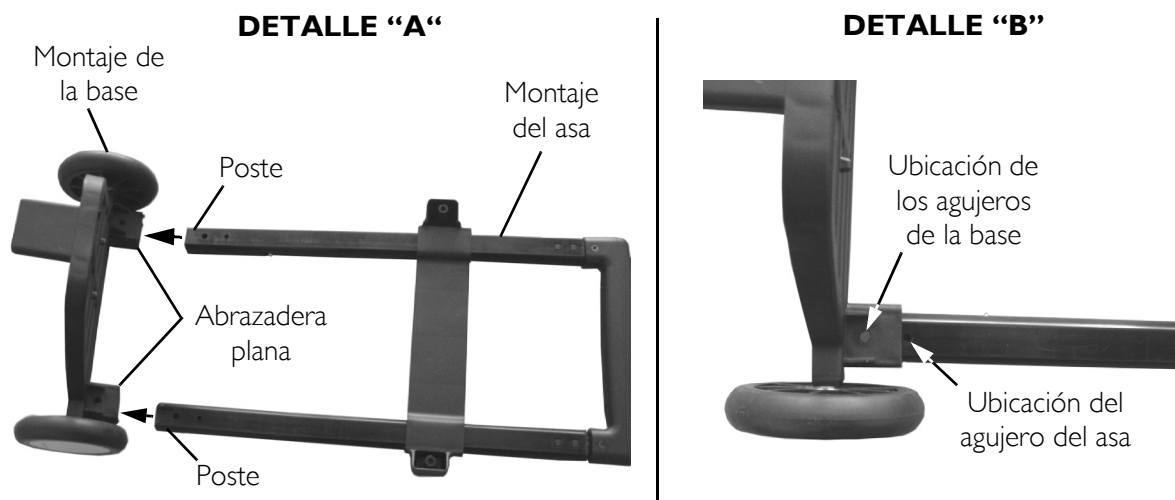

**FIGURA 1** Insertar el asa en la base


4. Inserte el tornillo a través de la abrazadera de la base, asegurándose que el tornillo sobresale por el lado contrario de la abrazadera que mira a la plataforma de la base (FIGURA 2).
5. Inserte una tuerca en el tornillo y apriétela asegurando el asa a la base (FIGURA 2).

*NOTA: Repita PASO 4 por PASO 5 en el lado contrario de la base.*

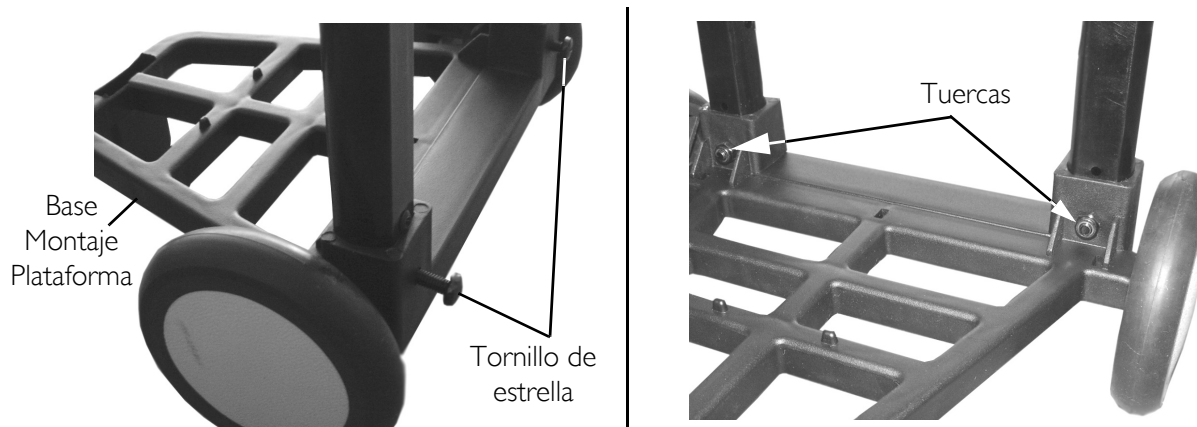


**FIGURA 2** Asegurar el asa a la base

6. Inserte los dos tornillos en la abrazadera situada en el asa (FIGURA 3).
7. Asegure los tornillos con arandelas de retención (FIGURA 3).

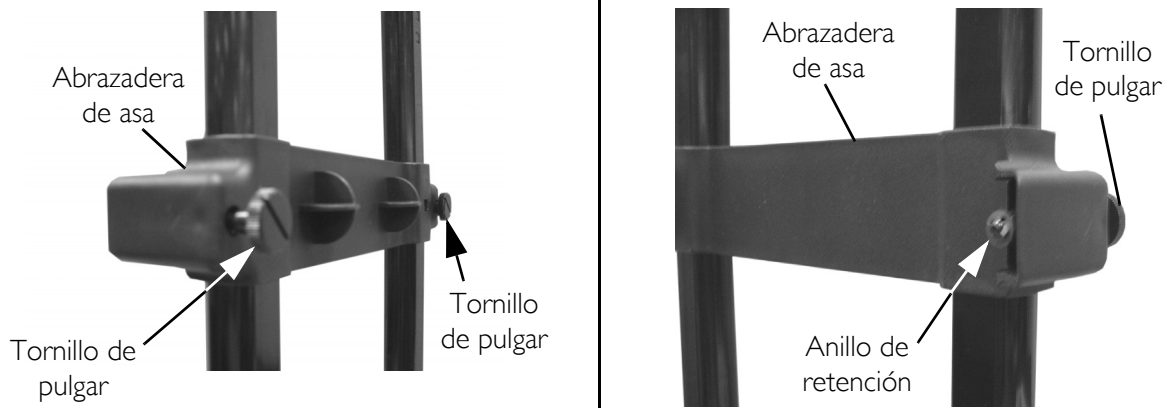


**FIGURA 3** Fijar la abrazadera del asa

8. Coloque la unidad del concentrador sobre la base alineando agujeros en el lateral inferior de la unidad con las partes sobresalientes de la base del carrito (FIGURA 4).

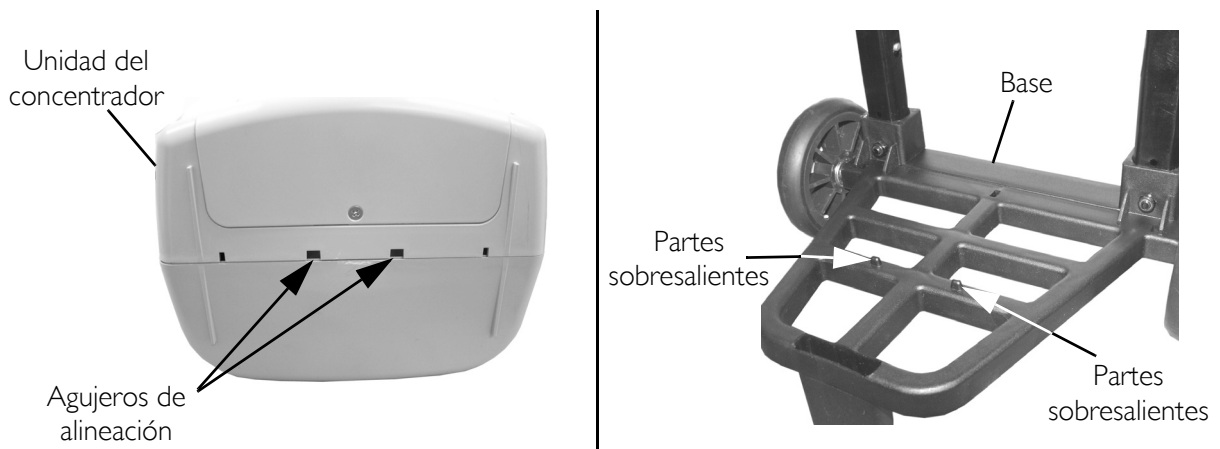

**FIGURA 4** Colocación de la unidad del concentrador en el carrito

- 
9. Alinee los tornillos con los agujeros situados en la parte posterior de la unidad del concentrador, apriete a mano los tornillos para asegurar la unidad al carrito (FIGURA 5).

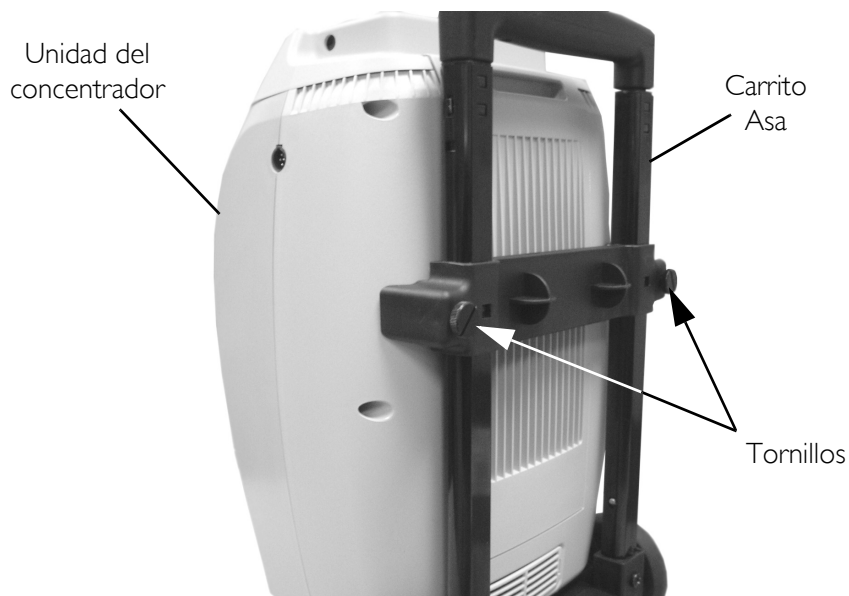

**FIGURA 5** Asegurar la unidad del concentrador al carrito