



# NAVIGATING THE SOLO<sub>2</sub><sup>™</sup> LCD SCREEN

## QUICK REFERENCE GUIDE


*NOTE: This guide is meant to be used only as a brief, general reference. For complete operating instructions, always refer to the Operator's Manual.*

### Turning Concentrator On/Off

*NOTE: For this procedure, refer to FIGURE 1.1.*

1. To turn the SOLO<sub>2</sub> concentrator on, press and hold the On/Off button  until the three warning lights display and the unit beeps.
2. To turn the SOLO<sub>2</sub> concentrator off, press and hold the On/Off button .


*NOTE: GREEN light will flash and you will hear the machine stop running.*

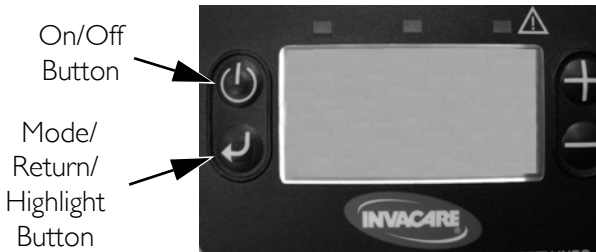

**FIGURE 1.1** Turning Concentrator On/Off

### Menu Screens Navigation

*NOTE: For this procedure, refer to FIGURE 1.1.*

1. After turning on unit, press and hold the Mode/Return/Highlight Button  to scroll through the three SOLO<sub>2</sub> concentrator menu screens.

*NOTE: Screens will continue scrolling until the Mode/Return/Highlight Button is released.*

### Normal Operating/Standby Screen

The Normal Operating/Standby screen shows either battery strength gauge, fan operating, external power on and battery charging icons, when applicable, or the current/last mode of operation and output flow level selected.

---

## LCD Adjust Screen







The LCD Adjust screen allows user to change the brightness and contrast of the screen (FIGURE 1.2).



**FIGURE 1.2** LCD Adjust Screen

## LCD Adjust Screen Navigation


*NOTE: For this procedure, refer to FIGURE 1.2.*

1. Perform one of the following, while the LCD Adjust screen is displayed:
  - A. Tap the Return/Highlight Button  to move the black highlight bar from left to right, or right to left.
  - B. Tap the Up/Increase Button  or the Down/Decrease Button  while the black highlight bar is on the "LEFT SIDE" of the screen to move the highlight bar up or down.
  - C. Tap the Up/Increase Button  or Down/Decrease Button  while the highlight bar is on the "RIGHT SIDE" of the screen to change the value of the item highlighted.
  - D. Hold down the Mode/Return/Highlight Button  to continue scrolling through the three menu screens.

*NOTE: If no buttons are pressed for approximately 10 seconds, the screen will change back to the Standby/Normal Operating screen. Any changes made will NOT be saved.*



---


2. To save changes made on the LCD Adjust screen:

- A. Press and hold the Mode/Return/Highlight Button  until a different screen appears.


## Mode & Flow Adjust Screen

The Mode & Flow Adjust screen allows user to change the current mode of operation and output flow (FIGURE 1.3).

*NOTE: To adjust either the mode or flow, the Mode & Flow Adjust screen must be displayed. If the battery level screen is displayed, press the Mode/Return/Highlight , Up/Increase , or*

*Down/Decrease  button for approximately two seconds (screen should change to Mode & Flow Adjust).*

*NOTE: Any changes to the setting will not take effect until after the screen flashes three times.*

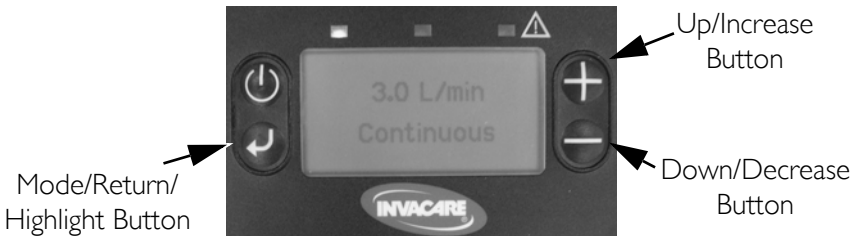


**FIGURE 1.3** Mode & Flow Adjust Screen

---



## Changing Mode

*NOTE: For this procedure, refer to FIGURE 1.3.*

1. With the Mode & Flow screen displayed, press and hold the Return/Highlight Button  for one second.
2. Wait until the Mode & Flow screen flashes three times.

## Adjusting Flow



*NOTE: For this procedure, refer to FIGURE 1.3.*

1. With the Mode & Flow screen displayed, press and hold the Up/Increase Button  or Down/Decrease Button  until desired setting is achieved.
2. Wait until the Mode & Flow screen flashes three times.


*NOTA: La presente guida ha lo scopo di fornire solo riferimenti brevi e generali. Per le istruzioni operative complete, fare sempre riferimento al Manuale dell'operatore.*

## **Accensione/spengimento del concentratore**

*NOTA: Per questa procedura, fare riferimento alla FIGURA 1.1.*

1. Accendere il concentratore SOLO<sub>2</sub>, tenere premuto il pulsante On/Off  fino a quando vengono illuminate le tre spie e l'unità emette un suono.
2. Per spegnere il concentratore SOLO<sub>2</sub>, tenere premuto il pulsante On/Off .


*NOTA: La spia VERDE lampeggerà e si sentirà la macchina fermarsi.*

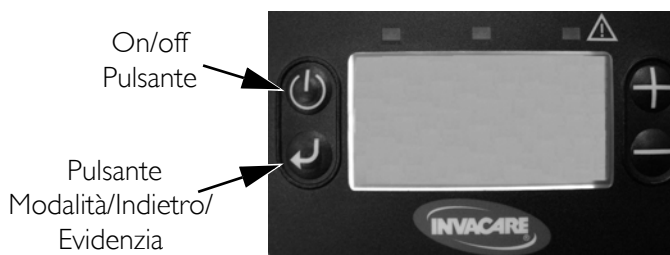

**FIGURA 1.1** Accensione/spengimento del concentratore

## **Navigazione tramite le schermate di menu**

*NOTA: Per questa procedura, fare riferimento alla FIGURA 1.1.*

1. Dopo aver acceso l'unità, tenere premuto il Pulsante Modalità/Indietro/Evidenzia  per scorrere attraverso le tre schermate di menu del concentratore SOLO<sub>2</sub>.

*NOTA: Le schermate continueranno a scorrere fino a quando viene rilasciato il Pulsante Modalità/Indietro/Evidenzia.*

---

## Schermata Funzionamento normale/Standby

La schermata Funzionamento normale/Standby mostra le icone dell'indicatore della batteria, del funzionamento della ventola, dell'alimentazione esterna e della carica della batteria.

## Schermata Regolazione LCD




La schermata Regolazione LCD permette all'utente di cambiare la luminosità e il contrasto dello schermo (FIGURA 1.2).






**FIGURA 1.2** Schermata Regolazione LCD

## Navigazione della schermata Regolazione LCD


*NOTA: Per questa procedura, fare riferimento alla FIGURA 1.2.*

1. Con la schermata Regolazione LCD visualizzata, effettuare una delle seguenti operazioni:
  - A. Premere il Pulsante Modalità/Indietro/Evidenzia  per spostare la barra di evidenziazione da sinistra a destra oppure da destra a sinistra.
  - B. Premere il pulsante Più/Incremento  oppure il pulsante Meno/Decremento  con la barra di evidenziazione nera sul "LATO SINISTRO" della schermata per spostare la barra di evidenziazione su o giù.

- 
- C. Premere il pulsante Più/Incremento  oppure il pulsante Meno/Decremento  con al barra di evidenziazione sul "LATO DESTRO" della schermata per modificare il valore dell'item evidenziato.
- D. Tenere premuto il Pulsante Modalità/Indietro/Evidenzia  per continuare a scorrere attraverso le tre schermate di menu.



*NOTA: se non viene premuto nessun pulsante per circa 10 secondi, la schermata tornerà alla schermata Funzionamento normale/Standby. Le modifiche NON verranno salvate.*


2. Per salvare le modifiche sulla schermata Regolazione LCD:

- A. Tenere premuto il Pulsante Modalità/Indietro/Evidenzia  fino alla visualizzazione di un'altra schermata.

## Schermata di regolazione Modalità e Flusso

La schermata di regolazione Modalità e Flusso permette all'utente di modificare l'attuale modalità operativa e il flusso in uscita (FIGURA 1.3).

*NOTA: Per regolare la modalità o il flusso, deve essere visualizzata la schermata Modalità di regolazione modalità e flusso. Se viene visualizzata la schermata del livello della batteria, premere il pulsante Indietro/Evidenzia , Più/Aumenta  oppure*

*Meno/Diminuisce  per circa due secondi (la schermata dovrebbe passare a Modalità di regolazione modalità e flusso).*


*NOTA: I cambiamenti apportati all'impostazione hanno effetto solo dopo che la schermata si illumina a intermittenza per tre volte.*



**FIGURA 1.3** Schermata di regolazione Modalità e Flusso



## Cambio di modalità

*NOTA: Per questa procedura, fare riferimento alla FIGURA 1.3.*

1. Quando appare la schermata Modalità di regolazione modalità e flusso, premere e tenere premuto per un secondo il Pulsante Modalità/Indietro/Evidenzia .
2. Attendere che la schermata Modalità di regolazione modalità e flusso pulsi tre volte.

## Regolazione del flusso

*NOTA: Per questa procedura, fare riferimento alla FIGURA 1.3.*

1. Con la schermata Modalità di regolazione modalità e flusso visualizzata, premere e tenere premuto per un secondo il pulsante Più/Aumenta  oppure Meno/Diminuisce  fino a raggiungere l'impostazione desiderata.
2. Attendere che la schermata Modalità di regolazione modalità e flusso pulsi tre volte.



# NAVIGEREN IN HET SOLO<sub>2</sub><sup>™</sup> LCD SCHERM



## SNELLE REFERENTIEGIDS

---


*LET OP: Deze gids is uitsluitend bedoeld als een korte, algemene referentie. Raadpleeg steeds de Gebruikershandleiding voor volledige bedieningsinstructies.*

### Aan/Uitzetten van de concentrator

*LET OP: Raadpleeg voor deze procedure FIGUUR 1.1.*

1. Om de SOLO<sub>2</sub> concentrator aan te zetten, houd de Aan/Uit knop ingedrukt  tot de drie waarschuwinglampjes branden en de eenheid een geluidssignaal geeft.
2. Om de SOLO<sub>2</sub> concentrator uit te zetten, houd de Aan/Uit knop ingedrukt .


*LET OP: Het GROENE lampje knippert en u hoort dat de machine stopt.*

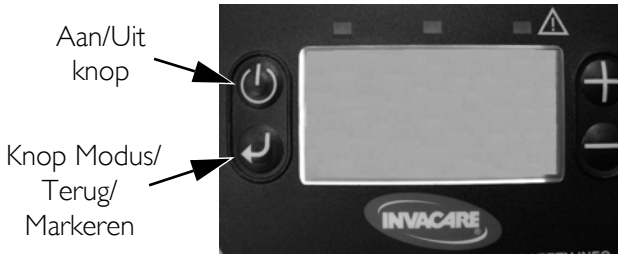

**FIGUUR 1.1** Aan/Uitzetten van de concentrator

### Navigatie menuschermen

*LET OP: Raadpleeg voor deze procedure FIGUUR 1.1.*

1. Nadat de eenheid is aangezet, houd de Knop Modus/Terug/Markeren ingedrukt  om te navigeren door de drie SOLO<sub>2</sub> concentrator menuschermen.

*LET OP: De schermen blijven scrollen tot de Knop Modus/Terug/Markeren wordt losgelaten.*

---

## Normaal Werk/Stand-by scherm

Het normale Werk/Stand-by scherm toont de pictogrammen van de meterstand van de batterij, de werking van de ventilator, externe stroombron aan en het opladen van de batterij, wanneer van toepassing, of de huidige/laatste geselecteerde werkmodus en uitvoer-flowgehalte.

## Scherm LCD-bijstellen

Door het scherm LCD-bijstellen kan de gebruiker de helderheid en het contrast van het scherm veranderen (FIGUUR 1.2).









**FIGUUR 1.2** Scherm LCD-bijstellen

## Navigatie scherm LCD-bijstellen

*LET OP: Raadpleeg voor deze procedure FIGUUR 1.2.*


1. Voer één van de volgende stappen uit terwijl het scherm LCD-bijstellen is weergegeven:

- A. Tik op de Knop Modus/Terug/Markeren  om de zwarte highlightbalk te verplaatsen van links naar rechts of van rechts naar links.
- B. Tik op de Omhoog/Toenemen knop  of de Omlaag/Afnemen knop  terwijl de zwarte highlightbalk zich „LINKS” op het scherm bevindt om de highlightbalk omhoog of omlaag te verplaatsen.

- 
- C. Tik op de Omhoog/Toenemen knop  of de Omlaag/Afnemen knop  terwijl de highlightbalk zich „RECHTS” op het scherm bevindt om de waarde van het gemarkeerde item te veranderen.
- D. Houd de Knop Modus/Terug/Markeren ingedrukt  om verder te scrollen door de drie menuschermen.




*LET OP: Als er gedurende ongeveer 10 seconden geen knoppen worden ingedrukt, gaat het scherm terug naar het Stand-by/Normale werkscherm. Eventuele veranderingen worden NIET opgeslagen.*

2. Om veranderingen in het scherm LCD-bijstellen op te slaan:

- A. Houd de Knop Modus/Terug/Markeren  ingedrukt tot er een ander scherm verschijnt.

## Scherm Modus & Flow bijstellen

Door het scherm Modus & Flow bijstellen kan de gebruiker de huidige werkmodus en uitvoerflow veranderen (FIGUUR 1.3).

*LET OP: Om de modus of stroming bij te stellen, moet het scherm Modus en Stroming Bijstellen worden weergegeven. Als het scherm met het batterijniveau wordt weergegeven, drukt u ongeveer twee seconden op de knop Terug/Markeren , Omhoog/Verhogen  of Omlaag/Verlagen  (het scherm moet veranderen in Modus en Stroming Bijstellen).*


*LET OP: Veranderingen aan de instellingen zijn pas van kracht nadat het scherm driemaal heeft geknipperd.*



**FIGUUR 1.3** Scherm Modus & Flow bijstellen



## Modus veranderen

*LET OP: Raadpleeg voor deze procedure FIGUUR 1.3.*

1. Terwijl het scherm Modus en Strooming is weergegeven, houdt u de knop Terug/Markeren  één seconde lang ingedrukt.
2. Wacht tot het scherm Modus en Strooming driemaal knippert.

## Flow bijstellen

*LET OP: Raadpleeg voor deze procedure FIGUUR 1.3.*

1. Terwijl het scherm Modus en Strooming wordt weergegeven, houdt u de knop Omhoog/Verhogen  of Omlaag/Verlagen ingedrukt  tot de gewenste instelling is bereikt.
2. Wacht tot het scherm Modus en Strooming driemaal knippert.



# NAVIGUER L'ECRAN LCD SOLO<sub>2</sub><sup>TM</sup>

## GUIDE D'UTILISATION RAPIDE


**REMARQUE :** Ce guide est destiné à être utilisé uniquement à titre de référence rapide générale. Pour des consignes d'utilisation complètes, faites toujours référence au Guide d'utilisation.

### Mise en marche ou à l'arrêt du concentrateur

**REMARQUE :** Pour cette procédure, veuillez vous référer à FIGURE 1.1.

1. Pour mettre en marche le concentrateur SOLO<sub>2</sub>, appuyez sur le bouton de Marche/Arrêt et maintenez-le enfoncé  jusqu'à ce que les trois LED d'indication s'allument et que l'unité bipes.
2. Pour arrêter le concentrateur SOLO<sub>2</sub>, appuyez sur le bouton de Marche/Arrêt  et maintenez-le enfoncé.


**REMARQUE :** La LED d'indication VERTE clignotera et vous entendrez la machine s'arrêter.

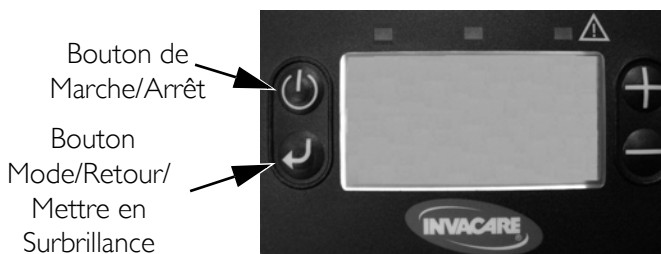

**FIGURE 1.1** Mise en marche ou à l'arrêt du concentrateur

### Navigation à travers les écrans de menu

**REMARQUE :** Pour cette procédure, veuillez vous référer à FIGURE 1.1.

1. Après avoir mis en marche l'unité, appuyez sur le Bouton Mode/Retour/Mettre en Surbrillance  à pour faire défiler les trois écrans de menu du concentrateur SOLO<sub>2</sub>.

*REMARQUE : Les écrans continueront à défiler jusqu'à ce que le Bouton Mode/Retour/Mettre en Surbrillance soit relâché.*

## Écran Fonctionnement normal/Veille

L'écran Fonctionnement normal/Veille affiche soit la jauge d'énergie de la batterie, le fonctionnement du ventilateur, l'alimentation externe et les icônes de chargement de batterie, si applicables, ou le mode actuel/dernier de fonctionnement et le niveau de débit de sortie sélectionné.

## Écran Réglage LCD


L'écran Réglage LCD permet à l'utilisateur de modifier la brillance et le contraste de l'écran (FIGURE 1.2).








**FIGURE 1.2** Écran Réglage LCD

## Navigation de l'écran Réglage LCD


*REMARQUE : Pour cette procédure, veuillez vous référer à FIGURE 1.2.*

1. Exécutez l'une des opérations suivantes, alors que l'écran Réglage LCD s'affiche :
  - A. Appuyez sur le Bouton Mode/Retour/Mettre en Surbrillance  à pour déplacer la barre noire de mise en surbrillance de gauche à droite, ou de droite à gauche.

- 
- B. Appuyez sur le bouton Haut/Augmenter  ou le bouton Bas/Diminuer  tandis que la barre noire de mise en surbrillance se trouve sur le « CÔTÉ GAUCHE » de l'écran pour déplacer la barre de mise en surbrillance vers le haut ou vers le bas.
- C. Appuyez sur le bouton Haut/Augmenter  ou Bas/Diminuer  tandis que la barre de mise en surbrillance se trouve sur le « CÔTÉ DROIT » de l'écran pour changer la valeur de l'élément mis en surbrillance.
- D. Maintenez le Bouton Mode/Retour/Mettre en Surbrillance  pour continuer à faire défiler les trois écrans de menu.

*REMARQUE : Si aucun bouton n'est appuyé pendant environ 10 secondes, l'écran retournera à l'écran Veille/Fonctionnement normal. Aucune modification apportée NE SERA enregistrée.*

2. Pour enregistrer des modifications apportées sur l'écran Réglage LCD :

- A. Appuyez sur le Bouton Mode/Retour/Mettre en Surbrillance  jusqu'à ce qu'un autre écran apparaisse.

## **Écran Réglage mode et débit**


L'écran Réglage mode et débit permet à l'utilisateur de changer le mode de fonctionnement actuel et le débit de sortie (FIGURE 1.3).

*REMARQUE : Pour régler soit le mode soit le le débit, l'écran Régler Mode et Débit doit être affiché. Si l'écran du niveau de batterie est affiché, appuyez sur le bouton Retour/Mettre en*

*Surbrillance , Haut/Augmenter  ou Bas/Baisser  pendant environ deux secondes (l'écran doit passer sur Régler Mode et Débit).*

---


**REMARQUE :** Tout changement du réglage ne prendra effet que lorsque l'écran aura clignoté trois fois.

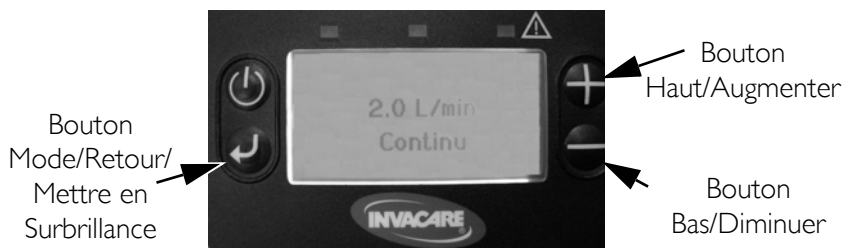

**FIGURE 1.3** Écran Réglage mode et débit

## Changement de mode

**REMARQUE :** Pour cette procédure, veuillez vous référer à FIGURE 1.3.

1. Une fois l'écran Mode et Débit affiché, maintenez le bouton Retour/Mettre en Surbrillance  enfoncé pendant une seconde.
2. Patientez jusqu'à ce que l'écran Mode et Débit clignote trois fois.

## Réglage du débit

**REMARQUE :** Pour cette procédure, veuillez vous référer à FIGURE 1.3.



1. Une fois l'écran Mode et Débit affiché, maintenez le bouton Haut/Augmenter ou Bas/Baisser enfoncé pendant une seconde.
2. Patientez jusqu'à ce que l'écran Mode et Débit clignote trois fois.




*HINWEIS: Dieses Handbuch ist nur als kurzer, allgemeiner Leitfaden vorgesehen. Ausführliche Bedienungsanweisungen finden Sie in der Bedienungsanleitung.*

### Ein- und Ausschalten des Konzentrators

*HINWEIS: Nähere Angaben zu diesem Verfahren finden Sie in ABBILDUNG 1.1.*

1. Um den SOLO<sub>2</sub>-Konzentrator einzuschalten, halten Sie den On/Off-Knopf gedrückt,  bis die drei Warnleuchten aufleuchten und das Gerät einen Signalton abgibt.
2. Um den SOLO<sub>2</sub>-Konzentrator auszuschalten, halten Sie den On/Off-Knopf  gedrückt.


*HINWEIS: Die GRÜNE Leuchte blinkt auf und Sie können vernehmen, wie das Gerät abschaltet.*

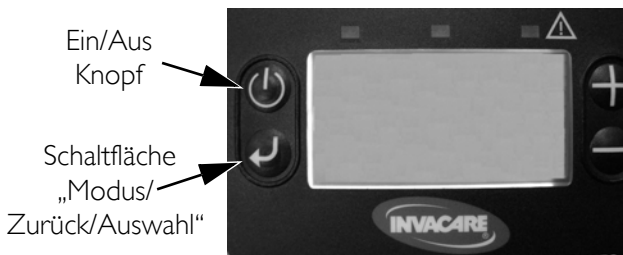

**ABBILDUNG 1.1** Ein- und Ausschalten des Konzentrators

### Navigation im Menübildschirm

*HINWEIS: Nähere Angaben zu diesem Verfahren finden Sie in ABBILDUNG 1.1.*

1. Nach Einschalten des Gerätes halten Sie den Schaltfläche „Modus/Zurück/Auswahl“  um durch die drei Menüs des SOLO<sub>2</sub>-Konzentrators zu scrollen.

*HINWEIS: Die Bildschirme werden weiter abwechselnd angezeigt, bis der Schaltfläche „Modus/Zurück/Auswahl“ losgelassen wird.*

---

## Normalbetrieb-/Standby-Bildschirm

Der Normalbetrieb-/Standby-Bildschirm zeigt eine Anzeige über den Ladezustand der Batterie, je nach Betriebszustand Symbole zu Lüfter, externer Stromversorgung und Batterieladevorgang oder den aktuellen/letzten Betriebsmodus und die ausgewählte Durchflussmenge.

## LCD-Einstellungs-Bildschirm




Der LCD-Einstellungs-Bildschirm wird verwendet, um Helligkeit und Kontrast des Bildschirms einzustellen (ABBILDUNG 1.2).






**ABBILDUNG 1.2** LCD-Einstellungs-Bildschirm

## Navigation im LCD-Einstellungsbildschirm


*HINWEIS: Nähere Angaben zu diesem Verfahren finden Sie in ABBILDUNG 1.2.*

1. Führen Sie eine der folgenden Schritte aus, während der LCD-Einstellungsbildschirm angezeigt wird:
  - A. Drücken Sie den Schaltfläche „Modus/Zurück/Auswahl“,  um den schwarzen Markierungsbalken von links nach rechts oder umgekehrt zu bewegen.
  - B. Drücken Sie den Knopf Nach Oben/Erhöhen  oder den Knopf Nach Unten/Verringern,  während sich der schwarze Markierungsbalken auf der „LINKEN SEITE“ des Bildschirms befindet, um diesen nach oben oder nach unten zu bewegen.

- 
- C. Drücken Sie den Knopf Nach Oben/Erhöhen  oder den Knopf Nach Unten/Verringern,  während sich der schwarze Markierungsbalken auf der „RECHTEN SEITE“ des Bildschirms befindet, um den Wert der markierten Einstellung zu verändern.
- D. Halten Sie den Schaltfläche „Modus/Zurück/Auswahl“  gedrückt, um weiter durch die drei Menübildschirme zu scrollen.

*HINWEIS: Wenn circa 10 Sekunden lang kein Knopf gedrückt wird, kehrt die Anzeige zum Standby/Normalbetrieb-Bildschirm zurück. Dabei werden Änderungen NICHT gespeichert.*




2. So speichern Sie im LCD-Einstellungs-Bildschirm gemachte Änderungen:

- A. Halten Sie den Schaltfläche „Modus/Zurück/Auswahl“  gedrückt, bis ein anderer Bildschirm erscheint.

## **Bildschirm Modus und Durchflusseinstellungen**

Der Modus und Durchflusseinstellungs-Bildschirm ermöglicht es dem Anwender, den aktuellen Betriebsmodus und die Durchflussrate zu verändern (ABBILDUNG 1.3).

*HINWEIS: Um den Modus oder die Durchflusseinstellungen zu verändern, muss das Fenster „Modus und*

*Durchflusseinstellungen“  angezeigt werden. Im Fenster „Akkustand“  die Schaltfläche „Zurück/Auswahl“ , „Nach Oben/Erhöhen“ oder „Nach Unten/Verringern“ ungefähr zwei Sekunden lang gedrückt halten (die Bildschirmanzeige sollte nun wechseln auf „Modus und Durchflusseinstellungen“).*


*HINWEIS: Sämtliche Änderungen der Einstellungen werden erst nach dreimaligem Aufflackern des Fensters wirksam.*



**ABBILDUNG 1.3** Bildschirm Modus und Durchflusseinstellungen



## Ändern des Modus

*HINWEIS: Nähere Angaben zu diesem Verfahren finden Sie in ABBILDUNG 1.3.*

1. Halten Sie, während das Fenster „Modus und Durchflusseinstellungen“ angezeigt wird, die Schaltfläche „Zurück/Auswählen“  eine Sekunde lang gedrückt.
2. Warten, bis das Fenster „Modus und Durchflusseinstellungen“ dreimal aufflackert.

## Einstellung der Durchfluss-Einstellung

*HINWEIS: Nähere Angaben zu diesem Verfahren finden Sie in ABBILDUNG 1.3.*

1. Im Fenster „Modus und Durchflusseinstellungen“ die Schaltfläche „Nach Oben/Erhöhen“  oder „Nach Unten/Verringern“  gedrückt halten, bis die gewünschten Einstellungen erreicht sind.
2. Warten, bis das Fenster „Modus und Durchflusseinstellungen“ dreimal aufflackert.



# NAVEGAR POR LA PANTALLA LCD DEL SOLO<sub>2</sub><sup>™</sup>

## GUÍA DE REFERENCIA RÁPIDA


*NOTA: Esta guía está indicada para utilizarse como una guía breve y general. Para obtener instrucciones completas de funcionamiento, remítase siempre al Manual de Propietario.*

### Encender/Apagar el concentrador

*NOTA: Para este procedimiento, consulte a FIGURA 1.1.*

1. Para encender el concentrador SOLO<sub>2</sub>, pulse y mantenga pulsado el botón On/Off  hasta que aparezcan tres luces de advertencia y la unidad pite.
2. Para apagar el concentrador SOLO<sub>2</sub>, pulse y mantenga pulsado el botón On/Off .


*NOTA: Parpadeará una luz VERDE y escuchará a la máquina parar.*

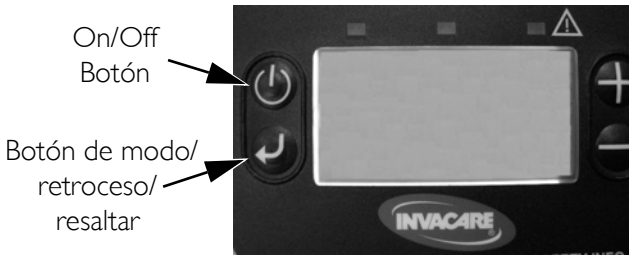

**FIGURA 1.1** Encender/Apagar el concentrador

### Navegación por las pantallas del menú

*NOTA: Para este procedimiento, consulte a FIGURA 1.1.*

1. Tras encender la unidad, pulse y mantenga pulsado el Botón de modo/retroceso/resaltar  para desplazarse a través de las tres pantallas de menú del concentrador SOLO<sub>2</sub>.

*NOTA: Las pantallas continuarán desplazándose hasta que se suelte el Botón de modo/retroceso/resaltar.*

---

## Pantalla funcionamiento normal / Standby

La pantalla funcionamiento normal / standby muestra el indicador de potencia de la batería, el funcionamiento del ventilador, la alimentación externa y los iconos de carga de la batería, cuando sea aplicable, o la actual / última modalidad de flujo y el nivel de flujo de salida seleccionado.

## Pantalla de ajuste LCD




La pantalla de ajuste LCD permite al usuario cambiar el brillo y el contraste de la pantalla (FIGURA 1.2).



**FIGURA 1.2** Pantalla de ajuste LCD

## Navegación por la pantalla de ajuste LCD

*NOTA: Para este procedimiento, consulte a FIGURA 1.2.*

1. Realice una de las siguientes operaciones mientras se muestra la pantalla de ajuste LCD:
  - A. Pulse suavemente el Botón de modo/retroceso/resaltar  para mover la barra resaltada negra de izquierda a derecha y de derecha a izquierda.
  - B. Pulse suavemente el botón Arriba/Aumentar  o el botón Abajo/Disminuir  mientras la barra negra resaltada está en el "LADO IZQUIERDO" de la pantalla para mover la barra resaltada arriba o abajo.

- 
- C. Pulse suavemente el botón Arriba/Aumentar o el botón Abajo/Disminuir mientras la barra negra resaltada está en el “LADO IZQUIERDO” de la pantalla para cambiar el valor del elemento resaltado.
- D. Mantenga pulsado el Botón de modo/retroceso/resaltar para continuar desplazándose por las tres pantallas de menú.

*NOTA: Si no se pulsa ningún botón durante aproximadamente 10 segundos, la pantalla volverá a cambiar a la pantalla Standby / Funcionamiento normal. NO se guardará ningún cambio realizado.*

2. Para guardar cambios en la pantalla de ajuste LCD:

- A. Pulse y mantenga pulsado el Botón de modo/retroceso/resaltar hasta que aparezca una pantalla diferente.

## **Pantalla Modo y Ajuste de Flujo**

La pantalla Modo y Ajuste de flujo permite al usuario cambiar el modo de funcionamiento actual y el flujo de salida (FIGURA 1.3).

*NOTA: Para ajustar el modo o el flujo, debe visualizarse la pantalla de ajuste de modo y flujo. Si se visualiza la pantalla de nivel de batería, presione el botón retroceso/resaltar , arriba/aumentar o abajo/disminuir durante dos segundos aproximadamente (la pantalla cambiará a ajuste de modo y flujo).*

*NOTA: Ningún cambio en el ajuste tendrá efecto hasta luego que la pantalla parpadee tres veces.*




**FIGURA 1.3** Pantalla Modo y Ajuste de Flujo

---



## Cambiar de modo

*NOTA: Para este procedimiento, consulte a FIGURA 1.3.*

1. Cuando visualice la pantalla de modo y flujo, presione y mantenga el botón de retroceso/resaltar  durante un segundo.
2. Espere a que la pantalla de modo y flujo parpadee tres veces.

## Ajustar el caudal

*NOTA: Para este procedimiento, consulte a FIGURA 1.3.*

1. Cuando visualice la pantalla de modo y flujo, presione y mantenga el botón de arriba/aumentar  o abajo/disminuir  hasta obtener el ajuste deseado.
2. Espere a que la pantalla de modo y flujo parpadee tres veces.





## NAVIGERING AV SOLO<sub>2</sub><sup>™</sup> LCD SKJERMEN

### HURTIGREFERANSEVEILEDNING


*MERK: Denne veiledningen er ment for bruk som en kort, generell referanse. For fullstendige brukerinstruksjoner, alltid rådfør deg med brukermanualen.*

## Slå konsentratoren på/av

*MERK: For denne prosedyren, rådfør deg med FIGUR 1.1.*

1. For å slå SOLO<sub>2</sub> konsentratoren på, trykk og hold nede på/av knappen  til tre varsellys vises og enheten piper.
2. For å slå SOLO<sub>2</sub> konsentratoren av, trykk og hold nede på/av knappen .


*MERK: GRØNN lyset vil blinke og du vil høre at maskinen stopper å gå.*

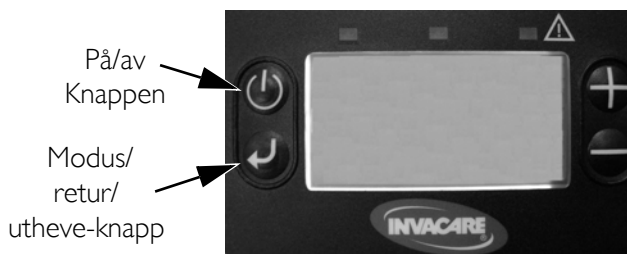

**FIGUR 1.1** Slå konsentratoren på/av

## Navigering av menyskjermer

*MERK: For denne prosedyren, rådfør deg med FIGUR 1.1.*

1. Etter du slår av enheten, trykk og hold nede Modus/retur/utheve-knapp  for å rulle gjennom de tre SOLO<sub>2</sub> menyskjermene for konsentratoren.

*MERK: Skjermene vil fortsette å rulle til Modus/retur/utheve-knapp er sluppet.*

---

## Normal drift/standby-skjerm

Normal drift/standby-skjerm viser enten batteristyrkemåler, vifter som går, ekstern strøm på og batteriladeikoner, når gjeldende, eller den nåværende/siste driftsmodusen og valgt utløpsflow nivå.

## LCD justeringsskjerm




LCD justeringsskjerm lar brukeren endre styrken og kontrasten av skjermen (FIGUR 1.2).






**FIGUR 1.2** LCD justeringsskjerm


## Navigering av LCD justeringsskjerm

*MERK: For denne prosedyren, rådfør deg med FIGUR 1.2.*

- Utfør en av de følgende mens LCD justeringsskjermen er vist:
  - Tapp på Modus/retur/utheve-knapp  for å flytte den svarte høydepunktlinjen fra venstre til høyre, eller høyre til venstre.
  - Tapp opp/ned knappen  eller ned/reduser knappen  mens den svarte høydepunktlinjen er på "VENSTRE SIDE" av skjermen for å flytte høydepunktlinjen opp eller ned.




- 
- C. Tapp på opp/øk knappen  eller ned/reduser knappen  mens høydepunktlinjen er på "HØYRE SIDE" av skjermen for å endre verdien av artiklene uthevet.
- D. Hold nede Modus/retur/utheve-knapp  for å fortsette å rulle gjennom de tre menyskjermene.

*MERK: Om ingen knapper er nedtrykket i omtrent 10 sekunder, vil skjermen gå tilbake til standby/normal driftsskjerm. Alle endringer utført vil IKKE bli lagret.*

2. For å lagre endringer foretatt på LCD justerings-skjermen:
- A. Trykk og hold nede Modus/retur/utheve-knapp  til en annen skjerm vises.

## **Justerings-skjerm for modus og strømning**

Justerings-skjermen for modus og strømning lar brukeren endre den aktuelle driftsmodusen og utløpsstrømningen (FIGUR 1.3).

*MERK: For å justere enten modus eller strømning må Modus- og strømningjustering-skjermen vises. Hvis batterinivåskjermen vises, trykk på Modus/Retur/utheve- , Opp/øke- eller  Ned/minske-knappen  i ca. to (2) sekunder (skjermen skal da endre seg til Modus- og strømningjustering).*


*MERK: Endringer av innstillingen virker ikke før etter at skjermen blinker tre ganger.*



**FIGUR 1.3** Justeringsskjerm for modus og strømning



## Endre modus

*MERK: For denne prosedyren, rådfør deg med FIGUR 1.3.*

1. Med Modus- og strømningsskjermen vist, trykk og hold Modus/Retur/utheve-knapp  i ett sekund.
2. Vent til Modus- og strømningsskjermen blinker tre ganger.

## Justering av flow

*MERK: For denne prosedyren, rådfør deg med FIGUR 1.3.*

1. Med Modus- og strømningsskjermen vist, trykk og hold Opp/øke-knappen  eller Ned/minske-knappen  inntil du oppnår ønsket innstilling.
2. Vent til Modus- og strømningsskjermen blinker tre ganger.



# NAVIGERA SOLO<sub>2</sub>™ LCD-SKÄRM

## SNABB REFERENS GUIDE


*OBS: Den här guiden ska användas som en lätt, allmän referens. Hänvisa alltid till användarhandboken för utförlig bruksanvisning.*

### Slå På/Stänga av Koncentratorn

*OBS: För att göra detta, se FIGUR 1.1.*

1. Slå på SOLO<sub>2</sub> koncentratorn, tryck och håll in På/Av-knappen  tills de tre varningslamporna visas och apparaten avger en ljudsignal.
2. Stäng av SOLO<sub>2</sub> koncentratorn, tryck och håll in På/Av-knappen .


*OBS: GRÖN lampa blinkar och du hör att maskinen slutar arbeta.*

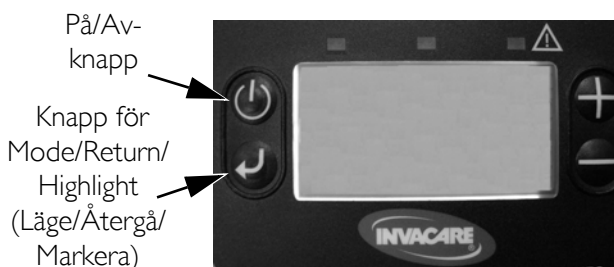

**FIGUR 1.1** Slå På/Stänga av Koncentratorn

### Navigera i menyskrmar

*OBS: För att göra detta, se FIGUR 1.1.*

1. När apparaten har slagits på, tryck och håll in Knapp för Mode/Return/Highlight (Läge/Återgå/Markera)  för att bläddra genom de tre menyskrmar på SOLO<sub>2</sub> koncentratorn.

*OBS: Skärmarna fortsätter att bläddra tills Knapp för Mode/Return/Highlight (Läge/Återgå/Markera) släpps.*

---

## Normal drift/Standby-skärm

Normal drift/Standby-skärmen visar vid behov antingen ikoner för mätaren med batteristyrka, fläktdrift, när extern ström är på och batteriladdning eller nuvarande/ senaste driftsläge och den valda nivån på utgångsflödet.

## LCD-justeringskärm




I LCD-justeringskärm kan användaren ändra skärmens ljusstyrka och kontrast (FIGUR 1.2).






**FIGUR 1.2** LCD-justeringskärm


## Navigera i LCD-justeringskärm

*OBS: För att göra detta, se FIGUR 1.2.*

- Utför ett av följande när LCD-justeringskärm visas:
  - Peka på Knapp för Mode/Return/Highlight (Läge/Återgå/Markera)  för att flytta det svarta markeringsfältet från vänster till höger, eller från höger till vänster.
  - Peka på Upp/Öka-knappen  eller Ned/Minska-knappen  medan det svarta markeringsfältet är på "VÄNSTER SIDA" av skärmen, för att flytta markeringsfältet upp eller ned.

- 
- C. Peka på Upp/Öka-knappen  eller Ned/Minska-knappen  medan markeringsfältet är på "HÖGER SIDA" av skärmen, för att ändra värdet på den markerade posten.
- D. Håll Knapp för Mode/Return/Highlight (Läge/Återgå/Markera) intryckt  för att fortsätta bläddra genom de tre menyskärmarna.

*OBS: Om inga knappar trycks in under cirka 10 sekunder kommer skärmen att återgå till Standby/Normal drift-skärmen. Eventuella ändringar kommer INTE att sparas.*


2. För att spara ändringar gjorda i LCD-justeringskärmen:
- A. Tryck och håll in Knapp för Mode/Return/Highlight (Läge/Återgå/Markera)  tills en annan skärm visas.

## Läge & Flödesjusteringskärm


I Läge & Flödesjusteringskärmen kan användaren ändra det nuvarande driftläget och utgångsflödet (FIGUR 1.3).

*OBS: För att aktivera antingen läget eller flödet måste skärmen Mode & Flow Adjust (Justera Läge & Flöde) visas. Tryck på*

*knappen Return/Highlight , Up/Increase  eller Down/*

*Decrease  (Återgå/Markera, Upp/Öka eller Ned/Minska) i ungefär två sekunder om skärmen för batterinivå visas (skärmen ska ändras till Mode & Flow Adjust (Justera Läge & Flöde).*


*OBS: Inställningarna ändras inte förrän skärmen har blinkat tre gånger.*

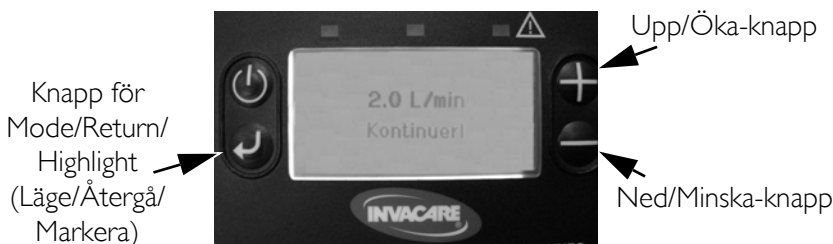

**FIGUR 1.3** Läge & Flödesjusteringskärm



## Ändra läge

*OBS: För att göra detta, se FIGUR 1.3.*

1. Tryck och håll ned Knapp för Mode/Return/Highlight (Läge/Återgå/Markera)  i en sekund när skärmen Mode & Flow (Läge/Flöde) visas.
2. Vänta tills skärmen Mode & Flow (Läge & Flöde) blinkar tre gånger.

## Justera flöde

*OBS: För att göra detta, se FIGUR 1.3.*

1. Tryck och håll ned knappen Up/Increase (Upp/Öka)  eller knappen Down/Decrease (Ned/Minska)  tills önskad inställning uppnås när skärmen Mode & Flow (Läge & Flöde) visas.
2. Vänta tills skärmen Mode & Flow (Läge & Flöde) blinkar tre gånger.




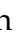
# NAVIGERING PÅ SOLO<sub>2</sub><sup>™</sup> LCD-SKÆRMEN

## HURTIG REFERENCEGUIDE


*BEMÆRK: Denne guide er udelukkende beregnet som en kort, overordnet reference. Du skal altid konsultere brugervejledningen for de komplette driftsinstruktioner.*

### Tænding/slukning af koncentratoren

*BEMÆRK: Vedrørende denne procedure, se FIGUR 1.1.*

1. For at tænde SOLO<sub>2</sub>-koncentratoren, skal du trykke på on/off-knappen  og holde den inde, indtil der vises tre advarselslys og enheden bipper.
2. For at slukke SOLO<sub>2</sub>-koncentratoren, skal du trykke på on/off-knappen  og holde den inde.


*BEMÆRK: Det GRØNNE lys vil blinke og du kan høre, at maskinen stopper med at køre.*

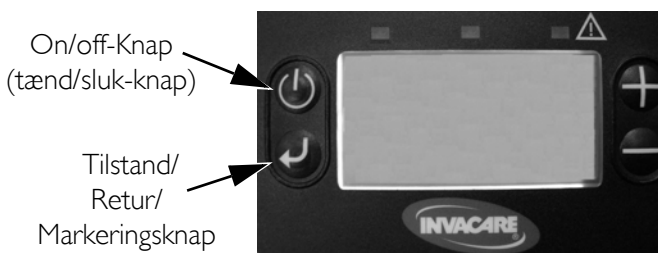

**FIGUR 1.1** Tænding/slukning af koncentratoren

### Navigation i menuskærmene

*BEMÆRK: Vedrørende denne procedure, se FIGUR 1.1.*

1. Når enheden er tændt, skal du trykke på knappen Tilstand/Retur/Markeringsknap  for at skifte imellem SOLO<sub>2</sub>-koncentratorens tre menuskærme.

*BEMÆRK: Der fortsættes med at skifte imellem skærmene, indtil Tilstand/Retur/Markeringsknap slippes.*

---

## Skærmen Operating/standby (Drift/standby)

Skærmen for normal drift/standby viser enten ikoner for måling af batteristyrken, blæserdrift, aktiveret ekstern strømforsyning og batteriopladning, når det er relevant, eller den aktuelle/sidste driftstilstand og det valgte niveau for output-flow.

## Skærmen LCD Adjust (LCD-justering)




(FIGUR 1.2) På skærmen LCD Adjust kan brugeren ændre skærmens lysstyrke og kontrast.






**FIGUR 1.2** Skærmen LCD Adjust (LCD-justering)

## Navigation på skærmen LCD Adjust


*BEMÆRK: Vedrørende denne procedure, se FIGUR 1.2.*

1. Udfør et af følgende, mens skærmen LCD Adjust vises:
  - A. Tryk på knappen Tilstand/Retur/Markeringsknap  for at flytte den sorte markeringsbjælke fra venstre mod højre eller omvendt.
  - B. Tryk på knappen Up/increase  eller Down/decrease  mens den sorte markeringsbjælke er i "VENSTRE SIDE" af skærmen for at flytte markeringsbjælken op eller ned.

- 
- C. Tryk på knappen Up/increase  eller Down/decrease  mens markeringsbjælken er i "HØJRE SIDE" af skærmen for at ændre værdien for det markerede element.
- D. Hold knappen Tilstand/Retur/Markeringsknap inde  for at fortsætte med at skifte imellem de tre menuskærme.




*BEMÆRK: Hvis der ikke trykkes på nogen knapper i cirka 10 sekunder, skifter skærmvisningen tilbage til skærmen Standby/Normal drift. Eventuelle ændringer bliver IKKE gemt.*

2. For at gemme ændringer, der er udført på skærmen LCD Adjust:

- A. Tryk og hold Tilstand/Retur/Markeringsknap inde,  indtil der vises en ny skærm.

## **Skærmen Mode & Flow Adjust (Tilstand- og flowjustering)**

(FIGUR 1.3) Skærmen Mode & Flow Adjust sætter brugeren i stand til at ændre den aktuelle driftstilstand og udløbsflow.

*BEMÆRK: For at justere enten tilstand eller flow skal skærmen Indstil tilstand og flow åbnes. Hvis batteriniveauskærmen vises, skal du trykke på knappen Tilstand/Retur/Markér , Op/Forøg  eller Ned/Reducér  i cirka to sekunder (skærmen skal skifte til Indstil tilstand og flow.*


*BEMÆRK: Eventuelle ændringer træder ikke i kraft, før skærmen har blinket tre gange.*



**FIGUR 1.3** Skærmen Mode & Flow Adjust (Tilstand- og flowjustering)



## Ændring af tilstand

*BEMÆRK: Vedrørende denne procedure, se FIGUR 1.3.*

1. Når skærmen Tilstand og flow vises, skal du trykke på knappen Tilstand/Retur/Markér  i ét sekund.
2. Vent, indtil skærmen Tilstand og flow blinker tre gange.

## Justering af flow

*BEMÆRK: Vedrørende denne procedure, se FIGUR 1.3.*

1. Når skærmen Tilstand og flow vises, skal du holde knappen Op/Forøg  eller knappen Ned/Reducér  inde, indtil den ønskede indstilling er opnået.
2. Vent, indtil skærmen Tilstand og flow blinker tre gange.

# COMO NAVEGAR NO ECRÃ SOLO<sub>2</sub><sup>™</sup> LCD



## GUIA DE REFERÊNCIA RÁPIDA

---


*NOTA: Este guia deve ser utilizado apenas como uma referência rápida, de carácter geral. Para obter instruções de funcionamento completas, consulte sempre o Manual do Operador.*

### Como Ligar/Desligar o Concentrador

*NOTA: Relativamente a este procedimento, consultar FIGURA 1.1.*

1. Para ligar o concentrador SOLO<sub>2</sub>, prima e mantenha premido o botão On/Off  até que o visor com as três luzes de aviso e a unidade façam bip.
2. Para desligar o concentrador SOLO<sub>2</sub>, prima e mantenha premido o botão On/Off .


*NOTA: A luz VERDE pisca e ouvir-se-á a máquina parar de funcionar.*

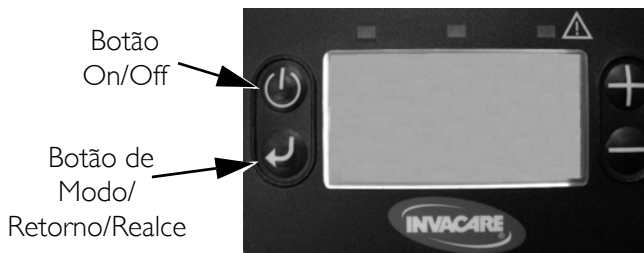

**FIGURA 1.1** Como Ligar/Desligar o Concentrador

### Navegação nos Ecrãs de Menu

*NOTA: Relativamente a este procedimento, consultar FIGURA 1.1.*

1. Depois de ligar a unidade, prima e mantenha premido o Botão de Modo/Retorno/Realce  para rolar através dos três menus do concentrador SOLO<sub>2</sub>.

*NOTA: Os ecrãs continuarão a rolar até que o Botão de Modo/Retorno/Realce seja libertado.*

---

## Ecrã de Funcionamento Normal/Pausa

O Ecrã de Funcionamento Normal/Pausa mostra a potência do calibrador da bateria, ventoinha em funcionamento, energia externa ligada e os ícones da bateria a carregar, quando aplicável, ou então o modo de funcionamento actual ou o último e o nível de saída de fluxo seleccionado.

## Ecrã de Ajuste LCD




O ecrã de Ajuste LCD permite que o utilizador modifique o brilho e o contraste do ecrã (FIGURA 1.2).





**FIGURA 1.2** Ecrã de Ajuste LCD

## Navegação no Ecrã de Ajuste LCD

*NOTA: Relativamente a este procedimento, consultar FIGURA 1.2.*

1. Realize uma das seguintes tarefas, enquanto o Ecrã de Ajuste LCD é exibido:
  - A. Bata no Botão de Modo/Retorno/Realce  para mover a barra de realce preta da esquerda para direita, ou da direita para a esquerda.
  - B. Bata no Botão Para Cima/Aumentar  ou no Botão para Baixo/Diminuir  enquanto a barra de realce preta estiver no “LADO ESQUERDO” do ecrã para mover a barra de realce para cima e para baixo.

C. Bata no Botão Para Cima/Aumentar  ou no Botão para Baixo/Diminuir  enquanto a barra de realce preta estiver no “LADO DIREITO” do ecrã para mudar o valor do item realçado.

D. Continue a premir o Botão de Modo/Retorno/

Realce  para continua rolar pelos três ecrãs de menu.

*NOTA: Se não se premir qualquer botão durante cerca de 10 segundos, o ecrã regressa ao Ecrã de Funcionamento Normal/Pausa. Quaisquer mudanças feitas NÃO serão guardadas.*




2. Para guardar as mudanças feitas no ecrã de Ajuste LCD:

A. Prima e mantenha premido o Botão Botão de Modo/

Retorno/Realce  até que apareça um ecrã diferente.

## Ecrã Ajuste de Modo e Fluxo

O ecrã de Ajuste de Modo e Fluxo permite que o utilizador modifique o modo actual de funcionamento e o fluxo de saída (FIGURA 1.3).

*NOTA: Para ajustar tanto o modo quanto o fluxo, o ecrã Ajuste de Modo e de Fluxo tem que ser exibido. Se o ecrã do nível da bateria for exibido, prima o botão Retorno/Realce , Para cima/Aumentar  ou Para baixo/Diminuir  durante cerca de dois segundos (o ecrã deve mudar para Ajuste de Modo e Fluxo).*

*NOTA: Quaisquer mudanças na configuração não se tornam efectivas até o ecrã piscar três vezes.*




**FIGURA 1.3** Ecrã Ajuste de Modo e Fluxo

---



## Como Mudar o Modo

*NOTA: Relativamente a este procedimento, consultar FIGURA 1.3.*

1. Com o ecrã Modo e Fluxo exibido, prima e mantenha premido o botão de Modo/Retorno/Realce  durante um segundo.
2. Espere até o ecrã Modo e Fluxo piscar três vezes.

## Como Ajustar o Fluxo

*NOTA: Relativamente a este procedimento, consultar FIGURA 1.3.*



1. Com o ecrã Modo e Fluxo exibido, prima e mantenha premido o botão Para cima/Aumentar  ou Para baixo/Diminuir  até se atingir a configuração desejada.
2. Espere até o ecrã Modo e Fluxo piscar três vezes.




**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Αυτός ο οδηγός προορίζεται να χρησιμοποιηθεί μόνο ως συνοπτική, γενική αναφορά. Για πλήρεις οδηγίες λειτουργίας, αναφερθείτε πάντα στο Εγχειρίδιο του Χειριστή.

## Άνοιγμα/Κλείσιμο Συμπυκνωτή

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Για τη διαδικασία αυτή, ανατρέξτε στην **ΕΙΚΟΝΑ 1.1**.

1. Για να ανοίξετε το SOLO<sub>2</sub> συμπυκνωτή, πιέστε και κρατήστε το On/Off κουμπί  έως ότου επιδεικνύονται τρία φώτα προειδοποίησης και η μονάδα ηχεί.
2. Για να κλείσετε το SOLO<sub>2</sub> συμπυκνωτή, πιέστε και κρατήστε το On/Off κουμπί .


**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** ΠΡΑΣΙΝΟ φως θα λάμψει και θα ακούσετε την μηχανή να σταματά την λειτουργία.

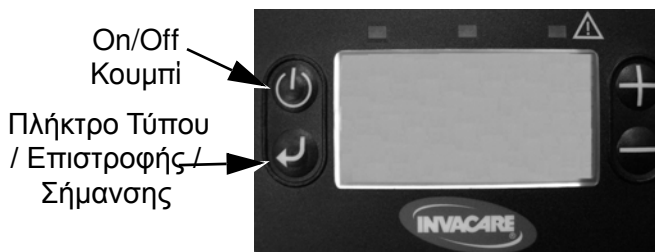

**ΕΙΚΟΝΑ 1.1** Άνοιγμα/Κλείσιμο Συμπυκνωτή

## Περιήγηση Οθονών Επιλογών

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Για τη διαδικασία αυτή, ανατρέξτε στην **ΕΙΚΟΝΑ 1.1**.

1. Μετά από το άνοιγμα της μονάδας, πιέστε και κρατήστε το Πλήκτρο Τύπου / Επιστροφής / Σήμανσης  για να περιηγηθείτε μέσω των τριών SOLO<sub>2</sub> οθονών επιλογών συμπυκνωτή.


**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Οι οθόνες θα συνεχίσουν να εκτυλίγονται έως ότου απελευθερώνεται το Πλήκτρο Τύπου / Επιστροφής / Σήμανσης.

## Κανονικής Λειτουργίας/Εφεδρική Οθόνη

Η Κανονικής Λειτουργίας/Εφεδρική οθόνη παρουσιάζει είτε το μετρητή ισχύος μπαταριών, λειτουργία ανεμιστήρα, εξωτερικής ισχύος ανοικτής και εικόνες φόρτισης μπαταριών, όπου μπορεί να εφαρμοστεί, είτε τρέχοντα/τελευταίο τύπο λειτουργίας και επίπεδο παραγωγής ροής που επιλέγεται.

## LCD Οθόνη Ρύθμισης

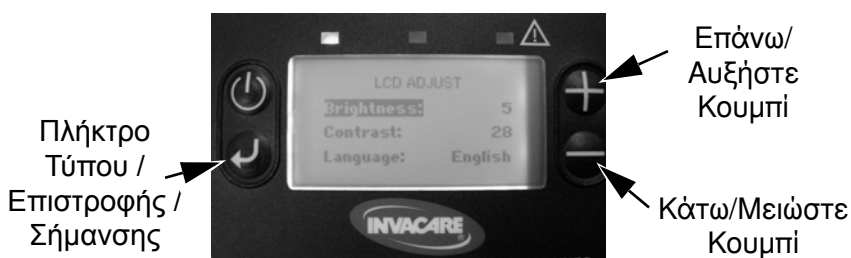


Η οθόνη Ρύθμισης LCD επιτρέπει στο χρήστη να αλλάξει τη φωτεινότητα και την αντίθεση της οθόνης (ΕΙΚΟΝΑ 1.2).



ΕΙΚΟΝΑ 1.2 LCD Οθόνη Ρύθμισης


## LCD Ρύθμισης Οθόνη Περιήγησης

*ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για τη διαδικασία αυτή, ανατρέξτε στην ΕΙΚΟΝΑ 1.2.*


1. Εκτελέστε ένα από τα ακόλουθα, ενώ η οθόνη Ρύθμισης LCD επιδεικνύεται:
  - A. Κτυπήστε το Πλήκτρο Τύπου / Επιστροφής / Σήμανσης  για να κινήσετε την μαύρη ράβδο επισήμανσης από τα αριστερά προς τα δεξιά, ή δεξιά προς τα αριστερά.
  - B. Κτυπήστε το Κουμπί Επάνω/Αυξήστε  ή το Κάτω/Μειώστε Κουμπί  ενώ η μαύρη ράβδος επισήμανσης είναι στην “ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΠΛΕΥΡΑ” της οθόνης για να κινήσετε την ράβδο επισήμανσης πάνω ή κάτω.

---

C. Κτυπήστε το Κουμπί Επάνω/Αυξήστε  ή Κάτω/


Μειώστε Κουμπί  ενώ η ράβδος επισήμανσης είναι στη “ΔΕΞΙΑ ΠΛΕΥΡΑ” της οθόνης για να αλλάξετε την τιμή του στοιχείου που επισημαίνεται.

D. Συγκρατήστε το ΚΠλήκτρο Τύπου / Επιστροφής /

Σήμανσης  για να συνεχίστε περιήγηση μέσω των τριών οθονών επιλογών.

*ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν κανένα κουμπί δεν πιέζεται για περίπου 10 δευτερόλεπτα, η οθόνη θα αλλάξει πίσω στην Εφεδρική/Κανονικής Λειτουργίας οθόνη. Οποιοσδήποτε αλλαγές που πραγματοποιήθηκαν δεν θα αποθηκευθούν.*


2. Για να αποθηκεύσετε τις αλλαγές που πραγματοποιήθηκαν στην οθόνη Ρύθμισης LCD:



A. Πιέστε και κρατήστε το Πλήκτρο Τύπου / Επιστροφής / Σήμανσης  έως ότου εμφανίζεται μια διαφορετική οθόνη.

## Οθόνη Ρύθμισης Τύπου & Ροής

Η οθόνη Ρύθμισης Τύπου & Ροής επιτρέπει στο χρήστη να αλλάξει τον τρέχοντα τύπο λειτουργίας και παραγωγής ροής (ΕΙΚΟΝΑ 1.3).

*ΟΞΙΔΕΥΣΗ: Για να προσαρμόσετε είτε τον τύπο ή τη ροή, πρέπει να εμφανίζεται η οθόνη Προσαρμογής Τύπου & Ροής. Εάν η οθόνη στάθμης μπαταρίας εμφανίζεται, πατήστε το*

Πλήκτρο Τύπου / Επιστροφής / Σήμανσης , Άνω / Αύξηση

, ή Κάτω / Μείωση  για περίπου δύο δευτερόλεπτα (η οθόνη πρέπει να αλλάξει σε Προσαρμογή Τύπου & Ροής).


*ΟΞΙΔΕΥΣΗ: Τυχόν αλλαγές στη ρύθμιση δεν θα τεθούν σε ισχύ, παρά μόνο αφού η οθόνη αναβοσβήσει τρεις φορές.*



**ΕΙΚΟΝΑ 1.3** Οθόνη Ρύθμισης Τύπου & Ροής



## Τύπος Αλλαγής

*ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για τη διαδικασία αυτή, ανατρέξτε στην ΕΙΚΟΝΑ 1.3.*

1. Με την οθόνη Τύπου & Ροής εμφανιζόμενη, πατήστε και κρατήστε πατημένο το Πλήκτρο Επιστροφή / Σήμανση  για ένα δευτερόλεπτο.
2. Περιμένετε έως ότου η οθόνη Τύπου & Ροής αναβοσβήσει τρεις φορές.

## Ρύθμιση Ροής

*ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για τη διαδικασία αυτή, ανατρέξτε στην ΕΙΚΟΝΑ 1.3.*

1. Με την οθόνη Τύπου & Ροής εμφανιζόμενη, πατήστε και κρατήστε πατημένο το Πλήκτρο Άνω / Αύξηση  ή Κάτω / Μείωση  έως ότου έχει επιτευχθεί η επιθυμητή ρύθμιση.
2. Περιμένετε έως ότου η οθόνη Τύπου & Ροής αναβοσβήσει τρεις φορές.

**Invacare Corporation** [www.invacare.com](http://www.invacare.com)



**Yes, you can.™**

**USA**  
One Invacare Way  
Elyria, Ohio USA  
44036-2125  
800-333-6900  
Technical Services  
800-832-4707

© 2010 Invacare Corporation. All rights reserved. Republication, duplication or modification in whole or in part is prohibited without prior written permission from Invacare. Trademarks are identified by ™ and ®. All trademarks are owned by or licensed to Invacare Corporation or its subsidiaries unless otherwise noted.

Part No 1163224

Rev B - 02/10

