



AQUATEC®

Ocean Ergo

en mångsidig familj av duschstolar



Premiumprodukten när det gäller personlig hygien

Ergonomisk, mångsidig och lätt att manövrera



Yes, you can.®

Ännu större mångsidighet och ergonomiska förbättringar

Designen är baserad på användarnas erfarenheter för att öka självständigheten, säkerheten och flexibiliteten.

Personlig hygien är något som är högst privat och en viktig del av en persons liv och välbefinnande. Aquatec Ocean Ergo-familjens dusch- och toastolar har utformats med användarkomfort, självständighet och värdighet i åtanke. Grunddesignen kommer från den väletablerade Aquatec Ocean-serien, som funnits på marknaden i många år. Ocean Ergo-familjen har en rad nya funktioner som har utformats för att underlätta rutiner för den personliga hygien, för såväl användare som vårdare.

Säkerhet, självständighet och värdighet

Vi har tagit fram en ny konturformad sittyta för att uppmuntra till en mer upprätt, stabil sittställning, vilket främjar användarens

självständighet och den övergripande komforten. Ökad stabilitet på ramens främre del möjliggör kompaktare mått och erbjuder även ökad säkerhet och trygghet när brukaren sitter i stolen. Dessutom gör den optimerade hjulbasen det ännu lättare för en vårdgivare att manövrera stolen i trånga utrymmen, samtidigt som passformen över toaletter blir bättre, för självständiga toalettbesök

Modulär och flexibel design

Ocean Ergo-familjens modulära konstruktion innebär att stolarna kan anpassas för att passa många olika användarbehov med endast några enkla justeringar, eller genom några av våra lättmonterade tillbehör.

Modeller som är justerbara i tilt och sitsvinkel

Ocean Ergo VIP och Ocean Ergo Dual VIP


Båda har en sitstilt på -5° till 40° med en smart mekanism för förflyttning av tyngdpunkten som ger optimal stabilitet med kompakta mått. Ocean Dual VIP ger även möjlighet att anpassa ryggstödet vinkel mellan 5° och 35°.



NYA funktioner

Förbättrade armstöd

- > Nydesignade armstöd ger ökat stöd och komfort för användaren. De nya och valfria armstödsdynorna erbjuder individer en mjukare yta att placera armen på. Med ett integrerat säkerhetslåssystem som tillval.

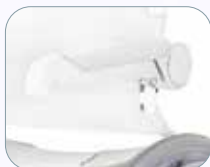

Reducerad sitthöjd

- > Möjlighet att justera till extra låg - sitthöjd har införts för att främja säkra och oberoende överföringar. Ramen kan sänkas ytterligare för människor med en mindre kroppsbyggnad, tillgänglig på Ocean Ergo, Ocean 24" Ergo och Ocean Ergo XL.



Tilt stop-funktion

- > Enkel att applicera, tillval, förhindrar att ramen tippas anteriort förbi 0°. Detta säkerställer att ramen förblir horisontell mot mark och är ett hjälpmedel för den som hissas in/ur stolen. Det går även att förhindra full 35 graders tiltning bakåt med tilt-stop.



Ergonomiskt huvud-/nackstöd

- > Multijusterbar ergonomisk nackstödshållare erbjuder överlägset posturalt stöd för huvud/nackregion. Justeringar görs snabbt och enkelt genom att helt enkelt rotera de integrerade handskruvarna till att uppnå rätt position för individen. Idealisk för individanpassning och justeras utan att verktyg krävs. Nu med 3 leder.





Inovativa ergonomisk sitsar

- > Design som uppmuntrar till en mer upprätt sittställning för förbättrad självständighet och komfort.
- > Designad utifrån avtrycken människor lämna kvar där de suttit.
- > En 5° sitslutning lyfter knäna till en naturlig knäböj för toalettbesök.
- > Överföringsstöd framtill för att tillåta användaren att placera sig i en bekväm position.



Lätt att anpassa

- > Finns med ett brett sortiment för positionering, toalettbesök och olika sitsar. Tillbehör som kan användas till att stödja ett brett spektrum av individer och posturala behov.



Extremt stabil

- > Förbättrad stabilitet, ram i rostfritt stål för extra säkerhet och trygghet.



Lätt att hantera

- > En liten, optimerad hjulbas gör den lätt att manövrera i små utrymmen.
- > Enkel demontering för transport och förvaring.

Anpassa var och en av våra Ocean Ergo-stolar

Vårt utbud av duschstolar i Ocean Ergo-familjen kan alla skräddarsys för att passa ett stort antal behov. Genom att göra en enkel justering eller genom att lägga till ett av våra lättmonterade tillbehör, blir våra modulära duschstolar mer mångsidiga än någonsin tidigare. Aquatec Ocean Ergo och Aquatec ocean Vip Ergo kan helt sänkas ner i bassäng för rehab, lämna aldrig en brukare utan uppsikt.



Ocean Ergo

Standardmodellen för dusch och toalett. Max vikt 150 kg.



Ocean Ergo XL

En XL-modell för brukare med max vikt 180 kg.



Ocean 24" Ergo

Självmanövrerad med 24" drivhjul. Max brukarvikt 150 kg.



Ocean 24" Ergo XL

Självmanövrerad XL-modell med 24" drivhjul. Max brukarvikt 180 kg.



Ocean VIP Ergo

För personer med extra behov av positionering. Max brukarvikt 150 kg.



Ocean Dual VIP Ergo

För personer med komplexa sitt- och positioneringsbehov. Max brukarvikt 150 kg.

Tekniska data

För mer detaljerad information gällande denna produkt, inkluderat produktens bruksanvisning, var vänlig besök vår hemsida www.invacare.se.



Sittbredd ▾



Sittdjup ▾



Totalbredd ▾



Totaldjup ▾

Bredd mellan
armstöd ▾

	Sittbredd ▾	Sittdjup ▾	Totalbredd ▾	Totaldjup ▾	Bredd mellan armstöd ▾
Ocean Ergo	480 mm	480 mm	565 mm	905 mm	475 mm
Ocean Ergo XL	480 mm	480 mm	645 mm	905 mm	555 mm
Ocean 24" Ergo	480 mm	480 mm	670 mm	1050 mm	475 mm
Ocean 24" Ergo XL	480 mm	480 mm	670 mm	1050 mm	555 mm
Ocean VIP Ergo	480 mm	480 mm	565 mm	1000 mm	475 mm
Ocean Dual VIP Ergo	480 mm	480 mm	565 mm	1000 mm	475 mm



Sitstilt ▾



Ryggvinkel ▾



Vikt ▾

Max
brukarvikt ▾

	Sitstilt ▾	Ryggvinkel ▾	Vikt ▾	Max brukarvikt ▾
Ocean Ergo	-	-	17 kg	150 kg
Ocean Ergo XL	-	-	18 kg	180 kg
Ocean 24" Ergo	-	-	23 kg	150 kg
Ocean 24" Ergo XL	-	-	24 kg	180 kg
Ocean VIP Ergo	-5° - 40°	-	23.5 kg	150 kg
Ocean Dual VIP Ergo	-5° - 40°	5° - 35°	28.3 kg	150 kg



Ramfärg

Vit

Kundservice: 08-761 70 90
sweden@invacare.com
www.invacare.se

Invacare AB
Box 66 - 163 91 Spånga
Sweden



Yes, you can.®