

InvaSoft® Hybrid

tecnologia ibrida avanzata



Superficie di appoggio ibrida non alimentata

Gestione della pressione, delle forze di taglio e del microclima



Yes, you can.®

Rivoluzionaria superficie di appoggio ibrida non alimentata

Il nostro nuovo InvaSoft® Hybrid, offre una tecnologia avanzata per gestire i fattori critici associati alle lesioni da pressione.

InvaSoft® Hybrid utilizza un'innovativa combinazione di materiali e tecnologie che migliorano la ridistribuzione della pressione, riducono le forze di taglio e di attrito e garantiscono una gestione del microclima altamente efficace.

Frutto della collaborazione di un team di esperti sulla vitalità tissutale, Invasoft Hybrid è una

soluzione efficace per rispondere alle numerose sfide che si incontrano in ambito sanitario.

Risultati di un test indipendente confermano che il nostro materasso InvaSoft® Hybrid è in grado di gestire i principali fattori esterni che contribuiscono allo sviluppo delle ferite da pressione.



Fodera superiore




> **Tessuto medicale altamente traspirante** e duraturo



> **Fodera multi elastica** che riduce le forze di taglio e di frizione.




1

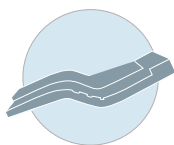

Ridistribuzione della pressione

La nostra tecnologia innovativa di autoregolazione consente di ridistribuire la pressione in tutte le posizioni del paziente senza la necessità di una pompa.

2

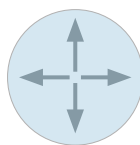

Riduzione della forze di attrito e taglio

InvaSoft® Hybrid è costituito da materiali innovativi che riducono le forze di taglio e attrito.

5°

> La zona tallone inclinata

e la superficie antiscivolo protettiva alleviano il peso in una zona del corpo molto vulnerabile.



> Superficie superiore morbida

che avvolge il paziente per dargli il massimo comfort e un grande sostegno.



> Celle d'aria orizzontali

per una redistribuzione delle pressione reattiva individualizzata.



> **Riduzione di calore** e umidità grazie alle aperture laterali specificamente progettate.

3



Gestione del microclima

Grazie alla tecnologia non powered airflow (N.P.A.T.), il materasso InvaSoft Hybrid fornisce una continua gestione del microclima.




> **Incredibile circolazione dell'aria**

grazie alla particolare composizione interna a celle aperte "noodle"



> **Schiuma lavorata a torre**

per garantire un grande comfort e distribuire al meglio la pressione

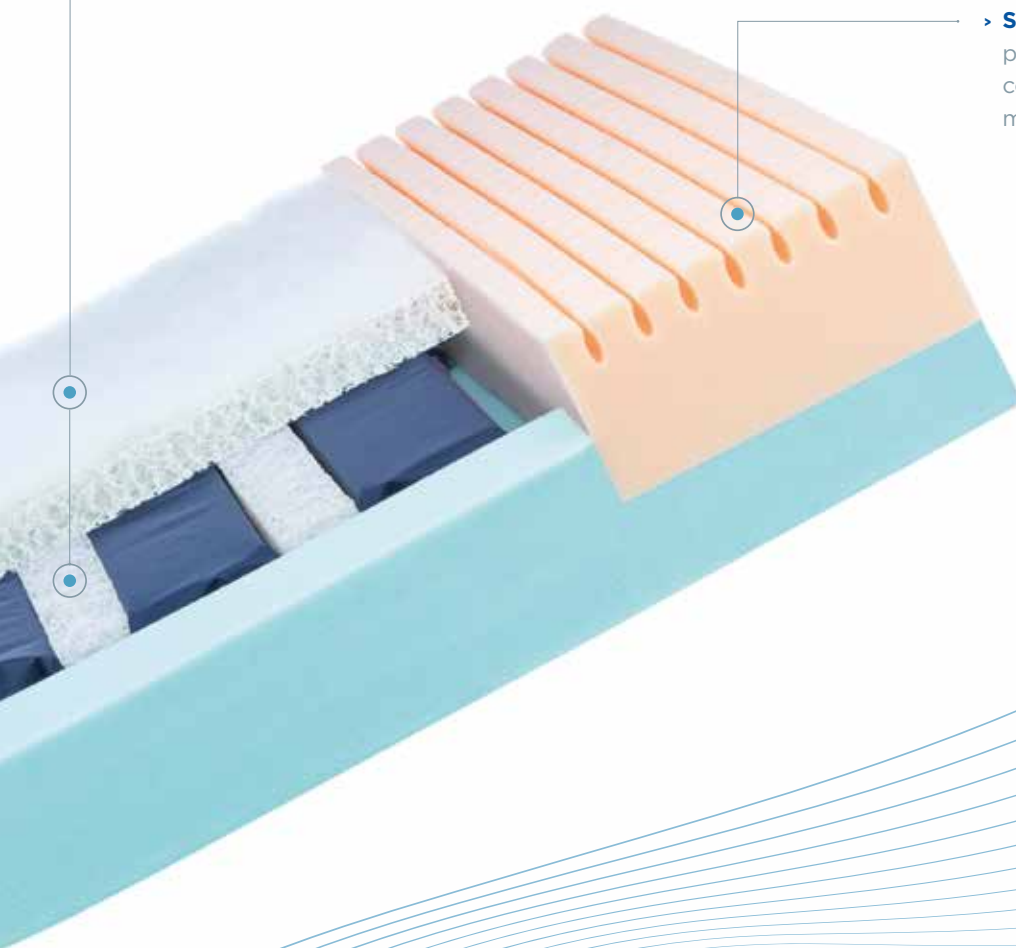

Comfort per il paziente



> **Strati sagomati ultra-morbidi**

e solidali per migliorare il riposo e dare stabilità



> **Portata 230kg**

per offrire un grande sostegno.

Facile Efficace Efficiente

I risparmi in termini di costi e i benefici clinici delle superfici ibride di supporto sono molto noti. Il design modulare e i componenti del modello InvaSoft® Hybrid sono tutti sostituibili, per una maggiore durata, minori costi e un ridotto impatto ambientale.



Facile

Facile da usare, non c'è la necessità di effettuare alcun setup.

Facile da pulire per ottimizzare i tempi tra un paziente e l'altro.

Facile da revisionare, i componenti principali possono essere facilmente sostituiti senza bisogno di strumentazione speciale o di particolari competenze.



Efficace

Ridistribuzione della pressione efficace e testata da un organo indipendente.

Riduzione della frizione e delle forze di taglio testata da un organo indipendente.

Gestione del microclima efficace testata da un organo indipendente.



Efficiente

Non è necessaria alcuna manutenzione preventiva.

Non è necessaria la corrente elettrica, per un minor impatto ambientale.



Costruzione modulare per consentire la sostituzione di singoli componenti.

Efficienza in
termini di costi

Benefici clinici

Soluzione
semplice



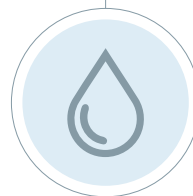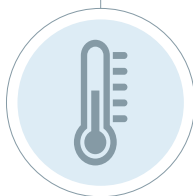


Test indipendenti

InvaSoft® Hybrid è stato sottoposto a rigorosi test presso l'ente Berlin Cert, organismo specializzato nell'eseguire prove indipendenti sui materassi antidecubito. I test effettuati hanno posto a confronto il modello InvaSoft Hybrid con tre modelli simili presenti sul mercato. Le prove eseguite hanno analizzato in particolare, le aree di pressione, l'attrito e la gestione del microclima,


Eccellenza clinica

InvaSoft® Hybrid ha dimostrato ottimi risultati nella gestione della temperatura e dell'umidità con prestazioni superiori rispetto a prodotti simili della concorrenza.

TEMPERATURA MASSIMA

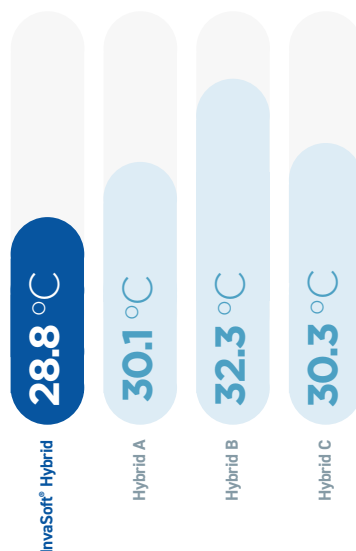

UMIDITA' MASSIMA

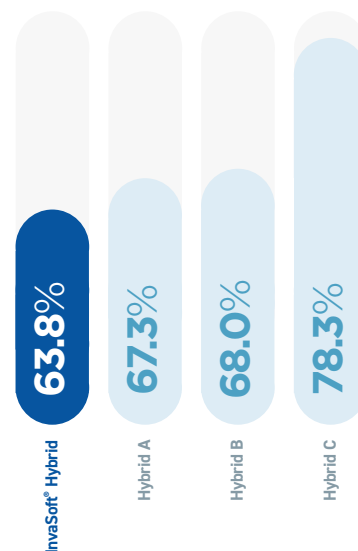

*Test comparativi con tre principali superfici di supporto ibride.


Dati tecnici ▼

Per maggiori informazioni consultare il nostro sito www.invacare.it



Larghezza ▼

830-850-880 mm

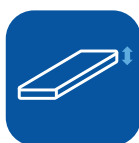

Altezza ▼

170 mm



Lunghezza ▼

1970-2000-2100 mm



Peso ▼

18 kg



Portata utente ▼

230 kg



Temperatura di lavaggio ▼

95 °C

Tel.: +39 0445 380059
www.invacare.it
e-mail: italia@invacare.com

Invacare Mecc san s.r.l.
via Marco Corner, 19
36016 THIENE (VI) - Italy



Yes, you can.®