



AVIVA FX 40

MPS Maxx



A nova solução elétrica de verticalização

Um design revolucionário com a nova base AVIVA FX40



Yes, you can.®

Uma nova perspectiva

Descubra uma nova perspectiva com a AVIVA FX40 MPS Maxx e desfrute do seu entorno. Conviva com amigos, ria e partilhe histórias. Sinta os benefícios da verticalização.

**Conheça. Conviva.
Partilhe histórias.**




Personalizado para si

O sistema MPS Maxx é uma solução de posicionamento clinicamente avançada, concebida para proporcionar um ótimo conforto e suporte, quer esteja sentado ou na posição em pé. A unidade de assento Matrx, vencedora de vários prêmios, pode ser combinada com uma vasta gama das nossas mais recentes opções e acessórios, para garantir uma solução personalizada para si.

Almofada de Assento **matrx-LIBRA**

A premiada almofada de assento Matrx Libra tem um design com contorno anatômico para maximizar a área de superfície e o posicionamento da pélvis. Fabricada com espuma de alta resiliência e bolsa de fluido Flo-tech de dupla camada, para uma melhor prevenção das forças de cisalhamento.

* As especificações do produto podem variar daquelas apresentadas.

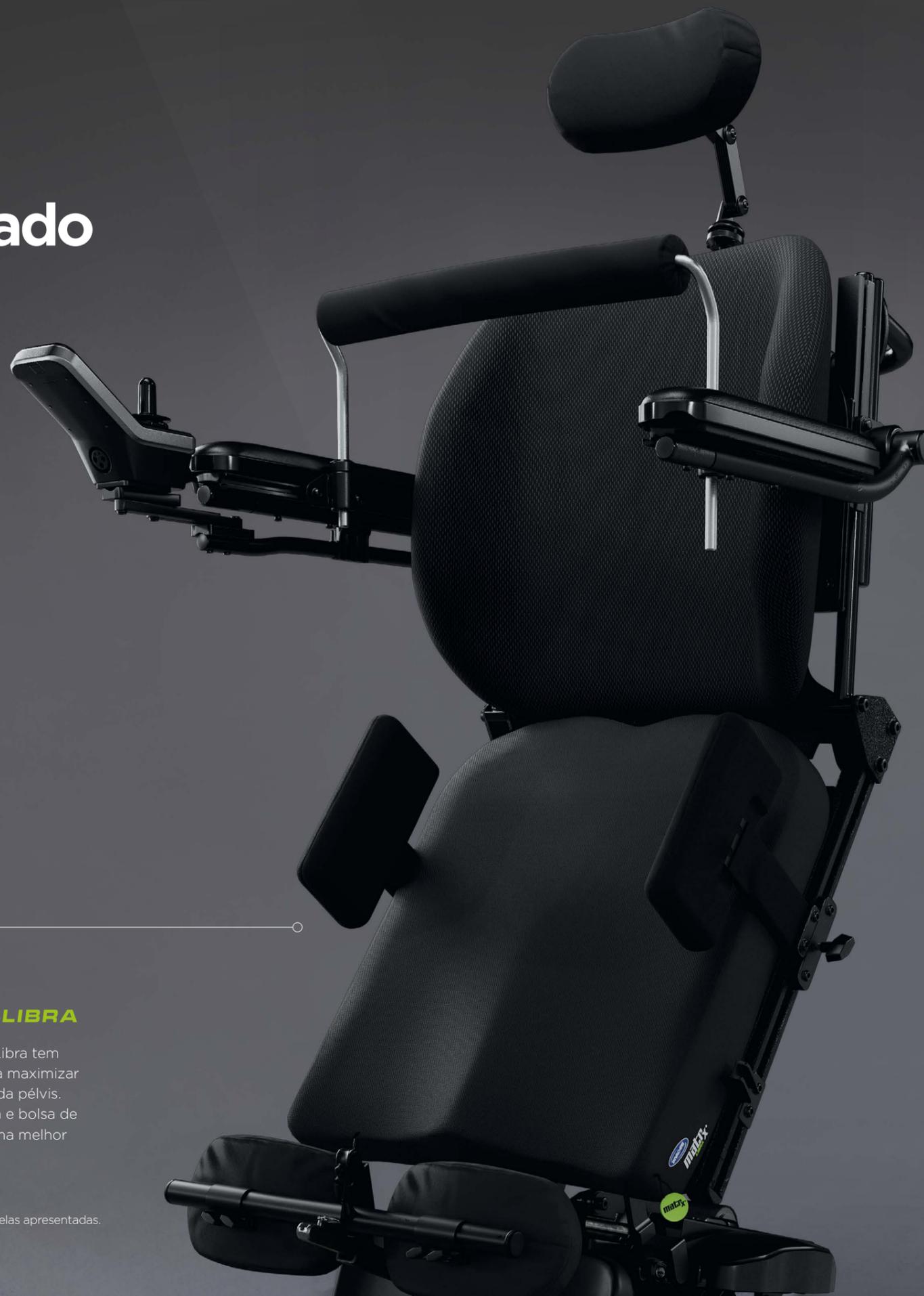

Apoios de cabeça **matrx-ELAN®**

O nosso apoio de cabeça Matrx Elan, altamente ajustável, foi concebido com uma espuma moldada de dupla densidade que proporciona imersão, conforto, proteção e previne o aparecimento de lesões.

Apoios laterais de tronco

Possibilidade de escolha de apoios laterais ajustáveis para um maior suporte postural e conforto.

Opções de encosto

Está disponível uma vasta gama de opções de encosto, incluindo a família Matrx, para o máximo suporte postural, alívio da pressão e excepcional controlo do microclima. Com diferentes níveis de contorno, para uma maior estabilidade.

Bodypoint®

Para uma ótima funcionalidade, mobilidade e estabilidade quando sentado ou na posição em pé, oferecemos uma gama de cintos de peito e de posicionamento. Isto ajuda a garantir que a pélvis e a parte superior do corpo estão seguras proporcionando maior controlo e melhor funcionalidade.

Suportes de Anca

Uma grande variedade de suportes de anca, com diferentes tamanhos da almofada e funcionalidades, para um melhor posicionamento e facilidade nas transferências.

Posicionamento sem esforço

O sistema MPS Maxx é uma solução eléctrica de multi-posicionamento para uma maior independência e acessibilidade. Reposicione-se sem esforço, para redistribuição da pressão, alcance funcional ou para socializar com os amigos. As vantagens da verticalização são infinitas.

45°

Basculação do assento, com ajuste do centro de gravidade para gestão da pressão.

170°

reclinação eléctrica com a Tecnologia de Redução das Forças de Fricção e Cisalhamento (ESR).

178mm

de elevação do assento para facilitar acessos, transferências e aumentar a independência.

178°

ângulo de verticalização.

Rodas anti-volteio ativas

ligadas à base para garantir a estabilidade ao subir ou descer obstáculos.



Excepcional performance de condução

Descubra a nova base de tração da **AVIVA FX40**. Uma nova e entusiasmante adição à nossa popular gama AVIVA. Esta nova base de tração dianteira mantém o verdadeiro ADN AVIVA. Desfrute de uma experiência premium de condução.

Design. Tecnologia. Performance.

AVIVA FX40



>>> LINX G-Trac

Viajar longas distâncias ou a velocidades mais elevadas tornou-se ainda mais fácil com a tecnologia LINX G-Trac, equipada de série. Trata-se de um módulo com giroscópio que assegura que a **AVIVA FX40** segue a indicação do comando, proporcionando segurança e confiança durante a condução.



Sistema de Suspensão 4Sure®

Um novo design de tração dianteira que melhora o controlo e a tração em diferentes terrenos e superfícies irregulares. A suspensão isola o assento das vibrações e dos impactos, para proporcionar um elevado nível de conforto.



Performance de condução

As rodas dianteiras anti-volteio ativas, os amortecedores e as molas da suspensão trabalham em conjunto para maximizar o conforto e a segurança. O eixo do assento mantém-se tão nivelado quanto possível, mesmo ao subir passeios e outros obstáculos.



Ligação de 4 barras

O notável desempenho de condução é ainda melhorado por uma ligação patenteada de 4 barras com pontos de articulação flutuantes, criando uma condução suave, uma tração superior e uma capacidade de ultrapassar obstáculos, mesmo a baixas velocidades.



Eletrónica LiNX®

A tecnologia LiNX® é um sistema inspirado no utilizador, concebido para proporcionar uma excelente experiência de condução. Apresenta programação personalizada para garantir que se sente confiante, seguro e sempre no controlo da cadeira.

As atualizações de manutenção e programação sem fios podem ser realizadas remotamente e em tempo real, por um profissional especializado.

Funções elétricas do assento de fácil acesso

O M290 é um comando das funções elétricas de assento, com ecrã tátil interativo e intuitivo, para utilização do acompanhante. Montado na parte traseira da cadeira, para facilitar o acesso por parte do acompanhante.



Ecrã tátil de 3.5"

O comando REM400 tem um impressionante ecrã tátil, a cores, de 3,5" com joystick, que requer um mínimo de força para ser ativado. O ecrã de grande dimensão inclui também um velocímetro e um conta-quilómetros.



Ligue-se a vários dispositivos com o Bluetooth incorporado

O comando REM400 liga-se a vários dispositivos em simultâneo. Inclui um cursor de rato integrado e o controlo de teclas para colunas, telefones e computadores portáteis.

Comando disponível apenas com ecrã

O REM500 é uma versão opcional sem joystick, do REM400, mantendo o ecrã tátil interativo de 3,5", permitindo a utilização dos comandos especiais na cadeira de rodas elétrica.

Especificações Técnicas

Para mais informação sobre este produto, incluindo o manual de utilizador, consulte por favor o site www.invacare.pt



Largura de assento ▼

405 - 510 mm



Profundidade de assento ▼

405 - 510 mm



Altura de assento ▼

470 or 495 mm



Altura do encosto ▼

305 - 710 mm



Altura do apoio de braço ▼

241 - 330 mm



Comprimento do apoio de pés ▼

203 - 430 mm



Ângulo do assento ▼

0 - 45°



Ângulo do encosto ▼

170° ESR



Altura total ▼

1115 - 1445 mm



Comprimento total incl. apoio de pés ▼

1250 - 1305 mm



Comprimento total sem apoios de pés ▼

1070 mm



Largura total da cadeira ▼

604 mm



Peso máximo do utilizador ▼

113 kg



Capacidade da bateria ▼

60 Ah



Diâmetro de viragem ▼

1360 mm



Altura máxima de um obstáculo ▼

83 mm



Inclinação máxima ▼

9°



Capacidade do motor ▼

2 x 340 W



Velocidade ▼

12 km/h



Autonomia ▼

até 27 km



Peso Total ▼

190 - 210 kg

Cores

Selecione a partir de uma ampla gama de cores de jantes e carenagem

Cores da Carenagem



Preto Obsidiano



Vermelho Rubi



Azul



Rosa Flamingo



Púrpura



Azul Marinho



Verde Lima



Azul Ártico

Cores da Jantes



Preto Obsidiano



Vermelho Rubi



Azul



Rosa Flamingo



Púrpura



Azul Marinho



Verde Lima



Azul Ártico



Amarelo



Laranja



Cinza

Tel.: 225 193 360
marketing.pt@invacare.com
www.invacare.pt

Invacare Portugal
Rua da Estrada Velha, 949
4465-784 Leça do Balio



Yes, you can.®