

P O W E R S E R I E S

TDX[®] SP2 & NB Modulite



Fauteuil électrique à roues motrices centrales très agile
avec assise Modulite personnalisable



| TDX® SP2 & NB Modulite

Confort et performance optimales.


Les **TDX®** SP2 et **TDX®** SP2 NB (Narrow Base) Modulite sont nos fauteuils électriques à roues motrices centrales les plus performants. La qualité et la technologie sont au cœur de nos préoccupations, combinées à notre assise Modulite hautement personnalisable et à notre électronique programmable LiNX, pour offrir un confort et des performances optimales à chaque instant. Le TDX SP2 NB au châssis plus étroit, est conçu pour naviguer dans les espaces les plus exigus avec souplesse.



| TDX® SP2 & NB Modulite

C'est plus qu'une base.

Les **TDX® SP2** et **TDX® SP2 NB** sont conçus pour être performants et vous emmener sans effort là où vous le souhaitez. Facile à contrôler et à manœuvrer pour vous donner plus de liberté et d'autonomie dans n'importe quel environnement.

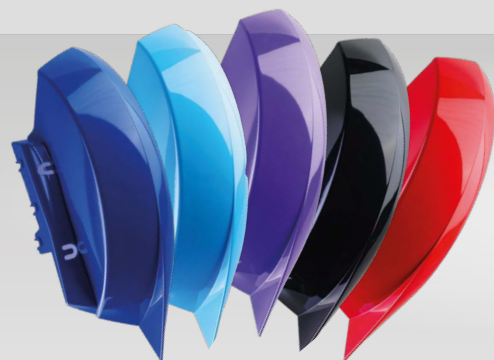

Nouveaux coloris

Choisissez parmi une nouvelle sélection de couleurs des carénages pour un look élégant.



Largeur hors tout **650 mm**
ou **610 mm** (TDX SP2 NB)



Excellente maniabilité

Les roues motrices centrales facilitent la conduite dans les espaces exigus et permettent de mieux contrôler les mouvements du fauteuil.



Suspension SureStep® brevetée

Assure une conduite souple et confortable, même sur des terrains difficiles.



Fonction Stability Lock intégrée

Assure le contact permanent au sol des six roues pour garantir la stabilité et la sécurité.



Rayon de giration de **560 mm**

| TDX® SP2 & NB Modulite

Nouvelles couleurs. Plus grande durabilité.

Ajoutez une touche de fraîcheur et de style avec les nouvelles couleurs de carénage. Ces nouveaux coloris offrent une meilleure résistance et permettent de résister aux défis quotidiens.



Noir Obsidien

Rouge Ruby

Violet Pourpre

Bleu Jacinthe

Bleu Artic

| TDX® SP2 & NB Modulite

Nombreuses options de positionnement.

Notre système d'assise Modulite permet d'obtenir un positionnement personnalisé pour plus de confort et de soutien. Il permet de répondre à tous types de besoins posturaux, des plus élémentaires aux plus complexes, sa conception modulaire offre une infinité de réglage pour un positionnement sur mesure.



Solutions complètes de positionnement

Large gamme d'options d'assise comprenant des dossiers, des coussins d'assise, des accoudoirs, des appuis-tête et bien d'autres encore.

Gamme complète d'inclinaison d'assise

Permet de décharger les pressions et offrir un confort optimal.



Conçu pour la sécurité et le confort

L'inclinaison d'assise électrique de 50°, l'élévation d'assise de 300 mm avec une inclinaison de 45° apportent confort et sécurité.



Repose-jambes central LNX

L'extension mécanique combinée à l'inclinaison électrique offre une compensation optimale et permet de réduire le cisaillement.



Les dossiers et coussins de positionnement Matrix® primés

La personnalisation des dossiers et coussins Matrix garantit un positionnement optimal à chacun.



Elévation d'assise électrique de **300 mm** combinée avec une inclinaison d'assise jusqu'à **45°**

| TDX® SP2 & NB Modulite

Assise Modulite. Polyvalence et modularité.

Notre solution d'assise la plus populaire est conçue pour vous. Grâce à son approche modulaire, notre assise Modulite s'adapte facilement pour s'ajuster parfaitement et offrir un confort et un soutien exceptionnel.

Caractéristiques techniques :

Largeur d'assise : 330-580 mm

Profondeur d'assise : 410-560 mm

Hauteur sol/siège : à partir de 450 mm

Hauteur des accoudoirs : 230-365 mm

Longueur du repose-pieds : 280-460 mm



Assise réglable
pour un
ajustement
parfait



| TDX® SP2 & NB Modulte

Equipé de l'électronique avancée **LiNX**®

L'électronique **LiNX**® permet d'offrir une expérience de conduite personnalisée et sûre. Cette électronique innovante permet d'apprendre des habitudes et des préférences de conduite au fil du temps, ce qui en fait un système très intuitif.



TDX® SP2 & NB Modulite

LINXX®

En savoir plus.



Nouveau support de manipulateur Maxx Resolve

- Une infinité de position pour un confort optimal.
- Réglage de la dureté d'escamotage.
- Confort et contrôle optimisés.



Ecran tactile 3.5"

Grand écran couleur tactile 3,5" avec joystick, compteur de vitesse et kilométrique.



Commandes spéciales

Joysticks compacts, commandes occipitales, contacteurs de proximité à quatre directions.



Bluetooth® intégré

Permet la connexion avec les appareils connectés et les contrôles d'environnement.



Modules d'entrée

Les modules d'entrée permettent une configuration personnalisée pour un contrôle maximal de différentes interfaces pilotées par le fauteuil.










TDX® SP2 & NB Modulite








Données techniques.





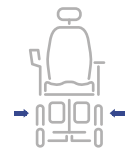

Pour plus d'informations sur ce produit y compris le manuel d'utilisation, veuillez consulter notre site www.invacare.be/fr.

Nouvelles couleurs



							
	Largeur d'assise	Profondeur d'assise	Hauteur sol/siège	Hauteur du dossier	Hauteur des accoudoirs	Repose-pieds	Angle de l'assise
Assise Modulite Modulaire ▶	330 - 530 mm	410 - 560 mm	450 - 475 mm	480, 540, 560 - 610 mm	230 - 365 mm	280 - 460 mm	0° - 50°
Assise Max ▶	490 - 610 mm	560 - 630 mm	470 - 495 mm	570 - 680 mm	250 - 340 mm	290 - 510 mm	0° - 20°

							
	Angle du dossier	Hauteur totale	Longueur totale avec repose-pieds	Longueur totale sans repose-pieds	Largeur hors tout	Poids max. utilisateur	Batterie
Assise Modulite Modulaire ▶	90° - 120°	1010 - 1170 mm	1160 mm	980 mm	650 mm	180 kg	73.5 Ah
Assise Max ▶	90° - 115°	1100 - 1125 mm	1240 mm	970 mm	650 mm	180 kg	73.5 Ah
TDX SP2 NB ▶	90° - 115°	1100 - 1125 mm	1240 mm	970 mm	610 mm	150 kg	50 Ah

						
	Diamètre de giration	Franchissement max.	Pente max. de sécurité	Vitesse	Autonomie	Poids total
Assise Modulite Modulaire ▶	1120 mm	75 mm	9° / 15.8%	Jusqu'à 12 km/h	Jusqu'à 41 km	183 kg
Assise Max ▶	1120 mm	75 mm	9° / 15.8%	Jusqu'à 6 km/h	Jusqu'à 41 km	164 kg
TDX SP2 NB ▶	1120 mm	75 mm	9° / 15.8%	Jusqu'à 10 km/h	Jusqu'à 26 km	164 kg

| TDX® SP2 & NB Modulte

Partagez vos idées et contribuez au développement futur des fauteuils électriques.

Nous vous invitons à nous faire **part de vos expériences**. Vos témoignages nous aideront à mieux servir la communauté des personnes en fauteuil électrique.

Veuillez scanner le QR-code et compléter le formulaire.



Merci de nous laisser participer à votre aventure.

L'équipe Invacare Power Series.





Partagez votre expérience



Mon fauteuil me permet de mener une vie indépendante et de sortir tous les jours.

Ian Mackay
Ambassadeur Invacare

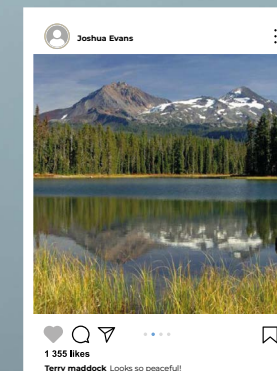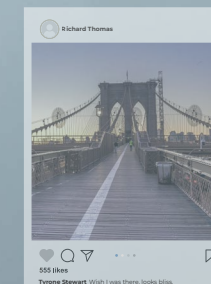

P O W E R S E R I E S

TDX SP2

AVIVA RX

AVIVA FX

Esprit Action

Kompas

Storm 4

Tel: +32 (0)50 83 10 10
marketingbelgium@invacare.com
www.invacare.be/fr

© 2024 Invacare International GmbH. Tous droits réservés.
Indications données à titre d'information (information non contractuelle). Invacare se réserve le droit de modifier sans préavis les données techniques ou de présentations de ce produit. EU - TDX SP2 & TDX SP2 NB Modulite - 11/2024.

