

P O W E R S E R I E S

TDX[®] SP2 NB Modulite



Wendbare en compacte midwielaangedreven elektrische rolstoel
met zeer instelbare en comfortabele Modulite zitting



| TDX® SP2 NB Modulite

Eenvoudig bewegen

De **TDX®** SP2 NB (Narrow Base) is onze compacte en veelzijdige midwielaangedreven elektrische rolstoel.

Navigeert met gemak door krappe ruimtes en brengt je waar je heen wilt, in uiteenlopende omstandigheden.


Ontspan met het vertrouwen dat hoort bij een betrouwbare, hoogwaardige rit.



| TDX® SP2 NB Modulite

Het begint met een compacte basis

De TDX® SP2 NB (Narrow Base) is ontworpen om door de kleinste ruimtes te rijden met consistente en soepele rijprestaties.

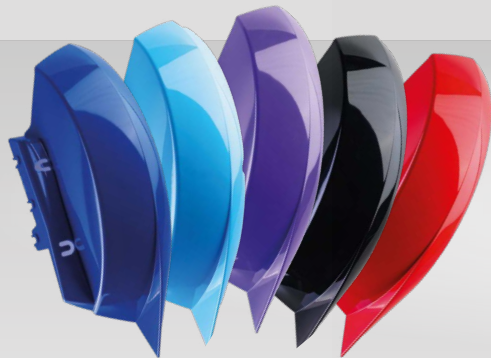

Nieuwe bekapping collectie

Kies uit een selectie van mooie kleuren bekapping voor een stijlvolle look.



Compact **610 mm** breed



Uitstekende manoeuvreerbaarheid

Midwielaangedreven stoel is eenvoudig door krappe ruimtes binnens- en buitenshuis te navigeren.



Gepatenteerde SureStep® vering

Voor een soepele en comfortabele rit, zelfs over uitdagende oppervlakken.



Verbeterde stabiliteit en veiligheid

Ontworpen om ervoor te zorgen dat alle zes de wielen stevig op de grond blijven met de geïntegreerde stability lock functie.



Wendbaar **560 mm** draaicirkel

| TDX® SP2 NB Modulite

Nieuwe kleuren Extra duurzaamheid

Voeg een frisse en stijlvolle touch met een nieuwe bekappingskleur. De extra duurzaamheid van de bekapping helpt dagelijkse uitdagingen aan te gaan.



Obsidian Black

Ruby Red

Purple Passion

Peacock Blue

Arctic Blue

| TDX® SP2 NB Modulite

Uitgebreide positioneringsmogelijkheden

Ons veelzijdige Modulite zitsysteem biedt een gepersonaliseerde positie voor extra comfort en ondersteuning.

Variërend van basic zitbehoeften tot complexere positioneringsbehoeften, het modulaire ontwerp maximaliseert de positioneringsmogelijkheden.



Complete oplossingen

Uitgebreide reeks zitopties zoals ruggen, zitkussens, armsteunen, hoofdsteunen en meer.



Comfortabel & veilig

50° elektrische kanteling, 300 mm zitlift met 45° kanteling voor comfort en veiligheid.



LNX beensteun

Verlengt in zowel lengte als hoogte, werkt met elektrische rugkanteling om wrijving te verminderen.



Bekroonde Matrix®

Gepersonaliseerde Matrix zitopties voor een optimale pasvorm.

Reeks van kantelmogelijkheden

voor drukmanagement en maximaal comfort.



300 mm zitlift gecombineerd met tot **45°** kantelpositionering

| TDX® SP2 NB Modulite

Modulite zitsysteem

Modulaire veelzijdigheid

Onze populairste zitoplossing is ontworpen met jou in gedachten. Met een modulaire opbouw kan onze Modulite zitting eenvoudig op maat worden gemaakt voor een perfecte pasvorm voor exceptioneel comfort en ondersteuning.

Technische gegevens

Zibreedte: 330 - 580 mm

Zitdiepte: 410 - 560 mm

Zithoogte: vanaf 450 mm

Armsteunhoogte: 230 - 390 mm

Voetsteunlengte: 280 - 460mm

Instelbare
zitting
voor een
perfecte
pasvorm.



| TDX® SP2 NB Modulite

Met geavanceerde **LiNX**® technologie

LiNX® technologie helpt een gepersonaliseerde en vertrouwde rijervaring te geven. De innovatieve technologie leert in de loop van de tijd gewoontes en voorkeuren, wat het een superintuïtief systeem maakt.



| TDX® SP2 NB Modulite

LINX®

Ontdek meer



Nieuwe Resolve Joystick montage

- Exceptionele reeks bereikbare joystick-posities voor zeer veel comfort
- Instelbare spanningsreactie
- Optimale controle en comfort



3.5" Touchscreen

Indrukwekkend 3,5" kleuren touchscreen met joystick, snelheidsmeter en kilometerteller.



Speciale bedieningen

Inclusief compacte begeleidersbedieningen, hoofdbesturingen en benaderingsbesturingen.



Ingebouwde Bluetooth®

Maakt verbinding met apparaten en omgevingsbesturingen mogelijk.



Bedieningsinput opties

Verschillende bedieningsinput mogelijkheden zorgen voor een persoonlijke set-up voor maximale controle en vertrouwen dat de rolstoel consistent reageert.




| TDX® SP2 NB Modulite

Technische Gegevens

Kijk voor uitgebreidere informatie over dit product, zoals de gebruikshandleiding, op onze website www.invacare.be.

Kleuren

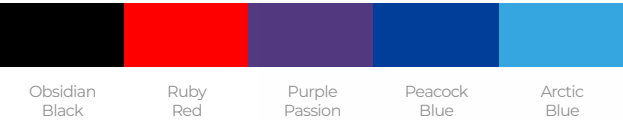

						
Zitbreedte	Zitdiepte	Zithoogte	Rughoogte	Armsteunhoogte	Voetsteunen	Zithoek

Modulite 1-delige zitting						
430 - 480 mm	410 - 510 mm	450 - 475 mm	480/540 mm	275 - 390 mm	290 - 460 mm	0° - 8°
Modulite telescopische zitting						
330 - 530 mm	410 - 560 mm	450 - 475 mm	480/540/560 - 610 mm	230 - 365 mm	280 - 460 mm	0° - 50°

						
Rughoek	Totale hoogte	Totale lengte inc. voetsteunen	Totale lengte exc. voetsteunen	Breedte basis	Max. gebruikersgewicht	Accupaciteit

Modulite 1-delige zitting						
90° - 120°	1010 mm	1160 mm	980 mm	610 mm	150 kg	50 Ah
Modulite telescopische zitting						
90° - 120°	1010 - 1170 mm	1160 mm	980 mm	610 mm	150 kg	50 Ah

					
Draaicirkel	Max. obstakelhoogte	Max. veilige helling	Snelheid	Bereik	Totaal gewicht

Modulite 1-delige zitting					
1120 mm	75 mm	9° / 16%	Tot 10 km/h	Tot 26 km	138 kg
Modulite telescopische zitting					
1120 mm	75 mm	9° / 16%	Tot 10 km/h	Tot 26 km	164 kg

| TDX® SP2 NB Modulite

Deel jouw ideeën en help de toekomst van elektrische rolstoelen vorm te geven

We nodigen je uit jouw feedback te delen.
Jouw inzichten helpen ons de gebruikers van
elektrische rolstoelen beter te ondersteunen.

Scan hiervoor het formulier en vul dit in.



Bedankt dat wij jouw reis mogen meemaken.

Invacare Power Series Team





Deel jouw feedback



Mijn stoel zorgt ervoor
dat ik een onafhankelijk
leven leidt en iedere dag
naar buiten kan.

Ian Mackay
Invacare Ambassador

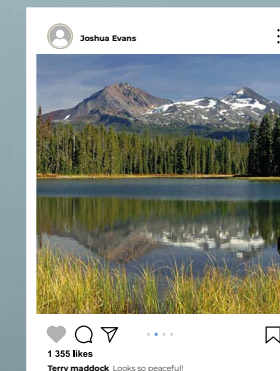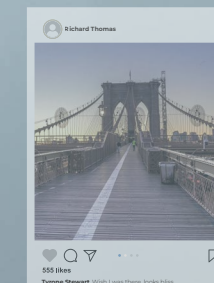

P O W E R S E R I E S

TDX SP2

AVIVA RX

AVIVA FX

Esprit Action

Kompas

Storm 4

Tel: +32 (0)50 83 10 10
marketingbelgium@invacare.com
www.invacare.be

© 2024 Invacare International GmbH. Alle rechten voorbehouden.
Alle informatie is correct tijdens de druk van deze brochure.
Invacare behoudt zich het recht voor om specificaties te wijzigen
zonder voorafkondiging. NL - TDX SP2 NB Modulte - 12/2024

