



smoov®



Pronto a volare

smoov – il propulsore posteriore per la tua carrozzina attiva



www.alber.de



Entrambe le mani libere Per una vita piena

smoov è un innovativo sistema di propulsione elettrica che puoi agganciare e sganciare dalla tua carrozzina ogni volta che hai bisogno di una spinta extra. L'assistenza alla spinta, discreta ma potente, offre una maggiore mobilità, permettendoti di fare ciò che desideri in qualsiasi momento. Con smoov puoi affrontare senza sforzo la tua routine quotidiana, le uscite e i viaggi, risparmiando molta energia.

In questo modo puoi puntare a nuovi traguardi, muoverti con facilità anche durante le lunghe giornate in città e goderti la vita al massimo.

smoov si adatta perfettamente alle uscite all'aria aperta, garantendo un'assistenza costante quando senti diminuire le energie.

smoov è la scelta giusta per te se:

- ✓ Ti piace fare sport, stare all'aria aperta e hai bisogno di un aiuto temporaneo per tragitti più lunghi o per affrontare le salite.
- ✓ Ami viaggiare e desideri un dispositivo di assistenza compatto, facile da portare con te.
- ✓ Mantieni una buona capacità di controllo e forza nelle braccia e nella parte alta del corpo.
- ✓ Vuoi continuare a utilizzare la tua carrozzina manuale e ti serve assistenza solo in alcune situazioni.
- ✓ Dai valore a un design moderno, a un'elevata autonomia e a prestazioni eccellenti quando si tratta di ausili.
- ✓ Cerchi un sistema di propulsione posteriore discreto, che non alteri l'aspetto della tua carrozzina e sia poco visibile.
- ✓ Desideri una vita libera e indipendente.



Sempre in movimento



POWERASSIST

Muoversi in modo smoov

Puoi sempre contare sul tuo nuovo smoov: grazie alla sua lunga autonomia, questo sistema di propulsione compatto e potente può supportare un peso utente fino a circa 150 kg e portarti a destinazione senza stress. Che si tratti della routine quotidiana o dei tuoi viaggi, smoov ti dà davvero una marcia in più.

Se necessario, puoi anche ricaricare la batteria in qualsiasi presa standard.

- ✓ **Batteria integrata**
Autonomia* fino a 20 km circa
- ✓ **Motore nel mozzo**
Potente e senza necessità di manutenzione
- ✓ **Pendenze**
fino al 16%
- ✓ **Velocità massima**
fino a 10 km/h

*In conformità alla ISO 7176; l'autonomia varia in base alla superficie, al peso dell'utente, alla temperatura e al tipo di terreno.





IL TUO COMPAGNO DI VIAGGIO

Libertà totale

smoov ti permette di raggiungere nuovi luoghi e destinazioni. Offre assistenza su numerosi tipi di terreno, è estremamente leggero e dispone di una sua custodia, così può accompagnarti in ogni viaggio ed essere sempre pronto.

Puoi agganciare o sganciare smoov in modo pratico tramite il dispositivo di rilascio e la maniglia di trasporto – anche rimanendo seduto sulla tua carrozzina.


✓ **Facile da trasportare**

Con un peso di soli 7,2 kg, puoi portare smoov ovunque.

✓ **Sterzo e rotazione flessibili**

Grazie alla forcella sterzante completamente rotabile e alla sospensione flottante sulla carrozzina, puoi superare con facilità bordi e marciapiedi lungo il percorso.

Anche quando smoov è agganciato, puoi impennare la carrozzina come sempre e mantenere la massima manovrabilità durante la guida. Inoltre, smoov offre un'eccellente tenuta di strada grazie al suo battistrada antiscivolo.

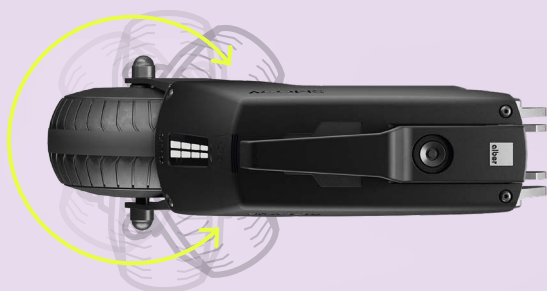



SMART

Assolutamente sorprendente

Puoi collegare smooov al tuo dispositivo iOS o Android, così da monitorare in ogni momento autonomia e livello della batteria.

Oltre all'app gratuita con le sue numerose opzioni aggiuntive, smooov offre un pacchetto tecnico e tante funzionalità interessanti.

- ✓ **App per la mobilità**
L'app gratuita mette a disposizione numerose funzioni di base.
Se lo desideri, puoi aggiungere pacchetti individuali, come upgrade di velocità o prestazioni.
(Maggiori dettagli a pagina 16)
- ✓ **Connessione Bluetooth®**
Puoi collegare comodamente l'unità di controllo dello smooov all'unità di trazione tramite Bluetooth®.
- ✓ **Preso USB-C**
Se sei in giro, il telefono si è scaricato e non c'è nessuna presa a portata di mano, puoi ricaricarlo direttamente tramite la porta USB-C di smooov.





TRENDSETTER

Design e funzionalità

smoov deve il suo aspetto moderno a una lega di alluminio leggera resistente e stabilisce nuovi standard grazie al suo design semplice. Non è solo la nostra opinione: la giuria del Red Dot ha premiato smoov proprio per il suo design. Naturalmente, l'estetica si accompagna a ergonomia e funzionalità: un vero vantaggio per te.

- ✓ **Luce posteriore a LED**
Anche al buio, smoov ti mantiene al sicuro: la luce posteriore a LED integrata ti rende ben visibile.
- ✓ **Maniglia di trasporto e dispositivo di sgancio**
Puoi agganciare e sganciare smoov comodamente grazie all'ampia maniglia – anche restando seduto. Nonostante le dimensioni, si integra perfettamente e armoniosamente al design di smoov.



IN VIAGGIO



smoov è conforme
alle norme IATA e può
essere trasportato in
aereo.

Muoversi senza limiti

smoov ti permette di scoprire tante nuove destinazioni senza preoccuparti del percorso: trascorri l'intera giornata a fare shopping nella città dei tuoi sogni – smoov ti aiuterà anche a trasportare le tue borse.

Sogni di visitare luoghi lontani? Nessun problema! smoov è progettato in modo da poter essere portato anche in aereo. Tutti i certificati necessari sono disponibili per il download sul nostro sito web.

up, up



& away

Per ogni evenienza

Come tuo nuovo compagno di viaggio, smooov è dotato anche di una pratica custodia, così da accompagnarti comodamente ovunque tu vada. Puoi ordinare la custodia da viaggio con maniglia presso il tuo rivenditore smooov.

Ulteriori informazioni sono disponibili a pagina 15.



”

Uso smoov da un po' di tempo e non lo cambierei per niente al mondo. Posso agganciarlo e sganciarlo in pochissimo tempo, il che rende molto più semplice caricarlo in auto. Adoro il fatto di poter regolare la velocità, se necessario.

Oliver da Albstadt

smoov rende la mia vita più semplice. Ora posso visitare posti che prima non potevo raggiungere. Quando ho bisogno di aiuto, il propulsore posteriore elettrico fa il lavoro duro e nessuno deve spingermi. Non ho più ansia nel viaggiare in luoghi sconosciuti, perché so che smoov mi aiuterà. Posso andare a fare shopping o portare a passeggio il mio cane senza sforzo, cosa che prima richiedeva molta energia.

“



smoov power

Veloce, agile e a bassa manutenzione: con una velocità massima fino 10 km/h (circa), il potente motore nel mozzo ti porterà rapidamente a destinazione, affrontando pendenze fino al 16% lungo il percorso. Pesa solo 7,2 kg (circa) e colpisce per la sua eccellente struttura e i materiali solidi.

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE



Piastre

Per montare smoov a carrozzine a telaio fisso e per il fissaggio dell'unità di controllo al poggiatesta



UNITA' DI GUIDA



UNITA' DI COMANDO

Puoi avviare, fermare e regolare la velocità tramite l'ergonomica unità di controllo. Il display a LED mostra lo stato della batteria sia dell'unità di controllo sia del tuo smooV. Una volta montata rapidamente e facilmente la staffa, l'unità di controllo wireless può essere attaccata e staccata con un solo movimento della mano e si connette comodamente all'unità di propulsione tramite Bluetooth®.



Dock on – dock off

smoov si adatta a qualsiasi carrozzina rigida o pieghevole grazie alla gamma di piastre disponibili. Tutte le caratteristiche della tua carrozzina resteranno invariate. Una volta installato, puoi agganciare e sganciare comodamente smoov in qualsiasi momento tramite il dispositivo di rilascio e la maniglia di trasporto, mentre sei seduto sulla tua carrozzina.

Facile da montare:

su carrozzine pieghevoli grazie alla barra trasversale e su carrozzine a telaio rigido grazie alla piastra standard fissata sull'asse delle ruote posteriori.



Fissaggio della piastra: le piastre compatibili (per l'unità di trazione e l'unità di controllo) sono incluse nella confezione.



Dati tecnici

Velocità	6 km/h e opzionale 10 km/h
Peso totale	7,21 kg
peso massimo utente*	150 kg
peso massimo consentito	169 kg (smoov, carrozzina e utilizzatore)
Autonomia**	fino a 19,95 km
Batteria	Ioni di Litio 216 Wh
Tempo di ricarica	circa 6 ore
Dimensioni	38,6 × 14,5 × 34,0 cm

* Devono essere rispettati i limiti stabiliti dal produttore della carrozzina

** Secondo la norma ISO 7176, a seconda della superficie, del peso dell'utilizzatore, della temperatura e del terreno

CUSTODIA DA VIAGGIO SMOOV

In viaggio

Ben protetto: l'imbottitura interna mantiene smoov saldamente in posizione, assicurando che nulla si muova.



Peso:
1,5 kg



Dimensioni (H x L x P):
39,9 x 45,0 x 17,0 cm (H x L x P)



Tutto incluso:

Gomma antiscivolo:
appoggia la custodia sulle
gionocchia e parti!

Cerniera apri e chiudi:
la cerniera perimetrale rende
l'utilizzo estremamente semplice.

Tutto a portata di mano:
prendi la tua valigetta smoov... e
via. È inclusa anche una tracolla.

Stabile:
i piedini garantiscono supporto
quando appoggi la valigetta.

Pratica:
una grande tasca esterna dove
riporre i tuoi oggetti.

MOBILITY APP

Attivo, come il tuo stile

Collega smooov al tuo dispositivo iOS o Android.

Regola le impostazioni e potrai tenere sotto controllo lo stato della batteria, l'autonomia, ecc.

Utilizza la funzione Performance per regolare l'angolo di sterzata a partire dal quale il motore nel mozzo fornirà assistenza (tra 35 e 55 gradi per lato).

Puoi personalizzare smooov utilizzando le funzioni aggiuntive opzionali, come Speed e Auto Speed.

L'app Mobility è disponibile sull'Apple App Store per iOS e sul Play Store per Android.

Puoi acquistare direttamente in app gli aggiornamenti opzionali a pagamento.




Speed

Aumenta la velocità massima da ≈ 6 km/h a ≈ 10 km/h.



Auto Speed

Cruise alla velocità desiderata con la semplice pressione di un pulsante: salva la velocità preferita tramite l'app e attivala ogni volta che vuoi utilizzando l'unità di controllo.

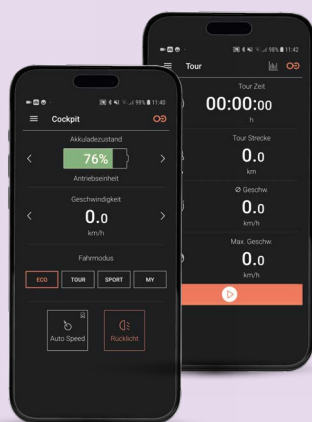

Play Store



App Store





Qualità alber

Semplicemente mobile

Come leader di mercato negli ausili per la mobilità delle carrozzine, Alber GmbH vanta oltre 35 anni di esperienza nel settore. Siamo un partner affidabile per le compagnie di assicurazione sanitaria e collaboriamo con fornitori di servizi sanitari in tutto il mondo.

Dalla consulenza iniziale al servizio continuo, puoi fare affidamento su di noi.

Visita il nostro sito web per ulteriori informazioni sui nostri prodotti, trovare risposte a tutte le tue domande e localizzare i partner Alber nel tuo paese.

www.alber.de

Ampia scelta

Se stai cercando un prodotto differente, saremo felici di aiutarti a trovare una soluzione alternativa che corrisponda alle tue esigenze.

Hai bisogno di un po' più di supporto o vuoi partecipare a molte più attività? Scopri altre soluzioni per la mobilità di Alber su www.alber.de.



e-motion®

Il moltiplicatore di spinta
per la tua carrozzina.




smoov®

Il propulsore posteriore
potente e versatile



e-pilot®

Il propulsore anteriore
confortevole e facile da
agganciare.

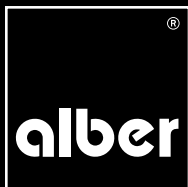

smoov – il propulsore posteriore per la tua carrozzina attiva

smoov è marcato CE in conformità al Regolamento Europeo sui Dispositivi Medici (MDR) 2017/745, è stato testato su base volontaria da TÜV Süd ed è certificato secondo lo standard di prodotto EN 12184.

Il nostro impegno per la qualità – la tua sicurezza!
Alber è certificata secondo l'attuale standard di gestione della qualità ISO 13485 per dispositivi medici.
Il nostro sistema di gestione ambientale, certificato secondo ISO 14001, garantisce che i nostri prodotti siano realizzati in modo responsabile dal punto di vista ambientale.

45.0002.6.02.06 Version 08/2025 © Alber GmbH, Albstadt.
Con riserva di modifiche tecniche.



Alber GmbH
Vor dem Weißen Stein 14
72461 Albstadt-Tailfingen, Germany
info@alber.de

INVACARE MECC SAN SRL
Via Marco Corner, 19
36016 Thiene (VI) – ITALY
Tel.: +39 0445 380059
www.invacare.it
e-mail: italia@invacare.com

MADE IN GERMANY