


# Essential Touch

Profilerad vändbar skummadrass

En madrass som erbjuder komfort och tryck omfördelning.

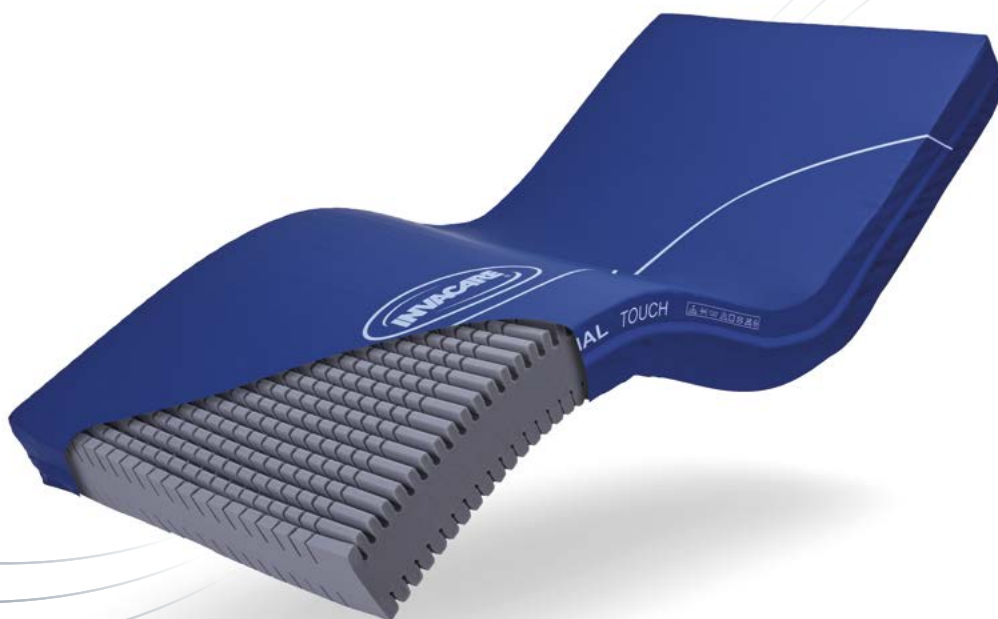

**En kostnadseffektiv lösning**

För att förebygga tryckskador



**Yes, you can.®**

# Prisvärd kvalitetsmadrass



## Tryckomfördelning

- › Nyckelhålsskurna profiler som anpassar sig individuellt för att distribuera vikten jämnt.
- › Profilerat skum som formar sig efter kroppen och erbjuder större nedsänkning och omslutning.
- › Större profilering längs kanterna och mindre i mitten av madrassen där trycket är mer framträdande.



## Motverkar Skjuv och Friktion

- › Profileringen hjälper till att minska skjuv vid lägesändring i sängen.
- › Multistretch, vätsketåligt, överdrag av polyuretan bidrar ytterligare till att minska skjuv och friktion.
- › Lämplig för olika typer av vård miljöer.



## Komfort

- › Profileringen ger ökad komfort och nedsjunkning
- › Dubbelsidigt profilerat skum gör att madrassen kan vändas eller roteras inuti överdraget för ökad produktivslängd.
- › Överdrag med två förstärkta handtag och dragkedja runt tre sidor för enkel hantering och borttagning vid tvätt.

## Tekniska data ▼

För mer information om denna produkt, inklusive bruksanvisningen, besök vår webbplats: [www.invacare.se](http://www.invacare.se)



Storlekar ▼

83x200x15 cm  
85x200x15 cm  
88x200x15 cm  
103x200x15 cm  
118x200x15 cm  
88x205x15 cm  
90x220x15 cm



Max brukarvikt ▼

150 kg



Max tvätt temperatur ▼

95°

Tillverkad enligt: BS EN 597-1 Cig, BS EN 597-2 låga och BS EN 7177: Crib 5

God omvårdnad är avgörande för hantering av trycksador. Denna madrass kan positivt bidra till resultatet av en trycksadepreventionsplan som omfattar utbildning, kliniskt omdöme och handlingsplan utifrån risknivå, vilket är grundläggande faktorer för att förebygga trycksador. En rad bedömningsskalor kan användas som en formell metod för att bedöma risk från att utveckla trycksador, och bör användas i samband med en informell bedömning som en del av en övergripande och individuell omvårdnadsplan.

**Kundservice: 08-761 70 90**  
Fax 08-761 81 08  
[sweden@invacare.com](mailto:sweden@invacare.com)  
[www.invacare.se](http://www.invacare.se)

Invacare AB  
Box 66 - 163 91 Spånga  
Sweden



**Yes, you can.®**



© 2024 Invacare International Sàrl. Alla rättigheter är reserverade för Invacare. All information i denna broschyr stämmer vid tryckningstillfället. Invacare förbehåller sig rätten att ändra produktinformation utan föregående meddelande. Essential Touch - SE - 02/24