

Softform® Premier MaxiGlide

Trykkfordelende og shear - reduserende madrass

Støtteflate av høy kvalitet for forbedret
håndtering av shearkrefter.



Stabilitet og trykkfordeling

For personlig tilpasset håndtering av trykksår



Yes, you can.®

Effektiv forebygging av trykksår

Softform® Premier MaxiGlide er en skummadrass av høy kvalitet med en innovativ glidekjerne som reduserer shearkrefter betydelig ved bruk sammen med en elektrisk regulerbar seng.

Det patenterte madrassdesignet gjør at overflaten gir utmerket trykkfordeling kombinert med høy komfort og støtte, mens madrassens underside skaper et optimalt grensesnitt mot sengebunnen. Egnet for personer som anses å ha svært høy risiko for å utvikle trykksår.

Utstyrt med en dypt konturert innleggsmatte laget av profilert skum med «nøkkelhull»-utskjæringer, som beveger seg uavhengig for å maksimere kroppskontaktflaten og optimalisere trykkavlastningen.



Overtrekk



› **Slitesterkt og svært pustende** medisinsk tekstil.



› **To-veis stretch, vannavvisende polyuretan-trekk** reduserer shear- og friksjonskrefter.



› **Orienteringssymbol** sikrer korrekt plassering av madrassen i sengen.



› **Fullt avtakbart overtrekk og forsterket polyuretanbunn** beskytter madrassen mot metalliske sengeinnramminger.

1




Trykkfordeling

Utformet for å **maksimere nedsynking og omslutning** for å forebygge trykksår.



2

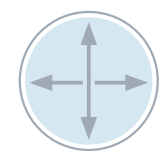


Reduksjon av shearkrefter

Profilert skum kombinert med et **unikt glidedesign** reduserer shearkrefter effektivt, spesielt ved justering av sengestilling.



› **Modulær konstruksjon** muliggjør enkel utskifting av alle deler og forlenger produktets levetid.

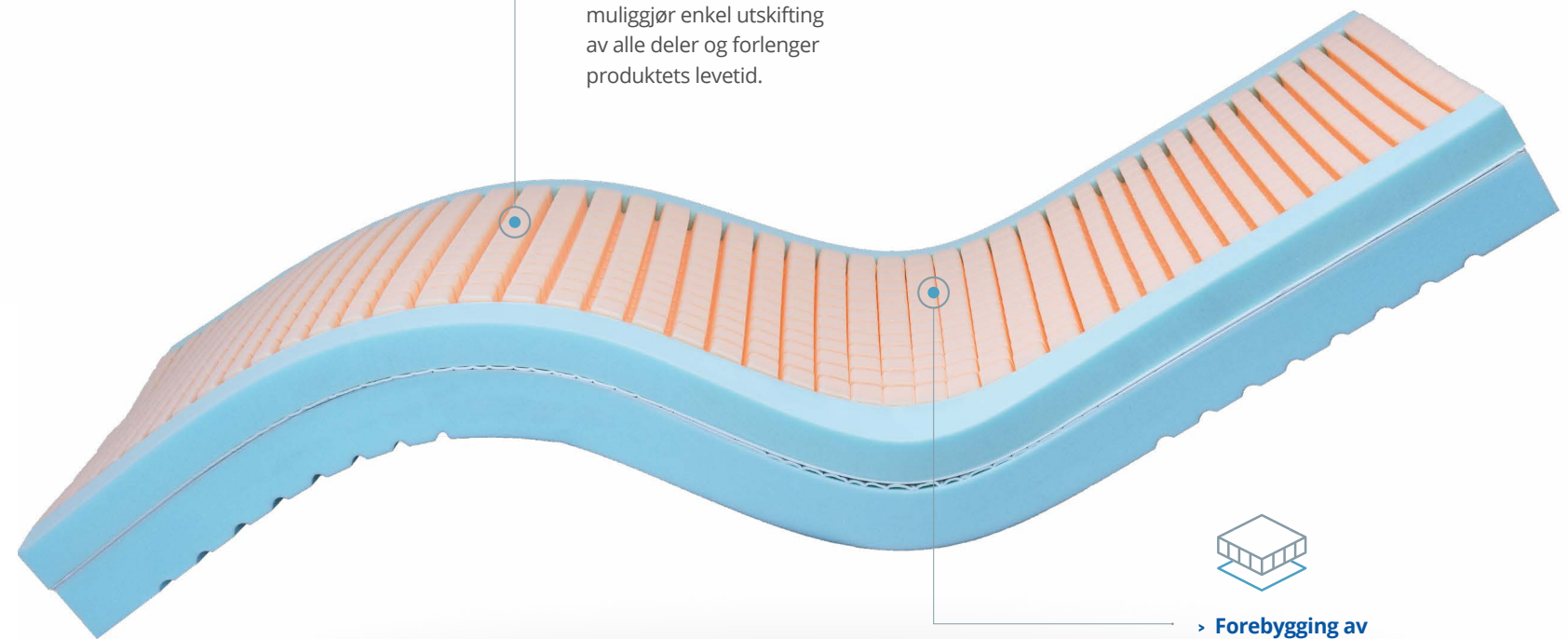

› **Forebygging av trykksår** gir en utmerket trykkfordelende overflate.

Tekniske data ▼

For mer informasjon om dette produktet, inkludert brukermanual, vennligst besøk vårt nettsted: www.invacare.no



Tilgjengelige størrelser ▼



Maks brukervekt ▼



Maks rengjøringstemperatur ▼

150 mm høyde

2000 x 830 mm

247 kg

95 °C

2000 x 880 mm

Art.nr.	Madras	Størrelse
60136342	Softform Premier Maxiglide	83 x 200 x 15 cm
60134389	Softform Premier Maxiglide	88 x 200 x 15 cm

Produsert i henhold til standarder: Innvendig skum: BS 5852 (antennelseskilde 5); Trekk: BS 7175 (antennelseskilde 5); Komplette madrass: BS 7177 (antennelseskilde 5)

God og grunnleggende pleie er avgjørende i håndtering av trykksår. Denne madrassen kan bidra positivt til resultatet av en plan for forebygging av trykksår som inkluderer opplæring, klinisk vurdering og tiltaksplanlegging basert på sårbarhet, som er grunnleggende faktorer i forebygging av trykksår.

Tlf: 22 57 95 00
norway@invacare.com
www.invacare.no

Postadresse:
Invacare AS
Postboks 6230 Etterstad
0603 Oslo

Besøksadresse:
Invacare AS
Brynsveien 16
0667 Oslo

Teknisk avdeling/lager:
Invacare AS
Østensjøveien 19
0661 Oslo

