


Softform[®] Premier

Trykkfordelende skummadrass

En høykvalitets madrass for komfort og trykkavlastning, med en skumkjerne

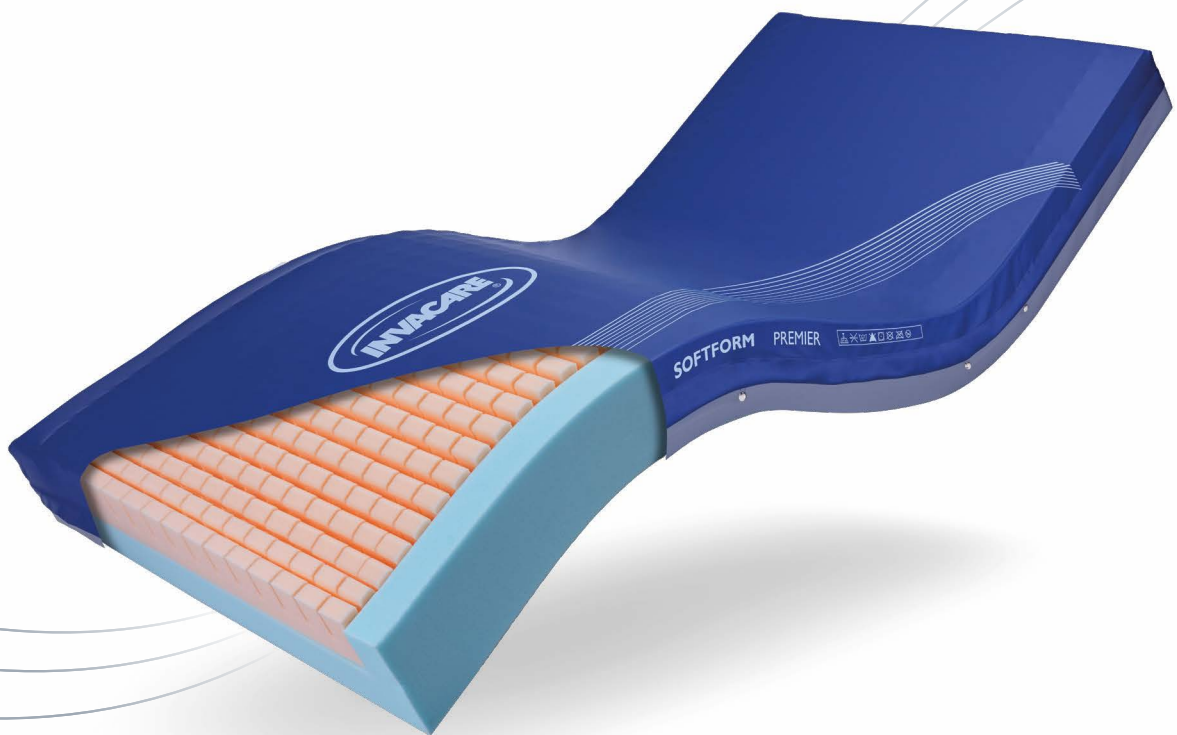

Stabilitet og trykkavlastning

Individuelt tilpasset forebygging av trykksår



Yes, you can.[®]

Effektiv forebygging av trykksår



Trykkavlastning

- Skum av høy kvalitet gir en komfortabel og effektiv trykkavlastende liggeflate for pasienter med høy til svært høy risiko for å utvikle trykksår.
- Oppskåret skum bidrar til å fordele vekten over et større område.
- Limfri konstruksjon gir god tilpasning til profilerte og elektriske senger.



Reduksjon av friksjon og shearkrefter

- Oppskåret skum følger kroppens bevegelser og posisjon, noe som bidrar til å redusere friksjon og shearkrefter.
- Madrassens overside er avsmalnet for å avlaste trykk på hælene, som er spesielt utsatt for trykksår.
- Det toveis elastiske, vannavstøtende polyuretan-trekket er slitesterkt og bidrar til å redusere friksjon og shearkrefter.



Komfort

- Utskjæringene gir utmerket komfort og luftkanaler som bidrar til god mikrokontroll.
- Robuste sidevegger og bunn gir stabilitet ved forflytning og hindrer at madrassen synker ned.
- Skjult, sveiset glidelås på alle fire sider reduserer risikoen for væskeinntrenging og gjør trekket lett å ta av for inspeksjon og vask.

Tekniske data ▼

For mer informasjon om dette produktet, inkludert brukermanual, besøk vår nettside: www.invacare.no



Maks.
brukervekt ▼

247 kg



Maks.
vasketemperatur ▼

95 °C

Artikkelnummer ▼

Art.nr.	Madrass	Størrelse
60134611	Softform Premier	83 x 200 x 15 cm
60134613	Softform Premier	85 x 200 x 15 cm
60134376	Softform Premier	88 x 200 x 15 cm
60134616	Softform Premier	90 x 200 x 15 cm

Andre størrelser kan være tilgjengelige på forespørsel. Kontakt din lokale Invacare-representant.

Produsert i henhold til BS 7177 (tennkilde 5); Skumkjerne: BS 5852:1982 (tennkilde 5); Trekk: BS 7175 (tennkilde 5)
Grunnleggende sykepleie er avgjørende i håndteringen av trykksår. Denne madrassen kan bidra positivt til resultatet av en forebyggingsplan som inkluderer opplæring, klinisk vurdering og tiltak basert på sårbarhet, som er sentrale faktorer for å forebygge trykksår. Ulike vurderingsskalaer kan brukes som formelle metoder for risikovurdering og bør kombineres med en uformell vurdering (informert sykepleiefaglig skjønn) som del av en helhetlig og individuell plan.

Tlf: 22 57 95 00
norway@invacare.com
www.invacare.no

Postadresse:
Invacare AS
Postboks 6230 Etterstad
0603 Oslo

Besøksadresse:
Invacare AS
Brynsveien 16
0667 Oslo

Teknisk avdeling/lager:
Invacare AS
Østensjøveien 19
0661 Oslo



Yes, you can.®