

Accent[®]

Per l'assistenza quotidiana



Letto da degenza articolato

Raccomandato da chi si prende cura di te



Qualità a costi contenuti

Il letto Accent offre una soluzione pratica ed economica, adatta sia all'assistenza domiciliare sia a quella a lungo termine.



Sicurezza

Tutti i letti Invacare sono conformi alla norma di sicurezza IEC 60601-2-52.



Concepiti per contesti assistenziali

Ogni letto Invacare è studiato per soddisfare le esigenze degli ambienti assistenziali.




Qualità

Il design e le specifiche tecniche dei letti rispondono ai più elevati standard del settore.



Comfort

Il modello Accent è progettato per garantire riposo, dignità e indipendenza.

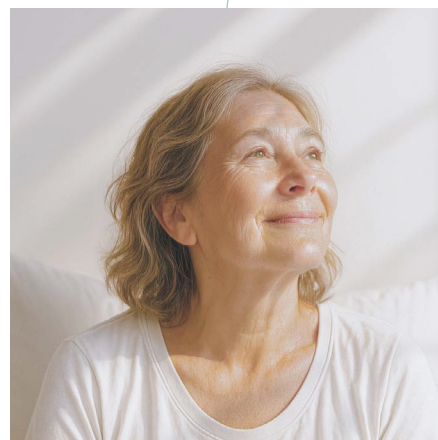

Ideale per l'assistenza domiciliare

Accent è una soluzione intuitiva e pratica, che rende più semplice l'esperienza di pazienti, familiari e operatori sanitari.



Materasso Invacare venduto separatamente.

Progettato con cura

01

Grazie all'assemblaggio intuitivo, alla semplicità di regolazione e ai dettagli curati, il letto Accent assicura ogni giorno un'assistenza di qualità.



Scelta economica
Letto semplice e di qualità a costi contenuti.

11°

09


Inclinazione assistita
Per il posizionamento e la gestione della pressione.

02



Installazione rapida e semplice
Assemblaggio e smontaggio senza attrezzi. Facile da maneggiare.

03

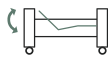

Regolazione delle posizioni
Per regolare lo schienale o la sezione cosce è sufficiente premere un solo pulsante.

04



Regolazione in altezza
Altezza regolabile da 400 a 800 mm per garantire condizioni di lavoro ergonomiche e un'assistenza ottimale del paziente.

05



Controllo manuale intuitivo
Chiara display per la massima facilità d'uso. Funzione di blocco delle funzioni, optional.

06



Gamma di sponde laterali
Opzioni disponibili: Slim (in figura e di serie), Verso HC, Aria.

08



Facile da pulire
Superfici adatte alla pulizia con detergenti delicati, ideale sia nell'ambiente domiciliare che assistenziale. Consultare il manuale d'uso.

07




Unità di alimentazione e cablaggio compatti
Unità di dimensioni ridotte con cavi ordinati e removibili, che aumentano lo spazio sotto il letto e facilitano lo spostamento del dispositivo.



Opzioni Accent[®]

Assistenza semplice
e versatile per
l'utilizzo quotidiano.

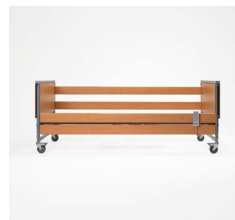

Slim
Sponda laterale, a
tutta lunghezza, in
legno di pino (di serie).



Verso HC
Sponda laterale
ribaltabile in acciaio.



Aria
Sponda laterale, a
tutta lunghezza, in
acciaio.



Kit pannelli
coprimotore testiera e
pediera (opzionali).



Pulsantiera con blocco
Con funzione di blocco
delle funzioni per una
maggiore sicurezza
(opzionale).



Facile da trasportare

Il kit di trasporto
semplifica
ulteriormente
lo spostamento e lo
stoccaggio del letto
(opzionale).



Consulta il video
dimostrativo per
il montaggio e lo
smontaggio.



Specifiche tecniche



Larghezza
interna
90 cm



Larghezza
esterna
102 cm



Peso max.
utilizzatore
40 - 80 cm



Lunghezza
interna
208 cm



Lunghezza
esterna
224 cm



Angolo di
inclinazione
11°



Peso massimo
utente
145 kg



Peso
totale
64 kg



Parte più
pesante
16 kg



Rete
80 - 23 - 30
- 67 cm



Inclinazione
dello schienale
0 - 70°




Angolo
coscia
0 - 33°

Colore



Acciaio

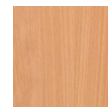

Faggio



Conforme alla norma di sicurezza
IEC 60601-2-52.



Certificato ISO 9001 e ISO 13485

Tel.: +39 0445 380059
www.invacare.it
e-mail: italia@invacare.com

Invacare Mecc san s.r.l.
Via Marco Corner, 19 - 36016
THIENE (VI) - Italy