


Flo-tech[®] Lite



Lav, let formstøbt pude med bedre
positionering og komfort

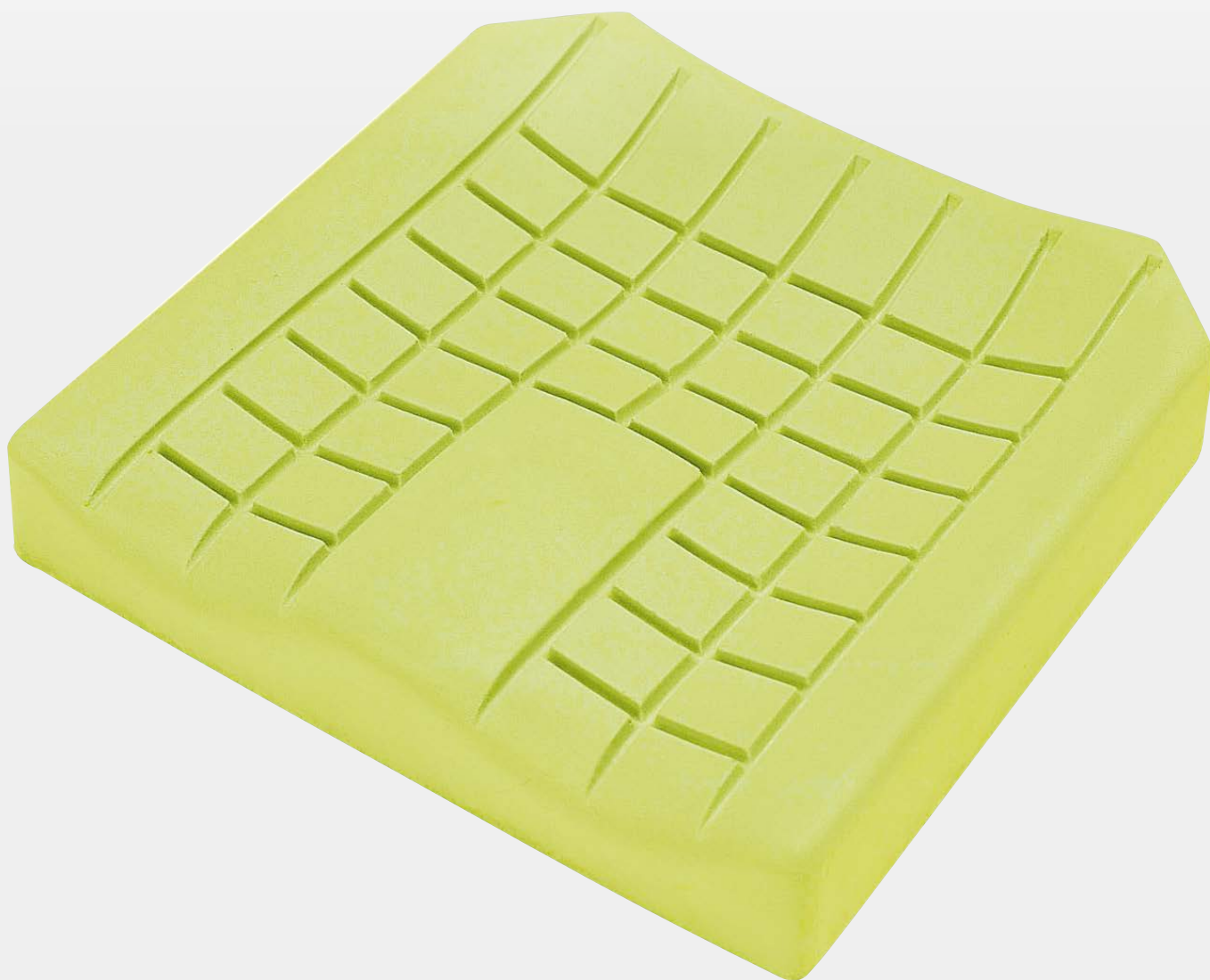

Yes, you can.

Invacare **Flo-tech Lite** er en lav, let formstøbt pude velegnet til brugere med lav risiko for at udvikle tryksår og med behov for komfort. Den formstøbte overflade giver forbedret stabilitet og postural støtte. **Flo-tech Lite** er ideel til brug både i en lænestol og i kørestolen, hvor der ønskes minimal sædeforhøjelse.

Konturformet skumpude

Øget støtte omkring sider og bækken styrker brugerens positionering. **Flo-tech Lite** er specielt velegnet, hvis man ikke ønsker for høj sædehøjde samt let trykaflastning. **Flo-tech Lite** er desuden konstrueret med en let abduktionskile.

Egenskaber og tilbehør



Leveres i 4 størrelser

Flo-tech Lite kan leveres i 4 forskellige størrelser fra 45 x 45 cm til 48 x 50 cm. Pudebredde 48 cm kan med fordel anvendes i en kørestol med sædebredde 50 cm.

Inkontinensbetræk

Betrækket er to-vejs strækbart, vandafvisende og åndbart. Betrækket har skridsikker bund og mærket med pudens retning i sædet samt forsynet med bærehåndtag.

Ultra-fresh™

Flo-tech anvender skum, der er behandlet med **Ultra-Fresh**.

Ultra-Fresh er en antimikrobiel behandling af skummet, der beskytter mod støvmider, bakterier og dertil hørende lugtgener.

- Mindre lugtgener
- Større holdbarhed
- Større genbrugsværdi
- Kan anvendes af støvmideallergikere


Tekniske data

For yderligere oplysninger, tekniske data etc. om dette produkt, se venligst i brugermanualen, der kan downloades på www.invacare.dk.

	Antal størrelser	Højde	Vægt	Max. brugervægt	Rengøring	
						Fremstillet i henhold til følgende Europæiske standarder: Betræk: BS 7177: 1989 Crib 5
Flo-tech Lite	4	6 cm	1.5 kg	127 kg	80°	Betræk: • Vandafvisende • Åndbart • Strækbart

Farve

Sort

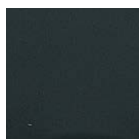

Tlf.: 3690 0000
Fax: 3690 0001
denmark@invacare.com
www.invacare.dk

Invacare A/S
Sdr. Ringvej 37, 2605 Brøndby
Denmark



Yes, you can.