


Flo-tech[®] Lite



Cojín contorneado y delgado que
ofrece una comodidad excepcional
y mejora la postura.

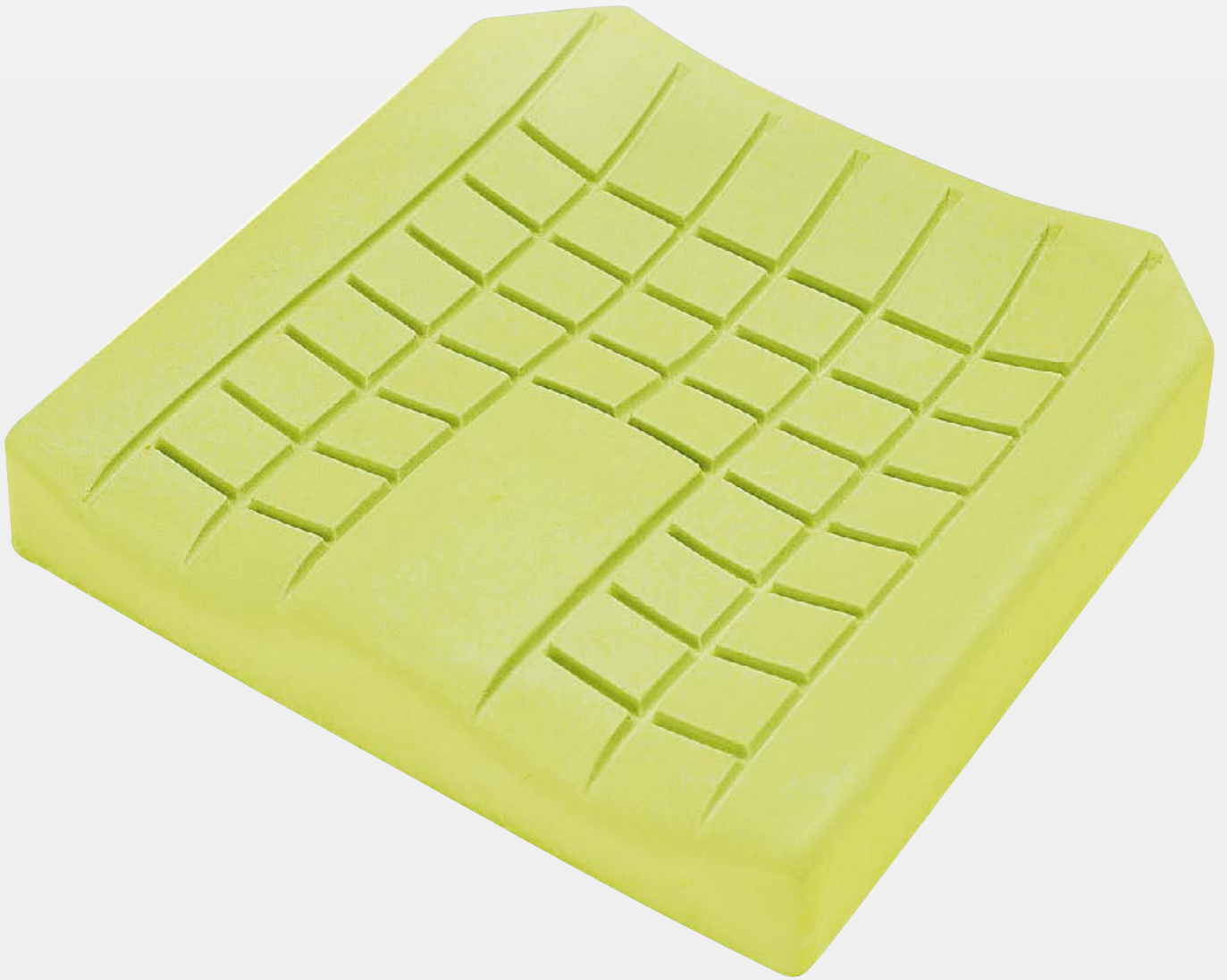

Yes, you can.

El cojín **Flo-tech Lite** e Invacare es un cojín contorneado y delgado, ideal para usuarios con bajo riesgo de desarrollar úlceras por presión y exclusivamente para mayor comodidad. La superficie de asiento contorneada ofrece mayor estabilidad y soporte postural. Con tamaños a partir de 25 x 25 cm (250 x 250 mm), el cojín **Flo-tech Lite** es especialmente adecuado para usuarios pediátricos.

Características y opciones



La funda es resistente a la penetración de líquidos

La funda es bielástica, resistente al agua y permeable al vapor. La funda cuenta con una base antideslizante y asa de transporte.



Disponible en 61 tamaños

La Invacare Flo-tech Lite está disponible en 61 tamaños, desde 250 x 250 mm hasta 480 x 530 mm. (Consulte la tabla de tallas para más detalles).



Opción de compensador de hundimiento integral

Opción de compensador de hundimiento para adaptar el hundimiento en los asientos de sillas de ruedas y garantizar que el cojín esté correctamente colocado.



Ultra-fresh™ añadido a todos los cojines para protección anti-microbiana y contra el mal olor

Tratamiento antimicrobiano añadido a toda la espuma Flo-tech para ayudar a que sea resistente al crecimiento de bacterias causantes del mal olor. Proporciona una frescura más duradera.

Base de espuma fina fabricada con espuma moldeada y resistente de alta calidad

Esta espuma resistente de alta calidad se fabrica con una fórmula única que ofrece una alta redistribución de la presión y prolonga la vida útil del producto.

El moldeado permite que el cojín Flo-tech Lite tenga una forma tridimensional, imposible de replicar con espuma cortada. El pomo en la parte delantera del cojín separa los muslos, favorece una buena postura y permite la circulación del aire.

Superficie de asiento contorneada

Ofrece mayor estabilidad y soporte postural. Además, proporciona una mayor distribución del peso en comparación con una superficie plana. El almenado del cojín permite un ligero movimiento, lo que a su vez reduce las fuerzas de cizallamiento y fricción.

Datos técnicos

Para obtener información de preventa más completa sobre este producto, incluido el manual del usuario, consulte su sitio web local de Invacare.

	Varios tamaños	Altura	Peso total del producto	Peso máximo del usuario ¹	Temperatura máxima de limpieza
Flo-tech Lite	A range of 61 sizes	78 mm	1.5 kg	127 kg	80°

Fabricado según las normas europeas:
BS EN 1021-1, BS EN 1021-2, BS 5852: 1982 Crib 5

1. Los límites de peso máximo del usuario se establecen asumiendo que el cojín seleccionado tiene el ancho y la profundidad adecuados para el/los usuario(s) previsto(s).

Colores

Negro liso	Negro lavable	Espaciador negro	Tela Azul Báltico

(34) 972 493 214
contactsp@invacare.com
www.invacare.es

Invacare España
Avenida del Oeste nº50, 1 1ª
Valencia - CP: 46001
España



Yes, you can.®