

Flo-tech[®] Solution




Cojín delgado con exclusivo sistema
de doble saco de fluidos



Yes, you can.

El cojín *Invacare Flo-tech Solution* combina una base de espuma fina y moldeada con una doble capa de bolsas de fluidos sobre la zona isquiática y sacra. Estas bolsas de fluidos y la exclusiva forma de espuma moldeada de la solución aumentan la superficie de apoyo. Esto ofrece un nivel superior de protección para pacientes con riesgo muy alto de desarrollar úlceras por presión o con daño tisular ya establecido.

Características y opciones

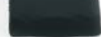

Funda

Tejido negro bi-elástico, impermeable, transpirable y repelente al agua. La base es antideslizante y con asa para su mejor manejo.

Disponible en 44 Tallas

La solución Flo-tech de Invacare está disponible en 44 tamaños, desde 38 x 41 hasta 51 x 46 cm (380 x 410 hasta 510 x 460 mm). (Consulte la tabla de tallas para más detalles).

Invacare Flo-tech Solución profunda optimizada

La opción de base de espuma profunda de 10 cm (100 mm) también está disponible en 12 tamaños. (Consulte la tabla de tallas para más detalles).

Ultra-fresh™ incorporado en todas las espumas Flo-tech para protección antibacterial y de olor

Este tratamiento se ha añadido para prevenir el olor causado por bacterias y microbios.

Base de espuma contorneada y delgada con una gran bolsa de fluido doble que cubre toda la superficie superior del cojín

La zona de contacto entre el usuario y el cojín de espuma está protegida, ya que el fluido se desplaza para redistribuir la presión y alejarla de las prominencias óseas. La capa adicional de fluido se incorpora bajo la zona isquiática y sacra para mejorar aún más las propiedades reductoras de presión de este cojín, haciéndolo adecuado para usuarios de muy alto riesgo.

Cojín contorneado de línea delgada

Algunos usuarios prefieren un cojín delgado, ya que lo encuentran más compatible con sus actividades diarias. Su perfil bajo es especialmente beneficioso para facilitar las transferencias laterales.

Datos técnicos

Para obtener información de preventa más completa sobre este producto, incluido el manual del usuario, consulte su sitio web local de Invacare.

Varios tamaños	Altura	Peso total del producto	Peso máximo del usuario ¹	Temperatura máxima de limpieza
Una gama de 44 tamaños	78 mm	3.08 kg	140 kg	80°

Fabricado según las normas europeas: BS EN 1021-1, BS EN 1021-2, BS 5852: 1982 Crib 5

1. Los límites de peso máximo del usuario se establecen asumiendo que el cojín seleccionado tiene el ancho y la profundidad adecuados para el/los usuario(s) previsto(s).

Colores

Negro liso	Negro lavable	Espaciador negro	Tela Azul Báltico

(34) 972 493 214
contactsp@invacare.com
www.invacare.es

Invacare España
 Avenida del Oeste nº50, 1 1ª
 Valencia - CP: 46001
 España



Yes, you can.®