

Flo-tech[®] Solution



Cuscino a basso profilo con un esclusivo
sistema a doppia sacca fluida



Yes, you can.

Il cuscino Invacare **Flo-tech Solution** utilizza una combinazione di una base in schiuma sagomata a basso profilo e un doppio strato di sacche fluide nella zona ischiatica e sacrale. La sacca doppia, insieme alla particolare forma della schiuma modellata, aumentano la superficie di supporto. Questo garantisce un livello superiore di protezione per i pazienti ad altissimo rischio di sviluppare lesioni da pressione o per coloro che presentano già danni tissutali.

Caratteristiche e opzioni



Fodera impermeabile e traspirante

Il rivestimento è bielastico, resistente all'acqua e permeabile al vapore. E' dotato di una base antiscivolo e di una maniglia per il trasporto.



Ampio range di misure

Invacare **Flo-tech Solution** è disponibile in un ampio range di misure, da 380 x 410 a 510 x 460 mm. Consulta la scheda d'ordine.



Protezione Ultra-fresh™

Trattamento anti-microbico e anti-batterico che limita la proliferazione di batteri e cattivi odori, prolungando la durata del prodotto e la sensazione di freschezza.

Base in schiuma sagomata a basso profilo con ampia doppia sacca fluida che copre l'intera superficie superiore del cuscino

L'area di contatto tra l'utente e il cuscino in schiuma è protetta, poiché il fluido si sposta per ridistribuire la pressione lontano dalle prominenze ossee. Un ulteriore strato di fluido è integrato sotto la zona ischiatica e sacrale per potenziare ulteriormente le proprietà di riduzione della pressione, rendendo questo cuscino adatto a utenti a rischio molto elevato di sviluppare ulcere da pressione.

Cuscino sagomato a basso profilo

Alcuni utenti preferiscono un cuscino a basso profilo, perché più compatibile con le attività quotidiane. Un profilo basso è particolarmente utile per facilitare i trasferimenti laterali.

Dati tecnici


Per maggiori informazioni su questo prodotto, incluso il manuale d'uso, visita il nostro sito www.invacare.it

Misure	Altezza	Peso totale prodotto	Peso max utente ¹	Temperatura max lavaggio
				
44 misure	78 mm	3.08 kg	140 kg	80°

Prodotto secondo gli Standard europei:
BS EN 1021-1 Cig, BS EN 1021-2 Match
e BS 7176 (Crib 5)

1. I limiti massimi di peso dell'utente indicati sono stimati assumendo che il cuscino selezionato sia della larghezza e profondità adeguate per l'utente.

Colori

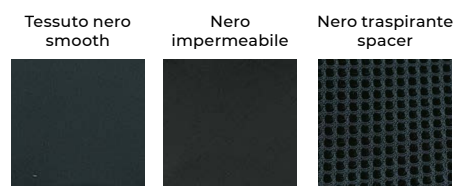

Tel.: +39 0445 380059
www.invacare.it
e-mail: italia@invacare.com

Invacare Mecc San s.r.l.
Via Marco Corner, 19
36016 Thiene (VI) - ITALY



Yes, you can.®