

**matrix**<sup>®</sup>  
SEATING SERIES

# Contour Visco<sup>NG</sup>



El cojín que se adapta a la  
forma del cuerpo del usuario




El cojín **Matrx Contour Visco<sup>NG</sup>** tiene un diseño contorneado y está hecho con espuma 100% viscoelástica. Ofrece una redistribución de los puntos de presión excelente con el fin de mejorar el confort del usuario y estabilizar la pelvis.

### Diseño parte trasera

► El diseño especial de la parte trasera del cojín ofrece un mayor soporte de la pelvis para optimizar su posicionamiento. Esta forma permite que el cojín quepa perfectamente debajo del tapizado de respaldo o de un respaldo rígido tipo Matrx. Maximizar la superficie de contacto contribuye a mejorar la redistribución de los puntos de presión y la protección cutánea.

### Parte delantera con borde angulado

► Proporciona un soporte máximo a nivel de los muslos para un posicionamiento adecuado de los miembros inferiores y una mejor redistribución de los puntos de presión. El borde delantero con ángulo libera el hueso poplíteo y permite a los usuarios con músculos isquiotibiales tensos conseguir una posición de los pies a 90° para facilitar la propulsión podal.

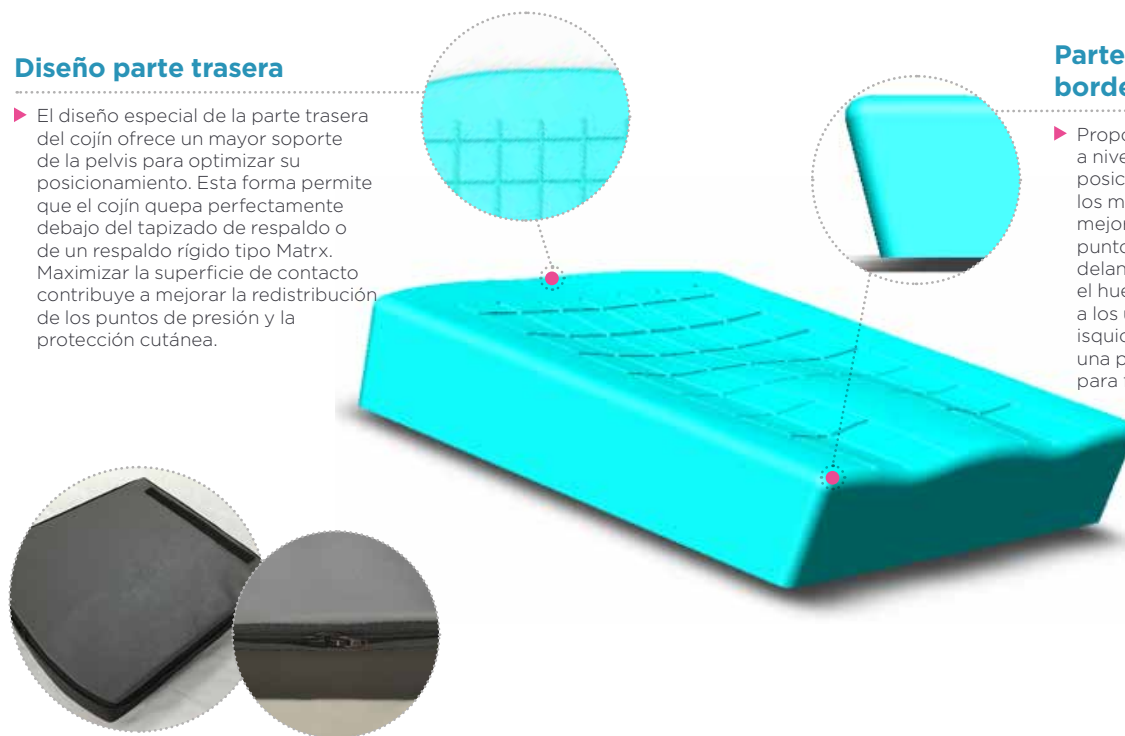

► El Cojín **Matrx Contour Visco<sup>NG</sup>** permite una inmersión y un envolvimiento excelente. Cuando el paciente se sienta en el cojín, la espuma viscoelástica se adapta a la forma del usuario para aumentar la superficie de contacto y mejorar así la redistribución de las presiones. El cojín **Matrx Contour Visco<sup>NG</sup>** está disponible en diferentes medidas con diferentes pesos máximos de usuario. Incluye dos fundas negras impermeables, bi-elásticas, con cremallera. El cojín se mantiene en su sitio en la silla gracias a su base antideslizante y el asa permite un fácil agarre durante el transporte.

## Datos técnicos ▼

Para obtener información más completa acerca de este producto incluyendo el manual del usuario y manual de mantenimiento, consulte la página web [www.invacare.es](http://www.invacare.es)



Anchura ▼



Profundidad ▼



Altura ▼



Altura ▼



Peso total del cojín ▼



Peso máx. usuario ▼



Temparatura máxima de lavado ▼



<b>Matrx Contour Visco<sup>NG</sup></b>	405 mm	405 mm	A=100mm	100mm	1.3kg	80 kg*	90°
	430 mm	430 mm	B=100mm			100 kg	
	455 mm	455 mm				110 kg	

Cumple con la normativa EN1021-1 Cig y EN1021-2  
Peso máximo de usuario y firmeza: consultar tarifa  
\* Según talla

Tel: +34 972 49 32 14  
[contactsp@invacare.com](mailto:contactsp@invacare.com)  
[www.invacare.es](http://www.invacare.es)

Invacare S.A.  
Avenida del Oeste nº50, 1º 1ª  
46001 Valencia  
España