

matrix[®]
SEATING SERIES

Contour Visco^{NG}



Adapta-se ao corpo do
utilizador



Yes, you can.


A Almofada *Invacare Matrx Contour Visco^{NG}* apresenta contorno anatómico pelo envolvimento da espuma 100% viscoelástica. Ela oferece excelentes capacidades de distribuição da pressão, para melhorar o conforto e a estabilização da pélvis. O seu design de médio perfil adapta-se a utilizadores ativos e facilita o desempenho dos utilizadores que fazem propulsão da cadeira com o pé, para além de garantir um melhor acesso a mesas baixas.

Recorte Posterior

▶ O recorte posterior com contorno oferece um apoio adicional para garantir o posicionamento óptimo da pélvis. Permite também ser colocada por baixo do estofo do encosto ou de um encosto rígido com contorno, preenchendo o espaço que normalmente existe quando são usadas almofadas quadradas. Ao maximizar a superfície de contacto, vai melhorar os resultados de distribuição da pressão e proteção da pele.

Recorte anterior em diagonal

▶ Oferece máximo apoio das ancas, para um melhor posicionamento das pernas e distribuição da pressão, sem comprometer a região poplíteia da articulação do joelho. O recorte anterior em diagonal também se destina a quem tem encurtamento dos isquiotibiais, para permitir o posicionamento do pé a 90° ou menos.

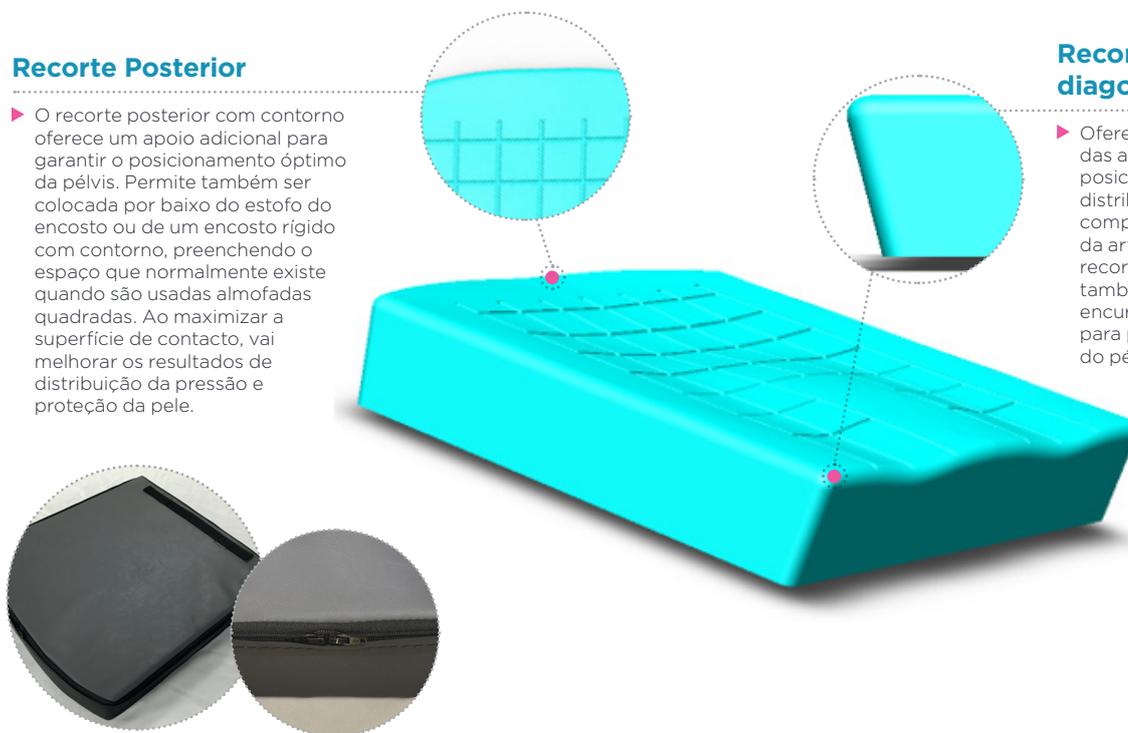

▶ A almofada *Matrx Contour Visco^{NG}* oferece um envolvimento e imersão de nível superior. Ao sentar-se na almofada, o utilizador vai sentir a espuma viscoelástica a adaptar-se lentamente ao seu corpo, aumentando a superfície de contacto e melhorando a distribuição da pressão. A *Matrx Contour Visco^{NG}* está disponível com uma vasta opção de tamanhos e limites de peso, oferecendo o melhor ajuste ao utilizador. A almofada inclui 2 capas com 2 fechos, fáceis de remover para limpeza e manutenção. As capas são impermeáveis a líquidos e bi-elásticas, para permitir uma imersão eficiente do corpo do utilizador, na própria espuma. A base anti-derrapante garante que a almofada se mantém no mesmo lugar e a pega que traz, facilita a transferência da almofada de uma superfície para outra.

Dados Técnicos ▼

Para uma informação mais legível sobre este produto, incluindo o manual de utilizador, consulte por favor o site www.invacare.pt



Largura ▼



Profundidade ▼



Altura ▼



Altura ▼



Peso total ▼



Peso máximo do utilizador ▼



Temperatura máxima de lavagem ▼



Matrx Contour Visco^{NG}	355 mm						
	380 mm						
	405 mm	405 mm					
	430 mm	430 mm	A=100mm				
	455 mm	455 mm	B=100mm	100mm	1.3kg	140Kg*	90°
	480 mm	530 mm					
	505 mm						

Esta almofada foi fabricada de acordo com as normas europeias EN1021-1 e EN1021-2

*Almofadas com largura de 380 a 405 mm - o peso mínimo do utilizador é de 40 Kg.
Almofadas com largura a partir de 430mm - o peso mínimo do utilizador é de 60 Kg.

Tlf.: 225193360
marketing.pt@invacare.com
www.invacare.pt

Invacare Portugal
Rua da Estrada Velha, 949
4465-784 Leça do Balio
Portugal



Yes, you can.®