

# SB<sup>®</sup> 755-120



Paneles **Susanne**/  
Barandillas **Britt V**

Más grande, más cómoda...



Yes, you can.®



La cama *Invacare SB755* está disponible con ancho de 120cm, ofreciendo más comodidad y más espacio para personas corpulentas (hasta 200 kg), permitiéndolas girar sobre si mismas.

La cama *Invacare SB 755 120* ha sido diseñada con el sistema de Auto-regresión en el respaldo para una máxima comodidad.

La cama *Invacare SB 755 120* con sus líneas contemporáneas y estilizadas combina armoniosamente en casa o centros. Las superficies lisas de la cama facilitan la limpieza y desinfección.



Paneles **Emma** / Barandillas **Verso II**

## Cómoda : para usuarios y cuidadores


La cama *Invacare SB755 120* ha sido diseñada para evitar la fricción y el cizallamiento gracias al movimiento plano del respaldo logrando una excelente **posición de sentado**.

La *Invacare SB755 120* tiene un somier reforzado, muchas opciones de paneles y barandillas y freno centralizado.

## Desmontable y transportable

La estructura de la cama ha sido diseñada para ser transportada y almacenada fácilmente, así como para montarla y desmontarla con la misma facilidad. La cama se puede almacenar en un kit de transporte (disponible como opción). Las barandillas **Verso II** y **Britt V** de la cama *Invacare SB 755 120* cumplen con la normativa IEC60601-2-52.

## Características y opciones

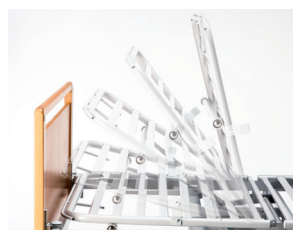

### Sistema de Auto-regresión

Comodidad y prevención para el usuario cuando articula el plano superior al minimizar la fricción y el cizallamiento.

### Dimensiones

Las dimensiones de los planos del somier se ajustan a medidas antropométricas para asegurar mayor comodidad.

### Paneles y barandillas




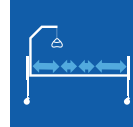











Adaptados para esta cama están disponibles los paneles **Susanne** haya y combinación haya/cerezo compatibles con Barandillas **Britt V** y **Line**. También paneles **Emma** en haya, compatibles con barandillas **Verso II**.

### Opción de colchón

Disponible el **Softform Premier Visco** de 200x120x15,2cm especialmente diseñado para la **SB 755-120**.

## Datos técnicos

Para obtener información más completa acerca de este producto incluyendo el manual de usuario, consulte la página web [www.invacare.es](http://www.invacare.es)

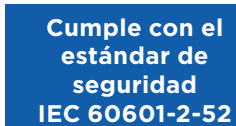	Ancho exterior/ Ancho interior	Largo exterior/ Largo interior	Ajustes de altura	Dimensiones del somier	Altura de la base	Angulo del respaldo	Angulo muslos	Ángulo min. por debajo del plano	
<i>Invacare SB 755-120</i>	 1300 mm / 1200 mm	 2130 mm / 2080 mm	 350 - 820 mm 1600 - 2070 mm	 810 - 250 - 270 - 670 mm	 170 mm	 0 - 73°	 0 - 28° (4 funciones eléctricas)	 0° - 16° (4 funciones eléctricas)	
<i>Invacare SB 755-120</i>	 0° - 18° (4 funciones eléctricas)	 25° abajo 14° arriba (4 funciones eléctricas)	 SWL 235kg 200kg	 Uso bariátrico	<b>Colores de la cama y madera</b>				
					 Gris Aluminio (RAL0154)	 Haya	 <b>Cumple con el estándar de seguridad IEC 60601-2-52</b>		

Nota/ La cama no debe ser utilizada por pacientes menores de 12 años o en pacientes corporalmente equivalentes a niños de 12 años o menos.

Tel. (34) 972 493 214  
E-Mail: [contactsp@invacare.com](mailto:contactsp@invacare.com)  
[www.invacare.es](http://www.invacare.es)

Invacare S.A.  
Avenida del Oeste nº50, 11ª  
Valencia - CP: 46001  
España



Yes, you can.



© 2023 Invacare International GmbH. Todos los derechos reservados. Toda la información facilitada se supone correcta en el momento de la impresión. Invacare se reserva el derecho a modificar las especificaciones del producto sin previo aviso. SB755 - ES 01/2023