


Softform[®] Excel

Drukverlagende matras

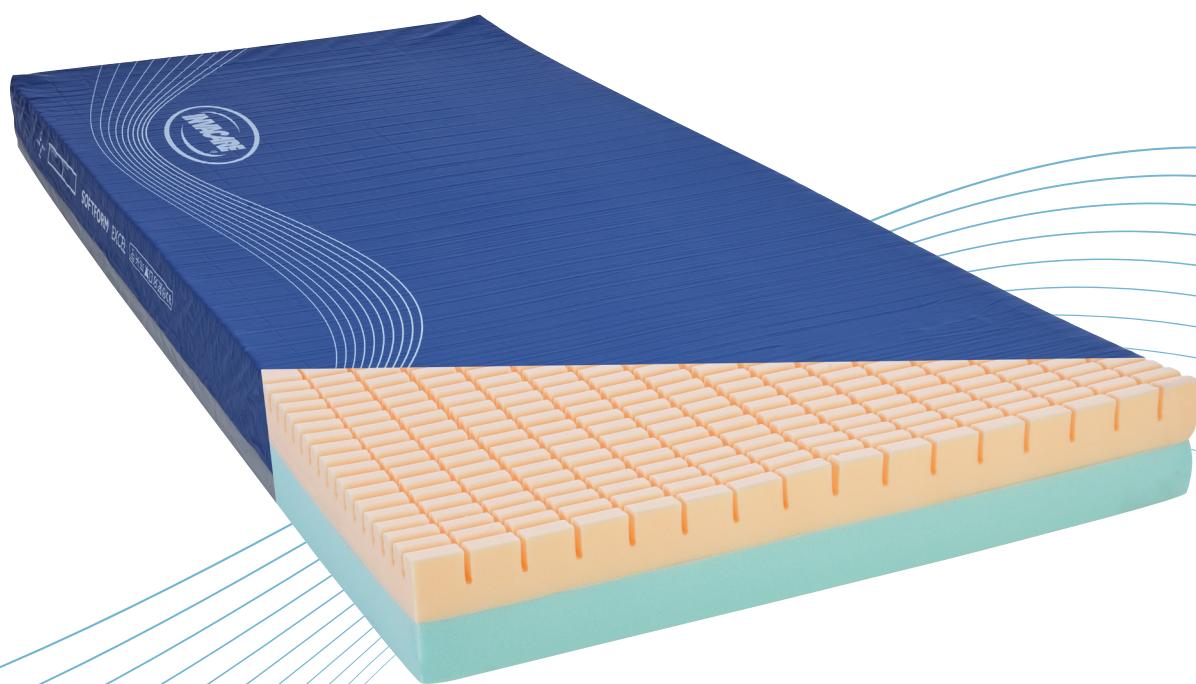

Yes, you can.[®]


Effectieve preventie van doorligwonden

De Invacare Softform Excel biedt een hoog niveau van comfort en is gemaakt van hoogwaardig schuim dat zorgt voor een gelijkmatige gewichtsverdeling voor meer comfort en drukverdeling. Met een robuuste schuimbodem voorkomt het dat de matras doorzakt en is het geschikt voor mensen met een risico op het ontwikkelen van doorligwonden.

De kern van de Invacare Softform Excel is opgebouwd uit een reeks 'keyhole cut'-cellen, die onafhankelijk bewegen om het gewicht gelijkmatig te verdelen.

De robuuste basis is voorzien van een stevige laag schuim met een hoge dichtheid voor substantiële ondersteuning.

De hoes zorgt voor een uitstekend herstel en duurzaamheid en helpt de schuif- en wrijvingskrachten te verminderen. De basis van de matras bestaat uit een versterkte PU coating die de matras beschermt bij gebruik met elektrische bedframes.

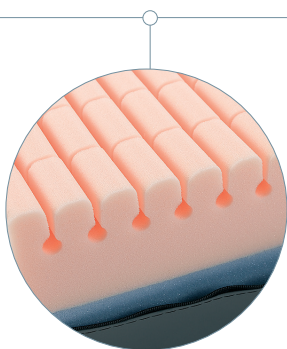

Sterke, duurzame constructie

- De Invacare Softform Excel is een **gevestigde keuze** van zorgprofessionals



Rits aan 3 zijden

- Ideaal voor **inspectie** van de matras en voor het reinigen van de hoes.



Oriëntatie symbool

- Het oriëntatie symbool zorgt ervoor dat de **matras correct in het bed ligt**.

Technische gegevens ▼

Meer uitgebreide voorverkoop informatie over dit product, inclusief gebruikshandleiding, kunt u vinden op www.invacare.be.



Breedte ▼



Hoogte ▼



Lengte ▼



Productgewicht ▼



Max. gebruikersgewicht ▼



Max. reinigingstemperatuur hoes ▼



Baltisch Blauw

Kleur

Single size:
800, 855, 880,
900 mm

152 mm

1950 mm

10 kg

140 kg

95 °C

Geproduceerd volgens Europese Normen:
BS EN 597-1 Cig,
BS EN 597-2 Match.
Schuim binnenkant:
BS 5852: 1990 Crib Source 5; Hoes BS7175:
1989 Crib Source 5.

1. Professionele zorg is essentieel bij het voorkomen van decubitus. Deze matras draagt op positieve wijze bij aan een zorgplan ter voorkoming van decubitus. Scholing, klinische beoordeling en actie-gebaseerde planning op basis van kwetsbaarheid zijn fundamentele factoren als het gaat om decubituspreventie. Een reeks beoordelingsschalen kan gebruikt worden als formele methode van risicobepaling en zou ingezet moeten worden tezamen met informele beoordeling (die van de zorgverlener).

Tel.: +32 (0)50 - 83 10 10
Email: marketingbelgium@invacare.com
www.invacare.be

Invacare N.V.
Autobaan 22
8210 Loppem
België



Yes, you can.