

Comet[®] Ultra



Gemaakt om goed en
betrouwbaar te ondersteunen



Ideaal voor mensen met een groter lichaam, biedt de **Comet^{Ultra}** een veilige, ondersteunende en krachtige rij ervaring zonder in te boeten op stijl of functionaliteit. Voorzien van alle veiligheidskenmerken en rij karakteristieken, die in de gehele **Comet** range aanwezig zijn, brengt de **Comet^{Ultra}** je snel en efficiënt naar je bestemming, comfortabel en gecontroleerd.

Kenmerken en opties



Verbeterde vering

Biedt superieur comfort voor grotere personen.



Reinforced seat column

Biedt extra stabiliteit en veiligheid.



Verstevigde hoogteen breedte instelbare armsteunen

Kunnen eenvoudig worden aangepast aan de gebruiker en bieden extra ondersteuning bij het open afstappen.

Kracht, betrouwbaarheid en aanpasbaarheid
















Dankzij een zorgvuldig doordacht ontwerpproces en een robuuste constructie zijn de veiligheid en stabiliteit van de Comet Ultra nooit reden voor zorg; ook voor gebruikers met een gewicht tot 220 kg. Ontwikkeld met hoogwaardige componenten en veiligheidskenmerken is de Comet Ultra een betrouwbare reisgezel, waar je ook heen gaat. Verder zorgen de flexibiliteit en aanpasbaarheid ervoor dat je de scootmobiel aan jouw unieke stijl en individuele voorkeur kunt aanpassen.


Compleet comfort en ondersteuning

De speciaal gevormde Ultra Seat-zitting is ontworpen in samenspraak met therapeuten om voor een optimale zitpositie en vergroot comfort te zorgen. Daarnaast zorgt een pneumatisch verstelbare lumbaalondersteuning voor nog meer comfort, indien nodig. De verstevigde zitbasis en instelbare armsteunen bieden uitstekende ondersteuning en zorgen ervoor dat de armsteunen extra ondersteuning kunnen bieden bij het op- en afstappen van de scootmobiel.

Technische gegevens




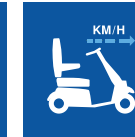





Raadpleeg de **Invacare website** voor meer informatie over dit product.

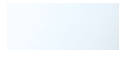	Breedte rugleuning	Zitdiepte	Zithoogte	Rughoogte	Totale breedte	Totale lengte	Ledig gewicht	Gewicht zwaarste deel
Comet^{Ultra}	 660 mm	 535 mm	 Min. 440 mm Max. 510 mm	 515 mm	 665 - 685 mm	 1450 mm	 148 kg	 circa 63 kg
Comet^{Ultra}	Max. gebruikergewicht	Accu capaciteit	Draaicirkel	Max. drempelhoogte	Bodemvrijheid	Max. veilige helling	Actieradius	Max. rijnsnelheid
Comet^{Ultra}	 220 kg	 2 x 12 V/75 Ah (C20) AGM	 2750 mm	 100 mm	 100 mm	 1°	 58 km	 10 km/h


	Vermogen
Comet^{Ultra}	 10km/h: 650 W / 1800 W ¹

1. Piekvermogen

Beschikbare kleuren

Marble White	Alium Blue	Jade Green	Luxor Beige	Crystal Copper
				
Carmine Red	Iconic Chrome	Diamond Silver	Electric Blue	Garnet red
				

Bekleding

Black Vinyl


Tel.: +31 (0) 3 18 - 69 57 57
Fax: +31 (0) 3 18 - 69 57 58
nederland@invacare.com
www.invacare.nl

Invacare B.V.
Galvanistraat 14-3 · 6716 AE Ede
Nederland

