

Essential Care

Matelas en mousse crénelée

Une surface de redistribution des points de pression
confortable pour les personnes présentant des
risques de développement d'escarres.




Une solution efficace

Pour le confort et la redistribution des points de pression



Yes, you can.®

Un matelas de grande qualité abordable

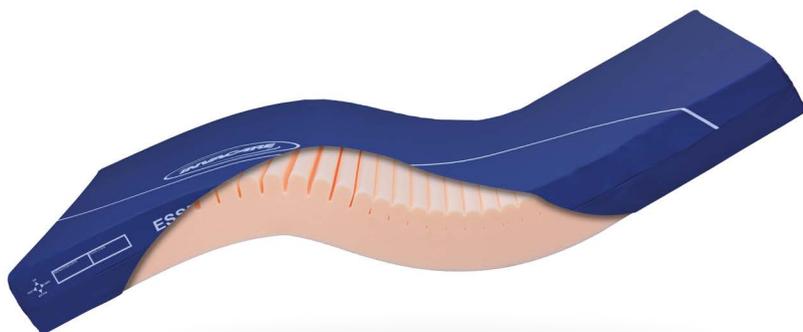

Redistribution des points de pression

- › Le crénelage aide à la distribution du poids sur une plus grande surface.
- › La mousse crénelée durable offre un enveloppement et une immersion optimale pour la redistribution des points de pression.
- › Excellentes propriétés de récupération.



Réduction du cisaillement et de la friction

- › Le crénelage horizontal aide à réduire les forces de cisaillement lorsque l'utilisateur bouge sur le lit.
- › Housse multi-extensible, résistante à l'eau, fabriquée à base de polyuréthane qui aide à réduire le cisaillement et la friction.
- › Soutien de la housse dans la réduction des forces de friction.



Confort

- › Les crénelures sont designées pour améliorer le soutien et le confort.
- › Housse zippée sur trois côtés avec une doublure intérieure blanche permettant une inspection facile des dommages subis.
- › Convient pour de multiples environnements de soins.

Caractéristiques techniques ▼

Pour plus d'informations sur ce produits, y compris le manuel d'utilisation, rendez-vous sur notre site internet: www.invacare.com



Tailles ▼



Poids max. utilisateur ▼



Température de lavage max. ▼

Hauteur 150 mm	1950 × 880 × 150 mm	140 kg	95°
	2000 × 880 × 150 mm		
	2050 × 880 × 150 mm		
Hauteur 120 mm	1780 × 780 × 120 mm	110 kg	95°
	1950 × 880 × 120 mm		

Manufactured to: BS EN 597-1 Cig, BS EN 597-2 Match and BS EN 7177: Crib Source 5

Les soins infirmiers essentiels sont cruciaux dans la prévention des escarres. Ce matelas contribuera positivement au résultat du plan de prévention des escarres. Education, jugement clinique et plans d'actions basés sur la vulnérabilité sont des facteurs fondamentaux dans la prévention des escarres. Une échelle d'évaluation peut être utilisée comme méthode formelle d'évaluer les risques de développement d'escarres et devrait être utilisée en combinaison avec une évaluation informelle (jugement infirmier).

Tel: **+33247626400**
contactfr@invacare.com
www.invacare.fr

Invacare Poirier S.A.S
Route de Saint Roch
37230 Fondettes
France



Yes, you can.®



© 2024 Invacare International Sarl. Tous droits réservés. Tout a été mis en oeuvre pour que cette publication soit la plus actuelle possible. Invacare se réserve le droit d'entreprendre à tout moment des modifications sans notification. Essential Range - FR - 01/2024