



Invacare® | **Softform Premier Original**

Une solution économique
pour la prévention des escarres

Trusted Solutions,
Passionate People



Invacare **Softform Premier Original** est un matelas avec de hautes spécifications conçu pour répondre aux exigences des collectivités.

Pratique et durable, ce matelas offre des niveaux exceptionnels de confort et de redistribution de la pression à un prix attractif.

Le **Softform Premier Original** est destiné pour les patients ayant un risque élevé voire très élevé de développement des escarres.

Prévention efficace d'escarre


Invacare **Softform Original** dispose d'un insert avec plots crénelés, fabriqué à partir de cellules à coupe géométrique, qui bougent indépendamment pour procurer un excellent confort au patient. Cela permet de réduire le cisaillement et le frottement optimisant ainsi la réduction de la pression.

L'espace entre les plots permet la circulation de l'air nécessaire, ce qui minimise l'accumulation de chaleur et d'humidité.

Cover is resistant to fluid ingress

La housse extérieure est imperméable, en polyuréthane. Cette caractéristique permet de réduire efficacement l'entrée de fluide dans le matelas.

Caractéristiques et options

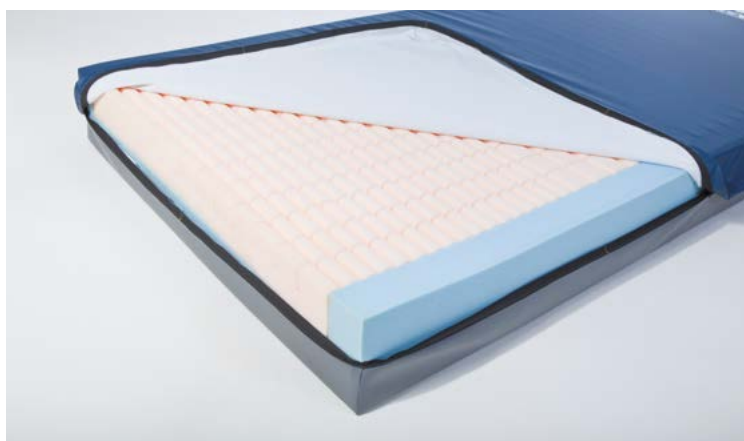

Ne nécessite pas de rotation






Ce matelas ne nécessite pas de tourner l'utilisateur, ce qui réduit significativement les manipulations effectuées par la tierce-personne.

Base en "U" monobloc

Facilite le transfert du patient en fournissant un soutien efficace de la paroi latérale. La densité ferme de la mousse empêche le matelas de s'affaisser.

Caractéristiques techniques

Pour plus de renseignements, rendez-vous sur notre site internet www.invacare.fr. Retrouvez-y le manuel d'utilisation ainsi que toutes les informations liées à ce produit.

Longueur x Largeur	Hauteur	Poids	Poids max. utilisateur	Lavage
				
2000 x 880 mm	152 mm	13 kg	247.6 kg	80°

Softform Premier Original

Couleur

Bleu



Tél. : +33 2 47 62 64 00
Fax : +33 2 47 42 12 24
Email : contactfr@invacare.fr
www.invacare.fr

INVACARE POIRIER S.A.S
Route de Saint Roch
37230 Fondettes
France

