

Softform Premier



Tryckavlastande skummadrass



Invacare **Softform Premier** är en antidecubitusmadrass, som är utvecklat i samarbete med vården. Resultatet är en tryckavlastande i världsklass, till brukare, där både komfort och tryckavlastning är av högsta vikt. Utformningen av **Softform Premier** är speciellt framtagen för extra tryckreducering av hämlarna. **Softform Premier** är användarvänlig med god hållbarhet samt ger enastående komfort och tryckavlastning.


Förebyggande av trycksår

Invacare Softform Premier är en tvådelad madrass, bestående av en yttre ram med ett inlägg av profilskurat skum, som är individuellt flexibelt. Profileringen är dessutom varierande. Under sätesdelen är profilerna större och nyckelhålsskurna. Detta gör hela liggytan effektivt tryckfördelning. Madrassen är testad på danska HMI med mycket goda resultat. Klinisk dokumentation finns. Trycksårförebyggande madrass som understödjer behandling av trycksår kategori 1-2.

Levereras med vätsketätt hygienöverdrag

Överdraget är elastiskt i flera riktningar och är tillverkat i 100 % vätsketätt polyuretan som ångandas. Överdraget har svetsade sömmar med droppkant över blixtlåset för extra skydd av skumkärnan.

Egenskaper

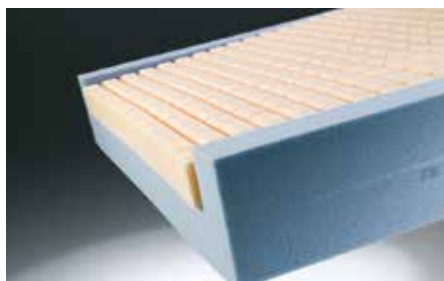

Reducerad/ form av inlägget vid hämlarna

Skummet i madrassens bendl är utformat för att ge bättre avlastning av brukarens hämlar, där risken för att utveckla trycksår många gånger är stor.



Enkel att transportera

Madrassen är utrustad med två bärhantag för att underlätta transport.



Tydlig markering av både skum och överdrag - „Denna sida upp“

Madrassen tillåter brukaren att sjunka ner i materialet, vilket ger en jämn fördelning av trycket.

Tekniska data




Softform Premier

83, 85, 88, 90 cm



2 meter

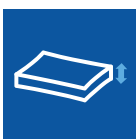

14 cm



13 kg



247.6 kg




80°

Brandtestat enligt Europeiska Standarder
BS EN 597:1 Cigarett, BS EN 597:2
Låga Skum: BS 5852: 1990 Crib: 5
Överdrag BS 7175: 1989 Crib: 5

Överdragets färg

Blå

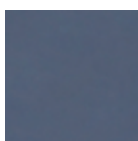

Kundservice: 08-761 70 90
Fax 08-761 81 08
sweden@invacare.com
www.invacare.se

Invacare AB
Box 66 - 163 91 Spånga
Sweden



Yes, you can.®

