

Invacare® | **Softform Premier MaxiGlide**



**Spécialement conçu pour limiter les effets de friction et de cisaillement**

Le matelas *Invacare Softform Premier MaxiGlide* est le dernier né de la gamme Invacare à posséder le système breveté 'Glide'.

Il procure au patient un excellent niveau de confort et est destiné à des patients ayant un risque d'escarre moyen à élevé, score de Norton inférieur ou égal à 14, alité plus de 15h/jour. Il est destiné en priorité au domaine hospitalier.



**Yes, you can.®**




### Un système breveté unique 'Glide'

Ce matelas est composé de deux parties distinctes regroupées dans une même housse. Celles-ci coulissent l'une sur l'autre grâce à une surface glissante, lors des mouvements du lit.

Cette conception innovante brevetée limite les risques de friction et de cisaillement au niveau des zones sensibles, particulièrement du sacrum et des talons. Densité de la mousse HR 40 kg/m<sup>3</sup>.

### Caractéristiques et Options

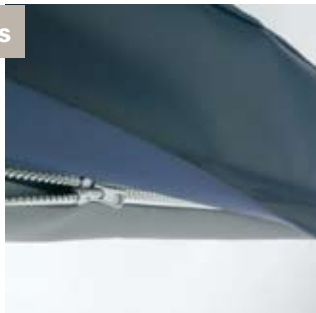


#### Fermeture éclair recouverte d'un rabat sur toute la longueur

Ce rabat permet une imperméabilité optimale et prévient les risques de maladies nosocomiales.



#### Housse Dartex cousue et soudée

Imperméable aux liquides, perméable à la vapeur d'eau, bio-compatible, bi-extensible.

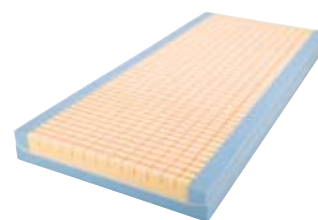

#### Prévention optimale des escarres

Plots souples et mobiles associés à une portance souple pour limiter les risques de friction et de cisaillement et assurer une bonne circulation de l'air.

### Caractéristiques techniques



Poids max utilisateur:  
247 kg



Housse lavable  
à 80°

**Softform  
Premier  
MaxiGlide**

#### Normes:

Mousse: EN NF 597 parties 1 et 2.  
Housse: EN NF 597 parties 1 et 2.

Lavage quotidien en utilisant des lingettes désinfectantes.

Invacare Poirier S.A.S.  
Route de Saint Roch  
37230 Fondettes France  
Tel. : +33 2 47 62 64 66  
Fax : +33 2 47 42 12 24  
Email : [contactfr@invacare.com](mailto:contactfr@invacare.com)  
[www.invacare.fr](http://www.invacare.fr)

© 2011 Invacare International Sàrl  
Tous droits réservés.

Indications données à titre d'information (information non contractuelle).  
Invacare se réserve le droit de modifier sans préavis les données techniques ou de présentations de ce produit.

Softform Premier MaxiGlide- FR  
11/2011

### Coloris



Bleu océan