



Image
Panneaux Suzanne
Barrières Britt V

Invacare® | **Alegio™** NG

Conçu pour un confort inégalé !



Un confort optimal est obtenu grâce au système breveté Auto Contour™ qui synchronise le relèvement buste et la plicature de genoux pour éviter les phénomènes de friction, de cisaillement et tout glissement vers le pied du lit.

Le lit Invacare **Alegio**_{NG} avec son coloris gris métallisé est adapté pour le domicile et la maison de retraite. Il dispose d'une très grande amplitude de réglage en hauteur du plan de couchage de 280 à 800 mm pour la plus grande satisfaction du patient et du thérapeute.

Alegio_{NG} est disponible en version standard et avec la possibilité d'ajouter de nombreuses options, en fonction des besoins de chaque patient.



Le système breveté Auto Contour™

Il procure un mouvement fluide et synchronisé entre le dossier et la plicature de genoux pour une position assise vraiment très confortable. Cette fonction minimise également le risque de glissement vers le pied du lit et réduit frictions et cisaillements. Les dimensions des différentes parties du plan de couchage sont optimales et ont été optimisées avec des études anthropométriques pour réduire les points de pression.



Un plan de couchage flexible

Alegio_{NG} est livré en standard avec 4 sections de plan de couchage. Le lit est facile à assembler et à configurer : avec le système Auto Contour™, avec plicature électrique (simple ajout d'un kit comprenant un vérin et une télécommande verrouillable), avec plicature et repose-jambes synchronisé, avec repose-jambes électrique sans plicature. Le relèvement-buste à translation est de série sur le plan de couchage 3 fonctions avec plicature et repose-jambes synchronisé. Les différents plans de couchage peuvent être rallongés de 150 mm pour les personnes de grande taille !

Facile à manipuler

L'assemblage se fait sans outil, notamment grâce à un système à démontage rapide entre le plan de couchage et la base et aucune pièce ne peut se perdre. 2 packagings selon vos besoins : lits en carton sur une palette ou sur trolley démontable.

Caractéristiques et options



Barrières Verso II (3/4)

Une barrière moderne et pliable en acier.



Barrière en bois Britt V sur toute la longueur

Disponible en hêtre ou en merisier.



Rallonger en hauteur

Barrières (sur toute la longueur) peuvent être rallongées en hauteur avec 150 mm.




Kit rallonge + 150 mm

Livré avec un insert de mousse housé Dartex.



Auto Contour™

Système breveté synchronisant la plicature de genoux au relèvement du buste pour un confort optimal en position assise. Permet de réduire les phénomènes de friction, de cisaillement et de glissement vers le pied du lit.

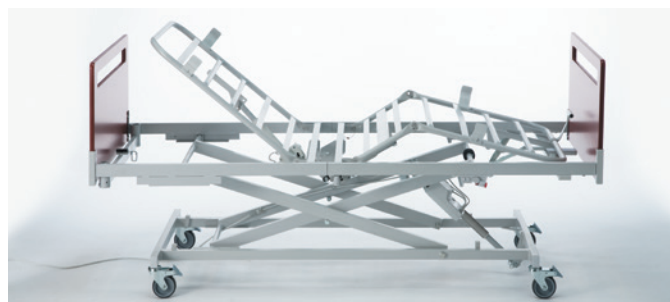

Commande électrique

Le dossier et la plicature de genoux peuvent être activés ou synchronisés séparément (manuellement).



Deux fonctions électriques avec réglage manuel des jambes.



Relève-buste à translation

Pour plus de confort en position assise, il réduit les phénomènes de friction, de cisaillement et évite de glisser vers le pied du lit.



Panneau Vibeke

Montés sur inserts en U pour permettre un stockage à plat des panneaux.



Panneau Susanne

Hêtre massif/ merisier avec rail pour barrières bois pleine longueur.



Trolley démontable

Pour faciliter les livraisons et le stockage.



Freins centralisés

Assurez les quatre roulettes à l'aide d'un frein à pied simple.



Mouvement simultané

La partie inférieure de la jambe fonctionne avec la partie supérieure de la jambe dans un mouvement fixe.



Quick release

Support de matelas facile à (dé) monter.

Caractéristiques et options



Trolley démontable

Pour faciliter le transport et le stockage.



Kit de transport

Pour le stockage à champ du lit entièrement monté.



Potence d'angle

Légère et simple d'utilisation, poignée réglable en hauteur et en profondeur permettant une préhension à 2 mains.



Télécommandes

Verrouillables ou non verrouillables.

Données techniques

Pour plus de renseignements, rendez-vous sur notre site internet www.invacare.be/fr. Retrouvez-y le manuel d'utilisation ainsi que toutes les informations liées à ce produit.

	Largeur hors tout ¹	Longueur hors tout	Réglage en hauteur ²	Section de plan de couchage	Relève-buste	Plicature genoux	Legrest lift
<i>Invacare Alegio_{NG}</i>	900 mm 950 mm	2090 mm 2110 mm	280 - 800 mm	800-230- 300-670 mm	0 - 70°	0 - 33° ³	0 - 18°

	Poids total du produit	Poids max utilisateur	Partie du plan de couchage la plus lourde
<i>Invacare Alegio_{NG}</i>	78 kg ⁴	SWL 170 kg 135 kg	35 kg

Conforme à la norme, IEC 60601-2-52

1. Sans barrières
2. Avec roues 100 mm et frein indépendants
3. Avec vérin
4. Avec panneaux, sans barrières

NB/ Le lit ne doit pas être utilisé pour des patients dont l'âge est inférieur à 12 ans ou dont la taille est équivalente ou plus petite à celle d'une personne de moins de 12 ans.

Coloris plan de couchage et bois

Light grey

White beech



Les couleurs peuvent légèrement varier de celles présentées dans cette brochure.

Tel.: +32 (0)50 - 83 10 10
Fax: +32 (0)50 - 83 10 11
Email: belgium@invacare.com
www.invacare.be

Invacare N.V.
Autobaan 22 - 8210 Loppem
Belgium

