

Familia Medley® Ergo



Ergonómica y funcional.



Yes, you can.®

Invacare **Familia Medley Ergo**

La familia **Medley Ergo** es la combinación perfecta entre economía, funcionalidad y calidad. Las medidas de los planos de la familia **Etude Medley Ergo** incrementan la comodidad de usuarios de todas las alturas cuando la articulan. Además disponible como opción las posiciones Trendelenburg y Antitrendelenburg para las patologías que así lo requieran.

La familia **Medley Ergo** la componen la **Medley Ergo**, **Medley Ergo Select** y **Medley Ergo Low** adecuadas para todos los ambientes, por sus formas estilizadas, color de la madera y toda su estructura en conjunto.



Reducción de fricciones

Las diferentes secciones del somier se han diseñado considerando estadísticas antropométricas y recomendaciones de mapas de presiones, dando como resultado:

- Mayor comodidad para el usuario al articular la cama.
- Reducción de fricciones.
- Minimización de deslizamientos hacia adelante.
- Posicionamiento óptimo para usuarios pequeños o inestables.

La altura ya no es un problema

El diseño flexible de la familia **Medley Ergo** permite montar el somier en cualquiera de las dos alturas disponibles en las fijaciones del cabecero/piecerero. Estos rangos de altura facilitan los cuidados diarios y las transferencias del paciente. Esto se logra por un único sistema de acoplamiento que permite que el somier sea montado en dos posiciones con una diferencia entre ellas de 7cm. Todas las barandillas cumplen con el estándar: IEC 60601-2-52.

Características



Dimensiones ergonómicas del somier

Longitud de las secciones considerando las recomendaciones expertas de medidas antropométricas y de mapas de presiones para reducir fricciones e incrementar la comodidad de los usuarios.



Posibilidad de dos alturas

Rangos de altura por el montaje en los cabeceros y pieceros :
Medley Ergo & Select : 33-73cm. o 40-80cm.
Medley Ergo Low : 22-62 cm. o 29-69 cm.

Más trabajo hecho en menos tiempo

La familia **Medley Ergo** ha sido especialmente diseñada para trabajar en ambientes transitorios de residencias y centros médicos. Es muy fácil de montar y desmontar, lo que facilita su movimiento y reinstalación en diferentes lugares. No requiere herramientas especiales, ahorrando tiempo, dinero y esfuerzo.



Mando

Mando con bloqueo de funciones individuales. Diferente para las opciones con Tren y Antitrendelenburg.

Versiones



Medley Ergo

La cama **Medley Ergo** es la combinación perfecta entre funcionalidad, precio y calidad.

- Cuatro planos ergonómicos de metal.
- Tres planos articulan eléctricamente y el cuarto plano con cremallera.
- Mando con bloqueo individual de funciones.
- Dos opciones de funcionamiento : con o sin Trendelenburg.
- Dos configuraciones disponibles de **Medley Ergo** que incluyen : cabecero/piecero, somier, incorporador y se diferencian por sus **barandillas de madera o barandillas de metal**.



Medley Ergo Select

Es la versión de cama más atractiva y domiciliaria de la familia.

- Cuatro planos ergonómicos de metal
- Tres planos articulan eléctricamente y el cuarto plano con cremallera.
- Mando con bloqueo individual de funciones.
- Dos opciones de funcionamiento : con o sin Trendelenburg.
- Dos versiones completas de **Medley Ergo Select** que incluyen : cabecero/piecero con **embellecedor de madera color haya**, incorporador, barandillas de madera y se diferencian por, tener o no, la función de Tren y Antitrendelenburg.



Medley Ergo Low

La posibilidad de posicionar la cama a un nivel **extra bajo** incrementa la seguridad de los usuarios.

- Cuatro planos ergonómicos de metal.
- Tres planos articulan eléctricamente y el cuarto plano con cremallera.
- Rango de elevación **21 - 61cm y 28 - 68 cm**.
- Mando con bloqueo individual de funciones.
- Dos opciones de funcionamiento : con o sin Trendelenburg.
- Dos configuraciones disponibles de **Medley Ergo Low** que incluyen : cabecero/piecero, somier, incorporador y se diferencian por sus **barandillas de madera o barandillas de metal**.

Características y opciones



Incorporador

El triángulo incorporador puede ser ajustado en altura y profundidad. Se incluye en todas las versiones.



Extensión de Somier

Kit de extensión de somier en 15cm. Se debe utilizar en combinación con las barandillas extendidas



Cobertura de Madera


Se puede colocar como accesorio para las **Medley Ergo** y **Medley Ergo Low** la cobertura de madera de la Select.



Kit de extensión +15cm

Disponible inserto de colchón como accesorio.

Características y opciones

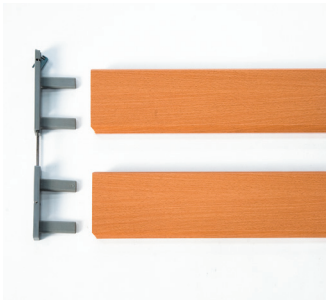

Barandilla Bella

Barandillas de largo completo en madera. Se montan sin herramientas y están disponibles en versión extendida. Con asa para sujetarlas.



Barandilla Aria

Barandillas de largo completo en metal. Se montan sin herramientas, doble anclaje.



Incorporador con base

Accesorio independiente ideal para cualquier entorno.



Colchón de suelo

Accesorio de seguridad para **Medley Low**, 3 secciones plegables para almacenarlo. Medidas 198 x 65 x 5cm.

Datos técnicos

Para obtener información más completa acerca de este producto incluyendo el manual del usuario, consulte la página web www.invacare.es

	Ancho total/ Ancho de somier	Largo externo/ Largo interior	Ajustes de altura ¹	Dimensiones del somier	Angulo del respaldo	Angulo de las piernas	Angulo de inclinación (Trendelenburg) ²
Medley Ergo	1020 mm 900 mm	2240 mm 2080 mm	400 - 800 mm / 330 - 730 mm	800 - 230 - 300 - 670 mm	0 - 70°	0 - 24°	11°
Medley Ergo Low	1020 mm 900 mm	2240 mm 2080 mm	280 - 680 mm / 210 - 610 mm	800 - 230 - 300 - 670 mm	0 - 70°	0 - 24°	11°

	Peso	Peso máx. usuario	Parte más pesada
Medley Ergo	64 kg	SWL 180 kg 145 kg	17 kg
Medley Ergo Low	64 kg	SWL 180 kg 145 kg	17 kg

Cumple con el estándar de seguridad IEC 60601-2-52

Nota/ La cama no debe ser utilizada por pacientes menores de 12 años o en pacientes corporalmente equivalentes a niños de 12 años o menos.

1. Con láminas de metal.
2. La función de Trendelenburg deberá ser utilizada bajo prescripción y vigilancia médica.

Colores de la cama y madera



Funcionamiento y como lograr una posición sentada en la **Medley Ergo**.



Montaje de la **Medley Ergo**

Tel. (34) 972 493 214
E-Mail: contactsp@invacare.com
www.invacare.es

Invacare S.A.
Avenida del Oeste nº50, 11ª
Valencia - CP: 46001
España



Yes, you can.