

Move Up



**Le fauteuil qui allie
confort et mobilité**

Design moderne | 4 roues | Confort



Yes, you can.

Le Move Up enrichit la gamme de fauteuils releveurs Invacare, en intégrant de nouvelles fonctionnalités, gage de confort, de mobilité et d'esthétisme.

4 roulettes pour plus de confort

Disponible en version électrique, 1 moteur, le Move Up affiche un design entièrement redessiné. Son style accueillant et chaleureux propose un dossier moelleux et rembourré. Pour un confort optimal, des appuis-tête latéraux ont été intégrés au dossier. La forme des accoudoirs avec des angles arrondis favorise un bon confort des membres supérieurs et une meilleure circulation du sang.

Le Move Up se démarque grâce à son mécanisme innovant d'activation des 4 roulettes qui permet de déplacer le fauteuil avec le patient au sein de son lieu de vie. Son allure subtile et élégante s'intègre aisément dans la plupart des environnements.



Système d'activation unique des 4 roulettes

Afin de déplacer le fauteuil d'une pièce à une autre, le Move Up est équipé de 4 roulettes escamotables. L'activation se fait sans effort par le biais d'une pédale à l'arrière du fauteuil. L'utilisateur a la possibilité de rester assis confortablement dans son fauteuil durant la transition. Afin de retrouver sa stabilité initiale, la même pédale peut être utilisée pour rétracter les roulettes et assurer une sécurité lors de son usage.

Activation



Rétractation



Un design moderne et élégant

Découvrez notre nouveau revêtement Heritage, conçu avec des matériaux plus durables et résistants. Ses propriétés imperméables et déperlantes favorisent la pérennité du tissu. Facile d'entretien, les tâches se retirent aisément à l'aide un chiffon humide.

Ce modèle est disponible en deux coloris :

- Heritage Camel pour une allure cosy et raffinée.
- PVC/Polyester gris pour un design chic et tendance.



5

DES CARACTÉRISTIQUES UNIQUES

1

Dossier avec appuis-tête latéraux intégrés

- ▶ Soulage les cervicales.
- ▶ Conçu pour offrir un confort et un maintien optimal.

2

Nouveaux coussins

- ▶ Amélioration de la conception avec un dossier hautement rembourré.
- ▶ Revêtement du dossier amovible pour un lavage en machine.

3

Mécanisme innovant pour l'activation des roulettes

- ▶ Pédale simple d'accès et facilement actionnable.
- ▶ L'utilisateur peut rester dans son fauteuil durant l'action.

4

Pochette latérale

- ▶ Facile d'accès, la pochette est idéale pour y glisser la télécommande.

5










Inclinaison motorisée

- ▶ Inclinaison du dossier et du repose-pieds en simultané.
- ▶ Continuité entre l'assise et le repose-pieds.




Données techniques ▼


Pour plus d'information sur ce produit, veuillez vous référer aux manuels d'utilisation et de maintenance disponibles sur www.invacare.be/fr.

| | | | | | | |
|---|---|---|--|---|---|--------|
|  |  |  |  |  |  | |
| Position Relax ▼ | Position Releveur ▼ | Continuité entre l'assise et repose-pieds ▼ | Prof. d'assise ▼ | Hauteur d'assise ▼ | Largeur d'assise ▼ | |
| <i>Move Up</i> | ◆ | ◆ | ◆ | 480 mm | 500 mm | 480 mm |
|  |  |  |  |  |  | |
| Inclinaison maximum du dossier ▼ | Hauteur hors tout ▼ | Largeur hors tout ▼ | Profondeur hors tout fermé ▼ | Profondeur hors tout ouvert ▼ | Recul nécessaire pour inclinaison maximale ▼ | |
| <i>Move Up</i> | 120° | 1110 mm | 770 mm | 970 mm | 1580 mm | 360 mm |
|  |  |  |  | | | |
| Hauteur sol/accoudoirs ▼ | Poids maximum utilisateur ▼ | Poids du produit ▼ | Densité de la mousse ▼ | | | |
| <i>Move Up</i> | 640 mm | 120 kg | 65 kg | Dossier 28kg/m ³ Accoudoirs 23kg/m ³ | | |

Coloris revêtements ▼

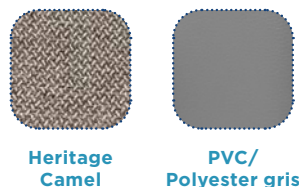

Entretien revêtement Heritage ▼

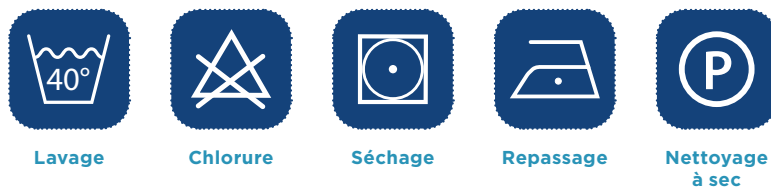

Tél. : +32 (0)50 83 10 10
marketingbelgium@invacare.com
www.invacare.be/fr

Invacare SA
 Autobaan 22
 8210 Loppem
 Belgique



Yes, you can.