

Move Up



El sofá que combina el
confort y la movilidad

Diseño moderno | Cómodo | Con 4 ruedas



Yes, you can.

El Move Up llega para completar la gama de sofás de Invacare, con nuevas características y más funcionalidades, pero sin dejar de lado todas las ventajas del resto de modelos de la gama Invacare.

Con 4 ruedas y con prioridad en la comodidad

Disponible en versión de 1 motor, el Move Up tiene un nuevo diseño de los cojines, apoyos laterales de cabeza integrados en el respaldo y un mecanismo innovador de activación de las 4 ruedas. Gracias a su diseño moderno y elegante, el sofá Move Up es una excelente opción para un entorno tanto domiciliario como institucional.

Este modelo está disponible en tejido Heritage Camel y en Polipiel Gris.



Sistema único de activación de las 4 ruedas

Para permitir el desplazamiento del sofá por distintos ambientes del domicilio o institución, el Move Up está equipado con 4 ruedas. Activando un pedal instalado en la parte trasera, el cuidador consigue extraer, sin apenas esfuerzo, las cuatro ruedas aún con el usuario sentado en el sofá para realizar los desplazamientos. Una vez realizado el movimiento basta con utilizar el mismo pedal para recoger las ruedas y de esta forma estabilizar el sofá.



Diseño moderno y elegante

Gracias a un concepto completamente diferente de los otros sofás de la gama Invacare, el Move Up es inconfundible. Desde el respaldo totalmente rediseñado, más envolvente gracias a los soportes laterales, hasta los cojines con un nuevo diseño con prioridad en la comodidad y el máximo apoyo de los usuarios. Además, los reposabrazos disponen de esquinas redondeadas y las costuras en el tejido aportan al sofá un aspecto más refinado y exclusivo.

5 CARACTERÍSTICAS EXCLUSIVAS

1 Respaldo con apoyos laterales

- ▶ Más cómodo y más envolvente
- ▶ Un diseño más robusto.

2 Nuevos cojines

- ▶ Diseño renovado para integrarlos mejor con el sofá.
- ▶ Pensados para ofrecer el máximo apoyo y comodidad al usuario.



3 Mecanismo innovador para activar las ruedas

- ▶ El cuidador puede activar las ruedas fácilmente sin apenas esfuerzo.
- ▶ El mecanismo de las ruedas puede activarse incluso con el usuario sentado en el sofá.

4 Bolsillo lateral rediseñado

- ▶ El nuevo diseño y posicionamiento del bolsillo lateral aportan un aspecto más moderno y elegante.

5 Articulación eléctrica


- ▶ El sofá articula eléctricamente hasta la posición relax o la de incorporación. La posición relax, reclina el respaldo y eleva las piernas simultáneamente. Para la posición de incorporación, la base del sofá sube y ayuda al usuario a salir del sofá.

Datos técnicos ▼

Para obtener información más completa acerca de este producto incluyendo el manual de usuario, consulte la página web www.invacare.es

					
Posición relax ▼	Posición de incorporación ▼	Continuidad entre asiento y reposapiés ▼	Profundidad de asiento ▼	Altura de asiento ▼	Ancho de asiento ▼
Move Up	◆	◆	◆	480 mm	500 mm
					
Inclinación máxima del respaldo ▼	Altura total ▼	Anchura total ▼	Profundidad total (cerrado) ▼	Profundidad total (abierto) ▼	Distancia pared con max. inclinación del respaldo ▼
Move Up	120°	1110 mm	770 mm	970 mm	1580 mm
					
Altura suelo reposabrazos ▼	Peso máximo usuario ▼	Peso total ▼	Densidad de la espuma ▼		
Move Up	640 mm	120 kg	65 kg	Asiento 28kg/m ³ Reposabrazos 23kg/m ³	

Tejido y colores ▼

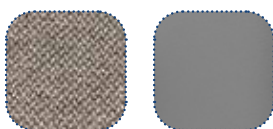

Heritage Camel

Polipiel Gris

Códigos ▼

1673370 MoveUp Heritage Camel

1673371 MoveUp Polipiel Gris

Tel. (34) 972 493 214
E-Mail: contactsp@invacare.com
www.invacare.es

Invacare S.A.
Avenida del Oeste nº50, 11º
Valencia - CP: 46001
España

© 2022 Invacare International GmbH. Todos los derechos reservados. Toda la información facilitada se supone correcta en el momento de la impresión. Invacare se reserva el derecho a modificar las especificaciones del producto sin previo aviso.
Move Up - ES 06/2022



Yes, you can.