

# NordBed™ Optimo



ERGOMOVE™ TEKNOLOGI | ØGET UAFHÆNGIGHED |  
OPTIMERET SELVHJÆLP



**Nordbed Optimo** - den ideelle seng til hjemmeplejen og plejehjem. Nordbed Optimo tilbyder ekseptionel høj komfort, og den understøtter og opbygger borgerens mulighed for selvhjælp, og øger mobiliteten. Nordbed Optimo's nye **ErgoMove teknologi** sætter forebyggelse, pleje og behandling af tryksår i centrum.

## ErgoMove teknologi

Invacare **Nordbed Optimo** leveres med indbygget **ErgoMove teknologi**, der komfortabelt bringer borgeren fra en liggende position til en aktiv siddende position, og tilbage til horizontal position, blot ved tryk på 1 enkelt tast. Den aktive siddestilling understøtter borgerens mulighed for at spise, drikke og læse. ErgoMove bevægelsen sikrer, at borgeren ikke glider ned i sengen, hvorved **tryk, shear og friktionskræfter reduceres**.

Liggefladens dele ved ryg, hofte og knæ følger kroppens naturlige inddeling. Dette, i samspil med en indbygget ryglænstilløbepåføring, der sikrer, at madrassen ikke glider ned, kompenserer for bevægelsen og reducerer shear kræfter signifikant, når borgeren bringes til en siddende position.

ErgoMove teknologien minimerer behovet for hjælp i forbindelse med positionering af borgeren.

**PATENT PENDING**



## Enkel håndtering

Optimo plejesengen **kan adskilles i 5 dele**, hvoraf **ingen af delene vejer mere end 24 kg**. Dette forenkler håndtering og transport af plejesengen, som på den måde kan flyttes også i trange omgivelser. Optimo plejesengen tilgodeser således gode arbejdsvilkår for personalet.

Samling og adskillelse af Nordbed Optimo sker enkelt og intuitivt. Sengens dele **placeres på understellet**, hvilket forenklet transport mellem bil og bopæl. Nordbed Optimo er **kompakt, meget stabil og særdeles nem at opbevare**, når delene er placeret på understellet.

Nordbed Optimo leveres med vaskbar elektronik, der **tåler vask i vaskemaskine** med henblik på optimal hygiejne og arbejdsvilkår.



## Selvhjælp, mobilitet og forebyggelse af fald

### Op-og-Ud funktion

► Optimo plejesengen leveres med en "Op-og-Ud" funktion, der skaber en sikker og komfortabel udstigning. Denne funktion indstiller automatisk ryglænet og højden på liggefladen, og forenkler således udstigning. På denne måde optimeres borgerens mobilitet og mulighed for selvhjælp og uafhængighed.

### Design

► Nordbed Optimo leveres i moderne design, med flere valgmuligheder.

4

### UNIKKE EGENSKABER

1

### ErgoMove teknologi

- Den unikke ErgoMove teknologi bringer borgeren til en komfortabel siddeposition og tilbage til horisontal position, uden at borgeren glider nedad i løbet af processen, og der er derfor ikke behov for repositionering.
- Minimerer risiko for shear.

2

### Enkel håndtering

- Optimo plejesengen adskilles enkelt i 5 dele, uden brug af værktøj. Ingen dele vejer mere end 24 kg.
- Dele samt tilbehør placeres nemt på understellet med henblik på at lette transport og opbevaring.
- Maskinvaskbar elektronik forenkler rengøringen.



3

### Op og Ud funktion

- Sikker og enkel forflytning.
- Understøtter et ergonomisk bevægelsesmønster.

4

### Optimal inddeling af liggefladen

- I overensstemmelse med antropometriske statistikker.

## Egenskaber

- **Personlig profil:**
  - Programmerbar med LCD håndbetjening (option)
  - Personlig indstilling af Ergomove og udstigningshøjde
- **Integreret forlængelse af liggefladen**
  - + 10 cm i både hoved- og benende
- **Anti Trendelenburg og som option Trendelenburg**
  - Støtte til plejepersonale i forbindelse med repositionering af borger
  - Letter redistribuering af tryk
- **Natbelysning (option)**
  - Nem at betjene
  - Øger sikkerheden og forebygger fald



- ▶ De mest anvendte taster har let genkendelige farver. Farverne er udvalgt i samarbejde med eksperter.
- ▶ Med henblik på at forenkle valget af den ønskede funktion, tændes der lys over tasterne, når blot een tast aktiveres.
- ▶ De mest anvendte taster er placeret øverst på håndbetjeningen, og indstillingstasterne nederst.
- ▶ Håndbetjeningen er som standard låsbar.

## Håndbetjening ▲

### Tydelige farver

Farverne er enkle at kende fra hinanden - til støtte for især svagtseende borgere.

## Tekniske data ▼


Ved behov for yderligere information om produktet henvises til brugermanualen som kan hentes på Invacares hjemmeside [www.invacare.dk](http://www.invacare.dk)




Udvendig bredde  
Indvendig bredde



Udvendig længde  
Indvendig længde

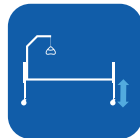

Højdeindstilling

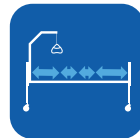

Mål på  
liggefladedele ▼



Frihøjde ▼



Lårvinkel ▼

<b>NordBed Optimo</b>	100 / 90 cm	213 / 200 cm	32* - 81 cm	80-17-30-65 cm	15 cm	49°
-----------------------	-------------	--------------	-------------	----------------	-------	-----



Benstøtteløft ▼



Anti-Trendelenburg /  
Trendelenburg ▼



Max. brugervægt ▼



Total vægt ▼



Produktets tungeste del ▼



Dokumenteret maskinvaskbar


<b>NordBed Optimo</b>	19°	+/- 15°	200 kg	100 kg	24 kg	Ja
-----------------------	-----	---------	--------	--------	-------	----

**NB:** Plejesengen må ikke anvendes af børn under 12 år eller af patienter, hvis kropsstørrelse svarer til en normal 12 årig, eller mindre.

\* Som option kan Optimo leveres med højdeindstilling 28-78 cm

## Stelfarve ▼

## Træfarve ▼

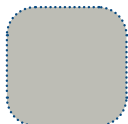

Aluminium grå



Bøg



Eg



Umber



Bøg/lys blå



Lys blå



Hvid

Tlf.: 3690 0000  
Fax: 3690 0001  
[denmark@invacare.com](mailto:denmark@invacare.com)  
[www.invacare.dk](http://www.invacare.dk)

Invacare A/S  
Sdr. Ringvej 37, 2605 Brøndby  
Denmark



© 2019 Invacare International Sàrl. All rights reserved. All information er ved trykningstidspunktet korrekt. Invacare forbeholder sig retten til at foretage konstruktionsændringer uden forudgående varsel. NordBed Optimo - DK - 06/2021

