

rea[®]

Clematis[®] Pro



Confort optimal | Réglages faciles | Design compact



Une évolution dans la gamme des fauteuils roulants multi-positions

Notre nouveau Rea **Clematis Pro** a été conçu pour améliorer le confort et l'ergonomie pour l'utilisateur et la tierce-personne. Inspiré du célèbre Rea **Clematis**, ce nouveau fauteuil roulant de confort apporte de nouvelles caractéristiques pour assurer un niveau élevé de confort, de stabilité et de sécurité.

Un confort optimal grâce au dossier modulable

Le **Clematis Pro** est doté de série d'un nouveau dossier souple qui, en combinaison du nouveau coussin de dossier Laguna permet une meilleure immersion. Cela offre plus de confort, de stabilité latérale et de sécurité aux utilisateurs.

Le système de dossier modulable permet de passer facilement et rapidement du dossier souple (avec ou sans sangle réglable en tension) à un dossier plus traditionnel avec une plaque rigide. Cela permet une adaptation rapide et facile aux différents besoins des utilisateurs. L'inclinaison du dossier est de 30°.



DSS® (Dual Stability System)

La technologie unique du DSS permet de garantir la stabilité du fauteuil dans toutes les positions de bascule d'assise et d'inclinaison de dossier. La bascule d'assise à 25° a été élaborée de manière à améliorer la redistribution des points de pression et le point de pivot haut du dossier permet de réduire les effets de cisaillement.



Design Compact

La compacité du châssis procure une excellente manoeuvrabilité pour un usage intérieur. Les roues arrière ont été avancées pour faciliter l'accès aux mains-courantes et offrir une meilleure maniabilité lors de la propulsion. La largeur hors-tout a été optimisée et est de l'ordre de + 190 mm par rapport à la largeur d'assise.



7

CARACTÉRISTIQUES

1

Dossier modulable

- ▶ Rapide et facile à changer pour s'adapter au mieux aux besoins des utilisateurs
- ▶ Trois types de dossier disponibles sur la version configurée
- ▶ Adéquation précise en fonction des différentes pathologies

2

Bascule d'assise plus importante

- ▶ Bascule d'assise de série à 25°
- ▶ Assure une bonne redistribution des points de pression

7

Nouveau système de réglage en largeur

- ▶ Système de double supports d'accoudoirs de série permettant d'augmenter la largeur d'assise de +50 mm (+25 mm par côté)
- ▶ Réglage simple, sans outil et facile d'accès

3

Plaque d'assise réglable en profondeur

- ▶ Réglage en profondeur en continu et qui intègre les repose-jambes (système de tiroir)

6

Dual Stability System

- ▶ Stabilité accrue dans toutes les positions de bascule d'assise
- ▶ Dossier avec point de pivot haut, permet de réduire les effets de cisaillement

5

Châssis Compact

- ▶ Facile à manier dans les espaces les plus exigus
- ▶ Optimisé pour une utilisation intérieure
- ▶ Roulettes anti-basculés pour un maximum de sécurité

4

Repose-jambes à compensation

- ▶ Réglables en largeur (+50 mm par côté)
- ▶ Permettent de faire varier l'angulation des jambes
- ▶ Appui-mollets réglables en hauteur et en profondeur
- ▶ Palettes réglables en hauteur, en profondeur, en inclinaison et en largeur pour définir la position idéale des pieds

Autres caractéristiques

- ▶ **Nouvelle gouttière étroite sans rotation**
 - La gouttière étroite en une seule pièce entièrement moulée assure un maintien optimal des coudes lorsque le fauteuil est en position inclinée.
 - Facile à nettoyer pour une meilleure prévention des risques d'infection
- ▶ **Nouveau coussin de dossier Laguna**
 - Améliore le confort, l'immersion et le maintien latéral



Autres options disponibles

- Tablette
- Demi-tablette et coussin de demi-tablette
- Plot d'abduction amovible
- Cale-troncs
- Gouttière à rotation latérale indexée
- Système de verrouillage des inclinaisons
- Support de repose-jambes à 85°
- Housse de coussin d'appui-tête
- Revêtements rembourrés pour palettes
- Protège-rayons
- Système de verrouillage des inclinaisons pour assise et dossier

Caractéristiques techniques ▼

Pour plus de renseignements, rendez-vous sur notre site internet www.invacare.be/fr. Retrouvez-y le manuel d'utilisation ainsi que toutes les informations liées à ce produit.



Largeur d'assise ▼



Profondeur d'assise ▼



Hauteur d'assise ▼



Hauteur de dossier ▼



Hauteur des accoudoirs ▼

Rea Clematis Pro

390 - 440 mm
440 - 490 mm
490 - 540 mm

430 - 500 mm

400 - 450 mm

570 mm - 710 mm

230 - 350 mm




UL ▼



Bascule d'assise ▼



Inclinaison de dossier ▼

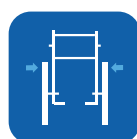

Largeur hors-tout ▼
Largeur d'assise + 190 mm



Hauteur hors-tout ▼

Rea Clematis Pro

355 - 465 mm

0° - 25°

0° - 30°

Largeur d'assise + 190 mm

1200 - 1550mm



Longueur hors-tout avec repose-jambes ▼



Poids du fauteuil ▼



Poids max. utilisateur ▼



Poids de transport ▼



Pente maximum d'utilisation de freins de stationnement ▼

Rea Clematis Pro

995 mm - 1470 mm


À partir de 30 kg

135kg

À partir de 20 kg

7°

Coloris de châssis ▼

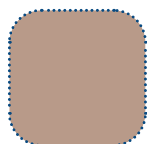

Beige Nacré



Noir TR26

Revêtement du siège ▼



Dual Stability System

Rea, Rea design et DSS (Dual Stability System) sont des marques déposées de Invacare International. Le Rea Clematis Pro est développé avec le DSS (Dual Stability system). Il offre à l'utilisateur une stabilité et une sécurité accrues lorsque la bascule d'assise ou l'inclinaison de dossier est activée.

Tél.: +32 (0)50 83 10 10
marketingbelgium@invacare.com
www.invacare.be/fr

Invacare NV
Autobaan 22
8210 Loppem
Belgique



Yes, you can.®

© 2019 Invacare International GmbH. Tous droits réservés. Indications données à titre d'information (non contractuelle). Invacare se réserve le droit de modifier sans préavis les données techniques ou de présentation de ce produit.
Rea Clematis Pro - BE - 10/2020

