

rea[®]

Clematis[®] Pro



Optimaal comfort | Eenvoudig aanpasbaar | Compact design



Een evolutie in het assortiment kantelrolstoelen

Onze nieuwe *Rea Clematis Pro* is ontworpen om het comfort en de ergonomie voor de gebruiker en de begeleider te verbeteren. Gebaseerd op de reeds gekende *Rea Clematis*, omvat deze nieuwe verzorgingsrolstoel nieuwe functies om een uitstekend niveau van comfort, stabiliteit en veiligheid te garanderen.

Optimaal comfort dankzij de verstelbare rugleuning

De Clematis Pro wordt standaard geleverd met een nieuwe zachte rugleuning die in combinatie met het nieuwe Laguna rugkussen een goede onderdempeling biedt. Dit zorgt voor meer comfort, laterale stabiliteit en veiligheid bij de gebruikers.

Door het modulaire rugleuningsysteem kunt u eenvoudig en snel wisselen van de flexibele rugleuning (met of zonder verstelbare spanbanden) naar een meer traditionele rugleuning met een rigide plaat. Dit maakt een snelle en gemakkelijke installatie mogelijk om te voldoen aan de behoeften van de gebruikers. De hellingshoek van beide rugleuningen is 30°.



DSS® (Dual Stability System)

Het uniek DSS-systeem zorgt voor een uitstekende stabiliteit van de rolstoel bij kantelen en achteroverleunen. De zitting kantelt tot 25° en is ontworpen om schuifkrachten te minimaliseren en de drukverdeling te verbeteren.



Compact design

De compactheid van het frame biedt uitstekende wendbaarheid voor gebruik binnenshuis. De achterwielen zijn naar voren verplaatst om de toegang tot de hoepels te vergemakkelijken en een betere manoeuvreerbaarheid tijdens het voortbewegen te bieden. De totale breedte is geoptimaliseerd en bedraagt ongeveer + 190 mm ten opzichte van de zitbreedte.



7

KENMERKEN

1

Modulaire rugleuning

- ▶ Snel en gemakkelijk te bevestigen en aan te passen aan individuele behoeften
- ▶ Er zijn drie soorten rugleuning beschikbaar op de geconfigureerde versie
- ▶ Nauwkeurig geschikt voor een reeks gebruikerspathologieën

2

Grote zitkanteling

- ▶ Max. kantelhoek van 25°
- ▶ Zorgt voor een goede herverdeling van drukpunten

7

Nieuw systeem voor breedteverstelling

- ▶ Standaard dubbel armsteunsysteem om de zitbreedte te vergroten met +50 mm (+25 mm per zijde)
- ▶ Eenvoudige aanpassing, zonder gereedschap en eenvoudig toegankelijk

3

In diepte verstelbare zitplaat

- ▶ Traploze diepteverstelling inclusief beensteunen (ladesysteem)

6

Dual Stability System

- ▶ Verbeterde stabiliteit in elke kantel- en ligpositie
- ▶ Rugleuning met een hoog draaipunt om afschuifkrachten te minimaliseren

5

Compact frame

- ▶ Eenvoudig manoeuvreren in de krapste ruimtes
- ▶ Geoptimaliseerd voor gebruik binnenshuis
- ▶ Anti-tippers voor maximale veiligheid

4

In hoek verstelbare beensteunen

- ▶ In breedte verstelbaar (+50 mm per zijde)
- ▶ De beensteun kan verhoogd worden voor comfort in een kantel- en/of ligpositie
- ▶ In hoogte en diepte verstelbare kuitsteunen
- ▶ In hoogte, diepte, hoek en breedte verstelbare voetplaat om de perfecte positie voor de voeten te vinden

Bijkomende kenmerken

- ▶ **Nieuwe armpad**
 - De smalle, volledig voorgevormde armpad uit één stuk biedt optimale elleboogondersteuning tijdens de kantel- en ligbewegingen.
 - Gemakkelijk schoon te maken om infectierisico's te voorkomen
- ▶ **Nieuw Laguna rugkussen**
 - Verbeterd comfort, onderdempeling en laterale ondersteuning



Overige opties

- Werkblad
- Kussen voor werkblad
- Afneembare abductie klos
- Pelotten
- Hemiplegische armsteun
- Kantelvergrendelingssysteem
- 85° beensteunpositie
- Hoofdsteunhoes
- Voetplaatafdekking
- Spaakbeschermers
- Kantelvergrendelingssysteem voor zitting en rugleuning

Technische gegevens ▼

Meer uitgebreide voorverkoop informatie over dit product, inclusief gebruikshandleiding, kunt u vinden op www.invacare.be.



Zitbreedte ▼



Zitdiepte ▼



Zithoogte ▼



Rughoogte ▼



Hoogte armleuningen ▼

Rea Clematis Pro

390 - 440 mm
440 - 490 mm
490 - 540 mm

430 - 500 mm

400 - 450 mm

570 mm -710 mm

230 - 350 mm




Onderbeenlengte ▼



Zithoek ▼



Rughoek ▼

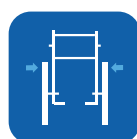

Totale breedte ▼



Totale hoogte ▼

Rea Clematis Pro

355 - 465 mm

0° - 25°

0° - 30°

Zitbreedte + 190 mm

1200 - 1550mm



Totale lengte incl. voetsteunen ▼



Totaal gewicht ▼



Max. gebruikersgewicht ▼



Transportgewicht ▼



Max. helling voor gebruik parkeerrem ▼

Rea Clematis Pro

995 mm - 1470 mm


Vanaf 30 kg

135kg

Vanaf 20 kg

7°

Frame kleur ▼

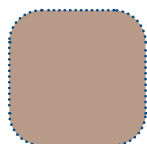

Pearl Beige



Black TR26



Dual Stability System

Bekleding ▼

Rea, Rea Design en DSS (Dual Stability System) design zijn geregistreerde handelsmerken van Invacare International. De Rea Clematis is ontworpen met DSS (Dual Stability System). Dit biedt de cliënt optimale stabiliteit en veiligheid wanneer de zitting gekanteld is of de rughoek is versteld.

Tel.: +32 (0)50 83 10 10
marketingbelgium@invacare.com
www.invacare.be

Invacare NV
Autobaan 22
8210 Loppem
België



Yes, you can.®

© 2020 Invacare International GmbH. Alle rechten voorbehouden. Alle informatie wordt juist geacht ten tijde van druk. Invacare behoudt zich het recht voor productspecificaties te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. Rea Clematis Pro - BE - 10/2020

