

**rea**<sup>®</sup>

# Clematis<sup>®</sup> Pro



Conforto superior | Múltiplos Ajustes | Design Compacto



# Uma evolução nas cadeiras de rodas passivas com basculação

A nossa nova Rea Clematis Pro foi desenvolvida para melhorar a experiência do utilizador e do cuidador. Com base na reconhecida Rea Clematis, a nova cadeira de rodas passiva engloba tudo o que era valorizado na Clematis, ao mesmo tempo que introduz novas características para garantir um soberbo nível de conforto, estabilidade e segurança.

## Conforto superior com o encosto modular

O sistema de encosto modular pode ser facilmente ajustado, desde um tipo de encosto de tecido soft ( com ou sem ajuste em tensão) até ao tradicional encosto com plataforma rígida. Isto permite um ajuste rápido e fácil, para responder a vários tipos de necessidades dos utilizadores. Ambos os encostos oferecem uma reclinção de 30°.



## DSS® (Dual Stability System)

DSS, a única tecnologia de compensação das alterações de peso, garante uma excelente estabilidade da cadeira de rodas, quando está basculada e reclinada. O assento bascula até 25° e foi desenhado para minimizar as forças de cisalhamento e melhorar a redistribuição da pressão.



## Design compacto

O design de chassis compacto oferece uma soberba manobrabilidade, especialmente em ambientes interiores. As rodas traseiras podem ser avançadas para permitir um melhor acesso ao aro motor, no caso dos utilizadores que apresentam competências para auto-propulsão



# 7

## CARACTERÍSTICAS

### 1 Encosto Modular

- ▶ Fácil e rápido de ajustar às necessidades do utilizador
- ▶ Três opções de encosto
- ▶ Posicionamento perfeito para uma vasta gama de patologias

### 2 Maior basculação do assento

- ▶ Basculação máxima de 25°
- ▶ Garante melhor redistribuição da pressão
- ▶ Reduz as forças de cisalhamento

### 7 Ajuste em Largura

- ▶ Permite ajustar a largura em 5cm através da peça de fixação dos apoios de braço
- ▶ Várias Opções de Almofada de Apoio de Braço

### 3 Placa de assento ajustável

- ▶ Ajustável em profundidade

### Dual Stability System

- ### 6
- ▶ Estabilidade melhorada em todas as posições de basculação e reclinção
  - ▶ Ponto de pivot elevado para minimizar forças de cisalhamento

### 4 Apoios de pernas com sistema de reclinção

- ▶ Permite que os apoios de pernas sejam elevados para conforto, quando a cadeira está em posição de basculação e/ou reclinção
- ▶ Suporte de gêmeos almofadados, ajustáveis em altura e profundidade
- ▶ Apoios de pés ajustáveis em altura, largura, profundidade e ângulo, para encontrar o posicionamento perfeito

### 5 Chassis compacto

- ▶ Fácil de manobrar nos espaços mais reduzidos
- ▶ Otimizada para uso interior
- ▶ Rodas anti-volteio para aumentar a segurança

### Características adicionais

- ▶ Almofada de encosto Laguna renovada
  - Conforto e suporte postural melhorados



### Gama de opções inclui:

- Tabuleiro
- Semi-tabuleiro almofadado e rebatível
- Almofada abdutora
- Suportes de tronco ajustáveis
- Apoio de braço para hemiplegia
- Mecanismo de bloqueio da basculação
- Posição dos apoios de pernas a 90°
- Capa para o encosto de cabeça
- Cobertura para apoios de pés
- Protetor de raios

## Dados Técnicos ▾

Para uma informação mais legível sobre este produto, incluindo o manual de utilizador, consulte por favor o site [www.invacare.pt](http://www.invacare.pt)




Largura do assento ▾



Profundidade do assento ▾



Altura do assento ▾

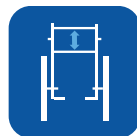

Altura do encosto ▾



Altura do apoio de braços ▾

### Rea Clematis Pro

390; 440; 490  
Ajustável +50mm  
através dos apoios  
de braço

430 - 500 mm

Roda 24":  
400-450 mm  
Roda 12":  
430-450 mm

570 mm -710 mm

230 - 350 mm



Comprimento dos apoios de pernas ▾



Basculação ▾



Ângulo do encosto ▾



Largura total ▾



Altura total ▾

### Rea Clematis Pro

355 - 465 mm

0° - 25°

0° - 30°

SW + 200 mm

1060mm - 1150mm



Comprimento total incluindo o apoio de pernas ▾



Peso total ▾



Peso max. utilizador ▾



Peso de transporte ▾



Inclinação máxima para uso do travão de parque ▾

### Rea Clematis Pro

Roda de 24"  
1060mm-1600mm  
Roda de 12"  
1040mm-1480mm


desde 30 kg

135kg

desde 20 kg

7°

## Cor do chassis ▾

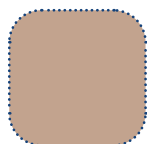

Bege Pérola



Preto TR26



Dual Stability System

## Estofado do assento ▾

Rea, Design Rea e tecnologia DSS (Dual Stability System) são marcas registadas da Invacare Internacional. Rea Clematis Pro é desenvolvida com sistema DSS que garante ao utilizador segurança e estabilidade reforçada quando a cadeira está basculada ou o encosto reclinado.

Tel.: 225 193 360  
[marketing.pt@invacare.com](mailto:marketing.pt@invacare.com)  
[www.invacare.pt](http://www.invacare.pt)

Invacare Portugal  
Rua da Estrada Velha, 949  
4465-784 Leça do Balio



Yes, you can.®

© 2020 Invacare International GmbH. Todos os direitos reservados. Toda a informação descrita é correta à data de impressão e publicação. A Invacare reserva-se no direito de alterar as especificações de produto sem aviso prévio. As informações apresentadas podem não estar totalmente associadas à configuração standard do produto. Rea Clematis Pro - PT - 08/ 2020

