

SB[®] 755



När bekvämlighet är viktigt



Yes, you can.

Kombinationen bekvämlighet för brukaren med lätthanterlighet, logistik och säkerhet gör *Invacare SB 755* idealisk för hem- och sjukhemsmiljöer. **SB 755** erbjuder maximal ligg- och sittkomfort genom att minimera friktionen då sängbotten tillsammans med ryggtillbakaföringen kan ställas in efter brukarens individuella behov. Genom den unika sängbottenuppbyggnaden kan **SB 755** även snabbt anpassas för extra långa brukare. Detta, tillsammans med ett stort urval av tillbehör ger många fördelar för både brukare och olika personalgrupper. **SB 755** uppfyller kraven i den nya sängstandarden IEC 60601-2-52 genom opartiska tester av TÜV.



Lätt att hantera

Nu kan vi även erbjuda en maskintvättbar **SB 755 WIP** vilket gör sängen ännu lättare att sköta. Montering och demontering görs enkelt utan verktyg på samtliga modeller av **SB 755**. Om modell **SB 755 D** väljs är sängen delbar och kan transporteras i delar på sänglyften, vilket förenklar transport och lagring. **SB 755 D** kan rullas direkt från bil och in till brukaren, och ingen del av sängen väger mer än 25 kg.



Säkerhet är nyckeln

Som alltid har Invacare säkerhet som nyckelord. Alla **SB 755**-modeller samt alla olika grindar uppfyller, och är opartiskt testade efter alla krav i sängstandarden IEC 60601-2-52. De integrerade sänggrindarna klarar alla en madrasshöjd på upp till 18 cm. Om ännu högre madrass, eller kombination av madrasser, används kan grindförhöjning + 15 cm användas, som klarar en total madrasshöjd på 33 cm.

Brukarens välbefinnande är vår ledstjärna

SB 755 har ett flertal funktioner för att säkra optimal sitt- och liggkomfort och kan levereras med aluminium eller trälattor i sängbotten. **SB 755** har en vidareutvecklad ryggtillbakaföring, som reducerar friktion och därmed risken för trycksår, optimerade längder på respektive del av sängbotten samt en bendel som går att sänka under och höja högt över horisontalplan, helt individuellt. Invacare strävar efter att uppfylla alla brukares behov och sängbotten är därför integrerat förlängningsbar upp till 10 cm i både huvud- och bendel för att möta långa brukares behov.

Egenskaper och Tillbehör



Ryggtillbakaföring

Ökad komfort för brukaren med mindre sjukrafter och friktion.



Optimerade längder

Ökad komfort för alla brukare med optimerade längder på sängbottens alla delar.



Förlängningsbar sängbotten

Kan förlängas med 10 cm i huvud- och bendel. Sängen förlängs enkelt med 5, 10, 15 eller 20 cm för att passa brukarens behov.

Egenskaper och Tillbehör



Sänggavel Olivia

Används tillsammans med trälångsida. Finns i ljus ek och bok.



Sänggavel Victoria

Borttagbar mittpanel. Finns i bok, ljus ek, körsbär och vitpigmenterad bok.



Sänggavel Sophie

Finns i bok, ljus ek, körsbär och vitpigmenterad bok. Finns även i sänkt version (90 cm).



Sänggavel Susanne

Finns i bok, ljus ek, körsbär och vitpigmenterad bok. Finns även i sänkt version (90 cm).

Enkel att förvara och transportera

Sängens delar, madrass och tillbehör kan lagras direkt på sänglyften genom specialkrokarna, vilket innebär att lagring och transport blir enklare. **SB 755 D** behöver begränsad lagringsyta på detta sätt.



Sänggavel Anita

Finns i bok, ljus ek och körsbär. Finns även i sänkt version (90 cm).




Sänggrind Britt V

Trägrind i standardlängd samt även förlängd, +10 samt +20 cm. För madrasshöjd upp till 18 cm. Finns i bok, ljus ek, körsbär och vitpigmenterad bok.



Sänggrind Line/Line förlängningsbar

Aluminiumgrind i standardlängd samt teleskopiskt förlängningsbar 200-220 cm. För madrasshöjd upp till 18 cm. Finns i bok, ljus ek, körsbär och vitpigmenterad bok.

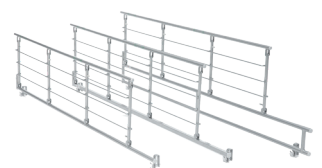

Sänggrind Scala 2

Fällbara metallgrindar i tre olika höjder för madrasshöjder på 15, 20 och 29 cm.



Trälångsida

Passar till sänggavel Victoria, Sophie, Susanne och Anita. Finns i bok, ljus ek, körsbär och vitpigmenterad bok.



Trälångsida

Passar till Olivia sänggavel. Kan användas tillsammans med metallgrind Scala 2 eller stöd-/vändhandtag. Finns i ljus ek och bok.



Grindskydd

Polstrat eller i nät som kan sitta kvar då grinden sänks. Grindskydd finns även till förlängda sänggrindar.



Grindförhöjning +15 cm

Monterbar förhöjningsribba som höjer sänggrinden med 15 cm. För madrasshöjd upp till 33 cm.

Egenskaper och Tillbehör



Olika manöverdosor

Standard manöverdosa eller Soft Control som båda har grön knapp för automatiskt sittläge.



Lyftbåge

Lyftbåge i två versioner, fast läge och svängbar. Handtaget kan anpassas både i höjd- och djupled.



Stödhandtag svängbart

Det svängbara stödhandtaget kan användas vid vändning i säng eller som extra hjälp vid urstigning från säng.



Centralbroms

Finns med hjulstorlek 80, 100, 125 och 150 mm.

För samtliga tillbehör och mer fördjupad information, vänligen se broschyren **Sängtillbehör**

Tekniska data

Ytterligare information om denna produkt och dess tillbehör, så som t.ex. manualer finns på vår hemsida, www.invacare.se

	Utvändig bredd Invändig bredd/rek madrassbredd	Utvändig längd Invändig längd	Sängbotten höjdställning	Sängbotten indelning	Frihöjd under sänglyft	Ryggstödsvinkel	Lårdelvinkel
SB 755	950 mm & 1000 mm 850 mm & 900 mm	2130 mm	Sängbottenhöjd 250-860 mm beroende på hjulalternativ	800 - 260 - 260 - 680 mm	150 mm	0 - 73°	0 - 28°
SB 755 XL	1150 mm	2080 mm					
1050 mm	1050 mm	Rek madrasslängd: 2000mm					
SB 755 XL	1300 mm						
1200 mm	1200 mm						

	Bendelsvinkel under horisontalplan	Bendelsvinkel över horisontalplan	Vinkel under/ över horisontalplan	Max brukarvikt	Tyngsta separata del	Kan maskintvättas	BARIATRIC SOLUTIONS
SB 755, SB 755 XL	0 - 16°	0 - 18°	under: 25° över: 14°	SWL 235 kg 200 kg	25 kg	200 kg (SB 755D)	Bariatric use

Ramfärg och träslag

Aluminiumgrå	Bok	Ljus ek	Vitpigmenterad bok	Körsbär

Väligen notera att färgerna kan variera något från de som visas till vänster.

Uppfyller kraven i IEC 60601-2-52

Viktigt! Sängen är avsedd för vuxna brukare som är minst 146 cm långa, som väger minst 40 kg och som har ett BMI-värde på minst 17.

Tel: +46 8 761 70 90
Fax: +46 8 761 81 08
sweden@invacare.com
www.invacare.se

Invacare AB
Box 66
163 91 Spånga



Yes, you can.®

