

VICAIR®

Vicair® rygge



Optimal trykflastning, støtte
og stabilitet



Vicair® rygge

Ved hjælp af flere hundrede små luftfyldte **SmartCells™** sørger Invacare **Vicair ryggen** for optimal trykaflastning, støtte og stabilitet til et bredt spekter af brugere. **Vicair ryggen** omfatter både **Vicair Multifunctional O2** og **Liberty**, som begge er vedligeholdelsesfrie og lette at anvende, og byder på en række spændende muligheder.

Unik teknologi

Invacare **Vicair ryggen** benytter sig af **Vicair Technology™**, en unik og innovativ metode til støtte af kroppen. Ryggen indeholder flere hundrede små trekantede luftceller med afrundede hjørner kaldet **SmartCells™**, der har en meget lav friktionsoverflade. Luftcellerne glider let mod hinanden og former sig efter kroppens konturer og danner en stor overflade. Resultatet er en optimal kombination af trykaflastning, komfortabel støtte og en stabil positionering.

Optimal siddestilling

Vicair ryggen giver god komfort, samtidig med at den giver øget stabilitet, bevægelsesfrihed og beskyttelse mod udvikling af fejlstillinger. Ryggen består af forskellige separate kamre fyldt med **SmartCells™**. Indholdet i alle kamrene på **Vicair Multifunctional O2** ryggen kan justeres og tilpasses den enkelte borger. **Vicair Liberty** ryggene er vedligeholdelsesfri og justerer sig selv automatisk ved hjælp af en lille ventil.



Rygtyper



Vicair Multifunctional O2 ryg

Vicair Multifunctional O2 er en specialtilpasset rygpude til komfortkørestole eller el-stole. Ryggen har 10 kamre fyldt med bløde **Smartcells**. Tilpasning sker ved at tilføje eller fjerne luftceller fra de enkelte kamre. **Vicair Multifunctional O2** er del af Vicair's vaskbare O2-serie, der sikrer, at pude inkl. betræk og celler, kan tåle at blive rengjort og vasket i en vaskemaskine ved 60 gr.



Vicair Liberty ryg

Vicair Liberty ryggen er fremstillet med 2 kamre fyldt med **SmartCells™** i et tyndt silikonelag. Cellerne glider derved let imod hinanden og danner en komfortabel let støtte og aflastning samt utrolig god komfort. **Vicair Liberty** former sig let og automatisk efter brugerens ryg, og er vedligeholdelsesfri. **Vicair Liberty** ryggen er blandt andet meget velegnet til brugere med ømme spinae (udspring på ryghvirvler).



Vicair Butterfly

Monteres enkelt på alle typer rygge, ikke kun på kørestole. Ryggen består af 3 kamre med små **SmartCells™** og giver øget stabilitet og justerbar støtte til nederste del af ryggen.

Montering



Montering af *Vicair Liberty* ryg

Vicair Liberty ryg monteres enkelt på de fleste kørestoles stroprygge ved hjælp af burrebånd. Leveres i sort strækbart betræk med dække af burrebåndene. På billederne ses **Vicair Liberty** ryggen forfra og bagfra. **Vicair Liberty** ryg leveres inklusiv sort og strækbart betræk.

Montering af *Vicair Multifunctional O2* ryg

Ryggen fås med sort, aftageligt og strækbart betræk, som umiddelbart kan hæftes på kørestolens stropryg eller på en fast ryg ved hjælp af burrebånd.

Tilbehør









Vicair Multifunctional siddepude

Vicair Multifunctional O2 siddepuden er opbygget som en **Vicair Adjuster O2** siddepude, men har dybere kamre bagtil, for optimal tilpasning til dybdejusterbare kørestole. Dette gøre puden optimal til anvendelse i Invacares komfortkørestole samt el-kørestole. Se særskilt brochure om **Vicair puder** på hjemmesiden.

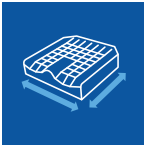
Tekniske data

For mere information om dette produkt henvises til www.invacare.dk. For oplysninger om anvendelse se venligst brugervejledningen, der kan downloades på www.invacare.dk.

	 Størrelser	 Vægt	 Max. brugervægt:	 Rengøring af betræk	 Rengøring af O2 puder inkl. Celler	
Vicair Multifunctional O2 ryg	370 x 540 400 x 540 450 x 540 500 x 540	1,25 kg	250 kg	90°	60°	
Vicair Butterfly	400 x 200 450 x 200 500 x 200	0,55 kg	120 kg	90°		
Vicair Liberty ryg	400 - 440 x 450 440 - 480 x 450	0,70 kg	150 kg	90°		

Betræk

Sort



Tlf.: 3690 0000
Fax: 3690 0001
denmark@invacare.com
www.invacare.dk

Invacare A/S
Sdr. Ringvej 37, 2605 Brøndby
Danmark


Yes, you can.®