



Kompas™

LICHTGEWICHT | COMPACT | HANDIG



De *Invacare Kompas* combineert de vrijheid van een elektrische rolstoel met het compacte ontwerp van een handbewogen rolstoel: ideaal voor mensen die een actieve en onafhankelijke levensstijl willen behouden, zonder in te leveren op ruimte of gemak. Als een van de lichtste en meest compacte opvouwbare elektrische rolstoelen op de markt, is de veelzijdige *Kompas* de perfect elektrisch aangedreven oplossing.

Gemakkelijk op te vouwen en compact

Dankzij een uitgelezen ontwerp, kan de *Kompas* snel en gemakkelijk worden opgevouwen met minimale moeite. De elektrische rolstoel heeft ingeklapt een indrukwekkend kleine voetafdruk, vergelijkbaar met de grootte van een handbewogen, opvouwbaar rolstoel.

Dit compacte formaat, in combinatie met de mogelijkheid om opgevouwen rechtop te staan, maakt de *Kompas* ideaal voor opslag in krappe ruimtes zoals onder de trap of tussen meubels.



Extreem lichtgewicht en transporteerbaar

Met een gewicht van minder dan 21 kg* is de *Kompas* de meest compacte en lichtgewicht elektrische rolstoel binnen Invacare's uitgebreide portfolio.

Geoptimaliseerd voor gebruiksgemak, kan de rolstoel moeiteloos worden opgetild, bijvoorbeeld om ergens in huis te plaatsen of om in de kofferbak van een auto te vervoeren.



Veelzijdig, handig en leuk!

Of het nu is voor thuisgebruik, alledaagse uitstapjes of spannende dagtochten, met de zeer wendbare *Invacare Kompas* kun je gemakkelijk elektrisch rijden met een snelheid van max. 6,4 km/u en een bereik van max. 11 of optioneel 18 km.



* Gewicht zonder accu.

5

BELANGRIJKSTE KENMERKEN

1

Volledig verstelbaar

- ▶ In hoogte verstelbare rugleuning biedt extra ondersteuning en comfort voor langere gebruikers.
- ▶ Opklapbare anti-slip voetplaat heeft 3 hoogte-instellingen voor extra gemak.



2

Verwijderbare lithium-ion accu

- ▶ Luchtvaart goedgekeurde, verwijderbare 11,4 Ah accu met accuniveau-indicator, dus mee te nemen in het vliegtuig.
- ▶ In tegenstelling tot veel andere opvouwbare rolstoelen, is het niet nodig de accu te verwijderen voor het opvouwen.



5

Lichtgewicht frame

- ▶ Met een indrukwekkend framegewicht van minder dan 21 kg, kan de compacte **Kompas** moeiteloos worden opgetild en gedragen.



3

Eénstaps vouwmechanisme

- ▶ Op- en uitvouwen gaat eenvoudig en moeiteloos.
- ▶ Compacte afmetingen van 590 x 370 x 810 mm (opgevouwen).



4

Anti-kiep wielen

- ▶ Voorkomen achterover kantelen van de rolstoel bij het oprijden van een stoep of helling. Bij opgevouwen rolstoel zorgen de wielen voor extra stabiliteit tijdens opslag.

Aanvullende kenmerken

▶ Duurzame besturing

- Hoge kwaliteitsbesturing geeft de resterende acculading aan en maakt een soepele rit mogelijk door zeer eenvoudige, intuïtieve bediening.

▶ Intelligent remsysteem

- Voorkomt automatisch onbedoeld weggrollen, waardoor de elektrische rolstoel effectief op zijn plaats wordt vergrendeld.

▶ Luchtbanden achter

- Zorgen voor een comfortabele reis en zijn geschikt voor gebruik buitenshuis.

▶ Opbergmand

- Een verwijderbare nylon mand onder de stoel kan worden gebruikt voor vervoer van kleine spullen.

▶ Vrijloophendels

- Eenvoudig te bedienen vrijloophendels om de motoren los te koppelen voor handbewogen transport, zodat de rolstoel gemakkelijk te duwen is.








▶ Optionele 17,1 Ah lithium-ion accu

- Grotere accu als accessoire verkrijgbaar om rijafstand te vergroten tot 18km.

Technische gegevens ▼

Raadpleeg de Invacare website voor meer informatie over dit product.


							
	Zitbreedte ▼	Zitdiepte ▼	Zithoogte ▼	Afmetingen opgevouwen ▼	Totale breedte ▼	Totale lengte ▼	Totale hoogte ▼
Kompas	460mm	420mm	520mm	590 x 370 x 810mm	590mm	970mm	950-1000mm

							
	Totaal gewicht ▼	Max. gebruikersgewicht ▼	Accu-capaciteit ▼	Accu-gewicht ▼	Motor-vermogen ▼	Draaicirkel ▼	Max. klimbare obstakel-hoogte ▼
Kompas	20,9 kg zonder accu	115kg	24 Volt / 11,4 Ah lithium-ion accu	2,1kg	DC24V,70 Watt	825mm	30mm

					
	Max. veilige hellingshoek ▼	Max. rijbereik ▼	Max. snelheid ▼	Bandenmaat ▼	Maat voorwielen ▼
Kompas	6°	11 km ¹	6,4 km/h	8" lucht	7" PU

1. Gemeten volgens ISO 7176-4:2008 met 6,4 km/u en 11,4 Ah accu. Actieradius kan variëren bij configuratie (afmeting accu, snelheid). Max. rijbereik 18 km met 17,1 Ah accu.

Framekleur ▼

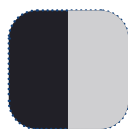

Zwart & grijs

Bekleding ▼



Zwart

Tel.: +32 (0)50 83 10 10
 marketingbelgium@invacare.com
 www.invacare.be

Invacare NV
 Autobaan 22
 8210 Loppem
 België



Yes, you can.®



© 2020 Invacare International GmbH. Alle rechten voorbehouden. Alle informatie is correct tijdens de druk van deze brochure. Invacare behoudt zich het recht voor om specificaties te wijzigen zonder voor aankondiging.
 Kompas - 04/2021