

Kite[®]



En unik hybrid

LINX[®]



Invacare Kite är en unik hybrid då det kommer till prestanda, körkomfort, kompakthet och individuell tillpassning. Denna kompakta och unika elrullstol är designad för den som ställer höga krav och idealisk vid såväl inomhus- som utomhusbruk. Den finns i en mängd färgkombinationer vilket gör den attraktiv för många användare. Dual Swing Technology™ (D.S.T.™), ett fjädringssystem som garanterar överlägsen körkomfort och framkomlighet. Nya länkhjul finns som tillval för att ytterligare förbättra komforten då man är ute och i synnerhet i ojämn terräng.

- **Patenterad Dual Swing Technology™ (D.S.T.™)**
- **Konfigurerbar och anpassningsbar**
- **Överlägsna köregenskaper**
- **Simply Smart LiNX kontrollsystem**

Konfigurerbar för varje brukare

Kite levereras med en mängd tekniska lösningar och kan konfigureras exakt efter varje användares enskilda behov. Välj mellan 7 olika färger på kåporna, i kombination med 2 olika ramfärger och 3 olika färger på fälgarna för att göra din elrullstol mer personlig. Anpassa elrullstolen efter användningsområde och intresse med stora batterier för längre körsträcka, eller 4-pole motorer och en 120A elektronik i de fall det krävs.



Upplev Kite-prestandan

Kite är en unik hybrid i form av prestanda, körkomfort och smidighet. Dual Swing Technology™ (D.S.T.™), stora hjul och ett exceptionellt kompakt chassi möjliggör förstklassig utomhusprestanda vid vardagliga aktiviteter. Lägg till ytterligare en dimension till Kite och välj till **G-Trac®** för att öka körförmåga och säkerhet.

Oslagbar körkomfort

Kite står med den allra senaste tekniken, inklusive SSD-motorer, **G-Trac** och fjädringssystemet Dual Swing Technology™ (D.S.T.™) som ger en enastående jämn och bekväm åktur. Med de nya länkhjulen som tillval uppgraderas komforten ytterligare, då de absorberar stötar och minskar vibrationer på ett utmärkt sätt.



Simply Smart LiNX kontrollsystem: Redefining Mobility

Invacare LiNX är vårt senaste användarvänliga kontrollsystem, som lär sig över tid och på så sätt erbjuder en banbrytande körupplevelse för varje individ. Detta moduluppbyggda kontrollsystem expanderas smidigt för att följa med in i framtiden och kan skräddarsys för varje enskild användare om så krävs. Simply Smart teknologin möjliggör att servicetekniker kan ansluta till kontrollsystemet via Bluetooth, vilket i sin tur möjliggör programmering och uppdateringar, såväl som felsökning och diagnos i realtid.



Modern pekskärmsteknologi

Manöverboxen REM400 har en imponerande 3,5" pekskärm i färg som kräver minimal kraft att använda. Denna interaktiva manöverbox kan konfigureras för att anpassas till användarens fysiska och kognitiva förmåga.



Alternativa styrningar

För dem som inte kan använda sig av manöverenheterna som är standard, finns ett brett urval av alternativa styrningar framtaget till LiNX, allt för att underlätta kontroll och oberoende. Joystick Compact, Low Force, Extremity, hakstyrningsbox eller en vårdarstyrningsbox finns bland annat i urvalet.

Egenskaper och Tillbehör

USB-ladduttag

2 x USB 2.0 portar ger upp till 1A vilket hjälper till att enheterna behåller sin batterikapacitet längre. Kan monteras i sidoskenan för att enklare nås.



LiNX G-Trac® teknologi

G-Trac ger elrullstolen unik riktningstabilitet och förbättrade köregenskaper



Sitslyft och CoG Tilt

Sitslyft med lyftomfång på 30 cm möjliggör social kontakt i ögonhöjd samtidigt som även räckvidden ökar. Tilten ger förutsättningar till ökad komfort och fullgod tryckavlastning.



Modulite™ sitsssystem

Grunden består av en teleskoperande sitsram inkl monteringskena som möjliggör enkel placering av armstöd och tillbehör.



Invacare **Matrix**® ryggsystem

Ryggsystemet **Matrix**® kan kombineras med Modulite sitsssystem för att ge optimalt posturalt stöd och positionering.



Max-sits

Vid behov så finns en sits som möjliggör en sittbredd på 550mm.



Dual Swing Technology (D.S.T.)®

DST verkar både vertikalt och horisontellt. Den möjliggör både oberoende och kombinerade rörelser. DST ökar greppet för att ge en komfortabel åktur.



Kompakt

Trots det smala chassit med en hjulbas på 600 mm, kan Kite utrustas med stora batterier på upp till 73Ah, vilket är ovanligt i denna klass. Den kompakta storleken gör Kite till en smidig elrullstol.



Dual Swing Technology (D.S.T.)®

Den mest väsentliga delen av DST är pendelaxeln, som arbetar dubbelt med den centrala stötdämparen, vilket ger en suverän komfort.



Stor bredd av färgval

Gör din elrullstol mer personlig med ett urval av 7 olika färger på kåporna, 2 olika färger på ramen och 3 olika färger på fälgarna.



Servicevänlig

Lyft bara den bakre kåpan, haka av elektroniken och dra lätt ut batterierna – det kan inte bli enklare.



LED-belysning

LED-lampor med starkt, klart sken.



10" länkhjul

Med de robusta länkhjulen övervinns hinder med lätthet och skänker en komfortabel åktur. Fälgarna finns i 3 olika färgval

Endast i kombination med singel- länkhjulsgaffel

Tekniska data

Ytterligare information om denna produkt och dess tillbehör, så som t.ex. manualer finns på vår hemsida, www.invacare.se

	Sittbredd	Sittdjup	Sitthöjd	Ryggstödhöjd	Intervall armstödhöjd	Sitsvinkel	Vikt
Fast sitsplatta	440 - 480 mm ¹	410 - 510 mm	440, 460, 480, 500 mm ³	480 mm ³	275 - 390 mm	0 - 20°	125 kg ⁹
Modulite™	380 - 530 mm ²	410 - 510 mm	460, 480, 500 mm ³	480, 540 eller 560 - 660 mm ^{3,6}	245 - 360 mm or 230 - 360 mm	0 - 20° / 0 - 30° ⁵	126 kg ⁹
Max-sits	560 - 600 mm	510 - 580 mm	460, 480, 500 mm ³	630 mm ^{3,14}	290 - 360 mm	0 - 12° / 0 - 20° / 0 - 28° ⁵	127 kg ⁹

	Underbenslängd	Intervall ryggstöds vinkel	Hjulbas	Totalhöjd	Längd inkl. benstöd	Längd exkl. benstöd	Max brukarvikt
Invacare Kite	290 - 470 mm ^{3,4}	90° - 120°	595 mm ⁷	max. 1170 mm ⁸	max. 1140 mm ⁸	max. 870 mm ⁸	136 / 160 kg ¹⁰

	Batterikapacitet	Vändutrymme	Max hindertagning	Max säker lutning	Motoreffekt	Körsträcka	Hastighet
Invacare Kite	60 Ah / 73 Ah	ca. 1600 mm	60 mm ¹¹	10° / 18% ¹²	2 x 250 W / 2 x 340 W ¹⁰	upp till 39 km ¹³	6 / 10 km/h



matrix
SEATING SERIES


Invacare **Modulite™**




- Sittdyna 430 mm
- Ytterligare 50 mm med armstöden
- mätt från golv till sitsplatta utan sittdyna
- Beroende på olika varianter av benstöd så kan underbenslängden skilja sig från en typ till annan.
- Med COG-tilt, alternativt sitslyft med integrerad tiltmodul
- Beroende på ryggstödstyp
- Totalbredd kan variera beroende på version av länkhjul och länkhjulsgaffel
- Beroende på sitsens position
- Varierar beroende på konfiguration
- HD-utförande
- 100 mm med kantklättrare
- Säker körning på lutande underlag beror på stolens konfiguration, för mer information se bruksanvisning
- 60 / 73 Ah batterier, 6 km/h standard ca. 31 km / 39 km
60 / 73 Ah batterier, 10 km/h standard ca. 34 km / 39 km
60 / 73 Ah batterier, 6 km/h HD-utförande ca. 27 km / 35 km
60 / 73 Ah batterier, 10 km/h HD-utförande ca. 25 km / 31 km
- Ytterligare 100 mm höjjustering
- Invacare **Modulite™** är krosskompatibel med stora delar av Invacares sortiment av elrullstolar samt delvis med Invacare Rea®-sortimentet.

Varumärket LINX och logotyper är registrerade varumärken och ägs av Dynamic Controls och all användning av Invacare sker med licens.


Kåpans färg

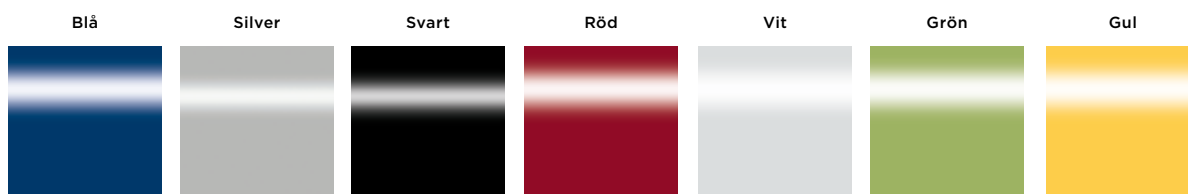

Ramfärg

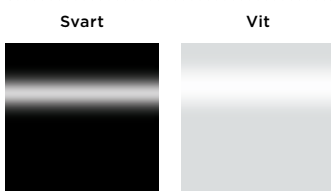

Fälgfärg

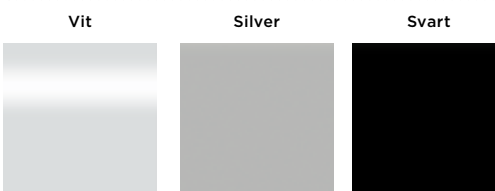

Skanna koden och få tillgång till LINX hemsida.

Kundservice: 08-761 70 90
Fax 08-761 81 08
sweden@invacare.com
www.invacare.se

Invacare AB
Box 66 - 163 91 Spånga
Sweden

