

Leo[®]

Säkerheten är nyckelordet



Yes, you can.

Njut av omgivningen med din kompakta scooter, lugnt och säkert

Invacare Leo är en scooter designad för dem som värdesätter oberoende och ökade möjligheter till utomhusliv. Säkerheten är nyckelordet för Leo och trots scooterns stilrena och sportiga design har säkerheten inte påverkats. Leo erbjuder användaren frihet och oberoende och att kunna få njuta av dagliga utomhusvistelser eller nöjestripes. Med hög standard på design och säkerhet, erbjuder Leo tveklöst en ny standard på marknaden.



För en säker och kraftfull körning

- Invacare Leo erbjuder en lugn åktur med en scooter som är enkel att kontrollera och manövrera. För en säkrare åktur har den intelligenta belysningen blinkers som stängs av automatiskt samt bromsljus bak. Belysningen är designad så att om en glödlampa går sönder, så lyser fortfarande de andra obehindrat. Som tillägg till den synliga batteriindikeringen, blir användaren även påmind av en ljudsignal (beep) då batterierna behöver laddas.

Kompakt och lättillgänglig

- Leo är en kompakt minis scooter som man lätt kan ta isär vid transport. Tack vare att scootern är så lättmanövrerad, är det inga problem att köra i trånga utrymmen, i affärer, på museum eller i shoppingcenter. Tillgängligheten till batterier och elektronik vid underhåll eller service är mycket enkel på Leo då endast en del behöver flyttas. Detta enkla system underlättar även då man vill ta ur batterierna.

Pålitlig

- Du kan alltid lita på att Leo tar dig dit du önskar. Allt från en tripp till affären till en tur i parken. Leo är pålitlig och rejäl tack vare elektroniken och motorns höga kvalitet. Dessa vitala komponenter är väl skyddade mot korrosionsangrepp och vatten. Frikopplingspaken regleras i 2 steg, detta för att motverka att stolen ofrivilligt skall hamna i ett frikopplat läge.



Egenskaper och Tillbehör




Justering av styret

Användaren kan enkelt justera styret utifrån sitt behov.



Bromsljus

Bromsljus bak, uppmärksammar omgivningen på att scootern saktar in.

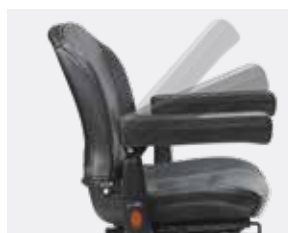

Komfortabel sits

Svängbar sits samt glidskenor, underlättar för att nå ett optimalt sittande.



2-steps
frikopplingsspak

Denna egenskap förhindrar att scootern blir ofrivilligt frikopplad.



Inbyggda stänksydd

Skyddar elektronik och drivenhet från smuts och väta.



Isärtagbar i fem delar

Inga verktyg behövs för att ta isär Invacare Leo.



Kryck & käpphållare

Håller kryckan eller käppen stabilt under körning.



Låsbar låda

Låsbar låda för montering fram, där personliga ägodelar kan förvaras.



Bälte

Underlättar för att sitta bra positionerad i sitsen.



Backspegel

Kan monteras på höger alternativt vänster sida.



Förvaringsöverdrag

Håller scootern ren och torr.




Alternativ laddning

Man kan enkelt ta ur batterierna och ladda dem "off board" om så önska.



Fjädringsmodul

Skänker extra komfort under åkturen.

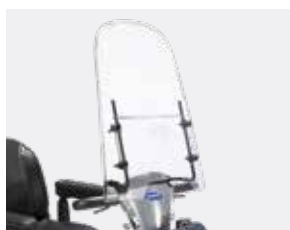

















Vindruta

Skyddar mot vind.

Tekniska data

Ytterligare information om denna produkt och dess tillbehör, så som t.ex. manualer finns på vår hemsida, www.invacare.se

| | | | |
|---|---|---|--|
|  |  |  |  |
| Sittbredd ▼ | Sittdjup ▼ | Sitthöjd ▼ | Ryggstödhöjd ▼ |
| 3-hjulig | 410 mm | 460 - 560 mm | 475 mm |
| 4-hjulig | 410 mm | 460 - 560 mm | 475 mm |
|  |  |  |  |
| Hjulbas ▼ | Totallängd ▼ | Vikt ▼ | Max brukarvikt ▼ |
| 3-hjulig | 1200 mm | 54 kg (exkl. batterier) 78 kg (inkl. batterier) | 136 kg |
| 4-hjulig | 1220 mm | 59 kg (exkl. batterier) 83 kg (inkl. batterier) | 136 kg |
|  |  |  |  |
| Batterikapacitet ▼ | Vändutrymme ▼ | Max hindertagning ▼ | Markfrigång ▼ |
| 3-hjulig | 2320 mm | 60 mm | 70 mm |
| 4-hjulig | 2620 mm | 60 mm | 70 mm |
|  |  |  |  |
| Max säker lutning ▼ | Motoreffekt ▼ | Körsträcka ▼ | Hastighet ▼ |
| 3-hjulig | 240 W | 36 km | 8 km/h |
| 4-hjulig | 240 W | 38 km | 8 km/h |

Färg kåpor



Silvergrå



Onyxblå



Röd

Klädsel



Svart vinyl

1. Sitsen maximalt skjuten bakåt.

Kundservice: 08-761 70 90
 Fax 08-761 81 08
sweden@invacare.com
www.invacare.se

Invacare AB
 Box 66 - 163 91 Spånga
 Sweden



Yes, you can.



© 2021 Invacare International Sarl Alla rättigheter är reserverade för Invacare. Invacare reserverar sig för eventuella ändringar gjorda efter tryck. All information är korrekt vid tiden för tryckning. Leo - SE - 10/2021