

NordBed™ Optimo Bred



ERGOMOVE™ TEKNOLOGI | HØJ BRUGERVÆGT |
OPTIMERET SELVHJÆLP



Nordbed Optimo Bred - plejesengen med ekstra komfort til tunge borgere. Nordbed Optimo - den ideelle seng til hjemmeplejen og plejehjem. Nordbed Optimo Bred tilbyder ekseptionel høj komfort og den understøtter og opbygger borgerens mulighed for selvhjælp samt øger mobiliteten. Nordbed Optimo's nye **ErgoMove teknologi** sætter forebyggelse, pleje- og behandling af tryksår i centrum.

Nordbed Optimo Bred tilbyder mere plads til tungere borgere, som derved, på en komfortabel måde, sættes bedre i stand til, ved egen hjælp, at repositionere sig i sengen. Nordbed Optimo Bred tilbydes med SWL på hhv 235 kg for 105 cm brede senge og 285 kg for 120 cm brede senge.

ErgoMove teknologi

Nordbed Optimo Bred leveres med indbygget ErgoMove teknologi, der komfortabelt bringer borgeren, fra en liggende position, til en **aktivt siddende position** og tilbage til horizontal position, blot ved tryk på 1 enkelt tast. Når borgeren er placeret, korrekt på liggefladen, sikrer ErgoMove teknologien, i samspil med en effektiv ryglænstilbageføring, at borgerens bækken bevares stabilt og korrekt positioneret, mens sengens liggeflade indstilles - nedadglidning forebygges og **tryk, shear og friktionskræfter reduceres**.

ErgoMove teknologien forenkler positionering af borgeren og reducerer behovet for ekstra personale og den aktive siddestilling understøtter borgerens mulighed for at spise, drikke og læse ved egen hjælp.

✓ PATENT PENDING



Enkel håndtering

Nordbed Optimo Bred er både enkel at håndtere og transportere.

Nordbed Optimo 105 cm bred, adskilles nemt i 5 dele og plejesengen kan derfor nemt transporteres selv i trange omgivelser.

Nordbed Optimo 120 cm bred, adskilles i 3 dele.

Montering og af-montering af Nordbed Optimo sker enkelt og intuitivt. **Delene placeres på understellet** for forenklet transport mellem bil og bopæl.

Nordbed Optimo leveres med vaskbar elektronik der **tåler vask i vaskemaskine** med henblik på optimal hygiejne og arbejdsvilkår.



Selvhjælp, mobilitet og forebyggelse af fald

Op-og-Ud funktion

► **Optimo** plejesengen leveres med en forprogrammeret "Op-og-Ud" funktion. Denne funktion indstiller automatisk ryglænet og højden på liggefladen og forenkler således udstigning for borgeren. På denne måde optimeres borgerens mobilitet og mulighed for selvhjælp og uafhængighed.

Design

► **Nordbed Optimo** leveres i moderne design. Afhængig af, blandt andet personlig behov og smag, kan Optimo plejesengen leveres med flere forskellige design for gavle, fodender og sider.

4

UNIKKE EGENSKABER

1

ErgoMove teknologi

- Den unikke Ergomove teknologi bringer borgeren til en komfortabel siddeposition og tilbage til horisontal position, uden at borgeren glider nedad i løbet af processen og der er derfor ikke behov for repositionering.
- Minimerer risiko for shear

3

Op og Ud funktion

- sikker og enkel forflytning
- understøtter et ergonomiske bevægelsesmønster

2

Enkel håndtering

- Enkel på- og afmontering
- Maskinvaskbar elektronik forenkler rengøringen

4

Optimal inddeling af liggefladen

- i overensstemmelse med antropometriske statistikker

Egenskaber

► Personlig profil:

- Programmerbar med LCD håndbetjening (option)
- Personlig indstilling af Ergomove og udstigningshøjde

► Integreret forlængelse af liggefladen

- + 10 cm i både hoved- og benende

► Anti Trendelenburg og som option Trendelenburg

- Støtte til plejepersonale i forbindelse med repositionering af borgeren
- Letter redistribuering af tryk

► Nat belysning (option)

- Nem at betjene
- Øger sikkerheden og forebygger fald



- ▶ Mest anvendte taster har let genkendelige farver. Farverne er udvalgt i samarbejde med eksperter
- ▶ Med henblik på at forenkle valget af den ønskede funktion tændes der lys over tasterne, når blot en tast aktiveres.
- ▶ Mest anvendte taster er placeret øverst på håndbetjeningen og indstillingstasterne nederst
- ▶ Håndbetjeningen er som standard låsbar

Håndbetjening ▲

Tydelige farver

Farverne er enkle at kende fra hinanden - til støtte for især svagt seende borgere

Tekniske data ▼


Ved behov for yderligere information om produktet henvises til brugermanualen som kan hentes på Invacares hjemmeside www.invacare.dk




Udvendig bredde
Indvendig bredde



Udvendig længde
Indvendig længde

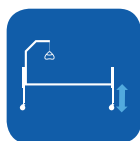

Højdeindstilling

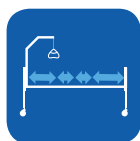

Mål på
liggefladdede ▼



Frihøjde ▼



Lårvinkel ▼

**NordBed Optimo
Bred 105**

115 / 105 cm

213 / 200 cm

32 - 81 cm

80-17-30-65 cm

15°

49°

**NordBed Optimo
Bred 120**

130 / 120 cm

213 / 200 cm

32 - 81 cm

80-17-30-65 cm

15°

49°



Benstøtteløft ▼



Anti-
Trendelenburg /
Trendelenburg ▼



Max.
brugervægt ▼



Total vægt ▼



Produktets
tungeste del ▼



Dokumenteret
maskinvaskbar

**NordBed Optimo
Bred 105**

19°

+/- 15°

200 kg

110 kg

25 kg

Yes

**NordBed Optimo
Bred 120**

19°

+/- 15°

250 kg

130 kg

70 kg


Yes

NB: Plejesengen må ikke anvendes af børn under 12 år eller af patienter, hvis kropsstørrelse svarer til en normal 12 årig, eller mindre.



Stelfarve ▼

Træfarve ▼

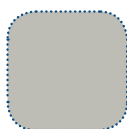

Aluminium grå



Bøg



Eg



Rødbrun



Bøg/lys blå



Lys blå



Hvid

Tlf.: 3690 0000
Fax: 3690 0001
denmark@invacare.com
www.invacare.dk

Invacare A/S
Sdr. Ringvej 37, 2605 Brøndby
Denmark



Yes, you can.®

© 2019 Invacare International Sàrl. All rights reserved. All information er ved trykningstidspunktet korrekt. Invacare forbeholder sig retten til at foretage konstruktionsændringer uden forudgående varsel. NordBed Optimo Wide - DK - 05/2019